



26254


Compresa Pooh

Juego de funda con compresa



©Disney
www.disney.com

Guía Rápida

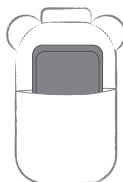

ENFRÍA bolsa de gel

Congelador: Congelar por al menos 60 min antes de usar.

CALIENTA bolsa de gel


Microondas: Calentar por 10 segundos. En caso de ser necesario, volver a calentar en intervalos de 10 segundos hasta alcanzar la temperatura deseada.

Apaga inmediatamente el microondas si el gel comienza a hincharse.

Estufa: Calentar agua en una estufa, hasta que el agua esté a punto de hervir, apagar la estufa y colocar el paquete de gel por 30 segundos. No meter el paquete mientras el agua esté hirviendo o con la estufa encendida. Secar antes de meter en la funda.

USA

- Introduce la bolsa de gel dentro de la funda de Pooh.
- Coloca sobre la zona afectada.
- Puedes utilizar la funda de Pooh con compresas de agua.

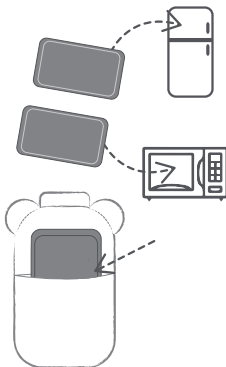

RECOMENDACIONES

- Probar al tacto la temperatura de la compresa antes de colocarla sobre la piel.
- Si la aplicación de la compresa con frío o calor llega a ser incómoda, retirar el producto por unos minutos y después volver a aplicar.

ADVERTENCIAS

- No perforar la bolsa. Si la bolsa se rompe y el líquido tiene contacto con piel u ojos, lavar con agua inmediatamente y consultar a un médico.
- Nocivo para la salud si se ingiere. Si la solución es ingerida, beber varios vasos con agua y consultar a un médico inmediatamente.
- No dejar al alcance de los niños, ni mascotas y no mezclar con materiales combustibles.
- El producto no es un medicamento y no debe ser utilizado para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades, Betterware no se responsabiliza del uso diferente al sugerido o en personas sensibles a los componentes del producto, por lo que recomendamos probar antes de su uso y suspender la aplicación ante cualquier eventualidad.

HECHO EN CHINA PARA BETTERWARE DE MÉXICO Importado por: Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350 R.F.C. BME9501252P0.

COLOMBIA: Importado por: Betterware Colombia S.A.S. NIT: 902009502-9.

ECUADOR: Importado por: Betterware Ecuador S.A.S. RUC: 1793223373001 Av. Mariana de Jesús, No. 179, Pichincha, Quito, Iñaquito, Ecuador.