

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Tomcat Tiger -lasten kolmipyörä

Tiger Trike on näppärä apu lasten pyöräilyyn. Pyörän polkimet on asennettu lähelle toisiaan, jotta polkeminen on mahdollista myös hyvin pienelle lapselle. Pyörää voi ohjata ohjaustangon lisäksi takaosan työntöaisasta. Työntöaisassa on myös automaattinen jarru, joka helpottaa avustamista.

Pyörässä on tukevat vartalon-, lantion- ja pääntuet. Jalkaosassa on remmeillä kiinnitettävät säärinuki ja jalkaterän tuki. Tiger Trike -pyörää on saatavilla 12" ja 14" renkailla.



Käyttäjän maksimipaino	48 kg
Käyttäjän minimipituus	75 cm

Malli	12"	14"
Pyörän pituus kahvan kanssa	130 cm	130 cm
Pituus ilman kahvaa	97 cm	97 cm
Pyörän leveys	62 cm	66 cm
Korkeus max	95 cm	98 cm
Pyörän paino	19 kg	19 kg

Tiger Trike -pyörä on varustettu avustusaisalla, jolla avustaja voi ohjata ja hallita pyörää ajon aikana. Avustusaisassa on myös jarru nopeuden hallitsemiseksi. Jarrun rakenteen ansiosta riittää, että avustaja pitää otteen kahvasta, jolloin jarru hidastaa pyörää tarvittaessa.

Myöhemmin, pyöräilyn alkaessa sujua, voidaan pyörän avustusaisa irrottaa ja korvata karkuremmillä. Karkuremmi kiinnitetään pyörässä olevaan vipuun, joka on yhteydessä pyörän jarruihin. Pyörä jarruttaa karkuremmistä vedettäessä.

Työntöaisan jarru

Työntöaisan jarrua käytetään kääntämällä kahvaa taaksepäin. Jarru toimii myös automaattisesti pyöräilijän kiihdyttäessä.



Seisontajarru

Kytke seisontajarru vetämällä kuvan jarrukahvasta taaksepäin ja painamalla musta nappi alas.


Kuvaan on myös ympyröity vaihtoehtona käytettävän karkuremmen kiinnityspaikka.



Käyttöönotto


Säätituki ja jalkaterän tuki

Säätituet kiristetään lukollisilla remmeillä. Jalkaterän tuessa on tarrakiinnitys. Löysää jalkaterän tukea ja avaa säätituen remmien lukot. Aseta lapsen jalka polkimelle ja kiristä ensin jalkaterän tuen remmit. Kiristä lopuksi säätituen remmit.

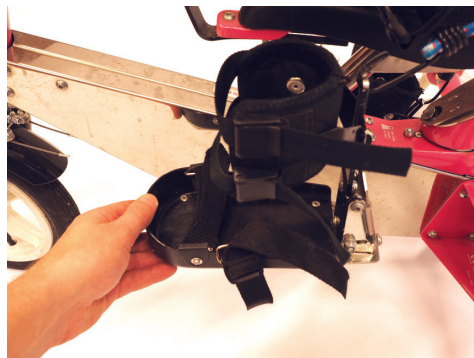

Niskatuki

Niskatuessa on kolme niveltä joilla säädetään tuelle sopiva etäisyys ja kulma. Avaa sormiruuvit ja aseta niskatuki sopivaan asentoon. Kiristä ruuvit.

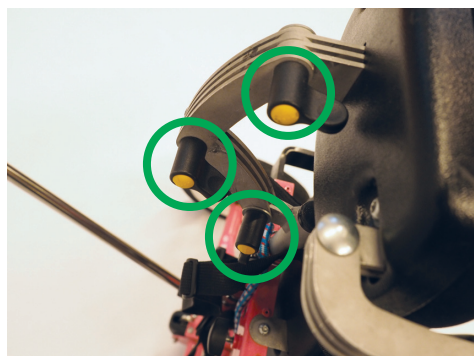


Pääntuet

Pääntuissa on kaksi työkaluin säädettävää niveltä. Tarvitset 10mm:n lenkkiavaimen. Löysää kuvaan merkityt pultit ja säädä tuki sopivaan kohtaan. Kiristä pultit.




Vartalogukien leveys

Vartalogukien leveyttä säädetään avaamalla kuvaan merkitty sormiruuvi. Säädä sopiva leveys ja kiristä ruuvi.

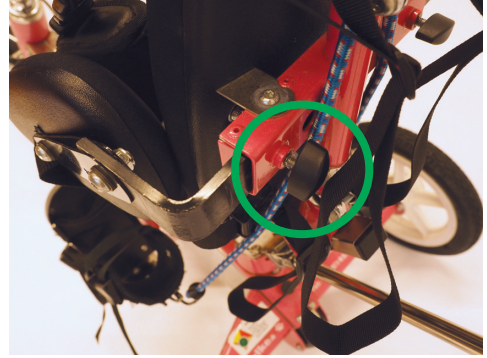

Vartalogukien kulmasäädöt

Avaa kuvaan merkityt pultit säätääksesi vartalogukien kulmaa. Tarvitset 5mm kuusiokoloavaimen sekä 13mm lenkkiavaimen. Säädä sopiva kulma ja kiristä pultti.

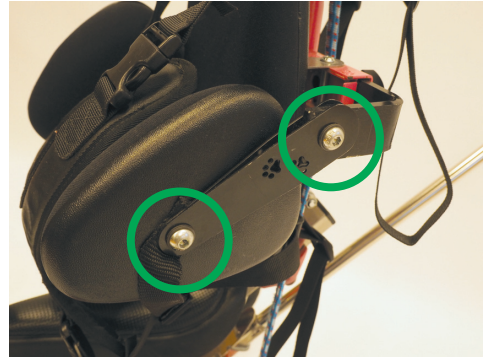

Turvavyö ja nelipistevyö

Nelipistevyö ja turvavyö kiinnitetään pistolukoilla. Kiristä hihnat huolellisesti.



Pyöräilijän jarru

Pyöräilijälle on ohjaustangossa käsijarru. Polkimissa ei ole jalkajarrua, mutta polkimien kiinteään rakenteeseen vuoksi, vauhdin hidastaminen niillä on mahdollista.



Työntöaisan asentaminen

Aseta työntöaisan päässä oleva reikä pyörän takaosassa olevaan tappiin ylhäältäpäin. Vedä työntöaisaa hieman pyörästä pois päin. Paina peukalolla aisassa olevaa nappia ja käännä aisaa hieman alaspäin. Aisa lukittuu paikoilleen kun päästät napin ylös.

Tarkista, että työntöaisassa olevasta reiästä on hieman näkyvissä tapin vieressä. Aisa on tällöin hyvin paikallaan.

