

USER MANUAL

Bedside rail


Product code: GripTim



1. Characteristics

Bedside rail is made of durable, powder coated steel. It has height adjustable legs, foam handle, strap for securing to the bed and a small pocket.

The set includes: middle frame parts (2 pcs), lower-frame with strap, legs with tips (2 pcs), bag, middle frame connector, locking clips (2 pcs), upper frame with handle.

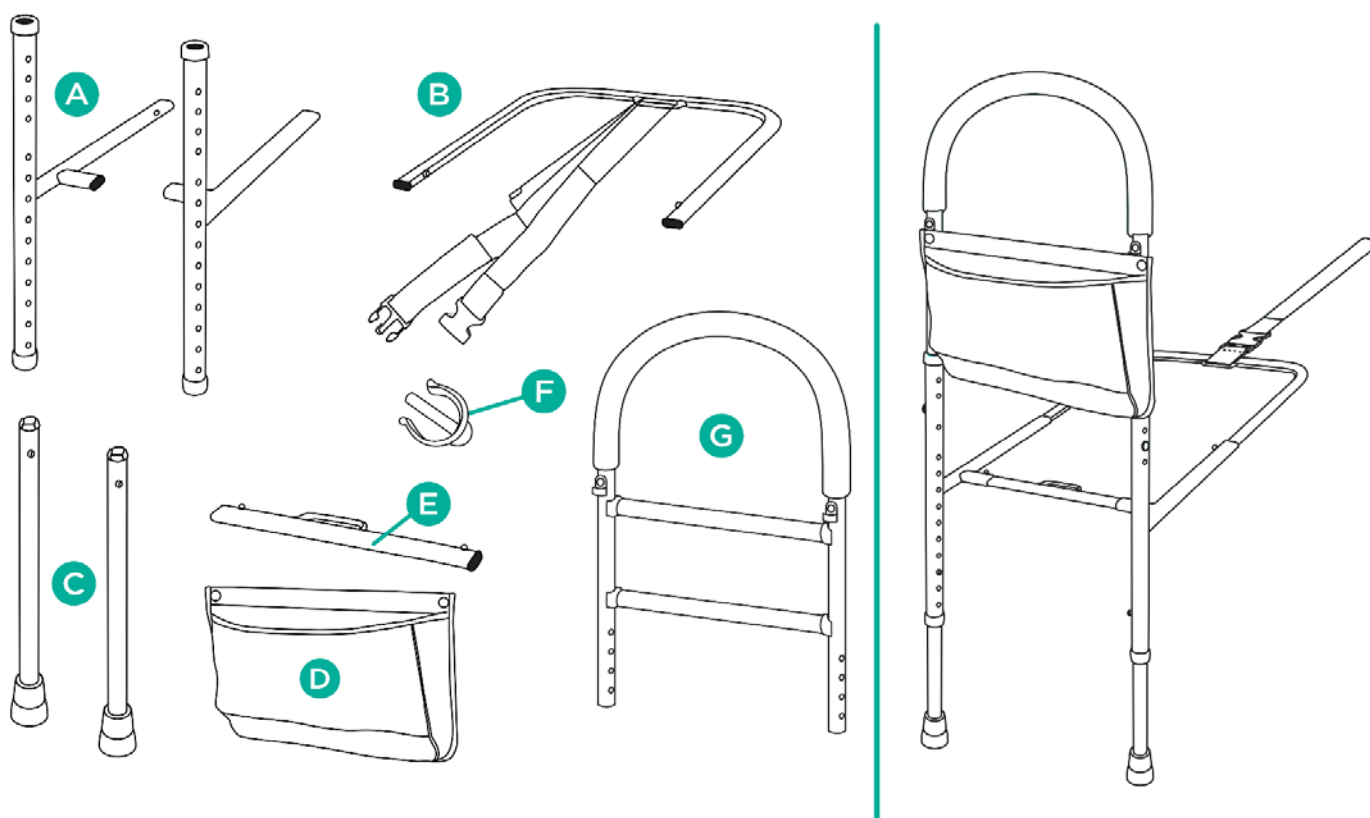

Elements of the rail:

- A. Middle-frame parts with height adjustment
- B. Lower-frame with securing strap
- C. Legs with rubber tips
- D. Bag
- E. Middle-frame connector
- F. Locking pin for handle height adjustment
- G. Upper-frame with foam handle

2. Application

The bedside rail is designed to provide additional support for standing up or switching from laying to sitting position in bed. The rail is recommended for

people with reduced mobility which hinders the unassisted performance of daily living activities. The bedrail rail is recommended for use both during care in medical facilities and at home.

3. Assembly


Step 1. Connect middle-frame parts (A) with middle frame connector (E) using locking pins.

Step 2. Connect lower-frame (B) with middle-frame (A) using locking pins.

Step 3. Mount legs (C) into bottom openings of middle-frame parts (A) using locking pins. Both legs should be set on the same height level.

Step 4. Mount upper-frame (G) into top openings of the middle frame (A) and secure them with locking clips (F) on the both sides. Make sure they're on the same height level.

Step 5. Secure bedrail to bed frame and tighten the strap (picture 1).

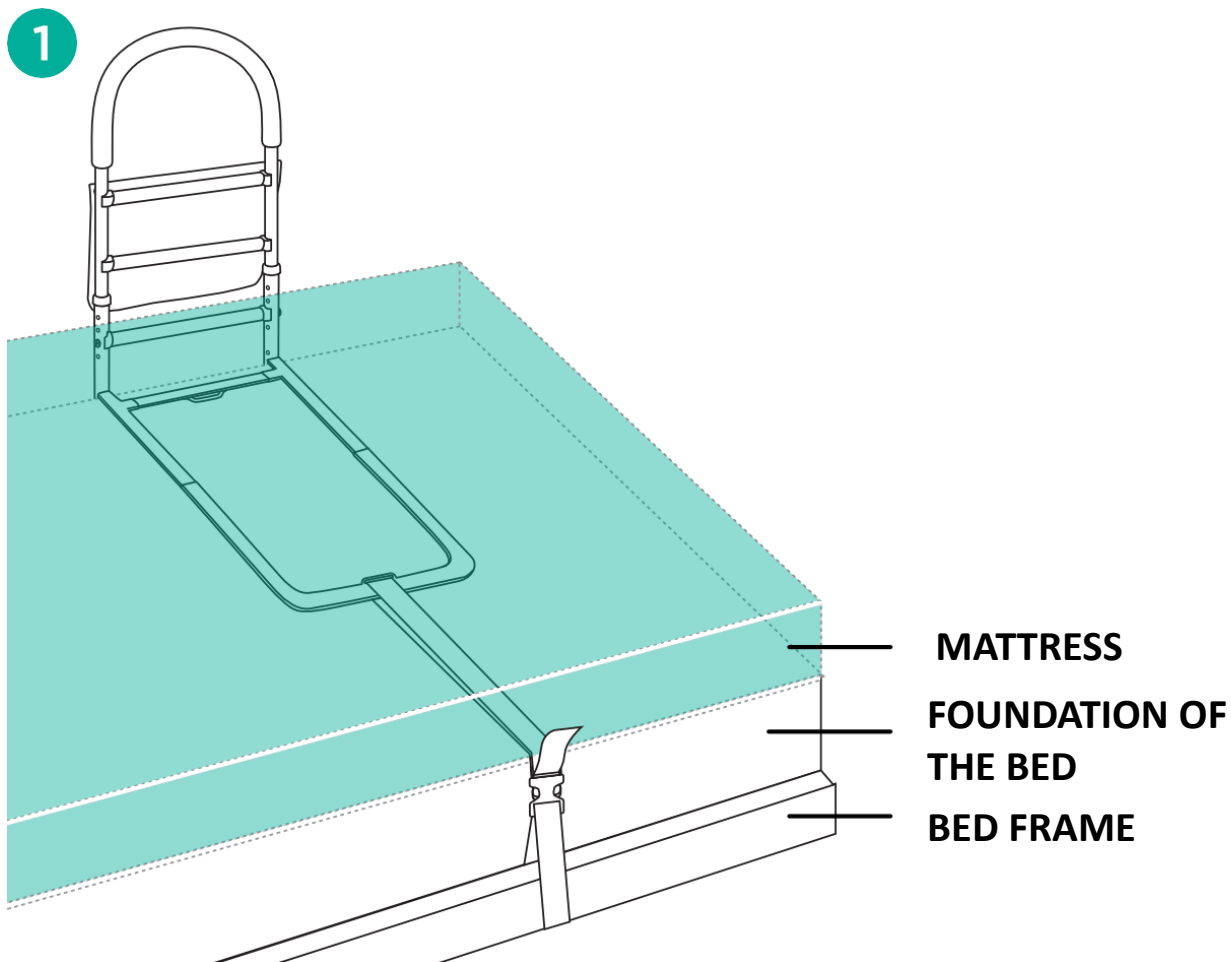

Step 6. Make sure that both legs are touching ground. If they aren't, adjust height of the legs using locking pins.

Step 7. Mount the bag under handle on upper-frame (G) using clips attached to bag.

Bedside rail is ready to use.

HEIGHT ADJUSTMENT FOR HANDLES AND LEGS

- To adjust handle, take out locking clips on both sides and adjust height according to needs. Secure it with clips afterwards. Handle needs to be on the same height level on both sides.
- To adjust legs, press locking pins located on legs and select appropriate height. Both legs needs to be on the same height level.

4. Technical data

Overall height adjustment	89,5-112 cm
Overall width	37 cm
Overall depth	74 cm
Height adjustment for handle*	52-60 cm
Strap length	192 cm
Lower-frame height from the ground	30-55 cm
Max. weight capacity	136 kg

** measured from lower-frame up to handle*

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Maintenance

Clean the frame and bag regularly using damp cloth, without use of ingredients. Dry thoroughly. Difficult stains on the bag can be cleaned with sponge.

7. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: **www.timago.com**. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Poręcz przyłóżkowa


Kod produktu: GripTim

TiMago

1. Wykonanie

Poręcz przyłóżkowa jest wykonana z wytrzymałej stali malowanej proszkowo. Posiada regulację wysokości nóg oraz piankowego uchwytu, pasek mocowania do łóżka i małą torbę.

Zestaw zawiera: środkowe części ramy (2 szt.), dolną ramę z paskiem, nóżki z nasadkami (2 pcs), torbę, łącznik środkowej ramy, klips blokujący (2 szt.), górną ramę z uchwytem.

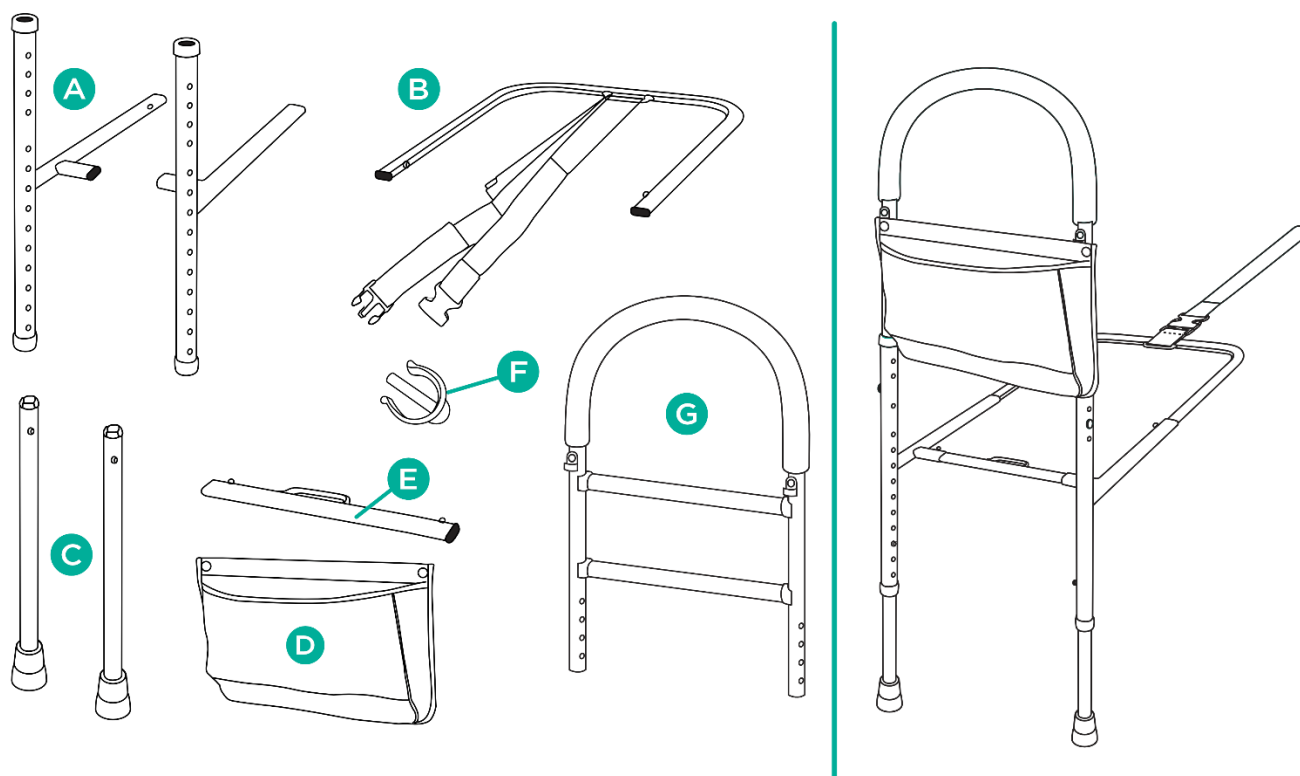

Elementy poręczy:

- | | |
|--|--|
| A. Środkowe części ramy z regulacją wysokości | D. Torba |
| B. Dolna rama z paskiem mocującym | E. Łącznik środkowej ramy |
| C. Nóżki z gumowymi nasadkami | F. Klips blokujący do regulacji wysokości uchwytu |
| | G. Górna rama z piankowym uchwytem |

2. Zastosowanie

Poręcz przyłóżkowa jest przeznaczona do używania przy łóżku pacjenta, zapewniając wsparcie podczas wstawania lub zmiany pozycji z leżącej na siedzącą. Polecana jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź

utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Poręcz przeznaczona jest do stosowania zarówno podczas opieki w placówkach medycznych jak i w warunkach domowych.

3. Montaż


Krok 1. Połączyć części środkowej ramy (A) z łącznikiem (E) za pomocą pinów blokujących.

Krok 2. Połączyć dolną ramę (B) ze środkową ramą (A) za pomocą pinów blokujących.

Krok 3. Zamontować nóżki (C) wkładając je w dolne otwory montażowe środkowej ramy (A) i ustawić odpowiednią wysokość. Następnie zabezpieczyć za pomocą pinów blokujących. Upewnić się, że obie nóżki ustawione są na tej samej wysokości.

Krok 4. Zamontować górną ramę (G) w górne otwory montażowe środkowej ramy (A) i ustawić odpowiednią wysokość. Następnie zabezpieczyć za pomocą klipsów blokujących. Upewnić się, że obie tuby górnej ramy ustawione są na tej samej wysokości.

Krok 5. Zamontować poręcz za pomocą paska mocującego do ramy łóżka (zdjęcie 1).

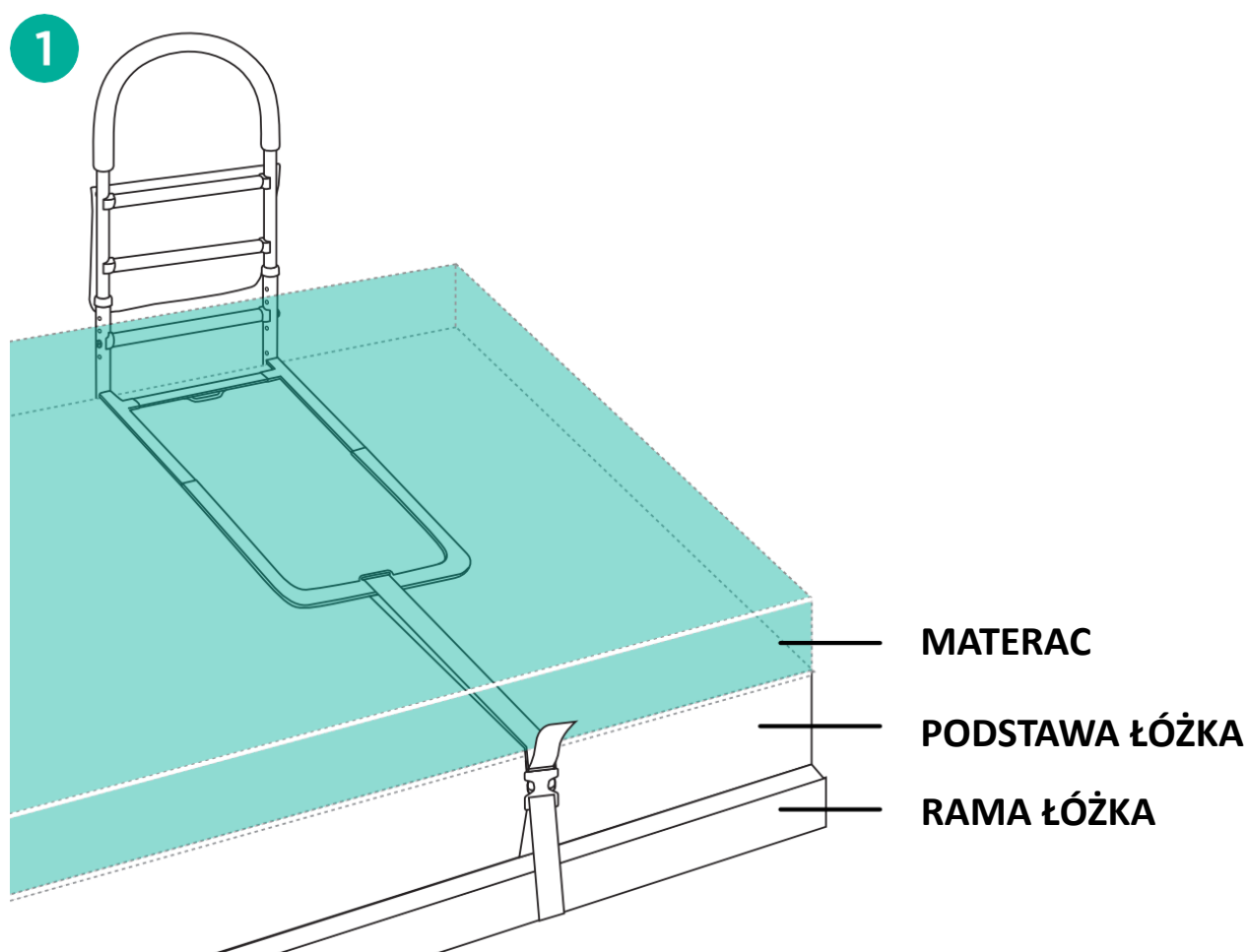

Krok 6. Upewnić się, że obie nóżki dotykają podłogi. Jeśli nie, wyregulować wysokość nóżek za pomocą pinów blokujących.

Krok 7. Zamontować torbę pod uchwytem na górnej ramie (G) za pomocą klipsów.

REGULACJA WYSOKOŚCI UCHWYTU I NÓŻEK

- Aby wyregulować wysokość uchwytu należy wyciągnąć klips blokujący, wybrać odpowiednią wysokość, a następnie zablokować położenie. Uchwyt musi być ustawiony na tym samym poziomie z obu stron.
- Aby wyregulować wysokość nóżek należy wcisnąć pin blokujący, wybrać odpowiednią wysokość nóżek, a następnie zablokować położenie pinem. Obie nóżki muszą być ustawione na tym samym poziomie.

4. Specyfikacja techniczna

Całkowita regulacja wysokości	89,5-112 cm
Szerokość całkowita	37 cm
Głębokość całkowita	74 cm
Regulacja wysokości uchwytu*	52-60 cm
Długość paska	192 cm
Wysokość dolnej ramy od podłoża	30-55 cm
Maks. obciążenie	136 kg

**liczone od dolnej ramy do uchwytu*

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Ramę i torbę należy czyścić regularnie używając zmoczonej szmatki, bez środków czyszczących. Dokładnie wysuszyć przed użyciem. Trudne plamy na torbie można wyczyścić za pomocą gąbki.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci. Pozostaw do wyschnięcia.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**. Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



03/2025 (I)