


# Środek do czyszczenia uszu

Elektryczny środek do czyszczenia uszu z systemem nawadniania

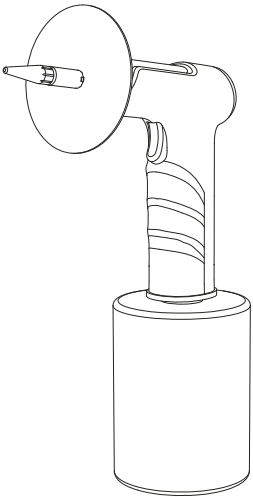


instrukcja obsługi

## Funkcje przycisków

- 1. Włączanie**  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1-2 sekund aż diody LED zaczną migać.
- 2. Wyłączanie**  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1-2 sekund, aż diody LED zgasną.
- 3. Przycisk przełączania natrysku**  
Krótkie naciśnięcie powoduje rozpoczęcie/wsztrzymanie strumienia wody.
- 4. Oszczędzanie energii**  
Urządzenie do czyszczenia uszu ma funkcję oszczędzania energii przez 10 minut. Wyłącza się automatycznie, jeśli przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna czynność.

## Sygnalizacja świetlna i opis przekładni

Oczyszczacz uszu ma domyślnie tryb normalny. Krótkie naciśnięcie przycisku przełącznika, aby wybrać tryb zgodnie z wymaganiami.

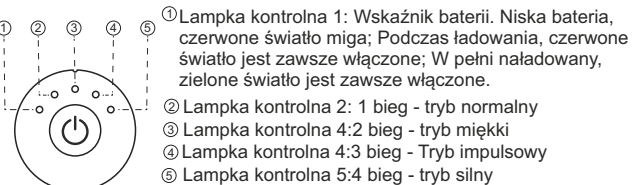

Tryb normalny: Umiarkowane ciśnienie wody, odpowiednie dla większości ludzi.  
Tryb miękki: średnie ciśnienie wody, skutecznie głębokie czyszczenie.  
Tryb impulsowy: Naprzemienny silny i słaby przepływ wody, inny czyste uczucia.  
Silny tryb: Silne ciśnienie wody, wykorzystać najtrudniejsze narastający wosk uszny.

**Wskazówki:**  
Zakres 4 poziomów ciśnienia wody wynosi od 7do 24,5 PSI.

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję w całości i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

## Pomocne wskazówki

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje, ostrzeżenia i wskazówki przed użyciem. Niewłaściwe użycie może spowodować poważne osobiste szkody i utratę mienia.
  - 1. Urządzenie nie jest wodoodporne, prosimy nie czyścić całości maszyną.
  - 2. Nie do góry nogami w przeciwnym razie woda dostanie się do urządzenia i może ją uszkodzić.
  - 3. Nie używaj tego produktu, jeśli masz infekcję ucha, dziurę w błonie bębenkowej, wyciek krwi z uszu lub jakiegokolwiek rodzaj urazu ucha. Jeśli poczujesz ból natychmiast przestań używać tego produktu i skonsultuj się z lekarzem.
  - 4. Odczuwanie ucisku, ale nie bólu, jest zjawiskiem normalnym. Jeśli poczujesz ból natychmiast przestań używać tego produktu i jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem.
  - 5. Dzieci lub osoby niepełnosprawne powinny używać tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej lub opiekuna.
  - 6. Ten produkt nie jest zabawką, proszę przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  - 7. Ten produkt jest wyposażony w baterię. Trzymaj go z dala od ognia, wilgoci i wysokiej temperatury. Może eksplodować w wyniku przegrzania.
  - 8. Jeśli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas przechowuj go w suchym miejscu.
  - 9. Upewnij się, że do ładowania tego produktu podłączony jest odpowiedni zasilacz DC5V.
  - 10. Nie stosować roztworu chłodniejszego niż temperatura ciała, może to spowodować zawroty głowy. Zalecana jest ciepła woda (nie powinna być zbyt gorąca, aby nie powodowała bólu).
  - 11. Nie zmieniaj ani nie modyfikuj produktu ani nie demontuj urządzenia wewnętrznego, może to spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.
  - 12. Nie klasyfikuj go jako odpadu domowego. Jeśli nie będziesz już używać tego produktu, należy go zutylizować w ramach procesów recyklingu do lokalnej stacji recyklingu sprzętu elektronicznego.
- Wskazówki:**  
Wszystkie obrazy w instrukcji mają być wyłącznie charakter poglądowy. Mogą występować różnice między rzeczywistym produktem a obrazami ze względu na aktualizacje. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem

## Kroki do użycia:


- Krok 1:**  
Stosuj ciepłą wodę o temperaturze ciała lub 37°C+2°C
- Krok 2:**  
Załącz jednorazową końcówkę douszną.
- Krok 3:**  
Umieść miskę pod uchem w celu nawadniania.
- Krok 4:**  
Poruszaj się płynnie, okrężnie, aby zwiększyć efekt czyszczenia.
- Krok 5:**  
Blokada zniknęła i zakończono irygację uszu.

## Przed użyciem

- 1. To normalne, że w produkcie (butelce na wodę, rurce wodnej itp.) znajdują się resztki wody destylowanej użytej do testowania wydajności).
- 2. Przy pierwszym użyciu zaleca się użycie trybu 1. biegu. Pozostałe tryby należy wybrać w zależności od potrzeb.
- 3. Zaleca się zmiękczenie ciężkiej lub twardej woskowiny przed nawadnianiem.

## Zamontuj płytkę blokującą wodę

Zamocować w dół wzdłuż wylotu wody

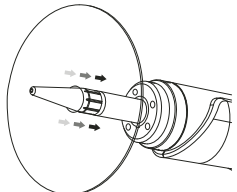


**Końcówki douszne**  
Miękka końcówka douszna jest higieniczna i można ją zdjąć, co ułatwia wymianę.

**Zainstaluj końcówkę douszną**  
Załącz jednorazową końcówkę na koniec dyszy i dokręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


## Wskazówki:

- 1. Nie używaj produktów podczas ładowania.
- 2. Ładuj urządzenie do czyszczenia uszu w środowisku o temperaturze od 15 do 35 °C.
- 3. Czas pracy może się skrócić w przypadku ładowania w środowisku o niskiej temperaturze (<15°C).
- 4. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt niska (<5°C), ładowanie może nie być możliwe.

## Elektryczny środek do czyszczenia uszu

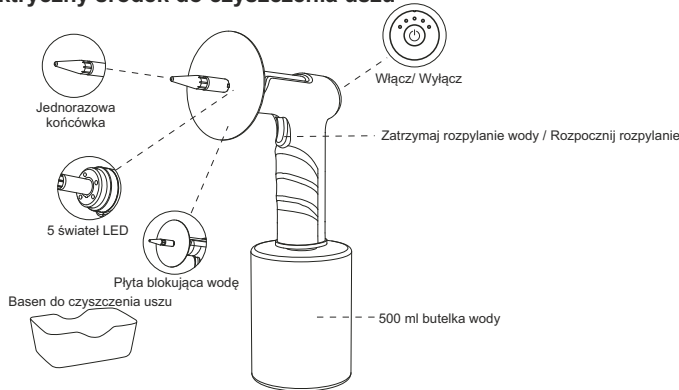

## Basen do czyszczenia uszu

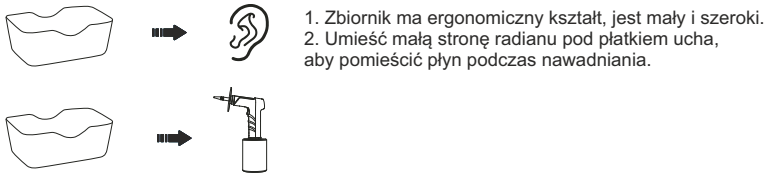


- 1. Zbiornik ma ergonomiczny kształt, jest mały i szeroki.
- 2. Umieść małą stronę radianu pod płatką ucha, aby pomieścić płyn podczas nawadniania.

## Wskazówki:

- 1. Jest to jednorazowa końcówka douszna. Zużyte końcówki douszne należy wyrzucić zalecane w przypadku infekcji ucha.
- 2. Aby kupić dodatkowe jednorazowe miękkie wkładki douszne, odwiedź naszą stronę [www.benetechch.eu](http://www.benetechch.eu)

## Napełnij ciepłą wodą


Wymij z opakowania butelkę na wodę wielokrotnego użytku, dodaj ciepłą wodę 500 ml i zakręć ją na rządzeniu do czyszczenia uszu.

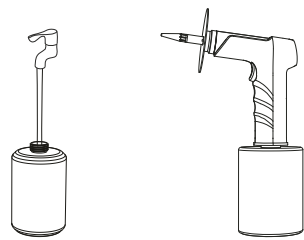

- Wskazówki:**
1. Zalecana jest ciepła woda.
  2. Może mieć temperaturę ciała lub 37 stopni celcjusza, plus minus 2 stopnie ( nie powinna być wystarczająco ciepła, aby Cię zranić).
  3. Nie wstrzykiwaj substancji chemicznych takich jak ciała stałe, które mogłyby zablokować lub uszkodzić urządzenie do czyszczenia uszu.

Przy pierwszym użyciu należy naładować urządzenie do czyszczenia uszu. Wyłącz środek do czyszczenia uszu przed naładowaniem.  
Upewnij się, że urządzenie do czyszczenia uszu i Twoje ręce są suche, aby podłączyć kabel typu C w zestawie do urządzenia do czyszczenia uszu i podłączyć je do portu ładowania USB 5V DC.  
Pełne naładowanie trwa 4 godziny. Wskaźnik Strong/ CH będzie migać podczas ładowania i będzie świecił po całkowitym naładowaniu.  
Wskaźnik LED Strong/ CH zacznie migać, wskazując że poziom naładowania baterii jest niski. Naładuj urządzenie.

**Instrukcja ładowania**

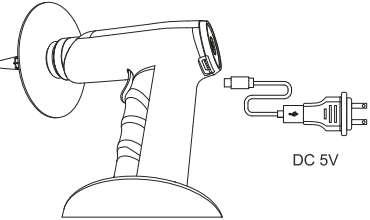

**Specyfikacja**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Pojemność baterii | 2000mAh     |
| Moc               | 1.3W        |
| Wejście           | Typ-C 5V/1A |
| Czas ładowania    | 3 godziny   |
| Czas pracy        | 7 godzin    |
| Butelka wody      | 500ml       |
| Waga netto        | 280g        |



**Rozwiązywanie problemów**

1. Jeśli urządzenie do czyszczenia uszu nie włącza się, naładuj je w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii.
2. Jeśli czas pracy urządzenia do czyszczenia uszu po pełnym naładowaniu jest krótki, należy go naładować i używać w temperaturze otoczenia od 15 do 35 °C, lub czas ładowania jest niewystarczający, naładuj go.
3. Jeśli diody LED nie działają podczas ładowania, sprawdź czy zasilacz jest prawidłowo podłączony.
4. Jeśli ciśnienie wody jest zbyt niskie, wymień nową końcówkę douszną w przypadku zablokowania lub uszkodzenia lub wybierz silniejszy tryb w zależności od potrzeb.


**Konserwacja:**

1. W trybie wyłączenia wyjmij butelkę z wodą i wylej resztę wody.
2. Włącz urządzenie do czyszczenia uszu, aby spuścić pozostałą wodę z urządzenia i dysza.
3. Zdejmij końcówkę douszną i wyrzuć ją.
4. Produkt czyść wilgotną bawełnianą szmatką. Żadnego czystego należy stosować roztwory lub żrące ciecze.

**Pakiet wliczony w cenę**

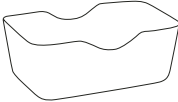
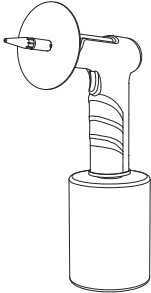


Miska z zaczepem na ucho

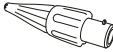

Elektryczny system irygacji uszu x1

Końcówki z pięcioma otworami x1

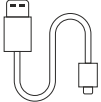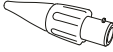

Jednorazowe ucho

Kabel USB typu C x1

Instrukcja obsługi x1

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:  
Benetech Polska sp. z o.o.  
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska  
tel: 535 979 739; strona: benetech.eu

Wyprodukowano w Chinach

