

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Fold Down Shower Seat

MODEL: LY010

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fold Down Shower Seat

MODEL: LY001



NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Cautions

- 1: Please confirm whether the wall is a load-bearing pond before drilling;
- 2: Before drilling, please confirm whether there is a water pipe at the hole position;
- 3: Check whether the product accessories are complete before installation;
- 4: Make sure the drill bit is 8.5mm in size.
- 5: Make sure the hole depth is 6.5cm
- 6: The recommended height between the seat and ground is about 40-48cm.

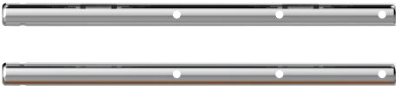Part List			
NO	Name	Pictures	QTY.
1	Main Body		3
2	Decorative cover		2
3	The load-bearing stick		2
4	Mounting plate		2
5	Countersunk screw M6*8		6+2
6	Nylon Bolt Cap		10+2
7	Screw ST8*70mm		10+2


8	Mounting Hole Guiding Sticker		1
9	Drill Bit φ 8.5*150		1
Tip: “+” is extra spare parts.			

Model	LY010
Specification（inch）	20*14
Max. Load (lbs/kg)	440/200

INSTALLATION


STEP1:

Arrange the planks in order, insert the load-bearing sticks into the planks and fix them with countersunk screws.

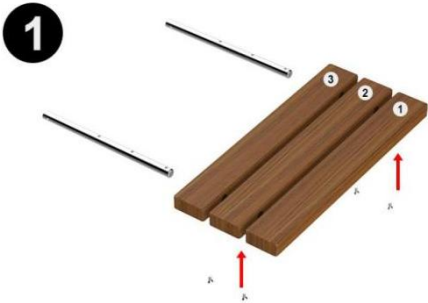

STEP2:


Measure the distance and attach the locator card to the wall.

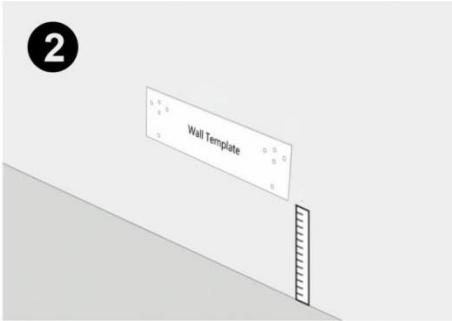

STEP3:

Drill holes in the marked points of the locator card.

(Drill bit is 8.5mm, punching depth is 65mm)

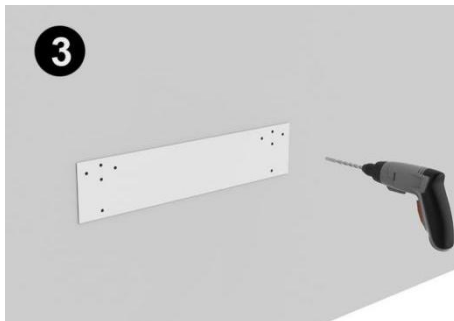


STEP4:

Insert the expansion bolt so that it is flush with the wall.



STEP5:


Align the holes and tighten the screws.

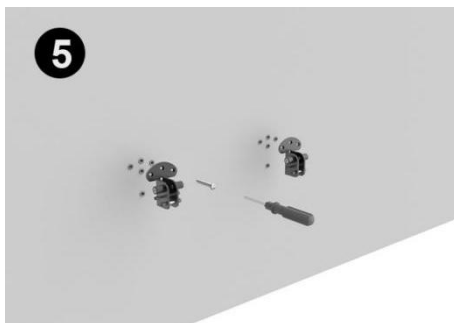

STEP6:

Place the decorative cover on the load-bearing stick; latch.


6

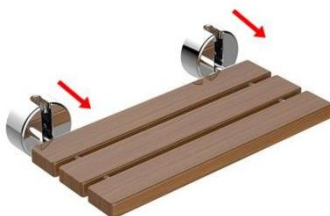

STEP7:

Link the assembled body to the mounting plate and insert the pin.

7

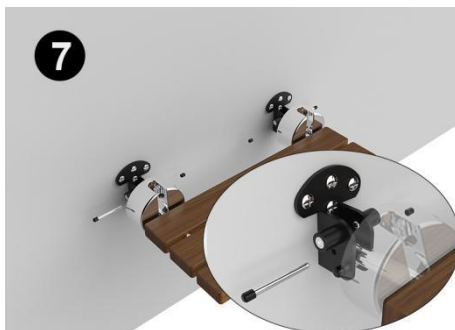

STEP8:

Fasten the decorative cover, and the installation is complete.

8



Folding Scheme



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Siège de douche rabattable

MODÈLE : LY010

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Siège de douche rabattable

MODÈLE : LY001



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Précautions

- 1 : Veuillez confirmer si le mur est un bassin porteur avant de percer ;
- 2 : Avant de percer, veuillez confirmer s'il y a une conduite d'eau à l'emplacement du trou ;
- 3 : Vérifiez si les accessoires du produit sont complets avant l'installation ;
- 4 : Assurez-vous que le foret mesure 8,5 mm.
- 5 : Assurez-vous que la profondeur du trou est de 6,5 cm
- 6 : La hauteur recommandée entre le siège et le sol est d'environ 40 à 48 cm.

Liste des pièces			
NON	Nom	Des photos	QTÉ.
1	Corps principal		3
2	Couverture décorative		2
3	Le porteur bâton		2
4	Plaque de montage		2
5	Vis à tête fraisée M6*8		6+2
6	Capuchon de boulon en nylon		10+2
7	Vis ST8*70mm		10+2


8	Trou de montage Autocollant de guidage		1
9	Foret φ8,5*150		1
Astuce : « + » correspond à des pièces de rechange supplémentaires.			

Modèle	LY010
Spécification (pouces) Max.	20*14
Charge (lb/kg)	440/200

INSTALLATION


ÉTAPE 1:

Disposez les planches dans l'ordre, insérez les bâtons porteurs dans les planches et fixez avec des vis à tête fraisée.

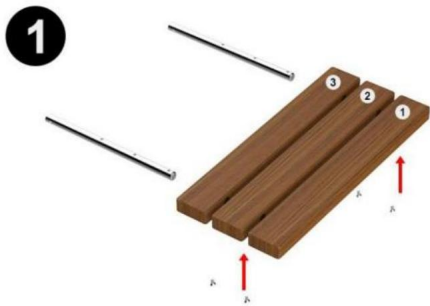

ÉTAPE 2:


Mesurez la distance et fixez la carte de localisation au mur.

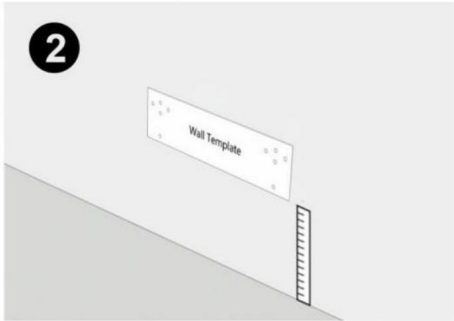

ÉTAPE 3 :


Percez des trous dans les points marqués de la carte de localisation.

(Le foret mesure 8,5 mm, la profondeur de poinçonnage est de 65 mm)

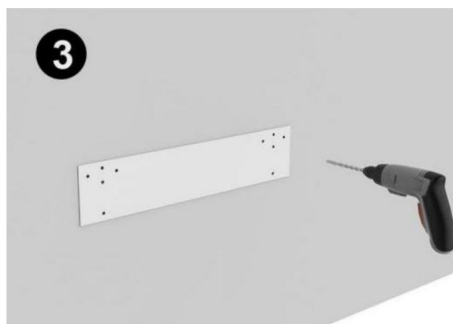


ÉTAPE 4:

Insérez le boulon à expansion de manière à ce qu'il affleure le mur.

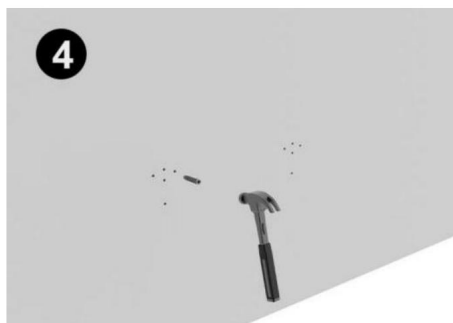


ÉTAPE5 :

Alignez les trous et serrez les vis.

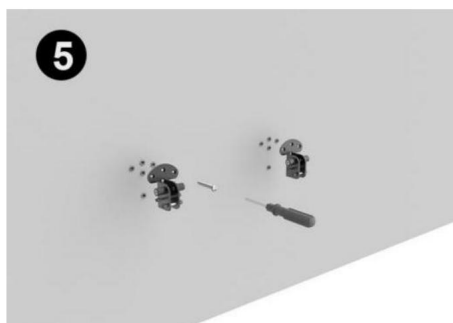


ÉTAPE 6 :

Placez le couvercle décoratif sur le bâton porteur ; loquet.

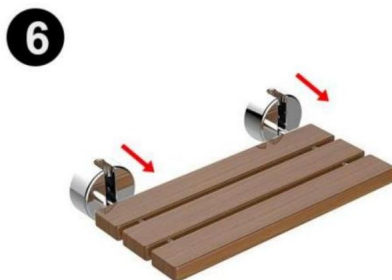

ÉTAPE 7 :

Reliez le corps assemblé à la plaque de montage et insérez la goupille.

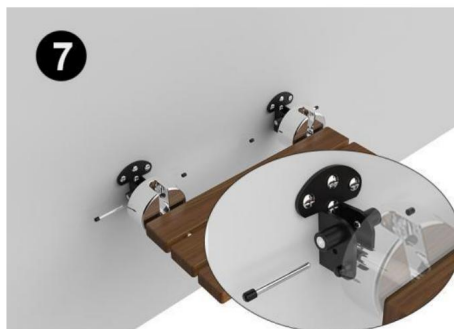

ÉTAPE 8 :

Fixez le couvercle décoratif et l'installation est terminée.



Schéma de pliage



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison Centurion, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

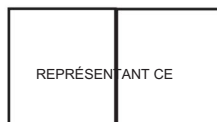

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

Herunterklappbarer Duschsitz

MODELL: LY010

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Herunterklappbarer Duschsitz

MODELL: LY001



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Vorsichtsmaßnahmen

- 1: Bitte bestätigen Sie vor dem Bohren, ob es sich bei der Wand um einen tragenden Teich handelt.
- 2: Bitte prüfen Sie vor dem Bohren, ob an der Lochposition eine Wasserleitung vorhanden ist.
- 3: Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Produktzubehör vollständig ist.
- 4: Stellen Sie sicher, dass der Bohrer eine Größe von 8,5 mm hat.
- 5: Stellen Sie sicher, dass die Lochtiefe 6,5 cm beträgt
- 6: Die empfohlene Höhe zwischen Sitz und Boden beträgt etwa 40–48 cm.

Stückliste			
NEIN .	Name	Bilder	MENGE.
1	Hauptkörper		3
2	Dekorative Abdeckung		2
3	Das Tragende Stock		2
4	Montageplatte		2
5	Senkkopfschraube M6*8		6+2
6	Nylon-Bolzenkappe		10+2
7	Schraube ST8*70mm		10+2


8	Befestigungsloch Leitender Aufkleber	 Wall Template	1
9	Bohrer ø8,5*150		1
Tipp: „+“ steht für zusätzliche Ersatzteile .			

Modell	LY010
Spezifikation (Zoll) Max.	20*14
Belastung (lbs/kg)	440/200

INSTALLATION


SCHRITT 1:

Ordnen Sie die Dielen der Reihe nach an, stecken Sie die Tragstäbe in die Dielen und befestigen Sie sie. Befestigen Sie sie mit Senkkopfschrauben.

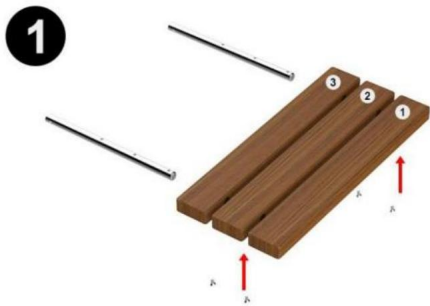

SCHRITT 2:


Messen Sie den Abstand und befestigen Sie die Ortungskarte an der Wand.

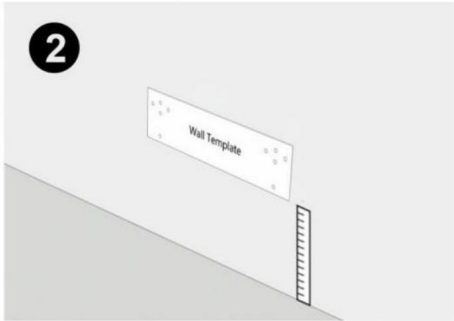

SCHRITT


3: Bohren Sie Löcher in die markierten Punkte der Locator-Karte.

(Bohrer ist 8,5 mm, Stanztiefe beträgt 65 mm)

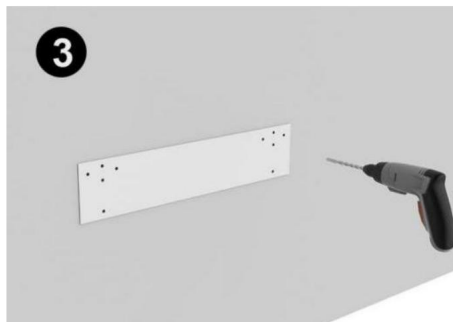


SCHRITT 4:

Setzen Sie den Spreizdübel so ein, dass er bündig mit der Wand abschließt.

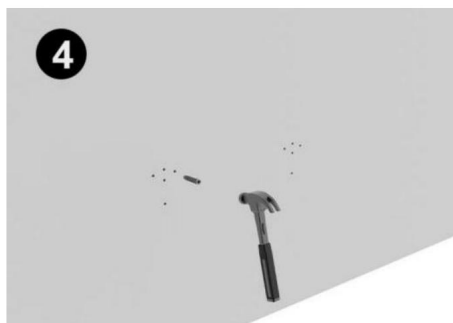


SCHRITT 5:

Richten Sie die Löcher aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

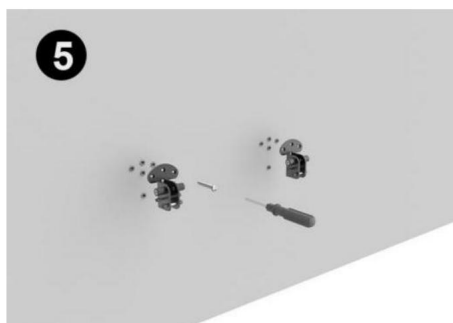


SCHRITT 6:

Platzieren Sie die dekorative Abdeckung auf dem tragenden Stab, verriegeln.

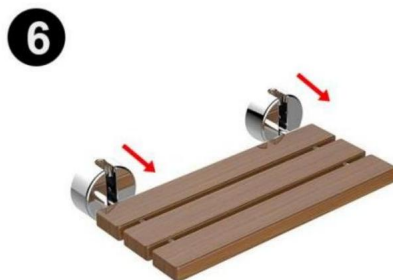

SCHRITT 7:

Verbinden Sie das zusammengebaute Gehäuse mit der Montageplatte und setzen Sie den Stift ein.

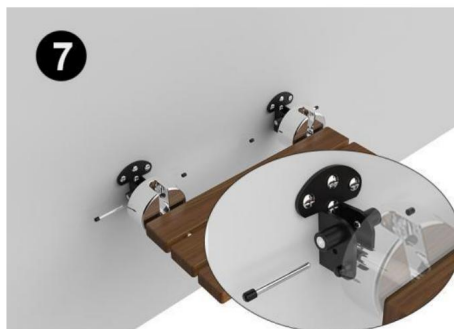

SCHRITT 8:

Befestigen Sie die dekorative Abdeckung und die Installation ist abgeschlossen.



Faltschema



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Büro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezeugnis

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Sedile per doccia ribaltabile

MODELLO: LY010

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sedile per doccia ribaltabile

MODELLO: LY001



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Avvertenze

- 1: Si prega di verificare se il muro è uno stagno portante prima di forare;
- 2: Prima di forare, verificare se è presente un tubo dell'acqua nella posizione del foro;
- 3: verificare se gli accessori del prodotto sono completi prima dell'installazione;
- 4: assicurarsi che la punta del trapano abbia una dimensione di 8,5 mm.
- 5: assicurarsi che la profondità del foro sia 6,5 cm
- 6: L'altezza consigliata tra il sedile e il suolo è di circa 40-48 cm.

Elenco delle parti			
NO	Nome	Immagini	QUANTITÀ.
1	Corpo principale		3
2	Copertura decorativa		2
3	Il portante bastone		2
4	Piastra di montaggio		2
5	Vite a testa svasata M6*8		6+2
6	Tappo per bullone in nylon		10+2
7	Vite ST8*70mm		10+2


8	Foro di montaggio Adesivo guida		1
9	Punta da trapano ϕ8,5*150		1
Suggerimento: "+" indica pezzi di ricambio extra.			

Modello	LY010
Specifica (pollici) Max.	20*14
Carico (libbre/kg)	440/200

INSTALLAZIONE


PASSO 1:

Disporre le assi in ordine, inserire i bastoncini portanti nelle assi e fissare con viti a testa svasata.

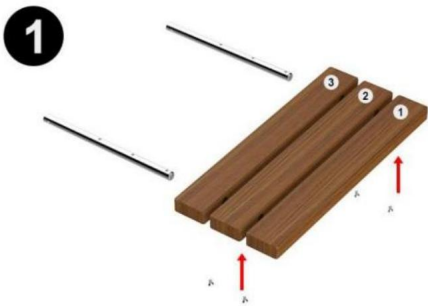

PASSO 2:


Misura la distanza e attacca la scheda di localizzazione al muro.

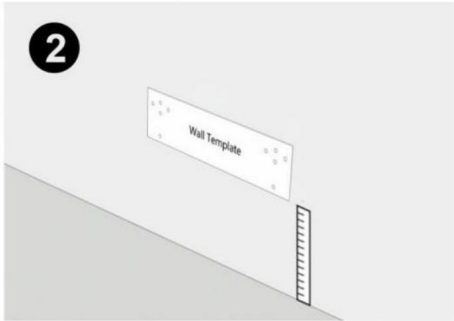

FASE 3:


Praticare dei fori nei punti contrassegnati della scheda di localizzazione.

(La punta da trapano è 8,5 mm, la profondità di punzonatura è 65 mm)

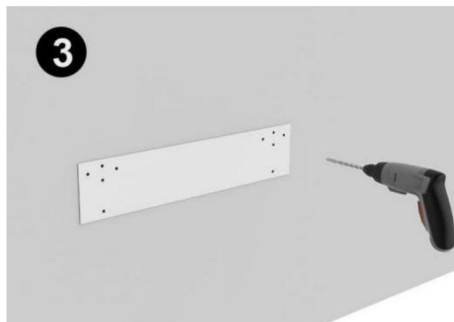

PASSO 4:

Inserire il bullone ad espansione in modo che sia a filo con il muro.

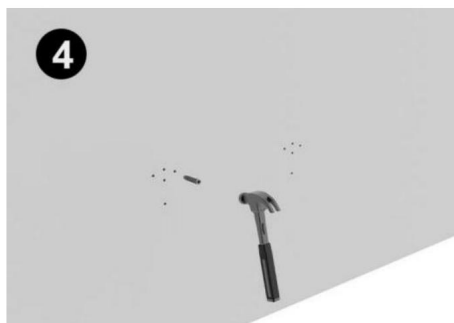

PASSO 5:

Allineare i fori e serrare le viti.




PASSO

6: Posizionare la copertura decorativa sul bastone portante; chiavistello.



PASSO

7: Collegare il corpo assemblato alla piastra di montaggio e inserire il perno.

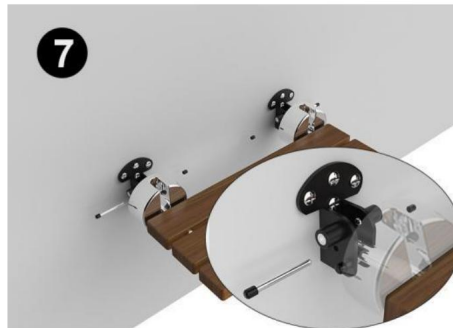

PASSO 8:

Fissare la copertura decorativa e l'installazione è completa.



Schema pieghevole




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

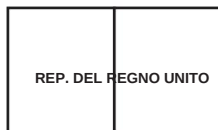

YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del Centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Asiento de ducha plegable

MODELO: LY010

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Asiento de ducha plegable

MODELO: LY001



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Precauciones

- 1: Confirme si la pared es un estanque de carga antes de perforar;
- 2: Antes de perforar, confirme si hay una tubería de agua en la posición del orificio;
- 3: Verifique si los accesorios del producto están completos antes de la instalación;
- 4: Asegúrese de que la broca tenga un tamaño de 8,5 mm.
- 5: Asegúrate de que la profundidad del agujero sea de 6,5 cm.
- 6: La altura recomendada entre el asiento y el suelo es de unos 40-48 cm.

Lista de			
NO	Nombre	Fotos	CANT.
1	Cuerpo principal		3
2	cubierta decorativa		2
3	El soporte de carga palo		2
4	Placa de montaje		2
5	Tornillo avellanado M6*8		6+2
6	Tapa de perno de nailon		10+2
7	Tornillo ST8*70mm		10+2


8	Orificio de montaje Pegatina guía		1
9	Broca φ8.5*150		1
Consejo: “+” son repuestos adicionales.			

Modelo	LY010
Especificación (pulgadas)	20*14
Máx. Carga (libras/kg)	440/200

INSTALACIÓN


PASO 1:

Coloque los tablones en orden, inserte los palos de carga en los tablones y fíjelos. con tornillos avellanados.

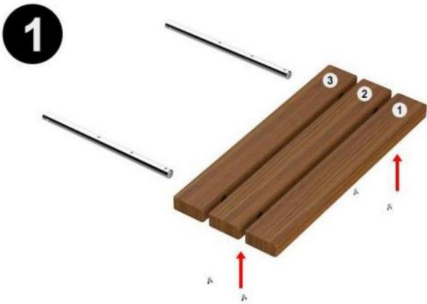

PASO 2:


Mida la distancia y fije la tarjeta de localización a la pared.

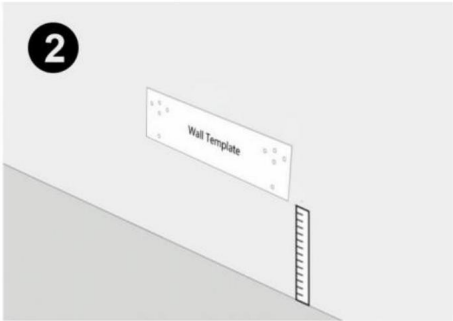

PASO 3:


Taladre agujeros en los puntos marcados de la tarjeta localizadora.

(La broca es de 8,5 mm, la profundidad de perforación es de 65 mm)

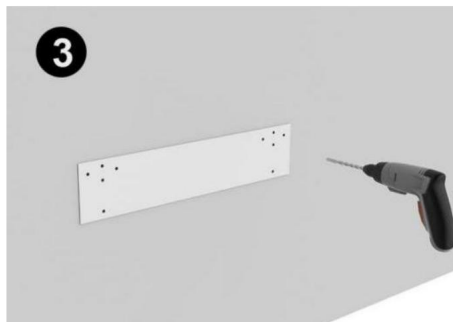


ETAPA 4:

Inserte el perno de expansión para que quede al ras de la pared.

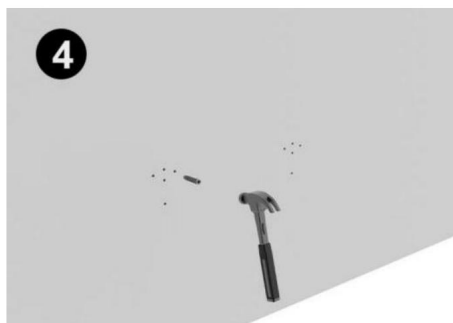

PASO 5:

Alinee los agujeros y apriete los tornillos.

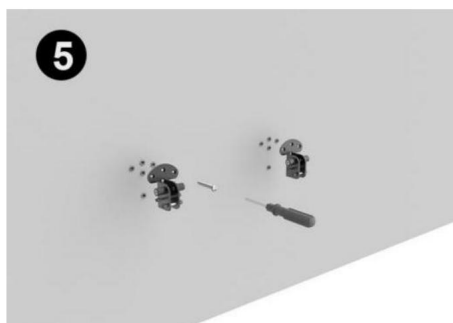


PASO 6:

Coloque la cubierta decorativa en el palo de carga; pestillo.



PASO 7:

Conecte el cuerpo ensamblado a la placa de montaje e inserte el pasador.

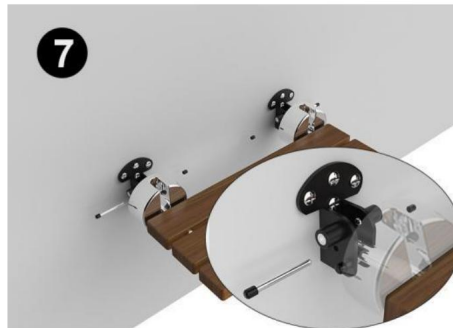

PASO 8:

Fije la cubierta decorativa y la instalación estará completa.



Esquema de plegado



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

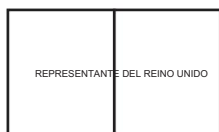

YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

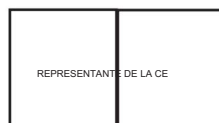

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Składane siedzisko prysznicowe

MODEL: LY010

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Składane siedzisko prysznicowe

MODEL: LY001



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Przestrogi

- 1: Przed wierceniem sprawdź, czy ściana jest stawem nośnym;
- 2: Przed wierceniem sprawdź, czy w miejscu otworu znajduje się rura wodna;
- 3: Przed instalacją sprawdź, czy akcesoria produktu są kompletne;
- 4: Upewnij się, że wiertło ma rozmiar 8,5 mm.
- 5: Upewnij się, że głębokość otworu wynosi 6,5 cm
- 6: Zalecana wysokość między siedziskiem a podłożem wynosi około 40-48 cm.

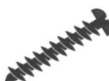Lista części			
NIE	Nazwa	Kino	ILOŚĆ.
1	Główny korpus		3
2	Ozdobna okładka		2
3	Nośnik stick		2
4	Płyta montażowa		2
5	Śruba stożkowa M6*8		6+2
6	Nylonowa nasadka na śrubę		10+2
7	Śruba ST8*70mm		10+2


8	Otwór montażowy Naklejka przewodnia		1
9	Wiertło φ8,5*150		1
Wskazówka: „+” to dodatkowe części zamienne.			

Model	LY010
Specyfikacja (cale) Maks.	20*14
Obciążenie (funty/kg)	440/200

INSTALACJA


KROK 1:

Ułóż deski w odpowiedniej kolejności, włóż w nie drążki nośne i zamocuj je za pomocą śrub z łbem wpuszczanym.

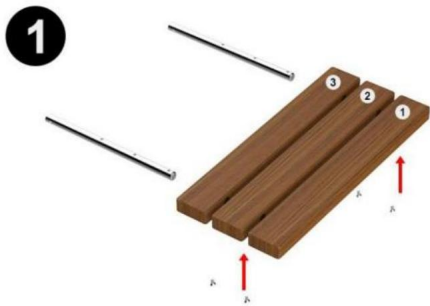

KROK 2:


Zmierz odległość i przymocuj kartę lokalizatora do ściany.

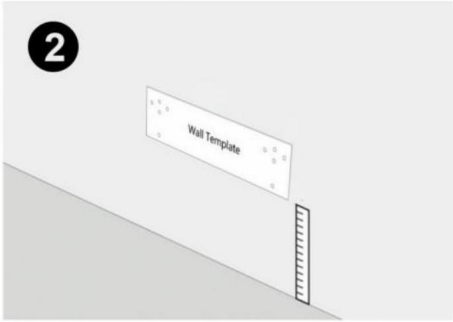

KROK 3:


Wywierć otwory w zaznaczonych punktach karty lokalizatora.

(Wiertło ma średnicę 8,5 mm, głębokość dziurkowania wynosi 65 mm)

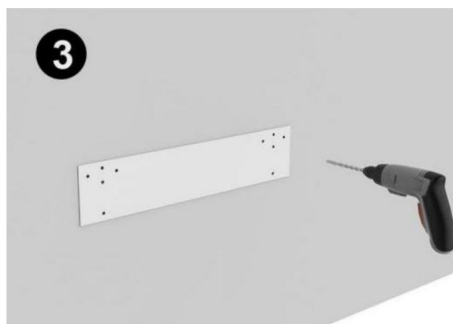


KROK 4:

Włóż kołek rozporowy tak, aby zlicował się ze ścianą.

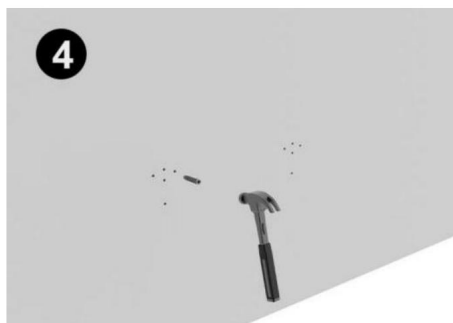


KROK 5:

Wyrównaj otwory i dokręć śruby.

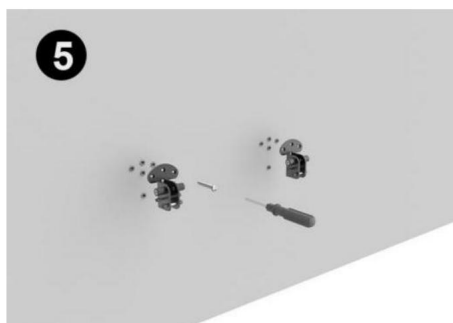


KROK 6:

Umieść ozdobną osłonę na drążku nośnym; zatrzaszk.

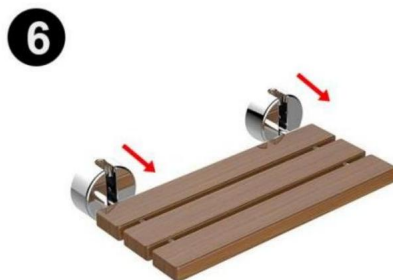

KROK 7:

Połącz zmontowany korpus z płytą montażową i włóż kołek.

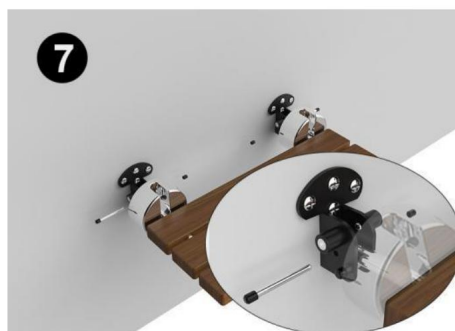

KROK 8:

Zamocuj dekoracyjną osłonę i instalacja jest zakończona.



Schemat składowania



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii
-----------	-------------------

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPREZENT	KE
-----------	----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Neerklapbare douchestoel

MODEL: LY010

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Neerklapbare douchestoel

MODEL: LY001



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Waarschuwingen

- 1: Bevestig vóór het boren of de muur een dragende vijver is;
- 2: Controleer vóór het boren of er een waterleiding op de gatpositie aanwezig is;
- 3: Controleer vóór installatie of de productaccessoires compleet zijn;
- 4: Zorg ervoor dat de boor een afmeting van 8,5 mm heeft.
- 5: Zorg ervoor dat de gatdiepte 6,5 cm is
- 6: De aanbevolen hoogte tussen de zitting en de grond is ongeveer 40-48 cm.

Onderdelen lijst			
NEE .	Naam	Afbeeldingen	AANTAL.
1	Centrale gedeelte		3
2	Decoratieve hoes		2
3	De dragende stok		2
4	Montageplaat		2
5	Verzonken schroef M6*8		6+2
6	Nylon boutdop		10+2
7	Schroef ST8*70mm		10+2


8	Montagegat Begeleidende sticker	 Wall Template	1
9	Boor ÿ8,5*150		1
Tip: “+” is extra reserveonderdelen.			

Model	LY010
Specificatie (inch) Max.	20*14
Belasting (lbs/kg)	440/200

INSTALLATIE


STAP 1:

Leg de planken op volgorde, steek de dragende stokken in de planken en zet ze vast ze met verzonken schroeven.

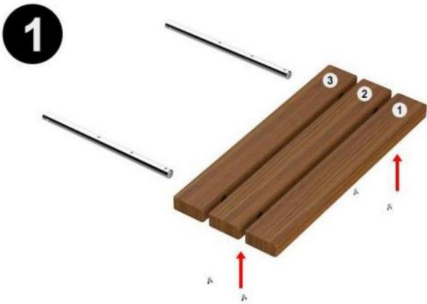


STAP 2:

Meet de afstand en bevestig de locatiekaart aan de muur.

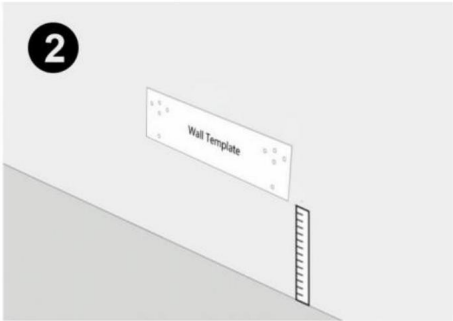


STAP3:

Boor gaten in de gemarkeerde punten van de locatiekaart.
(Boor is 8,5 mm, ponsdiepte is 65 mm)

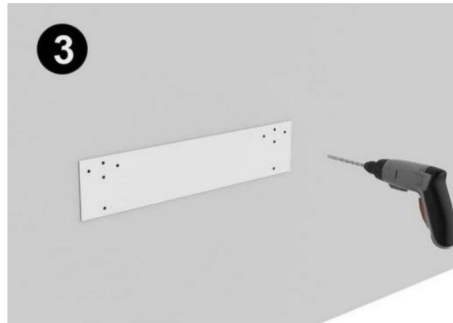


STAP 4:

Plaats de expansiebout zo dat deze gelijk ligt met de muur.

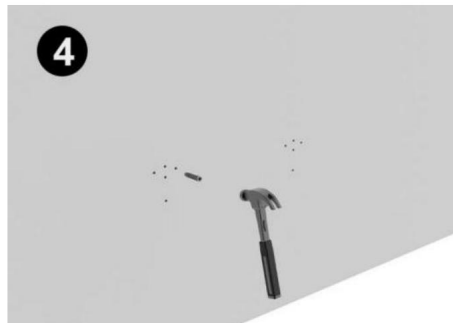

STAP5:

Lijn de gaten uit en draai de schroeven vast.

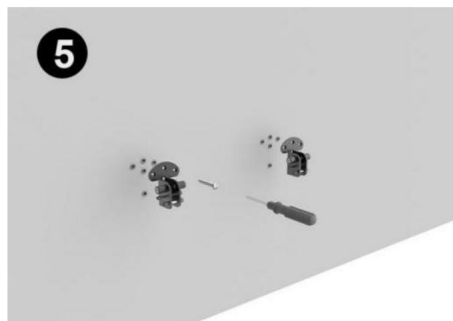


STAP6:

Plaats de decoratieve afdekking op de dragende stok; grendel.



STAP7:

Verbind het gemonteerde lichaam met de montageplaat en steek de pin erin.

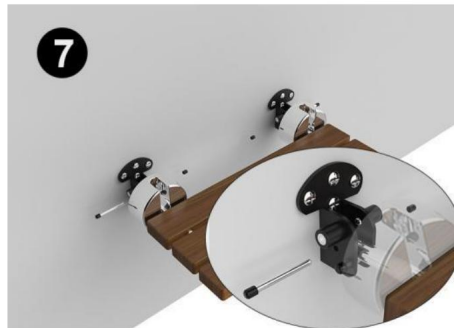

STAP8:

Bevestig de decoratieve afdekking en de installatie is voltooid.



Vouwschema



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, Londen Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Nedfällbar duschsits

MODELL: LY010

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Nedfällbar duschsits

MODELL: LY001



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Varningar

- 1: Kontrollera om väggen är en bärande damm innan du borrar;
- 2: Innan du borrar, vänligen bekräfta om det finns ett vattenrör vid hållpositionen;
- 3: Kontrollera om produktens tillbehör är kompletta före installation;
- 4: Se till att borrkronan är 8,5 mm stor.
- 5: Se till att håldjupet är 6,5 cm
- 6: Den rekommenderade höjden mellan sitsen och marken är ca 40-48cm.

Dellista			
NEJ	namn	Bilder	ANTAL.
1	Huvudkropp		3
2	Dekoratvt omslag		2
3	Den bärande pinne		2
4	Monteringsplatta		2
5	Försänkt skruv M6*8		6+2
6	Nylon Bult Cap		10+2
7	Skruv ST8*70mm		10+2


8	Monteringshåll Vägledande klistermärke		1
9	Borr ÿ8,5*150		1
Tips: "+" är extra reservdelar.			

Modell	LY010
Specifikation (tum) Max.	20*14
Belastning (lbs/kg)	440/200

INSTALLATION


STEG 1:

Ordna plankorna i ordning, sätt in de bärande pinnarna i plankorna och fixa dem med försänkta skruvar.

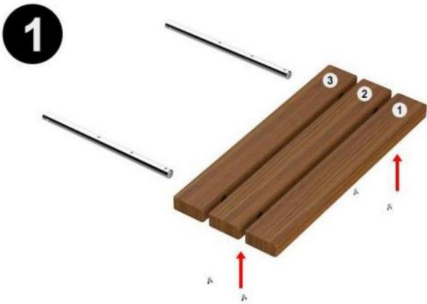

STEG 2:


Mät avståndet och fäst lokaliseringskortet på väggen.

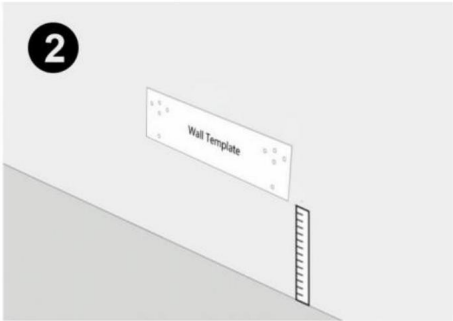

STEG 3:

Borra hål i de markerade punkterna på lokaliseringskortet.

(Bor är 8,5 mm, stansdjup är 65 mm)

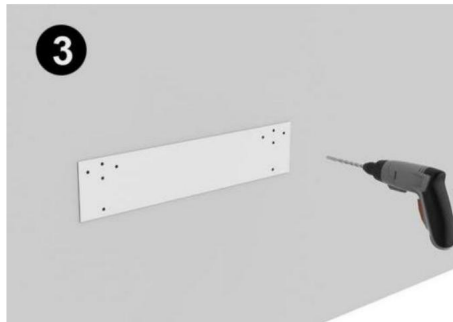


STEG 4:

Sätt i expansionsbulten så att den ligger i plan med väggen.



STEG 5:

Rikta in hålen och dra åt skruvarna.

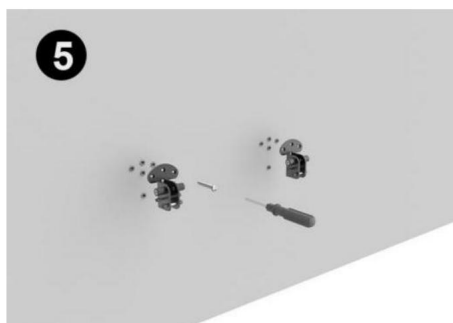


STEG 6:

Placera det dekorativa locket på den bärande pinnen; spärr.



STEG 7:

Länka den monterade kroppen till monteringsplattan och sätt i stiftet.

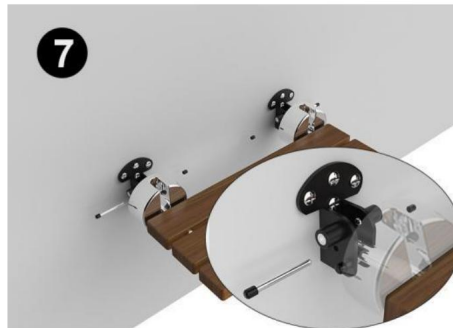

STEG 8:

Fäst det dekorativa locket och installationen är klar.



Vikningsschema



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support