



Affordable. Reliable. Home Improvement.

BED HANDLE

MODEL:LQX-110055

VEVOR Support Center





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BED HANDLE



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Use precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item. Please keep small spare parts out of children's reach.
3. Use as intended only.
4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
5. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.

Technical Parameters

Model	maximum load capacity
LQX-110055	300lb
FDA Registration No.: 3016734231	

Instructions for Use

APPLICATION OF BED SAFETY RAIL


This Bed Safety Rail is an assistive balance device. It is designed to assist people who are mobile, but require some assistance to get in and get out of bed, or reposition in bed safely. The bed rail is NOT intended for people with very poor mobility, or who are permanently bedridden. It is NOT designed to prevent people from falling out of bed.



CAUTIONS and WARNINGS

1. Please make sure that you read and follow these instructions carefully. Failure to comply may result in injury.
2. Ensure all parts are assembled securely and all spring buttons are properly engaged in position prior to use.
3. The area between an assistive bed rail and mattress creates a potential for serious, life-threatening entrapment. It is possible for a person's head, neck, arm (s), leg (s) or body to become wedged between the side of the mattress and any of the bed rail.
4. The mattress must be tight against the assistive handrail, with no gaps at all times. This should be checked frequently-at least daily.
5. The mattress must be tight against the assistive handrail, with no gaps at all times. This should be checked frequently-at least daily.
6. NEVER use unless the product is tight against the mattress without gaps, and at least 12.5 in. from headboard and foot board.
7. NEVER use with children.
8. NEVER use on toddler, bunk, water, or inflatable beds, beds with soft compressible pads, articulated beds, or on beds with a mattress height taller than 13in (33cm) or shorter than 7 in (17.8cm). ONLY use with twins, queen and king size beds.
9. The product is an auxiliary product. Patients without autonomous ability must be under supervision.

Instructions for Use

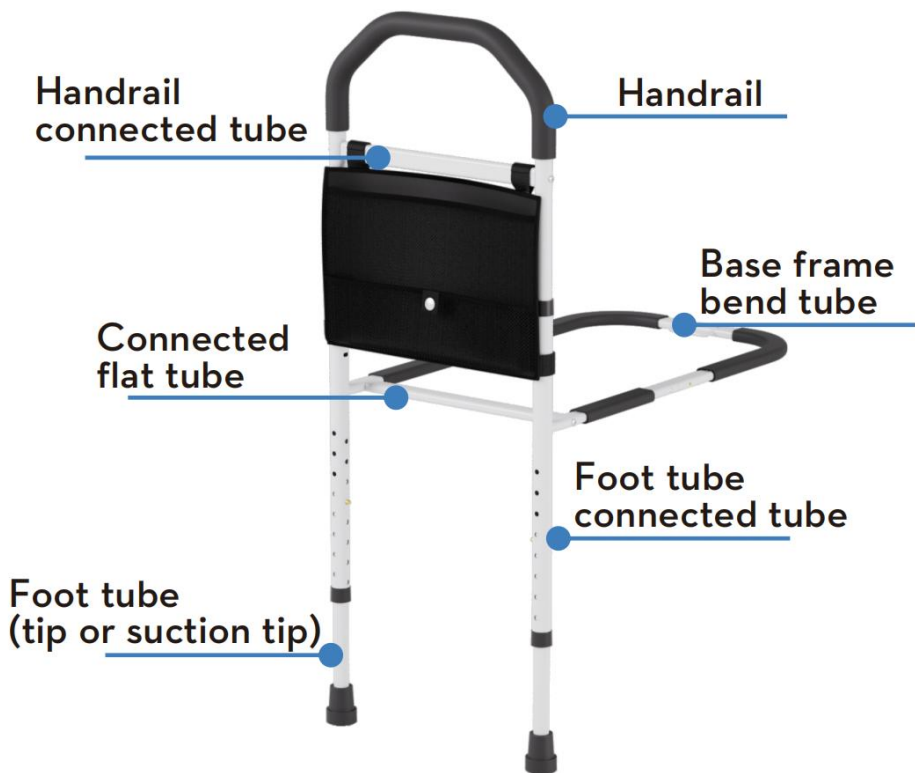

[Application] Designed for the elderly and those with leg injuries, providing the necessary support and stability for a safe and sound sleep.

[Structure] It is mainly composed of Handrail tube, handrail lower tube, reinforced tube welding body, base frame bend welding body, base frame welding body.

[Feature] T-style bedside rail is made of high-strength carbon steel tube with white powder-coated surface. The height of the handrail and foot tube can be adjustable. The height of handrail has 4 levels to set. the height of foot tube has 16 levels to set. Very convenient to adjust and use.

[Specification]

1. The appearance is bright and clean, the color is uniform, no obvious scratches, cracks, edges, burrs.

2. Handrail height adjustable range: 390-465mm.

Foot tube height adjustable range: 330-517mm.

[Instruction]

1. Open the package and check whether all the parts are included, as below picture shows:



①.Foot tube(tip or suction tip)

②.Handrail tube

③.Connected flat tube

④.Foot tube connected tube-Left

⑤.Foot tube connected tube-Right

⑥.Base frame bend tube

⑦. Storage bag

⑧.Straps

⑨.Opp bag:



Opp bagx1



Tapping screwsx4




Screwsx2



Hexagonal wrenchx1

2. Take out the foot tube connected tube-Left and Right, connected flat tube, tightening them by using the hexagonal screws, as shown in below picture ①:

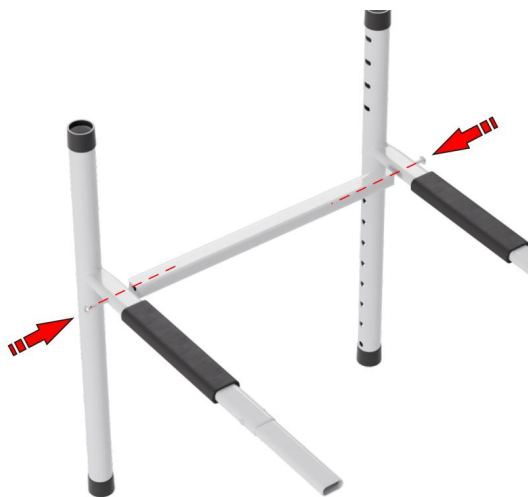



Picture ①

3. After the handrail tube is inserted into the handrail connection tube, the pin pops out, indicating a secure fixation. as shown in below picture ②-1:

4. After the foot tube is inserted into the foot tube connection tube, the pin pops out, indicating a secure fixation, as shown in below picture ②-2:


5. After the Foot tube connected tube is inserted into the foot tube connection tube welding body, the pin pops out, indicating a secure fixation, as shown in below picture:

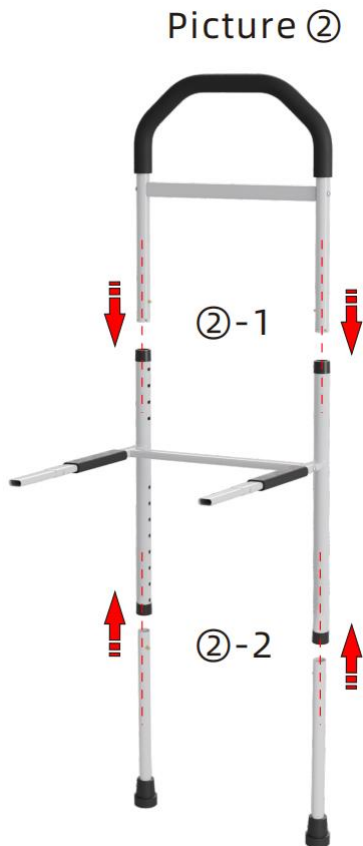

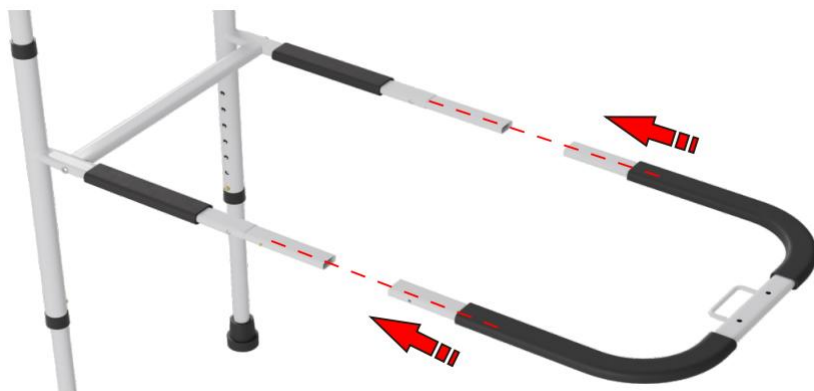

6. Install the storage bag.

[Height adjustment] Adjust the position of the pins and adjust the handrail to the desired height, as shown in below picture:

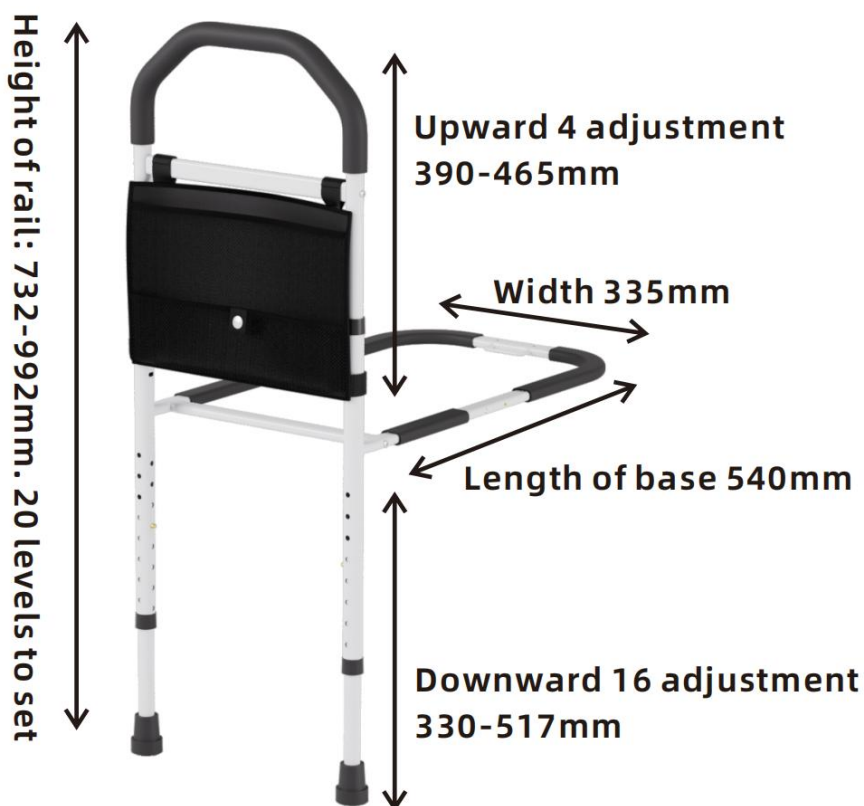

[Storage] Forbidden to be pressed horizontally, handle with care.

[Scraped] Disposal in accordance with local laws.

Option -Fix the Bed Rail on Bed Frame (it' s non-mandatory)

The Bed Safety Rail could be fixed on base of the bed with screws provided and provide increased stability for users, but it is not necessary to do.

CLEANING THE BED SAFETY RAIL

Note: Please check the suitability of the cleaning products before use. Do not use abrasive cleaners or cloths as these could permanently damage the surface and invalidate any warranty.

1. Clean regularly using soapy water or warm water. Then wipe it with dry towel.
2. Allow product to fully dry prior to use/storage.

Our After-Sales Service:

1. If you discover any product damage or missing parts, please contact our customer service team for assistance.
2. Our dedicated customer service team is available to address any questions or concerns you may have regarding the product.
3. We strive to provide prompt and efficient support to ensure the satisfaction of our customers.
4. For any inquiries, warranty claims or assistance, please contact our customer service.

Usage Guidelines for Bed Rail:

1. Ensure that the bed rail is properly installed and securely attached to the bed frame before use.
2. When adjusting the height or position of the bed rail, make sure it is securely locked in place before use.
3. Do not allow children to play or hang on the bed rail. It is intended for adult use only.

4. Use caution when getting in or out of bed, ensuring that the bed rail is properly positioned to provide support.

Manufacturer: MOBILITY SOURCE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: 160 HEHENG ROAD, YANGHE TOWN, GAOMING DISTRICT, Foshan, Guangdong, 528513, CHINA.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

UCHWYT ŁÓŻKA

MODEL: LQX-110055

Centrum wsparcia VEVOR





To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE :

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Zachowaj środki ostrożności

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWROCENIEM:

7. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.

8. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.

Małe części zamienne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

9. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

10. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

11. Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produktu.

Technical Parameters

Model	maksymalna ładowność
-------	----------------------

LQX-110055	300 funtów
Numer rejestracyjny FDA: 3016734231	

Instrukcja użytkowania

ZASTOSOWANIE BARIERKI BEZPIECZEŃSTWA ŁÓŻKA

Ta barierka zabezpieczająca łóżko to urządzenie wspomagające równowagę. Została zaprojektowana, aby pomagać osobom, które są mobilne, ale potrzebują pomocy, aby dostać się do środka

i wstać z łóżka lub bezpiecznie zmienić pozycję w łóżku. Barierka łóżka NIE JEST

przeznaczony dla osób o bardzo ograniczonej sprawności ruchowej lub osób na stałe

przykuty do łóżka. Produkt NIE jest przeznaczony do zapobiegania wypadaniu z łóżka.



OSTRZEŻENIA I UWAGI

10. Prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie jej może spowodować obrażenia.

11. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie części są solidnie zmontowane i czy wszystkie przyciski sprężynowe są prawidłowo zatrzaśnięte.

12. Obszar pomiędzy barierką łóżka a materacem tworzy ryzyko poważnego, zagrażającego życiu uwięzienia. Możliwe jest zaklinowanie głowy, szyi, ramienia (ramion), nogi (nóg) lub ciała osoby. pomiędzy boki materaca i dowolną częścią barierki łóżka.

13. Materac musi ściśle przylegać do poręczy pomocniczej, bez szczeliny przez cały czas. Należy to często sprawdzać – co najmniej raz dziennie.

14. Materac musi ściśle przylegać do poręczy pomocniczej, bez szczeliny

przez cały czas. Należy to często sprawdzać – co najmniej raz dziennie.


15.NIGDY nie używaj, jeśli produkt nie przylega ściśle do materaca. bez szczelin i co najmniej 12,5 cala od wezglowia i podnóżka tablica.

16.NIGDY nie stosować w obecności dzieci.

17.NIGDY nie używać na łóżkach dla małych dzieci, łóżkach piętrowych, łóżkach wodnych lub łóżkach dmuchanych, łóżkach z miękkimi, kompresowalnymi podkładkami, łóżkami przegubowymi lub na łóżkach z materacem wysokość większa niż 13 cali (33 cm) lub mniejsza niż 7 cali (17,8 cm). Stosować TYLKO z łóżkami pojedynczymi, łóżkami typu queen size i łóżkami typu king size.

18.Produkt jest produktem pomocniczym. Pacjenci niezdolni do samodzielnego poruszania się. musi być pod nadzorem.

Instrukcja użytkowania

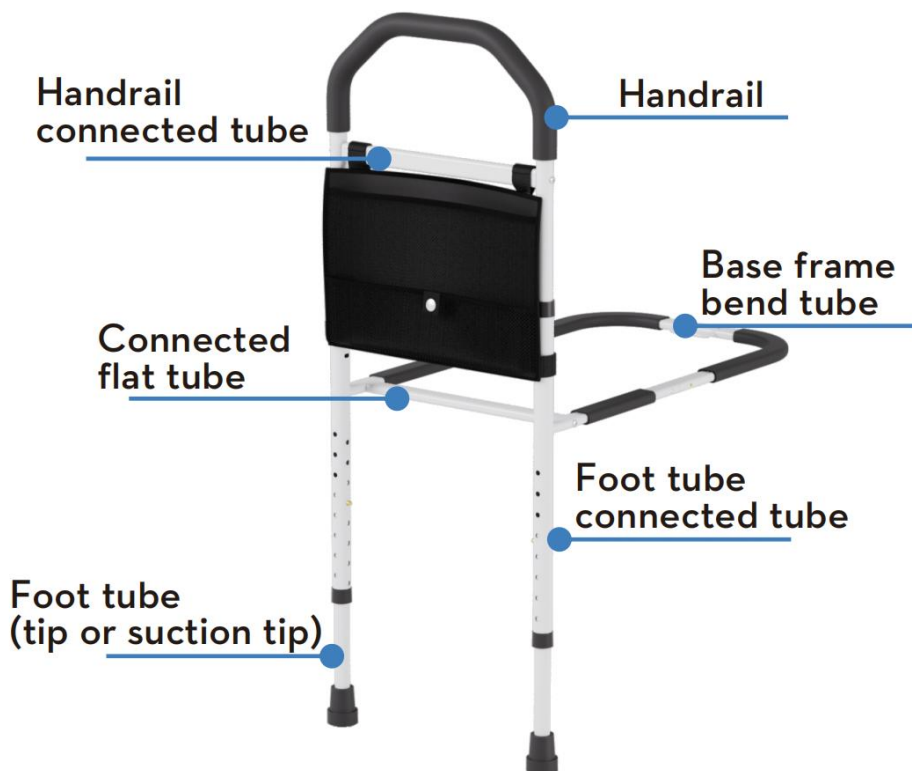

[Aplikacja] Przeznaczona dla osób starszych i osób z urazami nóg, zapewniając niezbędne wsparcie i stabilność dla bezpiecznego i zdrowego spaceru.

[Struktura] Składa się głównie z rury poręczy, dolnej części poręczy rura, korpus spawany rurą zbrojoną, spawanie gięcia ramy podstawy nadwozie, rama bazowa, spawanie nadwozia.

[Funkcja] Barijerka przyłóżkowa w kształcie litery T wykonana z wytrzymałego włókna węglowego

rura stalowa z białą, malowaną proszkowo powierzchnią. Wysokość Poręcz i rura podnóżka są regulowane. Wysokość poręczy ma 4 poziomy do ustawienia. Wysokość rury podnóżka ma 16 poziomów do ustawienia. Bardzo

Wygodne w regulacji i użytkowaniu.

[Specyfikacja]

1. Wygląd jest jasny i czysty, kolor jest jednolity, nie widoczne rysy, pęknięcia, krawędzie, zadziory.
2. Zakres regulacji wysokości poręczy: 390-465 mm.
Zakres regulacji wysokości rury podnóżka: 330-517 mm .

[Instrukcja]

1. Otwórz opakowanie i sprawdź, czy zawiera wszystkie części, jak pokazano na poniższym obrazku:



- ①. Rura dolna (końcówka lub końcówka ssąca)
- ②. Rura poręczy
- ③. Połączona płaska rura
- ④. Rurka podłogowa połączona z rurką – lewa
- ⑤. Rura podłogowa połączona z rurą – prawa
- ⑥. Rura gięcia ramy bazowej
- ⑦. Torba do przechowywania
- ⑧. Paski
- ⑨. Torba przeciwna:



Opp bagx1



Tapping screwsx4




Screwsx2



Hexagonal wrenchx1

2. Wyjmij rurkę podnóżka połączoną z lewą i prawą rurką połączoną rurki płaskiej, dokręcając je za pomocą śrub sześciokątnych, jak pokazano na poniższym obrazku ①:

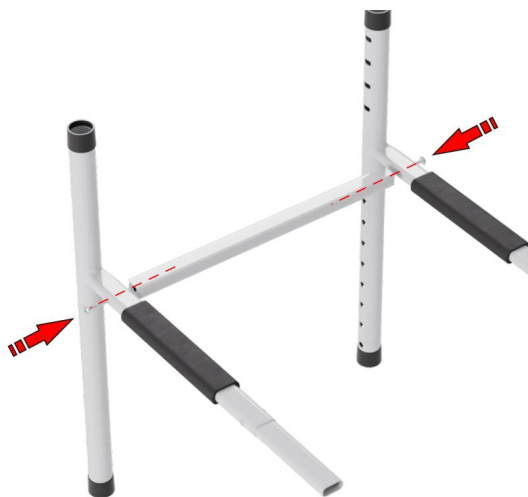


Picture ①


3. Po włożeniu rurki poręczy do rura łącząca poręcz, sworzeń wyskakuje, wskazując na bezpieczne zamocowanie pokazano na poniższym rysunku ②-1:

4. Po włożeniu rurki stopy do rura łącząca rurę nożną, sworzeń wyskakuje na zewnątrz, wskazując na bezpieczne zamocowanie pokazano na poniższym rysunku ②-2:

5. Po włożeniu rury łączącej do rury łączącej stopę korpus spawany rurki łączącej, kołek wyskakuje, wskazując na bezpieczne połączenie

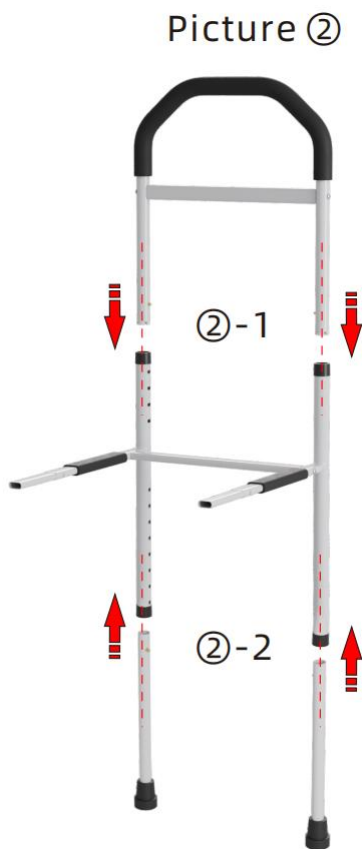


fiksacja, jak pokazano na poniższym obrazku:

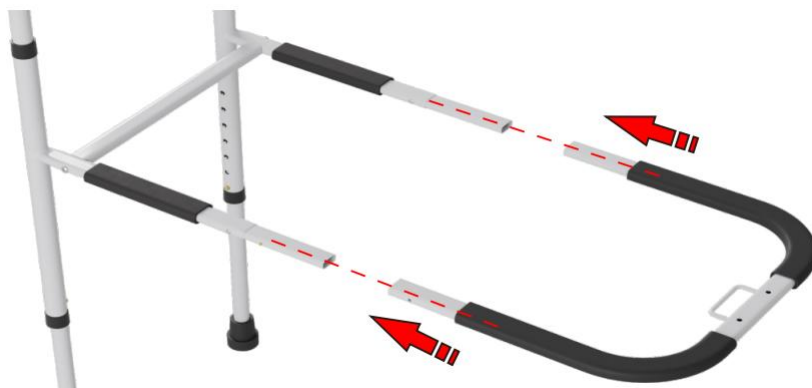

12. Zamontuj torbę do przechowywania.

[Regulacja wysokości] Dostosuj położenie kołków i wyreguluj poręcz na żądaną wysokość, jak pokazano na poniższym rysunku:

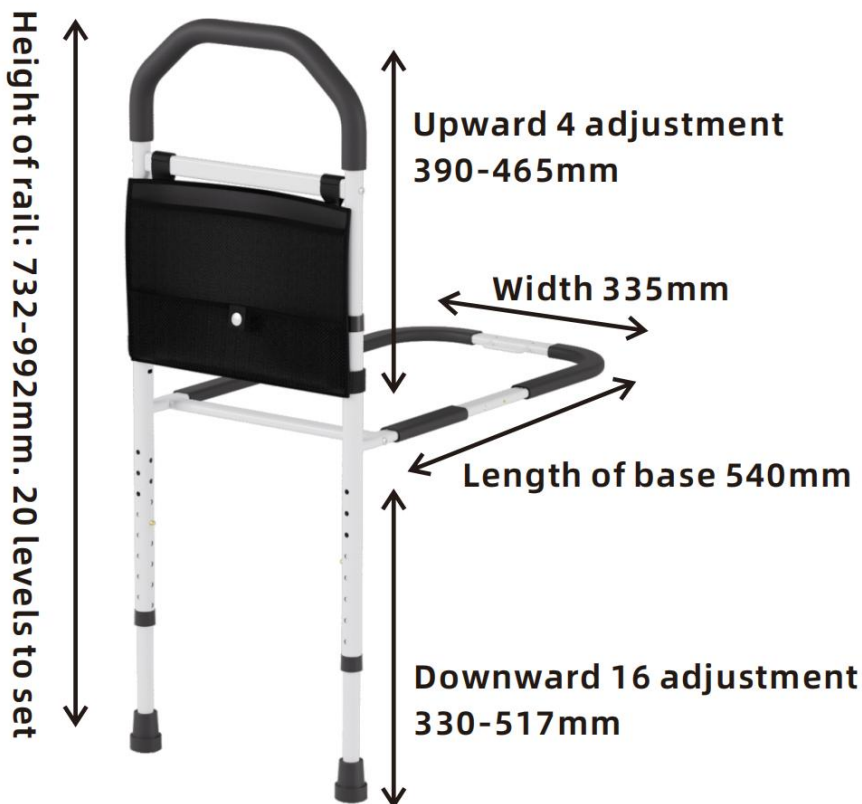

[Przechowywanie] Zabrania się prasowania w poziomie, należy obchodzić się ostrożnie.

[Zebrane] Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami.

Opcja - Zamocuj barierkę łóżka na ramie łóżka (nie jest to obowiązkowe)

Barierkę zabezpieczającą łóżko można zamocować na podstawie łóżka za pomocą

śruby zapewniają użytkownikom zwiększoną stabilność, ale nie jest to konieczne.

CZYSZCZENIE PORĘCZY BEZPIECZEŃSTWA ŁÓŻKA

Uwaga: Proszę sprawdzić przydatność środków czyszczących przed użyciem. Nie używaj szorstkich środków czyszczących ani ściereczek, ponieważ

może trwale uszkodzić powierzchnię i unieważnić wszelkie gwarancja.

1. Regularnie czyść wodą z mydłem lub ciepłą wodą. Następnie wytrzyj suchym ręcznikiem.

3. Przed użyciem/przechowywaniem należy odczekać, aż produkt całkowicie wyschnie.

Nasz serwis posprzedażowy:

1. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenie produktu lub brak części, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.

2. Nasz oddany zespół obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji i chętnie odpowie na wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące produktu.

3. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić szybką i skuteczną obsługę, aby zagwarantować satysfakcję naszych klientów.

4. W przypadku pytań, reklamacji lub chęci uzyskania pomocy, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Wskazówki dotyczące użytkowania barierki łóżkowych:

1. Przed użyciem należy upewnić się, że barierka łóżka jest prawidłowo zamontowana i solidnie przymocowana do ramy łóżka.

2. Przed użyciem należy sprawdzić, czy barierka łóżka jest bezpiecznie zablokowana, a jej wysokość lub położenie są regulowane.

3. Nie pozwalaj dzieciom bawić się ani wieszać na barierce łóżka. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku dorosłych.

4. Zachowaj ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu z łóżka, upewniając się, że barierka łóżka jest prawidłowo ustawiona i zapewnia odpowiednie podparcie.

Producent: MOBILITY SOURCE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. **Adres:**

160 HEHENG ROAD, YANGHE TOWN, GAOMING DISTRICT, Foshan,
Guangdong, 528513, CHINA.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BETTGRIFF

MODELL: LQX-110055

VEVOR-Supportcenter





Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG :

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzung.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

13. SITZEN ODER STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL.

14. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel oder in dessen Nähe zu spielen.

Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

15. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

16. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

17. Halten Sie scharfe Spitzen, Klingen und andere Gegenstände fern, um das Produkt nicht zu zerkratzen.

Technical Parameters

Modell	maximale Tragfähigkeit
--------	------------------------

LQX-110055	3 00 Pfund
FDA-Registrierungsnummer: 3016734231	

Gebrauchsanweisung

ANWENDUNG DES BETTSICHEREGELS

Dieses Bett-Sicherheitsgeländer ist ein unterstützendes Gleichgewichtsgerät. Es ist dazu bestimmt, unterstützen Menschen, die mobil sind, aber beim Einsteigen etwas Hilfe benötigen und sicher aus dem Bett aufstehen oder sich im Bett neu positionieren. Das Bettgitter ist NICHT für Menschen mit sehr eingeschränkter Mobilität oder die dauerhaft bettlägerig. Es ist NICHT dafür ausgelegt, Menschen vor dem Herausfallen aus dem Bett zu schützen.



VORSICHTSMASSNAHMEN und WARNHINWEISE

19. Bitte lesen und befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

20. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Teile sicher zusammengebaut sind und alle Federknöpfe richtig eingerastet sind.

21. Der Bereich zwischen einem unterstützenden Bettgitter und einer Matratze bildet eine Gefahr einer schweren, lebensbedrohlichen Einklemmung. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Kopf, Hals, Arm(e), Bein(e) oder Körper einer Person verkeilen zwischen der Seite der Matratze und einem der Bettgitter.

22. Die Matratze muss fest am Handlauf anliegen, ohne Lücken zu jeder Zeit. Dies sollte regelmäßig überprüft werden – mindestens täglich.

23. Die Matratze muss fest am Handlauf anliegen, ohne Lücken zu jeder Zeit. Dies sollte regelmäßig überprüft werden – mindestens täglich.


24. NIEMALS verwenden, wenn das Produkt nicht fest an der Matratze anliegt. ohne Lücken und mindestens 31,8 cm vom Kopf- und Fußteil entfernt Planke.

25. NIEMALS bei Kindern anwenden.

26. NIEMALS auf Kleinkind-, Etagen-, Wasser- oder aufblasbaren Betten, Betten mit weich komprimierbar Auflagen, Gelenkbetten oder auf Betten mit Matratze Höhe größer als 13 Zoll (33 cm) oder kleiner als 7 Zoll (17,8 cm). NUR mit Einzel-, Queensize- und Kingsize-Betten verwenden.

27. Das Produkt ist ein Hilfsprodukt. Patienten ohne autonome Fähigkeit müssen unter Aufsicht stehen.

Gebrauchsanweisung

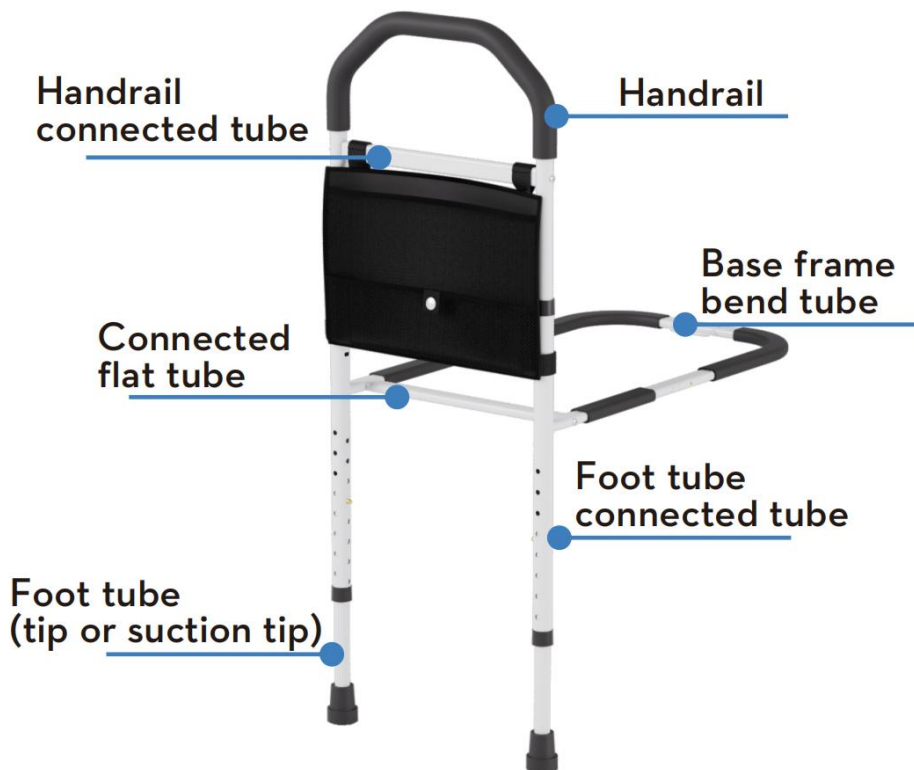

[Anwendung] Entwickelt für ältere Menschen und Menschen mit

Beinverletzungen,
bietet die notwendige Unterstützung und Stabilität für einen sicheren und
gesunden
schlafen.

[Struktur] Es besteht hauptsächlich aus Handlaufrohr, Handlauf unten
Rohr, verstärktes Rohr Schweißkörper, Grundrahmen Biegeschweißen
Karosserie, Grundrahmen Schweißkörper.

[Feature] T-Stil Bettgitter ist aus hochfestem Carbon gefertigt
Stahlrohr mit weißer Pulverbeschichtung. Die Höhe des
Handlauf und Fußrohr sind verstellbar. Die Höhe des Handlaufs
hat 4 Stufen zum Einstellen. Die Höhe des Fußrohrs hat 16 Stufen zum
Einstellen. Sehr
bequem einzustellen und zu verwenden.

[Spezifikation]

1. Das Erscheinungsbild ist hell und sauber, die Farbe ist einheitlich, nein
deutliche Kratzer, Risse, Kanten, Grate.
2. Höhenverstellbereich des Handlaufs: 390–465 mm.
Höhenverstellbereich des Fußrohrs: 330–517 mm .

[Anweisung]

1. Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind.
wie das folgende Bild zeigt:



- ①. Fußrohr (Spitze oder Saugspitze)
- ②. Handlaufrohr
- ③. Verbundenes Flachrohr
- ④. Fußrohr verbundenes Rohr-Links
- ⑤. Fußrohr verbundenes Rohr-Rechts
- ⑥. Grundrahmen-Biegerohr
- ⑦. Aufbewahrungstasche
- ⑧. Gurte
- ⑨. Opp-Beutel:



Opp bagx1

Tapping screwsx4


Screwsx2

Hexagonal wrenchx1

2. Nehmen Sie das Fußrohr heraus, das mit dem linken und rechten Rohr verbunden ist.

Flachrohr, und ziehen Sie sie mit den Sechskantschrauben fest, wie gezeigt

im Bild unten ①:

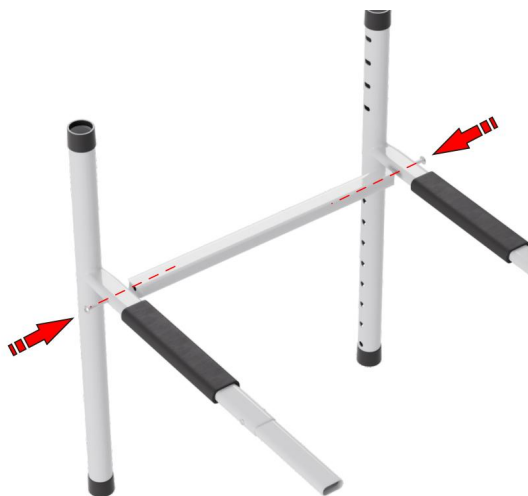

Picture ①


3. Nachdem das Handlaufrohr in das Handlauf-Verbindungsrohr, der Stift springt heraus und zeigt eine sichere Fixierung wie im Bild ②-1 unten gezeigt:


4. Nachdem das Fußrohr in die Fußrohr-Verbindungsrohr, der Stift springt aus, was auf eine sichere Fixierung hinweist, wie im Bild ②-2 unten gezeigt:

5. Nachdem das Fußrohr verbunden ist, wird das Rohr in das Fußrohr eingesetzt

Anschlussrohr-Schweißkörper, der Stift springt heraus und zeigt eine sichere

Fixierung, wie im Bild unten gezeigt:

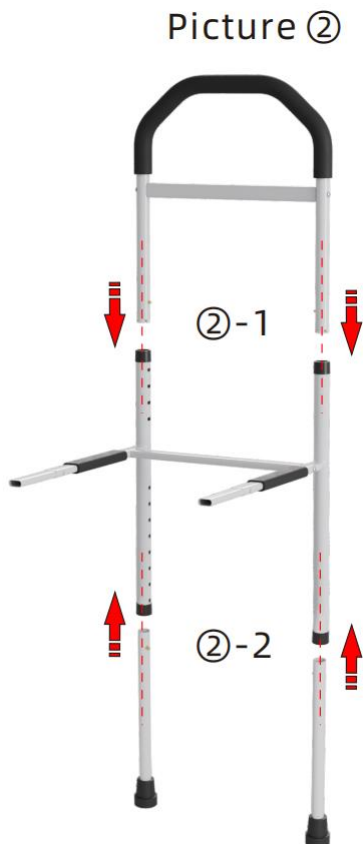


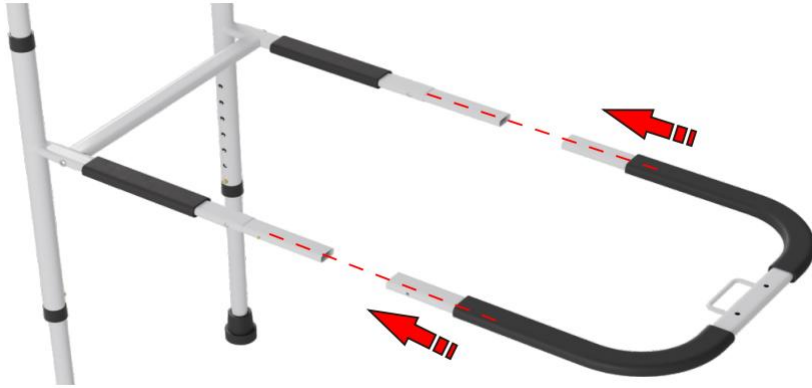

18. Installieren Sie die Aufbewahrungstasche.

[Höhenverstellung] Passen Sie die Position der Stifte an und stellen Sie die

Handlauf auf die gewünschte Höhe, wie im Bild unten gezeigt:

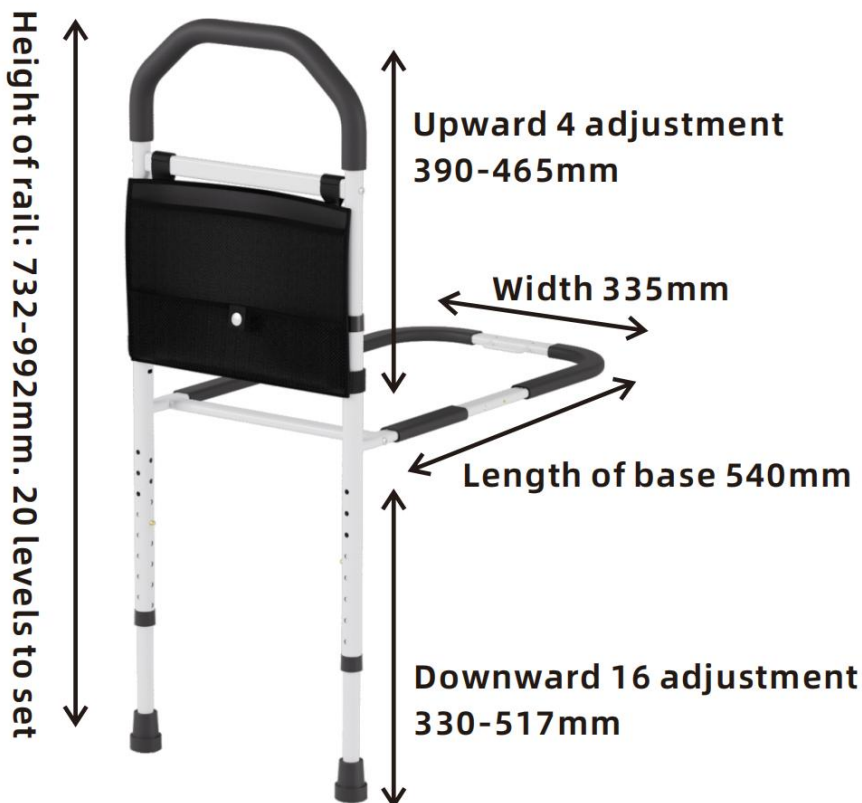

[Lagerung] Horizontales Drücken verboten, vorsichtig handhaben.

[Abgeschabt] Entsorgung gemäß den örtlichen Gesetzen.

Option - Befestigen Sie das Bettgitter am Bettrahmen (nicht zwingend erforderlich)

Das Bett-Sicherheitsgeländer kann an der Basis des Bettes befestigt werden mit

Schrauben im Lieferumfang enthalten und bieten erhöhte Stabilität für Benutzer, aber das ist nicht notwendig.

REINIGUNG DES BETTSICHEREGELS

Hinweis: Bitte prüfen Sie die Eignung der Reinigungsmittel

vor Gebrauch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Tücher, da diese

kann die Oberfläche dauerhaft beschädigen und jegliche Garantie.

1. Regelmäßig mit Seifenlauge oder warmem Wasser reinigen.

Dann

wischen Sie es mit einem trockenen Handtuch ab.

4. Lassen Sie das Produkt vor der Verwendung/Lagerung vollständig trocknen.

Unser After-Sales-Service:

1. Wenn Sie Produktschäden oder fehlende Teile feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

2. Unser engagiertes Kundenserviceteam steht Ihnen für alle Fragen und Anliegen zum Produkt zur Verfügung.

3. Wir sind bestrebt, schnellen und effizienten Support zu bieten, um die Zufriedenheit unserer Kunden sicherzustellen.

4. Bei Fragen, Garantieansprüchen oder Hilfe wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Nutzungsrichtlinien für Bettgitter:

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Bettgitter ordnungsgemäß installiert und sicher am Bettrahmen befestigt ist.

2. Achten Sie beim Einstellen der Höhe oder Position des Bettgitters darauf, dass es vor der Verwendung sicher eingerastet ist.

3. Erlauben Sie Kindern nicht, am Bettgitter zu spielen oder daran zu hängen. Es ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt.

4. Seien Sie beim Ein- und Aussteigen aus dem Bett vorsichtig und achten Sie darauf, dass das Bettgitter richtig positioniert ist, um Halt zu bieten.

Hersteller: MOBILITY SOURCE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. **Adresse:**
160 HEHENG ROAD, YANGHE TOWN, GAOMING DISTRICT, Foshan,

Guangdong, 528513, CHINA.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
EC	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

POIGNÉE DE LIT

MODÈLE : LQX-110055

Centre d'assistance VEVOR





Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :

Veuillez lire cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves conséquences.
blessure.

Précautions d'emploi

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

19. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.

20. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.

Veuillez garder les petites pièces de rechange hors de portée des enfants.

21. Utiliser uniquement comme prévu.

22. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

23. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.

Technical Parameters

Modèle	capacité de charge maximale
LQX-110055	3 00 lb

Mode d'emploi

APPLICATION DE LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ DE LIT

Cette barrière de sécurité pour lit est un dispositif d'aide à l'équilibre. Elle est conçue pour aider les personnes mobiles, mais qui ont besoin d'aide pour entrer et sortir du lit, ou se repositionner dans le lit en toute sécurité. La barrière de lit n'est PAS destiné aux personnes à mobilité très réduite ou qui sont en permanence alité. Il n'est PAS conçu pour empêcher les personnes de tomber du lit.



PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

28. Veuillez lire et suivre attentivement ces instructions. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures.

29. Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées solidement et que tous les boutons à ressort sont correctement engagés en position avant utilisation.

30. La zone entre une barrière de lit d'assistance et un matelas crée un risque de coincement grave, voire mortel. Il est possible que la tête, le cou, les bras, les jambes ou le corps d'une personne soient coincés entre le côté du matelas et l'une des barrières du lit.

31. Le matelas doit être bien serré contre la rampe d'assistance, sans lacunes doivent être observées en permanence. Ceci doit être vérifié fréquemment, au moins quotidiennement.

32. Le matelas doit être bien serré contre la rampe d'assistance, sans lacunes doivent être observées en permanence. Ceci doit être vérifié fréquemment, au moins quotidiennement.

33. NE JAMAIS utiliser à moins que le produit ne soit bien serré contre le


matelas sans espace et à au moins 12,5 pouces de la tête de lit et du pied conseil.

34.NE JAMAIS utiliser avec des enfants.

35.NE JAMAIS utiliser sur des lits pour tout-petits, des lits superposés, des lits d'eau ou des lits gonflables, des lits avec souple et compressible coussinets, lits articulés ou sur des lits avec matelas hauteur supérieure à 13 pouces (33 cm) ou inférieure à 7 pouces (17,8 cm). À utiliser UNIQUEMENT avec des lits jumeaux, queen et king size.

36.Le produit est un produit auxiliaire. Patients sans capacité autonome doit être sous surveillance.

Mode d'emploi

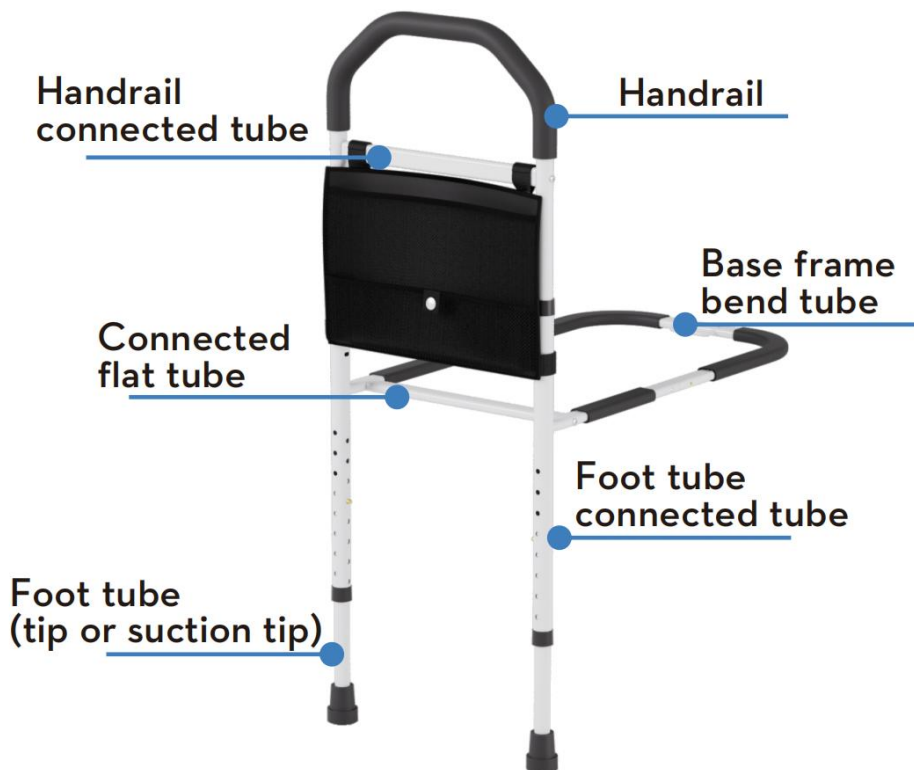

[Application] Conçu pour les personnes âgées et celles souffrant de

blessures aux jambes,
fournissant le soutien et la stabilité nécessaires pour une vie saine et
sauve
dormir.

[Structure] Il est principalement composé d'un tube de main courante et
d'une main courante inférieure
tube, corps de soudage de tube renforcé, soudage par pliage du cadre de
base
carrosserie, châssis de base, carrosserie soudée.

[Fonctionnalité] La barrière de chevet en T est fabriquée en carbone
haute résistance
tube en acier avec surface thermolaquée blanche. La hauteur du
La main courante et le tube repose-pieds sont réglables. La hauteur de la
main courante
dispose de 4 niveaux de réglage. La hauteur du tube de pied dispose de
16 niveaux de réglage. Très
pratique à régler et à utiliser.

[Spécification]

1. L'apparence est brillante et propre, la couleur est uniforme, non
rayures, fissures, bords, bavures évidents.
2. Plage de réglage de la hauteur de la main courante : 390-465 mm.
Plage de réglage de la hauteur du tube de pied : 330-517 mm .

[Instruction]

1. Ouvrez l'emballage et vérifiez si toutes les pièces sont incluses,
comme le montre l'image ci-dessous :



1. Tube de pied (embout ou embout d'aspiration)

2. Tube de main courante

③. Tube plat connecté

④. Tube de pied connecté au tube-gauche

5. Tube de pied connecté au tube-droit

6. Tube de courbure du cadre de base

7. Sac de rangement

⑧. Sangles

⑨. Sac en plastique :



Opp bagx1



Tapping screwsx4




Screwsx2




Hexagonal wrenchx1

2. Retirez le tube de pied connecté au tube gauche et droit, connecté tube plat, en les serrant à l'aide des vis hexagonales, comme indiqué dans l'image ci-dessous 1 :

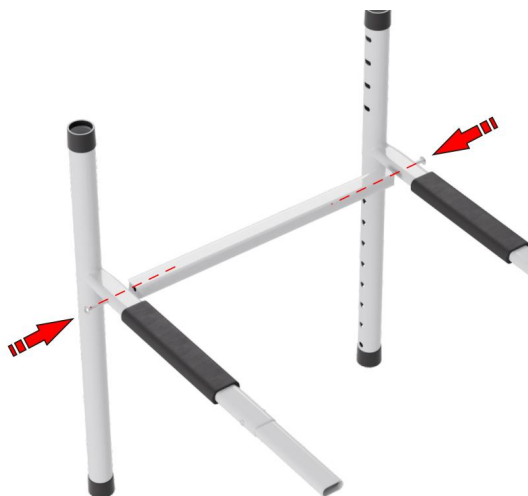

Picture ①

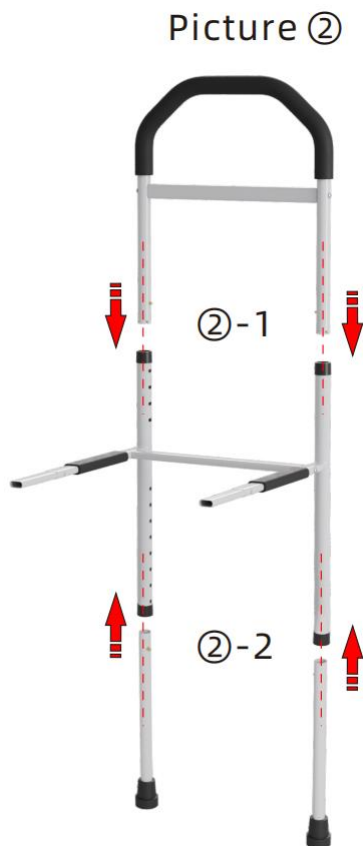


3. Une fois le tube de la main courante inséré dans le tube de connexion de la main courante, la goupille apparaît, indiquant une fixation sécurisée.

montré dans l'image ci-dessous ②-1 :


4. Une fois le tube de pied inséré dans le tube de connexion du tube de pied, la goupille sort de l'extérieur, indiquant une fixation sûre, comme montré dans l'image ci-dessous ②-2 :

5. Une fois le tube connecté au tube de pied inséré dans le tube de pied tube de connexion corps de soudage, la goupille sort, indiquant une connexion sécurisée fixation, comme indiqué dans l'image ci-dessous :

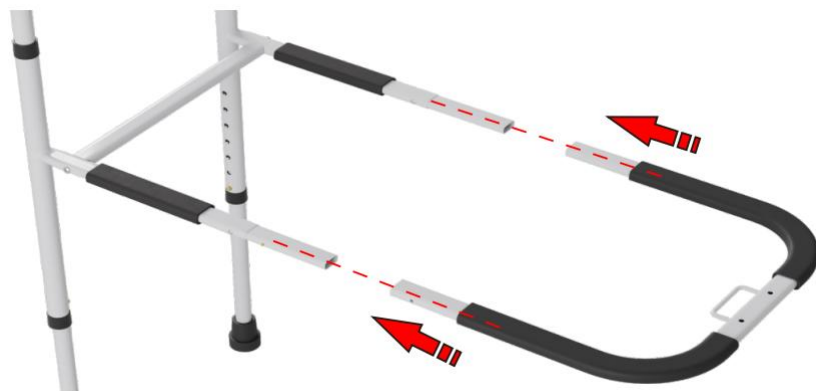

24. Installez le sac de rangement.

[Réglage de la hauteur] Ajustez la position des broches et ajustez le main courante à la hauteur souhaitée, comme indiqué dans l'image ci-dessous :

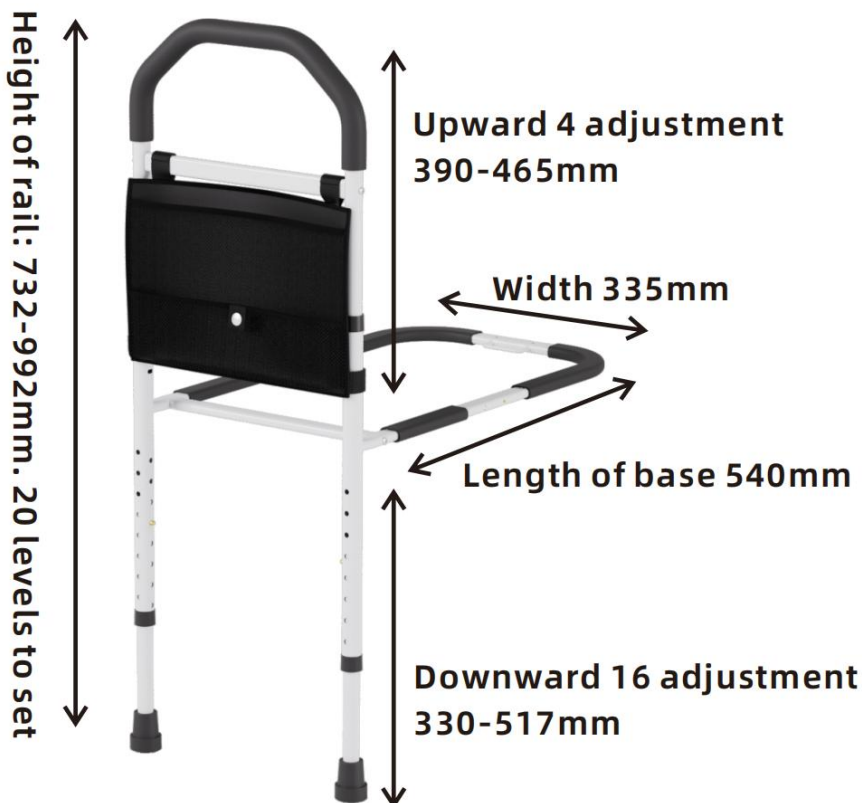

[Stockage] Interdit de presser horizontalement, manipuler avec précaution.

[Graté] Élimination conformément aux lois locales.

Option - Fixer la barrière de lit sur le cadre de lit (ce n'est pas obligatoire)

La barrière de sécurité du lit peut être fixée sur la base du lit avec vis fournies et offrent une stabilité accrue pour les utilisateurs, mais ce n'est pas nécessaire de le faire.

NETTOYAGE DE LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ DU LIT

Remarque : Veuillez vérifier la compatibilité des produits de nettoyage

avant utilisation. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de chiffons abrasifs, car ils

pourrait endommager définitivement la surface et invalider toute garantie.

1. Nettoyez régulièrement à l'eau savonneuse ou à l'eau tiède. Puis essuyez-le avec une serviette sèche.

5. Laissez le produit sécher complètement avant utilisation/stockage.

Notre service après-vente :

1. Si vous découvrez des dommages sur le produit ou des pièces manquantes, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide.

2. Notre équipe de service client dédiée est disponible pour répondre à toutes vos questions ou préoccupations concernant le produit.

3. Nous nous efforçons de fournir un support rapide et efficace pour assurer la satisfaction de nos clients.

4. Pour toute demande de renseignements, réclamation de garantie ou assistance, veuillez contacter notre service client.

Consignes d'utilisation de la barrière de lit :

1. Assurez-vous que la barrière de lit est correctement installée et solidement fixée au cadre du lit avant utilisation.

2. Lors du réglage de la hauteur ou de la position de la barrière de lit, assurez-vous qu'elle est bien verrouillée en place avant utilisation.

3. Ne laissez pas les enfants jouer ou s'accrocher à la barrière de lit. Elle est réservée à l'usage des adultes.

4. Soyez prudent lorsque vous entrez ou sortez du lit, en vous assurant que la barrière du lit est correctement positionnée pour fournir un soutien.

Fabricant : MOBILITY SOURCE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. **Adresse :**

160 HEHENG ROAD, YANGHE TOWN, GAOMING DISTRICT, Foshan, Guangdong, 528513, CHINE.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEDHANDGREEP

MODEL: LQX-110055

VEVOR

Ondersteuningscentrum



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BED HANDLE



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING :

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige verwondingen.

blessure.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

25. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.

26. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.

Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.

27. Alleen gebruiken zoals bedoeld.

28. Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

29. Verwijderd houden van scherpe punten, messen en andere voorwerpen om krassen op het product te voorkomen.

Technical Parameters

Model	maximale draagkracht
-------	----------------------

LQX-110055	300 pond
FDA-registratienummer: 3016734231	

Gebruiksaanwijzing

TOEPASSING VAN BEDVEILIGHEIDSRAIL

Deze bedhek is een hulpmiddel voor evenwicht. Het is ontworpen om mensen helpen die mobiel zijn, maar hulp nodig hebben om binnen te komen en uit bed komen, of veilig in bed verplaatsen. Het bedhek is NIET bedoeld voor mensen met een zeer beperkte mobiliteit, of die permanent bedlegerig. Het is NIET ontworpen om te voorkomen dat mensen uit bed vallen.



WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMATREGELEN


- 37.Zorg ervoor dat u deze instructies zorgvuldig leest en opvolgt. Het niet naleven hiervan kan leiden tot letsel.
- 38.Zorg ervoor dat alle onderdelen goed vastzitten en dat alle veerknoppen goed vastzitten voordat u het product gebruikt.
- 39.Het gebied tussen een bedhek en de matras creëert een potentieel voor ernstige, levensbedreigende beknelling. Het is mogelijk dat iemands hoofd, nek, arm(en), been(en) of lichaam vast komt te zitten. tussen de zijkant van de matras en een van de bedhekken.
- 40.De matras moet strak tegen de leuning aanliggen, zonder Controleer dit regelmatig, minstens dagelijks.
- 41.De matras moet strak tegen de leuning aanliggen, zonder Controleer dit regelmatig, minstens dagelijks.
- 42.NOOIT gebruiken tenzij het product strak tegen de matras aan zit zonder openingen en minstens 31 cm vanaf het hoofdeinde en voeteneinde bord.

43. NOOIT gebruiken bij kinderen.

44. NOOIT gebruiken op peuterbedden, stapelbedden, waterbedden, opblaasbare bedden, bedden met zacht samendrukbaar kussens, geledede bedden of op bedden met een matras hoogte groter dan 33 cm (13 inch) of kleiner dan 17,8 cm (7 inch). ALLEEN te gebruiken bij eenpersoonsbedden, queensize- en kingsizebedden.

45. Het product is een hulpproduct. Patiënten zonder autonoom vermogen moeten onder toezicht staan.

Gebruiksaanwijzing

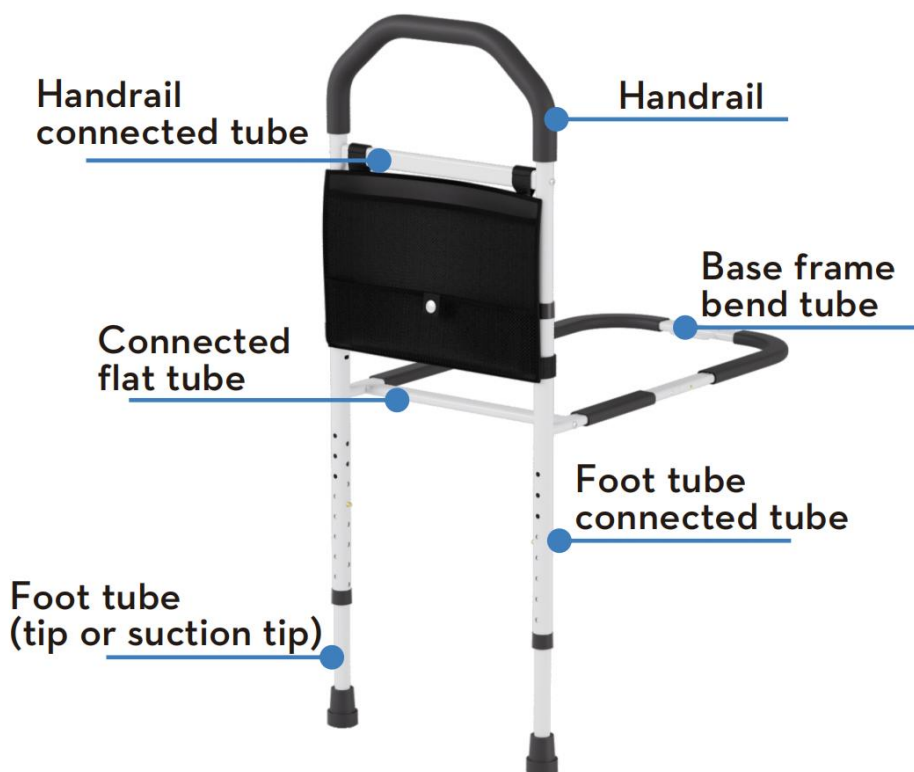

[Toepassing] Ontworpen voor ouderen en mensen met beenblessures, het bieden van de nodige ondersteuning en stabiliteit voor een veilige en gezonde

slaap.

[Structuur] Het bestaat voornamelijk uit een leuningbuis, een leuningonderstuk

buis, versterkte buislasbehuizing, basisframe buiglassens carrosserie, basisframe gelaste carrosserie.

[Kenmerk] Het T-vormige nachtkastje is gemaakt van hoogwaardig koolstofvezel

stalen buis met wit gepoedercoat oppervlak. De hoogte van de De leuning en de voetbuis zijn verstelbaar. De hoogte van de leuning heeft 4 niveaus om in te stellen. De hoogte van de voetbuis heeft 16 niveaus om in te stellen. Zeer

Gemakkelijk aan te passen en te gebruiken.

[Specificatie]

1. Het uiterlijk is helder en schoon, de kleur is uniform, geen duidelijke krassen, scheuren, randen en bramen.

2. Hoogteverstelbereik leuning: 390-465 mm.

Hoogteverstelbereik voetbuis: 330-517 mm .

[Instructie]

1. Open de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn, zoals de onderstaande afbeelding laat zien:



1. Voetbuis (punt of zuigpunt)
- ②. Leuningbuis
- ③. Aangesloten platte buis
- ④. Voetbuis verbonden buis-Links
- ⑤. Voetbuis aangesloten buis-Rechts
- ⑥. Basisframe gebogen buis
- ⑦. Opbergtas
- ⑧. Riemen
- ⑨. Opp tas:




Opp bagx1

Tapping screwsx4


Screwsx2

Hexagonal wrenchx1

2. Haal de voetbuis eruit, de buis links en rechts verbonden platte buis, vastdraaien met behulp van de zeskantschroeven, zoals afgebeeld in onderstaande afbeelding ①:

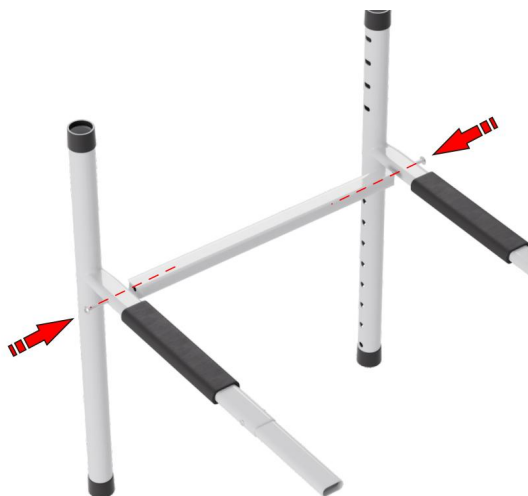

Picture ①

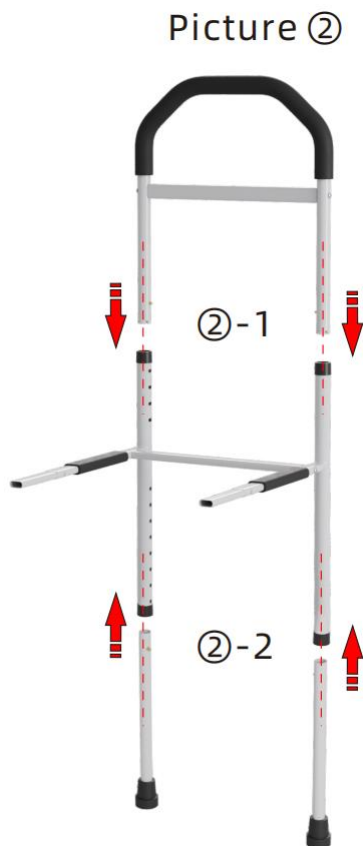

3. Nadat de leuningbuis in de houder is geplaatst, de leuningverbindingsbuis, de pen springt eruit, wat duidt op een veilige bevestiging weergegeven in onderstaande afbeelding ②-1.


4. Nadat de voetbuis in de voetbuisverbindingsbuis, de pen springt uit, wat duidt op een veilige fixatie, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding ②-2.

5. Nadat de voetbuis is aangesloten, wordt de buis in de voetbuis geplaatst, de buis in de voetbuis verbindingsbuis laslichaam, de pen springt eruit, wat duidt op een veilige verbinding fixatie, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding:



30. Plaats de opbergzak.

[Hoogteverstelling] Pas de positie van de pinnen aan en pas de leuning op de gewenste hoogte, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding:

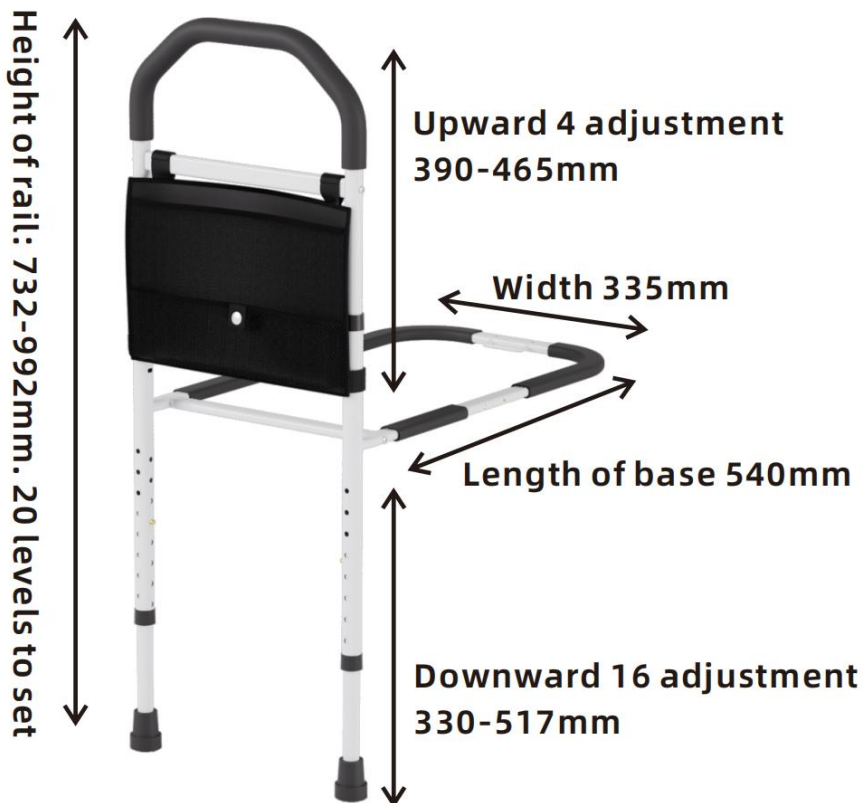

[Opslag] Horizontaal indrukken is niet toegestaan, voorzichtig behandelen.

[Geschraapt] Afvoer in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.

Optie - Bevestig de bedrail aan het bedframe (dit is niet verplicht)

De bedveiligheidsrail kan aan de onderkant van het bed worden bevestigd met

schroeven meegeleverd en zorgen voor meer stabiliteit voor gebruikers,

maar dat is niet noodzakelijk.

HET SCHOONMAKEN VAN DE BEDVEILIGHEIDSRAIL

Let op: Controleer de geschiktheid van de schoonmaakproducten voor gebruik. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of doeken, aangezien deze

kan het oppervlak permanent beschadigen en elke garantie.

1. Maak regelmatig schoon met zeepsop of warm water. Daarna Veeg het af met een droge handdoek.
6. Laat het product volledig drogen voordat u het gebruikt of opbergt.

Onze aftersales-service:

1. Als u schade aan het product of ontbrekende onderdelen ontdekt, neem dan contact op met onze klantenservice voor hulp.
2. Ons toegewijde klantenserviceteam staat klaar om al uw vragen of opmerkingen over het product te beantwoorden.
3. Wij streven ernaar om snelle en efficiënte ondersteuning te bieden om de tevredenheid van onze klanten te garanderen.
4. Voor vragen, garantieclaims of hulp kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Gebruiksaanwijzing voor bedhekken:

1. Zorg ervoor dat het bedhek correct is geïnstalleerd en stevig aan het bedframe is bevestigd voordat u het bedhek gebruikt.
2. Zorg ervoor dat het bedhek goed vastzit voordat u het gebruikt, wanneer u de hoogte of positie ervan aanpast.
3. Laat kinderen niet aan het bedhekje spelen of eraan hangen. Het is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen.
4. Wees voorzichtig bij het in en uit bed stappen en zorg ervoor dat het bedhek goed is gepositioneerd om ondersteuning te bieden.

Fabrikant: MOBILITY SOURCE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. **Adres:** 160 HEHENG ROAD, YANGHE TOWN, GAOMING DISTRICT, Foshan, Guangdong, 528513, CHINA.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

SÄNGHANDTAG

MODELL: LQX-110055

VEVOR Supportcenter





Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING :

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skada.

Använd försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:

31. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
32. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.
33. Använd endast som avsett.
34. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.
35. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.

Technical Parameters

Modell	maximal lastkapacitet
LQX-110055	300 pund

Bruksanvisning

ANVÄNDNING AV SÄKERHETSRÄCKA

Denna sängskyddsräcke är ett balanshjälpmedel. Det är utformat för att

hjälpa personer som är rörliga, men behöver hjälp för att ta sig in och gå upp ur sängen, eller omplacera dig i sängen på ett säkert sätt.

Sänggrinden är INTE

avsedd för personer med mycket begränsad rörlighet, eller som är permanent

sängliggande. Den är INTE utformad för att förhindra att personer ramlar ur sängen.



VARNINGAR OCH VARNINGAR

46. Se till att du läser och följer dessa instruktioner noggrant. Underlåtenhet att följa dem kan leda till skada.

47. Se till att alla delar är ordentligt monterade och att alla fjäderknappar är korrekt isatta i läge före användning.

48. Området mellan en sänggrind och en madrass skapar en risk för allvarlig, livshotande klämskador. Det är möjligt att en persons huvud, nacke, arm(ar), ben(ar) eller kropp fastnar. mellan madrassens sida och någon av sänggrindarna.

49. Madrassen måste ligga tätt mot hjälpstödet, utan mellanrum hela tiden.

Detta bör kontrolleras ofta – minst dagligen.

50. Madrassen måste ligga tätt mot hjälpstödet, utan mellanrum hela tiden.

Detta bör kontrolleras ofta – minst dagligen.


51. Använd ALDRIG om inte produkten sitter tätt mot madrassen utan mellanrum och minst 30 cm från huvud- och fotgavel styrelse.

52. Använd ALDRIG med barn.

53. Använd ALDRIG på småbarnssängar, våningssängar, vattensängar eller uppblåsbara sängar, sängar med mjukt komprimerbar bäddar, ledade sängar eller på sängar med madrass högre än 33 cm eller kortare än 17,8 cm. Använd ENDAST med twin-, queen size- och king size-sängar.

54. Produkten är en hjälpprodukt. Patienter utan autonom förmåga måste vara under uppsikt.

Bruksanvisning

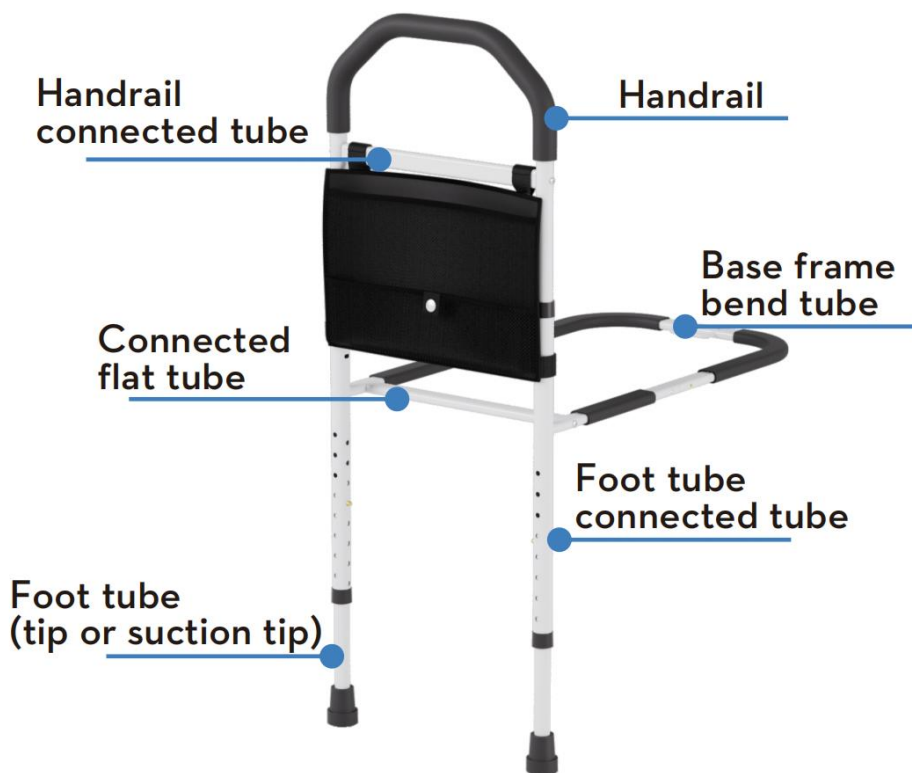

[Ansökan] Utformad för äldre och personer med benskador, ge nödvändigt stöd och stabilitet för en trygg och sund sova.

[Struktur] Den består huvudsakligen av ledstångsrör, ledstångsnedre

rör, förstärkt rörsvetskropp, böjsvetsning av basramen
kaross, svetskropp för basram.

[Funktion] T-formad sänggrind tillverkad av höghållfast kolfiber
stålrör med vit pulverlackerad yta. Höjden på
Ledstång och fotrör kan vara justerbara. Ledstångens höjd
har 4 nivåer att ställa in. Fotrörets höjd har 16 nivåer att ställa in. Mycket
bekväm att justera och använda.

[Specifikation]

1. Utseendet är ljust och rent, färgen är enhetlig, nej
synliga repor, sprickor, kanter, grader.
2. Höjdjusterbart räck: 390-465 mm.
- Fotrörets höjdjusterbarhet: 330-517 mm .

[Instruktion]

1. Öppna förpackningen och kontrollera om alla delar ingår,
som bilden nedan visar:



- ①. Fotrör (spets eller sugspets)
- ②. Ledstångrör
- ③. Anslutet platt rör

- ④. Fotrör anslutet rör-vänster
- ⑤. Fotrörsanslutet rör - Höger
- ⑥. Böjrör för basram
- ⑦. Förvaringspåse
- ⑧. Remmar
- ⑨. Opp-påse:



Opp bagx1



Tapping screwsx4




Screwsx2



Hexagonal wrenchx1


2. Ta ut fotröret som är anslutet - vänster och höger, anslutet platt rör, dra åt dem med hjälp av sexkantsskruvarna, som visas på bilden nedan 1:

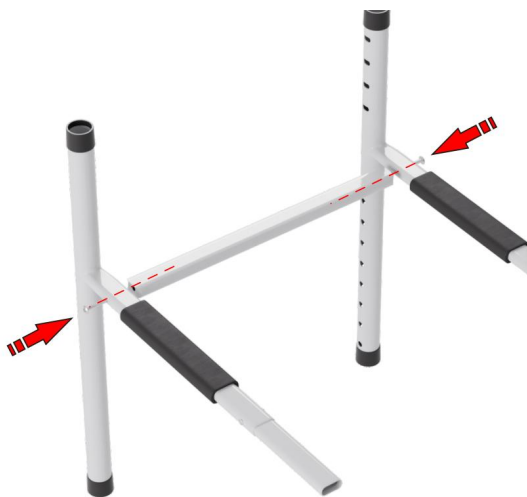

Picture ①

3. Efter att ledstångsröret har förts in i ledstångens anslutningsrör, stiftet poppar ut, vilket indikerar en säker fixering. visas i bilden nedan ②-1:

4. Efter att fotröret har satts in i

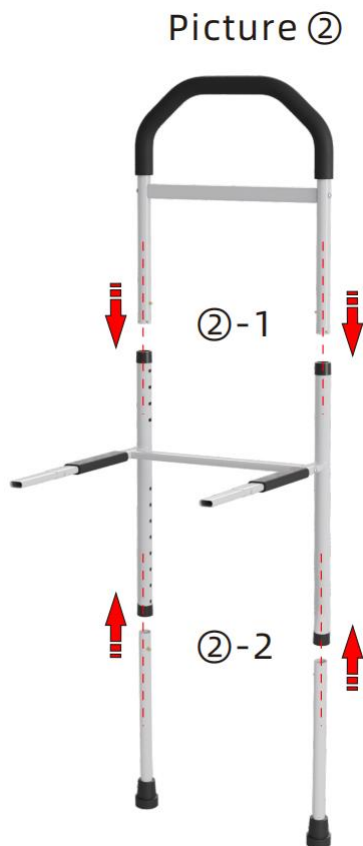


fotrörets anslutningsrör, stiftet lossnar ut, vilket indikerar en säker fixering, eftersom visas i bilden nedan ②-2:

5. Efter att fotrörets anslutna rör har förts in i fotröret anslutningsrörets svetskropp, stiftet hoppar ut, vilket indikerar en säker fixering, som visas på bilden nedan:



36. Montera förvaringspåsen.

[Höjdjustering] Justera stiftens position och justera ledstången till önskad höjd, som visas på bilden nedan:

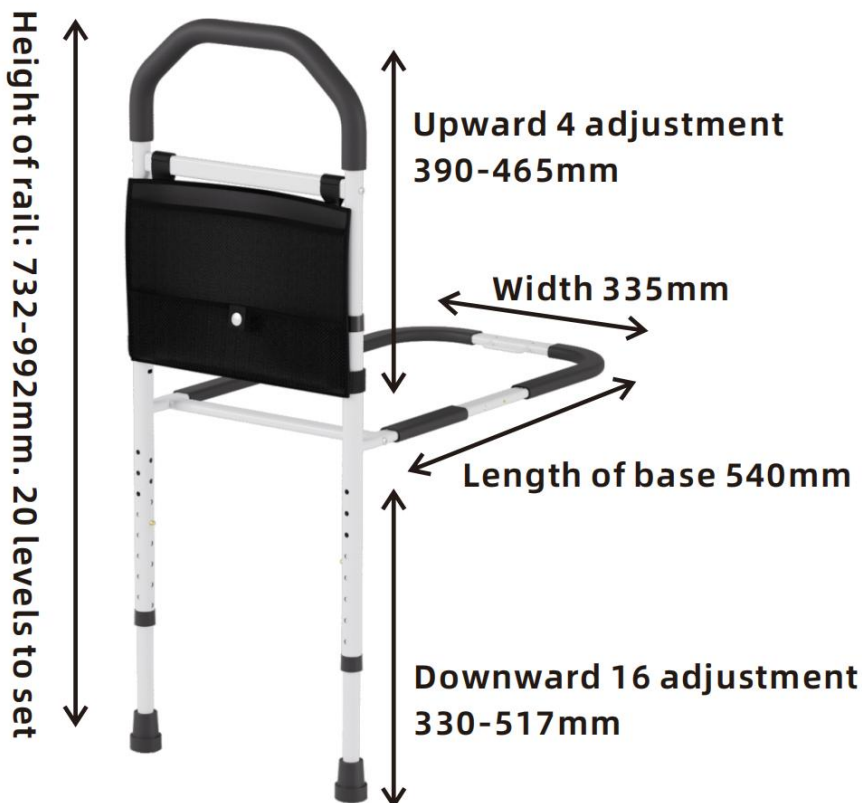

[Förvaring] Förbjuden att trycka horisontellt, hantera försiktigt.

[Skrapat] Avfallshantering i enlighet med lokala föreskrifter.

Alternativ - Fäst sänggrinden på sängramen (det är inte obligatoriskt)

Sängens säkerhetsräcke kan fästas vid sängens bas med medföljande skruvar och ger ökad stabilitet för användarna, men det är inte nödvändigt att göra.

RENGÖRING AV SÄNGSÄKERHETSÄNDEN

Obs: Kontrollera rengöringsprodukternas lämplighet före användning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor eftersom dessa kan permanent skada ytan och ogiltigförklara alla garantier.

1. Rengör regelbundet med tvålatten eller varmt vatten. Sedan

torka av den med en torr handduk.

7. Låt produkten torka helt före användning/förvaring.

Vår kundservice:

1. Om du upptäcker några produktskador eller saknade delar, vänligen kontakta vår kundtjänst för hjälp.
2. Vårt dedikerade kundtjänstteam finns tillgängligt för att svara på eventuella frågor eller funderingar du kan ha angående produkten.
3. Vi strävar efter att ge snabb och effektiv support för att säkerställa våra kunders nöjdhet.
4. Vid frågor, garantiärenden eller hjälp, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Användningsriktlinjer för sänggrind:

1. Se till att sänggrinden är korrekt installerad och ordentligt fäst vid sängramen före användning.
2. När du justerar sänggrindens höjd eller position, se till att den är ordentligt låst på plats före användning.
3. Låt inte barn leka eller hänga i sänggrinden. Den är endast avsedd för vuxna.
4. Var försiktig när du kliver i eller ur sängen och se till att sänggrinden är korrekt placerad för att ge stöd.

Tillverkare: MOBILITY SOURCE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. **Adress:**
160 HEHENG ROAD, YANGHE TOWN, GAOMING-DISTRIKTET, Foshan,
Guangdong, 528513, KINA.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ASA DE CAMA

MODELO: LQX-110055

Centro de soporte de VEVOR





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BED HANDLE



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA :

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

lesión.

Precauciones de uso

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

37. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.

38. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni lo acerquen.

Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

39. Úselo únicamente según lo previsto.

40. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

41. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar el producto.

Technical Parameters

Modelo	capacidad máxima de carga
LQX-110055	300 libras

Instrucciones de uso

APLICACIÓN DE LA BARANDILLA DE SEGURIDAD DE LA CAMA

Esta barandilla de seguridad para cama es un dispositivo de apoyo para el equilibrio. Está diseñada para

Ayudar a las personas que se desplazan, pero que necesitan ayuda para entrar.

y levantarse de la cama o reposicionarse en la cama de forma segura. La barandilla de la cama NO está

Destinado a personas con movilidad muy reducida o que se encuentran permanentemente

postrado en cama. NO está diseñado para evitar que las personas se caigan de la cama.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

55. Asegúrese de leer y seguir estas instrucciones atentamente. El incumplimiento podría provocar lesiones.

56. Asegúrese de que todas las piezas estén ensambladas de forma segura y que todos los botones de resorte estén correctamente colocados en su posición antes de usar.

57. El área entre una barandilla de cama de asistencia y el colchón crea una Posibilidad de atrapamiento grave y potencialmente mortal. Es posible que la cabeza, el cuello, los brazos, las piernas o el cuerpo de una persona queden atrapados. entre el costado del colchón y cualquiera de las barandillas de la cama.

58. El colchón debe estar bien ajustado contra la barandilla de ayuda, sin huecos en todo momento. Esto debe revisarse con frecuencia, al menos diariamente.

59. El colchón debe estar bien ajustado contra la barandilla de ayuda, sin huecos en todo momento. Esto debe revisarse con frecuencia, al menos

diariamente.


60.NUNCA lo use a menos que el producto esté bien ajustado contra el colchón. Sin espacios, y al menos a 12,5 pulgadas de la cabecera y el pie de cama. junta.

61.NUNCA usar con niños.

62.NUNCA lo use en camas para niños pequeños, literas, camas de agua o inflables, camas con suave y comprimible almohadillas, camas articuladas o en camas con colchón altura mayor a 13 pulgadas (33 cm) o menor a 7 pulgadas (17,8 cm). Úselo SOLO con camas individuales, queen y king size.

63.El producto es un producto auxiliar. Pacientes sin capacidad autónoma. Debe estar bajo supervisión.

Instrucciones de uso

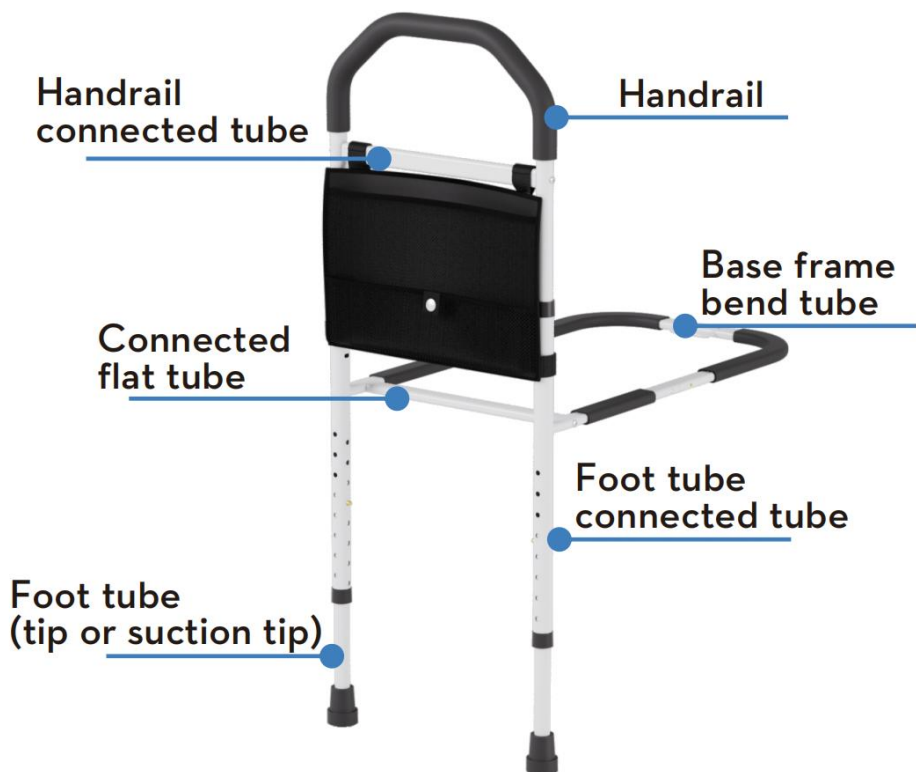

[Aplicación] Diseñado para personas mayores y personas con lesiones en las piernas,
 Proporcionar el apoyo y la estabilidad necesarios para un embarazo sano y salvo.
 dormir.

[Estructura] Se compone principalmente de tubo de pasamanos y pasamanos inferior.
 Tubo, cuerpo de soldadura de tubo reforzado, soldadura de curvatura de bastidor base
 carrocería, bastidor base, soldadura de carrocería.

[Característica] La barandilla de noche estilo T está hecha de carbono de alta resistencia.
 Tubo de acero con superficie recubierta de polvo blanco. La altura de la
 El pasamanos y el reposapiés son ajustables. La altura del pasamanos...

Tiene 4 niveles para ajustar. La altura del tubo del pie tiene 16 niveles para ajustar. Muy

Cómodo de ajustar y usar.

[Especificación]

1. La apariencia es brillante y limpia, el color es uniforme, sin arañazos evidentes, grietas, bordes y rebabas.

2. Rango ajustable de altura del pasamanos: 390-465 mm.

Rango ajustable de altura del tubo del pie: 330-517 mm .

[Instrucción]

1. Abra el paquete y compruebe si todas las piezas están incluidas.

Como se muestra en la siguiente imagen:



1. Tubo de pie (punta o punta de succión)

②. Tubo de pasamanos

3. Tubo plano conectado

4. Tubo de pie conectado al tubo izquierdo

5. Tubo de pie conectado al tubo derecho

⑥. Tubo curvado del marco base

5. Bolsa de almacenamiento

⑧. Correas

⑨. Bolsa de polipropileno:



Opp bagx1



Tapping screwsx4



Screwsx2




Hexagonal wrenchx1

2. Saque el tubo del pie conectado a los tubos izquierdo y derecho, conectados

tubo plano, apretándolos mediante los tornillos hexagonales, como se muestra

en la imagen de abajo ①:

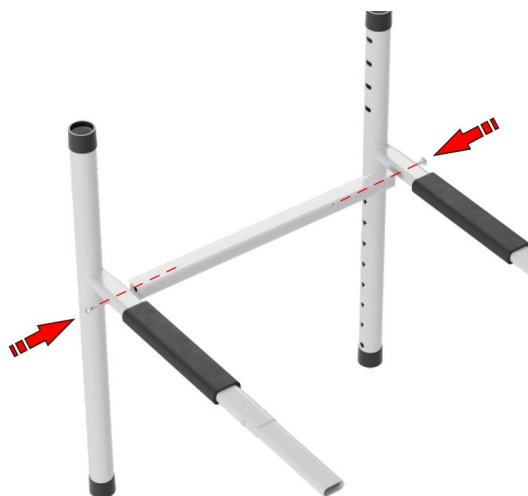


Picture ①

3. Después de insertar el tubo del pasamanos el tubo de conexión del pasamanos, el pasado sobresale, lo que indica una fijación segura.


Se muestra en la siguiente imagen ②-1:

4. Después de insertar el tubo del pie en el Tubo de conexión del tubo del pie, el pasador : hacia fuera, indicando una fijación segura, con

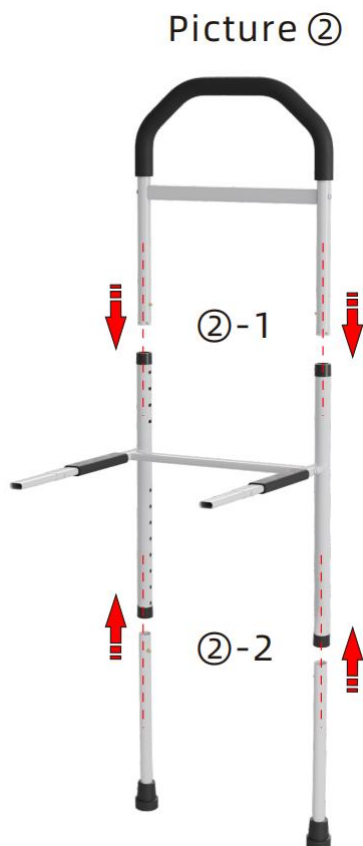


Se muestra en la siguiente imagen ②-2:

5. Después de insertar el tubo conectado al tubo del pie, Cuerpo de soldadura del tubo de conexión, el pasador sobresale, lo que indica que está seguro fijación, como se muestra en la siguiente imagen:

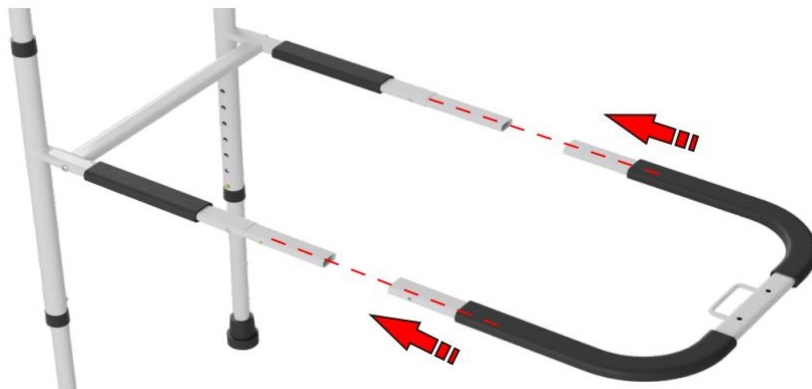

42. Instale la bolsa de almacenamiento.

[Ajuste de altura] Ajuste la posición de los pasadores y ajuste la Pasamanos a la altura deseada, como se muestra en la siguiente imagen:

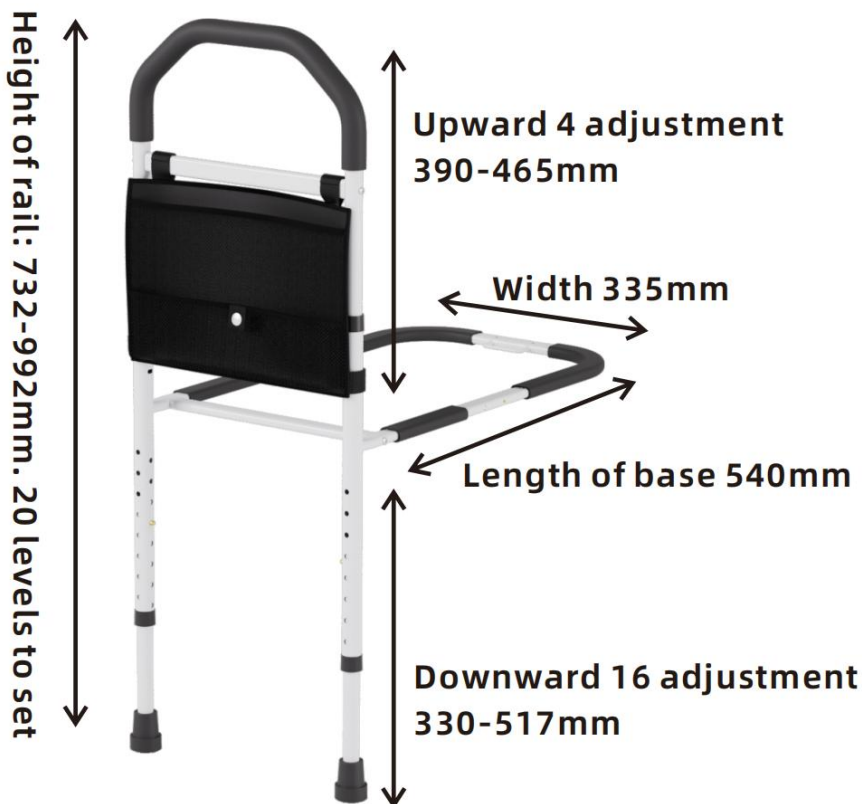

[Almacenamiento] Prohibido presionar horizontalmente, manipular con cuidado.

[Raspado] Eliminación de acuerdo con las leyes locales.

Opción - Fijar la barandilla de la cama al marco de la cama (no es obligatorio)

La barandilla de seguridad de la cama se puede fijar a la base de la cama con

Se proporcionan tornillos y proporcionan mayor estabilidad para los usuarios.

pero no es necesario hacerlo.

LIMPIEZA DE LA BARANDILLA DE SEGURIDAD DE LA CAMA

Nota: Por favor, compruebe la idoneidad de los productos de limpieza.

antes de usar. No utilice limpiadores ni paños abrasivos, ya que estos

Podría dañar permanentemente la superficie e invalidar cualquier garantía.

1. Limpie regularmente con agua jabonosa o agua tibia. Luego Límpielo con una toalla seca.

8. Deje que el producto se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo.

Nuestro Servicio Postventa:

1. Si descubre algún daño en el producto o piezas faltantes, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda.

2. Nuestro dedicado equipo de atención al cliente está disponible para abordar cualquier pregunta o inquietud que pueda tener con respecto al producto.

3. Nos esforzamos por brindar un soporte rápido y eficiente para garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

4. Para cualquier consulta, reclamo de garantía o asistencia, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Instrucciones de uso para la barandilla de cama:

1. Asegúrese de que la barandilla de la cama esté correctamente instalada y fijada de forma segura al marco de la cama antes de usarla.

2. Al ajustar la altura o la posición de la barandilla de la cama, asegúrese de que esté bien fijada en su lugar antes de usarla.

3. No permita que los niños jueguen ni se cuelguen de la barandilla de la cama. Es solo para adultos.

4. Tenga cuidado al entrar o salir de la cama, asegurándose de que la barandilla de la cama esté colocada correctamente para brindar apoyo.

Fabricante: MOBILITY SOURCE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. **Dirección:** 160 HEHENG ROAD, YANGHE TOWN, GAOMING DISTRICT, Foshan,

Guangdong, 528513, CHINA.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

MANIGLIA DEL LETTO

MODELLO: LQX-110055

Centro di supporto VEVOR



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BED HANDLE



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO :

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi danni. infortunio.

Precauzioni d'uso

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

43. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.

44. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.

Si prega di tenere i pezzi di ricambio di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.

45. Utilizzare solo come previsto.

46. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

47. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti per non graffiare il prodotto.

Technical Parameters

Modello	capacità di carico massima
---------	----------------------------

LQX-110055	3 00 libbre
Numero di registrazione FDA: 3016734231	

Istruzioni per l'uso

APPLICAZIONE DELLA SPONDA DI SICUREZZA DEL LETTO

Questa sponda di sicurezza per letto è un dispositivo di equilibrio assistito. È progettato per assistere le persone che sono mobili, ma necessitano di assistenza per entrare e scendere dal letto, o riposizionarsi nel letto in modo sicuro. La sponda del letto **NON** è destinato a persone con mobilità molto ridotta o che sono permanentemente costretti a letto. **NON** è progettato per impedire alle persone di cadere dal letto.



PRECAUZIONI e AVVERTENZE

64. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni. La mancata osservanza può causare lesioni.

65. Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i componenti siano montati saldamente e che tutti i pulsanti a molla siano correttamente inseriti in posizione.

66. L'area tra una sponda del letto assistita e il materasso crea un rischio di intrappolamento grave e pericoloso per la vita. È possibile che la testa, il collo, le braccia, le gambe o il corpo di una persona rimangano incastrati tra il lato del materasso e una qualsiasi delle sponde del letto.

67. Il materasso deve essere ben aderente al corrimano di supporto, senza fessure in ogni momento. Questo dovrebbe essere controllato frequentemente, almeno una volta al giorno.

68. Il materasso deve essere ben aderente al corrimano di supporto, senza fessure in ogni momento. Questo dovrebbe essere controllato

frequentemente, almeno una volta al giorno.


69. NON utilizzare MAI il prodotto se non è ben aderente al materasso senza spazi vuoti e almeno 12,5 pollici dalla testiera e dai piedi asse.

70. NON usare MAI con i bambini.

71. NON utilizzare MAI su letti per bambini, letti a castello, letti ad acqua o gonfiabili, letti con morbido e comprimibile materassini, letti articolati o su letti con materasso altezza superiore a 13 pollici (33 cm) o inferiore a 7 pollici (17,8 cm). Utilizzare SOLO con letti singoli, queen size e king size.

72. Il prodotto è un prodotto ausiliario. Pazienti senza capacità autonoma deve essere sotto supervisione.

Istruzioni per l'uso

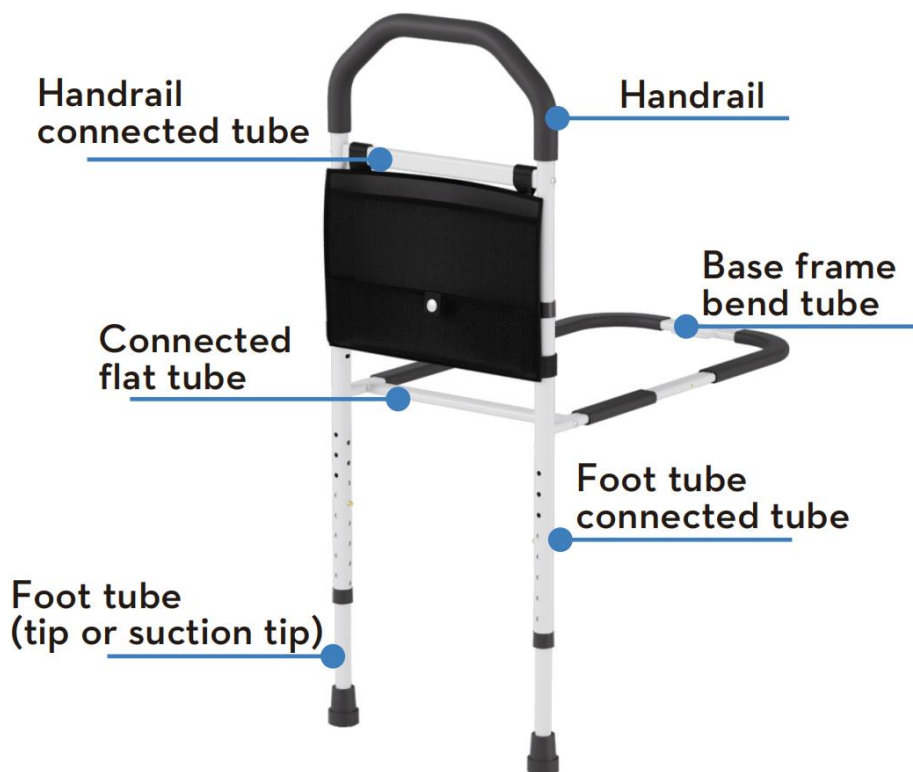

[Applicazione] Progettato per gli anziani e per chi ha lesioni alle gambe,

fornendo il supporto e la stabilità necessari per un soggiorno sano e salvo sonno.

[Struttura] È composta principalmente da tubo corrimano, corrimano inferiore

tubo, corpo di saldatura del tubo rinforzato, saldatura di piega del telaio di base

corpo, corpo di saldatura del telaio di base.

[Caratteristica] La sponda del letto a T è realizzata in carbonio ad alta resistenza

tubo di acciaio con superficie verniciata a polvere bianca. L'altezza del

Il corrimano e il tubo del piede sono regolabili. L'altezza del corrimano

ha 4 livelli da impostare. l'altezza del tubo del piede ha 16 livelli da impostare. Molto

comodo da regolare e utilizzare.

[Specifiche]

1. L'aspetto è luminoso e pulito, il colore è uniforme, no

graffi evidenti, crepe, bordi, sbavature.

2. Altezza regolabile del corrimano: 390-465 mm.

Altezza regolabile del tubo del piede: 330-517 mm .

[Istruzioni]

1. Aprire la confezione e verificare che siano presenti tutti i componenti, come mostra l'immagine qui sotto:



1. Tubo per il piede (punta o punta di aspirazione)

2. Tubo corrimano

3. Tubo piatto collegato

④. Tubo del piede collegato al tubo sinistro

⑤. Tubo del piede collegato al tubo destro

⑥. Tubo piegato del telaio di base

⑦. Borsa portaoggetti

⑧. Cinghie

⑨. Sacchetto di carta:



Opp bagx1



Tapping screwsx4




Screwsx2




Hexagonal wrenchx1

2. Estrarre il tubo del piede collegato al tubo sinistro e destro, collegato tubo piatto, serrandoli tramite le viti esagonali, come mostrato nella figura sottostante ①:

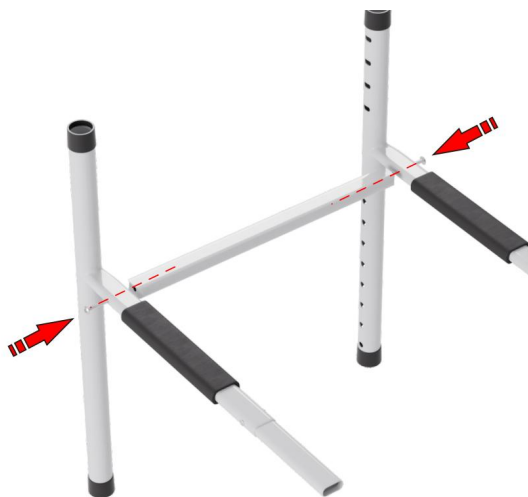


Picture ①

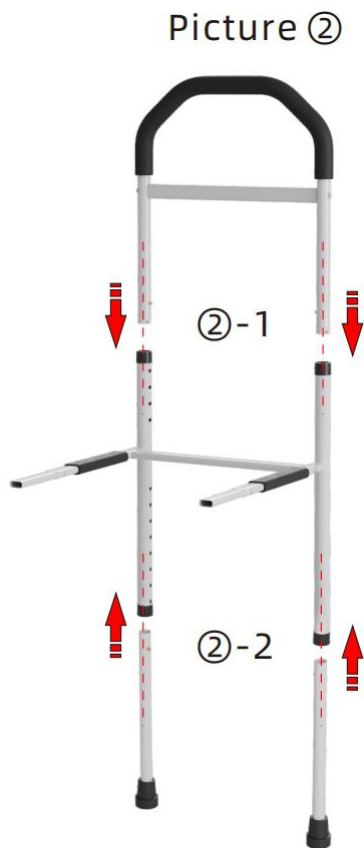

3. Dopo aver inserito il tubo del corrimano il tubo di collegamento del corrimano, il perno salta fuori, indicando una fissazione sicura. come mostrato nella figura sottostante ②-1:

4. Dopo che il tubo del piede è stato inserito nel tubo di collegamento del tubo del piede, il perno salta fuori, indicando una fissazione sicura, come mostrato nella figura sottostante ②-2:


5. Dopo aver collegato il tubo del piede, il tubo è inserito nel tubo del piede corpo di saldatura del tubo di collegamento, il perno fuoriesce, indicando una sicurezza fissazione, come mostrato nell'immagine sottostante:

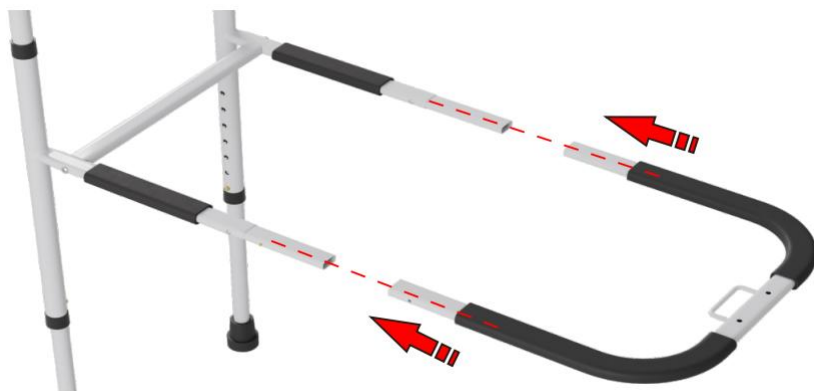

48. Installare la borsa portaoggetti.

[Regolazione dell'altezza] Regolare la posizione dei perni e regolare l'altezza

corrimano all'altezza desiderata, come mostrato nell'immagine sottostante:

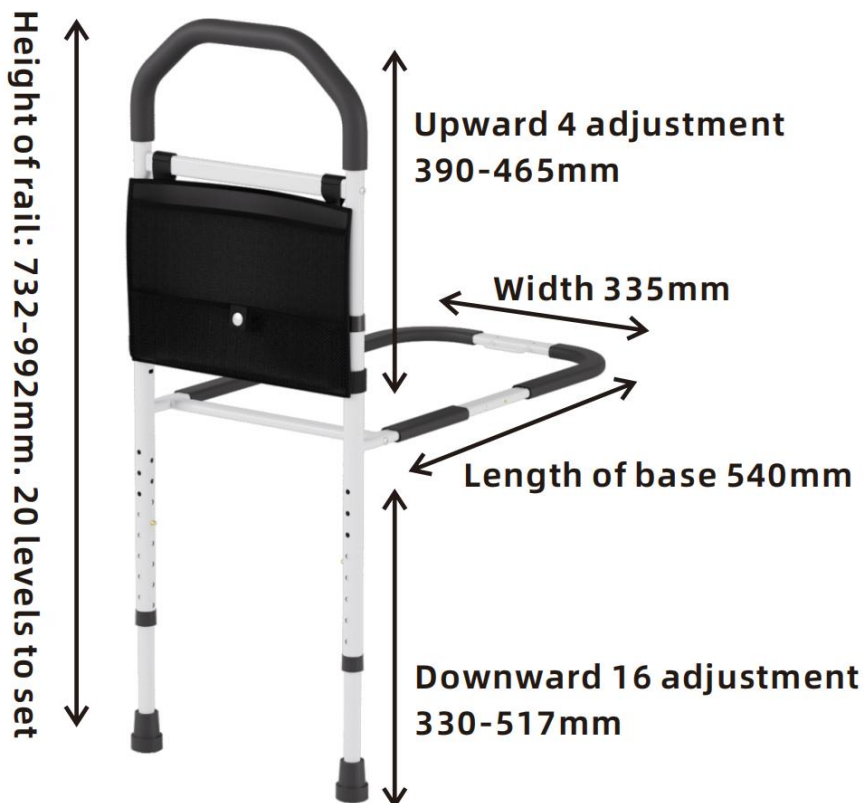

[Conservazione] Vietato premere orizzontalmente, maneggiare con cura.

[Raschiato] Smaltimento in conformità alle leggi locali.

Opzione - Fissare la sponda del letto al telaio del letto (non è obbligatorio)

La sponda di sicurezza del letto può essere fissata sulla base del letto con

viti fornite e garantiscono una maggiore stabilità per gli utenti, ma non è necessario farlo.

PULIZIA DELLA SPONDA DI SICUREZZA DEL LETTO

Nota: verificare l'idoneità dei prodotti per la pulizia prima dell'uso. Non utilizzare detergenti o panni abrasivi poiché questi

potrebbe danneggiare permanentemente la superficie e invalidare qualsiasi garanzia.

1. Pulire regolarmente con acqua saponata o acqua tiepida. Quindi asciugarlo con un panno asciutto.

9. Lasciare asciugare completamente il prodotto prima dell'uso/conservazione.

Il nostro servizio post-vendita:

1. Se riscontri danni al prodotto o parti mancanti, contatta il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.

2. Il nostro team dedicato al servizio clienti è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda o dubbio tu possa avere riguardo al prodotto.

3. Ci impegniamo a fornire un supporto rapido ed efficiente per garantire la soddisfazione dei nostri clienti.

4. Per qualsiasi domanda, richiesta di garanzia o assistenza, contatta il nostro servizio clienti.

Linee guida per l'utilizzo delle sponde del letto:

1. Prima dell'uso, assicurarsi che la sponda del letto sia installata correttamente e fissata saldamente al telaio del letto.

2. Quando si regola l'altezza o la posizione della sponda del letto, assicurarsi che sia bloccata saldamente in posizione prima dell'uso.

3. Non permettere ai bambini di giocare o appendersi alla sponda del letto. È destinata esclusivamente all'uso da parte di adulti.

4. Prestare attenzione quando si sale o si scende dal letto, assicurandosi che la sponda del letto sia posizionata correttamente per fornire supporto.

Produttore: MOBILITY SOURCE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. **Indirizzo:** 160 HEHENG ROAD, YANGHE TOWN, GAOMING DISTRICT, Foshan, Guangdong, 528513, CINA.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW

2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

