



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HUMAN BODY TEACHING MODELS

USER MANUAL

MODEL:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HUMAN BODY TEACHING
MODELS

MODEL:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Read these instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury.
2. After use, please assemble all the parts and keep them vertically.
3. Avoid high temperature and direct sunlight.
4. Remove minor stains with neutral detergent. The use of alcohol, benzene and other substances may damage the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETER

Model	LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3
Type	Injection and blood drawing exercise kit
Arm Material	PVC

DETAILED LIST

LD-HS1	Arm	1	
	Nursing Care Pad	1	
	Syringe 1ml	1	
	Syringe 2.5ml	1	
	Syringe 5ml	1	



	Syringe 10ml	1	
	Scalp Needle	3	
	Infusion Bottle	2	
	Gloves	10 pairs	
	Indwelling Needle	2	
	Blood Collection Beedle	2	
	Vacuum Vessel 5ml	2	
	Blood Powder	1	
	Tourniquet	1	
	Stents	1	
	Storage Bag	1	
LD-HS2	Arm	1	
	Nursing Care Pad	1	
	Syringe 1ml	1	
	Syringe 2.5ml	1	
	Syringe 5ml	1	

	Scalp Needle	1	
	Infusion Bottle	1	
	Gloves	10 pairs	
	Indwelling Needle	1	
	Blood Powder	1	
	Tourniquet	1	
	Stents	1	
	Storage Bag	1	
LD-HS3	Arm	1	
	Nursing Care Pad	1	
	Syringe 5ml	1	
	Infusion Bottle	1	
	Blood Powder	1	
	Tourniquet	1	

	Stents	1	
	Storage Bag	1	

INSTRUCTIONS

Installation method:

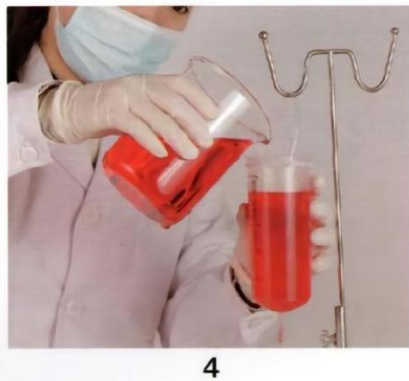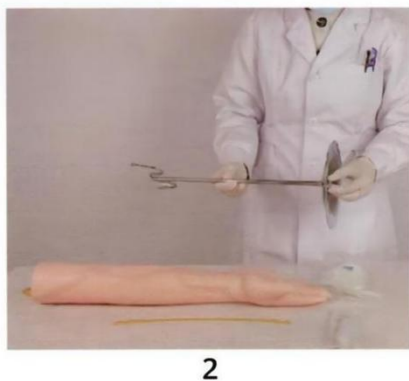


Step 1: Take the arm model, infusion tube, bracket and other accessories out of the box.



Step 2: Tighten the fixing nut to fix the bracket on the hole position of the tray.

Step 3: Blood simulation: add red powder and water to prepare red ink, and then pour it into the hanging bottle (or container)


Blood draw steps:

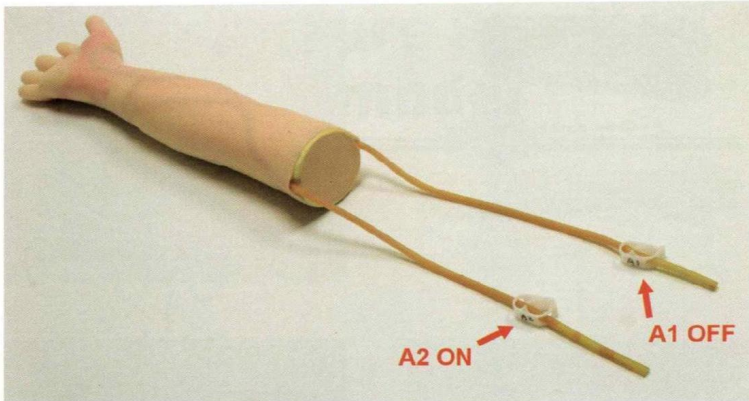

Step 1: Close one of the pipe clamps (A1) on the arm

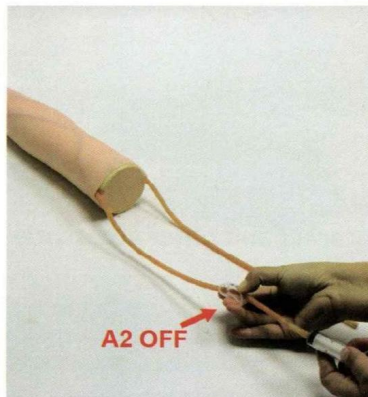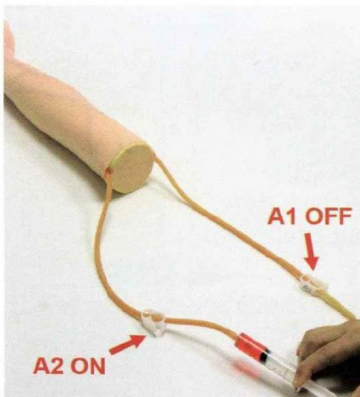

Step 2: After the syringe draws the red ink, fill the other hose (A2) with red ink, and immediately close the pipe clamp(A2) .

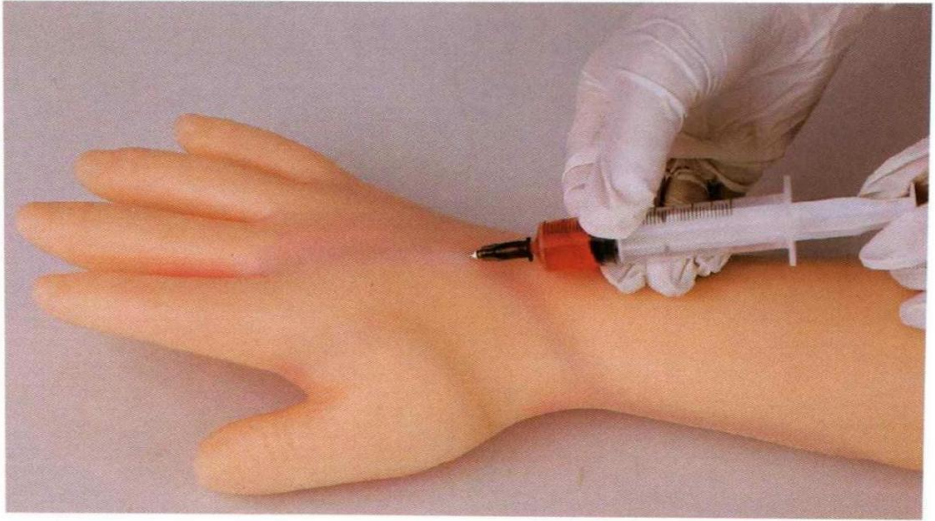

Step 3: Hold an empty syringe and stab it into one of the veins on the arm. Draw blood, and you can see the red liquid entering the syringe.


Note:

If the red ink does not enter the syringe.


The reason as follow:

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;


Blood Transfusion:

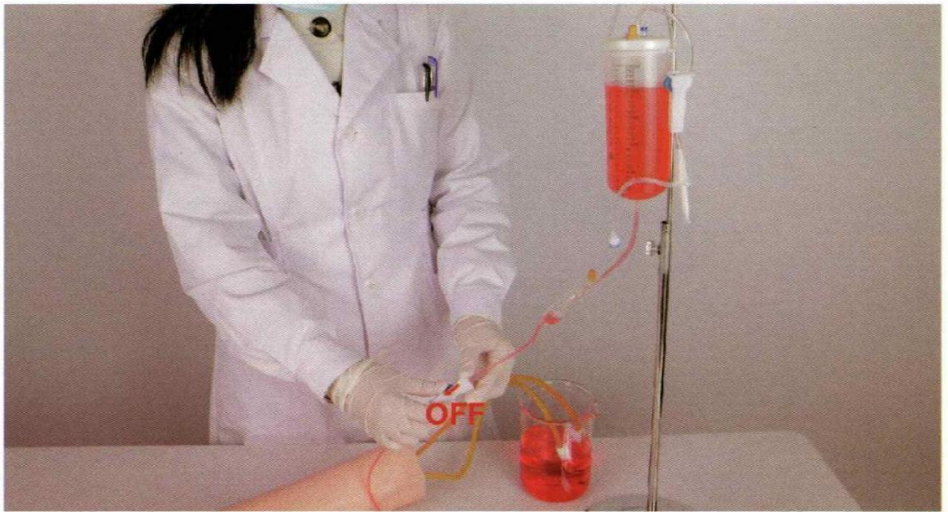

Step 1: First, the infusion bottle is filled with red ink, hanging it on a stand then turn off the flow regulator.

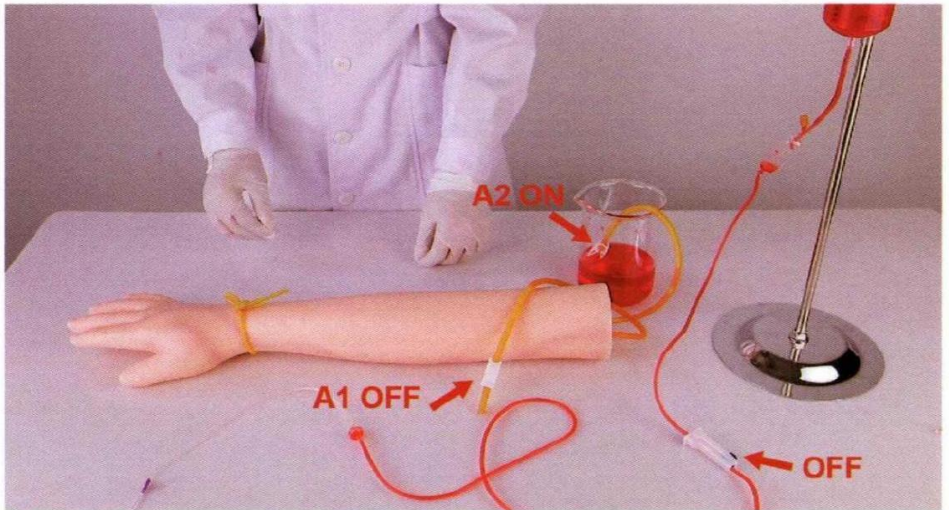

Step 2: Close the pipe clamp(A1) ; open the pipe clamp(A2).

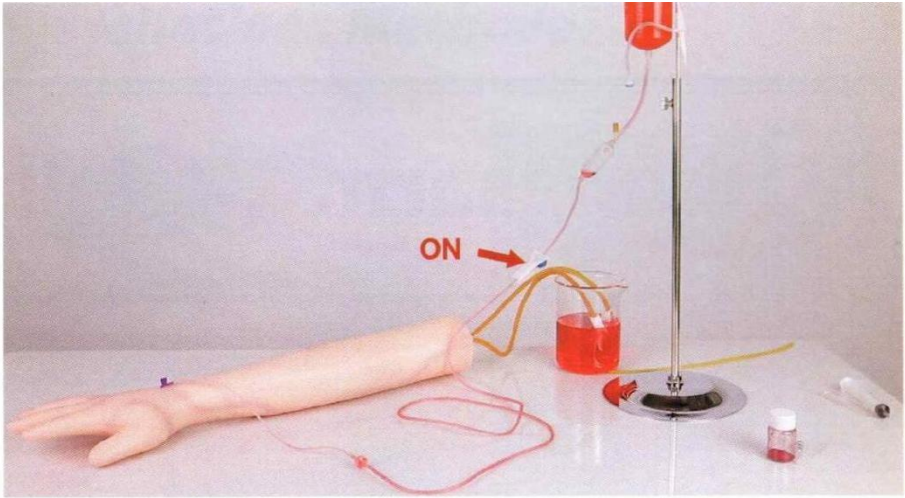


Step 3: The butterfly needle is accurately inserted into the vein of the arm, turn on the flow regulator, the red fluid flows out of the venous tube A2 after circulating in the venous tube. (Use the appropriate container to liquid)

Note:

If the red ink does not outflow from the vein A2.

The reason is as follow:

- The vein was completely punctured;
- The injected red ink is insufficient;
- The A1 pipe clamp isn't hung on the bracket (need hang it as picture show)

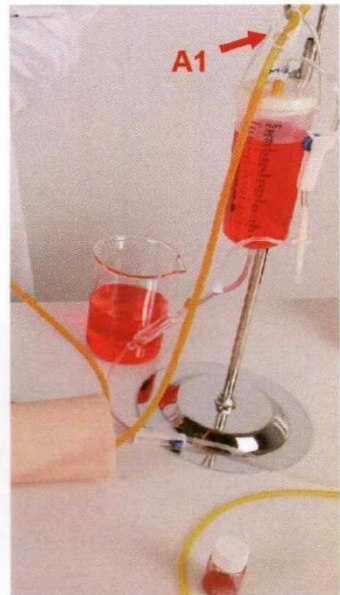

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MODÈLES D'ENSEIGNEMENT DU CORPS HUMAIN

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ENSEIGNEMENT SUR LE CORPS HUMAIN

MODÈLES

MODÈLE : LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

1. Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.
2. Après utilisation, veuillez assembler toutes les pièces et les conserver verticalement.
3. Évitez les températures élevées et la lumière directe du soleil.
4. Enlevez les taches mineures avec un détergent neutre. L'utilisation d'alcool, de benzène et d'autres substances peuvent endommager le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3
Taper	Kit d'exercices d'injection et de prise de sang
Matériau du bras	PVC

LISTE DÉTAILLÉE

LD-HS1	Bras	1	
	Coussin d'allaitement	1	
	Seringue 1 ml	1	
	Seringue 2,5 ml	1	
	Seringue 5 ml	1	




	Seringue 10 ml	1	
	Aiguille pour cuir chevelu	3	
	Bouteille d'infusion	2	
	Gants	10 paires	
	Aiguille à demeure	2	
	Prise de sang Beedle	2	
	Récepteur sous vide 5 ml	2	
	Poudre de sang	1	
	Tourniquet	1	
	Stents	1	
	Sac de rangement	1	
LD-HS2	Bras	1	
	Coussin d'allaitement	1	
	Seringue 1 ml	1	
	Seringue 2,5 ml	1	
	Seringue 5 ml	1	

	Aiguille pour cuir chevelu	1	
	Bouteille d'infusion	1	
	Gants	10 paires	
	Aiguille à demeure	1	
	Poudre de sang	1	
	Tourniquet	1	
	Stents	1	
	Sac de rangement	1	
LD-HS3	Bras	1	
	Coussin d'allaitement	1	
	Seringue 5 ml	1	
	Bouteille d'infusion	1	
	Poudre de sang	1	
	Tourniquet	1	

	Stents	1	
	Sac de rangement	1	

INSTRUCTIONS

Méthode d'installation :

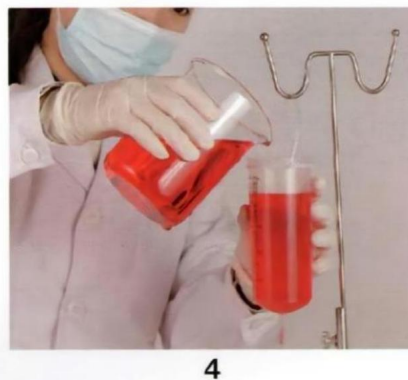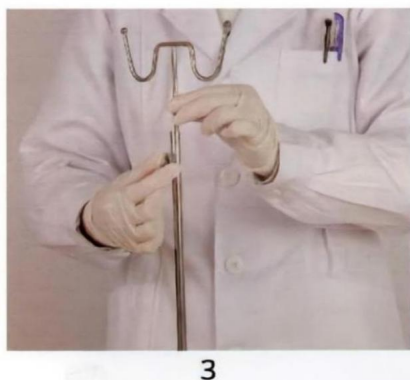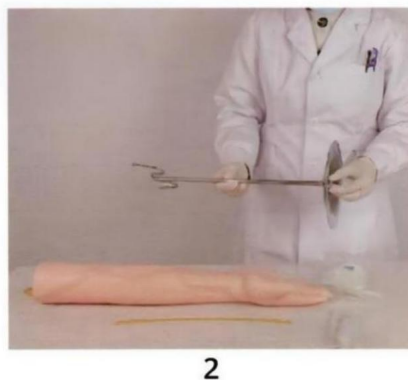


Step 1: Take the arm model, infusion tube, bracket and other accessories out of the box.



Step 2: Tighten the fixing nut to fix the bracket on the hole position of the tray.

Step 3: Blood simulation: add red powder and water to prepare red ink, and then pour it into the hanging bottle (or container)


Étapes de la prise de sang :

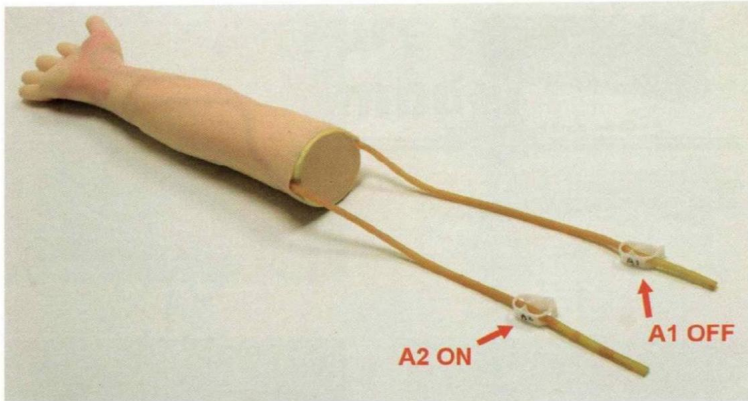

Step 1: Close one of the pipe clamps (A1) on the arm

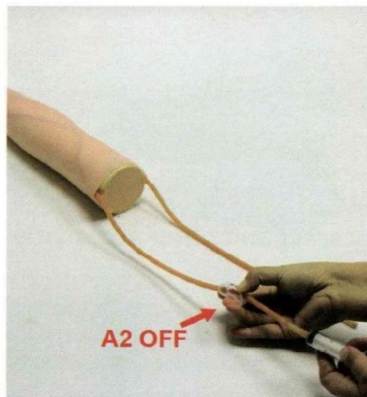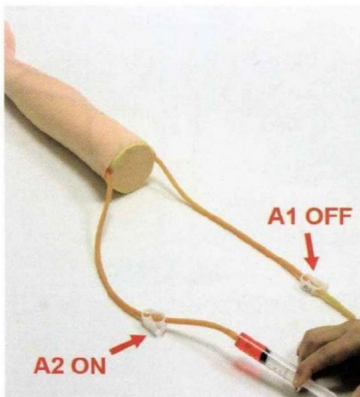

Step 2: After the syringe draws the red ink, fill the other hose (A2) with red ink, and immediately close the pipe clamp(A2) .

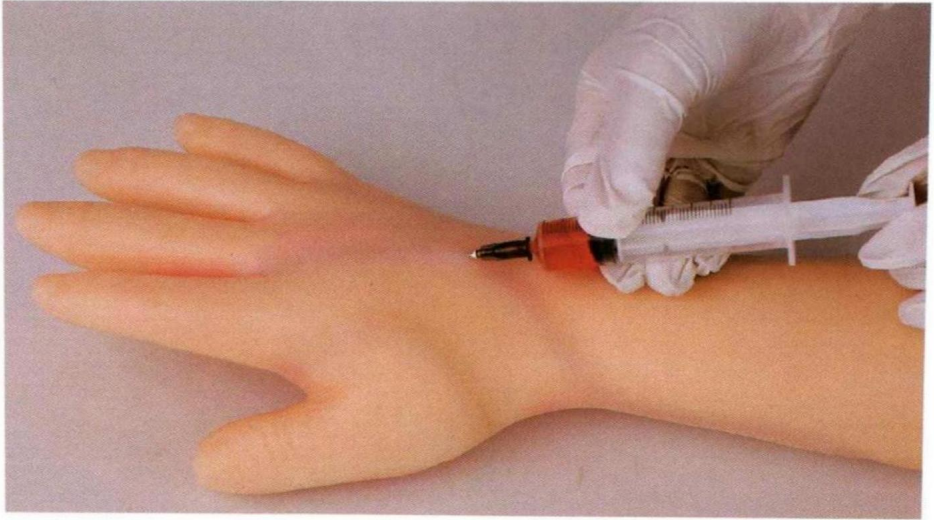

Step 3: Hold an empty syringe and stab it into one of the veins on the arm. Draw blood, and you can see the red liquid entering the syringe.


Note:

If the red ink does not enter the syringe.


The reason as follow:

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;


Transfusion sanguine :

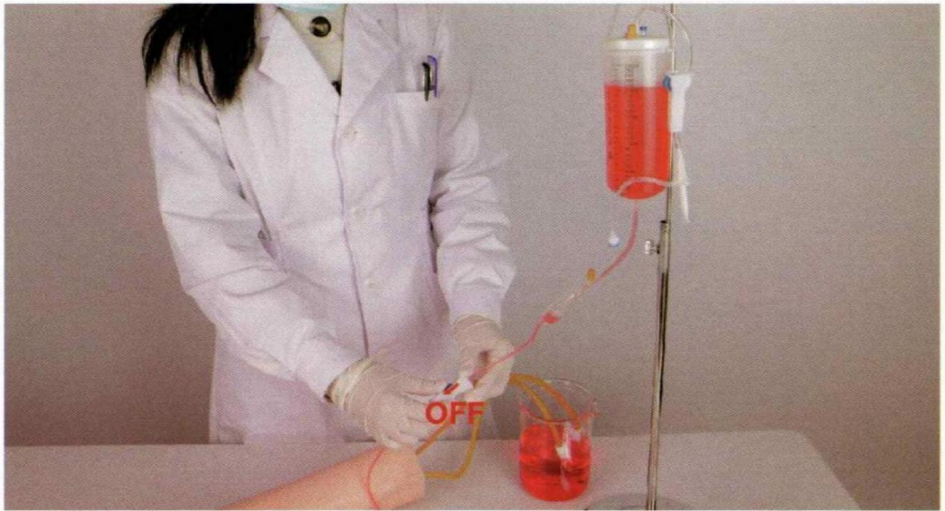

Step 1: First, the infusion bottle is filled with red ink, hanging it on a stand then turn off the flow regulator.

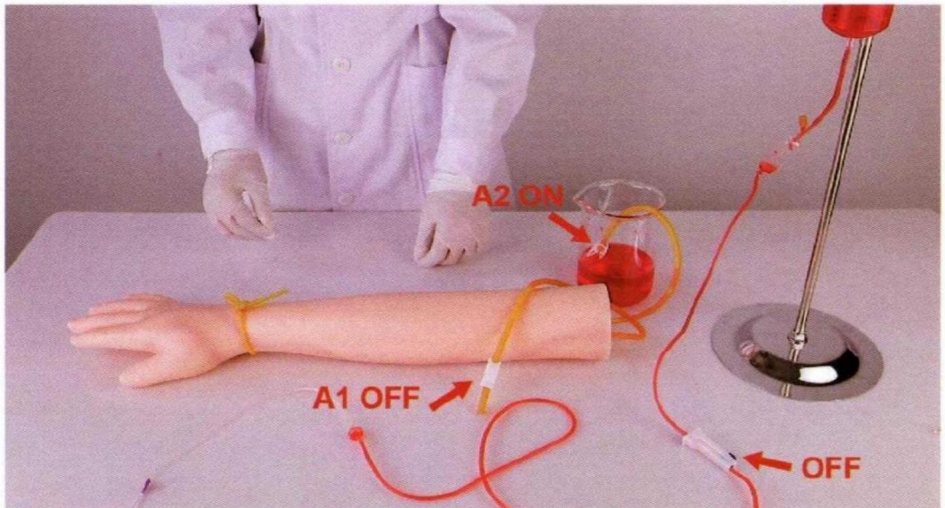

Step 2: Close the pipe clamp(A1) ; open the pipe clamp(A2).

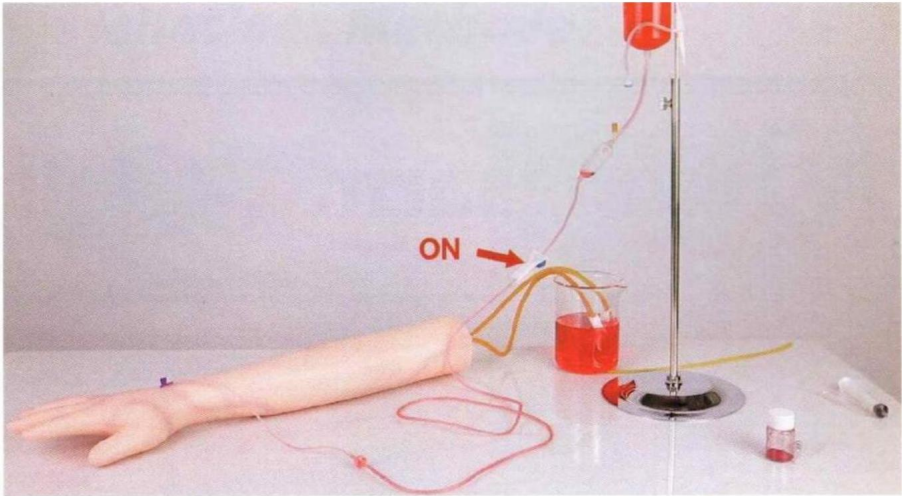

Step 3: The butterfly needle is accurately inserted into the vein of the arm, turn on the flow regulator, the red fluid flows out of the venous tube A2 after circulating in the venous tube. (Use the appropriate container to liquid)

Note:

If the red ink does not outflow from the vein A2.

The reason is as follow:

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;
- c. The A1 pipe clamp isn't hung on the bracket (need hang it as picture show)



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LEHRMODELLE FÜR DEN MENSCHLICHEN KÖRPER

BENUTZERHANDBUCH

MODELL:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lehre über den menschlichen Körper

MODELLE

MODELL:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1. Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es
kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Nach dem Gebrauch bitte alle Teile zusammenbauen und senkrecht lagern.
3. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.
4. Kleinere Flecken mit neutralem Reinigungsmittel entfernen. Die Verwendung von Alkohol, Benzol
und andere Substanzen können das Produkt beschädigen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKTPARAMETER

Modell	LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3
Typ	Übungsset zum Spritzen und Blutabnehmen
Material Bügel	aus PVC

DETAILLIERTE LISTE

LD-HS1	Arm	1	
	Stillunterlage	1	
	Spritze 1ml	1	
	Spritze 2,5ml	1	
	Spritze 5ml	1	




	Spritze 10ml	1	
	Kopfhautnadel	3	
	Infusionsflasche	2	
	Handschuhe	10 Paare	
	Dauernadel	2	
	Blutentnahme Beedle	2	
	Vakuumgefäß 5ml	2	
	Blutpulver	1	
	Aderpresse	1	
	Stents	1	
	Aufbewahrungstasche	1	
LD-HS2	Arm	1	
	Stillunterlage	1	
	Spritze 1ml	1	
	Spritze 2,5ml	1	
	Spritze 5ml	1	

	Kopfhautnadel	1	
	Infusionsflasche	1	
	Handschuhe	10 Paare	
	Dauernadel	1	
	Blutpulver	1	
	Aderpresse	1	
	Stents	1	
	Aufbewahrungstasche	1	
LD-HS3	Arm	1	
	Stillunterlage	1	
	Spritze 5ml	1	
	Infusionsflasche	1	
	Blutpulver	1	
	Aderpresse	1	

	Stents	1	
	Aufbewahrungstasche	1	

ANWEISUNGEN

Installationsmethode:

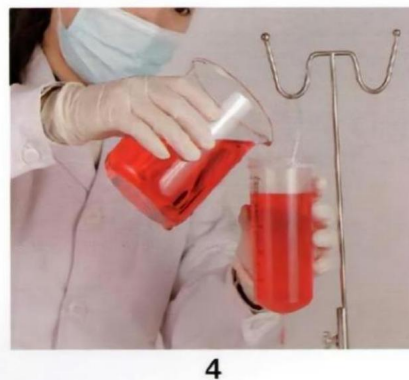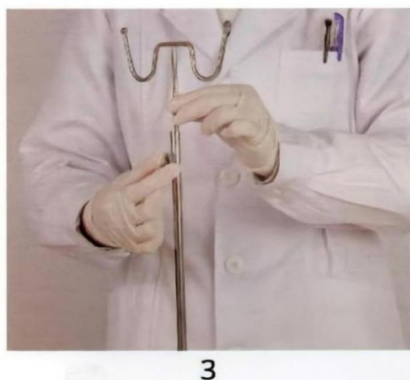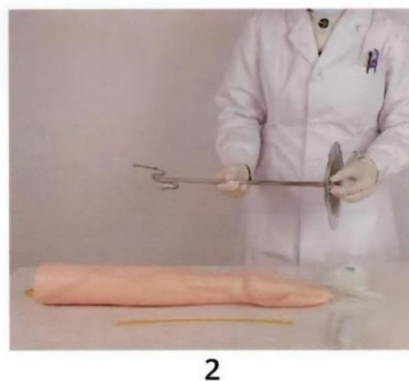


Step 1: Take the arm model, infusion tube, bracket and other accessories out of the box.



Step 2: Tighten the fixing nut to fix the bracket on the hole position of the tray.

Step 3: Blood simulation: add red powder and water to prepare red ink, and then pour it into the hanging bottle (or container)


Schritte zur Blutentnahme:

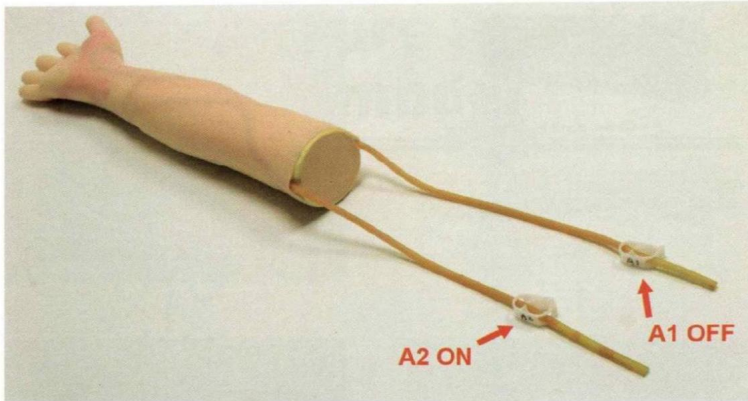

Step 1: Close one of the pipe clamps (A1) on the arm

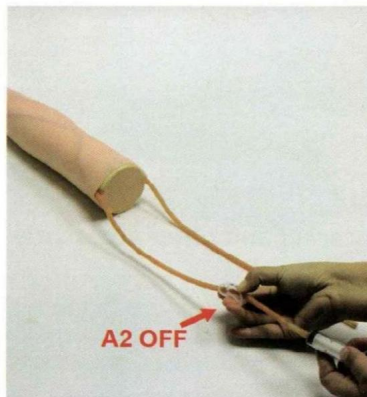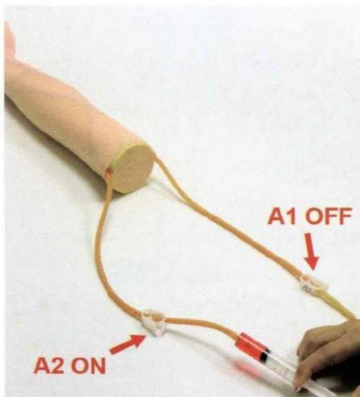

Step 2: After the syringe draws the red ink, fill the other hose (A2) with red ink, and immediately close the pipe clamp(A2) .

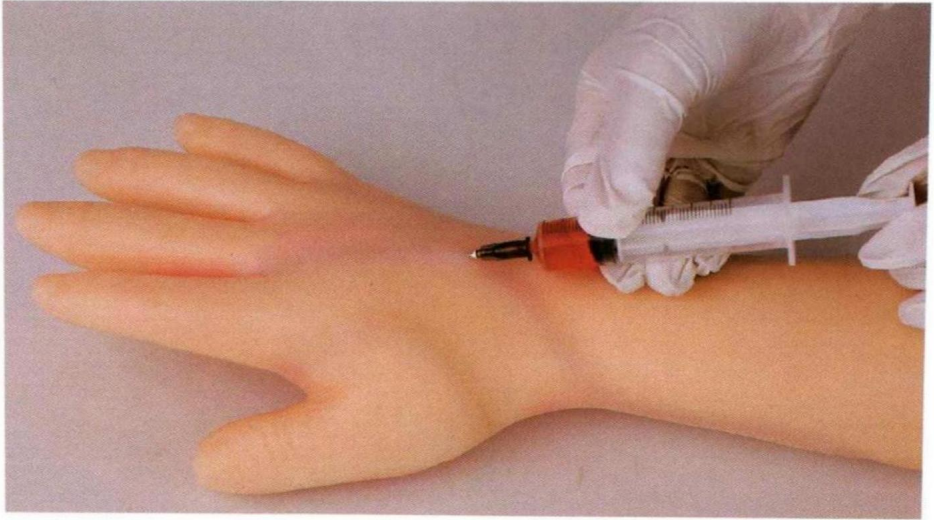

Step 3: Hold an empty syringe and stab it into one of the veins on the arm. Draw blood, and you can see the red liquid entering the syringe.


Note:

If the red ink does not enter the syringe.


The reason as follow:

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;


Bluttransfusion:

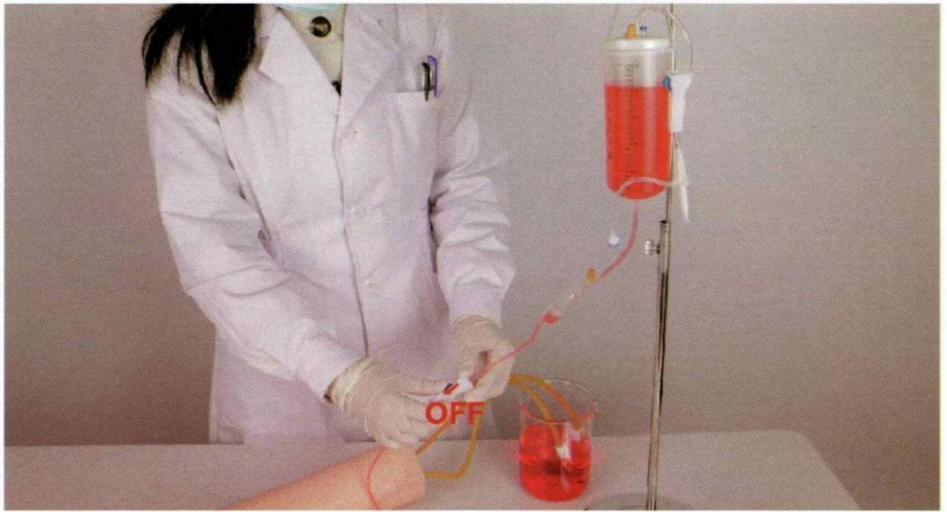

Step 1: First, the infusion bottle is filled with red ink, hanging it on a stand then turn off the flow regulator.

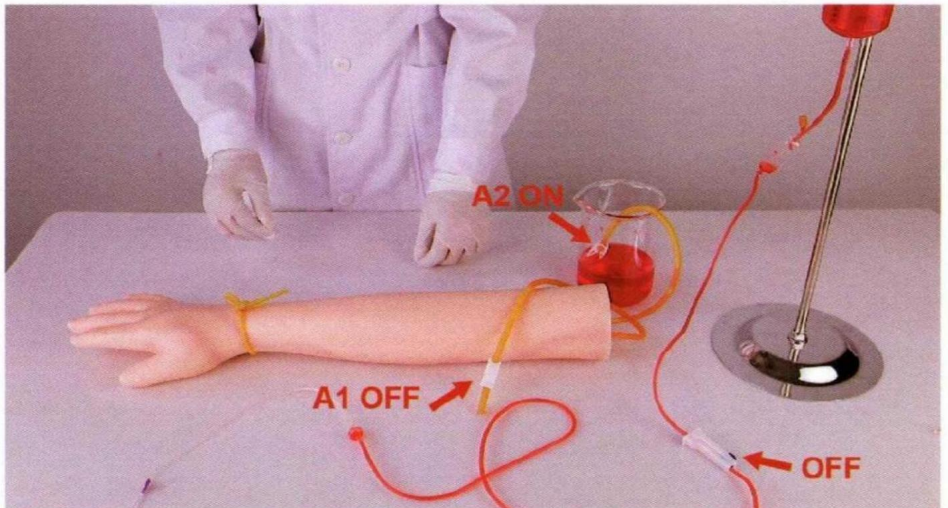

Step 2: Close the pipe clamp(A1) ; open the pipe clamp(A2).

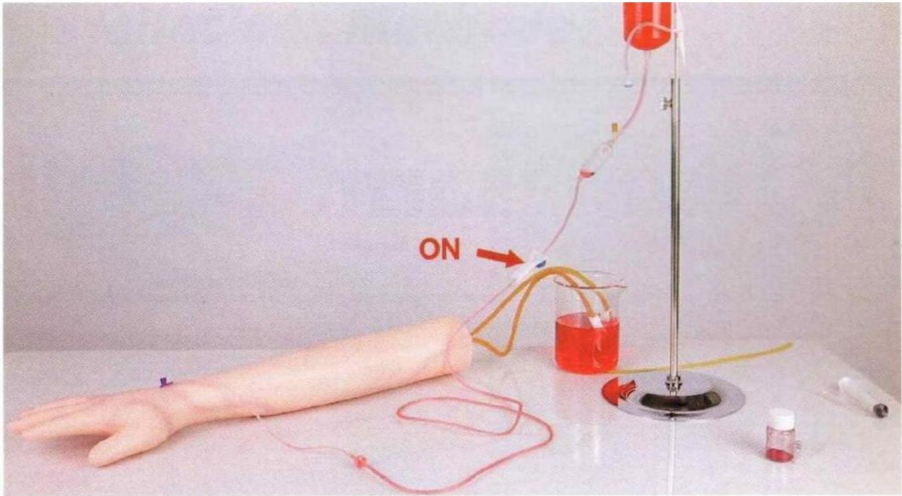

Step 3: The butterfly needle is accurately inserted into the vein of the arm, turn on the flow regulator, the red fluid flows out of the venous tube A2 after circulating in the venous tube. (Use the appropriate container to liquid)

Note:

If the red ink does not outflow from the vein A2.

The reason is as follow:

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;
- c. The A1 pipe clamp isn't hung on the bracket (need hang it as picture show)



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MODELLI DIDATTICI DEL CORPO UMANO

MANUALE D'USO

MODELLO:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSEGNAMENTO DEL CORPO UMANO

MODELLI

MODELLO:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni gravi.
2. Dopo l'uso, rimontare tutti i componenti e conservarli in posizione verticale.
3. Evitare le alte temperature e la luce solare diretta.
4. Rimuovere le macchie minori con un detergente neutro. L'uso di alcol, benzene e altre sostanze potrebbero danneggiare il prodotto.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3
Tipo	Kit di esercizi per iniezione e prelievo del sangue
Materiale del braccio	PVC

ELENCO DETTAGLIATO

LD-HS1	Braccio	1	
	Tappetino per l'assistenza infermieristica	1	
	Siringa 1ml	1	
	Siringa 2,5ml	1	
	Siringa 5ml	1	




	Siringa 10ml	1	
	Ago per cuoio capelluto	3	
	Bottiglia per infusione	2	
	Guanti	10 paia	
	Ago permanente	2	
	Raccolta del sangue Beda	2	
	Contenitore sottovuoto 5ml	2	
	Polvere di sangue	1	
	Laccio	1	
	Stent	1	
	Borsa portaoggetti	1	
LD-HS2	Braccio	1	
	Tappetino per l'assistenza infermieristica	1	
	Siringa 1ml	1	
	Siringa 2,5ml	1	
	Siringa 5ml	1	

	Ago per cuoio capelluto	1	
	Bottiglia per infusione	1	
	Guanti	10 paia	
	Ago permanente	1	
	Polvere di sangue	1	
	Laccio	1	
	Stent	1	
	Borsa portaoggetti	1	
LD-HS3	Braccio	1	
	Tappetino per l'assistenza infermieristica	1	
	Siringa 5ml	1	
	Bottiglia per infusione	1	
	Polvere di sangue	1	
	Laccio	1	

	Stent	1	
	Borsa portaoggetti	1	

ISTRUZIONI

Metodo di installazione:

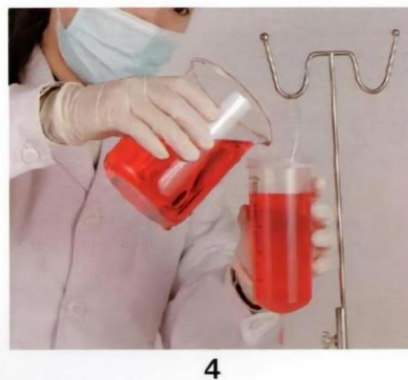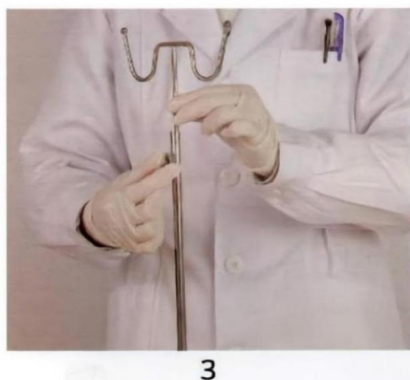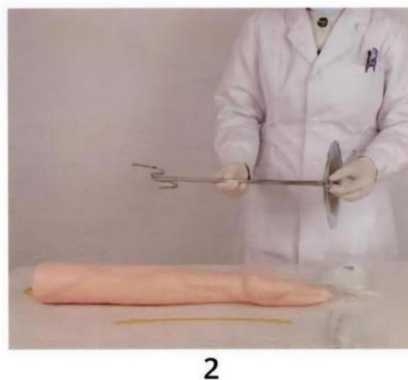


Step 1: Take the arm model, infusion tube, bracket and other accessories out of the box.



Step 2: Tighten the fixing nut to fix the bracket on the hole position of the tray.

Step 3: Blood simulation: add red powder and water to prepare red ink, and then pour it into the hanging bottle (or container)


Fasi del prelievo del sangue:

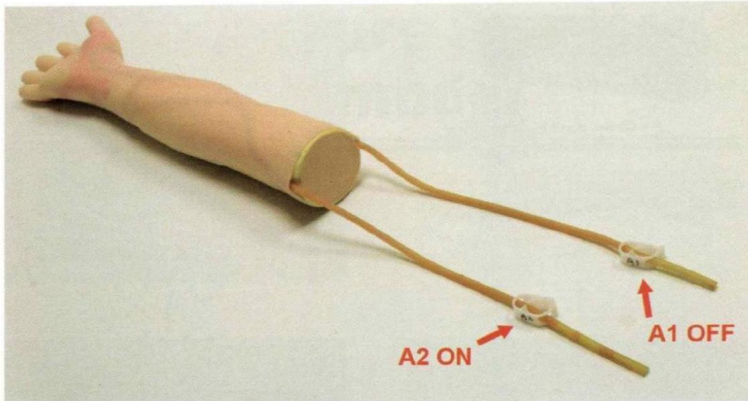

Step 1: Close one of the pipe clamps (A1) on the arm

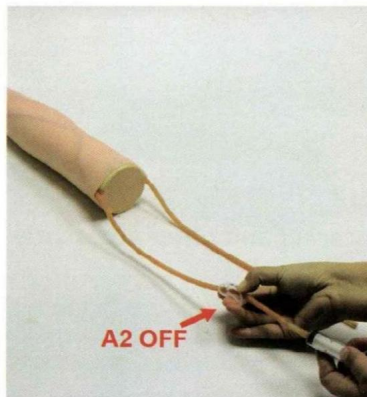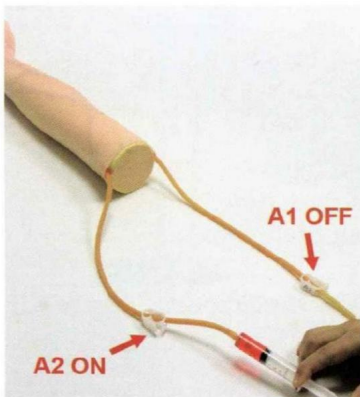

Step 2: After the syringe draws the red ink, fill the other hose (A2) with red ink, and immediately close the pipe clamp(A2) .

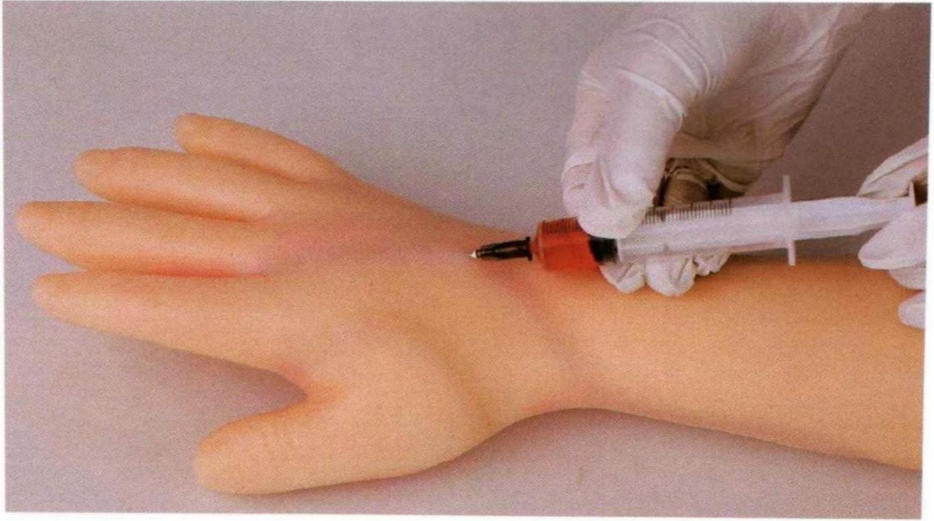


Step 3: Hold an empty syringe and stab it into one of the veins on the arm. Draw blood, and you can see the red liquid entering the syringe.

Note:


**If the red ink does not enter the syringe.
The reason as follow:**

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;


Trasfusione di sangue:

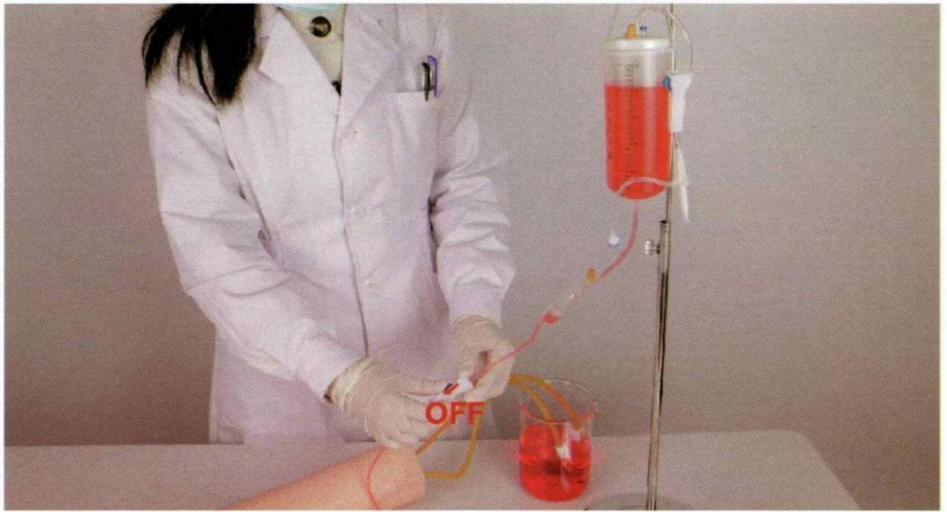

Step 1: First, the infusion bottle is filled with red ink, hanging it on a stand then turn off the flow regulator.

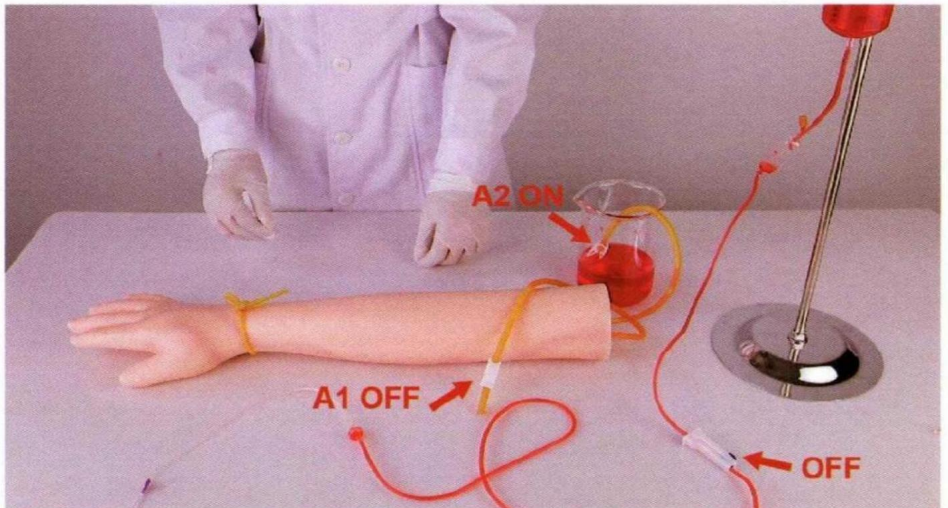

Step 2: Close the pipe clamp(A1) ; open the pipe clamp(A2).

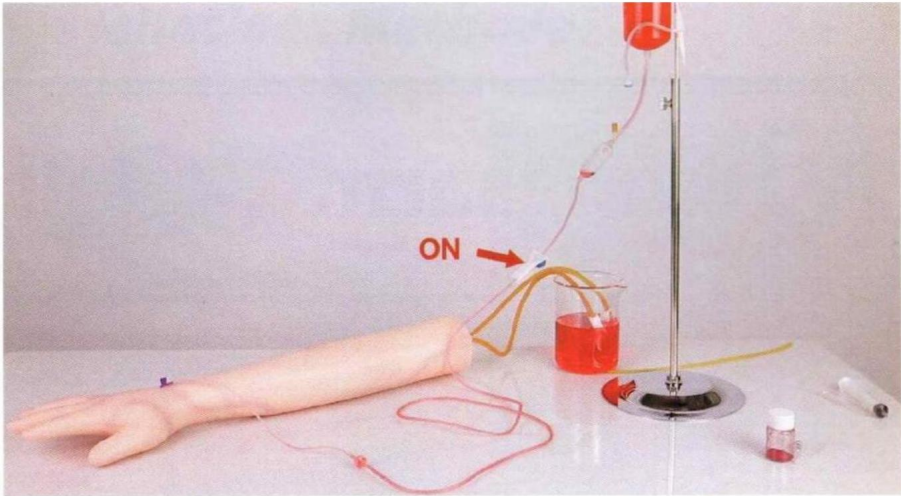

Step 3: The butterfly needle is accurately inserted into the vein of the arm, turn on the flow regulator, the red fluid flows out of the venous tube A2 after circulating in the venous tube. (Use the appropriate container to liquid)

Note:

If the red ink does not outflow from the vein A2.

The reason is as follow:

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;
- c. The A1 pipe clamp isn't hung on the bracket (need hang it as picture show)



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MODELOS DE ENSEÑANZA DEL CUERPO HUMANO

MANUAL DEL USUARIO

MODELO:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ENSEÑANZA DEL CUERPO HUMANO
MODELOS

MODELO:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños. provocar lesiones graves.
2. Después del uso, vuelva a ensamblar todas las piezas y manténgalas en posición vertical.
3. Evite las altas temperaturas y la luz solar directa.
4. Elimine las manchas menores con detergente neutro. El uso de alcohol, benceno y otras sustancias pueden dañar el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3
Tipo	Kit de ejercicios para inyecciones y extracción de sangre
Material del brazo	CLORURO DE POLIÉTERO

LISTA DETALLADA

LD-HS1	Brazo	1	
	Almohadilla para cuidados de enfermería	1	
	Jeringa de 1 ml	1	
	Jeringa de 2,5 ml	1	
	Jeringa de 5 ml	1	




	Jeringa de 10 ml	1	
	Aguja para el cuero cabelludo	3	
	Botella de infusión	2	
	Guantes	10 pares	
	Aguja interna	2	
	Recolección de sangre Escarabajo	2	
	Recipiente de vacío de 5 ml	2	
	Polvo de sangre	1	
	Torniquete	1	
	Stents	1	
	Bolsa de almacenamiento	1	
LD-HS2	Brazo	1	
	Almohadilla para cuidados de enfermería	1	
	Jeringa de 1 ml	1	
	Jeringa de 2,5 ml	1	
	Jeringa de 5 ml	1	

	Aguja para el cuero cabelludo	1	
	Botella de infusión	1	
	Guantes	10 pares	
	Aguja interna	1	
	Polvo de sangre	1	
	Torniquete	1	
	Stents	1	
	Bolsa de almacenamiento	1	
LD-HS3	Brazo	1	
	Almohadilla para cuidados de enfermería	1	
	Jeringa de 5 ml	1	
	Botella de infusión	1	
	Polvo de sangre	1	
	Torniquete	1	

	Stents	1	
	Bolsa de almacenamiento	1	

INSTRUCCIONES

Método de instalación:

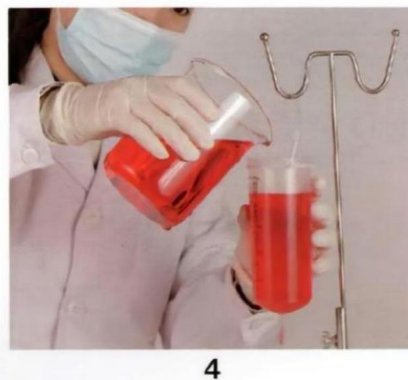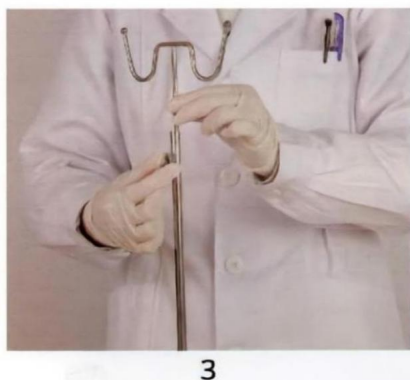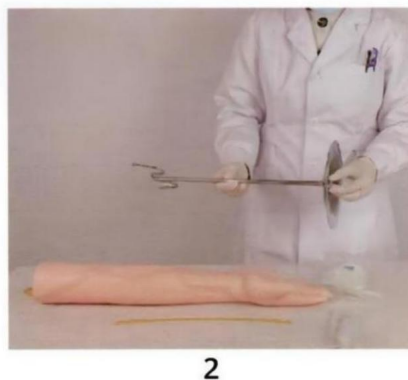


Step 1: Take the arm model, infusion tube, bracket and other accessories out of the box.



Step 2: Tighten the fixing nut to fix the bracket on the hole position of the tray.

Step 3: Blood simulation: add red powder and water to prepare red ink, and then pour it into the hanging bottle (or container)


Pasos para la extracción de sangre:

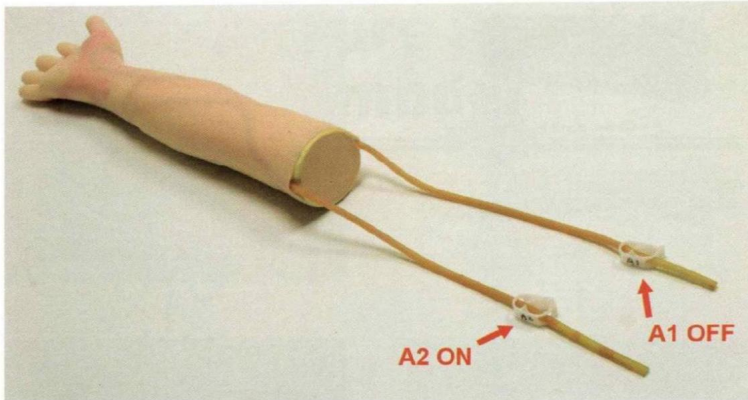

Step 1: Close one of the pipe clamps (A1) on the arm

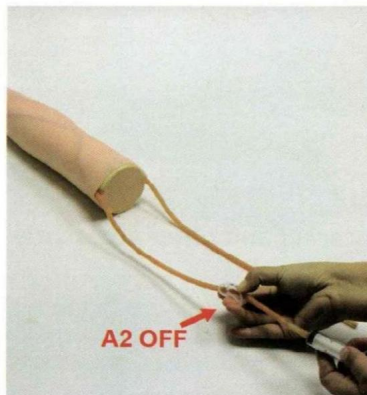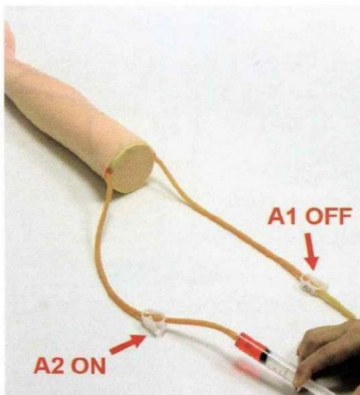

Step 2: After the syringe draws the red ink, fill the other hose (A2) with red ink, and immediately close the pipe clamp(A2) .

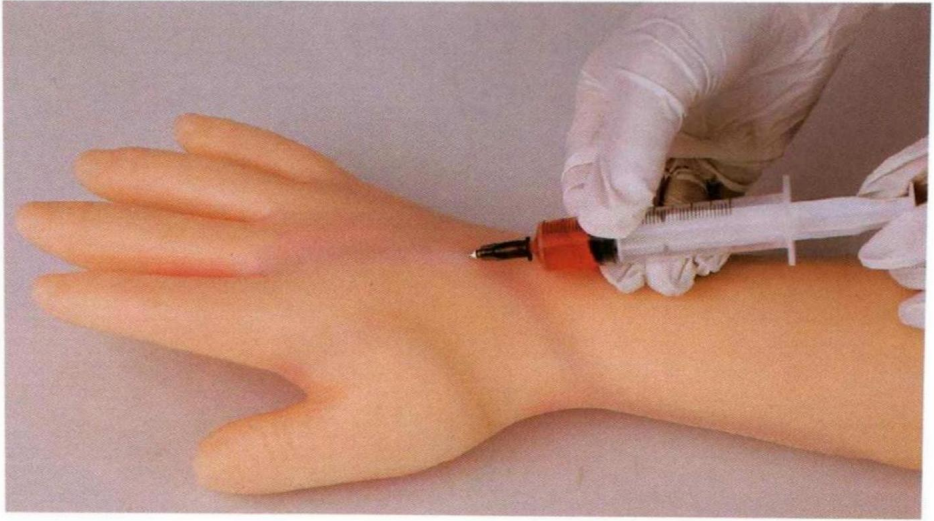

Step 3: Hold an empty syringe and stab it into one of the veins on the arm. Draw blood, and you can see the red liquid entering the syringe.


Note:

If the red ink does not enter the syringe.


The reason as follow:

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;


Transfusión de sangre:

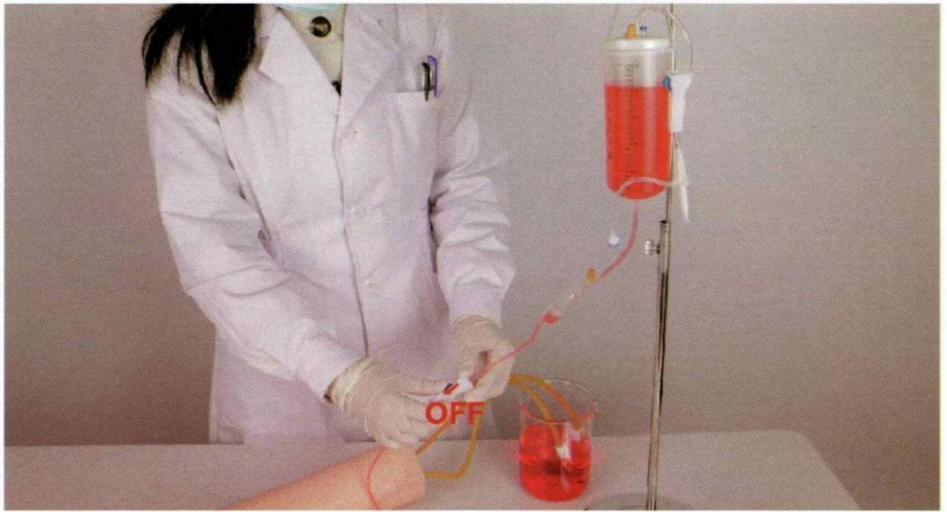

Step 1: First, the infusion bottle is filled with red ink, hanging it on a stand then turn off the flow regulator.

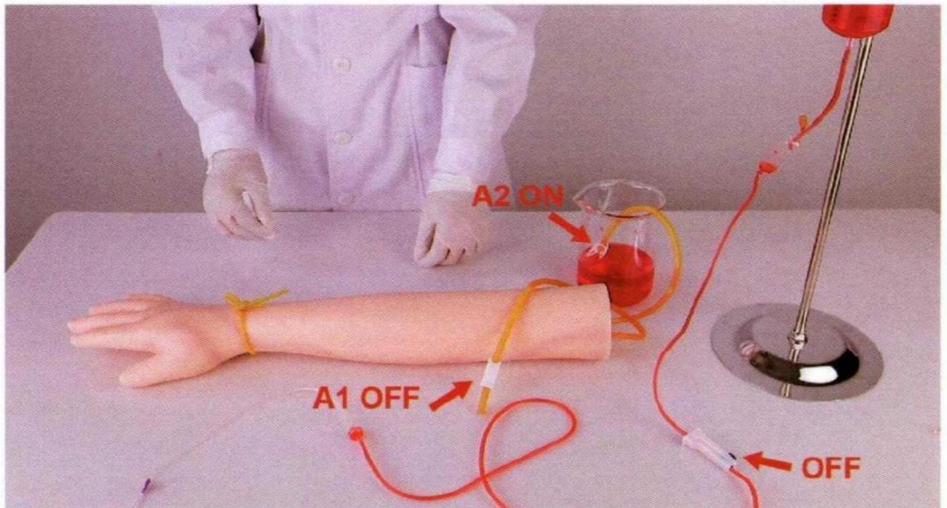

Step 2: Close the pipe clamp(A1) ; open the pipe clamp(A2).

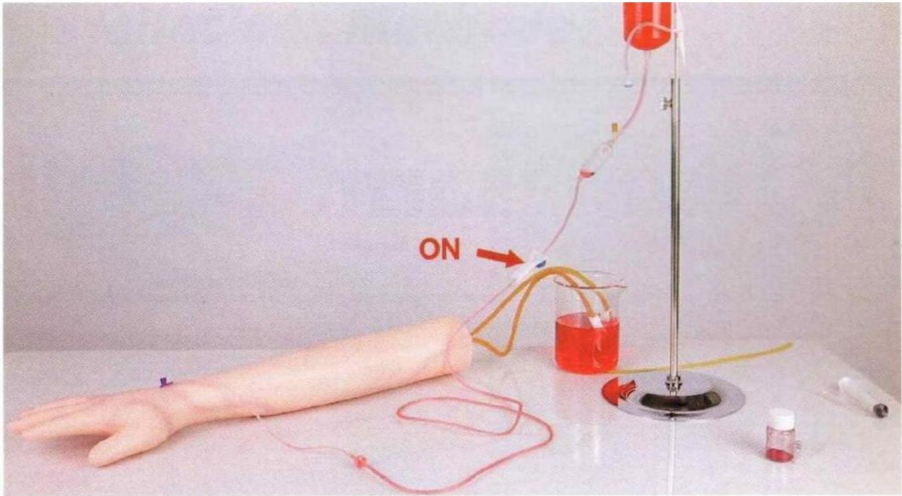

Step 3: The butterfly needle is accurately inserted into the vein of the arm, turn on the flow regulator, the red fluid flows out of the venous tube A2 after circulating in the venous tube. (Use the appropriate container to liquid)

Note:

If the red ink does not outflow from the vein A2.

The reason is as follow:

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;
- c. The A1 pipe clamp isn't hung on the bracket (need hang it as picture show)



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MODELE NAUCZANIA CIAŁA CZŁOWIEKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NAUCZANIE CIAŁA CZŁOWIEKA
MODELE

MODEL:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem tego produktu przeczytaj tę instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.
2. Po użyciu należy złożyć wszystkie części i trzymać je w pozycji pionowej.
3. Unikaj wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.
4. Usuń drobne plamy neutralnym detergentem. Stosowanie alkoholu, benzenu i inne substancje mogą uszkodzić produkt.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PARAMETR PRODUKTU

Model	LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3
Typ	Zestaw do ćwiczeń wstrzykiwać i pobierania krwi
Materiał ramienia	PCV

SZCZEGÓŁOWA LISTA

LD-HS1	Ramię	1	
	Podkładka pielęgnarska	1	
	Strzykawka 1	1	
	ml Strzykawka 2,5 ml	1	
	Strzykawka 5ml	1	




	Strzykawka 10ml	1	
	Igła do skóry głowy	3	
	Butelka do infuzji	2	
	Rękawice	10 par	
	Igła do wkłucia	2	
	Pobieranie krwi Bębenek	2	
	Naczynie próżniowe 5ml	2	
	Krwawy proszek	1	
	Krępilec	1	
	Stenty	1	
	Torba do przechowywania	1	
LD-HS2	Ramię	1	
	Podkładka pielęgnarska	1	
	Strzykawka 1	1	
	ml Strzykawka 2,5 ml	1	
	Strzykawka 5ml	1	

	Igła do skóry głowy	1	
	Butelka do infuzji	1	
	Rękawice	10 par	
	Igła do wkłucia	1	
	Krwawy proszek	1	
	Krępilec	1	
	Stenty	1	
	Torba do przechowywania	1	
LD-HS3	Ramię	1	
	Podkładka pielęgnarska	1	
	Strzykawka 5ml	1	
	Butelka do infuzji	1	
	Krwawy proszek	1	
	Krępilec	1	

	Stenty	1	
	Torba do przechowywania	1	

INSTRUKCJE

Metoda instalacji:

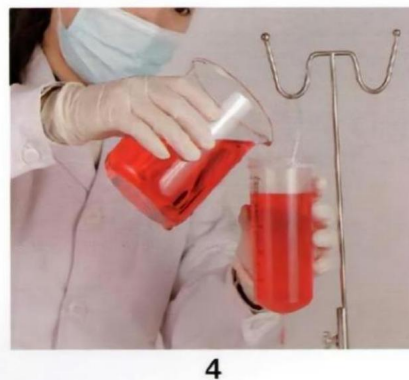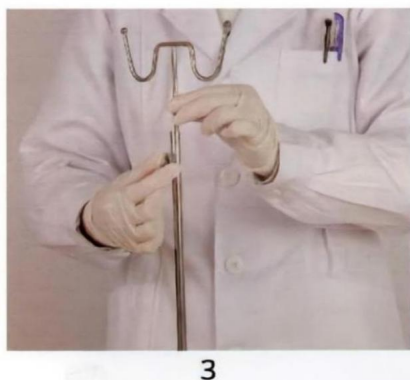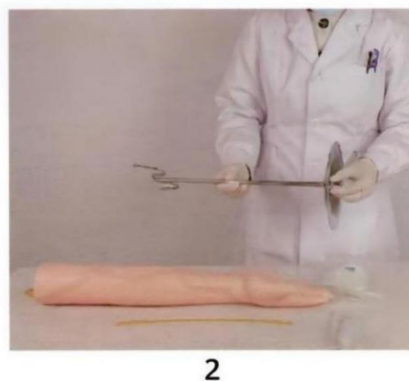


Step 1: Take the arm model, infusion tube, bracket and other accessories out of the box.



Step 2: Tighten the fixing nut to fix the bracket on the hole position of the tray.

Step 3: Blood simulation: add red powder and water to prepare red ink, and then pour it into the hanging bottle (or container)


Etapy pobierania krwi:

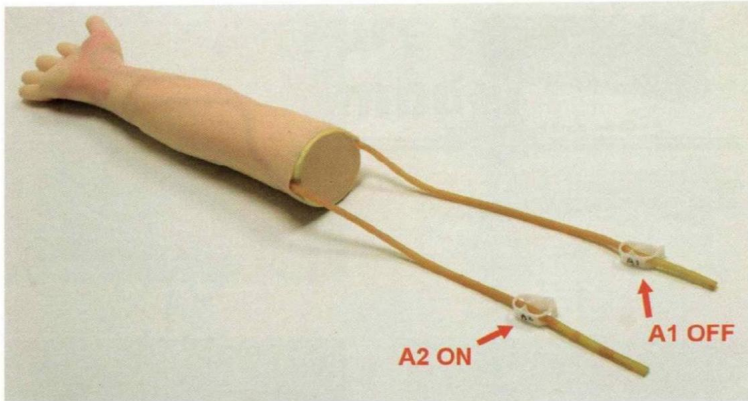

Step 1: Close one of the pipe clamps (A1) on the arm

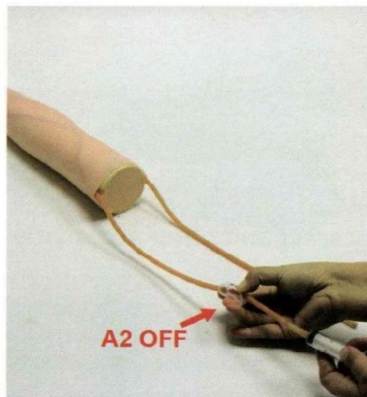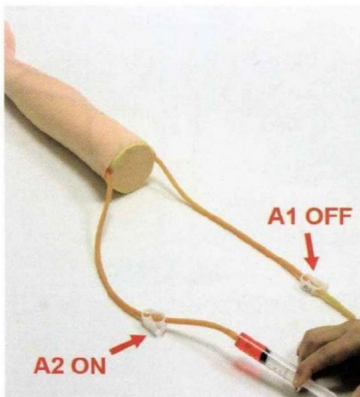

Step 2: After the syringe draws the red ink, fill the other hose (A2) with red ink, and immediately close the pipe clamp(A2) .

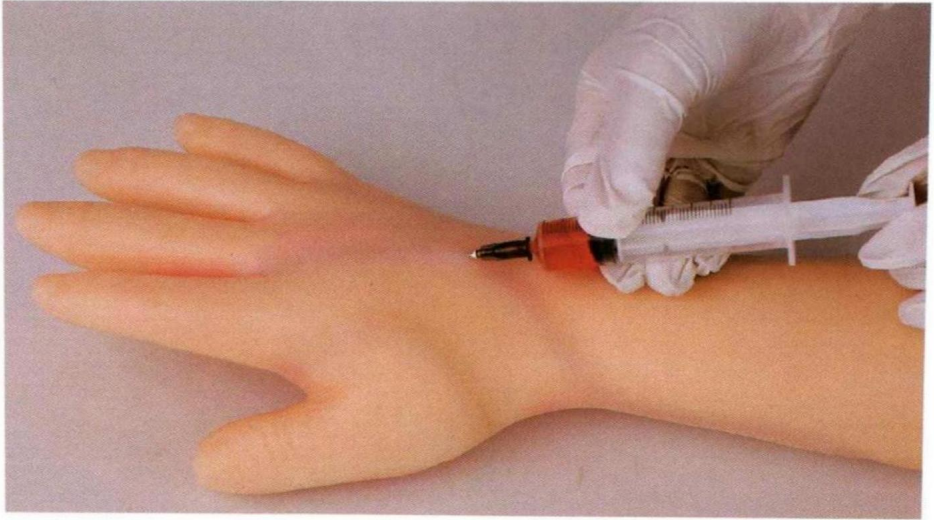


Step 3: Hold an empty syringe and stab it into one of the veins on the arm. Draw blood, and you can see the red liquid entering the syringe.

Note:


**If the red ink does not enter the syringe.
The reason as follow:**

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;


Transfuzja krwi:

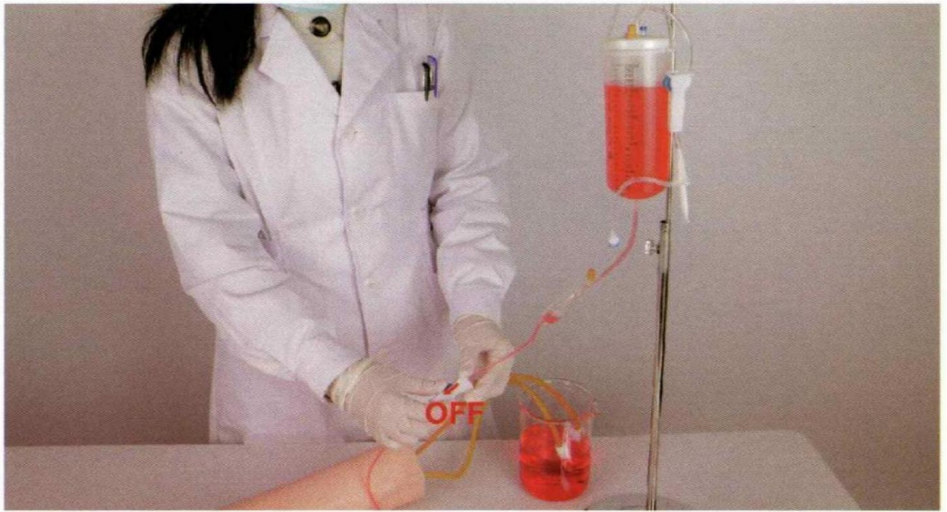

Step 1: First, the infusion bottle is filled with red ink, hanging it on a stand then turn off the flow regulator.

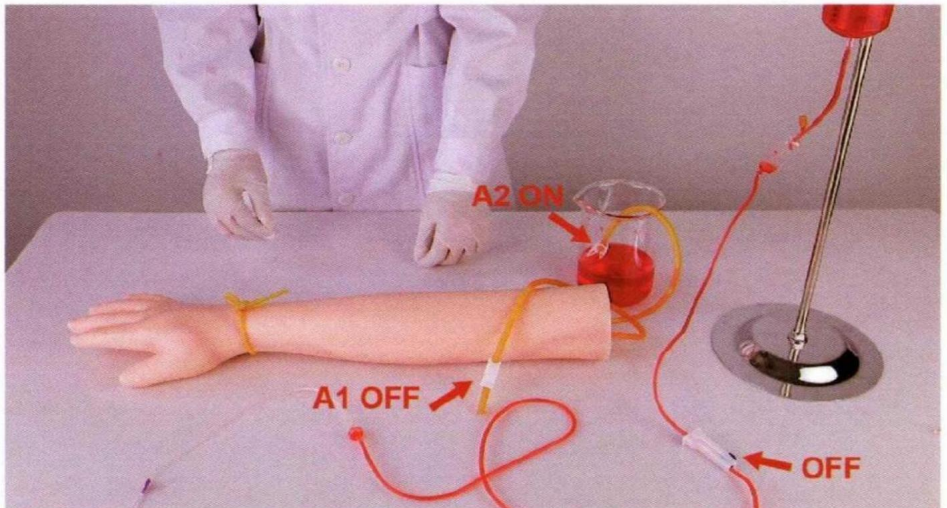

Step 2: Close the pipe clamp(A1) ; open the pipe clamp(A2).

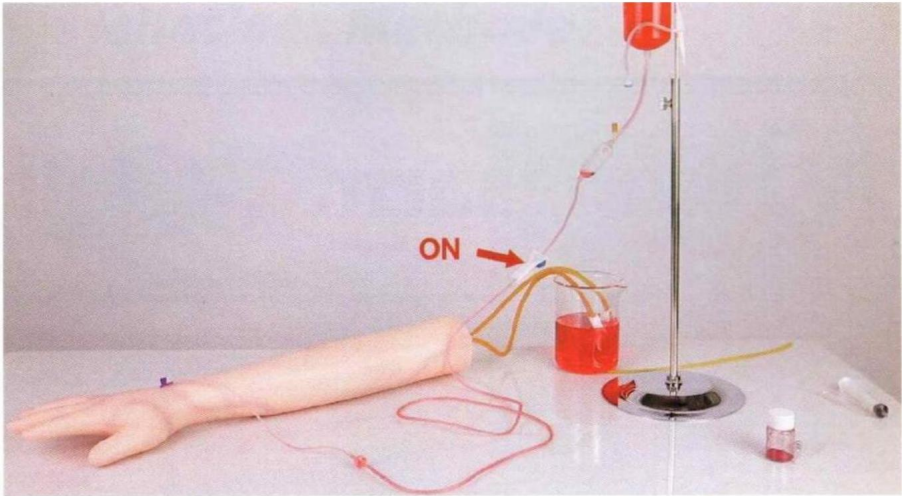

Step 3: The butterfly needle is accurately inserted into the vein of the arm, turn on the flow regulator, the red fluid flows out of the venous tube A2 after circulating in the venous tube. (Use the appropriate container to liquid)

Note:

If the red ink does not outflow from the vein A2.

The reason is as follow:

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;
- c. The A1 pipe clamp isn't hung on the bracket (need hang it as picture show)



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

MENSELIJKE LICHAAMSONDERWIJSMODELLEN

GEbruikersHANDLEIDING

MODEL:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MENSELIJK LICHAAM ONDERWIJS
MODELLEN

MODEL:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

1. Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.
2. Monteer na gebruik alle onderdelen weer in elkaar en bewaar ze verticaal.
3. Vermijd hoge temperaturen en direct zonlicht.
4. Verwijder kleine vlekken met een neutraal reinigingsmiddel. Het gebruik van alcohol, benzeen en andere stoffen kunnen het product beschadigen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTPARAMETER

Model	LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3
Type	Injectie- en bloedafname-oefenset
Armmateriaal	PVC

GEDETAILEERDE LIJST

LD-HS1	Arm	1	
	Verpleegkundige verzorgingsmat	1	
	Spuit 1ml Spuit	1	
	2.5ml	1	
	Spuit 5ml	1	




	Spuit 10ml	1	
	Hoofdhuidnaald	3	
	Infuusfles	2	
	Handschoenen	10 paar	
	Inwonende naald	2	
	Bloedafname Beedel	2	
	Vacuümvat 5ml	2	
	Bloedpoeder	1	
	Tourniquet	1	
	Stents	1	
	Opbergzak	1	
LD-HS2	Arm	1	
	Verpleegkundige verzorgingsmat	1	
	Spuit 1ml	1	
	Spuit 2.5ml	1	
	Spuit 5ml	1	

	Hoofdhuidnaald	1	
	Infuusfles	1	
	Handschoenen	10 paar	
	Inwonende naald	1	
	Bloedpoeder	1	
	Tourniquet	1	
	Stents	1	
	Opbergzak	1	
LD-HS3	Arm	1	
	Verpleegkundige verzorgingsmat	1	
	Spuut 5ml	1	
	Infuusfles	1	
	Bloedpoeder	1	
	Tourniquet	1	

	Stents	1	
	Opbergzak	1	

INSTRUCTIES

Installatiemethode:

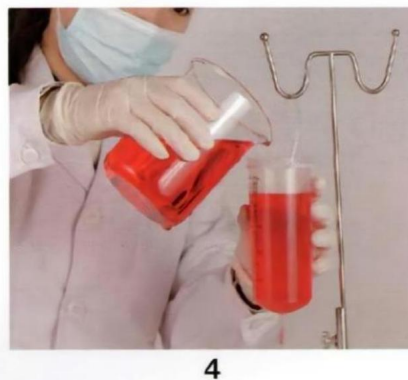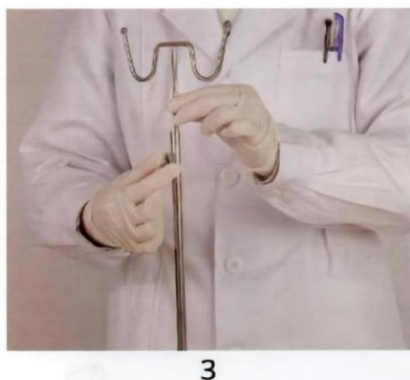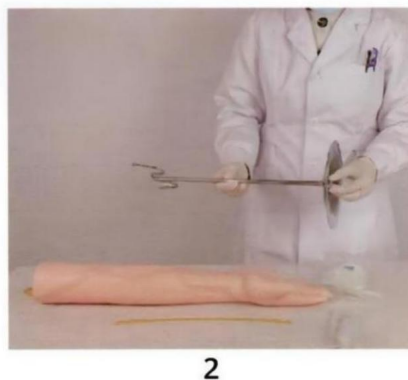


Step 1: Take the arm model, infusion tube, bracket and other accessories out of the box.



Step 2: Tighten the fixing nut to fix the bracket on the hole position of the tray.

Step 3: Blood simulation: add red powder and water to prepare red ink, and then pour it into the hanging bottle (or container)


Stappen voor bloedafname:

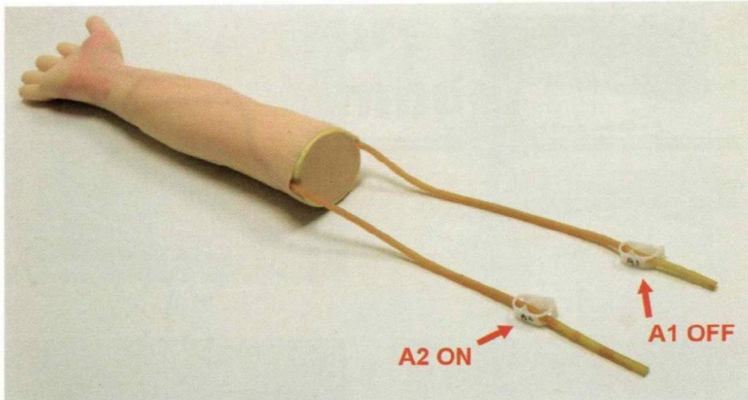

Step 1: Close one of the pipe clamps (A1) on the arm

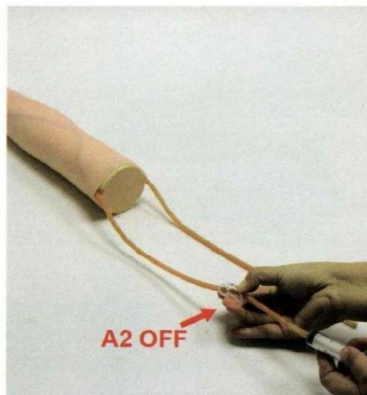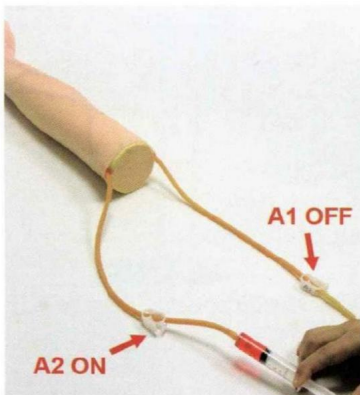

Step 2: After the syringe draws the red ink, fill the other hose (A2) with red ink, and immediately close the pipe clamp(A2) .

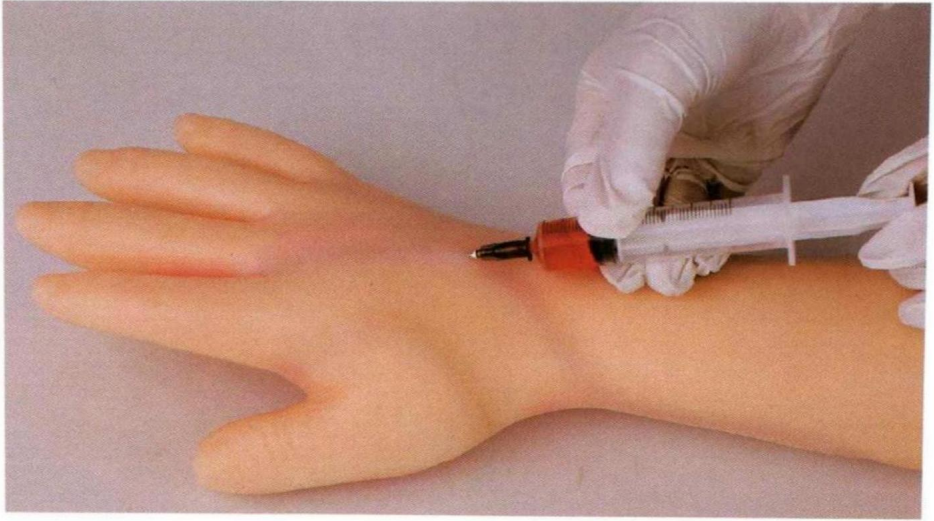

Step 3: Hold an empty syringe and stab it into one of the veins on the arm. Draw blood, and you can see the red liquid entering the syringe.


Note:

If the red ink does not enter the syringe.


The reason as follow:

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;


Bloedtransfusie:

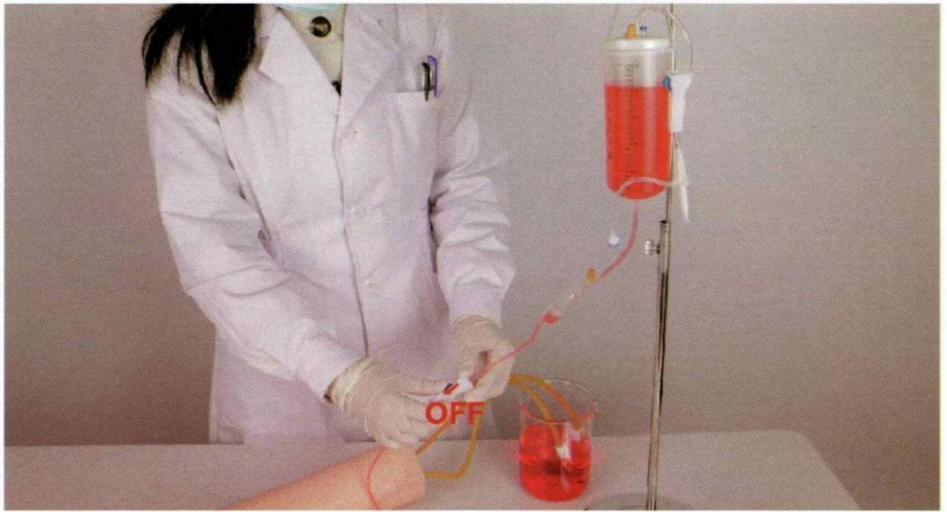

Step 1: First, the infusion bottle is filled with red ink, hanging it on a stand then turn off the flow regulator.

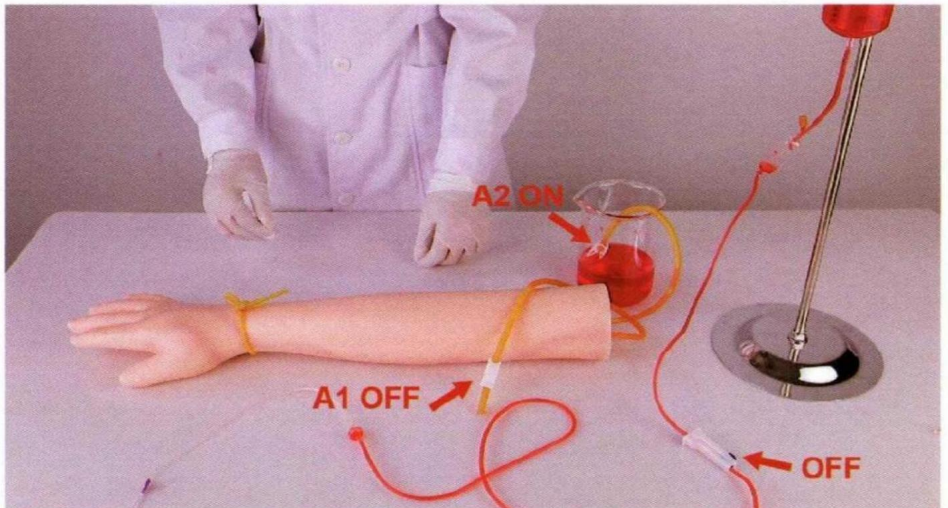

Step 2: Close the pipe clamp(A1) ; open the pipe clamp(A2).

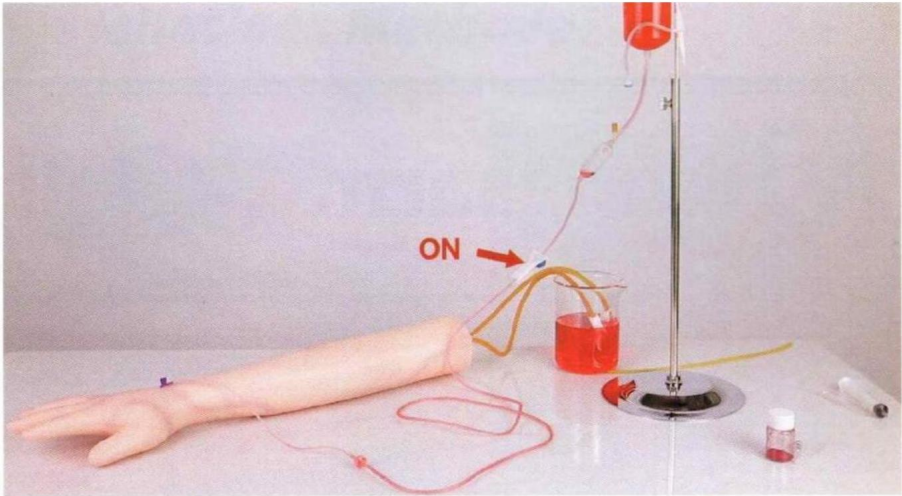

Step 3: The butterfly needle is accurately inserted into the vein of the arm, turn on the flow regulator, the red fluid flows out of the venous tube A2 after circulating in the venous tube. (Use the appropriate container to liquid)

Note:

If the red ink does not outflow from the vein A2.

The reason is as follow:

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;
- c. The A1 pipe clamp isn't hung on the bracket (need hang it as picture show)



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

UNDERVISNINGSMODELLER FÖR MÄNSKLIG KROPP

ANVÄNDARMANUAL

MODELL:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

UNDERVISNING I MÄNNISKORKROPPEN

MODELLER

MODELL:LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

1. Läs dessa instruktioner innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.
2. Efter användning, montera alla delar och förvara dem vertikalt.
3. Undvik höga temperaturer och direkt solljus.
4. Ta bort mindre fläckar med neutralt rengöringsmedel. Användningen av alkohol, bensen och andra ämnen kan skada produkten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPARAMETER

Modell	LD-HS1 LD-HS2 LD-HS3
Typ	Träningssats för injektion och blodtagning
Armmaterial	PVC

DETALJERAD LISTA

LD-HS1	Ärm	1	
	Nursing Care Pad	1	
	Spruta 1ml	1	
	Spruta 2,5ml	1	
	Spruta 5ml	1	




	Spruta 10ml	1	
	Nål i hårbotten	3	
	Infusionsflaska	2	
	Handskar	10 par	
	Inbyggd nål	2	
	Blodsamling Beedle	2	
	Vakuumkärl 5ml	2	
	Blodpulver	1	
	Tourniquet	1	
	Stentar	1	
	Förvaringsväska	1	
LD-HS2	Ärm	1	
	Nursing Care Pad	1	
	Spruta 1ml	1	
	Spruta 2,5ml	1	
	Spruta 5ml	1	

	Nål i hårbotten	1	
	Infusionsflaska	1	
	Handskar	10 par	
	Inbyggd nål	1	
	Blodpulver	1	
	Tourniquet	1	
	Stentar	1	
	Förvaringsväska	1	
LD-HS3	Ärm	1	
	Nursing Care Pad	1	
	Spruta 5ml	1	
	Infusionsflaska	1	
	Blodpulver	1	
	Tourniquet	1	

	Stentar	1	
	Förvaringsväska	1	

INSTRUKTIONER

Installationsmetod:

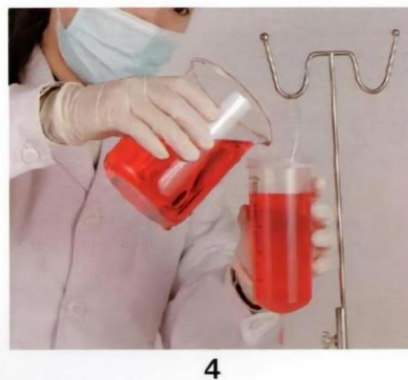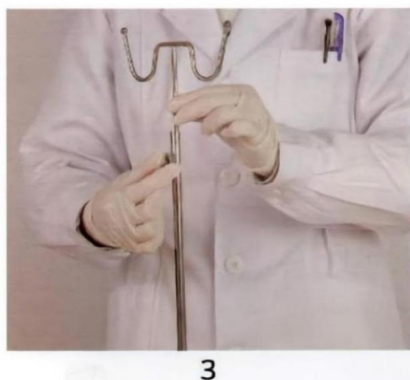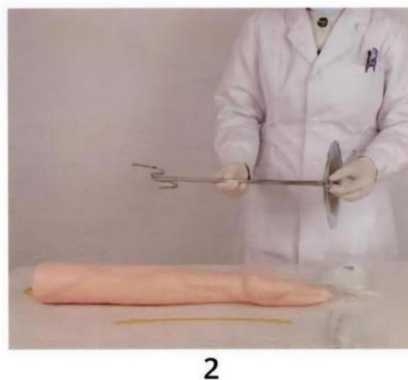


Step 1: Take the arm model, infusion tube, bracket and other accessories out of the box.



Step 2: Tighten the fixing nut to fix the bracket on the hole position of the tray.

Step 3: Blood simulation: add red powder and water to prepare red ink, and then pour it into the hanging bottle (or container)


Blodtagningssteg:

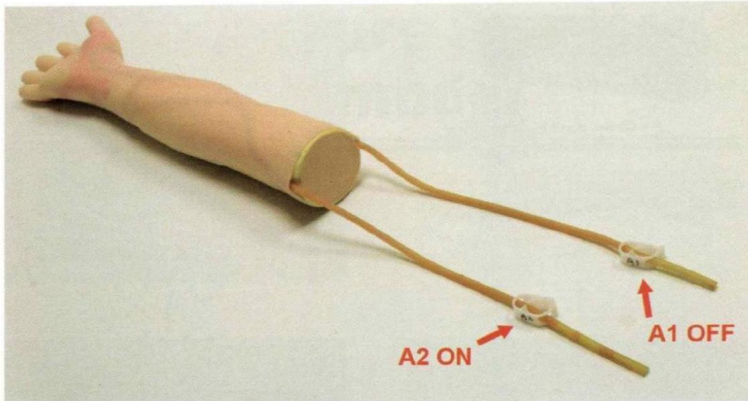

Step 1: Close one of the pipe clamps (A1) on the arm

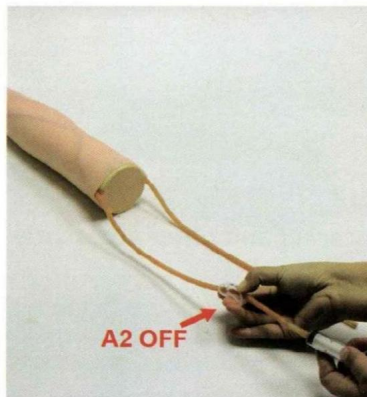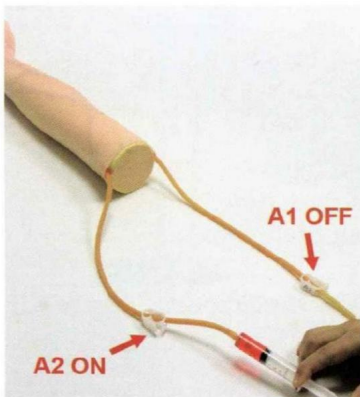

Step 2: After the syringe draws the red ink, fill the other hose (A2) with red ink, and immediately close the pipe clamp(A2) .

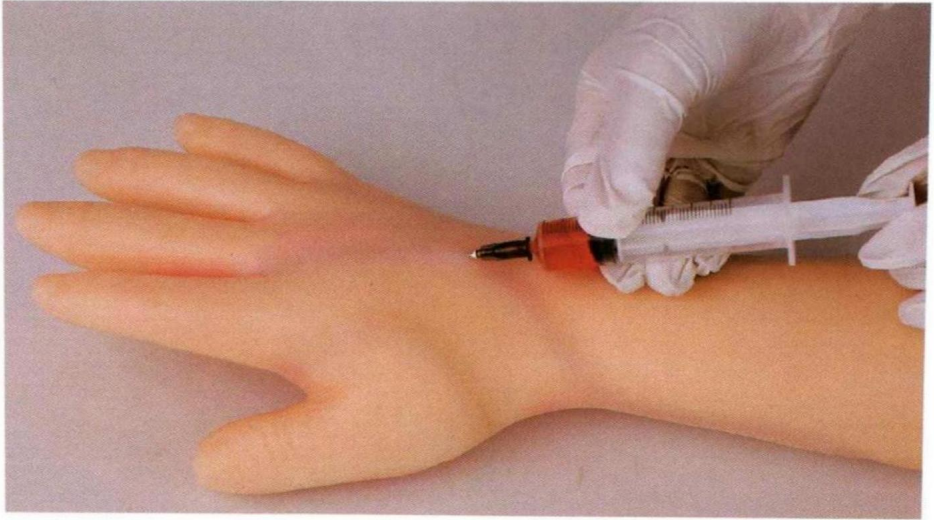


Step 3: Hold an empty syringe and stab it into one of the veins on the arm. Draw blood, and you can see the red liquid entering the syringe.

Note:


**If the red ink does not enter the syringe.
The reason as follow:**

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;


Blodtransfusion:

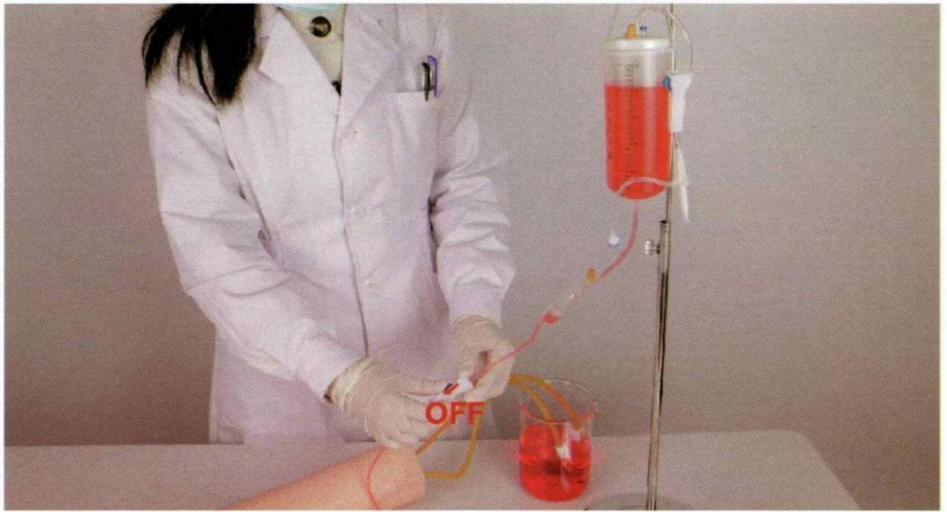

Step 1: First, the infusion bottle is filled with red ink, hanging it on a stand then turn off the flow regulator.

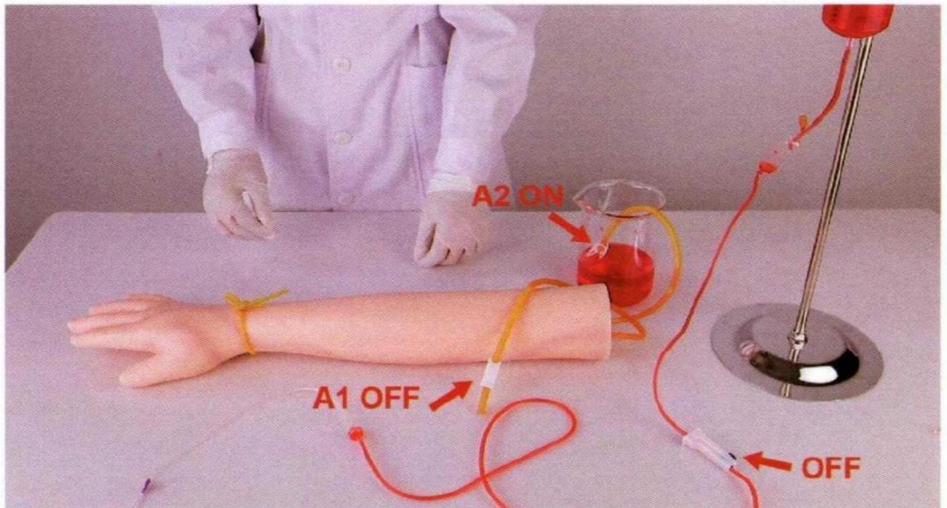

Step 2: Close the pipe clamp(A1) ; open the pipe clamp(A2).

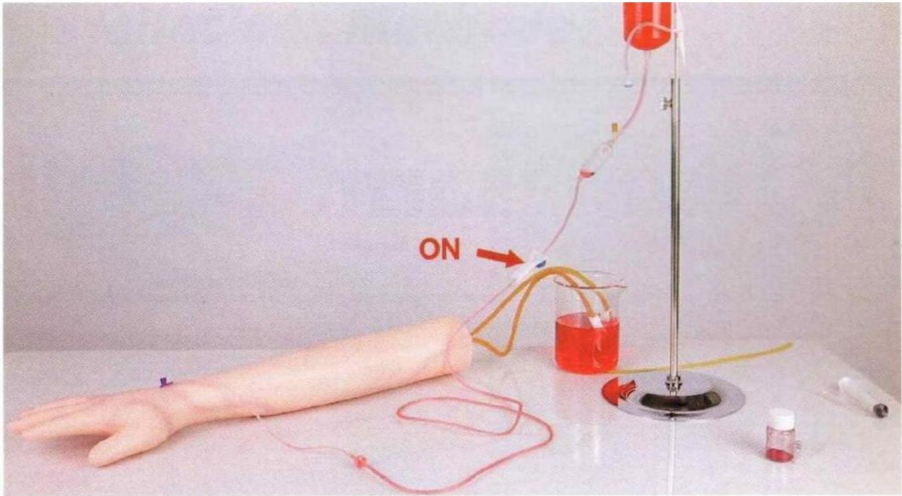

Step 3: The butterfly needle is accurately inserted into the vein of the arm, turn on the flow regulator, the red fluid flows out of the venous tube A2 after circulating in the venous tube. (Use the appropriate container to liquid)

Note:

If the red ink does not outflow from the vein A2.

The reason is as follow:

- a. The vein was completely punctured;
- b. The injected red ink is insufficient;
- c. The A1 pipe clamp isn't hung on the bracket (need hang it as picture show)



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support