

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Taboret prysznicowy z oparciem – system TF

Kod produktu: TGR-R KP 350L




1. Wykonanie

Taboret prysznicowy składa się z aluminiowej ramy oraz oparcia i szerokiego siedziska wykonanych z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi oraz boczne uchwyty przy siedzisku ułatwiające korzystanie z przyrządu. Specjalnie zaprojektowane gumowe końcówki nóg skutecznie zapobiegają ślizganiu się na wilgotnych powierzchniach. Taboret dodatkowo został wyposażony w system TF ułatwiający montaż.

Zestaw zawiera: oparcie 1 szt., siedzisko 1 szt., podstawę taboretu 2szt., nóżki z regulacją wysokości 4 szt., rurki montażowe oparcia 2 szt., śruby montażowe (motylki) – 9 szt.

Części składowe:

- a. oparcie
- b. rurki montażowe oparcia
- c. siedzisko
- d. rurki podstawy taboretu
- e. Regulacja wysokości- system TF
- f. nasadki antypoślizgowe

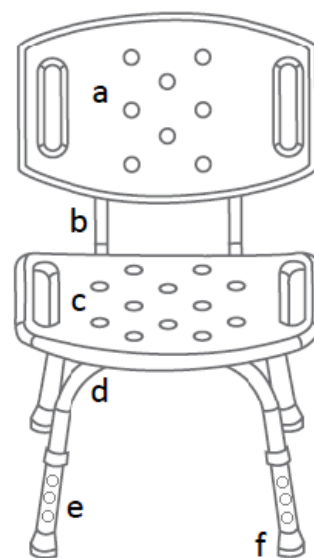

2. Zastosowanie

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego.

Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

3. Montaż


Krok 1. Siedzisko taboretu położyć płasko na podłożu.

Krok 2. Następnie za pomocą jednej śruby motylkowej z podkładką należy zmontować siedzisko na środku ze skrzyżowanymi rurkami podstawy taboretu.

Krok 3. Rurki podstawy taboretu należy połączyć z nóżkami.

Krok 4. Następnie za pomocą czterech śrub motylkowych i podkładek należy przykręcić rurki oparcia do rurek podstawy.

Krok 5. Taboret z zamontowanym siedziskiem i rurkami oparcia należy postawić na nóżkach, a następnie przykręcić oparcie za pomocą czterech śrub motylkowych z podkładkami.

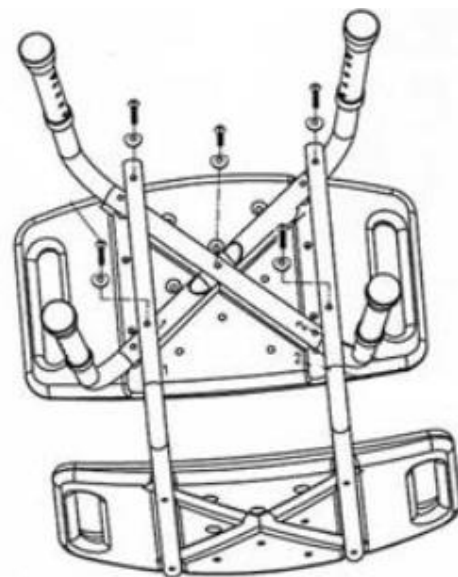

REGULACJA WYSOKOŚCI

Aby wyregulować wysokość taboretu, należy wcisnąć metalowy sztyft, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować położenie względem siebie sztyftem blokującym. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga! Sztyfty we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na tym samym poziomie.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość	49 cm
-----------	-------

Głębokość	44 cm
Wysokość siedziska	36-46 cm
Wysokość całkowita	64-74 cm
Wymiary siedziska	49 x 29 cm
Waga	3,38 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z taboretu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja


- Taboret należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wycierać do sucha.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Należy systematycznie sprawdzać: dokręcenie śrub motylkowych, stan sztyftów blokujących, stan rurek (pod kątem pęknięć)
- Zaleca się regularną kontrolę nasadki gumowej. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej,

jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

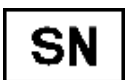	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.
Dowiedz się więcej na **www.timago.com**

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021