


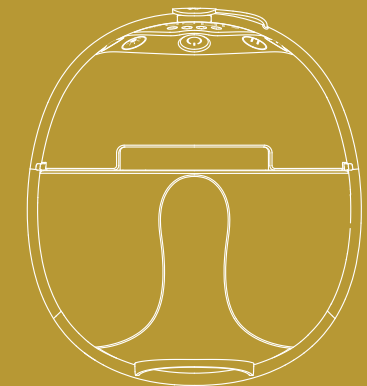

GIOmum

Line Discreet Light

Elektryczny laktator muszlowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem laktatora należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości.

Opis urządzenia

01

Po pierwsze, laktator może symulować schemat ssania niemowlęcia, pomagać w ssaniu piersi, wspomagać wydzielanie prolaktyny przez przysadkę mózgową i stymulować wydzielanie mleka z piersi, co zwiększy produkcję mleka i tym samym pomoże zaspokoić potrzeby niemowlęcia.


Po drugie, laktator może pobudzać nabłonek przewodów mlecznych, aby stymulować wyrzut mleka z przewodów piersiowych, zapewnić opróżnianie piersi i łagodzić obrzęk piersi. Ponadto regularne stosowanie laktatora może wspomagać odciąganie nadmiaru mleka z przewodów mlecznych, co może zapobiec ostremu zapaleniu gruczołu piersiowego.

Po trzecie, stosowanie laktatora może zwiększyć czas bezpośredniego karmienia piersią i zwiększyć pewność matek w kwestii karmienia piersią, co ma korzystny wpływ zarówno na matkę, jak i dla niemowlę.

Po czwarte, urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie zaleca się używania go jako środka pomocniczego w placówkach medycznych.

Schemat budowy produktu

02

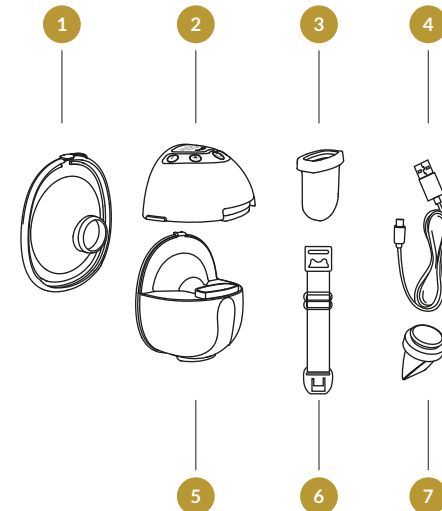


Lista części:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nasadka | 5. Miseczka do zbierania pokarmu |
| 2. Silnik laktatora | 6. Zapięcie do regulacji biustonosza |
| 3. Membrana silikonowa | 7. Zawór |
| 4. Kabel USB do ładowania | |

Opis wyświetlacza LED i funkcji przycisków

03

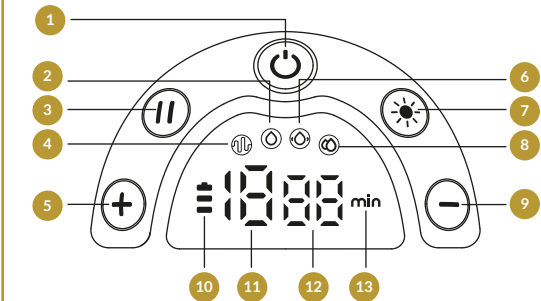

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Przycisk zasilania/
Przycisk zmiany trybu | 8. Tryb automatyczny |
| 2. Tryb odciągania | 9. Przycisk zmniejszania mocy |
| 3. Przycisk start/pauza | 10. Wyświetlacz stanu baterii |
| 4. Tryb stymulacji | 11. Wskaźnik poziomu |
| 5. Przycisk zwiększania mocy | 12. Wyświetlanie czasu |
| 6. Tryb masażu | 13. Czas/Minuta |
| 7. Przycisk do sterowania światłem nocnym | |

Montaż urządzenia

04

Aby złożyć laktator, wykonaj następujące czynności.


! UWAGA

- Pamiętaj o czyszczeniu laktatora zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Upewnij się, że laktator został złożony prawidłowo, zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Aby zapobiec przeciekaniu, przed złożeniem laktatora usuń pozostałości znajdujące się wokół brzegów.
- Przed montażem oczyszczonych elementów dokładnie umyj ręce.


1. Przymocuj zawór na miseczce do zbierania pokarmu, zwracając uwagę na kąt jego montażu.




2. Silikonową membranę umieść w miseczce do zbierania pokarmu i dociśnij ją rękami tak, aby krawędzie ściśle przylegały do siebie, co zapewni doskonałe uszczelnienie.

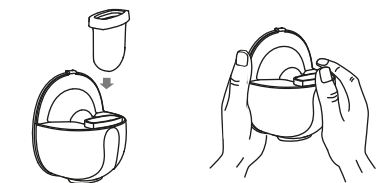


3. Aby zamontować nasadkę na miseczce do zbierania pokarmu, upewnij się, że rowek nasadki jest w jednej linii z rowkiem przepływu wstecznego miseczki, a następnie dociśnij krawędzie obiema rękami, aby upewnić się, że są prawidłowo dopasowane.

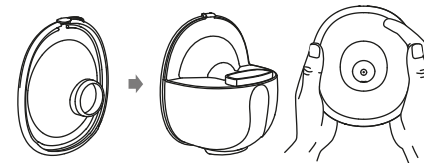

4. Otwór powinien być teraz w pełni dopasowany z dołem nasadki tak, aby w pełni szczelnie przywierał do nasadki.

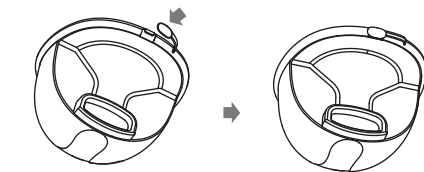


5. Przymocuj korpus główny laktatora do miseczki do zbierania pokarmu, wyrównaj wycięcie pod korpusem głównym z silikonową membraną, a następnie zamontuj ją do góry nogami tak, aby dopasować ją do miseczki i zapewnić całkowite uszczelnienie.

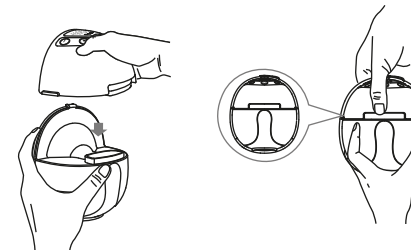


Instrukcja odciągania pokarmu

07


1. Mocno dociśnij nasadkę tak, aby całkowicie przylegała do piersi i upewnij się, że brodawki znajdują się w pozycji centralnej. Utrzymuj nasadkę w pozycji pionowej. Uważaj, aby nie zmienić pozycji urządzenia i biustu, w przeciwnym razie laktator nie wytworzy niezbędnego do pracy podciśnienia.

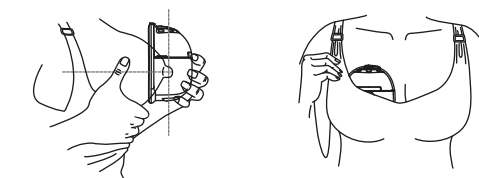


2. Aby uruchomić laktator naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zaświeci się wyświetlacz.

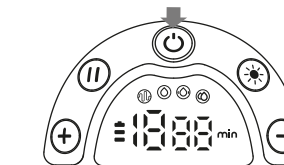


3. Aby uruchomić lub wstrzymać pracę laktatora, naciśnij krótko przycisk "II". Naciśnij krótko przycisk "⏻", aby przełączyć tryb po uruchomieniu laktatora. Ten przycisk pozwala na przełączanie pomiędzy czterema różnymi trybami (tryb stymulacji, tryb odciągania, tryb masażu i tryb automatyczny). Gdy świeci się "⏻", oznacza to, że urządzenie jest w trybie stymulacji; gdy świeci się "⏻", oznacza to, że włączony jest tryb odciągania; gdy świeci się "⏻", oznacza to, że włączony jest tryb masażu; gdy świeci się "⏻", oznacza to, że włączony jest tryb automatyczny.

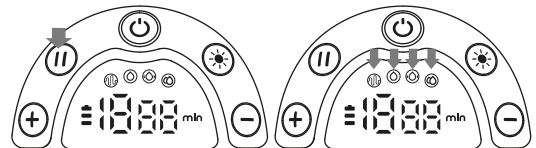

4. W każdym trybie dostępnych jest 9 poziomów. Aby wybrać dogodną moc ssania, krótko naciśnij przycisk „+” aby zwiększyć poziom oraz przycisk „-” aby zmniejszyć poziom.

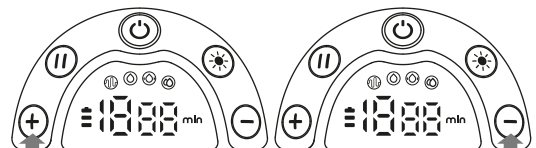

5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania „⏻”, aby wyłączyć laktator.

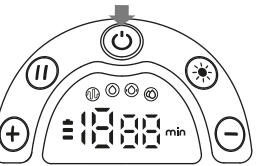

6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania „⏻”, aby włączyć lub wyłączyć światło nocne. Światło nocne jest kontrolowane niezależnie, nie wyłącza się wraz z wyłączeniem laktatora; funkcja światła nocnego może być dostosowana do potrzeb użytkownika.



Wskazówki:

1. Ten model ma wbudowaną funkcję pamięci; po włączeniu urządzenie jest automatycznie ustawione na ostatnio używany tryb stymulacji i poziom ssania (w trybie automatycznym, poziom 1 ssania jest poziomem domyślnym).
2. Poziom ssania nie jest zapamiętany w trybie automatycznym. Gdy urządzenie jest w trybie automatycznym i nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, poziom automatycznie będzie zwiększany co 15 sekund, aż do poziomu 7. Jeżeli zostanie w tym czasie naciśnięty przycisk, automatycznie zwiększanie poziomu zostanie wstrzymane.
3. Gdy praca urządzenia zostanie wstrzymana i w ciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, laktator wyłączy się automatycznie.
4. Laktator wyłącza się automatycznie po 20 minutach pracy.

Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii

10

1. Na laktatorze wyświetlane są trzy poziomy baterii.



2. Jeśli podczas użytkowania wskaźnik poziomu naładowania baterii pokazuje tylko 1 pasek i miga, oznacza to, że bateria jest bliska rozładowania. Należy wkrótce naładować urządzenie.



3. Nie należy używać urządzenia podczas ładowania, w tym czasie interfejs wyświetlacza pokazuje tylko aktualny poziom naładowania. Gdy poziom naładowania baterii pokazuje 3 paski i nie miga, oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana.



Port do ładowania typu C


4. Po każdym użyciu należy nacisnąć przycisk zasilania, aby sprawdzić stan baterii. Jeśli wyświetlacz wskazuje niski poziom naładowania urządzenia, należy naładować go za pomocą ładowarki DC5V = 1A



Prawidłowa postawa do odciągania pokarmu

11

Rozluźnij się i usiądź w wygodnym fotelu, a następnie pochyl się lekko do przodu (użyj poduszki dla podparcia pleców). Upewnij się, że twoje ciało i laktator znajdują się w jednej linii.

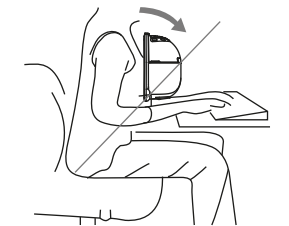

Postawa do odciągania pokarmu

Instrukcja obsługi zapięcia do regulacji biustonosza
Dopasuj długość ramiączek biustonosza tak, aby ssanie było bardziej komfortowe. Jeden koniec zapięcia do regulacji biustonosza powinien znajdować się na wewnętrznym zapięciu biustonosza do karmienia. Długość zapięcia biustonosza można regulować poprzez przyłączenie klamry biustonosza do karmienia do drugiego końca zapięcia do regulacji biustonosza.



Grafika 1

Grafika 2

Grafika 3

Zakończenie odciągania


12

Po zakończeniu odciągania zdejmij laktator z piersi. Laktator trzymaj w pozycji pionowej i odłącz silnik. Trzymaj miseczkę do zbierania pokarmu, aby przelać mleko do butelki. Zwróć uwagę na to, aby otwór do zbierania mleka w miseczce do zbierania pokarmu był ustawiony w jednej linii z otworem butelki, aby zapobiec wylaniu się mleka.


1. Po zakończeniu odciągania pokarmu naciśnij długo przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie i palcem otwórz szczelinę między piersią a lejkiem laktatora, a następnie ostrożnie zdejmij laktator z piersi.



2. Oddziel miseczkę do zbierania pokarmu od silnika laktatora, aby przygotować je do karmienia/przechowywania. Pozostałe używane części wyczyść zgodnie z instrukcją.

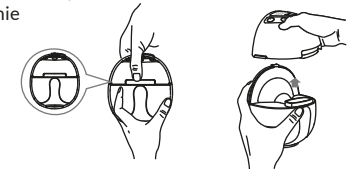

3. Wlej mleko do butelki do przechowywania; Upewnij się, że po otwarciu otwór jest dopasowany do butelki.

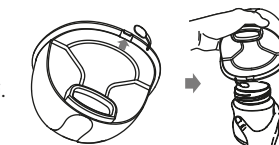

Czyszczenie

13

Czyszczenie i konserwacja

	Pierwsze użycie	Po każdym użyciu
Obudowa laktatora	-	W razie potrzeby przetrzyj urządzenie czystą, wilgotną szmatką nasączoną 70% alkoholem etylowym lub izopropylowym. Nie zanurzaj laktatora w wodzie.
Nasadka, Membrana silikonowa, Zawór i Miseczka do zbierania pokarmu	Zanurz urządzenie do wrzątku na 5 minut. Nie wkładaj następujących części do kuchenki mikrofalowej: Nasadka, Membrana silikonowa, Zawór i Miseczka do zbierania pokarmu	Do czyszczenia używaj łagodnego płynu do mycia naczyń lub czystej wody.

UWAGA

- Przy demontażu i czyszczeniu zaworu zachowaj ostrożność; jeżeli zawór zostanie uszkodzony, laktator nie będzie działał prawidłowo.
- Aby wyczyścić zawór, delikatnie umyj go pod ciepłą wodą z kilkoma kroplami środka czyszczącego. Nie wkładaj do zaworu żadnych przedmiotów, które mogłyby go uszkodzić.

Czyszczenie ręczne

- Części laktatora umieść w czystej misce do mycia, używanej wyłącznie do przedmiotów służących do karmienia niemowląt. Nie umieszczaj części laktatora bezpośrednio w zlewie.
- Dodaj do miski mydło i gorącą wodę.
- Wyczyść części za pomocą czystej szczotki służącej tylko do artykułów przeznaczonych do karmienia niemowląt.
- Wypłucz części, trzymając je pod bieżącą wodą lub zanurzając je w czystej wodzie w osobnym naczyniu.
- Dokładnie wysusz wszystkie części. Umieść części laktatora, miskę i szczotkę do butelek na czystej, nieużywanej ściereczce do naczyń lub ręczniku papierowym w miejscu osłoniętym od brudu i kurzu. Nie używaj ściereczki do naczyń do wytarcia ani osuszenia przedmiotów.
- Wyczyść miskę i szczotkę do butelek. Po każdym użyciu dokładnie wypłucz urządzenie i pozostaw je do wyschnięcia. Przynajmniej co kilka dni myj je ręcznie.

Przechowywanie mleka

14

Przechowywanie mleka

1. Przechowuj wyłącznie mleko zebrane za pomocą wysterylizowanego laktatora.
2. Odciągnięte mleko można przelać do czystego i wysterylizowanego woreczka do przechowywania mleka lub butelki na mleko z uszczelnieniem i następnie natychmiast umieścić je w lodówce.

Uwaga

1. Nie należy zamrażać mleka, które już raz zostało rozmrożone.
2. Nie należy mieszać świeżego mleka z mlekiem mrożonym.
3. Niewykorzystane podczas karmienia resztki mleka należy wylać po karmieniu.
4. Odciągnięte mleko można przechowywać w lodówce przez 48 godzin lub zamrozić i przechowywać w zamrażarce przez maksymalnie trzy miesiące. Butelka lub woreczek do przechowywania mleka powinny być opatrzone etykietą, na której wyraźnie zaznaczono datę i godzinę odciągnięcia.

Jak rozmrozić mleko

Zamrożone mleko umieść w lodówce na noc, aby się rozmroziło. Jeśli musisz pilnie wykorzystać zamrożone mleko, możesz rozmrozić je w misce z gorącą wodą. Po rozmrożeniu mleko musi zostać spożyte w ciągu 24 godzin.

Jak podgrzać mleko

1. Włóż butelkę do miski z gorącą wodą w pozycji pionowej lub bezpiecznie i szybko podgrzej mleko za pomocą podgrzewacza do butelek i pokarmu.

2. Uwaga! Zanim nakarmisz dziecko, sprawdź temperaturę mleka.
3. Nie podgrzewaj mleka w kuchenie mikrofalowej, ponieważ mogłoby to zniszczyć znajdujące się w mleku cenne składniki odżywcze i przeciwciała.
4. Ponadto nierównomierne podgrzewanie może spowodować częściowe przegrzanie płynu, co może doprowadzić do poparzeń.
5. Nie zanurzaj butelki do przechowywania mleka we wrzącej wodzie w celu podgrzania, ponieważ butelka może się odkształcić lub pęknąć.

innogio

Wyprodukowano w Chinach dla INNOGIO sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska

www.innogio.com

@innogio.official @innogio_com

