



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PET WHEELCHAIR USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET WHEELCHAIR

Model: SS2-XS, SS2-S, SS2-M, SS2-L



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

Model	SS2-XS
Product Size	445×260×375mm
Load	15lb

Model	SS2-S
Product Size	495×295×475mm
Load	15-35lb

Model	SS2-M
Product Size	630×360×495mm
Load	35-48lb

Model	SS2-L
Product Size	795×440×605mm
Load	48-88lb

Components

Sheff



Wheels



Toolkit



Dogleash



Dog leg fixed belt




NOTE:

This product has undergone multiple tests and user feedback, and has shown excellent results in helping pets recover their health.

Not all pets will use it at the beginning of wearing it (some pets may have a fear of unfamiliar equipment). At this time, it is necessary to let the pet adapt to the wheelchair, comfort the pet, and start supporting the pet to walk slowly. Then, use a traction rope to pull the pet until the pet can walk freely.


Instructions for use

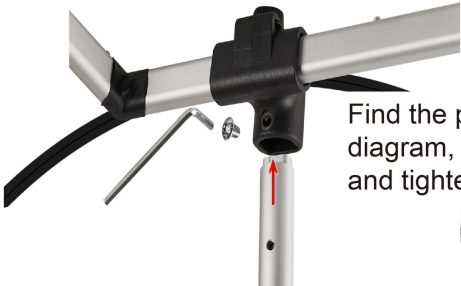

Find the pole and tool shown in the diagram, insert the pole into the hole, and tighten the screw with L tool.



Loosen the nut, press the ball, and adjust to the appropriate gear.

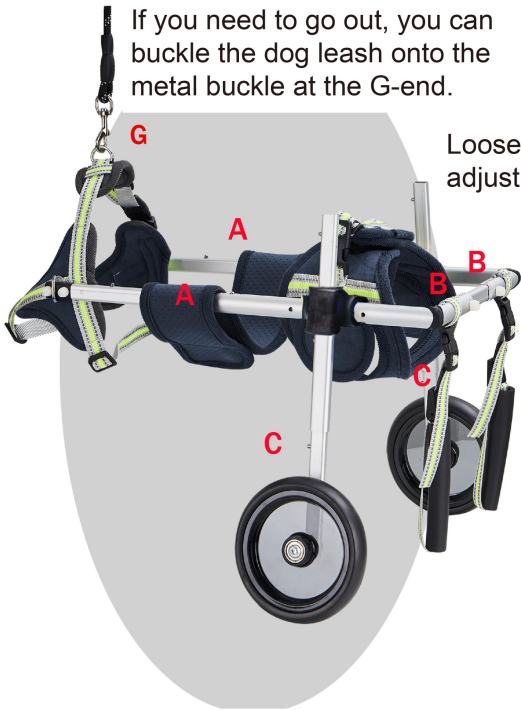

If you need to go out, you can buckle the dog leash onto the metal buckle at the G-end.

AA corresponds to length
BB corresponds to width
CC corresponds to height



Put the dog's rear leg into hole E and adjust the dog's hip circumference.

If the dog's calf is injured, it can be placed on a sponge.



Tie the straps as shown in the diagram.



Adjust the belt size to support the dog's abdomen.

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

BENUTZERHANDBUCH FÜR HAUSTIERROLLSTUHL

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLSTUHL FÜR HAUSTIERE

Modell: SS2-XS, SS2-S, SS2-M, SS2-L



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Spezifikationen

Modell	SS2-XS
Produktgröße	445×260×375mm
Laden	15 Pfund

Modell	SS2-S
Produktgröße	495×295×475mm
Laden	15-35 Pfund

Modell	SS2-M
Produktgröße	630×360×495mm
Laden	35-48 Pfund

Modell	SS2-L
Produktgröße	795×440×605mm
Laden	48-88 Pfund

Komponenten

Sheff



Räder



Werkzeugkasten



Hundeleine



Fester Hundebeingang



NOTIZ:

Dieses Produkt wurde zahlreichen Tests und Benutzerfeedbacks unterzogen und hat hervorragende Ergebnisse bei der Wiederherstellung der Gesundheit von Haustieren gezeigt.

Nicht alle Haustiere werden es am Anfang benutzen (einige Haustiere können Angst vor unbekannter Ausrüstung haben). Zu diesem Zeitpunkt ist es notwendig, Lassen Sie das Haustier sich an den Rollstuhl gewöhnen, beruhigen Sie das Haustier und beginnen Sie unterstützen Sie das Tier beim langsamen Gehen. Ziehen Sie dann mit einem Zugseil das Haustier, bis es frei laufen kann.

Gebrauchsanweisung



Find the pole and tool shown in the diagram, insert the pole into the hole, and tighten the screw with L tool.



Loosen the nut, press the ball, and adjust to the appropriate gear.



If you need to go out, you can buckle the dog leash onto the metal buckle at the G-end.

AA corresponds to length
BB corresponds to width
CC corresponds to height




Put the dog's rear leg into hole E and adjust the dog's hip circumference.



If the dog's calf is injured, it can be placed on a sponge.



Tie the straps as shown in the diagram.

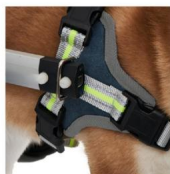

Adjust the belt size to support the dog's abdomen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DU FAUTEUIL ROULANT POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FAUTEUIL ROULANT POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Modèle : SS2-XS, SS2-S, SS2-M, SS2-L



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	SS2-XS
Taille du produit	445×260×375mm
Charger	15 lb

Modèle	SS2-S
Taille du produit	495×295×475mm
Charger	15 à 35 lb

Modèle	SS2-M
Taille du produit	630×360×495mm
Charger	35 à 48 lb

Modèle	SS2-L
Taille du produit	795×440×605mm
Charger	48 à 88 lb

Composants

Sheff



Roues



Boîte à outils

Laisse pour chien

Ceinture fixe à patte de chien



NOTE:

Ce produit a subi de nombreux tests et commentaires des utilisateurs, et a montré d'excellents résultats en aidant les animaux de compagnie à retrouver la santé.

Tous les animaux ne l'utiliseront pas au début du port (certains animaux peuvent avoir peur des équipements inconnus). À ce stade, il est nécessaire laissez l'animal s'adapter au fauteuil roulant, réconfortez-le et commencez aider l'animal à marcher lentement. Ensuite, utilisez une corde de traction pour tirer l'animal jusqu'à ce qu'il puisse marcher librement.

Mode d'emploi



Find the pole and tool shown in the diagram, insert the pole into the hole, and tighten the screw with L tool.



Loosen the nut, press the ball, and adjust to the appropriate gear.



If you need to go out, you can buckle the dog leash onto the metal buckle at the G-end.

AA corresponds to length
BB corresponds to width
CC corresponds to height




Put the dog's rear leg into hole E and adjust the dog's hip circumference.

If the dog's calf is injured, it can be placed on a sponge.



Tie the straps as shown in the diagram.

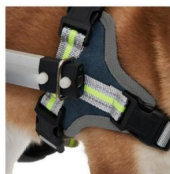

Adjust the belt size to support the dog's abdomen.

Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HUISDIERENROLSTOELEN

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HUISDIERENROLSTOEL

Model: SS2-XS, SS2-S, SS2-M, SS2-L



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

SPECIFICATIES

Model	SS2-XS
Productgrootte	445×260×375mm
Laden	15 pond

Model	SS2-S
Productgrootte	495×295×475mm
Laden	15-35 pond

Model	SS2-M
Productgrootte	630×360×495mm
Laden	35-48 pond

Model	SS2-L
Productgrootte	795×440×605mm
Laden	48-88 pond

Componenten

Schoffel



Gereedschapskist



Hondenriem



Wielen



Vaste riem met hondenpoot



OPMERKING:

Dit product heeft meerdere tests en feedback van gebruikers ondergaan, en heeft uitstekende resultaten laten zien bij het helpen van huisdieren om hun gezondheid te herstellen.

Niet alle huisdieren zullen het meteen gebruiken als ze het gaan dragen (sommige huisdieren kunnen hebben angst voor onbekende apparatuur). Op dit moment is het noodzakelijk om laat het huisdier wennen aan de rolstoel, stel het huisdier gerust en begin Ondersteun het huisdier om langzaam te lopen. Gebruik vervolgens een trekkoord om te trekken het huisdier totdat het huisdier weer vrij kan rondlopen.


Gebruiksaanwijzing



Find the pole and tool shown in the diagram, insert the pole into the hole, and tighten the screw with L tool.



Loosen the nut, press the ball, and adjust to the appropriate gear.

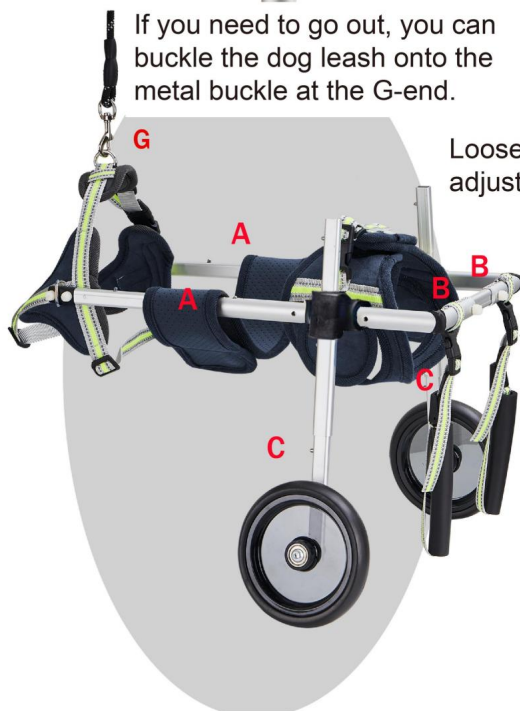

If you need to go out, you can buckle the dog leash onto the metal buckle at the G-end.

AA corresponds to length
BB corresponds to width
CC corresponds to height




Put the dog's rear leg into hole E and adjust the dog's hip circumference.

If the dog's calf is injured, it can be placed on a sponge.



Tie the straps as shown in the diagram.

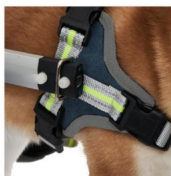

Adjust the belt size to support the dog's abdomen.

Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

DET RULSTOL ANVÄNDARHANDBOK

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RULSTOL FÖR DET

Modell: SS2-XS, SS2-S, SS2-M, SS2-L



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SPECIFIKATIONER

Modell	SS2-XS
Produktstorlek	445×260×375 mm
Ladda	15 lb

Modell	SS2-S
Produktstorlek	495×295×475 mm
Ladda	15-35 lb

Modell	SS2-M
Produktstorlek	630×360×495 mm
Ladda	35-48 lb

Modell	SS2-L
Produktstorlek	795×440×605 mm
Ladda	48-88 lb

Komponenter

Sheff



Hjul



Verktygslåda



Dogleash



Fast bälte för hundben



NOTERA:

Denna produkt har genomgått flera tester och feedback från användare, och har visat utmärkta resultat för att hjälpa husdjur att återhämta sig.

Inte alla husdjur kommer att använda det i början av att bära det (vissa husdjur kan är rädd för obekant utrustning). Vid denna tidpunkt är det nödvändigt att låt husdjuret anpassa sig till rullstolen, trösta husdjuret och börja stödja husdjuret att gå långsamt. Använd sedan ett dragrep för att dra husdjuret tills husdjuret kan gå fritt.

Bruksanvisning



Find the pole and tool shown in the diagram, insert the pole into the hole, and tighten the screw with L tool.



Loosen the nut, press the ball, and adjust to the appropriate gear.



If you need to go out, you can buckle the dog leash onto the metal buckle at the G-end.

AA corresponds to length
BB corresponds to width
CC corresponds to height




Put the dog's rear leg into hole E and adjust the dog's hip circumference.



If the dog's calf is injured, it can be placed on a sponge.



Tie the straps as shown in the diagram.

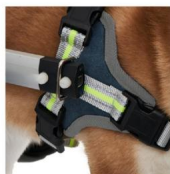

Adjust the belt size to support the dog's abdomen.

Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DE USUARIO DE SILLA DE RUEDAS PARA MASCOTAS

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SILLA DE RUEDAS PARA MASCOTAS

Modelo: SS2-XS, SS2-S, SS2-M, SS2-L



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PRESUPUESTO

Modelo	Primavera 2020-XS
Tamaño del producto	445 × 260 × 375 mm
Carga	15 libras

Modelo	SS2-S
Tamaño del producto	495 × 295 × 475 mm
Carga	15-35 libras

Modelo	SS2-M
Tamaño del producto	630 × 360 × 495 mm
Carga	35-48 libras

Modelo	SS2-L
Tamaño del producto	795 × 440 × 605 mm
Carga	48-88 libras

Componentes

Sheff



Kit de herramientas



Correa para perros



Ruedas



Cinturón fijo para pata de perro



NOTA:

Este producto ha sido sometido a múltiples pruebas y comentarios de los usuarios, y Ha demostrado excelentes resultados ayudando a las mascotas a recuperar su salud.

No todas las mascotas lo usarán al principio de usarlo (algunas mascotas pueden tener miedo a equipos desconocidos). En este momento, es necesario

Deje que la mascota se adapte a la silla de ruedas, consuélala y comience.

Acompañar a la mascota para que camine lentamente. Luego, usar una cuerda de tracción para tirar la mascota hasta que pueda caminar libremente.


Instrucciones de uso



Find the pole and tool shown in the diagram, insert the pole into the hole, and tighten the screw with L tool.



Loosen the nut, press the ball, and adjust to the appropriate gear.

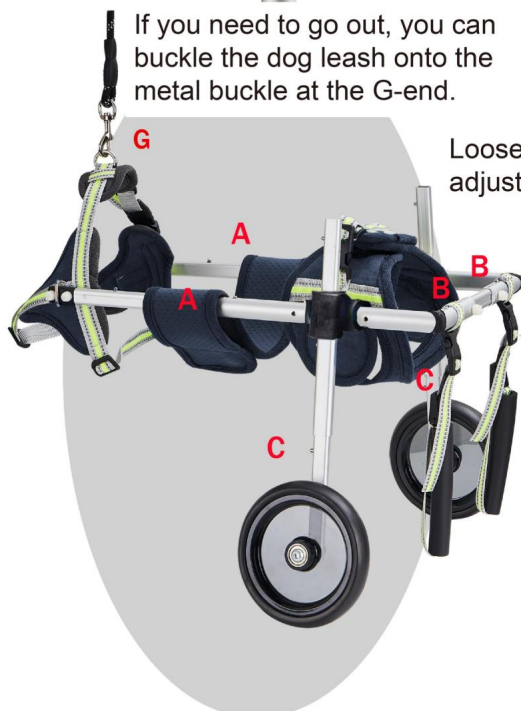

If you need to go out, you can buckle the dog leash onto the metal buckle at the G-end.

AA corresponds to length
BB corresponds to width
CC corresponds to height




Put the dog's rear leg into hole E and adjust the dog's hip circumference.



If the dog's calf is injured, it can be placed on a sponge.




Tie the straps as shown in the diagram.

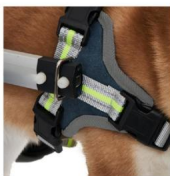


Adjust the belt size to support the dog's abdomen.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

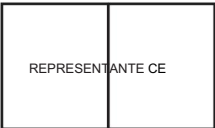

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

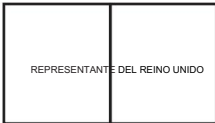

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MANUALE D'USO DELLA SEDIA A ROTELLE PER ANIMALI DOMESTICI

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SEDIA A ROTELLE PER ANIMALI DOMESTICI

Modello: SS2-XS, SS2-S, SS2-M, SS2-L



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SPECIFICHE

Modello	Taglia: SS2-XS
Dimensioni del prodotto	Dimensioni: 445×260×375mm
Carico	15 libbre

Modello	SS2-S
Dimensioni del prodotto	Dimensioni: 495×295×475mm
Carico	15-35 libbre

Modello	SS2-M
Dimensioni del prodotto	630×360×495mm
Carico	35-48 libbre

Modello	SS2-L
Dimensioni del prodotto	Dimensioni: 795×440×605mm
Carico	48-88 libbre

Componenti

Seghetto



Ruote



Kit di strumenti



Guinzaglio per cani



Cintura fissa con gamba di cane



NOTA:

Questo prodotto è stato sottoposto a numerosi test e feedback degli utenti e ha dimostrato risultati eccellenti nell'aiutare gli animali domestici a recuperare la loro salute.

Non tutti gli animali domestici lo utilizzeranno all'inizio dell'uso (alcuni animali domestici potrebbero avere paura di apparecchiature non familiari). In questo momento, è necessario lasciare che l'animale si adatti alla sedia a rotelle, confortarlo e iniziare sostenendo l'animale a camminare lentamente. Quindi, utilizzare una corda di trazione per tirare l'animale domestico finché non riesce a camminare liberamente.


Istruzioni per l'uso



Find the pole and tool shown in the diagram, insert the pole into the hole, and tighten the screw with L tool.



Loosen the nut, press the ball, and adjust to the appropriate gear.

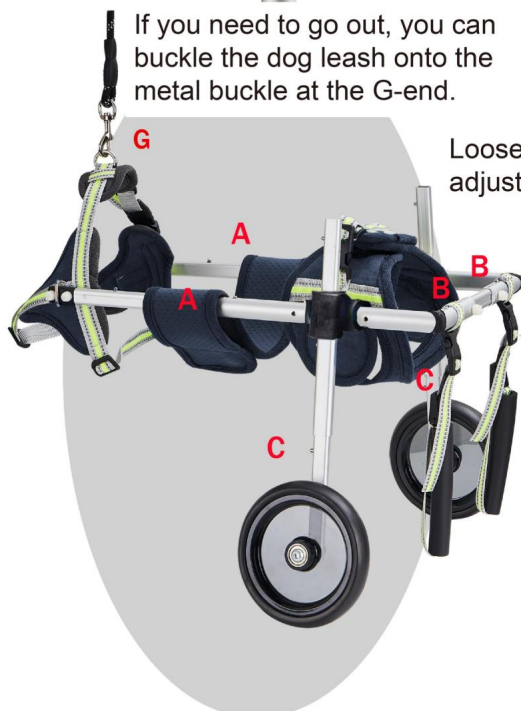

If you need to go out, you can buckle the dog leash onto the metal buckle at the G-end.

AA corresponds to length
BB corresponds to width
CC corresponds to height




Put the dog's rear leg into hole E and adjust the dog's hip circumference.



If the dog's calf is injured, it can be placed on a sponge.



Tie the straps as shown in the diagram.

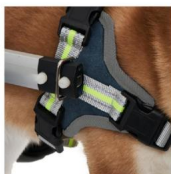

Adjust the belt size to support the dog's abdomen.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI WÓZKA INWALIDZKIEGO DLA ZWIERZĄT

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WÓZEK INWALIDZKI DLA ZWIERZĄT

Modele: SS2-XS, SS2-S, SS2-M, SS2-L



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

SPECYFIKACJE

Model	SS2-XS
Rozmiar produktu	Wymiary: 445×260×375 mm
Obciążenie	15 funtów

Model	SS2-S
Rozmiar produktu	Wymiary: 495×295×475 mm
Obciążenie	15-35 funtów

Model	SS2-M
Rozmiar produktu	630×360×495 mm
Obciążenie	35-48 funtów

Model	SS2-L
Rozmiar produktu	Wymiary: 795×440×605 mm
Obciążenie	48-88 funtów

Komponenty

Szef



Koła



Zestaw narzędzi



Smycz dla psa



Pas stały z nogą w kształcie psa



NOTATKA:

Ten produkt został poddany licznym testom i opiniom użytkowników, wykazał doskonałe rezultaty w pomaganiu zwierzętom domowym w powrocie do zdrowia.

Nie wszystkie zwierzęta będą go używać na początku (niektóre zwierzęta mogą mieć lęk przed nieznanym sprzętem). W tym momencie konieczne jest pozwolić zwierzęciu przystosować się do wózka inwalidzkiego, pociesz je i zacznij wspieranie zwierzęcia w powolnym chodzeniu. Następnie użyj liny trakcyjnej, aby pociągnąć zwierzęciu do momentu, aż będzie mogło ono poruszać się swobodnie.


Instrukcja użytkowania



Find the pole and tool shown in the diagram, insert the pole into the hole, and tighten the screw with L tool.



Loosen the nut, press the ball, and adjust to the appropriate gear.

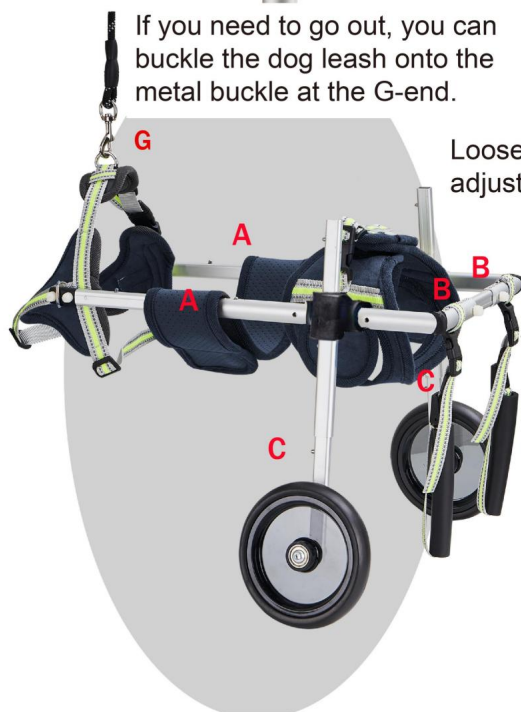

If you need to go out, you can buckle the dog leash onto the metal buckle at the G-end.

AA corresponds to length
BB corresponds to width
CC corresponds to height



Put the dog's rear leg into hole E and adjust the dog's hip circumference.




Adjust the belt size to support the dog's abdomen.

If the dog's calf is injured, it can be placed on a sponge.



Tie the straps as shown in the diagram.

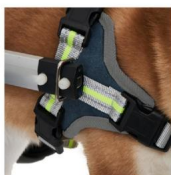

Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support