

USER MANUAL

4-wheeled walker with brakes


Product code: JMC-C 3224



1. Characteristics

4-wheeled walker with brakes is made of crosswise reinforced aluminium frame. The walker is equipped with solid 5" front swivel wheels, 5" rear wheels and hand brakes. Solid handgrips provide proper stabilization and comfort of use. The height of the walker can be adjusted to the user's height. When folded, the walker takes up little space, making it easy to store and transport.

Elements of the walker:

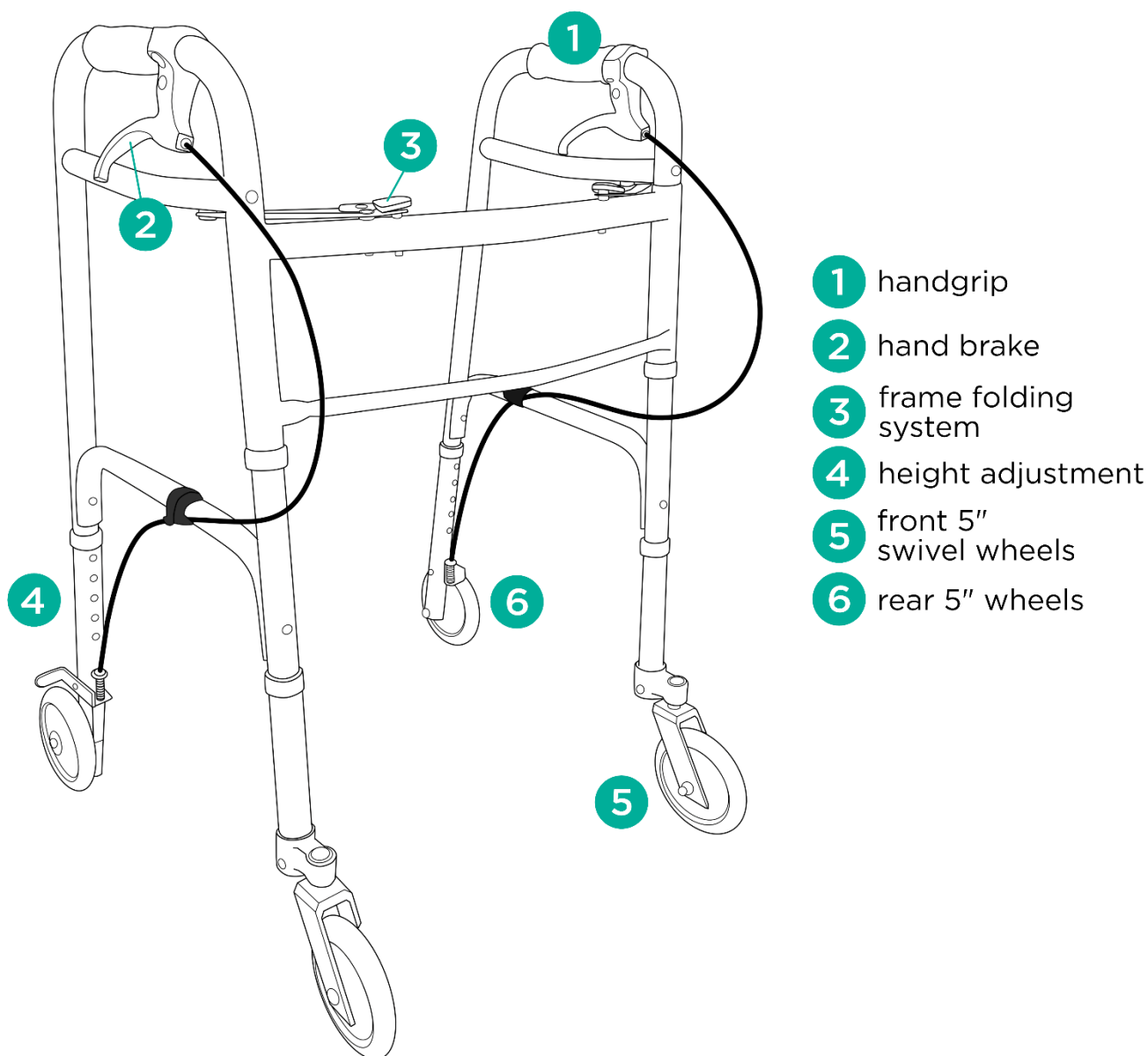

2. Application

4-wheeled walker with brakes is an support equipment designed for people with reduced mobility who need stable support and assistance while walking. It is also

recommended for the elderly as an aid in keeping balance, improving walking comfort and ensuring safety from falling. The use of the walker has a positive effect on the return to activity by people with lower limbs conditions and with locomotion or verticalization problems.

3. Assembly

Unfolding and folding

- To unfold the walker, pull the sides apart to the maximum position until the handgrips are locked (characteristic “click” sound).
- To fold the walker, press the frame folding system button located at the top of the transverse frame and fold the sides inwards.

Height adjustment

- The height should be set on such a level that the user, who is leaning against the handgrips, stands upright with shoulders in rest position and with slightly bent elbows. It is inadvisable to hang on the walker with all the body weight.
- To adjust the height of legs, press the locking pin, select appropriate height and lock the position of all four legs. The legs are adjustable in 2.5 cm increments.

Note! The pins must be set on the same level in each leg.

4. Technical data

Overall width	54 cm
Inner width	44 cm
Overall depth	61 cm
Height adjustment	82-92 cm
Weight	3,77 kg
Maximum capacity	158kg

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the walker, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Maintenance

- Clean the frame of the walker with a damp cloth using water and mild detergent only. Dry thoroughly.

- **Do not use** for cleaning: strong polishing and abrasive agents, strong detergents, bleach, petrol or solvents (it may cause frame damage, visible defects and in consequence - loss of warranty rights).
- Remove dirt from moving components of the walker (hinges, clamping screws, locks) on a regular basis.


7. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Labels

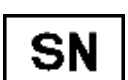	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors.

Learn more at: **www.timago.com**.

Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Balkonik czterokołowy z hamulcami


Kod produktu: JMC-C 3224



1. Wykonanie

Balkonik czterokołowy z hamulcami wykonany jest ze wzmocnionej poprzecznie aluminiowej ramy. Wyposażony w przednie koła obrotowe o średnicy 5", tylne koła o średnicy 5" oraz hamulce ręczne. Solidne uchwyty zapewniają odpowiednią stabilizację i wygodę użytkowania. Wysokość balkonika może być dostosowana do wzrostu użytkownika. Po złożeniu balkonik zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu można go łatwo przechowywać i przewozić.

Elementy balkonika:

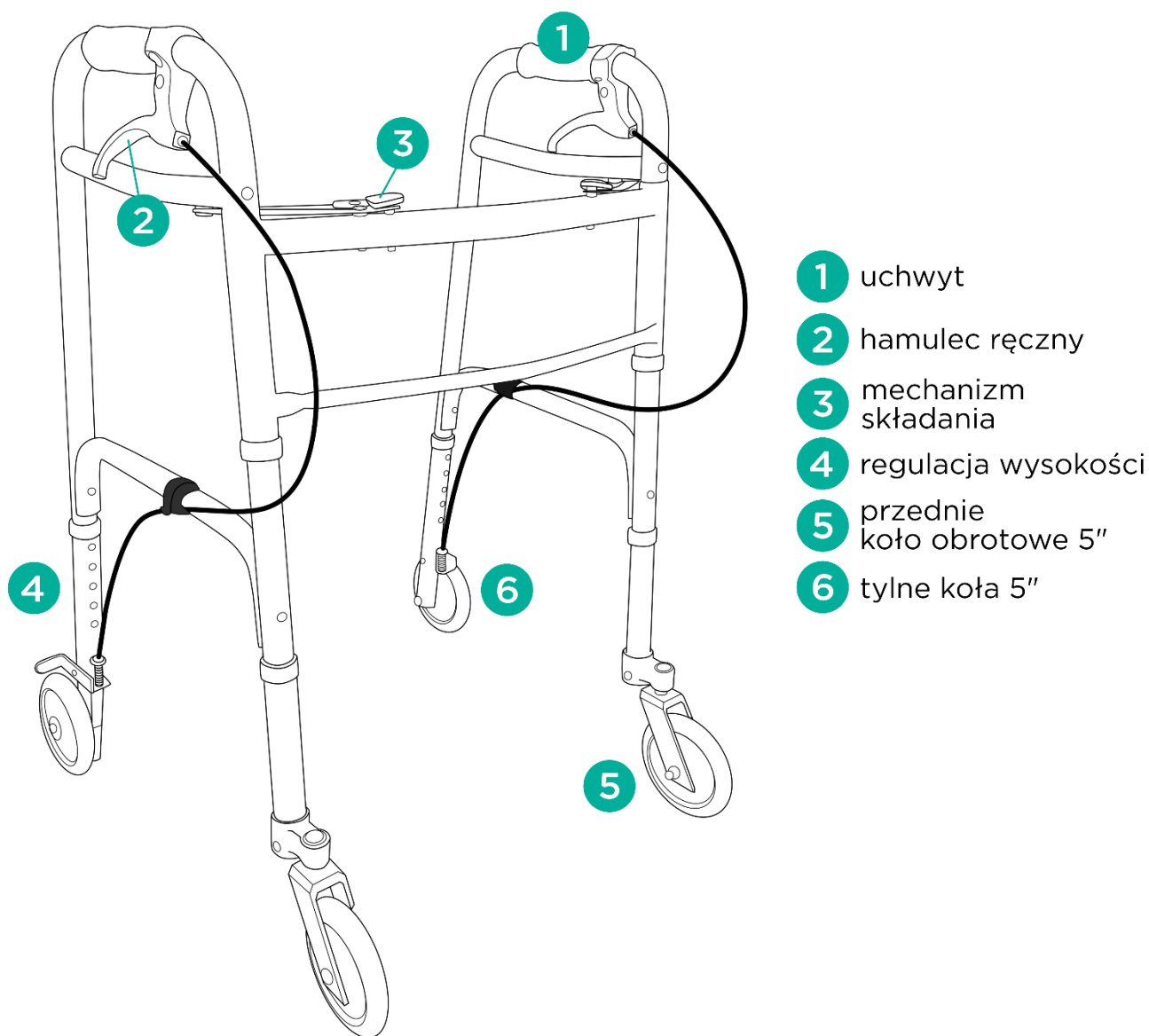

2. Zastosowanie

Balkonik czterokołowy z hamulcami jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia

i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

3. Montaż

Rozłożenie i złożenie balkonika

- Aby rozłożyć balkonik, należy rozchylić boki do pozycji maksymalnej, aż do zablokowania uchwytów (charakterystyczny dźwięk kliknięcia).
- Aby złożyć balkonik, należy wcisnąć przyciski mechanizmu składania znajdujące się na górze ramy poprzecznej i złożyć ramiona do wewnątrz.

Regulacja wysokości

- Wysokość należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik opierając się na uchwytach, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane jest zawieszanie się na balkoniku całym ciężarem ciała.
- Aby wyregulować wysokość nóżki, należy wcisnąć metalowy pin, wybrać odpowiednią wysokość, a następnie zablokować położenie. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga! Wysokość na wszystkich nóżkach musi być ustawiona na tym samym poziomie.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	54 cm
Szerokość wewnętrzna	44 cm
Głębokość całkowita	61 cm
Regulacja wysokości	82-92 cm
Waga	3,77 kg
Maks. obciążenie	158 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z balkonika, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Ramę balkonika należy czyścić wilgotną szmatką, używając wody i łagodnych detergentów.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji – utratą praw gwarancyjnych).
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów balkonika (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



09/2024(I)