


Środek do czyszczenia uszu

Elektryczny czyścik do uszu
z wizualnym systemem mycia

W50

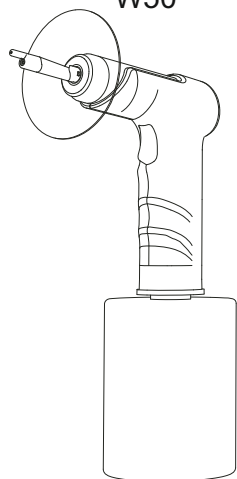

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska Sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu


Przeczytaj uważnie i całkowicie instrukcję
przed użyciem i zachowaj go do wykorzystania
w przyszłość.

Pomocne wskazówki

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje, ostrzeżenia
i wskazówki przed ich użyciem. Niewłaściwe użycie
może spowodować poważne obrażenia ciała
i straty w mieniu.

1. Urządzenie nie jest wodoodporne; proszę nie czyścić
całą maszyną.
2. Nie odwracaj do góry nogami, w przeciwnym razie
woda dostanie się do wnętrza urządzenia i uszkodzić je.
3. Nie używaj tego produktu, jeśli masz infekcję ucha, a
dziura w błonie bębenkowej, wypływ krwi z uszu
lub cokolwiek innego rodzaj urazu ucha. Jeśli tak,
powinieneś zwrócić się o pomoc lekarską nie są
tego pewni.
4. -To normalne, że odczuwasz ucisk, ale nie ból.
Przestań tego używać produktu, jeśli poczujesz ból
i skonsultuj się ze swoim lekarzem o fachową pomoc.
5. -Z tego produktu powinny korzystać dzieci
lub osoby niepełnosprawne pod opieką osoby
dorosłej lub opiekuna
6. Ten produkt nie jest zabawką; proszę trzymać
go z dala od dzieci zasięg.
7. Ten produkt jest wyposażony w baterię, którą
należy przechowywać go z dala od ognia, wilgoci
i środowiska o wysokiej temperaturze.
Może eksplodować w wyniku przegrzania.
8. Jeśli nie będziesz go używać, przechowuj
go w suchym miejscu produkt przez długi czas.
9. -Upewnij się, że podłączono odpowiedni zasilacz DC 5V
naładuj ten produkt.

10. - Nie używaj rozłuru chłodniejszego niż temperatura
ciała, ponieważ może to spowodować powodować
zawroty głowy. Zalecana jest ciepła woda
(nie powinna być gorąca, żeby sprawić ból).
11. - Nie zmieniaj, nie modyfikuj produktu ani go nie demontuj
urządzenia wewnętrznego, co może spowodować
uszkodzenie produktu lub spowodować
jego uszkodzenie obrażenia ciała.
Włączyć coś:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania
przez 1-2 sekundy, aż diody LED zaczną migać.
Wylączyć coś:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania
przez 1-2 sekundy, aż diody LED zgasną.
12. - Nie klasyfikuj go jako odpadu domowego.

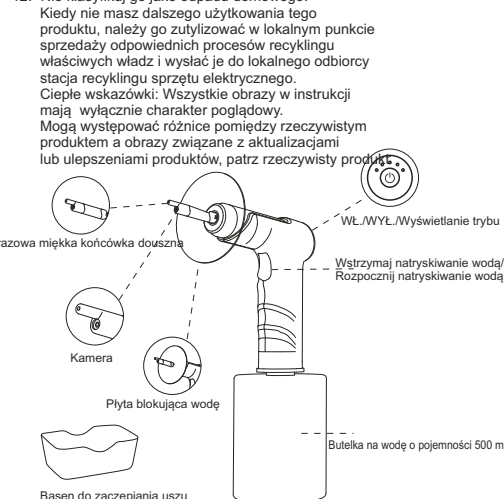

Przycisk Funkcja


Włączanie:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (⏻)
przez 1-2 sekundy, aż diody LED zaczną migać.

Wylącznie:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (⏻)
przez 1-2 sekundy, aż diody LED zgasną.


Przycisk przełącznika natrysku:
Krótkie naciśnięcie powoduje rozpoczęcie,
wstrzymanie strumienia wody

Oszczędzanie energii:
Urządzenie do czyszczenia uszu ma funkcję
oszczędzania energii przez 10 minut
wylączy się automatycznie, jeśli przez 10 minut nie
zostanie wykonana żadna operacja.

Urządzenie do czyszczenia uszu domyślnie pracuje
w trybie normalnym. Krótkie naciśnięcie (⏻)
przycisk przełącznika, aby wybrać żądany tryb.

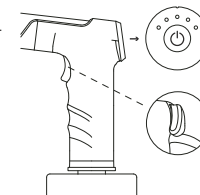

- ① Lampka kontrolna 1: Wskaźnik Wi-Fi/baterii
Kiedy urządzenie jest podłączone do Wi-Fi,
świeci się białe światło jest włączony; gdy
poziom naładowania baterii jest niski, białe
światło 6 miga szybko; podczas ładowania
świeci się czerwone światło włączone, gdy
jest w pełni naładowane, zielone światło
świeci się.
- ② Lampka kontrolna 2: 1. bieg – tryb normalny
- ③ Lampka kontrolna 3: 2. bieg – tryb miękki
- ④ Lampka kontrolna 4: 3. bieg – tryb pulsacyjny
- ⑤ Lampka kontrolna 5: 4. bieg – tryb mocny

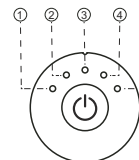

Android:
Jeśli Twój telefon komórkowy wyświetla następujące
komunikaty, sieć Wi-Fi ma brak połączenia danych,
czy nadal próbować korzystać z WiFi? Czy zachować
połączenie? Czy przełączyć WiFi?
Sugestia:
Kliknij opcję „Zachowaj” / „Połącz” / „Odrzuć”.

Bieżąca sieć WLAN nie może uzyskać
dostępu do Internetu i istnieją inne
sieci chcesz je zamienić?

Przełącz sieć

Zachowaj



Ta sieć WLAN nie ma
Dostęp do Internetu.
Połączyć?

Anuluj

Połącz



“ Soulear-xxxx ”Brak Internetu
dostęp, pozwól WiFi Assistant na
przełączyć się na lepszą sieć?

Zezwól

Odmów



Krok 7

Użyj ciepłej wody o temperaturze ciała $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

Krok 8

Umieść miskę pod uchem do nawadniania.

Krok 9

Poruszaj się płynnie okrężnie, aby zwiększyć efekty czyszczenia.

Krok 10

Blockada zniknęła i zakończyć nawadnianie ucha.

1. Jest to normalne, gdy produkt (butelka wody,
rura wodna itp.) niektóre pozostałości wody destylowanej,
która jest używana do badania wydajności.
2. Zaleca się stosowanie trybu 1. biegu do pierwszego
użycia, wybierz inne tryby w zależności od potrzeb.
3. Zaleca się zmiękczenie ciężkiego lub twardego
wosku przed nawadnianiem.

Zainstaluj płytę blokującą wodę


Przymocuj w dół wzdłuż wylotu wody

Porady dla uszu

Miękka końcówka ucha jest higieniczna i zdejmowana dla łatwej wymiany.

Zainstaluj końcówkę do uszu

Przymocuj jednorazowe końcówki douzne do końca
dyszy, zainstaluj ją w odpowiednim miejscu i sprawdź,
czy jest mocno zaciśnięty zapobiec wyciekowi wody.

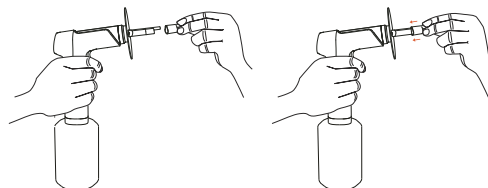

Wskazówki:

1. To jednorazowa końcówka do uszu. Zużyte końcówki
uszu powinny być należy wyrzucić w przypadku
zakażenia ucha.
2. Aby zakupić dodatkowe jednorazowe miękkie końcówki
do uszu, odwiedź naszą stronę przechowywać lub
skontaktować się z nami bezpośrednio, aby uzyskać
więcej instrukcji użytkowania


Napełnij ciepłą wodą

Wymij z opakowania butelkę z wodą do wielokrotnego
napełniania, dodaj ciepło 500ml wody i przekręć go na
środek do czyszczenia uszu.

Wskazówki:

1. Zaleca się ciepłą wodę.
2. Może to być w temperaturze ciała lub
37 stopni Celsjusza, plus lub minus 2 stopnie
(nie powinno być wystarczająco ciepło,
aby cię zranić).
3. Nie wstrzykiwać substancji chemicznych,
takich jak ciała stałe, które mogłyby blokować
lub uszkodzić środek do czyszczenia uszu.

Basen do zacieplania uszu

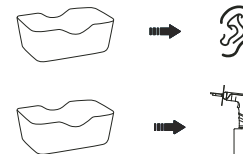

1. Umywalka ma ergonomiczną konstrukcję z małym i
szeroką stroną radianową.
2. Umieść małą stronę radianową pod płatką ucha,
aby zawierała płyn podczas nawadniania.

Tryb normalny: Umiarkowane ciśnienie wody, odpowiednie dla większości ludzi.
Tryb miękki: średnie ciśnienie wody, skuteczne i głębokie czyszczenie.
Tryb impulsowy: naprzemienny silny i słaby przepływ wody, inny czyste uczucie.
Tryb mocny: Silne ciśnienie wody, eliminuje najtwardsze osady woskowa.
Pobierz aplikację „Soulear”.
Dla iOS:
Pobierz i zainstaluj aplikację „Soulear” z App Store.
Dla Android:
Pobierz i zainstaluj aplikację „Soulear” ze sklepu Google Play.
Ciepłe wskazówki: 4 poziomy ciśnienia wody w zakresie od 7 do 24,5 PSI.

Kroki użycia

Krok 1

Pobierz aplikację “Soulear”

Dla iOS:
Zainstaluj aplikację “Soulear” ze sklepu App Store.

Dla Android’a
Zainstaluj aplikację “Soulear” ze sklepu Google Play.



Soulear

Opcjonalnie:
Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.



Dostępny na urządzeniach:

Android 4.4, iOS 9.0 i nowsze wersje. Telefony z systemem Android jak Samsung S7, Galaxy S6 Edge, Note 8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel, XL, Pixel 3, Nexus 6p, Huawei Mate9, Mate 10, Mate 20 Pro, OnePlus itp. Telefony z systemem iOS, takie jak iPhone 6, 6s, 7, 8, X, XR, 11, 12, 13, 14, itp.

Ogłoszenie:


Ten model nie może działać w systemach komputerowych!

Krok 2

Naciśnij długo klawisz przełącznika, aby otworzyć urządzenie, po 5 sekundach, następnie przejdź do następnej operacji.


Krok 3

Otwórz aplikację „Soulear”, kliknij „Podłącz urządzenie” i postępuj zgodnie z wyskakujące okienko i kliknij Połącz teraz, aby przejść do telefonu komórkowego Interfejs ustawień Wi-Fi.

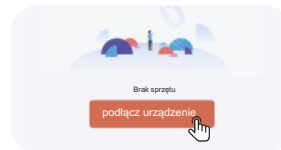


Krok 4

Znajdź “Soulear-xxxx” na interfejsie ustawień WIFI i kliknij, aby połączyć.

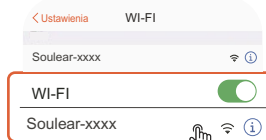


Krok 5

Po wyświetleniu telefonu komórkowego „Soulear-xxxx” Wi-Fi jest podłączone wróć ponownie do aplikacji i kliknij „Połączono”, aby wejść do urządzenia.

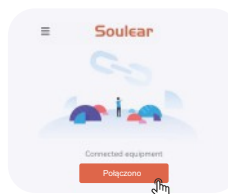

Krok 6


Po podłączeniu do połączenia WIFI produktu, zostaniesz poproszony o kilka pytań: IOS: „Soulear” chciałby znaleźć i połączyć się z urządzeniami w sieci lokalnej. Sugestia: Kliknij “OK”

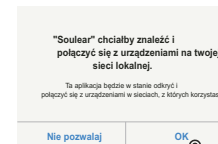

Zezwalaj “Soulear” na korzystanie z danych bezprzewodowych. Sugestia: Kliknij „WLAN&Cellular/WLAN Only”



Instrukcja ładowania

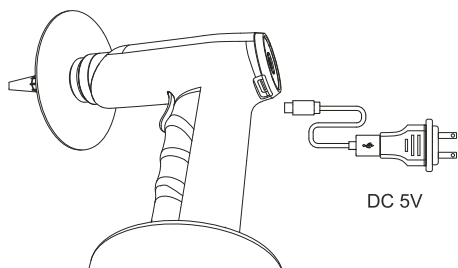

DC 5V

1. W przypadku pierwszego użycia należy naładować środek do czyszczenia uszu. Wyłącz środek do czyszczenia uszu przed ładowaniem.

2. Upewnij się, że środek do czyszczenia uszu i dłonie są suche, aby podłączyć. Kabel typu C (w zestawie do czyszczenia uszu) i podłączyć do. Port ładowania USB DC 5V.

3. Pełne naładowanie trwa 4 godziny. Wskaźnik Strong/CH będzie migać podczas ładowania i utrzymuje się po całkowitym naładowaniu.

4. Wskaźnik LED Strong / CH będzie migać, aby wskazać, że bateria jest niska, proszę naładować urządzenie.

Wskazówki:

1. Nie używaj produktów podczas ładowania.
2. Ładowanie urządzenia do czyszczenia uszu w środowisku o temperaturze między 15-35 °C.
3. Czas pracy może ulec skróceniu w przypadku ładowania w środowisku o niskiej temperaturze (<15°C).
4. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt niska (< 5°C), może to nie być możliwe w stanie naładować.

Opis:

Pojemność baterii	2000mAh
Moc	1.3W
Wejście	Typ-C 5V/1A
Czas ładowania	3 godziny
Czas pracy	7 godziny
Butelka wody	500ml
Waga netto	280g
Piksel	2MP

Konserwacja

1. W trybie wyłączenia wyjmij butelkę z wodą i wylej ją pozostała woda.
2. Włącz środek do czyszczenia uszu, aby spuścić pozostałą wodę z urządzenia wewnętrzne i dysza.


3. Remove the ear tip and discard it.

4. Clean the product with a damp cotton cloth. No cleaning solutions or corrosive liquids should be used.

Rozwiązywanie problemów

1. Jeśli środek do czyszczenia uszu nie włącza się, należy go naładować w przypadku niski poziom naładowania baterii.
2. Jeśli czas pracy urządzenia do czyszczenia uszu jest krótki po pełnym naładowaniu, należy naładować i używać go w temperaturze otoczenia pomiędzy 15-35 °C; Lub czas ładowania jest niewystarczający, należy go naładować.
3. Jeśli diody LED nie działają podczas ładowania, sprawdź jeśli zasilanie jest prawidłowo podłączone.
4. Jeśli ciśnienie wody jest zbyt niskie, należy wymienić nową końcówkę uszu w przypadku zablokowany lub uszkodzony; Lub wybierz silniejszy tryb w oparciu o twoje potrzeby.

Pakiet w zestawie

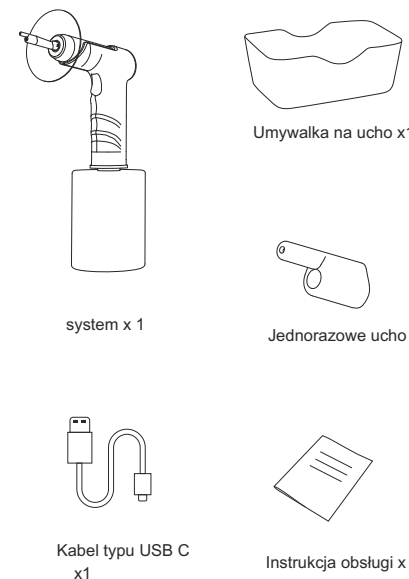

Wyprodukowano w Chinach

