

4. Suszenie: Podłącz zewnętrzne źródło zasilania, naciśnij „przycisk dotykowy” etui ładującego przez 2 sekundy, a etui ładujące przejdzie w tryb suszenia. Lewe i prawe światło LED zgasną, a środkowe światło LED zmieni kolor na niebieski. Temperatura suszenia wynosi 104±9°F (40±5°C), a czas suszenia wynosi 3 godziny.

● Wewnętrzne ładowanie zasilacza
1. Przygotowanie do ładowania: Jeśli nie jest podłączone żadne zewnętrzne źródło zasilania, etui ładujące może ładować aparaty słuchowe. Naciśnij przycisk dotykowy przyciskiem palca wewnątrz etui ładującego przez 2 sekundy. Dioda LED na środku etui ładującego zacznie migać na zielono, wskazując, że etui jest gotowe do ładowania aparatów słuchowych. Jeśli aparaty słuchowe nie zostaną umieszczone w etui ładującym, lewa i prawa dioda LED zgasną, a środkowa dioda LED zacznie migać.

2. Ładowanie: Umieść lewy i prawy aparat słuchowy w odpowiednich portach ładowania. Lewa i prawa dioda LED zaświecą się na niebiesko, a środkowa dioda LED zaświeci się na zielono.



Ładowanie

W pełni naładowany

4. Wyłączenie ładowania: Naciśnij „przycisk dotykowy” w etui ładującym przez 2 sekundy, aby wyłączyć ładowanie wewnętrznej baterii. Wszystkie diody LED zgasną.

● Stan pracy etui ładującego

	Lewe światło	Środkowe światło	Prawe światło
Etui podłączone, aparaty słuchowe nie są w środku	—	Zielone (migające)	—
Ładowanie	Niebieski	Zielony	Niebieski
W pełni naładowany (zewnętrzne źródło zasilania)	Zielony	Zielony	Zielony
W pełni naładowany (wewnętrzne źródło zasilania)	Zielony (wyłącza się po 30 sek.)	Zielony (wyłącza się po 30 sek.)	Zielony (wyłącza się po 30 sek.)
Wyładowany	—	Niebieski	—
Suszenie zakończone	Zielony	Zielony	Zielony

● Rozwiązywanie problemów

● Niski poziom dźwięku lub brak dźwięku

1. Dostosuj głośność lub tryb.
2. Upewnij się, że aparaty słuchowe są wystarczająco naładowane.
3. Sprawdź, czy odbiornik i mikrofon nie są zablokowane i wyczyść je szczoteczką czyszczącą.

● Problem z ładowaniem

1. Sprawdź, czy moc wyjściowa adaptera wynosi 5 V/1 A lub mniej. W razie potrzeby wymień adapter lub kabel ładujący.
2. Sprawdź, czy na stykach ładowania nie ma żadnych plam.
3. Podłącz zasilanie i odłącz kabel ładujący od etui ładującego kilka razy.

4. Podnieś aparaty słuchowe i włóż je ponownie do etui ładującego 2-3 razy, a następnie sprawdź, czy dioda LED zaświeci się na niebiesko.

Instrukcja obsługi aparatu słuchowego



Muza


Włączanie/wyłączanie i ładowanie

Włączanie/wyłączanie


Gdy wyjmiesz aparaty słuchowe z etui ładującego, włączą się automatycznie. Gdy włożysz aparaty słuchowe do etui ładującego, wyłączą się automatycznie.

Wybór kopułek uszu

Wybierz nakładki dosłuszne, które pasują do rozmiaru Twojego kanału słuchowego i upewnij się, że są pewnie zamocowane.

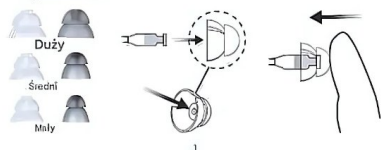

Noszenie aparatów słuchowych

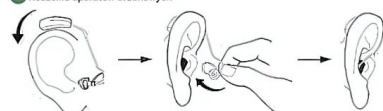

Działanie funkcjonalne

Struktura produktu

1. Mikrofon
2. Przycisk w górę/zwiększanie głośności • 3. Przycisk w dół/zmniejszanie głośności
4. Styk ładujący
5. Odbiornnik
6. Kopuła ucha



Regulacja głośności

Istnieje 9 poziomów głośności, naciskając przez 1 sekundę, aby dostosować głośność. „Przycisk w górę” zwiększa głośność, a „przycisk w dół” zmniejsza głośność. Przy każdej zmianie poziomu dźwięku będzie słyszalny sygnał dźwiękowy. Maksymalny i minimalny poziom dźwięku będzie oznaczony 2 sygnałami dźwiękowymi.


Tryb przełączania

Dostępne są 4 tryby: Normalny, Outdoor, Party i TV. Naciśnij i przytrzymaj „przycisk Down” przez 2 sekundy, aby zmienić tryb. Użytych jest 1 sygnał dźwiękowy dla Normalnego, 3 sygnały dźwiękowe dla Outdoor, 3 sygnały dźwiękowe dla Party, 4 sygnały dźwiękowe dla TV.

Ładowanie

Etui ładujące

1. Otworzy suszące
2. Dotknij przycisku
3. Port ładowania
4. Przycisk otwórz
5. Światło LED

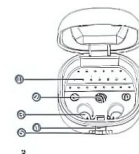

Po umieszczeniu słuchawki w etui ładującym należy zamknąć pokrywę, pomoce wewnętrzne. Etui ładujące ładuje aparaty słuchowe na dwa sposoby: może ładować się z zewnętrznego źródła zasilania lub wykorzystywać wewnętrzne źródło zasilania.

Ładowanie zewnętrznego zasilacza

1. Przygotowanie do ładowania: Wyjmij kabel ładujący typu C, podłącz adapter 5 V/1 A do portu typu C w etui ładującym, a etui przejdzie w tryb czuwania. Jeśli aparaty słuchowe nie znajdują się w etui, lewa i prawa dioda LED zgasną, a środkowa dioda LED zacznie migać.



2. Proces ładowania: Umieść lewy i prawy aparat słuchowy odpowiednio w lewym i prawym porcie ładowania. Lewa i prawa dioda LED będą niebieskie, a środkowa dioda LED będzie zielona przez cały okres ładowania.

3. Pełne naładowanie: Wszystkie trzy diody LED będą świecić na zielono. Po naładowaniu można odłączyć obudowę od zasilania.

