

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Taboret prysznicowy obrotowy z systemem TF

Kod produktu TGR-R KP-O 5021



1. Wykonanie


Taboret prysznicowy wykonany jest z aluminiowej ramy, okrągłego obrotowego siedziska wykonanego z wytrzymałego PCV oraz nóg zakończonych gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. Dzięki skokowej regulacji wysokości, posiada możliwość indywidualnego dostosowania do wzrostu pacjenta. Dodatkowo taboret został wyposażony w system TF ułatwiający montaż.

Zestaw zawiera:

- siedzisko- 1 szt.
- rurki podstawy taboretu- 2 szt.
- nóżki z regulacją wysokości- 4 szt.
- śruby montażowe (motylki)- 5 szt.

Części składowe:

- a. siedzisko
- b. rurki podstawy
- c. regulacja wysokości-sztyft blokujący
- d. nasadki antypoślizgowe

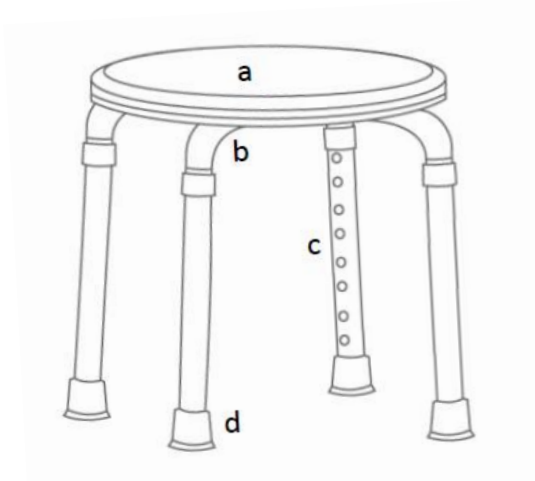

2. Zastosowanie

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Zalecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która

uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

3. Montaż

Krok 1. Siedzisko taboretu należy położyć płasko na podłożu.

Krok 2. Następnie za pomocą czterech śrub motylkowych z podkładkami plastikową i metalową zmontować siedzisko ze skrzyżowanymi rurkami podstawy taboretu. Śrubę motylkową o jaśniejszym kolorze wraz z podkładkami należy wkręcić na środku.

Krok 3. Rurki podstawy taboretu należy połączyć z nóżkami.

REGULACJA WYSOKOŚCI

- Aby wyregulować wysokość taboretu, należy wcisnąć metalowy sztyft, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować położenie względem siebie sztyftem blokującym. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga! Sztyfty we wszystkich nóżkach należy ustawić na tym samym poziomie.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość	33 cm
Wysokość	34,5- 52 cm
Średnica siedziska	32 cm
Waga	1,95 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z taboretu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Taboret należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wycierać do sucha.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Należy systematycznie sprawdzać:
 - dokręcenie śrub motylkowych
 - stan sztyftów blokujących
 - stan rurek (pod kątem pęknięć)Zaleca się regularną kontrolę nasadki gumowej. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021