

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TOILET SAFETY RAILS

MODEL: FBL760600

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOILET SAFETY RAILS

MODEL: FBL760600



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, users must read the instructions manual carefully.

WARNING:

Read the manual completely to avoid harm, product damage, or warranty avoidance. Seek professional help if you encounter discomfort, pain, or worsening symptoms. If necessary, use supervision in order to assemble and use this product correctly and safely. Do not exceed the 300lb weight limit.

Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. The product is to be used on flat, stable surfaces. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual. Use only parts approved by VEVOR for this specific product. Confirm the compatibility of the toilet rail with your toilet before first use. The product isn't built to withstand pressure or impact and isn't to be used as a ladder or loaded with heavy objects.

Keep away from children and pets. Contains potentially hazardous small parts - choking hazard. Exercise caution during operation and assembly. Avoid extreme temperatures or open flames. If an allergic reaction occurs, cease use immediately and consult a healthcare professional.

Warranty Policy

We warrant your new VEVOR product to be free from defects in materials and workmanship 3 years of the original purchase. However, please keep in mind that our guarantee policy does not cover counterfeit or replica items, nor does it extend to products purchased from unauthorized resellers or in used condition.

Please note that each purchase is eligible for only one guarantee redemption, and we cannot repeatedly refund, replace, or exchange your product. We also kindly ask that you handle the product with care and use it according to the instructions provided. Unfortunately, we cannot cover damage resulting from misuse or abuse of the product. This warranty is not transferable and applies only to the original purchaser.

IMPORTANT

1. Don't exceed the weight capacity - 300 lb max.
2. Use on stable surfaces only.
3. Regularly inspect for signs of wear, damage, or loose parts.
4. Clean regularly using a mild detergent and warm water, rinse off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly.
5. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

SAVE THESE INSTRUCTION

PARAMETER LIST

Model	FBL760600
Rated load (lbs)	300
Height adjustment range(mm)	125mm
Net weight(kg)	1.22
Product size(mm)	405*350*175

PART LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

NO	PICTURE	PART NUMBER	QTY
1		Toilet seat	1
2		Clamp	2

OPERATION

1. Installation Procedures

1. As shown in the figure, place the toilet seat ① upside down on a flat surface (you can see the raised inner circle in the middle of the seat and the front raised part).



2. As shown in the figure, insert the two clamps ② through the threaded guide slots on each side of the bottom of the seat, and press down firmly on the clamps to rotate the bracket knobs clockwise (note: the clamps should not be locked all the way to the bottom, otherwise the seat may not be placed properly on the toilet).



3. As shown in the picture, place the seat with the clamps assembled squarely on the toilet (so that the middle bulge of the seat is completely inside the toilet and the front bulge of the seat snaps onto the front edge of the toilet) and adjust the clamp knobs to secure the seat to the toilet.



Manufacturer: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Address: 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

RAILS DE SÉCURITÉ POUR TOILETTES

MODÈLE : FBL760600

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOILETTES
RAILS DE SÉCURITÉ

MODÈLE : FBL760600



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Avertissement-Pour réduire le risque de blessure, les utilisateurs doivent lire le attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

Lisez entièrement le manuel pour éviter tout dommage, dommage au produit ou garantie.

nullité. Demandez l'aide d'un professionnel si vous ressentez un inconfort, une douleur ou une aggravation symptômes. Si nécessaire, utilisez la supervision afin d'assembler et d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. Ne dépassez pas la limite de poids de 300 lb.

Vérifiez régulièrement la sécurité de l'assemblage et contactez l'assistance en cas de doute. Assurer le les pieds du produit sont uniformes et verrouillés avant utilisation, et cessez de l'utiliser s'il y a signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Le produit doit être utilisé sur un support plat et stable surfaces. Ne démontez pas si cela n'est pas nécessaire, car cela pourrait compromettre le longévité du produit. Ne modifiez pas le produit sauf indication contraire dans le manuel.

Utilisez uniquement des pièces approuvées par VEVOR pour ce produit spécifique. Confirmer le compatibilité de la barre de toilette avec vos toilettes avant la première utilisation. Le produit n'est pas construit pour résister à la pression ou aux chocs et ne doit pas être utilisé comme une échelle ou chargé de objets lourds.

Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques. Contient de petites pièces potentiellement dangereuses - risque d'étouffement. Faites preuve de prudence lors du fonctionnement et du montage. Évitez les extrêmes températures ou flammes nues. En cas de réaction allergique, cesser immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de la santé.

Politique de garantie

Nous garantissons que votre nouveau produit VEVOR est exempt de défauts de matériaux et fabrication 3 ans à compter de l'achat initial. Cependant, gardez à l'esprit que notre politique de garantie ne couvre pas les articles contrefaits ou répliques, et ne s'étend pas non plus aux produits achetés auprès de revendeurs non autorisés ou en état d'usage.

Veuillez noter que chaque achat n'est éligible qu'à un seul rachat de garantie, et nous ne pouvons pas rembourser, remplacer ou échanger votre produit à plusieurs reprises. Nous avons également la gentillesse vous demander de manipuler le produit avec soin et de l'utiliser conformément aux instructions fourni. Malheureusement, nous ne pouvons pas couvrir les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un abus du produit. Cette garantie n'est pas transférable et s'applique uniquement à l'original acheteur.

IMPORTANT

1. Ne dépassez pas la capacité de poids – 300 lb maximum.
2. Utiliser uniquement sur des surfaces stables.
3. Inspectez régulièrement les signes d'usure, de dommages ou de pièces desserrées.
4. Nettoyez régulièrement avec un détergent doux et de l'eau tiède, rincez éliminer tout résidu de savon. Après le nettoyage, séchez soigneusement.
5. Avant utilisation, confirmez auprès de votre professionnel de la santé que le produit répond à vos besoins spécifiques. Les directives suivantes ne remplacent pas un avis médical.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	FBL760600
Charge nominale (lbs)	300
Plage de réglage de la hauteur (mm)	125mm
Poids net / kg)	1.22
Taille du produit (mm)	405*350*175

LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces répertoriées ci-dessous sont inclus et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant transit. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.

NON	IMAGE	NUMÉRO D'ARTICLE	QTÉ
1		Siège de toilette	1
2		Serrer	2

OPÉRATION

1. Procédures d'installation

1. Comme indiqué sur la figure, placez le siège des toilettes à l'envers sur une surface plane (vous pouvez voir le cercle intérieur surélevé au milieu du siège et la partie avant surélevée).



2. Comme indiqué sur la figure, insérez les deux pinces dans les fentes de guidage fileté de chaque côté du bas du siège et appuyez fermement sur les pinces pour faire tourner les boutons du support dans le sens des aiguilles d'une montre (remarque : les pinces ne doivent pas être verrouillées). jusqu'en bas, sinon le siège risque de ne pas être correctement placé sur les toilettes).



3. Comme indiqué sur l'image, placez le siège avec les pinces assemblées d'équerre sur les toilettes (de sorte que le renflement central du siège soit complètement à l'intérieur des toilettes et que le renflement avant du siège s'enclenche sur le bord avant des toilettes) et ajustez les boutons de serrage pour fixer le siège aux toilettes.




Fabricant : Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd Adresse : 3-6F &
7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414,
CHINE Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1
ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni

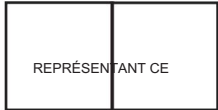

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugertifikat www.vevor.com/support

WC-SICHERHEITSGELÄNDER

MODELL: FBL760600

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOILETTE
SICHERHEITSGELÄNDER

MODELL: FBL760600



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die lesen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WARNUNG:

Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, um Schäden, Produktschäden oder Garantieansprüche zu vermeiden
Nichtigkeit. Suchen Sie professionelle Hilfe auf, wenn Sie Beschwerden, Schmerzen oder eine Verschlechterung verspüren
Symptome. Lassen Sie sich bei Bedarf von der Aufsicht beaufsichtigen, um dieses Produkt zusammenzubauen und zu verwenden
richtig und sicher. Überschreiten Sie nicht die Gewichtsgrenze von 300 Pfund.
Überprüfen Sie regelmäßig die sichere Montage und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Support. Sicherstellen, dass die
Stellen Sie sicher, dass die Füße des Produkts vor der Verwendung gerade und verriegelt sind. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn dies der Fall ist
Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder fehlenden Teilen. Das Produkt ist auf ebenem, stabilem Untergrund zu verwenden
Oberflächen. Zerlegen Sie es nicht, wenn es nicht notwendig ist, da dies die Funktion beeinträchtigen könnte
Langlebigkeit des Produkts. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, es sei denn, dies ist im Handbuch angegeben.
Verwenden Sie nur von VEVOR für dieses spezifische Produkt zugelassene Teile. Bestätigen Sie das
Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Kompatibilität der Toilettenstange mit Ihrer Toilette. Das Produkt ist nicht gebaut
um Druck oder Stößen standzuhalten und darf nicht als Leiter verwendet oder damit belastet werden
schwere Gegenstände.
Von Kindern und Haustieren fernhalten. Enthält potenziell gefährliche Kleinteile – Erstickungsgefahr. Seien Sie beim Betrieb
und bei der Montage vorsichtig. Vermeiden Sie Extreme
Temperaturen oder offene Flammen. Wenn eine allergische Reaktion auftritt, stellen Sie die Anwendung sofort ein
und konsultieren Sie einen Arzt.

Garantiebestimmungen

Wir garantieren, dass Ihr neues VEVOR-Produkt frei von Material- und Mängeln ist
Verarbeitung 3 Jahre nach dem ursprünglichen Kauf. Bitte bedenken Sie dies jedoch
Unsere Garantiebestimmungen gelten nicht für gefälschte oder nachgeahmte Artikel und werden auch nicht verlängert
für Produkte, die bei nicht autorisierten Wiederverkäufern gekauft wurden oder sich in gebrauchtem Zustand befinden.
Bitte beachten Sie, dass bei jedem Kauf nur eine Garantiefreisetzung möglich ist
Wir können Ihr Produkt nicht wiederholt ersetzen, ersetzen oder umtauschen. Wir freuen uns auch
Bitten Sie darum, mit dem Produkt vorsichtig umzugehen und es gemäß den Anweisungen zu verwenden
bereitgestellt. Schäden, die durch Missbrauch oder Missbrauch entstehen, können wir leider nicht decken
des Produkts. Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für das Original
Käufer.

WICHTIG

1. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität – max. 300 Pfund.
2. Nur auf stabilen Oberflächen verwenden.
3. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder lockeren Teilen.
4. Regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen und abspülen
Seifenreste entfernen. Nach der Reinigung gründlich trocknen.
5. Bestätigen Sie vor der Verwendung mit Ihrem Arzt, dass das Produkt Ihren Anforderungen entspricht
spezielle Bedürfnisse. Die folgenden Richtlinien ersetzen keinen ärztlichen Rat.

Bewahren Sie diese Anleitung auf

PARAMETERLISTE

Modell	FBL760600
Nennlast (lbs)	300
Höhenverstellbereich (mm)	125mm
Nettogewicht / kg)	1.22
Produktgröße (mm)	405*350*175

STÜCKLISTE

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile vorhanden sind
enthalten und prüfen Sie sorgfältig, ob dabei Schäden entstanden sind

Transit. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Gerät zusammenzubauen oder zu verwenden
Produkt.

NEIN	BILD	ARTIKELNUMMER	MENGE
1		Toiletten Sitz	1
2		Klemme	2

BETRIEB

1. Installationsverfahren

1. Stellen Sie den Toilettensitz so wie in der Abbildung gezeigt mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche (Sie können den erhöhten inneren Kreis in der Mitte des Sitzes und den vorderen erhöhten Teil sehen).



2. Führen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die beiden Klemmen so durch die Gewindeführungsschlitze auf beiden Seiten der Unterseite des Sitzes ein und drücken Sie die Klemmen fest nach unten, um die Halterungsknöpfe im Uhrzeigersinn zu drehen (Hinweis: Die Klemmen dürfen nicht verriegelt sein bis ganz nach unten, sonst sitzt der Sitz möglicherweise nicht richtig auf der Toilette).



3. Platzieren Sie den Sitz wie in der Abbildung gezeigt mit den montierten Klammern genau auf der Toilette (so dass sich die mittlere Wölbung des Sitzes vollständig innerhalb der Toilette befindet und die vordere Wölbung des Sitzes an der Vorderkante der Toilette einrastet) und Passen Sie die Klemmknöpfe an, um den Sitz an der Toilette zu befestigen.



Hersteller: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd **Adresse:** 3-6F &

7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd

Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons

Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GUIDE DI SICUREZZA PER WC

MODELLO: FBL760600

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOILETTE
GUIDE DI SICUREZZA

MODELLO: FBL760600



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, gli utenti devono leggere il attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO:

Leggere completamente il manuale per evitare danni, danni al prodotto o garanzia nullità. Cerca un aiuto professionale se riscontri disagio, dolore o peggioramento sintomi. Se necessario, avvalersi della supervisione per assemblare e utilizzare questo prodotto correttamente e in sicurezza. Non superare il limite di peso di 300 libbre.

Controllare regolarmente che l'assemblaggio sia sicuro e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Garantire il i piedini del prodotto siano livellati e bloccati prima dell'uso e, se presenti, interrompere l'uso segni di usura, danni o parti mancanti. Il prodotto è da utilizzare su superfici piane e stabili superfici. Non smontare se non necessario, poiché potrebbe compromettere il longevità del prodotto. Non modificare il prodotto se non diversamente specificato nel manuale.

Utilizzare solo parti approvate da VEVOR per questo prodotto specifico. Confermare la compatibilità della barra WC con la vostra toilette prima del primo utilizzo. Il prodotto non è costruito resistere alla pressione o all'impatto e non deve essere utilizzato come scala o caricato con esso oggetti pesanti.

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Contiene piccole parti potenzialmente pericolose: pericolo di soffocamento. Prestare attenzione durante il funzionamento e il montaggio. Evitare l'estremo temperature o fiamme libere. Se si verifica una reazione allergica, interrompere immediatamente l'uso e consultare un operatore sanitario.

Politica di garanzia

Garantiamo che il vostro nuovo prodotto VEVOR è esente da difetti nei materiali e lavorazione 3 anni dall'acquisto originale. Tuttavia, tienilo presente la nostra politica di garanzia non copre gli articoli contraffatti o replicati, né si estende ai prodotti acquistati da rivenditori non autorizzati o in condizioni usate.

Tieni presente che ogni acquisto dà diritto a un solo riscatto della garanzia e non possiamo rimborsare, sostituire o scambiare ripetutamente il tuo prodotto. Anche noi gentilmente chiedere di maneggiare il prodotto con cura e di utilizzarlo secondo le istruzioni fornito. Sfortunatamente, non possiamo coprire i danni derivanti da uso improprio o abuso del prodotto. Questa garanzia non è trasferibile e si applica solo all'originale acquirente.

IMPORTANTE

1. Non superare la capacità di peso: 300 libbre max.
2. Utilizzare solo su superfici stabili.
3. Ispezionare regolarmente eventuali segni di usura, danni o parti allentate.
4. Pulire regolarmente utilizzando un detergente delicato e acqua tiepida, quindi risciacquare eliminare eventuali residui di sapone. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.
5. Prima dell'uso, conferma con il tuo medico che il prodotto soddisfa le tue esigenze esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere medico.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO PARAMETRI

Modello	FBL760600
Carico nominale (libbre)	300
Intervallo di regolazione dell'altezza (mm)	125 mm
Peso netto (chilogrammo)	1.22
Dimensioni del prodotto (mm)	405*350*175

ELENCO PARTI

Quando si disimballa il prodotto, verificare che le parti elencate di seguito lo siano incluso e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante transito. Se qualche parte manca o è danneggiata, non tentare di assemblare o utilizzare il Prodotto.

NO	IMMAGINE	NUMERO DI PARTE	QUANTITÀ
1		Sedile del WC	1
2		MORSETTO	2

OPERAZIONE

1. Procedure di installazione

1. Come mostrato in figura, posizionare il sedile del WC ỹ capovolto su una superficie piana (si può vedere il cerchio interno in rilievo al centro del sedile e la parte rialzata anteriore).



2. Come mostrato nella figura, inserire i due morsetti ỹ attraverso le fessure della guida filettata su ciascun lato della parte inferiore del sedile e premere con decisione sui morsetti per ruotare le manopole della staffa in senso orario (nota: i morsetti non devono essere bloccati fino in fondo, altrimenti il sedile potrebbe non essere posizionato correttamente sul WC).



3. Come mostrato nell'immagine, posizionare il sedile con i morsetti montati esattamente sulla toilette (in modo che il rigonfiamento centrale del sedile sia completamente all'interno della toilette e il rigonfiamento anteriore del sedile si incastri sul bordo anteriore della toilette) e regolare le manopole di bloccaggio per fissare il sedile al WC.



Produttore: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd **Indirizzo:** 3-6F &


7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

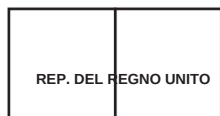

Gruppo Pooledas Ltd

Unità 5 Casa Albert Edward, I Padiglioni

Preston, Regno Unito



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BARANDILLAS DE SEGURIDAD PARA INODOROS

MODELO: FBL760600

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BAÑO
BARANDILLAS DE SEGURIDAD

MODELO: FBL760600



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, los usuarios deben leer el manual de instrucciones con atención.

ADVERTENCIA:

Lea el manual por completo para evitar daños, daños al producto o garantía.

anulación. Busque ayuda profesional si siente molestias, dolor o empeoramiento.

síntomas. Si es necesario, solicite supervisión para ensamblar y utilizar este producto.

de forma correcta y segura. No exceda el límite de peso de 300 libras.

Verifique periódicamente que el ensamblaje sea seguro y comuníquese con el soporte técnico en caso de duda. Asegurar la

Las patas del producto están niveladas y bloqueadas antes de su uso, y suspenda su uso si hay

signos de desgaste, daños o piezas faltantes. El producto debe utilizarse en superficies planas y estables.

superficies. No desmontar si no es necesario, ya que podría comprometer la

longevidad del producto. No modifique el producto a menos que se especifique en el manual.

Utilice únicamente piezas aprobadas por VEVOR para este producto específico. Confirmar la

compatibilidad de la barra del inodoro con su inodoro antes del primer uso. El producto no está construido.

para soportar presión o impacto y no debe usarse como escalera ni cargarse con

objetos pesados.

Mantener alejado de los niños y las mascotas. Contiene piezas pequeñas potencialmente peligrosas: peligro

de asfixia. Tenga cuidado durante la operación y el montaje. Evite los extremos

temperaturas o llamas abiertas. Si se produce una reacción alérgica, deje de usarlo inmediatamente.

y consulte a un profesional de la salud.

Póliza de garantía

Garantizamos que su nuevo producto VEVOR estará libre de defectos en materiales y

mano de obra 3 años desde la compra original. Sin embargo, tenga en cuenta que

nuestra política de garantía no cubre artículos falsificados o réplicas, ni extiende

a productos comprados a revendedores no autorizados o en condiciones usadas.

Tenga en cuenta que cada compra es elegible para un solo canje de garantía, y

No podemos reembolsar, reemplazar o cambiar su producto repetidamente. Nosotros también amablemente

Solicite manipular el producto con cuidado y utilizarlo según las instrucciones.

proporcionó. Lamentablemente, no podemos cubrir los daños resultantes del mal uso o abuso.

del producto. Esta garantía no es transferible y se aplica únicamente al original.

comprador.

IMPORTANTE

1. No exceda la capacidad de peso: 300 lb máx.
2. Úselo únicamente en superficies estables.
3. Inspeccione periódicamente para detectar signos de desgaste, daños o piezas sueltas.
4. Limpiar regularmente con un detergente suave y agua tibia, enjuagar cualquier residuo de jabón. Después de la limpieza, seque bien.
5. Antes de usar, confirme con su proveedor de atención médica que el producto cumple con sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	FBL760600
Carga nominal (libras)	300
Rango de ajuste de altura (mm)	125mm
Peso neto / kg)	1.22
Tamaño del producto (mm)	405*350*175

LISTA DE

Al desembalar este producto, verifique que las piezas enumeradas a continuación estén incluido e inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante tránsito. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar ni utilizar el producto.

NO	IMAGEN	NÚMERO DE PIEZA	CANTIDAD
1		Asiento del baño	1
2		Abrazadera	2

OPERACIÓN

1. Procedimientos de instalación

1. Como se muestra en la figura, coloque el asiento del inodoro boca abajo sobre una superficie plana (puede ver el círculo interior elevado en el medio del asiento y la parte frontal elevada).



2. Como se muestra en la figura, inserte las dos abrazaderas a través de las ranuras guía roscadas a cada lado de la parte inferior del asiento y presione firmemente las abrazaderas para girar las perillas del soporte en el sentido de las agujas del reloj (nota: las abrazaderas no deben estar bloqueadas hasta el fondo, de lo contrario el asiento podría no colocarse correctamente en el inodoro).



3. Como se muestra en la imagen, coloque el asiento con las abrazaderas ensambladas directamente en el inodoro (de modo que el bulto central del asiento quede completamente dentro del inodoro y el bulto frontal del asiento encaje en el borde frontal del inodoro) y ajuste las perillas de sujeción para asegurar el asiento al inodoro.



Fabricante: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd Dirección: 3-6F y
7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414,
CHINA Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1
ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

BARIERY BEZPIECZEŃSTWA DO TOALET

MODEL: FBL760600

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOALETA
SZYNY BEZPIECZEŃSTWA

MODEL: FBL760600



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj całą instrukcję, aby uniknąć szkód, uszkodzenia produktu lub gwarancji

puszka. Jeśli odczuwasz dyskomfort, ból lub pogorszenie, zasięgnij profesjonalnej pomocy

objawy. Jeśli to konieczne, należy zachować nadzór podczas montażu i użytkowania tego produktu

poprawnie i bezpiecznie. Nie przekraczaj limitu wagi 300 funtów.

Regularnie sprawdzaj, czy montaż jest bezpieczny, a w razie wątpliwości skontaktuj się z pomocą techniczną. Zapewnić

Nóżki produktu są równe i zablokowane przed użyciem. Jeśli tak się stanie, zaprzestań użytkowania

oznak zużycia, uszkodzeń lub brakujących części. Produkt przeznaczony do stosowania na płaskim, stabilnym podłożu

powierzchnie. Nie demontuj, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to spowodować uszkodzenie

trwałość produktu. Nie modyfikuj produktu, jeśli nie jest to określone w instrukcji.

Należy używać wyłącznie części zatwierdzonych przez firmę VEVOR dla tego konkretnego produktu. Potwierdź

kompatybilność poręczy z toaletą przed pierwszym użyciem. Produkt nie jest zbudowany

wytrzymać nacisk lub uderzenie i nie należy go używać jako drabiny ani obciążać

ciężkie przedmioty.

Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Zawiera potencjalnie niebezpieczne małe części – ryzyko zadławienia.

Zachowaj ostrożność podczas obsługi i montażu. Unikaj skrajności

temperaturą lub otwartym płomieniem. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, należy natychmiast zaprzestać stosowania

i skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.

Polityka gwarancyjna

Gwarantujemy, że Twój nowy produkt VEVOR będzie wolny od wad materiałowych i

jącość wykonania 3 lata od pierwotnego zakupu. Proszę jednak o tym pamiętać

nasza polityka gwarancyjna nie obejmuje produktów podrobionych lub replik, ani też nie rozciąga się

do produktów zakupionych od nieautoryzowanych sprzedawców lub będących w stanie używanym.

Należy pamiętać, że każdy zakup kwalifikuje się tylko do jednego wykorzystania gwarancji

nie możemy wielokrotnie zwracać pieniędzy, wymieniać ani wymieniać Twojego produktu. My również serdecznie

prosimy o ostrożne obchodzenie się z produktem i używanie go zgodnie z instrukcją

pod warunkiem, że. Niestety nie możemy pokryć szkód wynikających z niewłaściwego użycia lub nadużycia

produktu. Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu i dotyczy wyłącznie oryginału

Kupujący.

WAŻNY

1. Nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru - maksymalnie 300 funtów.
2. Używaj wyłącznie na stabilnych powierzchniach.
3. Regularnie sprawdzaj, czy nie występują oznaki zużycia, uszkodzenia lub luźne części.
4. Regularnie czyść przy użyciu łagodnego detergentu i ciepłej wody, spłucz usunąć wszelkie pozostałości mydła. Po czyszczeniu dokładnie wysuszyć.
5. Przed użyciem potwierdź u swojego lekarza, że produkt spełnia Twoje wymagania specyficzne potrzeby. Poniższe wytyczne nie zastępują porady lekarskiej.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA PARAMETRÓW

Model	FBL760600
Obciążenie znamionowe (funty)	300
Zakres regulacji wysokości (mm)	125mm
Masa netto (kg)	1,22
Rozmiar produktu (mm)	405*350*175

LISTA CZĘŚCI

Rozpakowując ten produkt, sprawdź, czy wymienione poniżej części są zgodne dołączone i dokładnie sprawdź pod kątem wszelkich uszkodzeń, które mogły powstać w trakcie tranzyt. Jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub jest ona uszkodzona, nie należy podejmować prób montażu ani używania produktu.

NIE	ZDJĘCIE	NUMER CZĘŚCI	ILOŚĆ
1		Deska sedesowa	1
2		Zacisk	2

OPERACJA

1. Procedury instalacyjne

1. Jak pokazano na rysunku, umieść deskę sedesową do góry nogami na płaskiej powierzchni (widać wypukłe wewnętrzne koło na środku deski i przednią wypukłą część).



2. Jak pokazano na rysunku, włóż dwa zaciski przez gwintowane szczeliny prowadzące po obu stronach dolnej części siedziska i mocno dociśnij zaciski, aby obrócić pokrętki wspornika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (uwaga: zaciski nie powinny być zablokowane aż do samego dołu, w przeciwnym razie deska może nie zostać prawidłowo umieszczona na toalecie).



3. Jak pokazano na rysunku, umieść deskę z zamontowanymi zaciskami prosto na toalecie (tak, aby środkowe wybrzuszenie deski znalazło się całkowicie wewnątrz toalety, a przednie wybrzuszenie deski zatrzasnęło się na przedniej krawędzi toalety) i wyreguluj pokrętła zaciskowe, aby przymocować deskę do toalety.



Producent: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd Adres: 3-6F i 7F-1, nr
63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY Import do
Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TOILETVEILIGHEIDSRAILS

MODEL: FBL760600

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**TOILET
VEILIGHEIDSRAILS**

MODEL: FBL760600



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de volgende instructies lezen
gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

WAARSCHUWING:

Lees de handleiding volledig door om schade, productschade of garantie te voorkomen
leegte. Zoek professionele hulp als u ongemak, pijn of verergering ervaart
symptomen. Gebruik indien nodig toezicht bij het monteren en gebruiken van dit product
correct en veilig. Overschrijd de gewichtslimiet van 300 pond niet.

Controleer regelmatig of de montage goed vastzit en neem bij twijfel contact op met de klantenservice. Zorg ervoor dat de
de poten van het product vlak en vergrendeld zijn vóór gebruik, en stop het gebruik als dit het geval is
tekenen van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen. Het product moet worden gebruikt op een vlakke, stabiele ondergrond
oppervlakken. Demonteer niet als dit niet nodig is, omdat dit de werking kan aantasten
levensduur van het product. Breng geen wijzigingen aan het product aan, tenzij anders aangegeven in de handleiding.
Gebruik uitsluitend door VEVOR goedgekeurde onderdelen voor dit specifieke product. Bevestig de
compatibiliteit van de toiletrail met uw toilet vóór het eerste gebruik. Het product is niet gebouwd
bestand tegen druk of stoten en mag niet als ladder worden gebruikt of ermee worden beladen
zware voorwerpen.

Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden. Bevat potentieel gevaarlijke kleine onderdelen -
verstikkingsgevaar. Wees voorzichtig tijdens het gebruik en de montage. Vermijd extreem
temperaturen of open vuur. Als er een allergische reactie optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik
en raadpleeg een zorgverlener.

Garantie beleid

Wij garanderen dat uw nieuwe VEVOR-product vrij is van materiaal- en materiaalfouten
vakmanschap 3 jaar na de oorspronkelijke aankoop. Houd daar echter rekening mee
ons garantiebeleid dekt geen namaak- of replicaartikelen en geldt ook niet
op producten gekocht bij niet-geautoriseerde wederverkopers of in gebruikte staat.

Houd er rekening mee dat elke aankoop in aanmerking komt voor slechts één garantie-inwisseling, en
we kunnen uw product niet herhaaldelijk terugbetalen, vervangen of omruilen. Wij ook vriendelijk
vraag dat u zorgvuldig met het product omgaat en het volgens de instructies gebruikt
mits. Helaas kunnen wij schade als gevolg van verkeerd gebruik of misbruik niet dekken
van het product. Deze garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor het origineel
koper.

BELANGRIJK

1. Overschrijd het draagvermogen niet - maximaal 300 lb.
2. Alleen gebruiken op stabiele oppervlakken.
3. Inspecteer regelmatig op tekenen van slijtage, schade of losse onderdelen.
4. Regelmatig reinigen met een mild schoonmaakmiddel en warm water, afspoelen eventuele zeepresten verwijderen. Na het reinigen grondig drogen.
5. Controleer vóór gebruik bij uw zorgverlener of het product aan uw eisen voldoet specifieke behoeften. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch advies.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIE

PARAMETERLIJST

Model	FBL760600
Nominale belasting (lbs)	300
Bereik hoogteverstelling (mm)	125 mm
Netto gewicht / kg)	1.22
Productgrootte (mm)	405*350*175

ONDERDELEN LIJST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn meegeleverd en controleer zorgvuldig op eventuele schade die tijdens het gebruik is ontstaan doorvoer. Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer dan niet het apparaat te monteren of te gebruiken Product.

NEE	AFBEELDING	ONDERDEEL NUMMER	AANTAL
1		Wc bril	1
2		Klem	2

OPERATIE

1. Installatieprocedures

1. Zoals weergegeven in de afbeelding, plaatst u de toiletbril ȳ ondersteboven op een vlakke ondergrond (u ziet de verhoogde binnenste cirkel in het midden van de zitting en het verhoogde voorste gedeelte).



2. Zoals weergegeven in de afbeelding, steekt u de twee klemmen ȳ door de geleidegleuven met schroefdraad aan elke kant van de onderkant van de stoel en drukt u stevig op de klemmen om de beugelknoppen met de klok mee te draaien (let op: de klemmen mogen niet vergrendeld zijn). helemaal tot aan de onderkant, anders wordt de zitting mogelijk niet goed op het toilet geplaatst).



3. Zoals op de afbeelding te zien is, plaatst u de zitting met de klemmen recht gemonteerd op het toilet (zodat de middelste uitstulping van de zitting zich volledig in het toilet bevindt en de voorste uitstulping van de zitting op de voorkant van het toilet klikt) en pas de klemknoppen aan om de zitting aan het toilet te bevestigen.



Fabrikant: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd **Adres:** 3-6F & 7F-1,

No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

Geïmporteerd in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd

Eenheid 5 Albert Edward House, de paviljoens

Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TOALETTSÄKERHETSSKÄNOR

MODELL: FBL760600

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**TOALETT
SÄKERHETSSKÄNOR**

MODELL: FBL760600



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skador måste användarna läsa bruksanvisningen noggrant.

WARNING:

Läs manualen helt för att undvika skador, produktskador eller garanti

ogiltigförklaring. Sök professionell hjälp om du stöter på obehag, smärta eller försämring symtom. Vid behov, använd övervakning för att montera och använda denna produkt korrekt och säkert. Överskrid inte viktgränsen på 300lb.

Kontrollera regelbundet för säker montering och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar. Produkten ska användas på plana, stabila ytor. Ta inte isär om det inte är nödvändigt, eftersom det kan äventyra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om det inte anges i manualen.

Använd endast delar som godkänts av VEVOR för denna specifika produkt. Bekräfta toalettstängens kompatibilitet med din toalett före första användningen. Produkten är inte byggd för att motstå tryck eller stötar och ska inte användas som en steg eller laddas med tunga föremål.

Förvaras åtskilt från barn och husdjur. Innehåller potentiellt farliga smådelar - kvävningsrisk. Var försiktig under drift och montering. Undvik extrema temperaturer eller öppna lågor. Om en allergisk reaktion uppstår, sluta använda omedelbart och rådfråga en sjukvårdspersonal.

Garantipolicy

Vi garanterar att din nya VEVOR-produkt är fri från defekter i material och

utförande 3 år från det ursprungliga köpet. Kom dock ihåg det

vår garantipolicy täcker inte förfalskade eller kopior, och den sträcker sig inte heller till produkter köpta från icke auktoriserade återförsäljare eller i använt skick.

Observera att varje köp är berättigat till endast en garantiinlösen, och

vi kan inte upprepade gånger återbetala, ersätta eller byta ut din produkt. Vi också vänligt

be att du hanterar produkten varsamt och använder den enligt instruktionerna

försedd. Tyvärr kan vi inte täcka skador till följd av missbruk eller missbruk

av produkten. Denna garanti kan inte överföras och gäller endast originalet

köpare.

VIKTIG

1. Överskrid inte viktkapaciteten - max 300 lb.
2. Använd endast på stabila ytor.
3. Inspektera regelbundet efter tecken på slitage, skador eller lösa delar.
4. Rengör regelbundet med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten, skölj bort eventuella tvålrester. Efter rengöring, torka ordentligt.
5. Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller din specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PARAMETERLISTA

Modell	FBL760600
Nominell belastning (lbs)	300
Höjjusteringsområde (mm)	125 mm
Nettovikt (kg)	1.22
Produktstorlek (mm)	405*350*175

DELLISTA

När du packar upp denna produkt, kontrollera att delarna som anges nedan är det ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under genomresa. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte montera eller använda den produkt.

NEJ	BILD	DELNUMMER	ANTAL
1		Toaletsits	1
2		Klämma	2

DRIFT

1. Installationsprocedurer

1. Som visas på bilden, placera toaletsitsen öpp och ner på en plan yta (du kan se den upphöjda inre cirkeln i mitten av sitsen och den främre upphöjda delen).



2. Som visas i figuren, för in de två klämmorna ö genom de gängade styrlitsarna på vardera sidan av sätets botten, och tryck ner klämmorna ordentligt för att vrida fästets knappar medurs (obs: klämmorna ska inte låsas ända ner till botten, annars kan sitsen inte placeras ordentligt på toaletten).



3. Som visas på bilden placerar du sitsen med klämmorna rätvinkligt monterade på toaletten (så att den mittersta utbuktningen på sitsen är helt inne i toaletten och den främre utbuktningen på sitsen snäpper fast på toalettens framkant) och justera klämvreden för att fästa sitsen på toaletten.



Tillverkare: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd. **Address:** 3-6F &

7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd

Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions

Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support