


Broszura produktu

Sluchawki do aparatów słuchowych z przewodnictwem kostnym

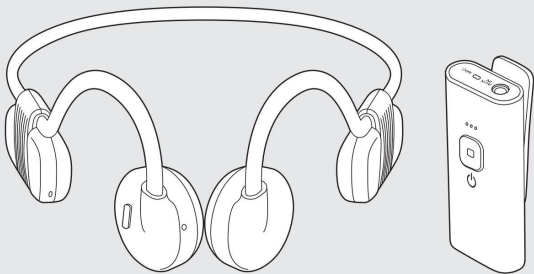

Ten produkt jest odpowiedni dla osób z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem słuchu. Jest

nie jest urządzeniem medycznym. Jeśli tak


jeśli po jego założeniu nie uzyskasz oczekiwanego efektu słuchowego, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.

Nazwy i schematy części produktu


Dzielniki z przewodzącymi kostnymi

Prawe ucho

Lewe ucho

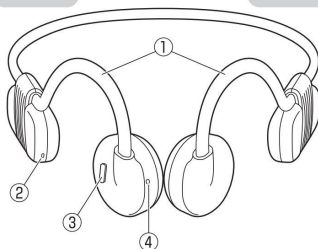


spód

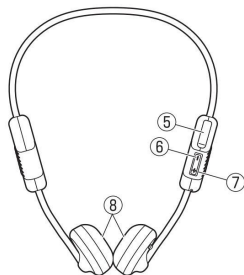


Aparaty słuchowe

tył

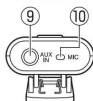

Przód

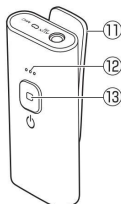

spód




- ① Zaczep na ucho lewe i prawe
- ② Przewodnik wskaźnika LED
- ③ Wielefunkcyjny przycisk „naciśnij i mów”
- ④ mikrofon
- ⑤ Port ładowania TYPU C
- ⑥ Zmniejsza głośność/opóźnia przesłuchanie
- ⑦ Zwiększa głośność/następny utwór

- ⑧ Wibrator przewodzenia kostnego
- ⑨ Odbiór portu wejściowego audio AUX
- ⑩ klips mikrofonowy
- ⑪ Wskaźnik LED
- ⑫ Przycisk przełącznika
- ⑬ Port ładowania TYPU C

Jeden lub dwa kable ładujące (USB-TYPE C)




Kabel audio stereo 3,5 mm

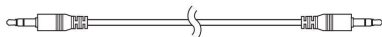

Włączanie/wyłączanie zasilania produktu

nausznik

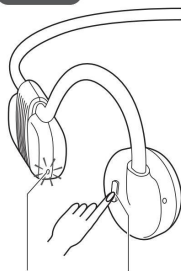

kontrolki świetlne

Przyświtek zasilania


Włóż zasilanie

1. Naciśnij i przetrzymaj przycisk zasilania przez około 3 do 4 sekund, aby włączyć.
2. Po włączeniu zasilania słuchawkowego wyświetli się ikona muzyki i zasklepi się dioda LED.
3. Aby podłączyć słuchawkę słuchawkową, zapnij się ze stroną 3 tej instrukcji.
4. Informacje na temat podłączania słuchawkowego do telefonu komórkowego można znaleźć na stronie 4 niniejszej instrukcji.

Zamknięcie

1. Naciśnij i przetrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie.
2. Połączenie wyłączenia urządzenia zostanie wygal muzyką, a dioda LED zasklepi się na krótko na czerwono, a następnie zgaśnie.

Aparat słuchowy

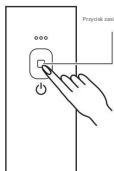

Przycisk zasilania

Włóż zasilanie

1. Naciśnij i przetrzymaj przycisk zasilania przez około 3 do 4 sekund, aby włączyć.
2. Po włączeniu urządzenia dioda LED zacznie szybko migać na niebiesko, co oznacza, że aparat słuchowy został dołączony.
3. Aby uzyskać informacje na temat sposobu podłączania aparatu słuchowego do słuchawek, zapnij się ze stroną 3 niniejszej instrukcji.

Zamknięcie

1. Naciśnij i przetrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie.
2. Połączenie wyłączenia dioda LED zasklepi się na krótko na niebiesko, a następnie zgaśnie.

Opisanie

Ten produkt ma funkcję automatycznego wyłączenia, która może skutecznie wydłużyć czas użytkowania produktu i utrzymać zdrowie baterii. Słuchawki – Kiedy

słuchawki

nie są podłączone do żadnego urządzenia, wyłączą się automatycznie po 5 minutach. Aparaty słuchowe – Kiedy

aparaty słuchowe

jest odłączony od słuchawek, wyłączą się automatycznie po 5 minutach. – Gdy słuch


jeśli urządzenie jest włączone i nie jest podłączone do żadnego urządzenia, wyłączą się automatycznie po 10 minutach.

Jak nosić produkt

Umieść wibrator przewodnictwa kostnego tuż przed uchem i zawiąż go na uchu za pomocą sznura.

W zależności od miejsca, w którym noszony jest wibrator przewodzący kostno, efekt działania aparatu słuchowego będzie różny.

Po założeniu i włączeniu zestawu słuchawkowego należy dostosować pozycję noszenia do indywidualnych potrzeb słuchowych.

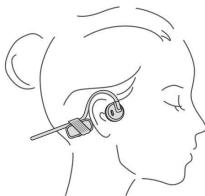

Używaj słuchawek z aparatami słuchowymi

Aparat słuchowy jest głównym elementem tego produktu. Posiada wbudowany mikrofon odbiorczy i układ transmisji Bluetooth. Wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, aby uzyskać efektywny dźwięk

wzmocnienia, tłumienie szumów i usuwanie echa. Odebrany dźwięk jest przetwarzany

przez algorytm sztucznej inteligencji, a następnie przesyłany do zestawu słuchawkowego za pomocą układu Bluetooth, aby uzyskać efekt aparatu słuchowego zestawu słuchawkowego.


Jednocześnie aparat słuchowy obsługujący również wyjście audio stereo 3,5 mm, które może odebrać dźwięk z telewizora, radia lub innych urządzeń wyjściowych audio, a następnie przesyłać go do słuchawek

za pośrednictwem układu Bluetooth, umożliwiając bezprzewodowe odbieranie dźwięku i obrazu z urządzeń takich jak telewizor czy radio.

Oprócz umieszczenia na białku, aparat słuchowy można również przypiąć do kołnierzyka lub kieszeni, gdy wychodzi. Wybierz odpowiednią metodę noszenia zgodnie z

do różnych scenariuszy użytkowania i środowisk.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego jako urządzenia wspomagającego słyszenie

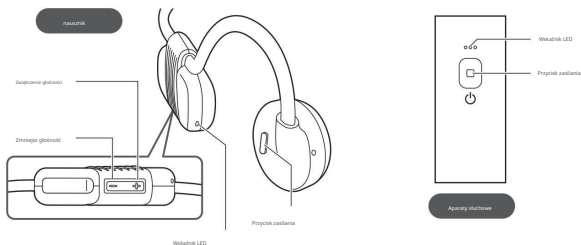

1. Aby wyłączyć słuchawki lub aparat słuchowy, naciśnij i przytrzymaj odpowiednio przez 3-4 sekundy.


2. Po włączeniu słuchawki usłyszysz dźwięk zachęty muzycznej, a diody LED będą szybko migać na czerwono i niebiesko. Po włączeniu aparatu słuchowego dioda LED będzie szybko migać na niebiesko.

3. Po krótkiej chwili aparat słuchowy i słuchawki połączą się automatycznie, a diody LED zaczną powoli migać na niebiesko.


4. Za pomocą przycisków głośności słuchawek (plus lub minus) można dostosować głośność do odpowiedniego efektu dodatkowego oddźwięku.

Podczas korzystania z aparatu słuchowego jako nadajnika audio Bluetooth

1. Podłącz dołączony kabel audio stereo 3,5 mm do gniazda wyjściowego audio w telewizorze, radu lub innym urządzeniu audio.
2. Podłącz drugi koniec kabla audio stereo 3,5 mm do portu wejściowego audio aparatu słuchowego.
3. Podobnie jak w poprzedniej operacji, włącz słuchawki i aparaty słuchowe osobno, a następnie połączą się automatycznie.

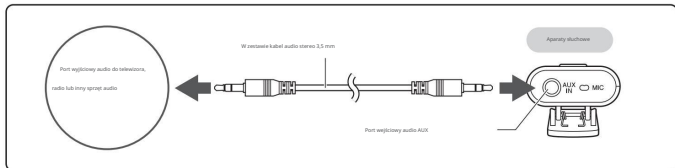

Używaj zestawu słuchawkowego z telefonem komórkowym

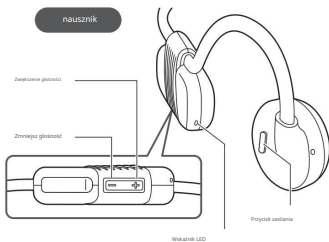Bluetooth
NA


1. Naciśnij i przytrzymaj słuchawkę przez 3-4 sekundy, aby ją włączyć.
2. Po włączeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz sygnał muzyczny, a diody LED (czerwona i niebieska) zaczną szybko migać.
3. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj nowe urządzenia Bluetooth.
4. Kliknij na urządzenie Bluetooth o nazwie HP-BC500N.
5. Telefon i zestaw słuchawkowy zostaną automatycznie połączone.
6. W zestawie słuchawkowym usłyszysz dźwięk potwierdzający połączenie, a dioda LED zacznie powoli migać na niebiesko.
7. Na telefonie wyświetli się ikona połączenia Bluetooth, a Ty będziesz mógł korzystać ze słuchawek, aby słuchać muzyki lub oglądać filmy w telefonie.
8. Po podłączeniu do telefonu komórkowego naciśnij przycisk wielofunkcyjny (F) przycisk zasilania, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki lub filmu.
9. Kliknij Volume + lub Volume -, aby dostosować głośność. Po osiągnięciu maksymalnej głośności usłyszysz sygnał dźwiękowy.
10. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu.
11. Kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby ponownie wybrać ostatni numer połączenia wychodzącego. Kliknij przycisk pojedynczo, aby odebrać lub odłączyć połączenie, gdy nadejdzie połączenie przychodzące.

W dostępnym środowisku odległość komunikacji bezprzewodowej między słuchawkami i aparaturami słuchowymi wynosi około 10 metrów.


Jednakże ze względu na otaczające środowisko lub przeszkody, efektywny zasięg komunikacji bezprzewodowej

Może wystąpić zmiana. Proszę dostosować aparat słuchowy zgodnie z rzeczywistym scenariuszem użytkowania.

Z zestawem zestawem słuchawkowym.

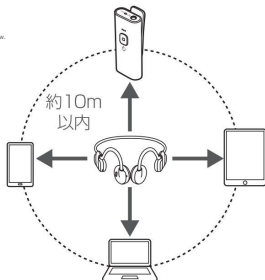

Ładowanie produktu

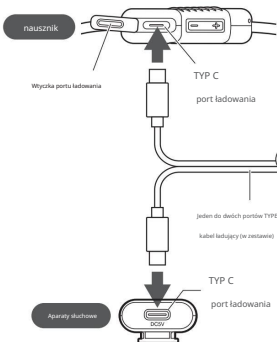

1. Podłącz dołączony kabel ładowający do portu ładowania słuchawek lub aparat słuchowy (jak pokazano na zdjęciu).
 2. Podłącz końcówkę USB kabła ładowającego do zasilacza, który obsługuje wyjście zasilania USB (wyjście DC5V, 1A-2A).
 3. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego 220 V.
4. Gdy ładowanie się rozpocznie, wskaźniki LED słuchawek i aparatów słuchowych zapalają się czerwonymi, a czerwone światło wyłącza się automatycznie po pełnym naładowaniu.

220 V
Gniazdo zasilania

Co jest w pudełku

Zdjęcie zestawu słuchawkowego



Aparat słuchowy



Kabel ładowający



Kabel audio



Instrukcja

Często zadawane pytania

Nie można włączyć

1. Sprawdź stan zasilania. Jeśli zasilanie jest słabe lub nie ma go wcale, urządzenie nie włączy się normalnie. 2. Naładuj

produkt przed włączeniem.

Słuchawki nie mogą połączyć się z aparatem słuchowym

pomoc. 1. Sprawdź, czy słuchawki są podłączone do telefonu. Jeśli tak, wyłącz funkcję Bluetooth w telefonie. Następnie włącz aparat słuchowy i spróbuj ponownie. 2. Sprawdź, czy aparat słuchowy jest włączony.

Po włączeniu niebieskie światło powinno szybko migać. Po podłączeniu słuchawek niebieskie światło będzie migać powoli. 3. Sprawdź status migania aparatu słuchowego. Jeśli jest włączony i niebieskie światło

jeśli światło miga powoli, ale słuchawki nie są połączone, oznacza to, że aparat słuchowy został podłączony.

Jeśli podłączone są inne urządzenia Bluetooth, wyłącz aparat słuchowy, oddal się o co najmniej 100 metrów od pierwotnej lokalizacji, a następnie ponownie podłącz słuchawki i aparaty słuchowe.

zgodnie z instrukcją.

Zestaw słuchawkowy nie może połączyć się z telefonem 1.

Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie jest włączona.

włączyć. 2. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy nie jest podłączony do aparatu słuchowego. Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do aparatu słuchowego, telefon nie może się połączyć z

zestawem słuchawkowym. 3. Sprawdź migający status zestawu słuchawkowego. Jeśli czerwone i niebieskie światła migają szybko, oznacza to, że zestaw słuchawkowy czeka na sparowanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się połączyć

telefonu. Jeśli niebieskie światło miga powoli, oznacza to, że zestaw słuchawkowy został połączony z aparatem słuchowym lub innym urządzeniem Bluetooth. Wyłącz aparat słuchowy lub inne urządzenie Bluetooth

urządzenie przed próbą połączenia z telefonem.

Brak dźwięku po podłączeniu aparatu słuchowego

słuchawka 1. Sprawdź stan połączenia słuchawki i aparatu słuchowego. Diody LED powinny migać na niebiesko. Jeśli nie, spróbuj ponownie się połączyć. 2. Sprawdź

głośność słuchawek i nacisnij przycisk zwiększenia głośności, aby dostosować głośność do odpowiedniego zakresu. W normalnych okolicznościach, gdy głośność osiągnie maksymalną głośność,

3. Jeśli usłyszysz sygnał dźwiękowy o maksymalnej głośności, ale

nadal nie słyszysz dodatkowego dźwięku, sprawdź czy otwór mikrofonu dodatkowego aparatu słuchowego nie jest zablokowany.

Zablokowane przez ciało obce.

4. Sprawdź, czy port wejściowy AUDIO aparatu słuchowego został podłączony do kabla audio. Po podłączeniu kabla audio aparat słuchowy będzie działał jako Bluetooth

Gdy nadajnik audio jest w użyciu, funkcja słuchania pomocniczego zostanie zawieszona. Odłącz kabel audio, aby przywrócić funkcję słuchania pomocniczego.

W pomieszczeniu dyktant hałas

earphones 1. Sprawdź, czy słuchawki mają niski poziom naładowania baterii. Spróbuj ponownie po pełnym naładowaniu. 2.

Sprawdź, czy głośność jest ustawiona na maksimum. Zwiększ głośność i spróbuj ponownie. 3.

Sprawdź źródło dźwięku w telefonie, aby upewnić się, czy w dźwięku nie słychać żadnych szumów.

4. Zachowaj pewną odległość między aparatem słuchowym a słuchawkami, a w szczególności unikaj kierowania otworu wychwytyjącego dźwięk aparatu słuchowego w stronę słuchawek, aby uniknąć wycia.

5. Upewnij się, że w pobliżu aparatu słuchowego nie ma hałasu. 6. Proszę

w miarę możliwości należy umieścić aparat słuchowy w cichym miejscu na biurku lub innej płaskiej powierzchni i unikać przykrywania go innymi przedmiotami lub osieramiać się o nie,

w przeciwnym wypadku może to łatwo doprowadzić do zablokowania w pracy mikrofonu odbiorczego.

Środki ostrożności

- Nie rozmontowuj ani nie naprawiaj tego produktu samodzielnie.
- nie umieszczaj produktu w pobliżu ognia lub źródła ciepła. Nie
- pozwalaj dzieciom na korzystanie z tego produktu, aby zapobiec połknięciu przez dzieci małych części produktu.
- pacjenci z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem. Słuchawki
- obsługujące wodoodporność na poziomie IPX6. Możesz splukać obudowę słuchawki czystą wodą i odfinować lub wytrzeć ją na czas. Przed użyciem zakryj port ładowania słuchawek
głuchonie i czyszczenie w celu uniknięcia przedostania się wody.
- Aparaty słuchowe nie obsługują funkcji wodoodporności. Nie zbliżaj się do pary wodnej ani cieczy. Nie
- upuścić produkt z wysokości. Nie używać
- chemikalia do czyszczenia. Jeśli są plamy, najpierw przetrzyj je czystym, wilgotnym i miękkim ręcznikiem, a następnie osusz je suchym ręcznikiem. Nie przechowuj w wilgotnym lub zakurczonym miejscu
- środowisko. Proszę ładować produkt raz w miesiącu, gdy
- produkt nie jest używany przez dłuższy czas, aby zapewnić zdrowie baterii. Proszę dostosować głośność do odpowiedniego stanu i uniknąć używania
- głośność przekraczająca dopuszczalny zakres przez dłuższy czas.

Specyfikacje

Nazwa produktu Bluetooth	Słuchawki przewodniczącego kostnego HP 8C500N	Aparat słuchowy AV-TXB20N
Wersja Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0
Odległość komunikacji bezprzewodowej	Okolo 10 metrów	Okolo 10 metrów
Czułość mikrofonu	Wielokierunkowy mikrofon silikonowy -43dB	Wielokierunkowy mikrofon silikonowy -42dB
Czas ładowania	Okolo 1,5 godziny	Okolo 1,5 godziny
Czas gry	Okolo 9 godzin *1	Okolo 20 godzin *1
Wymiary (mm)	110*45*130mm	20*67*28mm
Waga (g)	Okolo 30g	Okolo 25g

*1: Dane dotyczące czasu odładowania odnoszą się do czasu odładowania osiągniętego przez próbki testowe w laboratorium producenta przy głośności 50% i częstotliwości sygnału 1 KHz.

Rzeczywisty czas użytkowania jest bezpośrednio związany z głośnością odładowania i odładowanymi słuchawkami. Dane z testów laboratoryjnych są jedynie informacjami poglądowymi.

Karta gwarancji jakości

Warunki gwarancji

Zapewniamy 12-miesięczną bezpłatną gwarancję na ten produkt od daty zakupu. Jeśli napotkasz awarię produktu, której nie można wyeliminować, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą agenta na czas.

Model produktu: _____ Data zakupu: _____ Rok Miesiące Dzień _____

Agent sprzedający: Błąd _____ Dane kontaktowe: _____

Opis: _____

