



INSTRUKCJA

Płytkę stabilizującą paluch należy wprowadzić poziomo, zgodnie z kierunkiem wskazanym obrazku

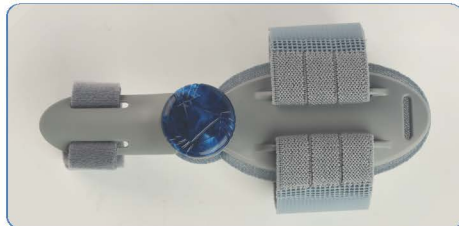

Poluzuj paski, załóż i przymocuj podkładkę silikonową do kości śródstopia.

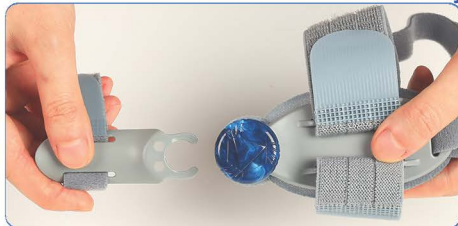

Wyreguluj pasek podtrzymujący łuk stopy, aby ustabilizować stopę



Wyreguluj pasek stabilizujący duży palec stopy



Wyreguluj pokrętkę, ustawiając odpowiednie napięcie korekcyjne.

Instrukcja użytkowania:

Rozpocznij od noszenia aparatu przez około 30 minut dziennie, stopniowo wydłużając czas do momentu, gdy będziesz w stanie nosić go 2–3 godziny dziennie podczas chodzenia lub w nocy podczas snu.

Zaleca się stosowanie aparatu przez okres 4–8 tygodni lub do momentu uzyskania prawidłowego ustawienia palucha. Po zakończeniu terapii, dla utrzymania efektów, noś aparat 2–3 razy w tygodniu.

Aparat należy zakładać na gołą stopę, opcjonalnie może być stosowany w obuwiu o szerokim kroju lub w kapciach.

Konstrukcja aparatu umożliwia dopasowanie do większości rozmiarów stóp oraz jego noszenie na prawej lub lewej stopie. W przypadku pojawienia się bólu, zaczerwienienia, podrażnienia lub innych niepożądanych objawów, należy przerwać stosowanie aparatu i skonsultować się z lekarzem.

Wskazania do stosowania:

- Korekcja i łagodzenie objawów halluksów (palucha koślawego) we wczesnych i umiarkowanych stadiach deformacji.
- Zapobieganie dalszemu postępowi deformacji palucha.
- Redukcja bólu i dyskomfortu związanego z uciskiem na staw palucha.
- Stabilizacja i poprawa ustawienia palca podczas chodzenia i odpoczynku.
- Wsparcie terapii zachowawczej jako uzupełnienie leczenia ortopedycznego.

Przeznaczony do codziennego noszenia zarówno w pozycji stojącej, jak i podczas snu.

Przeciwwskazania:

- Nie stwierdzono reakcji nadwrażliwości ani alergicznych związanych z prawidłowym stosowaniem tego produktu. Należy zaprzestać używania korektora w przypadku wystąpienia następujących stanów: choroby skóry lub uszkodzenia w miejscu aplikacji, zwłaszcza stany zapalne,
- blizny z towarzyszącym obrzękiem, zaczerwienieniem lub podwyższoną temperaturą skóry,
 - dna moczanowa,
 - reumatoidalne zapalenie stawów,
 - tkliwość na ucisk,
 - polineuropatia,
 - obrzęk kończyny dolnej.

Przydatne informacje:

Korektor haluksów można nosić na gołą stopę. Aby uniknąć zabrudzenia, zaleca się założenie skarpetki na aparat oraz stopę. Korektor haluksów można również nosić w obuwiu, które nie uciska stopy, posiada szerokie otwarcie z przodu oraz jest wygodne i dobrze dopasowane.

Nie należy nosić korektora podczas pływania, na plaży ani w wodzie morskiej. Sól i piasek mogą uszkodzić aparat.

W przypadku nieprawidłowego użytkowania producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

EC REP

Mardil Sp. z o.o.
Olszynowa 1
62-070 Zakrzewo, Poland
biuro@mardil.pl
+48607920591



Mona
Leszczynowa 8
62-070 Dąbrówka, Poland
+48607106591



Prać ręcznie w ciepłej wodzie



Nie stosować wybielaczy



Nie prasować



Nie czyścić chemicznie





Nie suszyć w suszarce bębnowej

Use Steps

fit4med.

The big toe fixing plate can be inserted horizontally in the direction of the arrow.

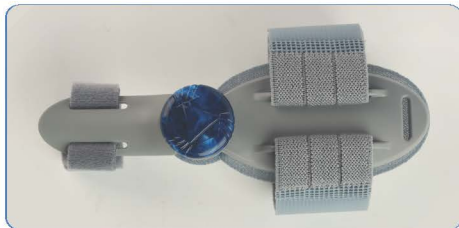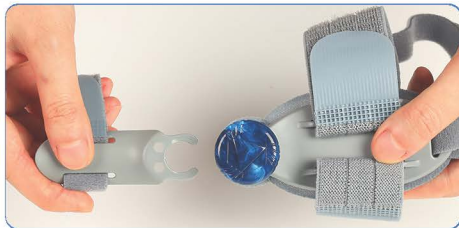

Loosen the straps, put on and secure the silicone pad to the foot bone.



Adjust the arch strap to fix the sole of the foot.



Adjust the big toe strap.



Adjust the knob to the appropriate tension.

USER INSTRUCTIONS:

Begin with 30 minutes per day and increase gradually until you can wear the splint daily 2 - 3 hours while walking or nightly while sleeping. Recommend wearing the splint 4 - 8 weeks or until realignment is achieved. Thereafter, wear 2 - 3 times per week for maintenance. Wear barefoot, or splint may fit in wide-fitting slippers or shoes. The splint is designed to fit most foot sizes and can be worn on either the right or left foot. In case of pain, redness, irritation, or any other adverse symptoms, discontinue use of the splint and consult a physician

Indications for Use:

- Correction and alleviation of symptoms of hallux valgus (bunion) in early to moderate stages of deformity.
- Prevention of further progression of the big toe deformity.
- Reduction of pain and discomfort associated with pressure on the big toe joint.
- Stabilization and improvement of toe alignment during walking and rest.
- Support of conservative therapy as a complement to orthopedic treatment.
- Intended for daily use both while standing and during sleep.

Contraindications

There are no known hypersensitivity or allergic reactions associated with this product when used correctly. Discontinue use of Bunion corrector in case of the following conditions:

- skin diseases or injuries in the affected area,
- especially inflammation, as well as scarring with swelling,
- redness or increased skin temperature,
- gout,
- rheumatoid arthritis,
- tenderness to pressure,
- polyneuropathy, or swelling of the leg.

Helpful informations:

Bunion Corrector can be worn while barefoot. In order to avoid soiling, wear a sock over the splint and foot. Bunion Corrector can be worn in shoes that are non-restrictive, provide a wide opening towards the front of the shoe, and are a comfortable fit. Bunion Corrector should not be worn while swimming, on the beach, or in salt water. Salt and sand may cause damage to the splint. In case of improper use, product liability is precluded.



Hand wash in warm water



Do not bleach



Do not iron



Do not dry clean



Do not tumble dry