

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Taboret prysznicowy przyścienny, składany


Kod produktu: JMC-C 5105

1. Wykonanie

Taboret prysznicowy przyścienny składa się z siedziska wykonanego z wytrzymałego PCV, nóg zakończonych gumowymi nasadkami antypoślizgowymi oraz elementów montażowych umożliwiających mocowanie do ściany. Składana konstrukcja pozwala na oszczędność miejsca w czasie kiedy produkt nie jest używany. Dzięki skokowej regulacji wysokości nóg, taboret można dostosować do wzrostu użytkownika. Całość wykonana jest z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć.

Części składowe:

- a. elementy montażowe
- b. otwory montażowe
- c. siedzisko
- d. piny do regulacji wysokości
- e. nasadki antypoślizgowe

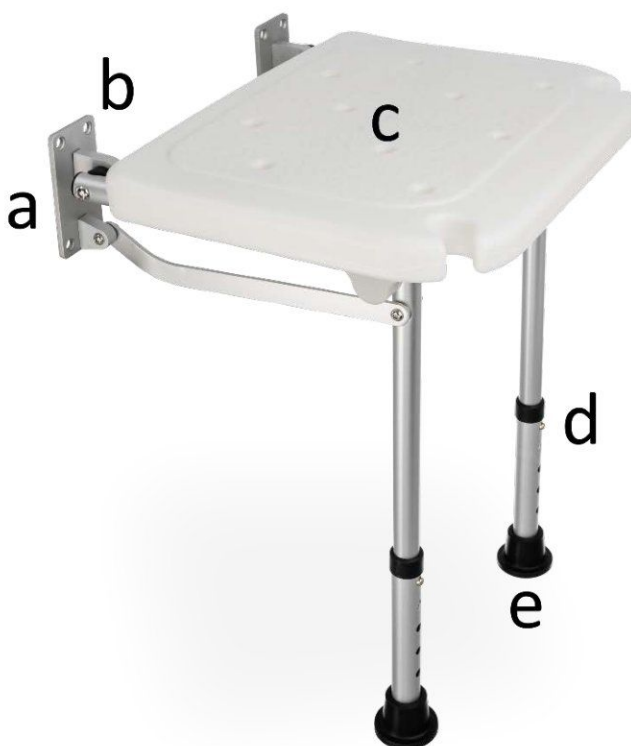

Zestaw zawiera:

- Taboret oraz zestaw montażowy (kołki rozporowe z kluczem).
Uwaga! Zestaw zawiera tylko standardowy rodzaj kołków rozporowych. Przed montażem upewnić się w jakim podłożu będzie wykonywany montaż i odpowiednio dobrać właściwy dla podłoża rodzaj kołków rozporowych (cegła, pustak, płyta g-k).

2. Zastosowanie

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Zalecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

3. Montaż

Krok 1. Przed montażem taboretu, dostosować jego wysokość do wzrostu użytkownika. Aby wyregulować wysokość, wcisnąć pin blokujący i wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować położenie. Wysokość nóżki regulowana są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga! Piny blokujące w obu nóżkach muszą być ustawione na tym samym poziomie.

Krok 2. Wyznaczyć na ścianie miejsca, w którym będą mocowane elementy montażowe taboretu. Zaznaczyć położenia 8 otworów montażowych.

Krok 3. Wywiercić w ścianie 8 zaznaczonych wcześniej otworów montażowych.

Krok 4. Przykręcić elementy montażowe do ściany za pomocą 8 odpowiednio dobranych kołków rozporowych - dobór kołków w zależności od podłoża (cegła, pustak, płyta g-k).

Uwaga! Nie należy korzystać taboretu, którego nóżki nie mają pewnego stabilnego oparcia na podłożu.

4. Specyfikacja techniczna

Wymiary siedziska	32-40 cm
Regulacja wysokości	42-52 cm

Waga	2,00 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z taboretu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Taboret należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Należy regularnie sprawdzać: dokręcenie śrub, stan sztyftów blokujących do ustawiania wysokości, stan rurek (pod kątem pęknięć). Zaleca się regularną kontrolę nasadki gumowej. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
---	--------------------	---	-----------

	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		



Timago International Group
 Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
 ul. Karpacka 24/12
 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
 F.: +48 33 499 50 11
 E.: info@timago.com



04/2023(IV)