

Hydrożelowy opatrunek na oparzenia spray 120 ml Burncare Relieve Burn Gel

Galeria Produktu



Opis Produktu

Spray na oparzenia hydrożel 120 ml – Burncare Relieve Burn Gel

Spray na oparzenia – skuteczna pierwsza pomoc w każdej sytuacji


Burncare Relieve Burn Gel to profesjonalny spray na oparzenia I i II stopnia, który zapewnia natychmiastową ulgę oraz skuteczne chłodzenie skóry. Działa szybko i skutecznie, ograniczając ból, stan zapalny i ryzyko powikłań. To niezbędny element wyposażenia apteczki domowej, turystycznej, przemysłowej oraz ratowniczej.

Dlaczego warto wybrać ten spray na oparzenia?

Błyskawiczne chłodzenie i ukojenie bólu po oparzeniu Hydrożel o wysokiej zawartości wody – wspomaga regenerację skóry Chroni ranę przed zakażeniami i działaniem czynników zewnętrznych Forma sprayu – higieniczna i wygodna aplikacja bez dotykania rany Produkt sterylny, certyfikowany (CE 0197), gotowy do użycia Sprawdzony w ratownictwie, medycynie sportowej i outdoorze

Zastosowanie i funkcje:

Burncare Relieve Burn Gel 120 ml znajduje zastosowanie w leczeniu:

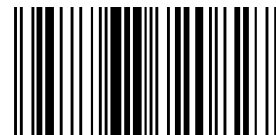

Oparzeń termicznych (gorące płyny, para, ogień) Oparzeń słonecznych Oparzeń chemicznych (po wcześniejszym splukaniu skóry wodą) Podrażnień skóry wywołanych przez wysoką temperaturę Preparat może być używany zarówno w warunkach domowych, jak i w profesjonalnych zestawach ratunkowych. Dzięki wygodnej butelce 120 ml sprawdzi się także w podróży, na kempingu czy w pracy.

Jak stosować spray na oparzenia?

W przypadku oparzenia termicznego: natychmiast rozpylić żel bezpośrednio na miejsce oparzenia Pozostawić preparat na skórze przez co najmniej 30 minut W razie potrzeby zabezpieczyć opatrunkiem jałowym W przypadku oparzenia chemicznego: przed użyciem żelu, przemyć ranę zimną wodą przez 15-20 minut

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	Opatrunek na oparzenia rany hydrożelowy
Producent	nieznany producent
Model	Opatrunek hydrożelowy na rany i oparzenia SPRAY
Rodzaj	hydrożelowy
Waga produktu z opakowan	0.1
Sterylność	jałowe
Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN (GTIN)	6958868720827
Stan	Nowy
Wyrób medyczny	tak
Typ wyrobu medycznego	wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania
Producent wyrobu medyczn	Roosin Medical
Stan opakowania	oryginalne