




1.- Индекс	1
2.- Кратко ръководство	2
3.- Описание	6
4.- Компоненти	6
5.- Предвидена употреба	6
6.- Модели	6
7.- Персонализиране на	7
8.- Монтаж	8
9.- Таблицы	10
10.- Метод на употреба	11
11.- Операции	11
12.- Предпазни мерки при употреба	12
13.- Отстраняване на неизправности	13
14.- Портфолио	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/

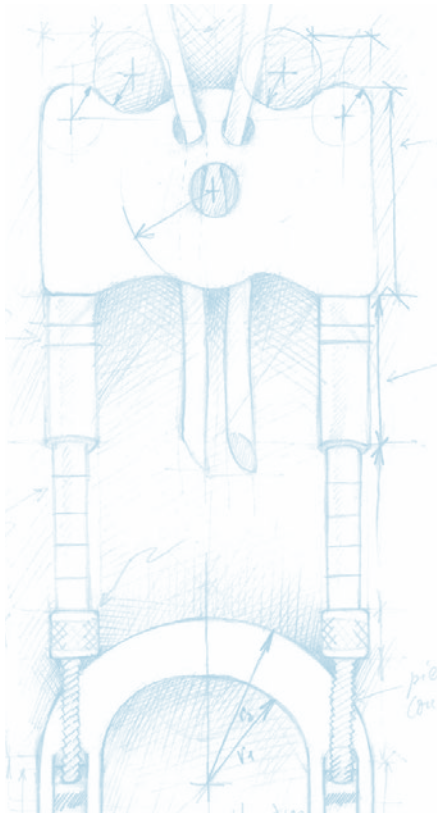

2 Quick Guide

01

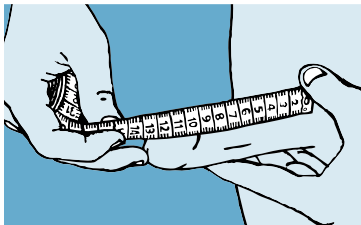

The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيتك. قم بقياس طول قضيتك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03

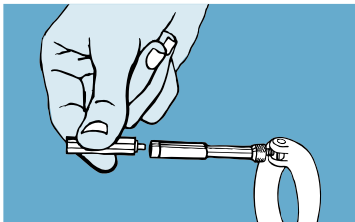

Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie so viele Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベシに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04

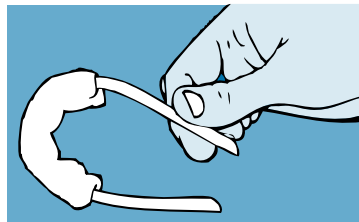

Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトップの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通してください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.



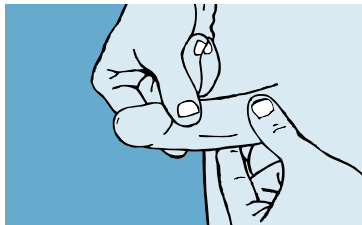

Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني) .

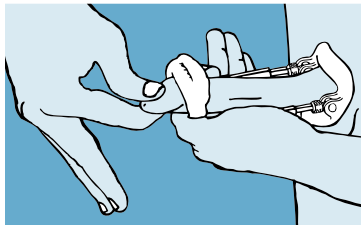

Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.

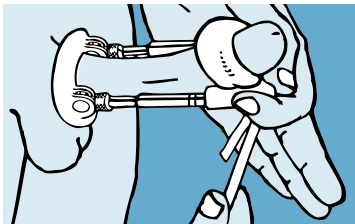

Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.

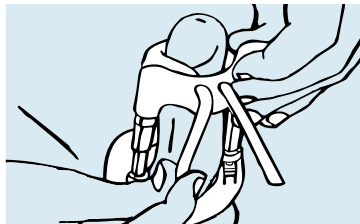

Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Описание

Andropenis® е шина за пениса, която се прикрепя външно към пениса. Тя може да прилага лека тяга върху пениса като устройство за телгелне на пениса или може да се използва без тяга като пенис шина, в зависимост от предназначението.

4 Компоненти

Andropenis® се състои от пластмасов основен пръстен, две метални шпилки с вътрешни пружини и горна пластмасова конзола със силиконова лента. Пластмасовите елементи са изработени от POM (синтетичен материал, който не се влияе от запалими течности, като алкохол). Пръстенът е изработен от силикон с медицински клас. Металните шпилки на **Andropenis® gold** са изработени от месинг и са покрити със слой от 24-каратово злато. Пружините са изработени от нерждаема стомана, а шпилките – от алуминий от хирургически клас.

КОМПОНЕНТИ (фиг. 1): 1-пластмасов основен пръстен, 2-кръгла шарнирна гайка, 3-шпилка с резба, 4-регулируема шпилка с резба, 5-метална шпилка, 6-винт, 7-пружина, 8-винт за фиксиране на пружината, 9-голяма 4-сантиметрова шпилка (1,6"), 10-средна 2-сантиметрова шпилка (0,8"), 11-малка 0,5-сантиметрова шпилка (0,2"), 12-най-малка 0,3-сантиметрова шпилка (0,1"), 13-горна пластмасова опора, 14-силиконова лента, 15-предпазна възглавничка, 16-силиконови пръстени.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчително е лекото намазване с капка масло, с помощта на кърпичка, между елементи 4 и 5, за да се подобри плъзгането (вижте OIL).

5 Предвидена употреба

- Предотвратяване на деформацията на пениса след урологични операции или заболявания (използване на шина).
- Коригиране на деформацията на пениса след урологични операции или заболявания (използване на тракция).
- Увеличаване дължината на пениса при синдрома на микропенис и малкия пенис (използване на тракция).
- Създаване или поддържане на достатъчна твърдост на пениса за полов акт (използване на шина).

6 Модели

- **Andropenis Peyronie**, за предотвратяване или коригиране на деформацията на пениса при заболяване.
- **Andropenis Surgery**, за предотвратяване или коригиране на деформацията на пениса след операция.
- **Andropenis Mini**, за удължаване на дължината на пениса или за подпомагане на половия акт, при микропенис.
- **Andropenis Gold**, за удължаване на дължината на пениса или за подпомагане на половия акт при чувствителна кожа.
- **Andropenis Pro**, за удължаване на дължината на пениса или за подпомагане на сношението, при редовен пенис.



фиг. 1

7 Персонализиране на

Първоначалният размер на **Andropenis®** е 8 см (3,1"). Размерът на устройството се измерва от долната част на пластмасовия пръстен до края на металната шпилка (фиг.4, НАЧАЛЕН).

Персонализирайте своя **Andropenis®** в съответствие с размера на вашия penis. Използвайки сантиметър, измерете дължината и обиколната на penisа в отпуснато и еректирално състояние (фиг. 2 и 3).

Изчислете персоналния размер на **Andropenis®**, като извадите 4 см (1,6") от размера на вашия penis в еректирално състояние.

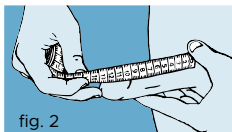


fig. 2

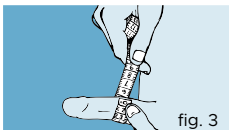


fig. 3

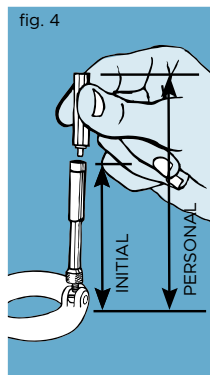


fig. 4

Пример: 14,7 см – 4 см = 10,7 см > персонален размер на Andropenis® = 10,7 см

Сега подгответе устройството, така че то да отговаря на вашите персонални размери.

Първо отделете горната пластмасова опора, като я повдигнете нагоре (фиг. 5), след което добавете колкото е необходимо шпилки, за да постигнете персоналния размер на **Andropenis®** (фиг. 4, ПЕРСОНАЛЕН).

Пример: Персонален размер от 10,7 см = първоначален размер на **Andropenis®** (8 см) + елемент № 10 (2 см) + елемент № 11 (0,5 см).



fig. 5



Как да използвате

Забележка:

Първоначалният размер на **Andropenis® Mini** е 7 см. Ако притежавате този модел, започнете периода на адаптация с този размер (7 см) и го задръжте в продължение на 15 дни: първият ден, използвайте уреда в продължение на 3 часа, като с течение на дните, увеличете времето на употреба. След първите 15 дни, увеличете времето на употреба, както е указано в таблиците за употреба (вижте по-долу).

Използването на защитна аптечна памучна лента е **ЗАДЪЛЖИТЕЛНА** който трябва да се постави в жлеба под главичката. Представете един от моделите силиконови ленти, (елемент № 14), който е най-подходящ за същност предпазна възглавничка, в съответствие с размера на пениса (елемент № 15). Вмъкнете краищата на силиконовата лента в задната страна на горната пластмасова опора (елемент № 13), така че пръстенът да образува примка.

При отпуснат пенис, плъзнете целия препуциум (необраззани мъже) по тялото на пениса (фиг.7) и поставете силиконовата лента под коронката на главичката, където тя осъществява контакт с тялото на пениса (фиг. 8).



Главичката не трябва да влиза в директен контакт с устройството. След това, дръпнете пениса напред, така че той да се удължи, като все още е в отпуснато състояние.



Вземете основния пръстен (елемент №1), като държите най-тясната част на пръстена напред. Прекарайте пениса през основния пръстен (елемент 1) и го поставете във вдлъбнатината на горната пластмасова опора (елемент №13). Поставете лявата си ръка върху горната опора (елемент № 13) и бутнете устройството към тялото си, като притиснете вътрешните пружини (фиг. 9).



Докато държите лявата си ръка на място, използвайте пръстите на дясната си ръка, за да прекарате главичката през примката, образувана от силиконовата лента (фиг. 10).



Как да поправите

Поставете палеца на лявата си ръка в горната част на главичката, за да задържите пениса в позиция, като постепенно скъсявате примката на силиконовата лента, като с дясната ръка дърпате и двата ѝ края (фиг. 11).



Бавно издърпайте кожата от двете страни на пениса към тялото си, за да избегнете притискане на кожата или оставяне на гънка над жлеба на главичката (фиг. 12).

Силиконовата примка трябва да бъде поставена върху и в една линия с жлеба на главичката, без да наранява, но достатъчно стегната, за да не позволи на главичката да се изплъзне. Внимателно закрепете силиконовата лента в закопчалките от долната страна на горната опора (фиг. 13), като разтягате лентата при всяко натискане във вдлъбнатините.

Затягайте, но не дърпайте надолу, за да избегнете притискане на пениса.

Проверете два пъти дали няма кожа над жлеба или под силиконовата лента, ако имата такава, издърпайте кожата към тялото, за да избегнете притискането ѝ. За да свалите Andropenis®, свийте пружините, като натиснете надолу към тялото, освободете силиконовата лента (парче 14) от закопчалките в горната опора (парче 13) и увеличете размера на силиконовата примка, за да освободите пениса.

Andropenis® има система за закрепване на главичката чрез лента. на разположение са два модела: Androcomfort® лента и Androsilicone® лента. Системата Androcomfort® band позволява още по-удобно използване на Andropenis®. Тя се поставя между главичката и ствола на пениса, в областта на коронарната бразда - препуциума. Въведете лентата в системата от пяна, наречена Androtop®. Вижте как да ги използвате в: www.andromedical.com/videos

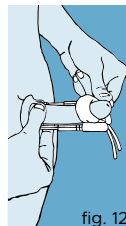



fig. 12



fig. 13




Androsupport
Ръководство

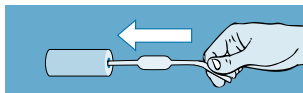

Andropenis® има силиконов пръстен, който функционира като амортизираща система, наречена **Androring®**. Той се намира между главичката и ствола на пениса, коронарната бразда - препуциума. Вижте как да ги използвате в: www.andromedical.com/videos


Andropeyronie®, Androsurgery® и **Andropenis® Mini** имат по-добра пластмасова част (**Androsupport®**), пригодена за корекция на кривините на пениса (вж. „Ръководство за употреба на Androsupport®“). www.andropenis.com/ifu

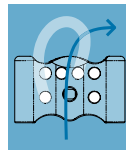

	РАЗМЕР НА УСТРОЙСТВОТО	ДНЕВНА РОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
	Период на адаптация	
Първите 5 дни	Първоначален размер	3 часа
Дни 6 - 10	Добавете малка 0,5-сантиметрова шпилка (елемент № 11).	6 часа
Дни 11 - 15	Добавете малка 0,5-сантиметрова шпилка (елемент № 11).	8 часа
	Период на развитие	
1-ви и 2-ри месец	Добавете малка 0,5-сантиметрова шпилка (елемент № 11) на всеки 7 дни	8 часа
От 3-тия месец	Добавете малка 0,5-сантиметрова шпилка (елемент № 11) на всеки 10 дни	8 часа
От 5-тия месец	Добавете малка 0,5-сантиметрова шпилка (елемент № 11) на всеки 15 дни	8 часа

ПРЕПОРЪЧАНО

Почивка и масаж пенис и главичка

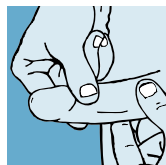

На всеки 2 или 1,5 часа

Не използвайте повече от 8 часа на равни интервали от време.

На всеки 2 часа устройството трябва да се отстранява за няколко минути, за да се позволи на тъканите да се отпуснат.

Не спете с устройството.

Забележка: за вашия собствен комфорт, след 5-тия месец е възможно първо да добавите 0,30-сантиметрова шпилка (елемент № 12), а няколко дни по-късно, да я смените с 0,5-сантиметрова шпилка (елемент № 11), за да направите опъна по-прогресивен.

			=	
Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5...
1st and 2nd month				

			=	
10 days	10 days	10 days	10 days	10 days
3rd and 4th month				

15 days	15 days
5th month	


10 Метод на употреба

Общото лечение, с изключение на случаите на различни медицински предписания, се състои от 2 периода:

- ❏ Период на адаптация с продължителност 15 дни.
- ❏ Период на еволюция, състоящ се от 3 отделни етапа: Начална фаза на еволюция (1-ви и 2-ри месец), междинна фаза (3-ти и 4-ти месец) и крайна фаза на еволюция, която започва през 5-тия месец.

През първия ден, като тренировка, поставете и извадете устройството 10 пъти подред. В случай на изкривяване се препоръчва устройството да се постави встрани от изкривяването. Пример: ако имате извивка надясно, трябва да поставите уреда в обратна посока, като го поставите наляво в гашичките. Ако пък имате кривина надолу, трябва да разположите уреда в долната част на гашите надолу (вж. изображенията по-долу). На всеки 2 часа устройството ще трябва да се сваля за няколко минути, за да се даде възможност на тъканите да се отпуснат. След 5-ия месец този период на почивка трябва да се спазва на всеки 1,5 часа. Използвайте този период на почивка, за да масажирате леко пениса. Измивайте устройството с PH неутрален сапун и вода на всеки 4 дни.

Бъдете търпеливи и последователни в лечението, това е ключът към постигане на целите ви. Всяко отклонение от програмата за лечение може да промени постигнатите резултати (консултирайте се с Вашия лекар).

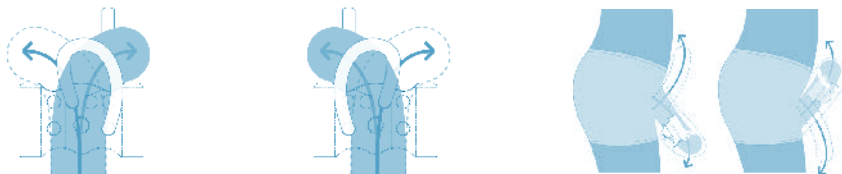

11 Операции

Ако операцията е проста, се препоръчва да започнете употребата на **Androsurgery®** 15 дни след операцията. Ако операцията е много сложна, се препоръчва използването на **Androsurgery®** да започне 1 месец след операцията. Винаги се консултирайте с Вашия хирург, за да може той да Ви посъветва колко време след операцията да започнете да използвате Androsurgery® и каква да бъде продължителността на употребата.

ХИРУРГИЯ	Период на развитие	
1-ви и 2-ри месец	Добавяйте малка 0,5-сантиметрова шпилка (елемент № 11) на всеки 7 дни	8 часа
От 3-тия месец	Добавяйте малка 0,5-сантиметрова шпилка (елемент № 11) всеки месец.	8 часа

Въпреки че обикновено няма дискомфорт, в някои дни устройството може да се чувства неудобно. Не се притеснявайте, продължавайте да използвате устройството. Въпреки това, ако е необходимо, можете да прекъснете лечението за един ден.

Ако почувствате болка или дискомфорт, синкаво оцветяване или изтръпване на главичката, извадете устройството и масажирате пениса. По този начин цветът на пениса ще се върне към нормалния и неприятните усещания ще изчезнат. Ако почувствате дискомфорт в основата на главичката, трябва да опитате да носите памук или марля, за да предпазите тази чувствителна зона.

Ако не сте успели да носите устройството в продължение на 15 до 30 дни, започнете лечението с 1 см (0,4") по-малък размер от този на устройството по това време.

Като остатъчни рискове се определят натъртване на пениса, кожна реакция на пениса в дисталната част на ствола и в основата на пениса (мястото на поставяне на пластмасовия пръстен), болка, дисхромни промени на пениса, изтръпване на жлезите, усещане за мравучкане, оток или задържане на течности в жлезите, рана, дразнене, възпаление и дискомфорт. ако по време на използването на устройството се появи някой от следните остатъчни рискове, силно препоръчваме да преустановите използването му.

Не използвайте Andropenis®: по време на сън, по време на усилена физическа дейност или спорт. под въздействието на развлекателни наркотици или алкохол. Ако имате язва, болест, предавана полов път, или ранна област на гениталиите.

Спазвайте строги хигиенни стандарти, докато използвате устройството. Сваляйте устройството, за да уринирате или дефекирате или по време на полов акт. Ако имате ерекция, докато използвате устройството, не се притеснявайте: то просто ще се усеща малко по-тесно.

Ако по главичката ви се появят бели петна, е необходимо да се обърнете към лекар, тъй като е възможно да сте развили гъбична инфекция. Личната хигиена е много важна. Поддържайте устройството чисто.

Употребата на лекарства за стимулиране на растежа на косата (финастерид), лекарства за лечение на депресия, сънотворни, транквилизатори и успокоителни може значително да намали ефективността на. Разрешено е използването на локален миноксидил за стимулиране на растежа на косата.

В случай на леко дразнене, натъртване на пениса или кожна реакция в дисталната част на ствола или в основата на пениса. Не използвайте устройството в продължение на 4 дни. Нанасяйте мехлем против дразнене два пъти дневно, сутрин и следобед, а здравяващия мехлем - през нощта. Ако раната продължава, спрете да използвате устройството и се свържете с Вашия лекар. ако усещате дискомфорт в ствола на пениса, масажирате пениса с хидратиращ крем в продължение на 5 минути всяка вечер с леки растящи движения.

Противопоказания: Пациенти с неконтролиран диабет, генитален херпес, болести, предавани по полов път, уретрит и остър цистит, остър простатит, коремна херния, дерматит, рак на тестисите, рак на лимфата, лимфом, паралегии, квадрилегии и пациенти, приемащи антикоагуланти.

Странични ефекти: Andropenis® е разработен специално за медицинска употреба и използването му не води до вторични ефекти, стига да се използва правилно при показанията, изложени в настоящото ръководство.

13 Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Дискомфорт или болка	Прекалено стегнати ремъци, неправилно прилагане или разминаване	- Разхлабете леко ремъците и проверете отново прилагането. Уверете се, че устройството е правилно подравнено по протежение на вала.
		- Ако е необходимо, поставете допълнителна подложка, за да намалите натиска.
		- Ако болката продължава, извадете устройството и се консултирайте с вашия лекар.
Дразнене или зачервяване на кожата	Продължително носене, неправилно прилагане или чувствителност на кожата към материалите	- Уверете се, че устройството не се носи твърде дълго без почивки, както е препоръчано.
		- Използвайте защитен крем или допълнителна подложка за защита на кожата.
		- Почистете редовно устройството, за да предотвратите дразнене от пот и замърсявания.
		- Ако дразненето се задълбочи, прекратете употребата и се консултирайте с лекар.
Припъзване или разхлабване	Ремъците са твърде хлабави, неправилно приложение	- Затегнете отново коланите, като се уверите, че те осигуряват подходяща опора, без да прекъсват кръсообращението.
		- Уверете се, че устройството е правилно подравнено и центрирано върху пениса.
		- Проверете за износване или повреда на ремъците или скрепителните елементи. Ако е необходимо, сменете ги.
Трудности при прилагането на устройството	Неправилно позициониране	- Следвайте внимателно инструкциите за правилно подравняване и прилагане.
		- Ако е необходимо, гледайте демонстрационни видеоклипове
Устройството причинява подуване	Прекомерен натиск от ремъци, стеснение или неправилен размер	- Незабавно отстранете устройството, ако се появи подуване.
		- Отново поставете устройството по-свободно, за да осигурите правилен приток на кръв.
Счуване или повреда на устройството	Нормално износване, прекомерна сила по време на употреба	- Ако подуването продължава, консултирайте се с Вашия лекар, преди да продължите употребата.
		- Проверявайте устройството преди и след всяка употреба за признаци на износване или повреда.
		- Заменете устройството, ако някоя от частите е счупена или повредена. Не се опитвайте да поправите сами повредено устройство.
Проблеми с миризмата или хигиената	Неподходящо почистване	- След всяка употреба почиствайте внимателно устройството с мек сапун и топла вода.
		- Изсушете устройството напълно, преди да го съхранявате или използвате отново.
		- Заменете устройството, ако се появи постоянна миризма или ако почистването не разреши проблема.
Каишките продължават да се отделят	Слаби или износени крепежни елементи	- Проверете състоянието на ремъците и скрепителните елементи.
		- Заменете устройството, ако скрепителните елементи вече не работят ефективно, тъй като може да не осигуряват правилна опора.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).