




1.- Indeks	1
2.- Kratek vodnik	2
3.- Opis	6
4.- Komponente	6
5.- Predvidena uporaba	6
6.- Modeli	6
7.- Prilagodite	7
8.- Namestitev	8
9.- Tabele	10
10.- Način uporabe	11
11.- Operacije	11
12.- Previdnostni ukrepi za uporabo	12
13.- Odpravljanje težav	13
14.- Portfelj	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/

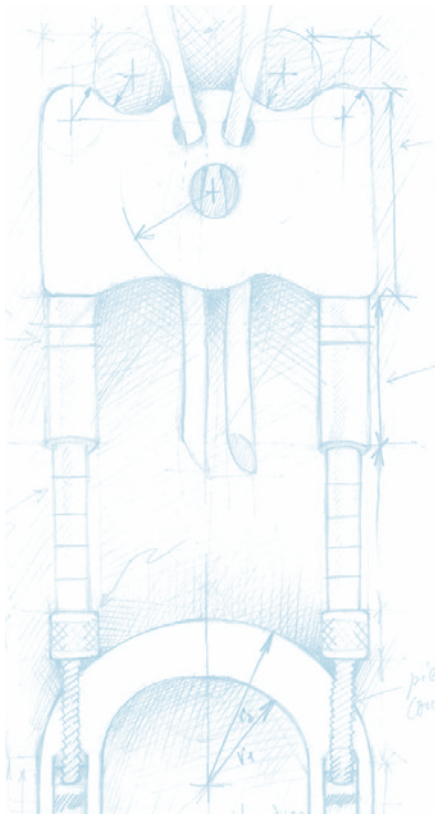

01

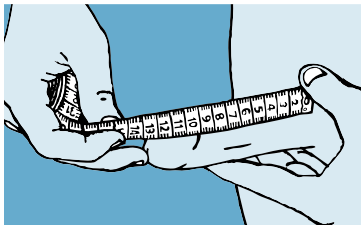

The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustraire 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03

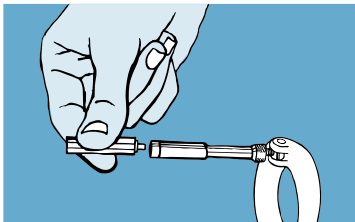

Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベシに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04

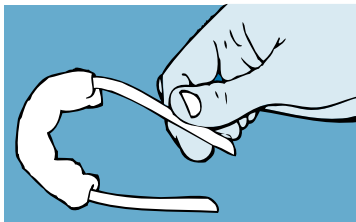

Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.



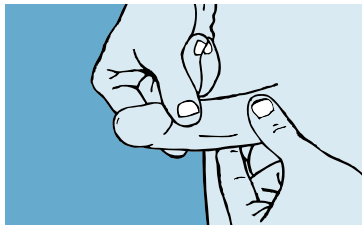

Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelring) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورونج. (الحلقة التي لونها بني).

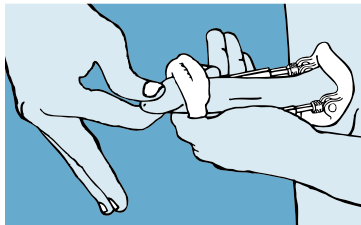

Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.

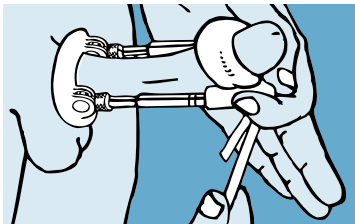

Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.

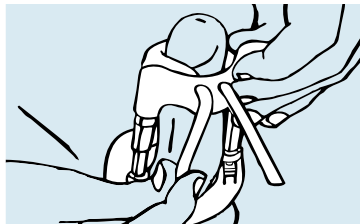

Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Opis

Andropenis® je petnična opornica, ki se pritrdi na penis od zunaj. Na penis lahko deluje z lahkim oprijemom kot naprava za oprijem penisa ali pa se lahko uporablja brez oprijema kot petnična opornica, odvisno od namena uporabe.

4 Komponente

Andropenis® je sestavljen iz osnovnega plastičnega obroča, dveh kovinskih paličic z vzmetmi in plastičnega kosa s silikonskim trakom za namesnitev penisa. Plastični deli so narejeni iz materiala POM sintetični material, ki je neobčutljiv na vnetljive tekočine, kot je npr. alkohol, trakovi pa so iz silikona, ki se uporablja v medicini. Kovinske paličice **Andropenisa** so narejene iz medenine in so prevlečene s 24 karatnim zlatom, vzmeti so iz nerjavečega jekla , osi različnih dolžin pa so iz kirurškega aluminija.

SESTAVNI DELI (slika 1): 1-osnovni plastični obroč, 2-kovinska os, 3-navojna os, 4-nastavljiva os z navojem, 5-kovinska os, 6-vijak, 7-vzmet, 8-vijak za pritrjevanje vzmeti, 9-velika os - dolga 4 cm, 10-srednja os - dolga 2 cm, 11-majhna os - dolga 0,5 cm, 12- najmanjša os - dolga 0,3 cm, 13-vrhnja plastična opora, 14-silikonski trak, 15-zaščitna blazina.

OPOMBA: Priporočljivo je med dela 4 in 5 s krpicco vtreti malce olja in s tem omogočiti lažje drsenje (na sliki glej "OIL").

5 Predvidena uporaba

- Preprečevanje deformacije penisa po uroloških operacijah ali boleznih (uporaba šablone).
- Popravite deformacijo penisa po uroloških operacijah ali boleznih (uporaba trakcije).
- Povečajte dolžino penisa pri mikropenisu in sindromu majhnega penisa (uporaba trakcije).
- Ustavite ali ohranite zadostno togost penisa za spolne odnose (uporaba šablone).

6 Modeli

- **Andropenis Peyronie**, za preprečevanje ali popraviljanje deformacije penisa pri bolezni.
- **Andropenis Surgery**, za preprečevanje ali popraviljanje deformacije penisa po operacijah.
- **Andropenis Mini**, za podaljšanje dolžine penisa ali pomoč pri spolnem odnosu, pri mikropenisu.
- **Andropenis Gold**, za podaljšanje dolžine penisa ali pomoč pri spolnem odnosu, pri občutljivi koži.
- **Andropenis Pro**, za podaljšanje dolžine penisa ali pomoč pri spolnem odnosu, pri rednem penisu.

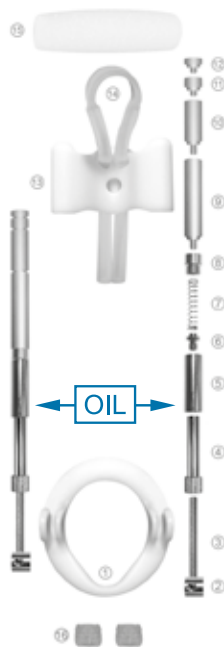


fig. 1

7 Prilagodite

Začetna dolžina **Andropenis®** je 8 cm in se meri od spodnjega dela plastičnega obroča do konca kovinske osi (slika 4, ZACETNA)

Andropenis® si prilagodite na dolžino vašega penisa. Uporabite meter in izmerite dolžino in obseg penisa, v mlahavem stanju in v erekciji (slika 2 in 3).

Osebno dolžino izračunate tako, da odštejete 4 cm od dolžine vašega penisa v erekciji.

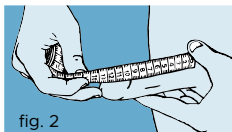


fig. 2

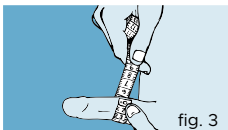


fig. 3

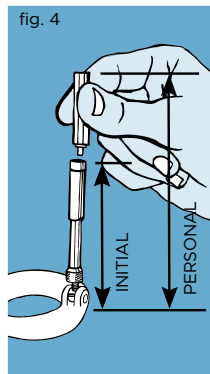


fig. 4

Primer: 14,7 cm - 4cm = 10,7 cm > osebna dolžina Andropenis® je 10,7 cm.

Sedaj je potrebno napravo nastaviti na primerno začetno dolžino.

Najprej odstranite zgornji plastični nosilec, tako da ga enostavno dvignete - snamete (slika 5), nato dodajte potrebno število primerno dolgih osi, da dosežete potrebno začetno dolžino naprave (slika 4, OSEBNA).

Primer: osebna dolžina 10,7 cm = Začetna dolžina **Andropenis®** (8 cm) + del 10 (2 cm) + del 11 (0,5 cm).



Kako uporabljati

Opomba:

Začetna velikost za Andropenis Mini je 7 cm. Če imate to varianto, začnite s prilagoditvenim obdobjem pri tej meri (7 cm) in jo vzdržujte 15 dni: prvi dan uporabljajte napravo 3 ure, nato pa postopoma vsakodnevno podaljšujte čas uporabe. Po prvih 15 dneh podaljšajte čas uporabe, kot je navedeno v tabelah za uporabo (glejte spodaj).



fig. 5

8 Namestitev

Uporaba zaščitnega lekarniškega bombažnega traka je **OBVEZNA**. Model silikonskega traka (kos 14), ki se najbolje prilagaja, vstavite v ustrezno zaščitno blazinico glede na velikost penisa (kos 15). Konca silikonskega traku vtaknite v luknji na spodnji strani vrhnje plastične opore (del 13), tako da trak naredi zanko.

Pri mlahavem stanju penisa vsa kožica na koncu penisa (pri neobrezanih moških), spolzi na telo penisa (slika 7), takrat se umesti silikonski obroček pod krono glaviice penisa, kjer sreča telo penisa (sl. 8).



Glavica penisa ne sme priti v neposreden stik s pripomočkom. Nadalje raztegnite penis stran od telesa, tako da je raztegnjen medtem ko je v mlahavem stanju.



Vzemite osnovni plastični obroč (del 1) in ga obrnite tako, da je ožji del obroča obrnjen navzgor. Penis vtaknite skozi osnovni plastični obroč (del 1) in ga položite na vdolbeni del vrhnje plastične opore (del 13). Z levo roko primite vrhšnjo oporo (del 13) in potisnite napravo k telesu tako, da se vzmeti skrčijo (slika 9).



Z levo roko še kar naprej pritiskajte napravo, s prsti desne roke pa potegnite glavico skozi zanko silikonskega traku (slika 10).



Kako popraviti

Palec leve roke položite na glavico, da držite penis na mestu, z desno roko pa zategujete silikonsko zanko, tako da vlečete oba konca silikonskega traku hkrati (slika 11).



Počasi povlecite kožo na obeh straneh penisa proti telesu, da ne bi stisnili kože ali pustili gube nad žlebom spolovila (slika 12).

Silikonsko zanko je treba namestiti na žleb spolovila in ga poravnati z njim, ne da bi ga bolela, vendar dovolj tesno, da spolovilo ne zdrsne ven. Silikonski trak previdno pritrдите v sponke na spodnji strani zgornje podpore (slika 13) tako, da trak raztegnete vsakič, ko pritisnete v vdolbine.


Zategnite trak, vendar ga ne potegnite navzdol, da ne bi stisnili penisa.

Prepričajte se, da nad utorom in pod silikonским trakom ni kože, če je, jo potegnite proti telesu, da se izognete njenemu stisku. Če želite odstraniti **Andropenis®**, stisnite vzmeti s pritiskom proti telesu, sprostite silikonški trak (kos 14) iz pritrdilnih elementov v zgornjem nosilcu (kos 13) in povečajte velikost silikonške zanke, da sprostite penis.

Andropenis® ima sistem pritrditve spolovila s trakom. na voljo sta dva modela: **Androcomfort®** band in **Androsilicone®** band. Sistem **Androcomfort®** band omogoča še bolj priročno uporabo sistema **Andropenis®**. Namesti se med spolovilo in gred penisa, na območju koronarne sulkusne gube - prepucija. Trak vstavite v sistem pene **Androtop®**. Oglejte si, kako jih uporabljati v: www.andromedical.com/videos



Androsupport
Vodnik

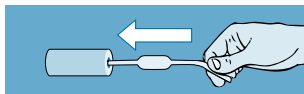

Andropenis® ima silikonški obroč, ki deluje kot blažilni sistem **Androring®**. Leži med spolovilom in gredjo penisa, v koronalni sulkus-prepucij. Oglejte si, kako jih uporabljati v: www.andromedical.com/videos

Andropeyronie®, Androsurgery® in **Andropenis® Mini** imajo boljši plastični del (Androsupport), prilagojen za korekcijo ukrivljenosti penisa (glej "Navodila za uporabo Androsupporta"). www.andropenis.com/ifu


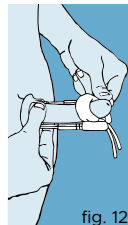


fig. 12




fig. 13

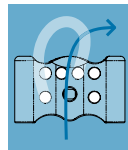

	VELIKOST NAPRAVE	TRAJANJE
	Adaptation period	
Prvih 5 dni	začetna velikost	3 ur
6.-10. dan	Dodajte majhno 0,5 cm os (del 11)	6 ur
11.-15. dan	Dodajte majhno 0,5 cm os (del 11)	8 ur
	Nadaljevalna faza	
1. in 2. mesec	Dodajte majhno 0,5 cm os (del 11) vsakih 7 dni	8 ur
Od 3. meseca	Dodajte majhno 0,5 cm os (del 11) vsakih 10 dni	8 ur
Od 5. meseca	Dodajte majhno 0,5 cm os (del 11) vsakih 15 dni	8 ur

PRIPOROČILO

Počitek in masaža penisa in spolovila

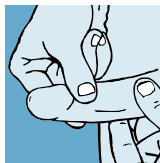



Vsaki 2 ali 1,5 ure

Ne uporabljajte več kot 8 ur v rednih časovnih presledkih.

Vsaki 2 uri je treba napravo za nekaj minut odstraniti, da se tkiva sprostijo.

Z napravo ne spite.

Opomba: za vaše udobje, od 5. meseca naprej, je možno dodajati najmanjše osi (0,3 cm - del 12) in jo nekaj dni kasneje zamenjati za os dolgo 0,5 cm in tako naredite spremembo bolj postopno.

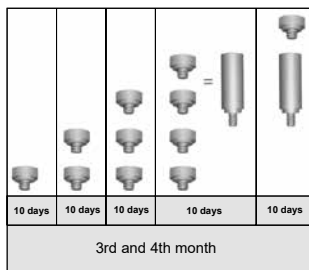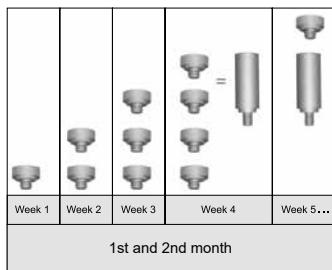




10 Način uporabe

Običajno zdravljenje, razen pri različnih zdravniških receptih, obsega dve obdobji:

- prilagoditveno obdobje, ki traja 15 dni.
- ARazvojno obdobje, sestavljeno iz treh ločenih faz: Začetna evoliucijska faza (1. in 2. mesec), vmesna faza (3. in 4. mesec) in končna evoliucijska faza, ki se začne v 5. mesecu.

Prvi dan kot vajo namestite in odstranite pripomoček desetkrat zapored. V primeru ukrivljenosti je priporočljivo napravo namestiti stran od ukrivljenosti. Primer: če imate ukrivljenost v desno, morate pripomoček namestiti v nasprotni smeri, tako da ga v spodnjih hlačah namestite levo. Če pa imate ukrivljenost navzdol, morate pripomoček v spodnjih hlačah namestiti navzdol (glejte spodnje slike). Vsaki dve uri bo treba pripomoček za nekaj minut odstraniti, da se tkiva sprostijo. Po petem mesecu je treba ta počitek upoštevati vsaki 1,5 ure. Čas počitka izkoristite za rahlo masažo penisa. Napravo vsake 4 dni umijte z milom in vodo z nevtralnim pH.

Bodite potrpežljivi in dosledni pri zdravljenju, saj je to ključ do uresničitve vaših ciljev. Vsako odstopanje od programa zdravljenja lahko spremeni dosežene rezultate (posvetujte se z zdravnikom).

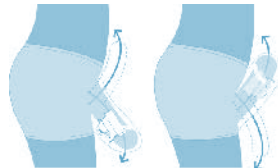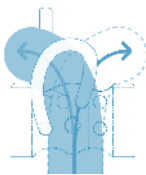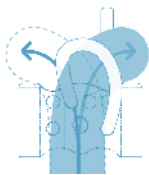

11 Operacije

Če je operacija preprosta, je priporočljivo, da začnete uporabljati zdravilo **Androsurgery®** 15 dni po operaciji. Če je operacija zelo zapletena, je priporočljivo začeti uporabljati zdravilo **Androsurgery®** 1 mesec po operaciji. Vedno se posvetujte s svojim kirurgom, da vam bo lahko svetoval, koliko časa po operaciji lahko začnete uporabljati zdravilo **Androsurgery®** in kako dolgo naj ga uporabljate.

KIRURGIJA	Nadaljevalna faza	
1. in 2. mesec	Dodajte majhno 0,5 cm os (del 11) vsaki 7 dni	8 ur
od 3. meseca	Dodajte majhno 0,5 cm os (del 11) vsak mesec	8 ur

12 Previdnostni ukrepi za uporabo

Čeprav običajno ni neprijetnih občutkov, se lahko nekaj dni počutite neprijetno. Ne skrbite, napravo uporabljajte še naprej. Po potrebi pa lahko zdravljenje za en dan prekinete.

Če občutite bolečino ali nelagodje, modrikasto obarvanost ali otrplost spolovila, odstranite napravo in masirajte penis. S tem se bo barva penisa vrnila v normalno stanje, neprijetni občutki pa bodo izginili. Če občutite nelagodje na dnu spolovila, poskusite nositi bombaž ali gazo, da zaščitite to občutljivo območje.

Če pripomočka niste mogli nositi 15 do 30 dni, začnite zdravljenje z velikostjo 1 cm (0,4") manjšo, kot je bila velikost pripomočka v tem času.

Kot preostala tveganja so opredeljene modrice penisa, kožna reakcija penisa v distalnem delu gredi in na dnu penisa (mesto uporabe plastičnega obročka), bolečina, dishromne spremembe penisa, otrplost žlez, občutek mravljinčenja, edem ali zadrževanje tekočine v žlezah, rana, draženje, vnetje in nelagodje. Če se med uporabo pripomočka pojavi katero koli od naslednjih preostalih tveganj, močno priporočamo prekinitve uporabe pripomočka.

Ne uporabljajte Andropenis®: med spanjem, med naporno telesno dejavnostjo ali športom, pod vplivom rekreativnih drog ali alkohola. Če imate razjedo, spolno prenosljivo bolezen ali rano na spolovilo.

Med uporabo naprave upoštevajte stroge higienske standarde. Odstranite pripomoček za uriniranje ali iztrebljanje ali med spolnim odnosom. Če imate med uporabo pripomočka erekcijo, ne skrbite: pripomoček bo le nekoliko tesnejši.

Če se na spolovilu pojavijo bele lise, je treba obiskati zdravnika, saj je morda prišlo do glivične okužbe. Osebna higiena je zelo pomembna. Pripomoček naj bo čist.

Uporaba zdravil za spodbujanje rasti las (finasterid), zdravil za zdravljenje depresije, uspavalnih tablet, pomirjeval in pomirjeval lahko znatno zmanjša učinkovitost. Uporaba lokalnega minoksidila za spodbujanje rasti las je dovoljena.

V primeru manjšega draženja, modrice na penisu ali kožne reakcije na penisu v distalnem delu stebra ali na bazi penisa. Pripomočka ne uporabljajte 4 dni. Mazilo proti draženju nanesite dvakrat dnevno, zjutraj in popoldne, zdravilno mazilo pa ponoči. Če rana ne izzveni, prenehajte uporabljati pripomoček in se obrnite na zdravnika. Če čutite nelagodje v gredi penisa, vsak večer z nežnimi raztezniimi gibi 5 minut masirajte penis z vlažno kremo.

Kontraindikacije: Bolniki z nenadzorovano sladkorno boleznijo, genitalnim herpesom, spolno prenosljivimi boleznimi, uretritom in akutnim cistitisom, akutnim prostatitisom, trebušno hernijo, dermatitisom, rakom testisov, limfnim rakom, limfomom, paraplegiki, kvadрупlegiki in bolniki z antikoagulantnim zdravljenjem.

Neželeni učinki: Andropenis® je bil zasnovan posebej za medicinsko uporabo in njegova uporaba ne povzroča sekundarnih učinkov, če se pravilno uporablja v skladu z indikacijami, ki so izpostavljene v tem priročniku.

Problem	Možen vzrok	Rešitev
Nelagodje ali bolečina	Pretesni trakovi, neustrezno prileganje ali nepravilna nastavitve	- Rahlo popustite trakove in ponovno preverite prileganje. Prepričajte se, da je naprava pravilno poravnana vzdolž gredi.
		- Po potrebi uporabite dodatno oblažjenje, da zmanjšate pritisk.
		- Če bolečina ne popusti, odstranite napravo in se posvetujte z zdravnikom.
Draženje ali pordelost kože	Dolgotrajno nošenje, neustrezno prileganje ali občutljivost kože na materiale	- Prepričajte se, da naprave ne nosite predolgo brez priporočenih odmorov.
		- Za zaščito kože uporabite zaščitno kremo ali dodatno podlogo.
		- Napravo redno čistite, da preprečite draženje zaradi znoja in nečistoč.
		- Če se draženje stopnjuje, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.
Drsenje ali rahljanje	Trakovi so preohlapni, nepravilna uporaba	- Ponovno zategnite trakove in poskrbite, da zagotavljajo ustrezno oporo in ne ovirajo krvnega obtoka.
		- Prepričajte se, da je naprava pravilno poravnana in postavljena v središče penisa.
		- Preverite morebitno obrabo ali poškodbe na trakovih ali pritrdilnih elementih. Po potrebi jih zamenjajte.
Težave pri uporabi naprave	Nepravilno pozicioniranje	- Za pravilno poravnavo in uporabo natančno upoštevajte navodila.
		- Po potrebi si oglejte predstavitvene videoposnetke
Naprava povzroča otekanje	Prevelik pritisk pasov, zožitev ali neustrezna velikost	- Če se pojavi oteklina, napravo takoj odstranite.
		- Napravo ponovno namestite bolj ohlapno, da zagotovite ustrezen pretok krvi.
		- Če oteklina še vedno traja, se pred nadaljevanjem uporabe posvetujte s svojim zdravnikom.
Razbitje ali poškodba naprave	Običajna obraba, prevelika sila med uporabo	- Pred vsako uporabo in po njej napravo preglejte, ali ni znakov obrabe ali poškodb.
		- Če je kateri koli del zlomljen ali poškodovan, napravo zamenjajte. Poškodovane naprave ne poskušajte popraviti sami.
Težave z vonjem ali higieno	Neustrezno čiščenje	- Po vsaki uporabi napravo temeljito očistite s blagim milom in toplo vodo.
		- Pred shranjevanjem ali ponovno uporabo napravo popolnoma posušite.
		- Napravo zamenjajte, če se v njej pojavi trajni vonj ali če čiščenje ne odpravi težave.
Trakovi naj se ločijo	Šibki ali obrabljeni pritrdilni elementi	- Preverite stanje trakov in pritrdilnih elementov.
		- Če pritrdilni elementi ne delujejo več učinkovito, napravo zamenjajte, saj morda ne zagotavljajo ustrezne podpore.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).