

Instructions for Use (IFU)

1



IFU LANGUAGES

www.androvacuum.com/ifu/



VIDEOS

www.andromedical.com/videos




FAQs – QUESTIONS

www.androvacuum.com/faqs




MEDICAL CONSULTATION (online, chat & email)

www.androclinic.com

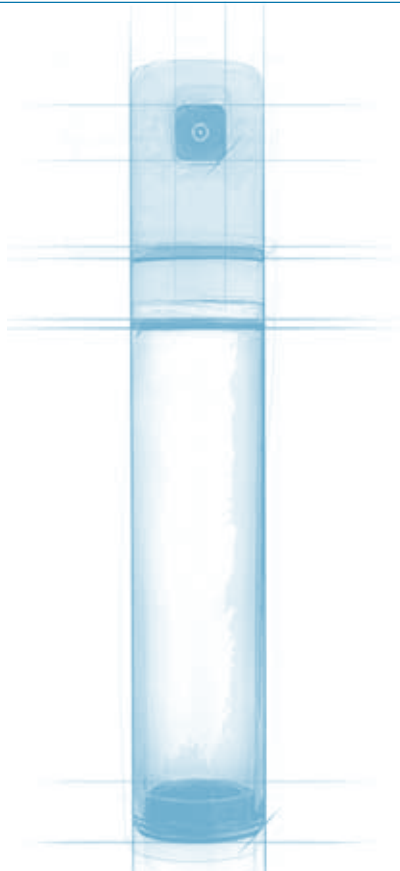

01

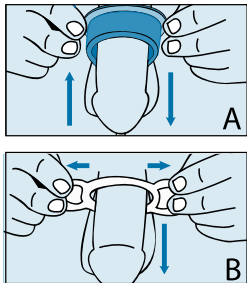

Please, choose the components according to the therapy and your penis size. For erectile dysfunction treatment, choose the cushioning ring (fig. A) and the constriction ring (fig. B) which fits your penis width better.

Bitte wählen Sie die zu Ihrer Therapie und Penisgröße passenden Bestandteile. Für erektile Dysfunktion, benutzen Sie den gepolsterten Ring (Abb. A) und den Einschnürungsring (Abb. B) der sich am Besten an Ihren Penis anpasst.

Sélectionner les composants suivants la thérapie à suivre et la taille de son pénis. Pour le traitement de la dysfonction érectile, sélectionner l'anneau amortisseur (image A) et l'anneau de constriction (figura B) qui s'adaptera mieux a la taille de son pénis.


Selecione los componentes según la terapia a seguir y el tamaño de su pene. Para el tratamiento de la disfunción eréctil, seleccione el anillo de amortiguación (figura A) y el anillo de constricción (figura B) que más se adapte al grosor de su pene

Selezionate i componenti in base alla terapia da seguire e alla dimensione del vostro pene. Per il trattamento della disfunzione erettile, selezionate l'anello di ammortizzazione (fig. A) e l'anello di costrizione (fig. B) che si adatti meglio alla dimensione del vostro pene.

治療のタイプとペニスのサイズにあった付属品を選んでいきます。
勃起不全の治療:ゴムバッキン(図A)と、ペニスの太さに合ったシリコンバン
ド(図B)を選んでください。

من فضلك ، اختر المكونات حسب العلاج وحجم قضيبك . علاج
ضعف الانتصاب ، اختر حلقة التوسيد (الشكل أ) وحلقة الانقباض
(الشكل ب) التي تناسب عرض قضيبك بشكل أفضل

02

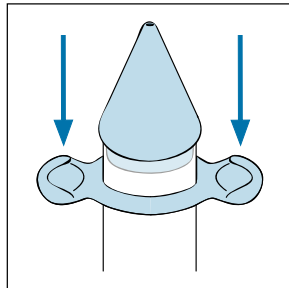

Fit the cone at one end of the cylinder. Apply lubricant gel to the cone of the cylinder and slide on the constriction ring until the ring snaps on to the cylinder.

Den Kegel auf ein Ende des Zylinders stecken. Gelschmiermittel in den Kegel am Zylinder auftragen und den Schließring aufziehen bis der Ring um den Zylinder aufliegt.

Fixez le cône à une extrémité du cylindre. Appliquez du gel lubrifiant sur le cône du cylindre et faites glisser sur lui l'anneau de constriction jusqu'à ce que l'anneau entoure le cylindre transparent.

Encaje el cono en un extremo del cilindro. Aplique gel lubricante en el cono del cilindro y deslice por él el anillo de constricción hasta que el anillo encaje en el cilindro.


Fissare il cono ad una estremità del cilindro. Applicare lubrificante sul cono ed introdurre l'anello di costrizione facendolo scorrere attraverso il cono fino a raggiungere il cilindro.

シリンドーにコーン型のアダプターを取り付け、潤滑剤(ジェル)を塗り、シリコンバンドを滑らすようにしてシリンドーにはめます。

ضع المخروط في أحد طرفي الأسطوانة. ضع هلام التشحيم على
مخروط الأسطوانة وحركه على حلقة الانقباض حتى تستقر الحلقة
على الأسطوانة



03

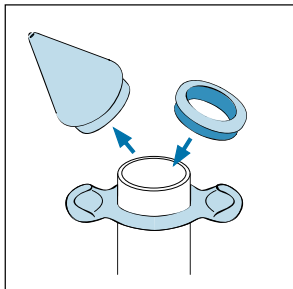

Remove the cone of the cylinder. Snap rings in place and place in the selected cushioning rings after applying Gel Lubricant.

Den Kegel vom Zylinder entfernen und an dessen Stelle die gewählten Dämpferringe anbringen und Gelschmiermittel auftragen.

Retirez le cône du cylindre et mettez à sa place, le ou les anneaux amortisseurs choisis et appliquez du gel lubrifiant sur eux.


Retire el cono del cilindro. Encaje en su lugar los anillos amortiguadores seleccionados y aplique gel lubricante sobre los mismos.

Rimuovere il cono del cilindro. Introdurre nel cilindro gli anelli ammortizzatori scelti e applicare gel lubrificante sugli stessi.

シリンダーからコーン型のアダプターを取り外し、シリンダーにゴムパッキンをはめ込み、潤滑剤(ジェル)を塗ります。

قم بإزالة مخروط الأسطوانة. ضع الحلقات في مكانها وضعتها في حلقات التوسيد المحددة بعد وضع مادة التشحيم الهلامية

04

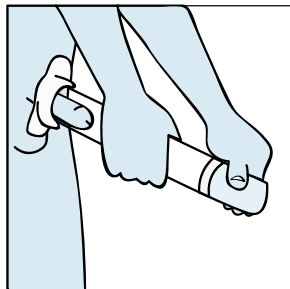

On the other end of the cylinder, snap in the electric motor, when fitted correctly there will be no movement and there will be a perfect seal.

Den Elektromotor auf das andere Ende des Zylinders stecken. Das Gerät ist dann richtig verschlossen wenn es nach dem Einschalten keine Bewegung vorweist.

À l'autre extrémité du cylindre, enclenchez le moteur électronique. Vous savez que le moteur est correctement enclenché s'il n'y a pas de jeu entre les pièces.

En el otro extremo del cilindro, encaje el motor electrónico. Sabrá que el motor ha encajado apropiadamente si no tiene holgura.


Montare all'altra estremità del cilindro, il motore elettronico. Sarà correttamente montato se non ci sarà movimento e aderirà perfettamente.

シリンダーのゴムパッキンが付いていない方に、モーターのついた電源装置をはめ込みます。
(しっかりとはめ込めているかを確認するようにしてください。)

على الطرف الآخر من الأسطوانة ، قم بإدخال المحرك الكهربائي ، عندما يتم تركيبه بشكل صحيح لن تكون هناك حركة وسيكون هناك ختم مثالي



05

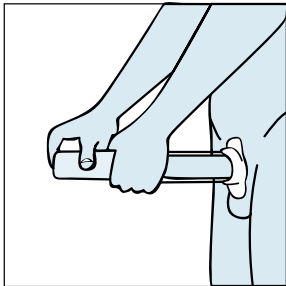

Insert the penis into the cylinder where the ring buffers are in place, insert the penis all the way until the pubis. I may be easier to create a vacuum if the hair is trimmed or shaved on the pubis where it is in contact with the cylinder.

Schieben Sie den Penis bis an Ihr Schambein ein. Wenn Sie an dieser Stelle Ihr Schamhaar rasieren kann es leichter sein, ein Vakuum herzustellen.

Insérez le pénis dans le cylindre jusqu'à l'appuyer sur le pubis. Il sera plus facile de créer un vide si la zone qui soutient le cylindre est épilée.


Introduzca el pene por la parte del cilindro con los anillos amortiguadores, hasta apoyarlo en su pubis. Puede resultar más fácil crear el vacío si se recorta el vello de la zona en la que se apoya el cilindro.

Inserire il pene attraverso il cilindro nella parte dove ci sono gli anelli ammortizzatori finché il cilindro non arrivi a toccare il pube. Può essere più facile creare il vuoto, se i peli sono tagliati nella zona che sostiene il cilindro.

シリンドーをペニスにかぶせ、ペニス全体が入ったら、しっかりと恥骨側に押さえます(シリンドーが当たる部分の陰毛を手入れすると、より簡単にアンドロバキュームを使用いただけます)。

دخل القضيب في الاسطوانة حيث توجد مخازن الحلقة، أدخل القضيب بالكامل حتى العانة. قد يكون من الأسهل صنع فراغ إذا تم قص الشعر أو حلقه في منطقة العانة حيث يكون ملائماً للأسطوانة

06

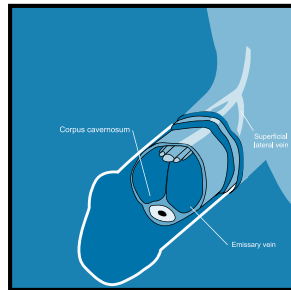

With one hand, hold the cylinder tight against the pubis, with the other hand press the motor button and start the motor. For manual model, grasp the motor with your hand and make up-and-down movements.

Halten Sie den Zylinder mit einer Hand gegen Ihr Schambein und betreiben Sie den Motor mit der anderen. Beim manuellen Modell fassen Sie den Motor mit der Hand und machen Auf- und Abwärtsbewegungen.

D'une main, maintenez le cylindre contre votre pubis et de l'autre actionnez le moteur électronique. Pour le modèle manuel, saisissez le moteur avec votre main et faites des mouvements de haut en bas.

Con una mano sujete el cilindro contra su pubis y con la otra accione el motor electrónico. Para el modelo manual, agarre el motor con la mano y haga movimientos hacia arriba y hacia abajo.


Con una mano, tenere il cilindro contro il pube e con l'altra, azionare il motore elettronico. Per il modello manuale, afferrare il motore con la mano ed eseguire movimenti di salita e discesa.

片手は器具を恥骨側に押さえるようにし、もう一方の手で、電源ボタンを操作するようにします(圧力が急激にかかることはありませんので、ご注意ください)。手動式の場合は、手でモーターをつかみ、上下に動かしてください。

یابدی یدیک، امسک الأسطوانة بإحكام على العانة، وباستخدام اليد الأخرى، اضغط على زر المحرك وإبدأ تشغيل المحرك. بالنسبة للطرز الیودی، امسک المحرك یدیک وقم بحركات لأعلى ولأسفل



07

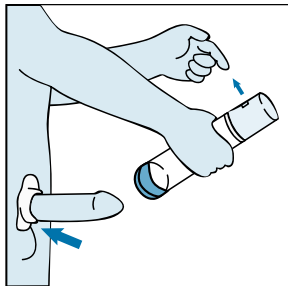

After achieving a full erection, slide the correct size of constriction ring down the outside of the cylinder and set at the base of the penis. Stop the vacuum by pressing the red button on the electric motor to release air back into the cylinder.

Nachdem Sie eine Erektion erreicht haben schieben sie den Schließring vom Zylinder über den Penis bis an dessen Anschlag. Lassen Sie die Luft in den Zylinder fließen indem Sie auf den roten Knopf am Elektromotor drücken und nehmen Sie den Zylinder ab.

Après avoir obtenu une érection, faites glisser l'anneau de constriction depuis le cylindre jusqu'à la base de la verge. Une fois que l'anneau est en place sur la verge, libérez l'air du cylindre en appuyant sur le bouton rouge du moteur électronique et retirez le cylindre.


Tras lograr la erección, deslice el anillo de constricción desde el cilindro y ajústelo en la base del pene. Libere el aire del cilindro pulsando el botón rojo del motor electrónico y retire el cilindro.

Dopo aver raggiunto l'erezione, far scorrere l'anello di costrizione dal cilindro fino alla base del pene. Liberate l'aria del cilindro premendo il tasto rosso del motore elettronico e rimuovere il cilindro.

勃起したら、シリンドーにつけてある、シリコンリングをペニスの根元に滑らすように移します。シリコンリングをペニスの根元につけたら、電源装置についている赤いボタンを押し、シリンドーの中に空気を入れ、器具を取り外すようにしてください。

بعد تحقيق الانتصاب الكامل ، حرك الحجم الصحيح لحلقة الانقباض أسفل خارج الأسطوانة واضبطها عند قاعدة القضيب. أوقف الفراغ بالضغط على الزر الأحمر على المحرك الكهربائي لإخراج الهواء مرة أخرى إلى الأسطوانة

08

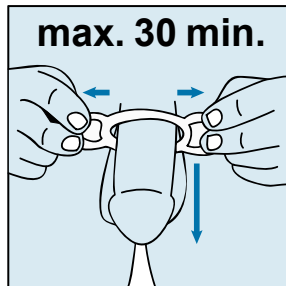

The constriction ring will keep blood in the penis and therefore hold the erection. It can be worn for up to 30 minutes.

Der Schließring wird die Erektion und die Durchblutung aufrechterhalten. Er darf höchstens 30 Minuten lang benutzt werden.

L'anneau de constriction maintiendra l'irrigation et l'érection. Il peut être porté jusqu'à 30 minutes au maximum.

El anillo de constricción mantendrá la irrigación y la erección. Puede llevarse puesto 30 minutos como máximo.

L'anello di costrizione manterrà l'irrigazione e l'erezione. Può essere indossato fino a 30 minuti al massimo.

シリコンリングで、陰茎内に血液を送りこんだ状態を保つことができます。30分以上の連続使用は控えるようにご注意ください。

ستحافظ حلقة الانقباض على الدم في القضيب وبالتالي تحافظ على الانتصاب. يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة





طريقة الاستعمال

اقرأ قبل الإستخدام

رقم الصفحة

جدول المحتويات

- | | |
|----|---|
| 1 | 1. رموز وروابط QR |
| 2 | 2. دليل سريع |
| 7 | 3. معلومات عن Androvacuum® |
| 8 | 4. مكونات الجهاز |
| 9 | 5. المؤشرات الطبية |
| 10 | 6. حدد المكونات |
| 11 | 7. دليل استخدام النظام |
| 13 | 8. تعليمات للاستخدام |
| 14 | 9. تعليمات للاستخدام في علاج ضعف الانتصاب |
| 15 | 10. تعليمات الاستخدام لإعادة تأهيل القضيب |
| 16 | 11. المشاكل والحلول المشتركة |
| 17 | 12. الاحتياطات |
| 19 | 13. حافظة |

ملاحظة: يحتوي **Androvacuum®** على الطرز التالية: **Androvacuum® Premium** (بمحرك أوتوماتيكي ، طراز فاخر) و **Androvacuum® Manual** (بمحرك يدوي ، طراز Pro).
تعليمات المستخدم هي نفسها لجميع الموديلات ، مع اختلافات طفيفة.

Androvacuum® هي مضخة قضيب عالية الجودة مثبتة طبيياً وهي حل غير جراحي وآمن وفعال لمتابعة روتين إعادة تأهيل القضيب ويحدث على الانتصاب الفوري الخالي من الأدوية كحل لضعف الانتصاب


تم تصميم الجهاز بعناية و هندسة فائقة. Androvacuum® يحتوي على اسطوانة يتم تركيب قضيبك بداخلها، مع محرك اليكترونى لاجداث بيئة فراغية حول القضيب، مما يزيد من تدفق الدم بداخل القضيب و يجعله منتصباً.

من فضلك ، اقرأ أولاً ، (للطراز المزود ببطارية فقط):

الخطوة الأولى: لازالة غطاء البطارية، اضغط على مكان السهم. انظر الصورة 1A

الخطوة الثانية: ضع البطاريات في المكان المخصص لها.


الخطوة الثالثة: ضع غطاء البطارية في مكانه مرة أخرى.

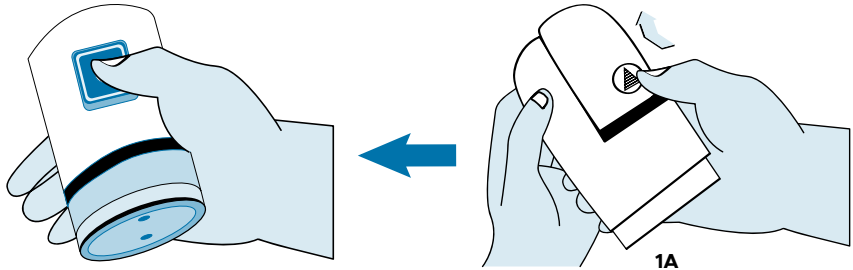


بعد إدخال البطاريات ، تحقق من أن المحرك يعمل بشكل صحيح عن طريق الضغط على زر الإشعال بقوة.

ملاحظات: اقرأ التعليمات جيدا قبل استخدام جهاز Androvacuum® اذا لم يتم اتباع التعليمات جيدا، فان جهاز Androvacuum® لن يعمل

حلقات الاسناد: متوفرة لجميع أحجام القضيب،
ليتم وضعها في الأنبوبة الخاصة بالقضيب بعد
ازالة الغطاء الموجود على الشكل المخروطي

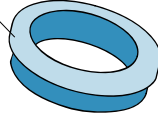


زر التحكم في الهواء الفراغى
لخفض القوة الفراغية

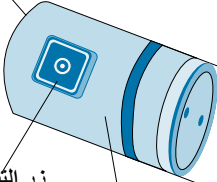


زر التشغيل

محرك فراغ الكتروني أو يدوي
يوفر ختم سريع


اسطوانة طبية قابلة للازالة

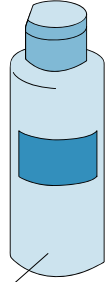

زيت للاستخدام المحكم للاستخدام الشخصى
ملحوظة: الجل المانعة للتسرب غير مشمول في
العبوة ، متوفر فقط في الصيدليات.

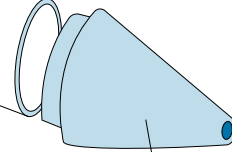

اسطوانة مخروطية مصنوعة لغرض طبي لتوضع
داخل الأنبوبة التي يوضع فيها القضيب

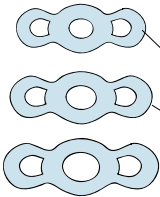

خواتم مساعدة على الانتصاب:

تساعد على الحفاظ على الانتصاب، متوفرة لجميع
أحجام القضيب

ضعف الانتصاب

Androvacuum® يساعد على علاج ضعف الانتصاب الذي يعاني منه الملايين من الرجال. الضعف الجنسي قد يكون علامة على مشكلة خطيرة في تدفق الدم أو مشكلة في الأعصاب. الضعف الجنسي يحدث كآثر جانبي لبعض الأدوية. إذا كنت تشك في هذا، استشر طبيبك. لا توقف أو تغير الدواء إلا بعد استشارة طبيبك. التدخين و المشروبات الكحولية و تعاطي المخدرات قد يؤديوا الى ضعف في انتصاب قضيبك.

علاج الضعف الجنسي بواسطة جهاز **Androvacuum®** ينصح به في الحالات الآتية:

- ❖ الرجال الذين يفشلون أحيانا في الحصول على انتصاب كامل بسبب التوتر أو الخوف.
- ❖ الرجال الذين يحصلون بسهولة على الانتصاب ولكن لديهم مشاكل في الحفاظ عليه.
- ❖ الرجال الذين يعانون من مشاكل الانتصاب طوال حياتهم، حتى أولئك الذين لم يتحقق الانتصاب لمدة سنوات.
- ❖ الرجال الذين يعانون من مشاكل الانتصاب و لا يستطيعون تناول الأدوية المضادة للضعف الجنسي بسبب مشاكل في القلب.



إعادة تأهيل القضيب

استخدام جهاز **Androvacuum®** مرة واحدة يوميا، من 5 إلى 7 مرات في الأسبوع، سيساعدك على الحفاظ على طول قضيبك ويساعد على تمدد أنسجة و شرايين القضيب و انعاش خلايا القضيب. استخدام جهاز ال **Androvacuum®** بانتظام، يمكنه أن يوفر قوة الانتصاب الكاملة. لتبدأ العلاج، المكونات التي. لن تحتاج إلى استخدام الخواتم المساعدة على الانتصاب في هذه الحالة. هذه الخواتم مصممة للحفاظ على الانتصاب و جعله صلبا خلال النشاط الجنسي. هذه الصلبة ليست ضرورية لزيادة اللياقة الجنسية. خلال جلسة العلاج لزيادة اللياقة الجنسية، ننصحك بأن تقوم بعمل عدد 5 انتصابات أو استخدام جهاز ال **An-drovacuum** لفترة لا تقل من 5 إلى 10 دقائق. لا تقم بتشغيل المحرك إلى درجة قد تسبب الألم.


يُوصى بعلاج إعادة تأهيل القضيب باستخدام **Androvacuum®** من أجل:

- ❖ الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب.
- ❖ الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب تدريجيا نتيجة لعملية الشيخوخة و الكسل و شرب الكحول أو التدخين، فضلا عن ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع الضغط العصبي.
- ❖ الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون أو يعتمدوا على المكملات الهرمونية.
- ❖ الرجال بعد استئصال البروستاتا أو جراحة البروستاتا جراحة مرض بيروني أو جراحات القضيب.

- 1- ابدأ بأكبر خواتم الانتصاب و الاسناد.إذا كنت غير قادر على تحمل القوة الفراغية والانتصاب باستخدام أكبر الخواتم، قم باستخدام الخاتم الأصغر الى أن تكون قادرا على تحمل القوة الفراغية والانتصاب.
- 2- ضع الاسطوانة (بوضع الجزء الناعم في مواجهةك) على سطح مسطح. وضع الاسطوانة المخروطية في أنبوب القضيب
- 3- قم بتليين سطح الاسطوانة المخروطية بواسطة زيت الاستخدام المحكم.
- 4- قم بالامساك بالخواتم المساعدة على الانتصاب كما هو موضح في الأسفل. اضغط بمقدمة الإبهام على رأس الخاتم بجانب الاسطوانة المخروطية الى أسفل. ضع الخاتم المساعد على الانتصاب قرب نهاية الأنبوب للتحميل السهل على قاعدة القضيب (لا تقوم بالتحميل الشديد للخاتم على الأنبوب عن طريق سحب المقابض، فإنه قد يتم كسرها).
- 5- قم بازالة الاسطوانة المخروطية وإرفق الاسطوانة إلى المحرك الفراغي الكهربائي. قم بعمل دوران للأسطوانة على المحرك الكهربائي 1 / 4 دائرة، لتأمين تثبيته في مكانه. ولا تحاول إحكام التثبيت. ضع خواتم الإسناد في النهاية المفتوحة لأنبوب القضيب.
- 6- قم بتشغيل الماء الدافئ على الاسطوانة (قبل تثبيت المحرك) مما سيساعد على منع حدوث ضباب داخل الاسطوانة خلال الاستخدام.

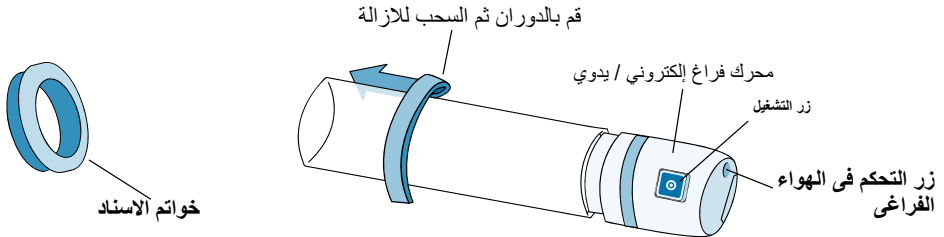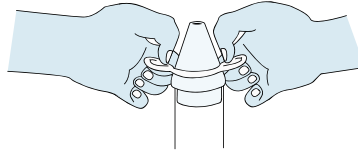

الخواتم المساعدة على الانتصاب

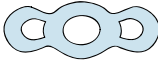

واحدة من أهم الخطوات في الاستخدام هي تركيب الخواتم المساعدة على الانتصاب بشكل صحيح. للحفاظ على تدفق الدم داخل القضيب، يجب أن يتم تركيب الخواتم بشكل مريح و مثبت، ولكن ينبغي ألا يكون التثبيت أكثر من اللازم. إذا كان **Androvac®** uum يتيح لك انتصاب جيد، ولكن الخواتم المساعدة للانتصاب تكون فضفاضة أثناء الارتداء لمدة خمس دقائق أو أقل، قم باستخدام خاتم له مقياس أصغر.

ثلاثين دقيقة هو الوقت الموصى به لارتداء الخواتم المساعدة على الانتصاب. إذا قمت بارتدائها لفترة أطول، فبالإمكان أن يحدث ضرر دائم.

بعد أن تختار الخاتم المناسب لقضيبك، لن يستغرق الوقت سوى بضع دقائق للحصول على الانتصاب الكامل.

لا ترتدى الخاتم المساعد على الانتصاب أكثر من 30 دقيقة.

جهاز **Androvacuum®** يوف يساعدك لكى تحصل على انتصاب كامل و مريح لقضيبك.

- ❗ الحد الأدنى بين الاستخدامات للجهاز هو 60 دقيقة.
- ❗ لا ترتدى الخاتم المساعد على الانتصاب و أنت نائمًا.
- ❗ لا ينبغي تركيب الخاتم المساعد على الانتصاب كطريقة للتحكم فى الإنجاب.
- ❗ استخدم أكبر خاتم مساعد على الانتصاب.
- ❗ لا تستخدم الخاتم المساعد على الانتصاب أثناء شرب الكحول أو تناول المخدرات.
- ❗ الاستخدام المتكرر للخواتم المساعدة على الانتصاب قد تؤدي الى كدمات في قاعدة القضيب، الآثار الجانبية المؤقتة قد تشمل بعض الكدمات للقضيب أو ظهور بعض البقع الحمراء الصغيرة تحت الجلد. توخي الحذر و استخدم الكثير من المواد الزلقة عند إزالة الطوق الذى يقوم بدعم القضيب.
- ❗ لا تستخدم أى زيوت قائمة على النفط مثل الفازلين، لأنها سوف تكون ضارة للخواتم المساعدة للانتصاب وغيرها من المواد مثل النوع المطاطى من الواقي الذكري. فقط قم باستخدام المواد الزلقة التى تدوب في الماء.

زر التحكم في الهواء الفراغى و انشاء بيئة فراغية

ينبغي أن يصبح قضيبك منتصب وبلا ألم من 10 حتى 90 ثانية. قد تشعر ببعض الضغط عندما يبدأ قضيبك بالانتصاب و هذا بسبب الهواء الفراغى، وهذا أمر طبيعي. إذا كنت تشعر بالآلم طفيف عندما يبدأ قضيبك بالانتصاب، قم بخفض مستوى الهواء الفراغى عن طريق الضغط على زر التحكم في الهواء الفراغى. (مع القليل من الممارسة سوف تعرف ما هو مستوى الهواء الفراغى الصحيح بالنسبة لك، بحيث يمكنك الحصول على الانتصاب الكامل).

يمكنك الضغط على زر التحكم في الهواء الفراغى لخفض مستوى الهواء الفراغى. إذا تم الحصول على الكثير من الهواء الفراغى، فإنه يمكن بسهولة زيادة الهواء حول القضيب بالضغط على زر التشغيل.


لإزالة القضيب من الاسطوانة، اضغط على زر التحكم في الهواء الفراغى الى أن يتم التخلص من الهواء الفراغى نهائيا. يمكنك بعدها إزالة الاسطوانة من قضيبك.

معظم الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي سوف يفقدون الانتصاب في وقت قريب بعد إزالة القضيب من الاسطوانة الخاصة بالجهاز. ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق تركيب الخاتم المساعد للانتصاب بشكل صحيح. من ناحية أخرى، إذا وجدت أنك تملك ما يكفي من الانتصاب للجماع، قد لا تحتاج إلى استخدام الخاتم المساعد على الانتصاب. قد تكون قادرا على التمتع بحياة جنسية جيدة أثناء استخدام الجهاز فقط وبدون الخواتم المساعدة على الانتصاب.

إزالة الخاتم المساعد على الانتصاب من قضيبك

تحذير: لا ترتدى الخاتم المساعد على الانتصاب أكثر من 30 دقيقة

قم بإزالة الطوق عن طريق سحب الخاتم من الجانبين الى الخارج كما موضح في الصورة. سوف يمتد الخاتم، مما يسمح للدم بالتدفق من القضيب. يمكنك بعدها سحب الخاتم المساعد على الانتصاب بسهولة. لمنع الصراع بين الخاتم المساعد على الانتصاب مع شعر العانة، حاول أن تستخدم مادة زلقة على الشعر قبل استخدام الخاتم.

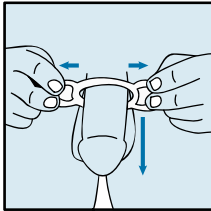

مستحسن

لجركلأخص

قوىاذغىأالمكبلأ



Andropharma Vigor

علاج ضعف الانتصاب:

- 1- قم بتليين قضيبك، عند منطقة شعر العانة والاسطوانة (المنطقة التي تأتي في اتصال مع حلقات الاسناد) بالمادة الزلقة. هذا يساعد على تكوين هواء فراغي جيد ويمنع القضيب من الالتصاق على جدران الاسطوانة.
- 2- قم بادخال القضيب في الاسطوانة وابدأ عملية ضخ الهواء الفراغي. قم بتشغيل المحرك بالضغط على زر التشغيل. أضغط على الزر لمدة 10 ثوان. واصل الضغط على الزر حتى تصل الى هواء فراغي كاف. استخدام أقل قدر من الهواء الفراغي للحصول على الانتصاب.
- 3- عند تحقيق الانتصاب المطلوب، قم بنقل الخاتم المساعد للانتصاب من الاسطوانة الى قاعدة القضيب بواسطة أطراف أصابعك. تأكد من تركيب الخاتم المساعد على الانتصاب جيدا. يمكن إطلاق أي هواء فراغي متبقى بالضغط على زر التحكم في الهواء الفراغي. قم بالتجربة عدة مرات دون استخدام الخاتم المساعد على الانتصاب.

إعادة تأهيل القضيب:

- 4- قد يساعد الاستخدام العلاجي لـ **Androvacuum®** مرة واحدة يوميًا، من 5 إلى 7 مرات في الأسبوع، في الحفاظ على طول القضيب وتمدد الشرايين وأنسجة القضيب المؤكسجة. يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم لـ **Androvacuum®** إلى تعزيز وظيفة الانتصاب الكاملة. لا تحتاج إلى استخدام حلقات مساعد الانتصاب. أثناء جلسة إعادة تأهيل القضيب، نوصيك بضرورة تحقيق 5 انتصاب أو استخدام **Androvacuum®** لمدة 5-10 دقائق على الأقل. لا تقم أبدا بتشغيل المحرك إلى درجة التسبب في الألم.

ملاحظة 1: بعد استخدام الجهاز لمدة 30 إلى 60 يوم، قد تحتاج إلى إعادة التأكد من أحجام الخواتم المستخدمة. على سبيل المثال، قد تجد أنك أصبحت الآن قادر على استخدام خواتم أكبر التي قد تساعد على زيادة الراحة.


ملاحظة 2: بعض الأرواح قد يفضلوا أن يوقفوا المعاشرة و أن يقوم الرجل باستخدام **Androvacuum®** لاحداث انتصاب ثم يكملوا مرة أخرى.

ملاحظة 3: إذا أراد الرجل ارتداء الواقي الذكري فيفضل بعد حدوث الانتصاب.


ملاحظة 4: بعد الانتهاء من استخدام الجهاز، يمكنك القيام بغسيل الخاتم المساعد على الانتصاب وحلقة الاسناد والاسطوانة بالماء والصابون ثم تجفيفها. تأكد أن الخاتم المساعد على الانتصاب خالي من الهواء ومغلق بإحكام لتعيش معك مدة أطول. لا تضع الجهاز بأكمله في الماء.

تنبيه


عند وضع الاسطوانة على رأس المضخة، لا تحكم الطلق عليها بشدة. فقط قم بلقها 1/4 دائرة. التواءها أو لفها سوف يؤدي الى كسر الجهاز. وإذا حدث هذا فإن الضمان على الجهاز لا يتكفل بهذه النقطة.

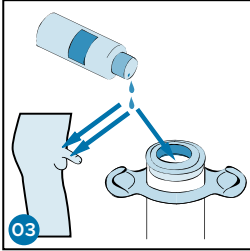


قم بتليين قضيبك و ما بداخل الاسطوانة وشعر قضيبك.

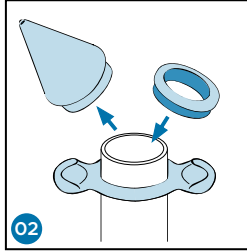


قم بإزالة الأداة المخروطية و قم بوضع حلقات الأسناد.

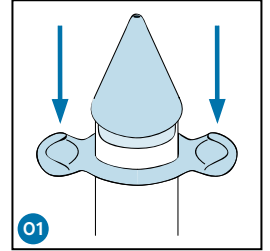


حرك الخاتم المساعد على الانتصاب الى الأسفل حتى نهاية الاسطوانة.

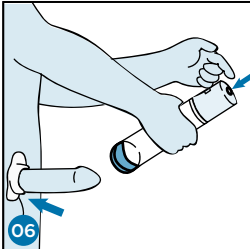


عند حدوث الانتصاب، حرك الخاتم المساعد على الانتصاب ناحية قاعدة القضيب بمجرد نقل الخاتم الى هناك تكون جاهزا للبدء.

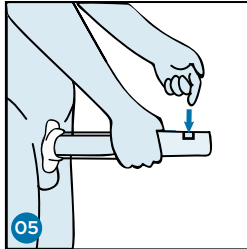


ابدأ عملية ضخ الهواء الفراغي، اعتماداً على الطراز الإلكتروني أو اليدوي

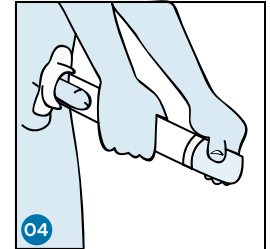


ضع قضيبك بداخل الاسطوانة

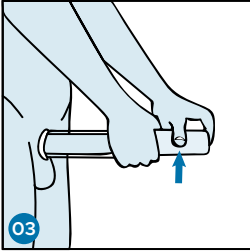


03
قم بتشغيل المحرك لمدة 10 ثوان ثم توقف لمدة 5 إلى 10 ثوان لخلق بيئة فراغية. كرر هذه العملية حتى تحصل على الانتصاب الكامل.

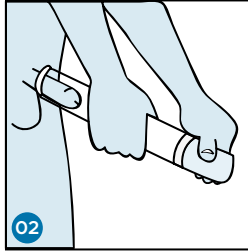


02
ضع قضيبك بداخل الأسطوانة. بالنسبة للطرز اليدوي ، أمسك المحرك بيدك. وقم بحركات لأعلى ولأسفل. بالنسبة للنموذج الإلكتروني ، اتبع الخطوة 3.

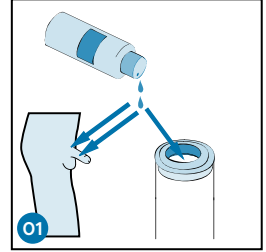


01
قم بتليين قضيبك و ما بداخل الأسطوانة باستخدام الزيت المرفق مع الجهاز.

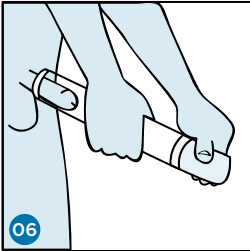

06
انتظر حتى يعود قضيبك الى حالة الارتخاء وكرر عملية البدء والتوقف مرة أخرى حتى يصل القضيب مرة أخرى إلى الانتصاب الكامل.

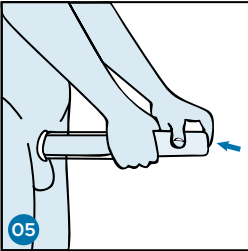

05
بعد 30 ثانية. قم بإزالة الضغط داخل الأسطوانة عن طريق الضغط على الزر الأحمر.

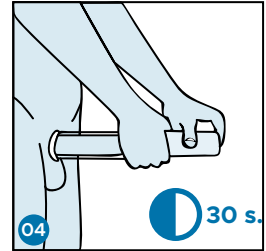

04
عندما تصل إلى الانتصاب الكامل، انتظر 30 ثانية قبل إطلاق الهواء الفراغي قد تشعر ببعض الضغط على قضيبك وهذا أمر طبيعي ومتوقع.

المشكلة	السبب الأرجح للمشكلة	العلاج	الملاحظات
لا يوجد انتصاب	لا يوجد هواء فراغى بسبب تسرب هوائى	استخدم زيت أكثر، قم بزيادة الضغط على الجسم وتأكد من عدم وجود تسرب هوائى	دائما ما تحدث هذه المشكلة بسبب عدم الخبرة فى استخدام الجهاز و دائما ما تنتهى هذه المشكلة اذا استخدمت الجهاز جيدا و بانتظام.
تنصاب جزئى	تمرينات غير كافية للجهاز	قم بتمرينات أكثر للجهاز	دائما ما تنتهى هذه المشكلة اذا استخدمت الجهاز جيدا و بانتظام
فقدان الانتصاب بسرعة (فى أقل من 5 دقائق)	فقدان الهواء الفراغى بسبب تسرب الهواء، تليين غير جيد أو استخدام حلقة بمقاس أكبر	استخدم زيت أكثر، زيادة الضغط على الجسم وتأكد من عدم وجود تسرب هوائى و قم بازالة الحلقة جيدا	تتطلب أن تقوم باختبار أكثر من مقاس للحلقات، استشر طبيبك اذا احتجت الى دعم أو مساعدة
شد الجلد الخاص بالقضيب	وجود بعض من زيت الاحكام على جلد القضيب، طريقة ضخ غير جيدة و عدم الدراية بالجهاز	قم بازالة الزيت من على جلد القضيب، استمر فى التريبات على الجهاز و قم بتوجيه الجهاز الى أسفل.	دائما ما تنتهى هذه المشكلة اذا استخدمت الجهاز جيدا و بانتظام
عدم راحة أو ألم أثناء الضخ	الضخ بسرعة عالية و شد الجلد الخاص بالقضيب	ضخ أبطأ و استمر فى استخدام الجهاز	دائما ما تنتهى هذه المشكلة اذا استخدمت الجهاز جيدا و بانتظام
مشاكل من الخاتم المساعد على الانتصاب	استخدام مقاس صغير من الخاتم و القلق	استخدم خاتم أكبر و استمر فى استخدام الجهاز	دائما ما تنتهى هذه المشكلة اذا استخدمت الجهاز بانتظام
مشكلة خلال الجماع الجنىسى	تليين غير كافى و ضغط على مناطق حساسة	تليين أكثر و تغيير الأوضاع الجنسية	
مشكلة فى القذف	فترات طويلة بدون ممارسة الجنس و العدوى و تورم فى غدة البروستاتا	استمر فى استخدام الجهاز	دائما ما تنتهى هذه المشكلة اذا استخدمت الجهاز بانتظام، اذا حدث ألم أو عدم ارتياح، استشر طبيبك
احمرار و كدمات	ضخ سريع جدا	ضخ أبطأ أو عدد ضخات أقل	استشر طبيبك اذا تكررت هذه المشكلة
قضيب بارد (لك و لزوجتك)	انقباض تدفق الدم إلى القضيب و عدم التليين	قم بغسل زيت التليين أو استخدم زيت دافئ، للتليين	
القضيب مترخى و مترهل	انقباض تدفق الدم إلى القضيب	اذا كان فى الإمكان، استخدم الجهاز بعد احداث انتصاب جزئى فى القضيب	

المخاطر المحتملة التي تم تحديدها في الأدبيات مؤقتة وتشمل: كدمات القضيب وآلم القضيب وخدر القضيب وعدم القدرة على القذف.

❖ سوف تشعر ببعض الضغط أثناء تطبيق القوة الفراغية. هذه ليست ضارة، إذا كنت تشعر بعدم الراحة، قد يكون إشارة إلى أنك كنت تضح بسرعة كبيرة جداً. بمجرد الضغط على زر التحكم في الهواء الفراغي، ثم انتظر لحظة وابدأ من جديد.

❖ قضيبك يصبح أزرق اللون قليلاً بعد استخدام الخاتم المساعد على الانتصاب. قد يكون هذا رد فعل طبيعي نتيجة لزيادة تدفق الدم في قضيبك. وينبغي أن يختفي الأزرقاق عند إزالة طوق الدعم.

❖ تواجه بعض النمشات (بقع حمراء صغيرة تحت الجلد) أو كدمات لقضيبك عندما تبدأ باستخدام الجهاز لأول مرة. قد يحدث ذلك عن طريق وضع القضيب تحت ضغط فراغي كبير لفترة طويلة جداً، وبسرعة كبيرة، أو بعد فترة طويلة من عدم وجود الانتصاب. إذا حدث هذا، توقف عن استخدام الجهاز حتى تختفي البقع أو الكدمات تماماً، وذلك في حوالي 5 إلى 7 أيام.

❖ أنت أو زوجتك قد تلاحظوا وجود انخفاض طفيف في درجة حرارة القضيب (يصبح بارد). هذا أمر طبيعي وليس ضار بالمرءة. وهو استجابة طبيعية لانخفاض تدفق الدم الناتج عن طوق الدعم.

❖ الانتصاب يتأثر ويتوقف. قد يرقد القضيب على قاعدته عندما توضع الحلقات. إذا حدث هذا، قد تجد أنه من الضروري تغيير الأوضاع الجنسية مع زوجتك أثناء الجماع.

❖ السائل المنوي لا يتدفق عند نقطة الذروة. قد يؤثر ضغط الخواتم المساعدة على الانتصاب على عملية القذف وهذا لا يحضر، ولن يؤثر في ذروتها. قد يتدفق السائل المنوي الخاص بك عند إزالة الخاتم. الخاتم المساعد على الانتصاب لا يعتبر وسيلة من وسائل منع الحمل، وينبغي ألا تستخدم لتفادي الحمل.

❖ استطوانة قضيبك قد تؤدي إلى التكتيف في الداخل. هذا ببساطة نتيجة للتفاعل بين حرارة الجسم والزيت المستخدم. "الضباب" يمكن خفضه عن طريق تشغيل الماء الدافئ على الاستطوانة ثم التجفيف قبل استخدامها.

❖ استخدام جهاز الـ **Androvacuum®** قد يؤدي إلى كدمة أو كسر في الأوعية الدموية إما تحت سطح الجلد أو داخل الهياكل العميقة من القضيب أو كيس الصفن، مما يؤدي إلى نزيف أو تورم. لا تقلق إذا لاحظت بعض الكدمات في القضيب، أو بقع حمراء صغيرة تحت الجلد. هذا من المرجح أن يحدث إذا لم تمارس الجنس لبعض الوقت. يجب التوقف عن استعمال الجهاز حتى يتم حل المشكلة في (5 أو 6 أيام). عندما تعود إلى استخدام الجهاز مرة أخرى، احرص على عدم تطبيق قوة فراغية التي قد تتسبب في خدر أو تورم الحذر و استخدم الكثير من المواد التي تنوب في الماء عند إزالة الخاتم المساعد على الانتصاب.

❗ إذا كان لديك دلائل على ضعف الانتصاب ، (أي أنك غير قادر على الحصول على الانتصاب الكافي لممارسة الجنس)، فم باستشارة طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز لتجنب التأخر في اكتشاف الأسباب المؤدية الى هذا السبب، مثل مرض السكر، وتصلب الشرايين، وتليف الكبد والفشل الكلوي المزمن، أو الإدمان الكحول.

❗ لا تتردى الخواتم المساعدة على الانتصاب لمدة أطول من 30 دقيقة. حيث أنها من الممكن أن تسبب الألم وكدمات أو التسبب بأذى دائم للقضييب. استشر طبيبك إذا حدثت أي مشاكل وتوقف عن استخدام الجهاز إذا استمرت المشاكل.

❗ إذا كنت لا تتبع الإرشادات في هذا الكتيب، فإنه قد يسبب الإصابة لك.

Androvacuum® لن يقوم بعلاج مشاكل العلاقة الجنسية مثل انخفاض الدافع و الشهوة الجنسية، و سرعة أو عدم وجود القذف.

❗ إذا كان لديك مرض الخلايا المنجلي، أو انتصاب قضيبك لفترات طويلة، أو نتناول كميات كبيرة من الأسبرين أو الأدوية التي تزيد من سيولة الدم، لا تستخدم جهاز ال **Androvacuum®** دون استشارة الطبيب.

❗ قد يؤدي سوء استخدام **Androvacuum®** أو حلقات مساعد الانتصاب الخاصة به إلى تفاقم الحالات الطبية الموجودة بالفعل مثل مرض بيروني (وهي حالة تسبب تشوه أو انحناءات غير طبيعية للقضييب المنتصب)، والانتصاب لفترات طويلة، وانسداد مجرى البول (المسالك البولية).

❗ يمكن أن يؤدي سوء استخدام جهاز **Androvacuum®** أو حلقات مساعد الانتصاب إلى تورم القضيب أو إصابة خطيرة ودائمة للقضييب.

❗ قد يؤدي الاستخدام المتكرر لحلقات مساعد الانتصاب إلى حدوث كدمات في قاعدة القضيب (حيث يلتقي عمود القضيب مع منطقة العانة) أو ظهور بثور دموية أو ألم.

❗ ينصح بتوخي الحذر عند استخدام **Androvacuum®** بعد إزالة دعامة القضيب بسبب احتمال حدوث تندب أو ضعف لاحق. استخدم المكثسة الكهربائية تدريجياً. اجبث عن وجود كدمات أو تشوه في القضيب.

❗ لا يمكن استخدام الجهاز مع الرجال الذين يعانون من اضطرابات النزيف أو فقر الدم المنجلي أو القساح.

PORTFOLIO



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).