

Instructions for Use (IFU)

1



IFU LANGUAGES

www.androvacuum.com/ifu/



VIDEOS

www.andromedical.com/videos




FAQs – QUESTIONS

www.androvacuum.com/faqs




MEDICAL CONSULTATION (online, chat & email)

www.androclinic.com

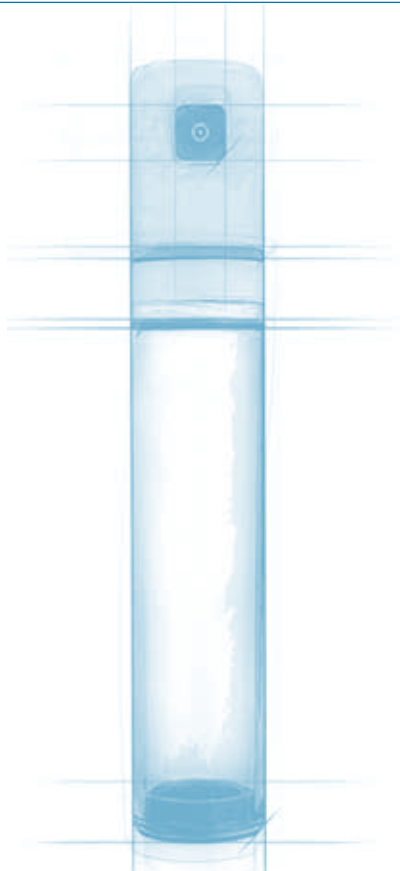

01

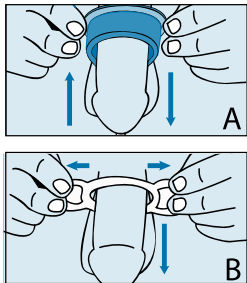

Please, choose the components according to the therapy and your penis size. For erectile dysfunction treatment, choose the cushioning ring (fig. A) and the constriction ring (fig. B) which fits your penis width better.

Bitte wählen Sie die zu Ihrer Therapie und Penisgröße passenden Bestandteile. Für erektile Dysfunktion, benutzen Sie den gepolsterten Ring (Abb. A) und den Einschnürungsring (Abb. B) der sich am Besten an Ihren Penis anpasst.

Sélectionner les composants suivants la thérapie à suivre et la taille de son pénis. Pour le traitement de la dysfonction érectile, sélectionner l'anneau amortisseur (image A) et l'anneau de constriction (figura B) qui s'adaptera mieux a la taille de son pénis.


Selecione los componentes según la terapia a seguir y el tamaño de su pene. Para el tratamiento de la disfunción eréctil, seleccione el anillo de amortiguación (figura A) y el anillo de constricción (figura B) que más se adapte al grosor de su pene

Selezionate i componenti in base alla terapia da seguire e alla dimensione del vostro pene. Per il trattamento della disfunzione erettile, selezionate l'anello di ammortizzazione (fig. A) e l'anello di costrizione (fig. B) che si adatti meglio alla dimensione del vostro pene.

治療のタイプとペニスのサイズにあった付属品を選んでいきます。
勃起不全の治療:ゴムバッキン(図A)と、ペニスの太さに合ったシリコンバン
ド(図B)を選んでください。

من فضلك ، اختر المكونات حسب العلاج وحجم قضيبك . علاج
ضعف الانتصاب ، اختر حلقة التوسيد (الشكل أ) وحلقة الانقباض
(الشكل ب) التي تناسب عرض قضيبك بشكل أفضل

02

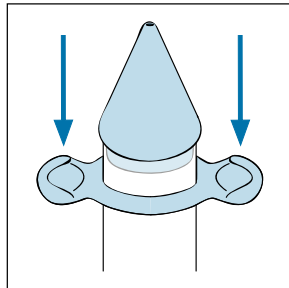

Fit the cone at one end of the cylinder. Apply lubricant gel to the cone of the cylinder and slide on the constriction ring until the ring snaps on to the cylinder.

Den Kegel auf ein Ende des Zylinders stecken. Gelschmiermittel in den Kegel am Zylinder auftragen und den Schließring aufziehen bis der Ring um den Zylinder aufliegt.

Fixez le cône à une extrémité du cylindre. Appliquez du gel lubrifiant sur le cône du cylindre et faites glisser sur lui l'anneau de constriction jusqu'à ce que l'anneau entoure le cylindre transparent.

Encaje el cono en un extremo del cilindro. Aplique gel lubricante en el cono del cilindro y deslice por él el anillo de constricción hasta que el anillo encaje en el cilindro.


Fissare il cono ad una estremità del cilindro. Applicare lubrificante sul cono ed introdurre l'anello di costrizione facendolo scorrere attraverso il cono fino a raggiungere il cilindro.

シリンドーにコーン型のアダプターを取り付け、潤滑剤(ジェル)を塗り、シリコンバンドを滑らすようにしてシリンドーにはめます。

ضع المخروط في أحد طرفي الأسطوانة. ضع هلام التشحيم على
مخروط الأسطوانة وحركه على حلقة الانقباض حتى تستقر الحلقة
على الأسطوانة



03

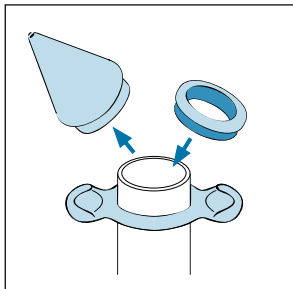

Remove the cone of the cylinder. Snap rings in place and place in the selected cushioning rings after applying Gel Lubricant.

Den Kegel vom Zylinder entfernen und an dessen Stelle die gewählten Dämpferringe anbringen und Gelschmiermittel auftragen.

Retirez le cône du cylindre et mettez à sa place, le ou les anneaux amortisseurs choisis et appliquez du gel lubrifiant sur eux.


Retire el cono del cilindro. Encaje en su lugar los anillos amortiguadores seleccionados y aplique gel lubricante sobre los mismos.

Rimuovere il cono del cilindro. Introdurre nel cilindro gli anelli ammortizzatori scelti e applicare gel lubrificante sugli stessi.

シリンダーからコーン型のアダプターを取り外し、シリンダーにゴムパッキンをはめ込み、潤滑剤(ジェル)を塗ります。

قم بإزالة مخروط الأسطوانة. ضع الحلقات في مكانها وضعها في حلقات التوسيد المحددة بعد وضع مادة التشحيم الهلامية

04

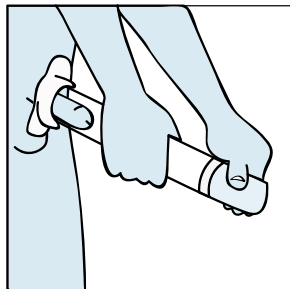

On the other end of the cylinder, snap in the electric motor, when fitted correctly there will be no movement and there will be a perfect seal.

Den Elektromotor auf das andere Ende des Zylinders stecken. Das Gerät ist dann richtig verschlossen wenn es nach dem Einschalten keine Bewegung vorweist.

À l'autre extrémité du cylindre, enclenchez le moteur électronique. Vous savez que le moteur est correctement enclenché s'il n'y a pas de jeu entre les pièces.

En el otro extremo del cilindro, encaje el motor electrónico. Sabrá que el motor ha encajado apropiadamente si no tiene holgura.


Montare all'altra estremità del cilindro, il motore elettronico. Sarà correttamente montato se non ci sarà movimento e aderirà perfettamente.

シリンダーのゴムパッキンが付いていない方に、モーターのついた電源装置をはめ込みます。
(しっかりとほめ込めているかを確認するようにしてください。)

على الطرف الآخر من الأسطوانة ، قم بإدخال المحرك الكهربائي ، عندما يتم تركيبه بشكل صحيح لن تكون هناك حركة وسيكون هناك ختم مثالي



05

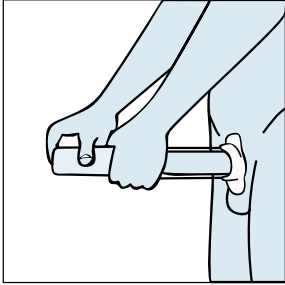

Insert the penis into the cylinder where the ring buffers are in place, insert the penis all the way until the pubis. I may be easier to create a vacuum if the hair is trimmed or shaved on the pubis where it is in contact with the cylinder.

Schieben Sie den Penis bis an Ihr Schambein ein. Wenn Sie an dieser Stelle Ihr Schamhaar rasieren kann es leichter sein, ein Vakuum herzustellen.

Insérez le pénis dans le cylindre jusqu'à l'appuyer sur le pubis. Il sera plus facile de créer un vide si la zone qui soutient le cylindre est épilée.


Introduzca el pene por la parte del cilindro con los anillos amortiguadores, hasta apoyarlo en su pubis. Puede resultar más fácil crear el vacío si se recorta el vello de la zona en la que se apoya el cilindro.

Inserire il pene attraverso il cilindro nella parte dove ci sono gli anelli ammortizzatori finché il cilindro non arrivi a toccare il pube. Può essere più facile creare il vuoto, se i peli sono tagliati nella zona che sostiene il cilindro.

シリンドーをペニスにかぶせ、ペニス全体が入ったら、しっかりと恥骨側に押さえます(シリンドーが当たる部分の陰毛を手入れすると、より簡単にアンドロバキュームを使用いただけます)。

دخل القضيب في الاسطوانة حيث توجد مخازن الحلقة، أدخل القضيب بالكامل حتى العانة. قد يكون من الأسهل صنع فراغ إذا تم قص الشعر أو حلقه في منطقة العانة حيث يكون ملائماً للأسطوانة

06

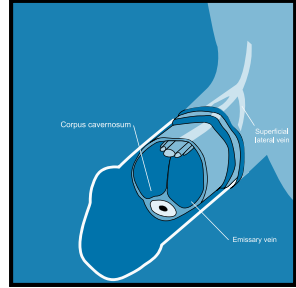

With one hand, hold the cylinder tight against the pubis, with the other hand press the motor button and start the motor. For manual model, grasp the motor with your hand and make up-and-down movements.

Halten Sie den Zylinder mit einer Hand gegen Ihr Schambein und betreiben Sie den Motor mit der anderen. Beim manuellen Modell fassen Sie den Motor mit der Hand und machen Auf- und Abwärtsbewegungen.

D'une main, maintenez le cylindre contre votre pubis et de l'autre actionnez le moteur électronique. Pour le modèle manuel, saisissez le moteur avec votre main et faites des mouvements de haut en bas.


Con una mano sujete el cilindro contra su pubis y con la otra accione el motor electrónico. Para el modelo manual, agarre el motor con la mano y haga movimientos hacia arriba y hacia abajo.

Con una mano, tenere il cilindro contro il pube e con l'altra, azionare il motore elettronico. Per il modello manuale, afferrare il motore con la mano ed eseguire movimenti di salita e discesa.

片手は器具を恥骨側に押さえるようにし、もう一方の手で、電源ボタンを操作するようにします(圧力が急激にかかることはありませんので、ご注意ください)。手動式の場合は、手でモーターをつかみ、上下に動かしてください。

یابدی یدیک، امسک الأسطوانة بإحكام على العانة، وباستخدام اليد الأخرى، اضغط على زر المحرك وإبدأ تشغيل المحرك. بالنسبة للطرز الیودی، امسک المحرك یدیک وقم بحركات لأعلى ولأسفل

07

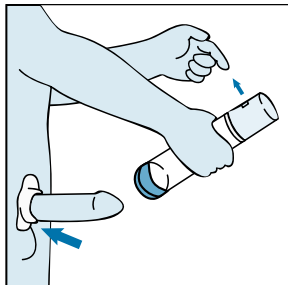

After achieving a full erection, slide the correct size of constriction ring down the outside of the cylinder and set at the base of the penis. Stop the vacuum by pressing the red button on the electric motor to release air back into the cylinder.

Nachdem Sie eine Erektion erreicht haben schieben sie den Schließring vom Zylinder über den Penis bis an dessen Anschlag. Lassen Sie die Luft in den Zylinder fließen indem Sie auf den roten Knopf am Elektromotor drücken und nehmen Sie den Zylinder ab.

Après avoir obtenu une érection, faites glisser l'anneau de constriction depuis le cylindre jusqu'à la base de la verge. Une fois que l'anneau est en place sur la verge, libérez l'air du cylindre en appuyant sur le bouton rouge du moteur électronique et retirez le cylindre.


Tras lograr la erección, deslice el anillo de constricción desde el cilindro y ajústelo en la base del pene. Libere el aire del cilindro pulsando el botón rojo del motor electrónico y retire el cilindro.

Dopo aver raggiunto l'erezione, far scorrere l'anello di costrizione dal cilindro fino alla base del pene. Liberate l'aria del cilindro premendo il tasto rosso del motore elettronico e rimuovere il cilindro.

勃起したら、シリンドーにつけてある、シリコンリングをペニスの根元に滑らすように移します。シリコンリングをペニスの根元につけたら、電源装置についている赤いボタンを押し、シリンドーの中に空気を入れ、器具を取り外すようにしてください。

بعد تحقيق الانتصاب الكامل ، حرك الحجم الصحيح لحلقة الانقباض أسفل خارج الأسطوانة واضبطها عند قاعدة القضيب. أوقف الفراغ بالضغط على الزر الأحمر على المحرك الكهربائي لإخراج الهواء مرة أخرى إلى الأسطوانة

08

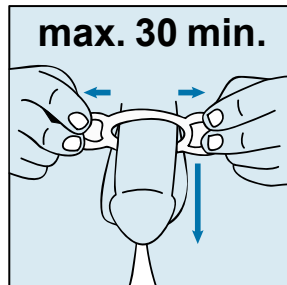

The constriction ring will keep blood in the penis and therefore hold the erection. It can be worn for up to 30 minutes.

Der Schließring wird die Erektion und die Durchblutung aufrechterhalten. Er darf höchstens 30 Minuten lang benutzt werden.

L'anneau de constriction maintiendra l'irrigation et l'érection. Il peut être porté jusqu'à 30 minutes au maximum.

El anillo de constricción mantendrá la irrigación y la erección. Puede llevarse puesto 30 minutos como máximo.

L'anello di costrizione manterrà l'irrigazione e l'erezione. Può essere indossato fino a 30 minuti al massimo.

シリコンリングで、陰茎内に血液を送りこんだ状態を保つことができます。30分以上の連続使用は控えるようにご注意ください。

ستحافظ حلقة الانقباض على الدم في القضيب وبالتالي تحافظ على الانتصاب. يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة





Bedienungsanleitung

Vor Gebrauch Lesen

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. QR-CODES UND LINKS	1
2. SCHNELLER LEITFADEN	2
3. ÜBER Androvacuum®	7
4. BESTANDTEILE	8
5. MEDIZINISCHE HINWEISE	9
6. BESTANDTEILE AUSWÄHLEN	10
7. ANWEISUNG ZUR SYSTEMBENUTZUNG	11
8. GEBRAUCHSANWEISUNG	13
9. GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR EREKTILE DYSFUNKTION	14
10. GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE REHABILITATION DES PENIS	15
11. HÄUFIGE PROBLEME UND LÖSUNGEN	16
12. VORSICHTSMASSNAHMEN	17
13. PORTFOLIO	19

BEMERKUNG: Androvacuum® hat die folgenden Modelle: **Androvacuum® Premium** (mit automatischem Motor, Modell Deluxe) und **Androvacuum® Manual** (mit manuellem Motor, Modell Pro).

Die Gebrauchsanweisung ist für alle Modelle gleich, mit kleinen Abweichungen.

Androvacuum® ist eine medizinisch geprüfte, erstklassige Penispumpe. Sie ist eine nicht invasive, sichere und wirksame Lösung, um eine Rehabilitation des Penis Behandlung durchzuführen, eine sofortige Erektion ohne Medikamente hervorzurufen und Erektionsstörungen entgegenzuwirken.


Ergonomisch entworfen und hergestellt, besteht **Androvacuum®** aus einem Zylinder der über dem Penis positioniert werden kann. Ferner verfügt er über einen elektronischer oder manueller Motor, der einen Sog erzeugt und somit eine Vakuumumgebung um den Penis herum hervorruft und Blut in den Penis zieht, der ihm so dabei hilft zu versteifen.

Bitte vor dem Gebrauch lesen, (nur bei Modell mit Batterie):

Schritt 1. Um das Batteriefach zu entfernen drücken Sie auf den abgebildeten Pfeil und drücken ihn nach oben (siehe Fig. 1A).

Schritt 2. Legen Sie die Batterien in das dafür vorgesehene Fach.

Schritt 3. Schieben Sie die Schutzvorrichtung wieder an die ursprüngliche Stelle.

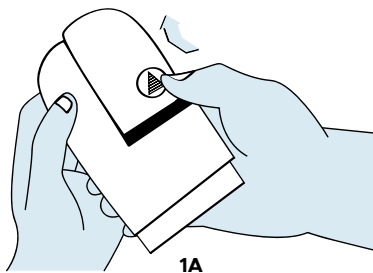


1A



Anmerkung: Lesen Sie diese Anweisung gründlich und vollständig bevor Sie den **Androvacuum®** benutzen. Falls die Anweisungen nicht befolgt werden, wird der **Androvacuum®** nicht funktionieren.

Prüfen Sie nach dem Einlegen der Batterien, ob der Motor ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie den Zündknopf fest drücken.

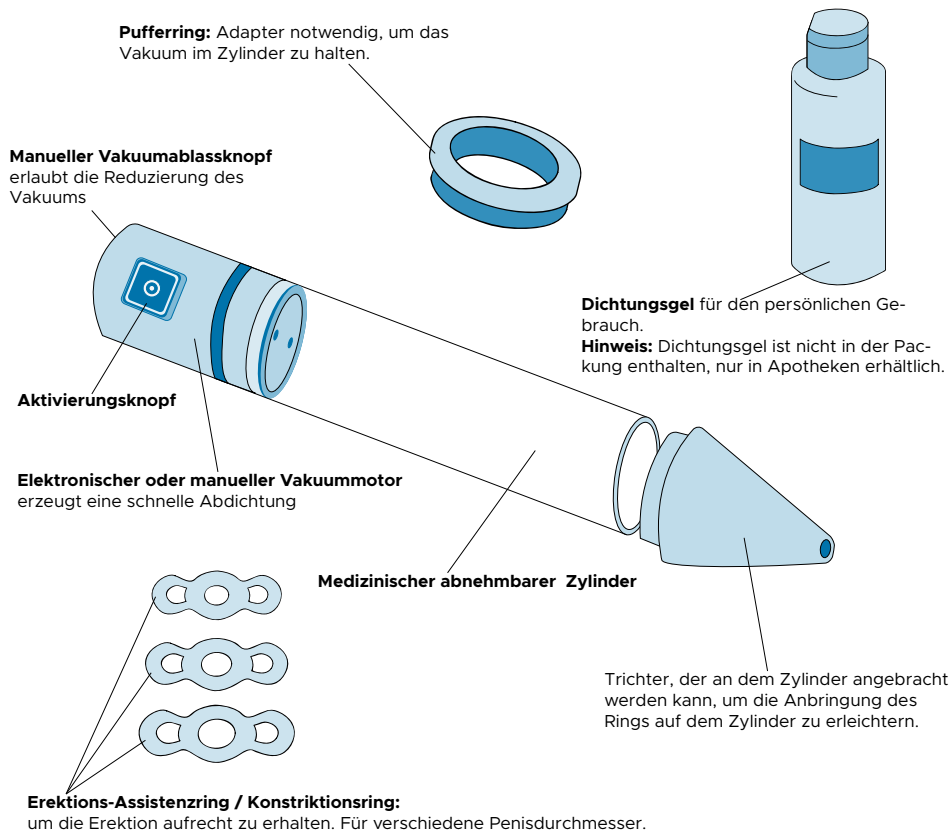

Erektionsstörungen

Androvacuum® wurde für die Behandlung von Erektionsstörungen entwickelt. Es wird davon ausgegangen, dass Millionen von Männern betroffen sind. Erektionsstörungen können ein Zeichen für die Existenz von gravierenden Nerven- bzw. Blutflussstörungen sein. Erektionsstörungen können als Nebenwirkungen während der Einnahme von Medikamenten auftreten. Wenn Sie hiervon ausgehen, sollten Sie einen Arzt konsultieren. Sie sollten die Medikamentendosierung niemals ändern oder beenden, ohne vorher einen Arzt aufgesucht zu haben. Ferner können Zigaretten-, Alkohol- oder Drogenmissbrauch zu Erektionsstörungen führen.

Die Therapie von Erektionsstörungen mit **Androvacuum®** wird empfohlen bei:

- Männern die aufgrund von Stress, Aufregung oder Angst teilweise keine volle Erektion erhalten.
- Männern die leicht eine Erektion bekommen, diese aber nicht aufrecht erhalten können.
- Männern jeden Alters mit Erektionsproblemen. Sogar für diejenigen, die für mehrere Jahre keine Erektionen mehr hatten.
- Männern mit Erektionsproblemen, die keine ED-Medikamente, aufgrund von Herzbeschwerden, nehmen dürfen.

Rehabilitation des Penis

Die Vakuumumgebung erhöht den Blutfluss im Penis. Hierdurch wird dieser steif. Mit der Zeit passt sich der Corpus Cavernosum dem erhöhten Blutfluss, der durch das Vakuum hervorgerufen wird, an. Somit erzeugt der Penis den notwendigen Blutfluss selbst, auch wenn vorher keine Vakuumumgebung hervorgerufen wird. Dies bedeutet, dass das Geschlechtsorgan schneller und intensiver auf sexuelle Stimulation reagiert. Ein länger anhaltendes Erektionsproblem kann zur Verkleinerung des Penisgewebe und einer Reduzierung des Blutflusses im Penis führen („Non-use Atrophy“). Ein regelmäßiger Gebrauch von **Androvacuum®** wird die Anzahl nächtlicher Erektionen verdoppeln, die Penisverkleinerung beheben, den Blutfluss im Penis erhöhen und einen guten gesundheitlichen Zustand des Penis unterstützen. **Androvacuum®** kann dabei helfen das Gewebe zu seiner normalen Größe innerhalb von nur 4 Wochen auseinander zu ziehen und den Blutfluss im Penis positiv beeinflussen. Zur selben Zeit, werden Sie eine volle Steifheit und eine Unterstützung der Gesundheit des Penis erhalten.

Penile Rehabilitationstherapie mit **Androvacuum®**, empfohlen für:

- Männern mit schwachen Erektionen.
- Männer, die eine schrittweise Abnahme ihrer Erektionen, aufgrund des Alterungsprozesses, eines trägen Lebens, Alkohol- oder Tabakgenusses oder einen hohen Cholesterin- oder Stresswerten feststellen können.
- Männern mit einem niedrigen Testosteronspiegel (TDS oder Hypogonadismus) und/oder die sich einer Hormonbehandlung unterziehen.
- Männer nach Prostatektomie, Prostataoperationen, Peyronie-Operationen oder Penisoperationen.


6 Bestandteile Auswählen

1. Beginnen Sie mit dem größten Konstriktionsring. Falls es Ihnen nicht möglich ist das Vakuum mit dem größten Ring aufrecht zu erhalten, nutzen Sie den nächst kleineren Erektion-Assistenz- und Pufferring, solange Sie in der Lage sind das Vakuum und die Erektion aufrecht zu erhalten.

2. Positionieren Sie den Zylinder (mit dem glatten Ende oben) auf einer flachen Oberfläche. Setzen Sie den Trichter auf die Zylinderöffnung.

3. Schmieren Sie die gesamte Trichteroberfläche mit dem Dämpfungsgel ein.


4. Packen Sie die beiden Schlaufen des Erektion-Assistenzring so wie dargestellt. Platzieren Sie Ihre Daumen neben den Trichter und ziehen Sie die rechte Seite nach unten. Hierbei sollte Ihr Daumen am Trichter entlang gleiten. Platzieren Sie den Erektion-Assistenzring nah des Zylinderanfangs, um sich so später leichter am Penisstamm anzubringen (versuchen Sie nicht den Ring ohne Trichter anzubringen. Er könnte reißen).

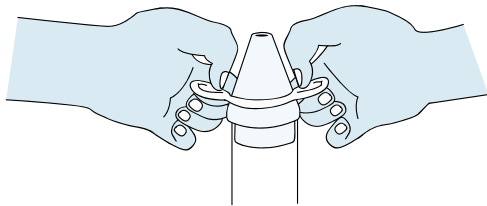

5. Entfernen Sie den Trichter und bringen Sie den Zylinder am Elektromotor an. Drehen Sie den Motor zu 90° bis dieser im Zylinder einhackt. Überschauben Sie den Motor nicht. Setzen Sie den Pufferring in das offene Ende des Zylinders.


6. Um ein Beschlagen des Zylinders zu vermeiden, sollten Sie vor dem Gebrauch warmes Wasser über diesen gießen.

ZUR ENTFERNUNG DREHEN UND ZIEHEN

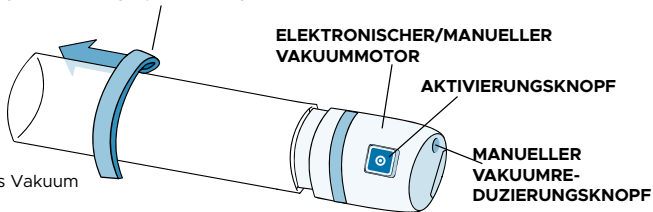

Pufferring adapter notwendig, um das Vakuum im Zylinder zu halten.

EREKTION-ASSISTENZRING

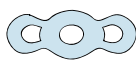

Einer der wichtigsten Schritte ist die richtige Anbringung des Erektion-Assistenzrings. Um Blut im Penis zu behalten, muss der Ring angenehm und stramm, nicht aber enger als nötig sitzen. Falls **Androvacuum®** bei Ihnen eine gute Erektion hervorruft, der Erektion-Assistenzring jedoch nach 5 Minuten lose am Penis sitzt, sollten Sie den nächst kleineren Ring tragen. Die maximale, empfohlene Tragezeit für den Erektion-Assistenzring beträgt 30 Minuten. Falls er länger getragen wird, kann es zu permanenten Schäden führen.

Nachdem die korrekte Ringgrösse ausgewählt wurde, wird es nur einige Minuten dauern eine Erektion hervorzurufen.

TRAGEN SIE DEN EREKTION-ASSISTENZRING NIE LÄNGER ALS 30 MINUTEN.

Androvacuum® wird Ihnen dabei behilflich sein, eine volle und befriedigende Erektion in den meisten Fällen hervorzurufen.

- Warten Sie mindesten 60 Minuten zwischen den Anwendungen.
- Schlafen Sie nicht, während des Tragens des Erektion-Assistenzring ein.
- Der Erektion-Assistenzring sollte nicht als Verhütungsmittel genutzt werden.
- Benutzen Sie den größten Erektion-Assistenzring mit dem die Erektion aufrecht erhalten werden kann.
- Benutzen Sie den Erektion-Assistenzring nicht unter Alkohol oder Drogeneinfluss.
- Ein häufiger Gebrauch des Erektion-Assistenzrings kann zu Blutergüssen an der Penisbasis führen (die Stelle an der der Penis auf den Körper trifft). Temporäre Nebenwirkungen können Blutergüsse und kleine rötliche Flecken unter der Haut sein. Seien Sie vorsichtig und benutzen Sie ausreichend wasserlösliches Gleitmittel um den Erektion-Assistenzring zu entfernen.
- Benutzen Sie keine auf Öl basierende Gleitmittel, wie z.B. Vaseline, da diese angreifend auf die Erektion-Assistenzringe und andere auf Latex basierende Materialien, wie z.B. Kondome, wirken können. Nutzen Sie nur wasserlösliche Gleitmittel und Dämpfungsgels.

MANUELLER VAKUUMREDUZIERUNGSKNOPF UND DIE ERZEUGUNG EINER VAKUUMUMGEBUNG

Ihr Penis sollte sich in 10 bis 90 Sekunden schmerzfrei aufrichten und versteifen. Es ist normal, wenn Sie bei der Versteifung des Penis einen gewissen Druck verspüren. Falls Sie einen leichten Schmerz bei der Erzeugung der Erektion verspüren, sollten Sie ein geringeres Vakuumniveau erzeugen. Dies können Sie durch das Drücken des manuellen Vakuumreduzierungsknopf erreichen. Mit ein wenig Übung sollten Sie schnell, das für Sie richtige Vakuumniveau finden, mit dem Sie im Stande sind eine volle Erektion zu erzeugen.


Um das Vakuum zu verringern kann der manuelle Vakuumreduzierungsknopf gedrückt werden. Falls das Vakuum zu sehr nachlässt, können Sie dieses einfach durch das Drücken des Aktivierungsknopfes wieder verstärken. Um den Zylinder vom Penis zu entfernen, drücken Sie den manuellen Vakuumreduzierungsknopf solange bis das Vakuum verschwunden ist. Hiernach können Sie den Zylinder problemlos entfernen.

Bei den meisten Menschen mit Erektionsstörungen wird die Erektion schnell nachlassen, nachdem der Zylinder entfernt wurde. Dies kann man verhindern, indem der Erektion-Assistenzring korrekt angebracht wird. Andererseits kann es auch möglich sein, dass der Erektion-Assistenzring nicht benötigt wird um eine ausreichende Erektion aufrechtzuerhalten und Geschlechtsverkehr zu haben. Es ist durchaus möglich ein erfülltes Sexualleben zu haben, indem Sie nur den **Androvacuum®**, nicht aber die Erektions-Assistenzringe benutzen.

ENTFERNUNG DES ERECTION-ASSITENZRINGS

Caution: Do not wear the Erection Assistant Ring for more than 30 minutes.

Entfernen Sie den Ring, indem Sie die äußeren Schlaufen nach außen ziehen. Der Ring wird sich so dehnen, was dazu führt, dass das Blut aus dem Penis fließt. Somit können Sie den Erektion-Assistenzring leicht entfernen. Um ein Verwickeln des Schamhaars mit dem Ring vorzubeugen, können Sie etwas Dichtungsgel in das Haar schmieren bevor Sie den Ring anbringen.

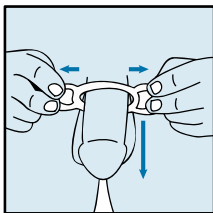

EMPFOHLEN

Men's health
supplement



Andropharma Vigor

FÜR EREKTILE DYSFUNKTION:

1. Schmieren Sie Ihren Penis, das Innere des Zylinders und den Schamhaarbereich (die Zone, die mit dem Erektion-Assistenzring in Kontakt kommt) mit dem Dichtungsgel ein. Dies hilft dabei ein dichtes Vakuum zu schaffen und verhindert, dass der Penis an der Zylinderwand kleben bleibt.
2. Positionieren Sie Ihren Penis in den Zylinder und beginnen Sie mit dem Vakuumaufbau. Bei elektronischen Motoren den Motor durch Drücken der Aktivierungstaste in Betrieb nehmen. Bei manuellen Motoren fassen Sie den Motor mit der Hand und führen Auf- und Abwärtsbewegungen aus, bis Sie genug Vakuum erhalten, um eine Erektion zu erreichen. Betätigen Sie den Knopf für ungefähr 10 Sekunden. Dies sollte ausreichend sein, um einen Sog zwischen dem System und Ihrem Körper zu erzeugen. Drücken Sie den Knopf solange, bis sich ein ausreichendes Vakuum aufgebaut hat. Nutzen Sie das geringste Vakuum, dass für die Erzeugung einer Erektion notwendig ist.
3. Nachdem sich die gewünschte Erektion eingestellt hat können Sie den zuvor am Zylinder angebrachten Erektion-Assistenzring an der Penisbasis anbringen. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Ring vollständig an der Penisbasis anbringen. Das Vakuum kann dann durch das Drücken des manuellen Vakuumreduzierungsknopfes entfernt werden. Üben Sie einige Male ohne den Erektion-Assistenzring zu benutzen.

FÜR DIE REHABILITATION DES PENIS:

4. Der tägliche, therapeutische Gebrauch von **Androvacuum®**, zwischen 5 und 7 Tage pro Woche, kann dabei behilflich sein die Penislänge beizubehalten, die Arterien zu erweitern und eine bessere Durchblutung des Penisgewebes fördern. Ein regelmäßiger Gebrauch von **Androvacuum®** kann eine vollständige erektile Funktion des Penis unterstützen. Es ist nicht notwendig die Erektion-Assistenzringe zu benutzen. Diese Penissteifheit ist für die Rehabilitation des Penis Therapie nicht notwendig. Während einer sexuellen Fitness Behandlung empfehlen wir Ihnen fünf Erektionen hervorzurufen oder den **Androvacuum®** für ungefähr 5-10 Minuten zu gebrauchen. Erzeugen Sie niemals ein so starkes Vakuum, dass sich Schmerzen einstellen.


- Anmerkung 1.** Nachdem Sie das System für 30 bis 60 Tage benutzt haben, ist es empfehlenswert die richtige Ringgröße zu kontrollieren. So kann es durchaus sein, dass ein Tragen des nächst größeren Rings für Sie angenehmer ist.
- Anmerkung 2.** Für einige Paare kann es empfehlenswert sein, den Geschlechtsverkehr zu unterbrechen und den **Androvacuum®** erneut zu benutzen.
- Anmerkung 3.** Falls gewünscht wird ein Kondom zu benutzen, sollten Sie dieses nachdem sich die Erektion eingestellt hat, anbringen.
- Anmerkung 4.** Nach dem Gebrauch können der Erektion-Assistenzring, der Pufferring und der Zylinder mit Seife und wasser gereinigt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Tasche für die Aufbewahrung der Erektion-Assistenzringe luftdicht geschlossen wird, um so eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. LASSEN SIE NIEMALS WASSER ÜBER DEN MOTOR LAUFEN.

ACHTUNG

Wenn Sie den Motor auf dem Zylinder anbringen, ÜBERDREHEN SIE DIESEN NICHT. Um den Motor anzubringen ist eine 90° Drehung ausreichend. Falls Sie zu weit drehen, wird dies das System beschädigen. Solch ein Schaden wird nicht von der Garantie gedeckt!


9 Gebrauchsanweisung

(FÜR EREKTILE DYSFUNKTION)

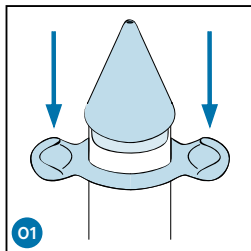


01

Ziehen Sie den Erektion-Assistenzring mit Hilfe des Trichters bis zum Anfang des Zylinders.

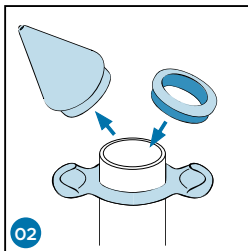


02

Entfernen Sie den Trichter und bringen Sie die Puffering an.

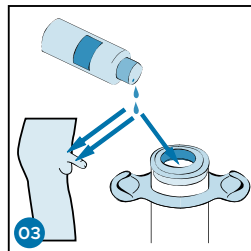


03

Schmieren Sie den Penis, das Innere des Zylinders und Ihren Schambereich mit dem Dämpfungsgel ein.

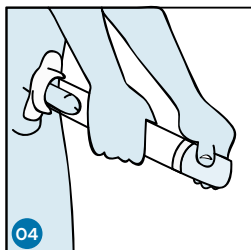


04

Positionieren Sie Ihren Penis in den vorbereiteten Zylinder.

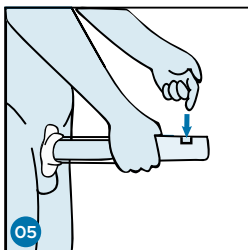


05

Beginnen Sie mit dem Vakuumprozess, je nach Modell elektronisch oder manuell.

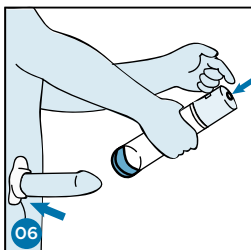


06


Nachdem sich die Erektion eingestellt hat, können Sie den Erektion-Assistenzring an der Penisbasis anbringen. Hiernach sind Sie für den Geschlechtsverkehr bereit.

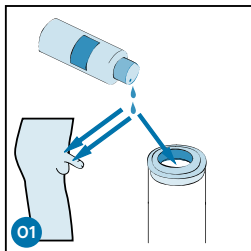


Schmieren Sie das Dämpfungsgel an den Rand des Vakuumzylinders und den gesamten Penis mit dem Dämpfungsgel ein.

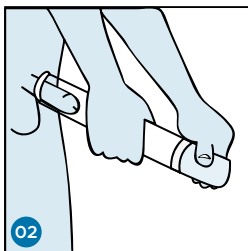


Positionieren Sie den Penis in dem Zylinder. Beim manuellen Modell fassen Sie den Motor mit der Hand und machen Auf- und Abwärtsbewegungen. Für das elektronische Modell folgen Sie Schritt 3.

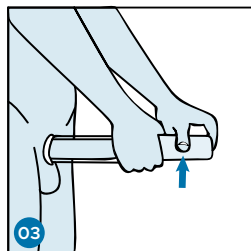


Betätigen Sie den Motor für 10 Sekunden und warten Sie für 5 bis 10 Sekunden, um so langsam ein Vakuum zu erzeugen. Wiederholen Sie diesen Vorgang gegebenenfalls.

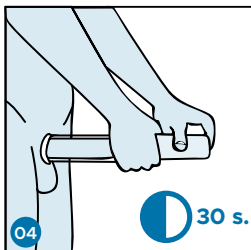

Nachdem Sie eine vollständige Erektion erzeugt haben, warten Sie für 30 Sekunden bis Sie das Vakuum ablassen.

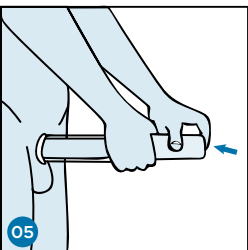

Nach 30 Sekunden können Sie den Druck im Zylinder durch das Drücken des roten Knopfes entfernen.

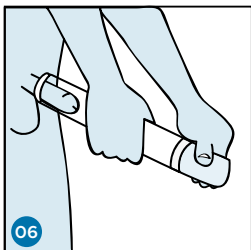

Warten Sie bis der Penis wieder schlaff geworden ist und wiederholen den Start- und Stop Prozess bis sich eine neue Erektion eingestellt hat.

PROBLEM	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	LÖSUNG	KOMMENTAR
Keine Erektion	Kein Vakuum aufgrund von Luftzutritt durch schlechte Abdichtung	Nutzen Sie mehr Dichtungsgel; Üben Sie einen größeren Druck auf den Körper aus; Kürzen Sie Ihr Schamhaar; Überprüfen Sie das System nach Stellen, an denen Luft eintreten kann	Problem ist meistens auf Unerfahrenheit zurückzuführen; Es verschwindet mit einiger Übung in der Systemnutzung
Teilweise Erektion	Nicht genügend Trainingseinheiten mit dem System	Mehr Trainingseinheiten mit dem System	Das Problem verschwindet normalerweise mit etwas Übung
Schneller Abfall der Erektion (in weniger als 5 Minuten)	Vakuumverlust aufgrund von Luftzutritt; Schlechte Abdichtung; Zu viel Schamhaar; Zu großer Erektion-Assistenzring	Wie bei "Keine Erektion"; Nutzen Sie einen kleineren oder zwei Erektion-Assistenzringe; Entfernen Sie die Ringe vorsichtig	Es ist notwendig verschiedene Ringgrößen auszuprobieren; Konsultieren Sie Ihren Arzt, falls Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen.
Zug am Hodensack	Dichtungsgel am Hodensack; unangebrachte Pumptechnik; Unerfahrenheit mit dem System	Entfernen Sie das Dichtungsgel vom Hodensack; setzen Sie die Übungseinheit fort; Drücken Sie den Zylinder während des Gebrauchs nach unten	Problem kann mit mehr Erfahrung im Umgang mit dem System verschwinden
Unbehagen oder Schmerzen während des Pumpprozesses	Zu schnelles Pumpen; Zug am Hodensack	Langsameres Pumpen; setzen Sie den Pumpprozess fort	Problem kann mit mehr Erfahrung im Umgang mit dem System verschwinden
Problem mit dem Erektion-Assistenzring	Zu kleiner Erektion-Assistenzring; Besorgnis	Verwenden Sie einen größeren Erektion-Assistenzring	Problem mit mehr Erfahrung im Umgang mit dem System verschwinden
Problem während des Geschlechtsverkehrs	Schlechte Abdichtung, Druck auf einer sensiblen Stelle	Mehr Dichtungsgel; Veränderung der Position	
Problem während des Ejakulierens	Lange Periode ohne Sex; Infektion oder Schwellung der Prostata	Setzen Sie die Behandlung mit dem System fort	Problem mit mehr Erfahrung im Umgang mit dem System verschwinden; falls Unbehagen oder Schmerzen anhalten sollten Sie einen Arzt aufsuchen
Rötungen, Hautirritationen, Blutergüsse	Zu schnelles Pumpen; Überpumpen	Langsameres Pumpen; weniger Pumpen	Konsultieren Sie Ihren Arzt wenn, das Problem auch nach den ersten Übungseinheiten anhält
Penis fühlt sich (für Sie oder Ihren Partner) kalt an	Abschnüren des Blutflusses zum Penis; Abdichtung durch Dichtungsgel	Waschen Sie das Dichtungsgel ab oder erwärmen Sie dieses vor dem Gebrauch	
Penis schwankt an der Basis	Abschnüren des Blutflusses zum Penis	Falls möglich, wenden Sie das System an, nachdem sich eine teilweise Erektion eingestellt hat	

Die in der Literatur identifizierten potenziellen Risiken sind vorübergehend und umfassen: Penisbluterguss, Penisschmerzen, Penistaubheit und Unfähigkeit zu ejakulieren.

- ❗ Sie werden bei der Ausführung des Vakuums einen Druck verspüren. Dies ist nicht gefährlich. Falls Sie ein Unbehagen verspüren, könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass Sie zu schnell pumpen. Drücken Sie einfach den manuellen Vakuumreduzierungsknopf. Warten Sie einen Moment und bauen Sie ein neues Vakuum auf.
- ❗ Ihr Penis kann sich nach der Nutzung des Erektion-Assistenzring ein wenig bläulich verfärben. Dies kann eine normale Antwort auf den erhöhten Blutfluss sein. Die blaue Verfärbung sollte nach dem Entfernen des Unterstützungsrings verschwinden.
- ❗ Bei anfänglicher Nutzung des Systems kann es zu Petechien (kleine rötliche Punkte unterhalb der Haut) und Blutergüssen kommen. Dies kann daran liegen, dass der Penis einem zu großen negativen Druck für zu lange Zeit ausgesetzt wird oder dass Sie seit längerem keine Erektion mehr hatten. Falls dies für Sie zutreffend ist, stoppen Sie solange mit der Behandlung bis die Rötungen oder Blutergüsse komplett verschwunden sind. Dies dauert im Allgemeinen 5-7 Tage.
- ❗ Der Penis könnte sich für Sie oder Ihren Partner etwas kälter anfühlen. Diese Kälte ist normal und nicht gefährlich. Dies ist auf die Reduzierung des Blutflusses, die durch den Erektion-Assistenzring hervorgerufen wird zurückzuführen.
- ❗ Ihr Penis „schwankt“ etwas an der Basis. Es kann vorkommen, dass Ihr Penis an seiner Basis etwas schwankt, wenn der Erektion-Assistenzring angebracht wurde. Falls dies für Sie zutreffend ist, kann es möglich sein, dass Sie verschiedene Positionen für den erfolgreichen Geschlechtsverkehr ausprobieren müssen.
- ❗ Es kommt zu keinem Samenerguss nach dem Höhepunkt. Der Druck der vom Erektion-Assistenzring ausgeht kann den Ejakulationsprozess beeinträchtigen. Dies ist nicht gefährlich und wirkt sich nicht negativ auf den Höhepunkt aus. Der Samen kann nach dem Abnehmen des Rings herausfließen. Die Erektion-Assistenzringe sind keine Verhütungsmittel und sollten nicht zur Vermeidung von Schwangerschaften genutzt werden.
- ❗ Der Penis Zylinder beschlägt von Innen. Der Grund hierfür ist das Wechselspiel zwischen Ihrer Körperwärme und dem kälteren Dichtungsgel. Das Beschlagen kann dadurch vermieden werden, dass man vor dem Gebrauch des Systems warmes Wasser über den Zylinder laufen lässt.

- ❗ Das Nutzen des **Androvacuum®** kann zu Rötungen oder Rissen der Blutgefäße unter der Haut oder in tieferem Gewebe des Penis oder Hodensacks führen. Hierdurch kann es zu Blutungen kommen, die in Schwellungen resultieren. Seien Sie nicht beunruhigt falls Sie Rötungen oder kleine rötliche Punkte am Penis feststellen. Ein Grund hierfür kann sein, dass Sie schon seit längerem keinen Sex mehr gehabt haben. Sie sollten die Behandlung mit dem System solange unterbrechen, bis diese Probleme vollständig geheilt sind (5 oder 6 Tage). Wenn Sie das System erneut benutzen ist es wichtig, dass Sie kein größeres Vakuum, als für Sie komfortable ist, anwenden. Seien Sie vorsichtig bei der Entfernung des Erektion-Assistenzrings und nutzen Sie ausreichend Wasser.
- ❗ Falls Sie Anzeichen für Erektionsstörungen feststellen können (z.B. das Unvermögen eine Erektionen, die stark genug für den Geschlechtsverkehr ist, aufrechtzuerhalten), sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit der Nutzung des Systems beginnen, um so eine mögliche schädliche Verspätung in der Entdeckung der häufigsten dieser Zustände, wie Diabetes, Multiples Sklerose, Leberzirrose, chronischer Niereninsuffizienz oder Alkoholismus, zu vermeiden.
- ❗ Tragen Sie den Erektion-Assistenzring nie länger als 30 Minuten. Er könnte Schmerzen, Rötungen und Blutergüsse, oder eine permanente Penisverletzung hervorrufen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt falls Probleme auftreten und setzen Sie die Behandlung mit dem System nicht fort.
- ❗ Falls Sie diese Anleitungen nicht befolgen, kann dies persönliche Schäden zur Folge haben.

Androvacuum® wird keine Beziehungsprobleme oder körperliche Probleme, wie z.B. eine schwache sexuelle Lust, eine zurückgegangene Empfindlichkeit oder permanente Ejakulationsprobleme, beheben.

Falls Sie unter Sichelzellenanämie oder langanhaltenden Erektionen leiden, oder Sie große Mengen Aspirin oder Blutverdünner benutzen, benutzen Sie den **Androvacuum®** nicht ohne vorher Ihren Arzt konsultiert zu haben.

- ❗ Ein Missbrauch von **Androvacuum®** oder der Erektion-Assistenzringe können bereits bestehende medizinische Zustände, wie z.B. Peyronie (ein Zustand der eine Krümmung des erigierten Penis zur Folge hat), langanhaltende Erektionen oder eine verengte Harnröhre verstärken.
- ❗ Ein Missbrauch von **Androvacuum®** oder der Erektion-Assistenzringe können in einer Anschwellung des Penis und ernsten, permanenten Penisverletzungen führen.
- ❗ Ein häufige Nutzung des Erektion-Assistenzrings können zu Rötungen, Blutergüssen und Schmerzen an der Penisbasis (die Stelle an der der Penis auf den Körper trifft)) führen.
- ❗ Es wird dazu geraten den Erektion-Assistenzring aufgrund von möglicher Narbenbildung und später Beeinträchtigungen vorsichtig zu entfernen. Wenden Sie das Vacuum schrittweise an. Untersuchen Sie Ihren Penis nach Rötungen oder Krümmungen.

PORTFOLIO



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).