

# Instructions for Use (IFU)

1



## IFU LANGUAGES

[www.androvacuum.com/ifu/](http://www.androvacuum.com/ifu/)



## VIDEOS

[www.andromedical.com/videos](http://www.andromedical.com/videos)




## FAQs - QUESTIONS

[www.androvacuum.com/faqs](http://www.androvacuum.com/faqs)




## MEDICAL CONSULTATION (online, chat & email)


[www.androclinic.com](http://www.androclinic.com)

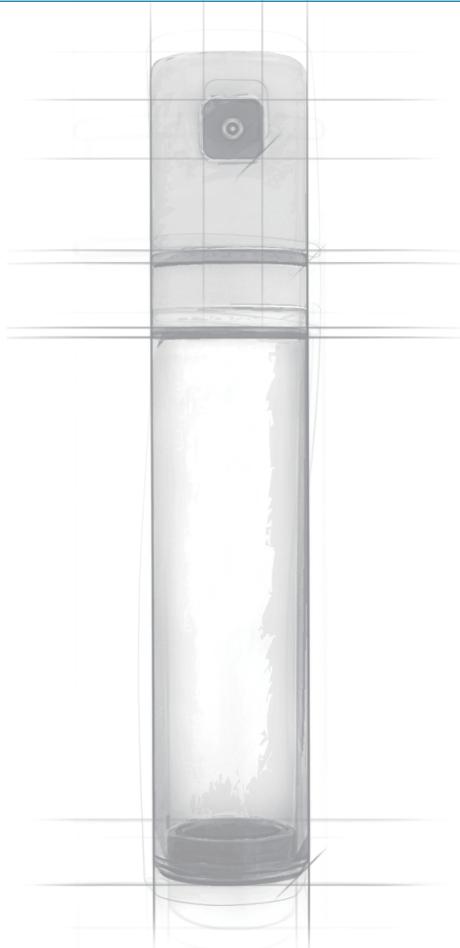

01

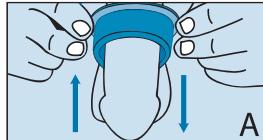

A

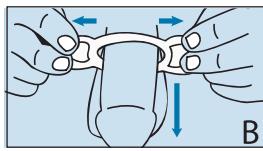

B

Please, choose the components according to the therapy and your penis size. For erectile dysfunction treatment, choose the cushioning ring (fig. A) and the constriction ring (fig. B) which fits your penis width better.

Bitte wählen Sie die zu Ihrer Therapie und Penisgröße passenden Bestandteile. Für erektile Dysfunktion, benutzen Sie den gepolsterten Ring (Abb. A) und den Einschnürring (Abb. B) der sich am Besten an Ihren Peins anpasst.

Selectionner les composants suivants la thérapie à suivre et la taille de son pénis. Pour le traitement de la dysfonction érectile, sélectionner l'anneau amortisseur (image A) et l'anneau de constriction (figura B) qui s'adaptera mieux à la taille de son pénis.


Seleccione los componentes según la terapia a seguir y el tamaño de su pene. Para el tratamiento de la disfunción eréctil, seleccione el anillo de amortiguación (figura A) y el anillo de constrictión (fig. B) que más se adapte al grosor de su pene

Selezionate i componenti in base alla terapia da seguire e alla dimensione del vostro pene. Per il trattamento della disfunzione erettile, selezionate l'anello di ammortizzazione (fig. A) e l'anello di costrizione (fig. B) che si adattino meglio alla dimensione del vostro pene.

治療のタイプとペニスのサイズにあった付属品を選んでいます。  
勃起不全の治療:ゴムパッキン(図A)と、ペニスの太さに合ったシリコンバンド(図B)を選んでください。

من فضلك ، اختر المكونات حسب العلاج وحجم قضيبك. لعلاج ضعف الانتصاب ، اختر حلقة التوسيد (التكيل) و حلقة الاصطanga (الشكل ب) التي تتناسب عرض قضيبك بشكل أفضل

02

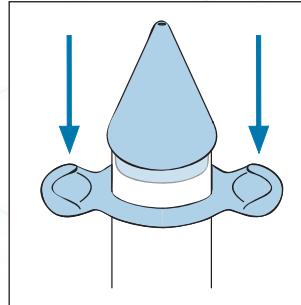

Fit the cone at one end of the cylinder. Apply lubricant gel to the cone of the cylinder and slide on the constriction ring until the ring snaps on to the cylinder.



Den Kegel auf ein Ende des Zylinders stecken. Gelschmiernittel in den Kegel am Zylinder auftragen und den Schleißring aufziehen bis der Ring um den Zylinder aufliegt.

Fixez le cône à une extrémité du cylindre. Appliquez du gel lubrifiant sur le cône du cylindre et faites glisser sur lui l'anneau de constriction jusqu'à ce que l'anneau entoure le cylindre transparent.


Encaje el cono en un extremo del cilindro. Aplique gel lubricante en el cono del cilindro y deslice por él el anillo de constrictión hasta que el anillo encaje en el cilindro.

Fissare il cono ad una estremità del cilindro. Applicare lubrificante sul cono ed introdurre l'anello di costrizione facendolo scorrere attraverso il cono fino a raggiungere il cilindro.

シリンドーにコーン型のアダプターを取り付け、潤滑剤(ジェル)を塗り、シリコンバンドを滑らすようにしてシリンドーにはめます。

ضع المخروط في أحد طرفي الأسطوانة. ضع هام التسحيم على مخروط الأسطوانة وحركه على حلقة الاصطanga حتى تستقر الحلقة على الأسطوانة

03

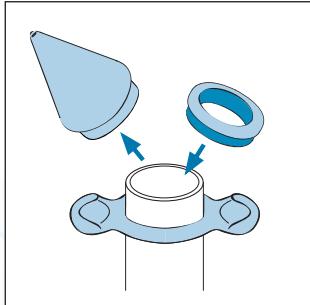

Remove the cone of the cylinder. Snap rings in place and place in the selected cushioning rings after applying Gel Lubricant.

Den Kegel vom Zylinder entfernen und an dessen Stelle die gewählten Dämpfungsringe anbringen und Gelschmiermittel auftragen.

Retirez le cône du cylindre et mettez à sa place, le ou les anneaux amortisseurs choisis et appliquez du gel lubrifiant sobre eux.


Retire el cono del cilindro. Encaje en su lugar los anillos amortiguadores seleccionados y aplique gel lubricante sobre los mismos.

Rimuovere il cono del cilindro. Introdurre nel cilindro gli anelli ammortizzatori scelti e applicare gel lubrificante sugli stessi.

シリンドラからコーン型のアダプターを取り外し、シリンドラにゴムパッキンをはめ込み、潤滑剤(ジェル)を塗ります。

قِبَلَةِ الْمَرْوُثِ الْأَسْطَوْانَةِ، ضَعِّفِ الْحَلَقَاتِ فِي مَكَانِهَا وَضَعُّهَا فِي حَلَقَاتِ التَّوْسِيدِ الْمُحدَّدَةِ بَعْدَ وَضُعُّ مَادَةِ التَّشْحِيمِ الْهَالَمِيَّةِ

04

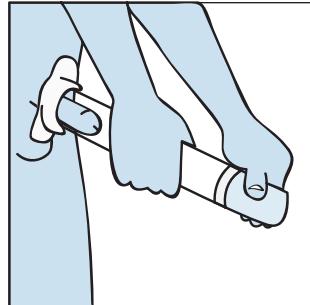

On the other end of the cylinder, snap in the electric motor, when fitted correctly there will be no movement and there will be a perfect seal.

Den Elektromotor auf das andere Ende des Zylinders stecken. Das Gerät ist dann richtig verschlossen wenn es nach dem Einschalten keine Bewegung vorweist.

À l'autre extrémité du cylindre, enclenchez le moteur électrique. Vous savez que le moteur est correctement enclenché s'il n'y a pas de jeu entre les pièces.


En el otro extremo del cilindro, encaje el motor electrónico. Sabrá que el motor ha encajado apropiadamente si no tiene holgura.

Montare all'altra estremità del cilindro, il motore elettronico. Sarà correttamente montato se non ci sarà movimento e aderirà perfettamente.

シリンドラのゴムパッキンが付いていない方に、モーターのついた電源装置をはめ込みます。  
(しっかりとはめ込んでいるかを確認するようにしてください。)

على الطرف الآخر من الأسطوانة ، قم بإدخال المحرك الكهربائي ، عندما يتم تركيبه بشكل صحيح لن تكون هناك حركة وسيكون هناك ختم مثالي

05

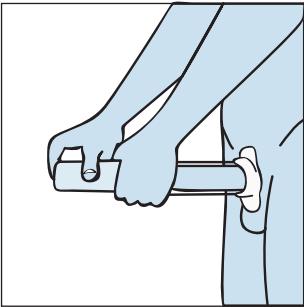

Insert the penis into the cylinder where the ring buffers are in place, insert the penis all the way until the pubis. It may be easier to create a vacuum if the hair is trimmed or shaved on the pubis where it is in contact with the cylinder.

Schieben Sie den Penis bis an Ihr Schambein ein. Wenn Sie an dieser Stelle Ihr Schamhaar rasiieren kann es leichter sein, ein Vakuum herzustellen.

Insérez le pénis dans le cylindre jusqu'à l'appuyer sur le pubis. Il sera plus facile de créer un vide si la zone qui soutient le cylindre est épilée.


Introduzca el pene por la parte del cilindro con los anillos amortiguadores, hasta apoyarlo en su pubis. Puede resultar más fácil crear el vacío si se recorta el vello de la zona en la que se apoya el cilindro.

Inserire il pene attraverso il cilindro nella parte dove ci sono gli anelli ammortizzatori finché il cilindro non arrivi a toccare il pube. Può essere più facile creare il vuoto, se i peli sono tagliati nella zona che sostiene il cilindro.

シリコンをペニスにかぶせ、ペニス全体が入ったら、しっかりと恥骨側に押さえます（シリコンが当たる部分の陰毛を手入れすると、より簡単にアンドロバキュームを使用いただけます）。

دخل القصيبي في الاسطوانة حيث توجد مخازن الحالة ، أدخل القصيبي بالكامل حتى العانة. قد يكون من الأسهل صنع فراغ إذا تم قص الشعر أو حلقه في منطقة العانة حيث يكون ملائماً للاسطوانة

06

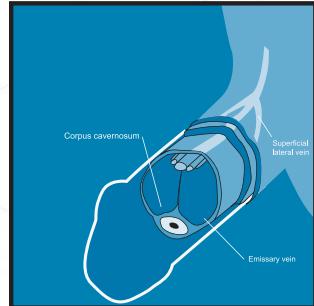

With one hand, hold the cylinder tight against the pubis, with the other hand press the motor button and start the motor. For manual model, grasp the motor with your hand and make up-and-down movements.

Halten Sie den Zylinder mit einer Hand gegen Ihr Schambein und betreiben Sie den Motor mit der anderen. Beim manuellen Modell fassen Sie den Motor mit der Hand und machen Auf- und Abwärtsbewegungen.

D'une main, maintenez le cylindre contre votre pubis et de l'autre actionnez le moteur électronique. Pour le modèle manuel, saisissez le moteur avec votre main et faites des mouvements de haut en bas.


Con una mano sujeté el cilindro contra su pubis y con la otra accione el motor electrónico. Para el modelo manual, agarre el motor con la mano y haga movimientos hacia arriba y hacia abajo.

Con una mano, tenere il cilindro contro il pube e con l'altra azionare il motore elettronico. Per il modello manuale, afferrare il motore con la mano ed eseguire movimenti di salita e discesa.

片手は器具を恥骨側に押さえるようにし、もう一方の手で、電源ボタンを操作するようにします(圧力が急激にかかるはありませんので、ご安心ください)。 手動式の場合は、手でモーターをつかみ、上下に動かしてください。

بأخذ يديك ، امسك الأسطوانة بإحكام على العانة ، وباستخدام اليد الأخرى ، اضغط على زر المحرك وابداً تشغيل المحرك. بالنسبة للطراز البديوي ، امسك المحرك بيديك وقم بحركات لأعلى ولأسفل

07

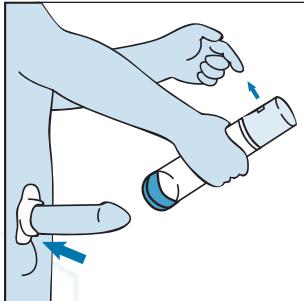

After achieving a full erection, slide the correct size of constriction ring down the outside of the cylinder and set at the base of the penis. Stop the vacuum by pressing the red button on the electric motor to release air back into the cylinder.

Nachdem Sie eine Erektion erreicht haben schieben sie den Schleißring vom Zylinder über den Penis bis an dessen Anschlag. Lassen Sie die Luft in den Zylinder fließen indem Sie auf den roten Knopf am Elektromotor drücken und nehmen Sie den Zylinder ab.

Après avoir obtenu une érection, faites glisser l'anneau de constrictions depuis le cylindre jusqu'à la base de la verge. Une fois que l'anneau est en place sur la verge, libérez l'air du cylindre en appuyant sur le bouton rouge du moteur électrique et retirez le cylindre.


Tras lograr la erección, deslice el anillo de constricción desde el cilindro y ajústelo en la base del pene. Libere el aire del cilindro pulsando el botón rojo del motor electrónico y retire el cilindro.

Dopo aver raggiunto l'erezione, far scorrere l'anello di costrizione dal cilindro fino alla base del pene. Liberare l'aria del cilindro premendo il tasto rosso del motore elettronico e rimuovere il cilindro.

勃起したら、シリコンリングをペニスの根元に滑らすようにして移します。シリコンリングをペニスの根元につけたら、電源装置についている赤いボタンを押し、シリナーの中に空気を入れ、器具を取り外すようしてください。

بعد تحقيق الانتصاب الكامل ، حرك الحجم الصحيح لطعة الانقباض لأنفاس خارج الأسطوانة وأضيّقها عن قاعدة القضيب. أوقف الفراغ بالضغط على الزر الأحمر على المحرك الكهربائي لإخراج الهواء مرة أخرى إلى الأسطوانة.

08

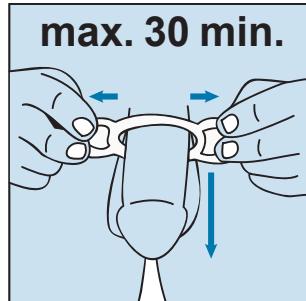

The constriction ring will keep blood in the penis and therefore hold the erection. It can be worn for up to 30 minutes.

Der Schleißring wird die Erektion und die Durchblutung aufrechterhalten. Er darf höchstens 30 Minuten lang benutzt werden.

L'anneau de constrictions maintiendra l'irrigation et l'érection. Il peut être porté jusqu'à 30 minutes au maximum.

El anillo de constricción mantendrá la irrigación y la erección. Puede llevase puesto 30 minutos como máximo.

L'anello di costrizione manterrà l'irrigazione e l'erezione. Può essere indossato fino a 30 minuti al massimo.

シリコンリングで、陰茎内に血液を送りこんだ状態を保ることができます。30分以上の連続使用は控えるようにご注意ください。

ستحافظ حلقة الانقباض على الدم في القضيب وبالتالي تحافظ على الانقباض. يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة



## Cara Penggunaan

Baca Sebelum Menggunakan

### Daftar Isi

1. KOD QR DAN PAUTAN
2. PANDUAN RINGKAS
3. TENTANG Androvacuum®
4. KOMPONEN PERANTI
5. PETUNJUK PERUBATAN
6. PILIH KOMPONEN
7. PANDUAN MENGGUNAKAN SISTEM
8. ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN
9. ARAHAN UNTUK KEGUNAAN UNTUK DISFUNCTION EREK TILE
10. ARAHAN UNTUK KEGUNAAN UNTUK PEMULIHAN ZAKAR
11. MASALAH DAN PENYELESAIAN BIASA
12. LANGKAH BERJAGA-JAGA
13. PORTFOLIO

### Halaman

- |    |
|----|
| 1  |
| 2  |
| 7  |
| 8  |
| 9  |
| 10 |
| 11 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 19 |

**NOTE:** Androvacuum® has the following models: **Androvacuum® Premium** (with automatic motor, Deluxe model) and **Androvacuum® Manual** (with manual motor, Pro model).

The user instructions are the same for all models, with minor variations.

### 3 Tentang Androvacuum®

**Androvacuum®** ialah pam zakar bermutu tinggi yang terbukti secara perubatan yang merupakan penyelesaian yang tidak invasif, selamat dan berkesan untuk mengikuti rutin Pemulihan Zakar dan mendorong ereksi segera tanpa dadah atas permintaan sebagai penyelesaian kepada Disfungsi Erektil.


Dirancang dan direkayasa secara ergonomik, **Androvacuum®** terdiri daripada sebuah silinder yang sesuai untuk zakar, dengan sebuah motor pam isap elektronik untuk mencipta dan menggalakkan persekitaran vakum di sekitar zakar yang menarik darah ke dalamnya dan membantu zakar menjadi membesar, kaku dan keras.

#### Sila, baca dahulu, (hanya untuk model dengan bateri):

**Langkah 1-** Untuk menanggalkan penutup bateri, tekan pada kepala panah dan sorong ke atas. Lihat gambar 1A.

**Langkah 2-** Masukkan bateri sebagaimana ditunjukkan dalam petak bateri (gunakan bateri saiz AA. Tidak termasuk dalam pak).

**Langkah 3-** Luncurkan penutup bateri kembali ke tempatnya.

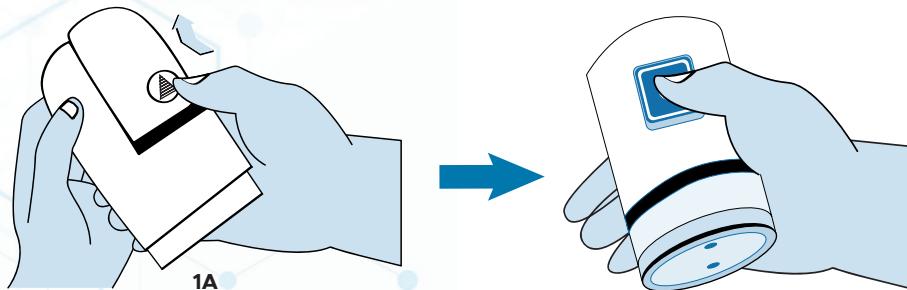


**Peringatan:** Baca manual dengan hati-hati dan sepenuhnya sebelum menggunakan **Androvacuum®**.

Jika arahan tidak diikuti **Androvacuum®** tidak akan berfungsi.


Selepas memasukkan bateri, periksa sama ada motor berfungsi dengan baik dengan menekan butang pencucuhan dengan kuat.

## 4 Komponen Peranti

**Cecincin Kusyen:** Sisipan Adaptor Penyesuai, untuk saiz zakar yang berbeza, untuk ditempatkan di tiub zakar selepas cecincin ditempatkan pada tiub zakar dan kon ditanggalkan.

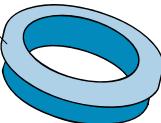


**Butang melepaskan vakum manual**  
yang membolehkan anda mengurangi  
vakum.

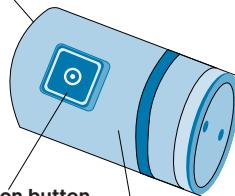


Activation button

**Motor Vakum Elektronik atau Manual**  
dilengkapi penutup cepat

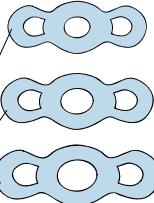


### Cecincin Penyempitan:

Cecincin Pembantu Ereksi, untuk saiz zakar yang berbeza

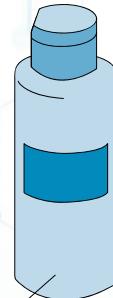

### Tiub Gel Sealing Peribadi

**Nota:** Gel pengedap tidak termasuk dalam pek, hanya terdapat di Farmasi.

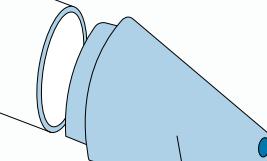

### Silinder Gred Perubatan yang Boleh Ditanggalkan

**Sistem Pemuatan Kon yang Mudah,**  
berpadanan ke dalam tiub zakar untuk  
membantu menempatkan cecincin di tiub  
zakar

## DISFUNGSI EREKSI

**Androvacuum®** ialah dimaksudkan untuk rawatan lelaki dengan Disfungsi Ereksi. Jutaan orang dijangka akan terjejas. Disfungsi Ereksi boleh menjadi tanda adanya masalah aliran darah atau masalah syaraf yang serius. Disfungsi Ereksi seringkali juga merupakan kesan samping dari ubat yang mungkin sedang anda gunakan. Jika anda mengesyaki ini, bicarakan kepada doktor anda. Anda tidak boleh menukar atau berhenti menggunakan ubat tanpa terlebih dahulu berunding kepada doktor anda. Merokok, alkoholisme dan penyalahgunaan dadah semua boleh menyumbang kepada gangguan Disfungsi Ereksi.

Terapi Disfungsi Ereksi dengan **Androvacuum®**, dianjurkan untuk:

- ☒ Lelaki yang sekali-sekala gagal memperoleh erekси penuh kerana stres, kegembiraan atau takut.
- ☒ Lelaki yang mudah mendapatkan erekси tetapi mempunyai masalah memeliharanya.
- ☒ Lelaki dengan masalah erekси dari segala usia, bahkan mereka yang belum mendapatkan erekси dalam tempoh beberapa tahun.
- ☒ Lelaki dengan masalah erekси yang tidak boleh minum ubat anti-ED untuk masalah jantung.

## PEMULIHAN ZAKAR

Persekitaran vakum membuat lebih banyak darah mengalir ke dalam zakar ketika zakar menjadi lebih membesar dan keras. Seiring waktu, persekitaran vakum dengan teratur didorong, membuat korpus kavernosum menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus menuntut ini. Zakar akhirnya menghasilkan aliran darah tambahan yang disebut dengan sendirinya, bahkan pada masa tidak ada persekitaran vakum dibuat. Ini bermakna bahawa organ seksual bertindak basas lebih cepat dan kuat terhadap perangsangan seksual. Masalah erekси berpanjangan boleh menyebabkan penyusutan sirkulasi zakar (tidak menggunakan atropi). Menggunakan rutin **Androvacuum®** akan menggandakan keunggulan erekси malam hari, membalikkan penyusutan zakar, membaharu sirkulasi zakar dan mempromosikan kembali ke kesihatan zakar yang baik. **Androvacuum®** dapat membantu meregangkan kembali rangkaian ke keadaan semula dalam tempoh penggunaan sesedikit 4 minggu, dalam kombinasi dengan peningkatan sirkulasi zakar. Pada masa yang sama, anda mendorong pembesaran zakar penuh dan memajukan kesihatan zakar yang baik.


Terapi pemulihan zakar dengan **Androvacuum®**, disyorkan untuk:

- ☒ Lelaki yang mengalami erekси lemah,
- ☒ Lelaki yang mengalami kekerasan erekси progresif sirna kerana proses penuaan, gaya hidup, pemakaian alkohol atau tembakau serta tahap kolesterol dan stres yang tinggi.
- ☒ Lelaki dengan tingkat testosterone rendah (TDS atau hipogonadisme) dan yang sedang menggunakan suplementasi hormonal.
- ☒ Lelaki selepas prostatektomi, pembedahan prostat Pembedahan penyakit Peyronie atau pembedahan zakar.

## 6


## Pilih Komponen

1. Mulakan dengan Cecincin Pembantu Ereksi dan Cecincin Kusyen yang paling besar. Sekiranya anda tidak mampu menahan vakum dan ereksi dengan cecincin yang terbesar, secara berperingkat gunakan saiz Cecincin Pembantu Ereksi dan Cecincin Kusyen lebih kecil seterusnya, sehingga anda mampu menahan vakum dan ereksi.
2. Set silinder (dengan hujung halus menghadap ke atas) pada permukaan yang rata. Tempatkan Sistem Pemuatan Kon yang Mudah ke dalam tiub zakar.
3. Licirkan seluruh permukaan Sistem Pemuatan Kon yang Mudah dengan gel sealing.
4. Pegang kedua dua pegangan Cecincin Pembantu Ereksi seperti yang ditunjukkan. Letakkan hujung ibu jari anda di atas cecincin di sebelah Sistem Pemuatan Kon yang Mudah dan tarik cecincin ke bawah. Hujung ibu jari anda harus meluncur di sepanjang permukaan Sistem Pemuatan Kon yang Mudah. Tempatkan Cecincin Pembantu Ereksi berhampiran hujung tiub untuk kemudian pemuatan ke pangkal zakar menjadi mudah (jangan memuatkan cincin ke tiub dengan menarik pegangan, karenanya mungkin boleh koyak).

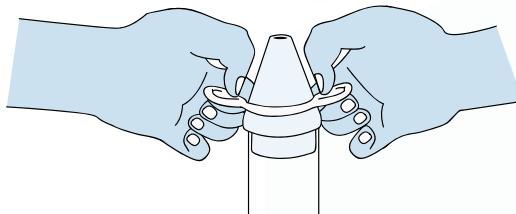

5. Tanggalkan Sistem Pemuatan Kon yang Mudah dan lekatkan silinder ke Motor Elektronik vakum. Pusingkan silinder di motor  $\frac{1}{4}$  pusingan, akan mengunci di tempatnya. Jangan terlampaui ketat. Pasangkan Cecincin Kusyen di hujung terbuka daripada tiub zakar.
6. Mengalirkan air hangat ke atas silinder (sebelum melekatkan ke motor) akan membantu mengelakkan silinder dari berkabut ketika digunakan.


PINTAL DAN TARIK UNTUK MENANGGALKAN

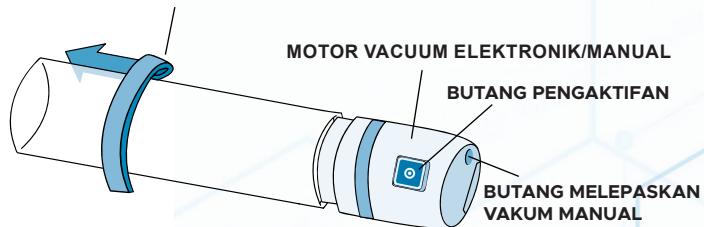

**Cecincin Kusyen**

atau Sisipan Adaptor yang Sesuai

## CECINCIN PEMBANTU EREKSI

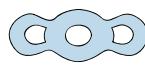

Salah satu langkah yang paling penting ialah menyesuaikan saiz Cecincin Pembantu Ereksi dengan benar. Untuk menjaga darah tetap di zakar, cecincin haruslah pas dengan selesa dan ketat, tetapi harus tidak lebih ketat daripada yang diperlukan. Sekiranya **Androvacuum®** memberi anda erekси yang bagus tetapi dengan Cecincin Pembantu Ereksi terpasang erekси anda menjadi lembut dalam tempoh lima minit ataupun kurang, maka anda perlu mencuba cecincin seterusnya yang lebih kecil.

30 minit ialah tempoh masa maksimum yang disarankan untuk memakai Cecincin Pembantu Ereksi. Sekiranya dipakai lebih lama, kerusakan kekal adalah mungkin terjadi.

Selepas saiz cincin yang benar telah diputuskan, itu akan mengambil masa beberapa minit sahaja untuk mendapatkan erekси.

### JANGAN MEMAKAI CECINCIN SOKONGAN LEBIH DARI 30 MINIT.

**Androvacuum®** akan membantu anda mencapai erekси penuh dan memuaskan dalam banyak kes.

- ☒ Biarkan minimal 60 minit antara menggunakan.
- ☒ Jangan jatuh tertidur dengan memakai Cecincin Pembantu Ereksi.
- ☒ Cecincin Pembantu Ereksi tidak boleh digunakan sebagai kaedah kawalan kelahiran.
- ☒ Gunakan Cecincin Pembantu Ereksi terbesar yang menahan erekси.
- ☒ Jangan gunakan Cecincin Pembantu Ereksi ketika menggunakan alkohol atau dadah.
- ☒ Kerap menggunakan Cecincin Pembantu Ereksi boleh menyebabkan lebam di dasar zakar (di mana batang zakar berjumpa kawasan kemaluan). Jangan terlalu bimbang sekiranya anda melihat lebam di zakar atau bintik-bintik merah kecil di bawah kulit. Gunakan hati-hati dan banyak pelicir yang boleh larut dalam air apabila hendak menaggalkan cincin sokongan.
- ☒ Jangan gunakan pelicir berdasarkan minyak seperti jelly petroleum/Vaseline, kerana ianya akan merosakkan Cecincin Pembantu Ereksi dan bahan jenis lateks yang lain seperti kondom. Gunakan sahaja pelicir larut dalam air dan gel sealing.

## BUTANG PELEPAS HAMPA UDARA/VAKUM MANUAL DAN PENCiptaan Persekutaran Vakum

Zakar anda akan penuh dan kaku tanpa rasa sakit dalam **10 sehingga 90 saat**. Anda mungkin merasa tekanan apabila zakar anda mula menjadi tegak kerana vakum, ini ialah normal. Sekiranya anda merasakan sakit sedikit ketika zakar anda menjadi penuh, cuba tahap vakum yang lebih rendah dengan menekan butang pelepas vakum manual (dengan sedikit latihan anda akan menemukan tahap vakum yang benar, sehingga anda boleh membuat ereksi penuh).

Butang pelepas vakum manual boleh didorongkan untuk menurunkan tahap vakum. Sekiranya terlalu banyak vakum dilepaskan, dengan mudah boleh dipertingkatkan dengan menekan butang pengaktifan.


Untuk mengeluarkan zakar dari Silinder, dorong butang pelepas vakum manual sehingga tekanan vakum hilang. Anda kemudian boleh melepas Silinder.

Kebanyakan lelaki dengan Distfungsi Ereksi akan kehilangan sebahagian besar erekси mereka segera selepas mengeluarkan zakar dari Silinder. Masalah ini boleh diatasi dengan memasang **Cecincin Pembantu Ereksi** dengan benar. Di sisi lain, sekiranya anda mendapatinya bahawa anda menjaga cukup erekси untuk persetubuhan, anda mungkin tidak memerlukan **Cecincin Pembantu Ereksi**. Anda mungkin boleh memiliki kehidupan seks yang baik hanya menggunakan peranti **Androvacuum®** tanpa Cecincin Pembantu Ereksi.

### MELEPASKAN CECINCIN PEMBANTU EREKSI

**Perhatian:** Jangan memakai Cecincin Pembantu Ereksi melebihi 30 minit.

Lepaskan cecincin itu dengan menarik keluar sisi dengan bentuk bergelung. Cecincin ini akan menegangkan, membolehkan zakar untuk berpindah dari zakar. Kemudiannya anda boleh tarik Cecincin Pembantu Ereksi dengan mudah. Untuk mengelakkan kekusutan Cecincin Pembantu Ereksi pada rambut kemaluan, cuba sedikit gel sealing pada rambut sebelum memakai cecincin.

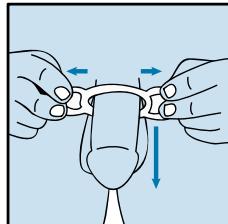

### DISYORKAN

Men's health supplement



Andropharma Vigor

## UNTUK DISFUNCTION EREKTILE:

1. Sapukan zakar anda, bahagian dalam silinder dan kawasan rambut kemaluan (kawasan yang menyentuh langsung cecincin kusyen), dengan pelicir gel sealing. Ini membantu membentuk segel hampa udara yang bagus pada tubuh anda dan mengelakkan zakar melekat ke dinding silinder.
2. Masukan zakar ke dalam silinder dan mulakan proses hampa udara. Jalankan motor dengan menekan butang pengaktifan. Tekan butang untuk sekira 10 saat, itu akan membuat segel antara sistem dan tubuh anda. Melanjutkan menekan butang sehingga anda telah membangun hampa udara yang cukup. Gunakan paling sedikit hampa udara yang diperlukan untuk mendapatkan ereksi.
3. Segera setelah mencapai ereksi yang dikehendaki, pindahkan Cecincin Pembantu Ereksi dari silinder ke pangkal zakar dengan hujung jari anda. Pastikan Cecincin Pembantu Ereksi dipindahkan sepanjang jalan sekitar. Setiap hampa udara yang tersisa dapat dikeluarkan dengan menekan butang pelepas vakum manual. Amalkan beberapa kali tanpa menggunakan Cecincin Pembantu Ereksi.

## UNTUK PEMULIHAN ZAKAR:

4. Penggunaan terapi Androvacuum sekali sehari, dari 5 - 7 kali per minggu, dapat membantu untuk mempertahankan panjang zakar, membesarakan arteri dan tisu zakar oksigenat. Menggunakan **Androvacuum®** teratur dapat mempromosikan fungsi ereksi penuh. Anda tidak perlu menggunakan Cecincin Pembantu Ereksi. Kerana mereka dirancang untuk menahan darah dan mempertahankan ereksi supaya tetap kaku saat melakukan aktiviti seksual. Selama sesi Terapi, kami mengesyorkan anda harus berusaha untuk menghasilkan 5 ereksi atau menggunakan **Androvacuum®** selama sekurang-kurangnya 5-10 minit. Waktu yang baik menggunakan **Androvacuum®** untuk terapi adalah sebelum mandi. Jangan menjalankan motor ke titik yang menyebabkan rasa sakit.

Catatan 1. Selepas anda telah menggunakan sistem dalam tempoh 30 hingga 60 hari, anda mungkin mahu menyimpan semula saiz cecincin yang akan digunakan. Misalnya anda mungkin mendapatih bahawa anda sekarang boleh menggunakan saiz cecincin lebih besar seterusnya. Menggunakan cecincin yang lebih besar boleh menambah keselesaan.

Catatan 2. Beberapa pasangan mungkin lebih suka untuk menghentikan persetubuhan sekurang-kurangnya sekali dan menggunakan semula **Androvacuum®**.

Catatan 3. Jika menghendaki kondom, itu harus dilaksanakan selepas mencapai ereksi.

Catatan 4. Setelah digunakan, Cecincin Pembantu Ereksi, Cecincin Kusyen dan Silinder boleh dicuci dengan sabun dan air, dikeringkan dan disimpan. Pastikan tidak ada udara dalam beg Cecincin Pembantu Ereksi dan tertutup rapat untuk tahan lebih lama. JANGAN PERNAH MELETAKKAN MOTOR DI AIR.


### PERHATIAN:

Ketika meletakkan Silinder di kepala pam, JANGAN TERLAMPAU KETAT. Pusingkan  $\frac{1}{4}$  pusingan untuk mengencangkan. Memusingkan telulu keras atau telulu jauh akan merosakkan sistem anda. Sekiranya itu terjadi, TIDAK AKAN diliputi dalam jaminan!


## 9

## Arahan Untuk Kegunaan


(UNTUK DISFUNCTION EREKTILE)

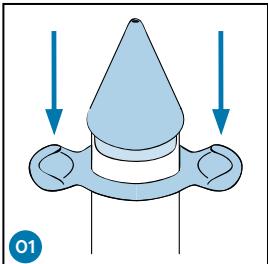


01  
Luncurkan Cecincin Pembantu Ereksi ke Sistem Pemuat Kon yang Mudah dan ke penghujung Silinder.

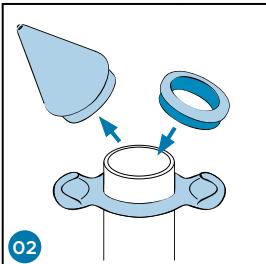


02  
Tanggalkan Sistem Pemuat Kon yang Mudah dan pasang Cecincin Kusyen.

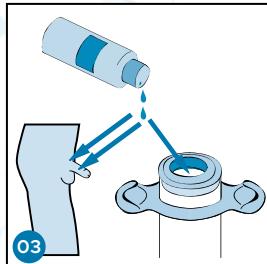


03  
Sapukan zakar anda, bahagian dalam Silinder dan rambut kemaluan anda dengan pelicir gel sealing.

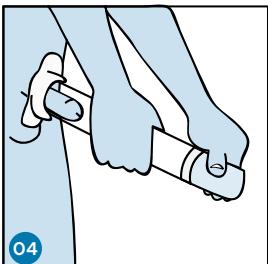


04  
Masukan zakar anda ke dalam Silinder yang telah diper-siapkan.

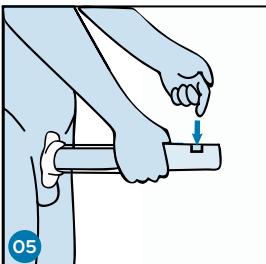


05  
Mulakan proses pengham-paan udara bergantung pada model elektronik atau manual anda.

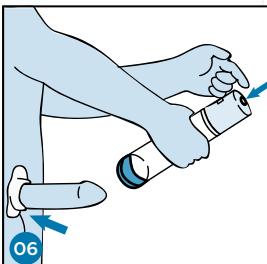


06  
Selepas ereksi tercapai, ge-longsortkan Cecincin Pembantu Ereksi ke pangkal zakar. Selepas transfer cecincin selesai, anda sedia.

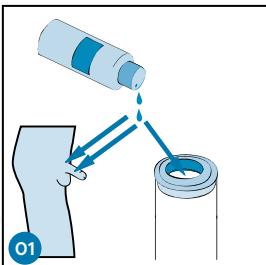


**01**  
Sapukan Gel Sealing di tepi Silinder Vakum dan di seluruh panjang zakar.

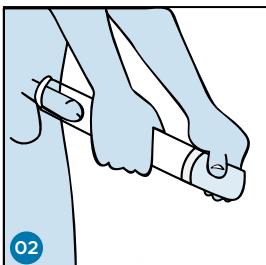


**02**  
Masukkan zakar ke dalam Silinder. Untuk model manual, genggam motor dengan tangan anda dan buat pergerakan ke atas dan ke bawah. Untuk model elektronik, ikuti langkah 3.

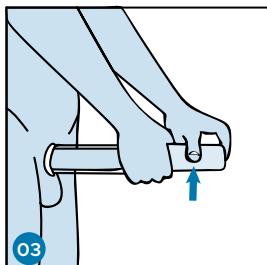


**03**  
Jalankan motor selama 10 saat dan kemudian berhentikan selama 5 - 10 saat untuk perlahan-lahan mencipta persekitaran vakum. Ulangi langkah 3 sehingga anda mendapatkan ereksi penuh.

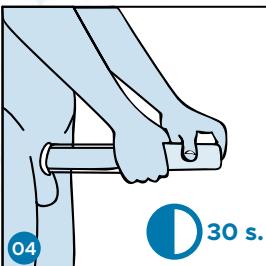

**04**  
Apabila anda telah mencapai ereksi penuh, tunggu 30 saat sebelum melepaskan vakum. Rasa sesak dan tekanan adalah normal dan diharapkan.

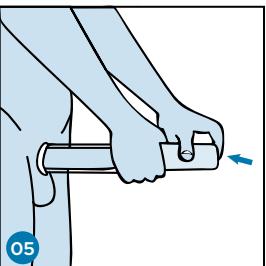

**05**  
Selepas 30 saat, lepaskan tekanan di dalam Silinder dengan menyorong butang merah.

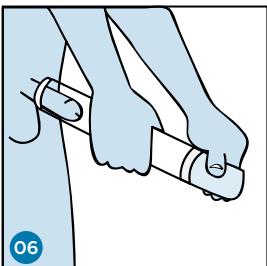

**06**  
Tunggu sehingga zakar telah kembali ke keadaan lembik dan ulangi proses start - dan - stop lagi sehingga membawa zakar kembali ke ereksi penuh.

MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	PERBAIKKAN	KOMEN
Tiada erekси	Tidak ada vakum kerana kebocoran udara yang disebabkan oleh buruknya segel.	Gunakan lebih banyak gel sealing; memberikan tekanan kuat pada tubuh; pangkas rambut kemaluan; semak sistem untuk kebocoran hawa.	Masalah ini adalah sering dikaitkan dengan pengalaman; itu berhenti apabila anda lebih baik dalam menggunakan sistem.
Erekси separa	Sesi latihan yang tidak cukup.	Lebih banyak latihan menggunakan sistem.	Masalah paling sering membaik dengan terus menggunakan sistem.
Erekси segera hilang (dalam masa kurang dari 5 minit)	Vakum bocor kerana kebocoran hawa, buruknya segel, buruknya pelicir, atau terlalu banyak rambut kemaluan, cecincin sokongan terlalu besar.	Sama dengan "tiada erekси". Gunakan cecincin sokongan yang lebih kecil atau dua cecincin; tanggalkan cecincin sokongan dengan hati-hati.	Menghendaki anda bereksperimen dengan pelbagai saiz cecincin sokongan; temui doktor anda sekiranya anda memerlukan bantuan atau sokongan untuk meneruskan.
Tarikan kulit skrotum	Gel sealing pada skrotum; teknik mengepam yang tidak layak; kurangnya pengalaman dengan sistem.	Hilangkan gel sealing dari skrotum; meneruskan sesi latihan; memiringkan silinder ke bawah selama mengepam.	Masalah boleh hilang apabila anda menjadi lebih baik menggunakan sistem.
Ketidakselesaan atau nyeri selama mengepam	Terlalu cepat mengepam; tarikan tisu skrotum.	Mengepam lebih lambat; terus menggunakan sistem.	Masalah biasanya berhenti apabila anda menjadi lebih baik menggunakan sistem.
Dari Cecincin Pembantu Ereksi	Cecincin Pembantu Ereksi terlalu kecil; kecemasan.	Gunakan Cecincin Pembantu Ereksi yang lebih besar; terus menggunakan sistem.	Masalah biasanya berhenti apabila anda terus menggunakan sistem.
Selama persetubuhan	Buruknya peliciran; tekanan pada daerah sensitif.	Lebih banyak peliciran; mengubah-ubah kedudukan.	
Selama ejakulasi	Tempoh yang lama tanpa seks; infeksi atau pembengkakan pada kelenjar prostat.	Teruskan menggunakan sistem.	Masalah biasanya berhenti apabila anda meneruskan menggunakan sistem; sekiranya berasa nyeri dan ketidakselesaan berterusan, hubungi doktor anda.
Kemerahan,kegatalan atau memar	Terlalu cepat mengepam; terlalu banyak mengepam.	Lebih lambat mengepam; lebih sedikit mengepam.	Berundinglah dengan doktor anda jika masalah ini berterusan melewati beberapa sesi latihan pertama.
Zakar berasa sejuk (bagi anda atau pasangan anda).	Penyempitan aliran darah ke zakar; peliciran.	Basuh pelicir atau pelicir hangat sebelum menggunakan.	
Zakar berputar pada alasnya	Penyempitan aliran darah ke zakar.	Jika mudah dikawal, gunakan sistem selepas anda memperoleh erekси separa.	

Potensi risiko yang dikenal pasti dalam literatur adalah sementara dan termasuk: Lebam zakar, Sakit zakar, Kebas zakar dan Ketidakupayaan untuk ejakulasi.

- ☒ Anda akan merasakan tekanan selagi menerapkan vakum. Ini adalah tidak merbahaya. Sekiranya anda berasa tidak selesa, walaupun bagaimanapun, ia mungkin isyarat bahawa anda mengepam terlalu cepat. Cukup tekan butang pelepas vakum manual, tunggu sebentar dan mulai lagi.
- ☒ Zakar anda menjadi berwarna sedikit kebiruan selepas anda memakai Cecincin Pembantu Ereksi. Ini mungkin merupakan respon normal terhadap peningkatan darah di zakar. Warna kebiruan akan hilang ketika anda menanggalkan cincin sokongan.
- ☒ Anda mengalami petechiae (bintik-bintik kemerahan di bawah kulit) atau lebam pada zakar ketika anda pertama kali mula menggunakan sistem kami. Ini boleh berlaku apabila menempatkan zakar di bawah tekanan terlalu banyak, terlalu lama, dan terlalu cepat, atau selepas masa yang lama tidak mengalami erekси. Sekiranya ini berlaku, berhenti gunakan sistem kami sehingga bintik-bintik atau lebam benar-benar hilang, sekitar 5 – 7 hari.
- ☒ Anda atau pasangan anda merasakan sedikit penurunan suhu pada zakar. Kesejukan ini ialah perkara biasa dan tidak merbahaya. Ini adalah respon normal terhadap berkurangnya darah yang disebabkan oleh cecincin sokongan.
- ☒ Ereksi anda mempunyai kesan "engsel". Zakar boleh berputar pada alasnya ketika cincin ada di tempat. Sekiranya hal ini berlaku, anda mungkin merasa perlu mencuba kedudukan yang berbeza dengan pasangan anda untuk persetubuhan yang berjaya.
- ☒ Air mani anda tidak mengalir pada titik klimaks. Tekanan dari Cecincin Pembantu Ereksi boleh mengganggu proses ejakulasi. Ini adalah tidak berbahaya, dan tidak mempengaruhi klimaks. Air mani anda mungkin mengalir semasa anda menanggalkan cecincin. Cecincin Pembantu Ereksi adalah bukan alat kontrasepsi atau kawalan kelahiran dan tidak boleh digunakan untuk mengelakkan kehamilan.
- ☒ Silinder zakar anda mengembangkan kondensasi dari dalam. Ini hanyalah merupakan hasil panas dari tubuh anda bertindak balas terhadap gel sealing. "Kabut" boleh dikurangkan dengan menjalankan air hangat ke Silinder dan kemudian dikeringkan sebelum digunakan.
- ☒ Menggunakan **Androvacuum®** boleh membuat lebam atau pecah pembuluh darah baik tepat di bawah permukaan kulit atau di struktur-struktur dalam zaka r atau skrotum, menyebabkan pendarahan atau pembentukan pembengkakkan penuh darah. Jangan terlalu bimbang sekiranya anda melihat lebam pada zakar, atau bintik-bintik kecil kemerahan di bawah kulit. Ini adalah dapat berlaku jika anda tidak melakukan seks untuk masa yang lama. Anda harus berhenti menggunakan sistem sehingga masalah diatasi (5 atau 6 hari). Apabila anda menggunakan sistem ini lagi, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan lebih banyak vakum daripada terasa selesa. Gunakan hati-hati dan banyak gel sealing larut dalam air saat menanggalkan Cecincin Pembantu Ereksi.

- Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda Disfungsi Ereksi, (iaitu tidak boleh mendapatkan erekси yang cukup baik untuk persetubuhan), bicarakan dengan doktor anda sebelum menggunakan sistem ini untuk mengelakkan penangguhan yang mungkin berbahaya dalam mencari tahu sebarang penyebab yang paling umum dari keadaan ini, seperti diabetes, multiple sclerosis, luka-luka di hati (cirrhosis of the liver), kegagalan buah pinggang kronik atau alkoholisme.
- Jangan memakai Cecincin Pembantu Ereksi lebih dari 30 minit. Hal ini boleh menimbulkan rasa sakit, lebam, lecet darah, atau kecederaan kekal pada zakar. Hubungi doktor anda sekiranya ada masalah berlaku dan berhenti menggunakan sistem jika ini berterusan.
- Jika anda tidak mengikuti panduan ini anda boleh menyebabkan kecederaan peribadi.

**Androvacuum®** tidak akan menyembuhkan masalah hubungan dengan pasangan anda atau membetulkan masalah fizikal seperti dorongan seks rendah, penurunan sensasi dan ejakulasi tidak ada atau ejakulasi awal.

Jika anda mempunyai penyakit Anemia Sel Sabit, sejarah erekси berpanjangan, atau minum aspirin dalam jumlah yang banyak, atau pencair darah yang lain, jangan gunakan **Androvacuum®** tanpa perundingan doktor anda.

- Penyalahgunaan **Androvacuum®** atau Cecincin Pembantu Ereksi boleh memburukkan keadaan kesihatan yang sudah ada seperti Penyakit Peyronie (suatu keadaan yang menyebabkan distorsi atau lengkungan abnormal pada zakar yang sedang tegak), erekси berpanjangan dan uretra (saluran kemih) disekat.
- Penyalahgunaan **Androvacuum®** atau Cecincin Pembantu Ereksi boleh mengakibatkan pembengkakan zakar atau luka kekal serius di zakar.
- Kerap menggunakan Cecincin Pembantu Ereksi boleh menyebabkan memar pada pangkal zakar (di mana batang zakar berjumpsa kawasan kemaluan), melepuh darah atau nyeri.
- Sikap berhati-hati adalah dinasehati ketika menggunakan **Androvacuum®** selepas pengambilan implant zakar kerana mungkin terjadi parut dan seterusnya kerosakan. Aplikasikan vakum secara berperingkat. Perhatikan memar atau distorsi dari zakar.

# PORTFOLIO



[www.andropenis.com](http://www.andropenis.com)

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



[www.andropeyronie.com](http://www.andropeyronie.com)

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



[www.androvacuum.com](http://www.androvacuum.com)

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



[andromedical.com/shop](http://andromedical.com/shop)

Spare parts and accessories



[www.andropharma.com](http://www.andropharma.com)

## PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

## VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

## CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: [www.andromedical.com](http://www.andromedical.com)

© Copyright 1995-2023 Andromedical®, Madrid (Spain).