



BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH LESEN

Inhaltsverzeichnis	Seite
Über Androvacuum®	2
Bestandteile	3
Medizinische Hinweise	4
Bestandteile für Ihre Penisgröße auswählen	5
Anweisung zur Systembenutzung	6
Anleitung für die Behandlung von Erektionsstörungen	8
Verwendung des Gerätes (Schritt-für-Schritt) – Erektionsstörungen	9
Anleitung für die „sexuelle Fitness“ Therapie	10
Verwendung des Gerätes (Schritt-für-Schritt) – „Sexuelle Fitness“	11
Der ADAM Test	12
Häufige Probleme und Lösungen	13
Vorsichtsmassnahmen	14


Ergonomisch entworfen und hergestellt, besteht **Androvacuum®** aus einem Zylinder der über dem Penis positioniert werden kann. Ferner verfügt er über einen Elektromotor, der einen Sog erzeugt und somit eine Vakuumbildung um den Penis herum hervorruft und Blut in den Penis zieht, der ihm so dabei hilft zu versteifen.

Bitte vor dem Gebrauch lesen:

Schritt 1- Stecken Sie den DC-Ladestecker in das Loch im Motorteil, um zu laden. Stecken Sie dann den USB-Ladestecker in den USB-Anschluss Ihres Computers oder eines anderen Ladegeräts (Ausgang: 5V=1A oder 5V=1,5A).

Schritt 2- Wenn das Produkt geladen wird, blinkt die LED.

Schritt 3- Wenn ein dauerhaftes Licht erscheint, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

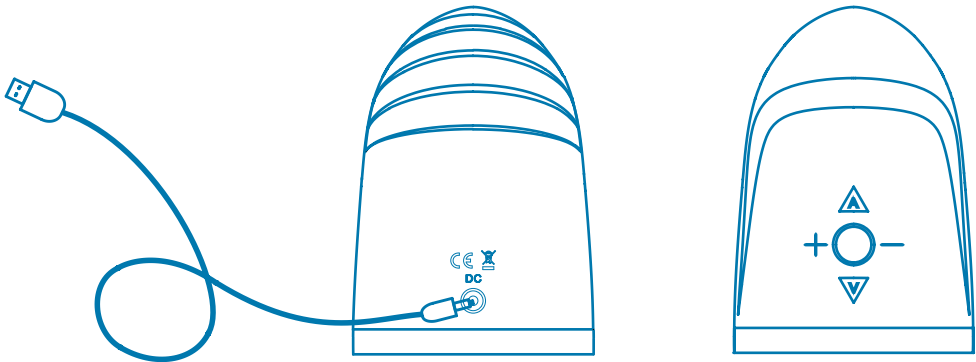

Anmerkung: Schalten Sie die Pumpe vor dem Laden aus. Das Produkt funktioniert während des Ladevorgangs nicht.

BESTANDTEILE

Mittlere Taste, Drücken Sie diese Taste, um das Produkt ein- oder auszuschalten

- Taste, Drücken Sie diese Taste, um die Saugstärke zu verringern, insgesamt 4 Stufen

V Taste, Drücken Sie kurz auf diese Taste, um Luft abzulassen. Drücken Sie lange auf diese Taste um das Produkt kontinuierlich Luft abzulassen.

Pufferring: Adapter notwendig, um das Vakuum im Zylinder zu halten.

A Taste, Drücken Sie diese Taste, um die Absaugung im Automatik-Modus

+ Taste, Drücken Sie diese Taste, um die Saugstärke, insgesamt 4 Stufen

Abnehmbarer Zylinder

Erektions-Assistenzring / Konstriktionsring: um die Erektion aufrecht zu erhalten. Für verschiedene Penisdurchmesser.

USB-Ladestecker

DC-Ladestecker

Hinweis: Dichtungsgel ist nicht in der Packung enthalten, nur in Apotheken erhältlich.

Erektionsstörungen

Androvacuum® wurde für die Behandlung von Erektionsstörungen entwickelt. Es wird davon ausgegangen, dass Millionen von Männern betroffen sind. Erektionsstörungen können ein Zeichen für die Existenz von gravierenden Nerven- bzw. Blutflussstörungen sein. Erektionsstörungen können als Nebenwirkungen während der Einnahme von Medikamenten auftreten. Wenn Sie hiervon ausgehen, sollten Sie einen Arzt konsultieren. Sie sollten die Medikamentendosierung niemals ändern oder beenden, ohne vorher einen Arzt aufgesucht zu haben. Ferner können Zigaretten-, Alkohol- oder Drogenmissbrauch zu Erektionsstörungen führen.

Die Therapie von Erektionsstörungen mit **Androvacuum®** wird empfohlen bei:

- ☒ Männern die aufgrund von Stress, Aufregung oder Angst teilweise keine volle Erektion erhalten.
- ☒ Männern die leicht eine Erektion bekommen, diese aber nicht aufrecht erhalten können.
- ☒ Männern jeden Alters mit Erektionsproblemen. Sogar für diejenigen, die für mehrere Jahre keine Erektionen mehr hatten.
- ☒ Männern mit Erektionsproblemen, die keine ED-Medikamente, aufgrund von Herzbeschwerden, nehmen dürfen.

„Sexuelle Fitness“


Die Vakuumumgebung erhöht den Blutfluss im Penis. Hierdurch wird dieser steif. Mit der Zeit passt sich der Corpus Cavernosum dem erhöhten Blutfluss, der durch das Vakuum hervorgerufen wird, an. Somit erzeugt der Penis den notwendigen Blutfluss selbst, auch wenn vorher keine Vakuumumgebung hervorgerufen wird. Dies bedeutet, dass das Geschlechtsorgan schneller und intensiver auf sexuelle Stimulation reagiert. Ein länger anhaltendes Erektionsproblem kann zur Verkleinerung des Penisgewebe und einer Reduzierung des Blutflusses im Penis führen („Non-use Atrophy“). Ein regelmäßiger Gebrauch von **Androvacuum®** wird die Anzahl nächtlicher Erektionen verdoppeln, die Penisverkleinerung beheben, den Blutfluss im Penis erhöhen und einen guten gesundheitlichen Zustand des Penis unterstützen. **Androvacuum®** kann dabei helfen das Gewebe zu seiner normalen Größe innerhalb von nur 4 Wochen auseinander zu ziehen und den Blutfluss im Penis positiv beeinflussen. Zur selben Zeit, werden Sie eine volle Steifheit und eine Unterstützung der Gesundheit des Penis erhalten.

Die „sexuelle Fitness“ Therapie mit **Androvacuum®** wird empfohlen bei:


- ☒ Männern mit schwachen Erektionen.
- ☒ Männer, die eine schrittweise Abnahme ihrer Erektionen, aufgrund des Alterungsprozesses, eines trägen Lebens, Alkohol- oder Tabakgenusses oder einen hohen Cholesterin- oder Stresswerten feststellen können.
- ☒ Männern mit einem niedrigen Testosteronspiegel (TDS oder Hypogonadismus) und/oder die sich einer Hormonbehandlung unterziehen.

SELECT COMPONENTS FOR YOUR PENIS SIZE AND SET THE DEVICE


1. Beginnen Sie mit dem größten Konstriktionsring. Falls es Ihnen nicht möglich ist das Vakuum mit dem größten Ring aufrecht zu erhalten, nutzen Sie den nächst kleineren Erektion-Assistenz- und Pufferring, solange Sie in der Lage sind das Vakuum und die Erektion aufrecht zu erhalten.
2. Positionieren Sie den Zylinder (mit dem glatten Ende oben) auf einer flachen Oberfläche. Setzen Sie den Konisches System (Motor) auf die Zylinderöffnung. .
3. Packen Sie die beiden Schlaufen des Erektion-Assistenzring so wie dargestellt. Platzieren Sie Ihre Daumen neben den Trichter und ziehen Sie die rechte Seite nach unten. Hierbei sollte Ihr Daumen am Trichter entlang gleiten. Platzieren Sie den Erektion-Assistenzring nah des Zylinderanfangs, um Ich so später leichter am Penisstamm anzubringen (versuchen Sie nicht den Ring ohne Trichter anzubringen. Er könnte reißen).

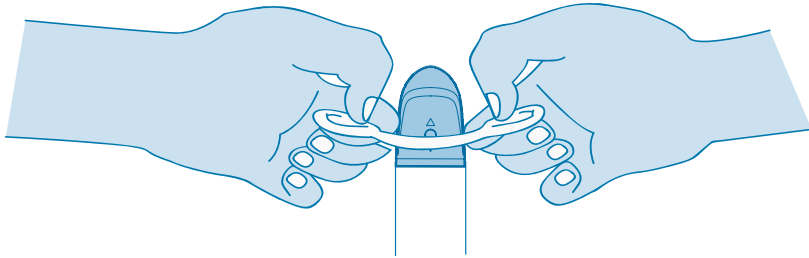

4. Um ein Beschlagen des Zylinders zu vermeiden, sollten Sie vor dem Gebrauch warmes Wasser über diesen gießen.

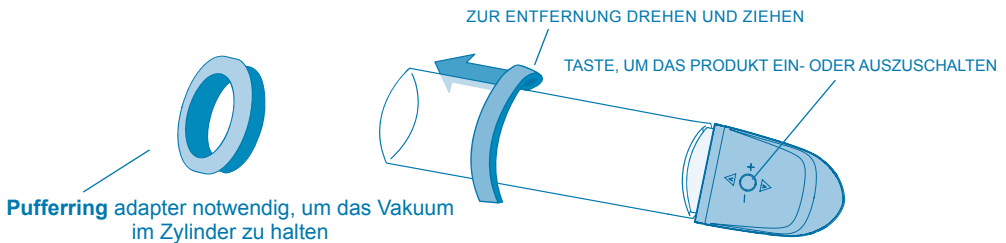

EREKTION-ASSISTENZRING

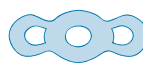

Einer der wichtigsten Schritte ist die richtige Anbringung des Erektion-Assistenzrings. Um Blut im Penis zu behalten, muss der Ring angenehm und stramm, nicht aber enger als nötig sitzen. Falls **Androvacuum®** bei Ihnen eine gute Erektion hervorruft, der Erektion-Assistenzring jedoch nach 5 Minuten lose am Penis sitzt, sollten Sie den nächst kleineren Ring tragen. Die maximale, empfohlene Tragezeit für den Erektion-Assistenzring beträgt 30 Minuten. Falls er länger getragen wird, kann es zu permanenten Schäden führen.

Nachdem die korrekte Ringgröße ausgewählt wurde, wird es nur einige Minuten dauern eine Erektion hervorzurufen.

TRAGEN SIE DEN EREKTION-ASSISTENZRING NIE LÄNGER ALS 30 MINUTEN.

Androvacuum® wird Ihnen dabei behilflich sein, eine volle und befriedigende Erektion in den meisten Fällen hervorzurufen.

- ❗ Warten Sie mindesten 60 Minuten zwischen den Anwendungen.
- ❗ Schlafen Sie nicht, während des Tragens des Erektion-Assistenzring ein.
- ❗ Der Erektion-Assistenzring sollte nicht als Verhütungsmittel genutzt werden.
- ❗ Benutzen Sie den größten Erektion-Assistenzring mit dem die Erektion aufrecht erhalten werden kann.
- ❗ Benutzen Sie den Erektion-Assistenzring nicht unter Alkohol oder Drogeneinfluss.
- ❗ Ein häufiger Gebrauch des Erektion-Assistenzrings kann zu Blutergüssen an der Penisbasis führen (die Stelle an der der Penis auf den Körper trifft). Temporäre Nebenwirkungen können Blutergüsse und kleine rötliche Flecken unter der Haut sein. Seien Sie vorsichtig und benutzen Sie ausreichend wasserlösliches Gleitmittel um den Erektion-Assistenzring zu entfernen.
- ❗ Benutzen Sie keine auf Öl basierende Gleitmittel, wie z.B. Vaseline, da diese angreifend auf die Erektion-Assistenzringe und andere auf Latex basierende Materialien, wie z.B. Kondome, wirken können. Nutzen Sie nur wasserlösliche Gleitmittel und Dämpfungsgels.

MANUELLER VAKUUMREDUZIERUNGSKNOPF UND DIE ERZEUGUNG EINER VAKUUMUMGEBUNG

Ihr Penis sollte sich in **10 bis 90 Sekunden** schmerzfrei aufrichten und versteifen. Es ist normal, wenn Sie bei der Versteifung des Penis einen gewissen Druck verspüren. Falls Sie einen leichten Schmerz bei der Erzeugung der Erektion verspüren, sollten Sie ein geringeres Vakuumniveau erzeugen. Dies können Sie durch das Drücken des manuellen Vakuumreduzierungsknopf erreichen. Mit ein wenig Übung sollten Sie schnell, das für Sie richtige Vakuumniveau finden, mit dem Sie im Stande sind eine volle Erektion zu erzeugen.


Um das Vakuum zu verringern kann der manuelle Vakuumreduzierungsknopf gedrückt werden. Falls das Vakuum zu sehr nachlässt, können Sie dieses einfach durch das Drücken des Aktivierungsknopfes wieder verstärken.

Um den Zylinder vom Penis zu entfernen, drücken Sie den manuellen Vakuumreduzierungsknopf solange bis das Vakuum verschwunden ist. Hiernach können Sie den Zylinder problemlos entfernen.

Bei den meisten Menschen mit Erektionsstörungen wird die Erektion schnell nachlassen, nachdem der Zylinder entfernt wurde. Dies kann man verhindern, indem der Erektion-Assistenzring korrekt angebracht wird. Andererseits kann es auch möglich sein, dass der Erektion-Assistenzring nicht benötigt wird um eine ausreichende Erektion aufrechtzuerhalten und Geschlechtsverkehr zu haben. Es ist durchaus möglich ein erfülltes Sexualleben zu haben, indem Sie nur den **Androvacuum®**, nicht aber die Erektions-Assistenzringe benutzen.

ENTFERNUNG DES ERECTION-ASSITENZRINGS

Achtung: Tragen Sie den Erektion-Assistenzring nie länger als 30 Minuten.

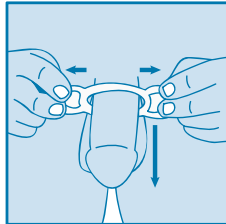

Entfernen Sie den Ring, indem Sie die äußeren Schlaufen nach außen ziehen. Der Ring wird sich so dehnen, was dazu führt, dass das Blut aus dem Penis fließt. Somit können Sie den Erektion-Assistenzring leicht entfernen. Um ein Verwickeln des Schamhaars mit dem Ring vorzubeugen, können Sie etwas Dichtungsgel in das Haar schmieren bevor Sie den Ring anbringen.

1. Schmieren Sie Ihren Penis, das Innere des Zylinders und den Schamhaarbereich (die Zone, die mit dem Erektion-Assisten ring in Kontakt kommt) mit dem Dichtungsgel ein. Dies hilft dabei ein dichtes Vakuum zu schaffen und verhindert, dass der Penis an der Zylinderwand kleben bleibt.
2. Positionieren Sie Ihren Penis in den Zylinder und beginnen Sie mit dem Vakuumaufbau. Schalten Sie den Motor ein, indem Sie den Aktivierungsknopf drücken. Betätigen Sie den Knopf für ungefähr 10 Sekunden. Dies sollte ausreichend seien, um einen Sog zwischen dem System und Ihrem Körper zu erzeugen. Drücken Sie den Knopf solange, bis sich ein ausreichendes Vakuum aufgebaut hat. Nutzen Sie das geringste Vakuum, dass für die Erzeugung einer Erektion notwendig ist.
3. Nachdem sich die gewünschte Erektion eingestellt hat können Sie den zuvor am Zylinder angebrachten Erektion-Assistenzring an der Penisbasis anbringen. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Ring vollständig an der Penisbasis anbringen. Das Vakuum kann dann durch das Drücken des manuellen Vakuumreduzierungsknopfes entfernt werden. Üben Sie einige Male ohne den Erektion-Assistenzring zu benutzen.

Anmerkung 1. Nachdem Sie das System für 30 bis 60 Tage benutzt haben, ist es empfehlenswert die richtige Ringgröße zu kontrollieren. So kann es durchaus sein, dass ein Tragen des nächst größeren Rings für Sie angenehmer ist.


Anmerkung 2. Für einige Paare kann es empfehlenswert seien, den Geschlechtsverkehr zu unterbrechen und den **Androvacuum®** erneut zu benutzen.

Anmerkung 3. Falls gewünscht wird ein Kondom zu benutzen, sollten Sie dieses nachdem sich die Erektion eingestellt hat, anbringen.


Anmerkung 4. Nach dem Gebrauch können der Erektion-Assistenzring, der Pufferring und der Zylinder mit Seife und wasser gereinigt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Tasche für die Aufbewahrung der Erektion-Assistenzringe luftdicht geschlossen wird, um so eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. LASSEN SIE NIEMALS WASSER ÜBER DEN MOTOR LAUFEN.

ACHTUNG


Wenn Sie den Motor auf dem Zylinder anbringen, **ÜBERDREHEN SIE DIESEN NICHT**. Um den Motor anzubringen ist eine 90° Drehung ausreichend. Falls Sie zu weit drehen, wird dies das System beschädigen. Solch ein Schaden wird nicht von der Garantie gedeckt!

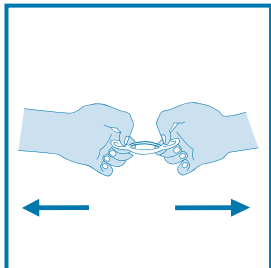


1. Fassen Sie die beiden Griffe des Aufrichthilfe-Rings wie abgebildet.

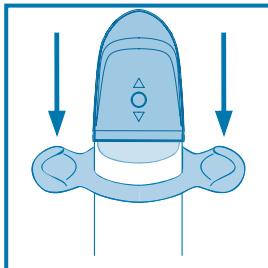


2. Ziehen Sie den Erektion-Assistenzring mit Hilfe des Konisches System (Motor) bis zum Anfang des Zylinders.

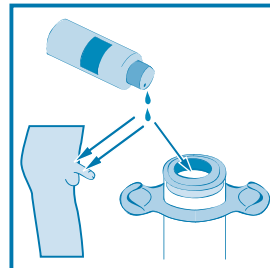


3. Schmieren Sie den Penis, das Innere des Zylinders und Ihren Schambereich mit dem Dämpfungsgel ein.

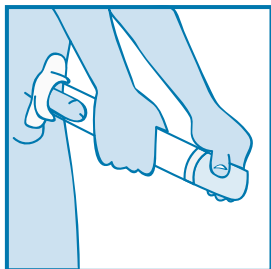

4. Positionieren Sie Ihren Penis in den vorbereiteten Zylinder.

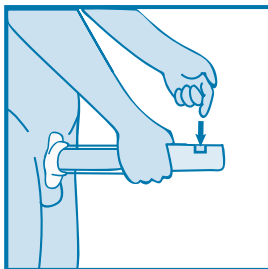


5. Beginnen Sie mit dem Vakuumprozess.

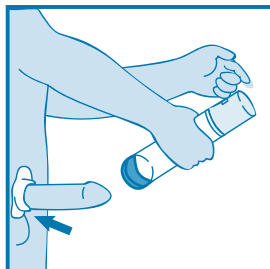

6. Nachdem sich die Erektion eingestellt hat, können Sie den Erektion-Assistenzring an der Penisbasis anbringen. Hiernach sind Sie für den Geschlechtsverkehr bereit.

Befolgen Sie die Schritte 1 und 2, die auf der Seite 8 beschrieben werden.

Der tägliche, therapeutische Gebrauch von **Androvacuum®**, zwischen 5 und 7 Tage pro Woche, kann dabei behilflich sein die Penislänge beizubehalten, die Arterien zu erweitern und eine bessere Durchblutung des Penngewebes fördern. Ein regelmäßiger Gebrauch von **Androvacuum®** kann eine vollständige erektile Funktion des Penis unterstützen. Um mit der Behandlung zu beginnen, benötigen Sie folgende Komponenten:

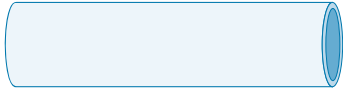

Vakuumzylinder




Pufferringe




Elektromotor

Es ist nicht notwendig die Erektion-Assistenzringe zu benutzen. Sie wurden entworfen um Blut im Penis zu halten und eine für sexuelle Aktivitäten ausreichende Erektion zu erzeugen. Diese Penissteifheit ist für die Sexuelle Fitness Therapie nicht notwendig.

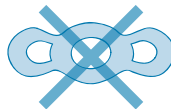


Erektion-Assistenzring


Während einer sexuellen Fitness Behandlung empfehlen wir Ihnen fünf Erektionen hervorzurufen oder den **Androvacuum®** für ungefähr 5-10 Minuten zu gebrauchen. Erzeugen Sie niemals ein so starkes Vakuum, dass sich Schmerzen einstellen.

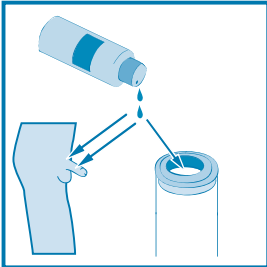


1. Schmier Sie das Dämpfungsgel an den Rand des Vakuumzylinders und den gesamten Penis mit dem Dämpfungsgel ein.

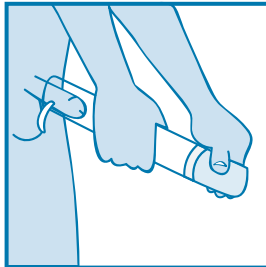


2. Positionieren Sie den Penis in dem Zylinder.

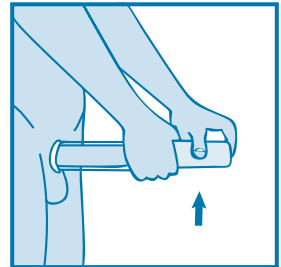


3. Betätigen Sie den Motor für 10 Sekunden und warten Sie für 5 bis 10 Sekunden, um so langsam ein Vakuum zu erzeugen. Wiederholen Sie diesen Vorgang gegebenenfalls.

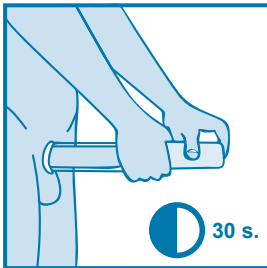

4. Nachdem Sie eine vollständige Erektion erzeugt haben, warten Sie für 30 Sekunden bis Sie das Vakuum ablassen

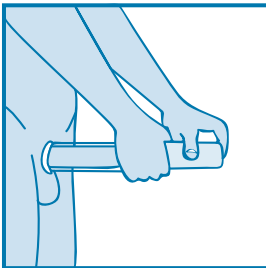

5. Nach 30 Sekunden können Sie den Druck im Zylinder durch das Drücken des "V" Knopfes entfernen.

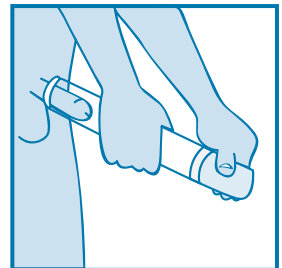

6. Warten Sie bis der Penis wieder schlaff geworden ist und wiederholen den Start-und-Stop Prozess bis sich eine neue Erektion eingestellt hat.

Der ADAM Test ist ein 1-minütiger Test um das Testosteron-Mangel-Syndrom zu überprüfen. ADAM steht für „Androgen Deficiency in Aging Males“.

Der ADAM Test wurde erstmals in **Morley JE, Charlton E, Patrick P, Kaiser FE, Cadeau P, McCready D**, et al. „Validation of a screening questionnaire for androgen deficiency in aging males“. Metabolism 2000; 49:1239–42. veröffentlicht.

Sie können eine erste Einschätzung zu Ihrem Testosteronspiegel erhalten, indem Sie folgende Fragen beantworten:

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Haben Sie eine Abnahme Ihrer Libido (sexuellen Lust) feststellen können? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 2. Fehlt es Ihnen an Energie? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 3. Haben Sie eine Abnahme in Körperstärke und Ausdauer feststellen können? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 4. Haben Sie an Körpergröße verloren? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 5. Konnten Sie einen Abfall an Lebensfreude feststellen? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 6. Sind Sie traurig und/oder mürrisch? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 7. Sind Ihre Erektionen schwächer? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 8. Haben Sie kürzlich eine Abnahme in Ihren sportlichen Fähigkeiten festgestellt? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 9. Schlafen Sie oft nach dem Abendessen ein? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 10. Haben Sie kürzlich eine Abnahme Ihrer beruflichen Leistung feststellen können? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Falls Sie alle Fragen mit „Nein“ beantwortet haben, benötigen Sie höchstwahrscheinlich keinen weiteren Test.

Falls Sie die Fragen 1 bis 7, oder mindestens drei oder mehr Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, könnte ein niedriger Testosteronspiegel der Grund hierfür sein und Sie sollten sich mit einem Arzt in Verbindung setzen.

HÄUFIGE PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEM	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	LÖSUNG	KOMMENTAR
Keine Erektion	Kein Vakuum aufgrund von Luft-eintritt durch schlechte Abdichtung	Nutzen Sie mehr Dichtungsgel; Üben Sie einen größeren Druck auf den Körper aus; Kürzen Sie Ihr Schamhaar; Überprüfen Sie das System nach Stellen, an denen Luft eintreten kann	Problem ist meistens auf Unerfahrenheit zurückzuführen; Es verschwindet mit einiger Übung in der Systemnutzung
Teilweise Erektion	Nicht genügend Trainingseinheiten mit dem System	Mehr Trainingseinheiten mit dem System	Das Problem verschwindet normalerweise mit etwas Übung
Schneller Abfall der Erektion (in weniger als 5 Minuten)	Vakuumverlust aufgrund von Luft-eintritt; Schlechte Abdichtung; Zu viel Schamhaar; Zu großer Erektion-Assistenzring	Wie bei "Keine Erektion"; Nutzen Sie einen kleineren oder zwei Erektion-Assistenzringe; Entfernen Sie die Ringe vorsichtig	Es ist notwendig verschiedene Ring-größen auszuprobieren; Konsultieren Sie Ihren Arzt, falls Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen.
Zug am Hodensack	Dichtungsgel am Hodensack; unangebrachte Pumptechnik; Unerfahrenheit mit dem System	Entfernen Sie das Dichtungsgel vom Hodensack; setzen Sie die Übungseinheit fort; Drücken Sie den Zylinder während des Gebrauchs nach unten	Problem kann mit mehr Erfahrung im Umgang mit dem System verschwinden
Unbehagen oder Schmerzen während des Pumpprozess	Zu schnelles Pumpen; Zug am Hodensack	Langsameres Pumpen; setzen Sie den Pumpprozess fort	Problem kann mit mehr Erfahrung im Umgang mit dem System verschwinden
Problem mit dem Erektion-Assistenzring	Zu kleiner Erektion-Assistenzring; Besorgnis	Verwenden Sie einen größeren Erektion-Assistenzring	Problem mit mehr Erfahrung im Umgang mit dem System verschwinden
Problem während des Geschlechtsverkehr	Schlechte Abdichtung, Druck auf einer sensiblen Stelle	Mehr Dichtungsgel; Veränderung der Position	
Problem während des Ejakulierens	Lange Periode ohne Sex; Infektion oder Schwellung der Prostata	Setzen Sie die Behandlung mit dem System fort	Problem mit mehr Erfahrung im Umgang mit dem System verschwinden; falls Unbehagen oder Schmerzen anhalten sollten Sie einen Arzt aufsuchen
Rötungen, Hautirritationen, Blutergüsse	Zu schnelles Pumpen; Über-pumpen	Langsameres Pumpen; weniger Pumpen	Konsultieren Sie Ihren Arzt wenn, das Problem auch nach den ersten Übungseinheiten anhält
Penis fühlt sich (für Sie oder Ihren Partner) kalt an	Abschnüren des Blutflusses zum Penis; Abdichtung durch Dichtungsgel	Waschen Sie das Dichtungsgel ab oder erwärmen Sie dieses vor dem Gebrauch	
Penis schwankt an der Basis	Abschnüren des Blutflusses zum Penis	Falls möglich, wenden Sie das System an, nachdem sich eine teilweise Erektion eingestellt hat	

SPEZIFIKATIONEN: Werkstoffe: Silikon, ABS und PC. Stromquelle: USB-Ladung eingebauter 800mAh-Lithium-Akku. Pump-Modus: 5 Geschwindigkeitsmodi. Aufladezeit: 3 Stunden. Nutzungszeit: 2 Stunden. Max Lärm: weniger als 50db. Motorteil: Nicht wasserdicht, mit Handtuch abwischen.

- ❗ Sie werden bei der Ausführung des Vakuums einen Druck verspüren. Dies ist nicht gefährlich. Falls Sie ein Unbehagen verspüren, könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass Sie zu schnell pumpen. Drücken Sie einfach den manuellen Vakuumreduzierungsknopf. Warten Sie einen Moment und bauen Sie ein neues Vakuum auf.
- ❗ Ihr Penis kann sich nach der Nutzung des Erektion-Assistenzring ein wenig bläulich verfärben. Dies kann eine normale Antwort auf den erhöhten Blutfluss sein. Die blaue Verfärbung sollte nach dem Entfernen des Unterstützungsrings verschwinden.
- ❗ Bei anfänglicher Nutzung des Systems kann es zu Petechien (kleine rötliche Punkte unterhalb der Haut) und Blutergüssen kommen. Dies kann daran liegen, dass der Penis einem zu großen negativen Druck für zu lange Zeit ausgesetzt wird oder dass Sie seit Längerem keine Erektion mehr hatten. Falls dies für Sie zutreffend ist stoppen Sie solange mit der Behandlung bis die Rötungen oder Blutergüsse komplett verschwunden sind. Dies dauert im Allgemeinen 5-7 Tage.
- ❗ Der Penis könnte sich für Sie oder Ihren Partner etwas kälter anfüllen. Diese Kälte ist normal und nicht gefährlich. Dies ist auf die Reduzierung des Blutflusses, die durch den Erektion-Assistenzring hervorgerufen wird zurückzuführen.
- ❗ Ihr Penis „schwankt“ etwas an der Basis. Es kann vorkommen, dass Ihr Penis an seiner Basis etwas schwankt, wenn der Erektion-Assistenzring angebracht wurde. Falls dies für Sie zutreffend ist, kann es möglich sein, dass Sie verschiedene Positionen für den erfolgreichen Geschlechtsverkehr ausprobieren müssen.
- ❗ Es kommt zu keinem Samenerguss nach dem Höhepunkt. Der Druck der vom Erektion-Assistenzring ausgeht kann den Ejakulationsprozess beeinträchtigen. Dies ist nicht gefährlich und wirkt sich nicht negativ auf den Höhepunkt aus. Der Samen kann nach dem Abnehmen des Rings herausfließen. Die Erektion-Assistenzringe sind keine Verhütungsmittel und sollten nicht zur Vermeidung von Schwangerschaften genutzt werden.
- ❗ Der Penis Zylinder beschlägt von Innen. Der Grund hierfür ist das Wechselspiel zwischen Ihrer Körperwärme und dem kälteren Dichtungsgel. Das Beschlagen kann dadurch vermieden werden, dass man vor dem Gebrauch des Systems warmes Wasser über den Zylinder laufen lässt.
- ❗ Das Nutzen des **Androvacuum®** kann zu Rötungen oder Rissen der Blutgefäße unter der Haut oder in tieferem Gewebe des Penis oder Hodensacks führen. Hierdurch kann es zu Blutungen kommen, die in Schwellungen resultieren. Seien Sie nicht beunruhigt falls Sie Rötungen oder kleine rötliche Punkte am Penis feststellen. Ein Grund hierfür kann sein, dass Sie schon seit längerem keinen Sex mehr gehabt haben. Sie sollten die Behandlung mit dem System solange unterbrechen, bis diese Probleme vollständig geheilt sind (5 oder 6 Tage). Wenn Sie das System erneut benutzen ist es wichtig, dass Sie kein größeres Vakuum, als für Sie komfortable ist, anwenden. Seien Sie vorsichtig bei der Entfernung des Erektion-Assistenzrings und nutzen Sie ausreichend Wasser.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- ❗ Falls Sie Anzeichen für Erektionsstörungen feststellen können (z.B. das Unvermögen eine Erektionen, die stark genug für den Geschlechtsverkehr ist, aufrechtzuerhalten), sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit der Nutzung des Systems beginnen, um so eine mögliche schädliche Verspätung in der Entdeckung der häufigsten dieser Zustände, wie Diabetes, Multiples Sklerose, Leberzirrose, chronischer Niereninsuffizienz oder Alkoholismus, zu vermeiden.
- ❗ Tragen Sie den Erektion-Assistenzring nie länger als 30 Minuten. Er könnte Schmerzen, Rötungen und Blutergüsse, oder eine permanente Penisverletzung hervorrufen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt falls Probleme auftreten und setzen Sie die Behandlung mit dem System nicht fort.
- ❗ Falls Sie diese Anleitungen nicht befolgen, kann dies persönliche Schäden zur Folge haben.

Androvacuum® wird keine Beziehungsprobleme oder körperliche Probleme, wie z.B. eine schwache sexuelle Lust, eine zurückgegangene Empfindlichkeit oder permanente Ejakulationsprobleme, beheben.

Falls Sie unter Sichelzellenanämie oder langanhaltenden Erektionen leiden, oder Sie große Mengen Aspirin oder Blutverdünner benutzen, benutzen Sie den **Androvacuum®** nicht ohne vorher Ihren Arzt konsultiert zu haben.

- ❗ Ein Missbrauch von **Androvacuum®** oder der Erektion-Assistenzringe können bereits bestehende medizinische Zustände, wie z.B. Peyronie (ein Zustand der eine Krümmung des erigierten Penis zur Folge hat), langanhaltende Erektionen oder eine verengte Harnröhre verstärken.
- ❗ Ein Missbrauch von **Androvacuum®** oder der Erektion-Assistenzringe können in einer Anschwellung des Penis und ernsten, permanenten Penisverletzungen führen.
- ❗ Eine häufige Nutzung des Erektion-Assistenzrings können zu Rötungen, Blutergüssen und Schmerzen an der Penisbasis (die Stelle an der der Penis auf den Körper trifft) führen.
- ❗ Es wird dazu geraten den Erektion-Assistenzring aufgrund von möglicher Narbenbildung und später Beeinträchtigungen vorsichtig zu entfernen. Wenden Sie das Vacuum schrittweise an. Untersuchen Sie Ihren Penis nach Rötungen oder Krümmungen.