



MÉTODO DE USO

LER ANTES DE USAR

Índice	Página
SOBRE a Androvacuum®	2
COMPONENTES DO DISPOSITIVO	3
INDICAÇÕES MÉDICAS	4
SELEÇÃO DOS COMPONENTES PARA O TAMANHO DO SEU PÊNIS	5
GUIA PARA USAR O SISTEMA	6
INSTRUÇÕES PARA TERAPIA DE DISFUNÇÃO ERÉTIL	8
USANDO O DISPOSITIVO (PASSO A PASSO) – DISFUNÇÃO ERÉTIL	9
INSTRUÇÕES PARA A TERAPIA “FITNESS SEXUAL”	10
USANDO O DISPOSITIVO (PASSO A PASSO) - “FITNESS SEXUAL”	11
O TESTE ADAM (DAEM)	12
PROBLEMAS COMUNS E SOLUÇÕES	13
PRECAUÇÕES	14

SOBRE A ANDROVACUUM®


Ergonomicamente projetada e construída, a **Androvacuum®** é constituída por um cilindro que se encaixa no pênis, com um motor eletrônico para criar sucção e induzir um ambiente de vácuo em redor do pênis que bombeia sangue para o mesmo e ajuda o pênis a ficar inchado.

Por favor, leia primeiro:

Passo 1- Colocar a ficha de carga DC no furo da parte do motor para carregar. Depois inserir a ficha de carga USB na porta USB do seu computador ou outro carregador (saída: 5V= 1A ou 5V=1.5A).

Passo 2- Quando o produto estiver a carregar, o LED estará a piscar.

Passo 3- Quando aparece uma luz sólida, a carga está completa.

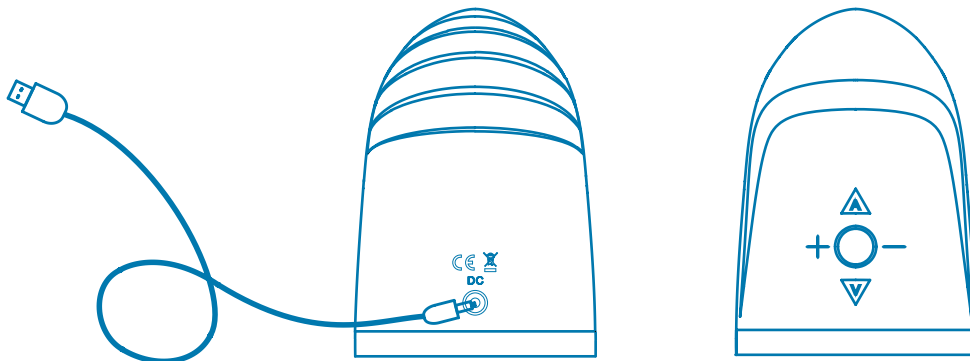

Notas: Antes de carregar, desligue a bomba. O produto não funcionará durante o carregamento.

COMPONENTES DO DISPOSITIVO

Botão do meio, Pressione este botão para ligar ou desligar o produto

- **Botão**, Pressione este botão para diminuir a força de sucção, 4 níveis no total

V Botão, Pressione curto tempo neste botão para libertar ar. Premir muito tempo neste botão para fazer com que o produto liberte ar continuamente

A Botão, Pressione isto botão para obter sucção modo automático

+ **Botão**, Pressione este botão para aumentar a força de sucção, 4 níveis totalmente


Anel de Amortecimento: Adaptador de Montagem Personalizada. Inserção para diferentes tamanhos de pênis, para ser colocado no tubo peniano após o anel ter sido colocado no tubo peniano e o cone removido.

Cilindro Amovível

Anéis de Assistência na Ereção / Anéis de Constrição: tpara ajudarem a manter a ereção. Para diferentes espessuras penianas.

Ficha de carregamento USB

Ficha de carregamento DC

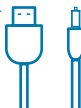

Nota: O gel selante não está incluído na embalagem, apenas disponível nas farmácias.

DISFUNÇÃO ERÉTIL

Androvacuum® destina-se ao tratamento da Disfunção Erétil. Estima-se que milhões de homens são afetados. A Disfunção Erétil pode ser um sinal da existência de um problema sério na circulação sanguínea ou ao nível dos nervos. A Disfunção Erétil é frequentemente o efeito secundário de uma medicação que possa estar a tomar. Se suspeita disto, fale com o seu médico. Nunca deve alterar ou parar de tomar a medicação sem consultar primeiro o seu médico. O tabaco, alcoolismo e o abuso de drogas podem todos contribuir para um distúrbio erétil.

Terapia de Disfunção Erétil com **Androvacuum®**, recomendo para:

- ❑ Homens que por vezes não conseguem ter uma ereção completa devido ao stress, excitação ou medo.
- ❑ Homens que têm facilmente uma ereção, mas têm problemas em mantê-la.
- ❑ Homens com problemas de ereção de todas as idades, mesmo os que não atingem uma ereção há anos.
- ❑ Homens com problemas de ereção que não tomam medicamentos contra a DE devido a problemas cardíacos.

“FITNESS SEXUAL”


Os ambientes de vácuo aumentam a circulação sanguínea para o pénis quando este fica inchado. Com o decorrer do tempo, os ambientes de vácuo regularmente induzidos fazem com que o corpo cavernoso se adapte a estas situações continuamente exigentes. O pénis acaba por produzir o mencionado aumento da circulação sanguínea por si, mesmo quando não é criado um ambiente de vácuo. Isto implica que o órgão sexual reage mais rapidamente à estimulação sexual. Um problema de ereção prolongado pode levar ao encolhimento dos tecidos penianos e a uma redução na circulação peniana (atrofia devido à não utilização). O uso regular da **Androvacuum®** irá duplicar os benefícios das ereções noturnas, revertendo o encolhimento do pénis, recondicionando a circulação peniana e promovendo um regresso à boa saúde do pénis. **Androvacuum®** pode ajudar a esticar os tecidos de volta ao seu estado normal dentro de apenas 4 semanas de uso regular, combinado com uma melhoria na circulação peniana. Ao mesmo tempo, estaria a induzir um inchaço peniano total e promovendo uma boa saúde peniana.

Terapia Fitness Sexual com **Androvacuum®**, recomendada para:


- ❑ Homens que tenham ereções fracas.
- ❑ Homens que estejam a passar por ereções progressivamente mais fracas devido ao processo de envelhecimento, estilo de vida sedentário, consumo de álcool ou tabaco, bem como aos níveis elevados de colesterol ou stress.
- ❑ Homens com baixos níveis de testosterona (SDT ou hipogonadismo) e em suplementos hormonais.

SELEÇÃO DE COMPONENTES PARA O TAMANHO DO SEU PÊNIS E COLOCAÇÃO DO DISPOSITIVO


1. Comece com o maior Assistente de Ereção e Anel de Amortecimento. Se não consegue sustentar o vácuo e a ereção com os anéis maiores, gradualmente use o próximo Assistente de Ereção e Anel de Amortecimento mais pequenos até conseguir sustentar o vácuo e a ereção.
2. Coloque o cilindro (com a ponta suave para cima) numa superfície lisa. Coloque o Sistema Cônico (motor) no tubo peniano..
3. Segure as duas alças do Anel Assistente de Ereção, conforme demonstrado. Coloque as pontas dos seus polegares no topo do anel junto ao Sistema Cônico de Fácil Carga e empurre o anel para baixo. As pontas dos seus polegares deslizam ao longo da superfície do Sistema Cônico de Fácil Carga. Coloque o Anel Assistente de Ereção perto do fim do tubo para uma carga posterior facilitada para a base do pênis (não carregue o anel no tubo puxando as alças, elas podem rasgar).

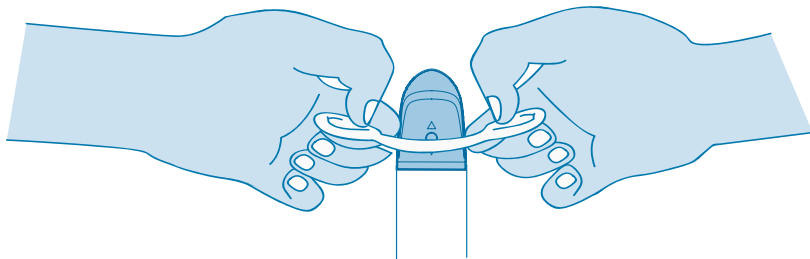

4. Deixando correr água quente sobre o cilindro (antes de montar o motor) irá ajudar a prevenir que o cilindro embacice durante o uso.

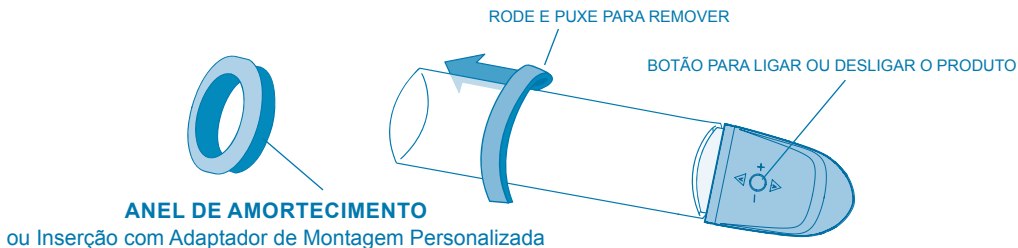

ANÉIS ASSISTENTES DE EREÇÃO

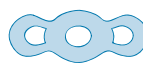

Um dos passos mais importantes é encaixar adequadamente os Anéis Assistentes de Ereção. Para manter o sangue no pênis, o anel deve encaixar-se confortavelmente apertado, mas não deve estar mais apertado que o necessário. Se a **Androvacuum®** lhe der uma boa ereção, mas com o Anel Assistente de Ereção a ficar solto enquanto a usa durante cinco minutos ou menos, deve experimentar o próximo anel mais pequeno..

Trinta minutos é o período de tempo máximo recomendado para usar os Anéis Assistentes de Ereção. Se forem usados por mais tempo é possível ocorrerem danos permanentes.

Após ter optado pelo tamanho correto do anel, só irá demorar alguns minutos para ter uma ereção.

NÃO USE UM ANEL ASSISTENTE DURANTE MAIS DE 30 MINUTOS.

Androvacuum® irá ajudá-lo a atingir uma ereção plena e satisfatória na maioria dos casos.

- ❗ Permita que passem, no mínimo, 60 minutos entre utilizações.
- ❗ Não adormeça usando o Anel Assistente de Ereção.
- ❗ Os Anéis Assistentes de Ereção não devem ser usados como um método de controlo de natalidade.
- ❗ Use o Anel Assistente de Ereção mais largo que sustenha uma ereção.
- ❗ Não use os Anéis Assistentes de Ereção enquanto consome álcool ou drogas.
- ❗ O uso frequente dos Anéis Assistentes de Ereção pode resultar em hematomas na base do pênis (onde o corpo do pênis encontra a área púbica). Os efeitos temporários secundários podem incluir alguns hematomas no pênis ou alguns pequenos pontos vermelhos por debaixo da pele. Proceda com cuidado e use gel lubrificante de água solúvel em quantidade suficiente quando remove o anel de suporte.
- ❗ Não use lubrificantes à base de óleo, tais como vaselina, pois eles serão prejudiciais para os Anéis Assistentes de Ereção e outro tipo de materiais de latex, tais como preservativos. Use apenas lubrificante de água solúvel e gel vedante.

BOTÃO DE LIBERTAÇÃO MANUAL DO VÁCUO E CRIAÇÃO DO AMBIENTE DE VÁCUO

O seu pênis deve ficar preenchido e rígido sem dor em **10 a 90 segundos**. Pode sentir pressão quando o seu pênis começa a ficar ereto devido ao vácuo, o que é normal. Se sentir uma dor ligeira quando o seu pênis começar a ficar preenchido, experimente um nível de vácuo mais baixo carregando no botão de libertação manual do vácuo (com um pouco de prática deve encontrar o seu nível de vácuo correto, para que possa criar uma ereção total).


O **botão de libertação manual do vácuo** pode ser premido para baixar o nível do vácuo. Se for libertado vácuo em demasia, ele pode ser facilmente aumentado premindo o botão de ativação.

Para **remover o pênis do Cilindro**, carregue no botão de libertação manual do vácuo até a pressão do vácuo ter desaparecido. De seguida, pode remover o Cilindro.

A maioria dos homens com Disfunção Erétil perderá grande parte da ereção pouco após removerem o seu pênis do Cilindro. Este problema pode ser resolvido através da montagem correta do **Anel Assistente de Ereção**. Por outro lado, se achar que tem uma ereção suficiente para ter relações sexuais, pode não necessitar usar o **Anel Assistente de Ereção**. Poderá conseguir ter uma boa vida sexual usando apenas o dispositivo **Androvacuum®** sem os Anéis Assistentes de Ereção.

REMOVENDO O ANEL ASSISTENTE DE EREÇÃO

Atenção: Não use o Anel Assistente de Ereção durante mais de 30 minutos

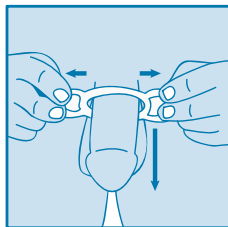

Remova o anel puxando as abas laterais para fora. O anel irá esticar-se, permitindo que o sangue saia do pênis. Depois, pode puxar o Anel Assistente de Ereção com facilidade. Para prevenir que o Anel Assistente de Ereção se enrole nos pêlos púbicos, experimente usar um pouco de gel vedante no pêlo antes de colocar o anel.

1. Lubrifique o seu pênis, o interior do Cilindro e a área dos pêlos púbicos (a área que entra em contacto com os anéis de amortecimento), com o gel vedante. Isto ajuda a formar um bom vácuo com o seu corpo e previne que o pênis fique colado às paredes do cilindro.
2. Insira o pênis no cilindro e inicie o processo de vácuo. Opere o motor premindo no botão de ativação. Prima o botão durante aproximadamente 10 segundos, isso deve criar um selo entre o sistema e o seu corpo. Continue a premir até ter desenvolvido um vácuo suficiente. Use a menor quantia necessária para obter uma ereção.
3. Assim que a ereção desejada tiver sido atingida, transfira o Anel Assistente de Ereção do cilindro para a base do pênis com as pontas dos seus dedos. Certifique-se que o Anel Assistente de Ereção é transferido na sua totalidade. Qualquer vácuo que ainda reste pode ser libertado premindo o botão de libertação manual do vácuo. Pratique algumas vezes sem o Anel Assistente de Ereção.

Nota 1. Após ter estado a usar a **Androvacuum®** durante 30 a 60 dias, pode querer confirmar o tamanho dos anéis que devem ser usados. Por exemplo, pode achar que agora é capaz de usar o próximo tamanho acima do anel. Ao usar o anel maior pode aumentar o seu conforto.


Nota 2. Alguns casais podem preferir parar as relações sexuais pelo menos uma vez e reutilizar a **Androvacuum®**.

Nota 3. Se for necessário usar preservativo, ele deve ser aplicado após ter atingido a ereção.


Nota 4. Após a sua utilização, o Anel Assistente de Ereção, o Anel de Amortecimento e o Cilindro podem ser lavados com sabão e água, secados e guardados. Certifique-se que o saco do Anel Assistente de Ereção não contém ar e está hermeticamente fechado para ter um período de vida mais longo. Nunca coloque o motor na água.

ATENÇÃO


Quando coloca o Cilindro na cabeça da bomba, NÃO APERTE EM DEMASIA. Rode um quarto (1/4) de volta para apertar. Se apertar em demasia irá danificar o sistema. Se isto acontecer NÃO será coberto pela garantia!

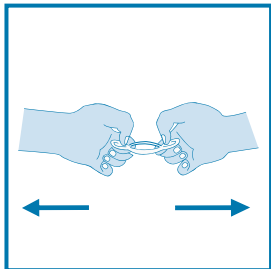


1. Agarrar as duas pegas do Anel Assistente de Montagem, como se mostra.

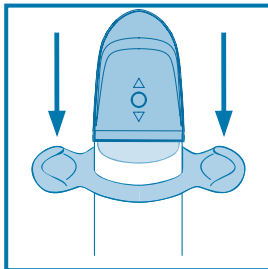


2. Deslize o Anel Assistente de Ereção sobre o Sistema Cônica de Carga (motor) e até à extremidade do Cilindro.

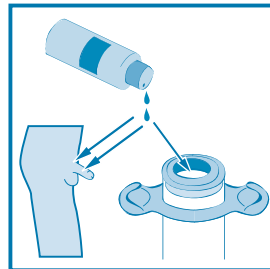


3. Lubrifique o seu pênis, o interior do Cilindro e o seu pêlo púbico com o gel vedante.

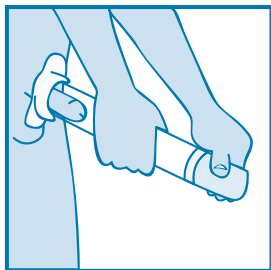

4. Insira o seu pênis no Cilindro preparado.

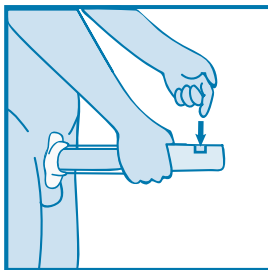

5. Inicie o processo de vácuo.

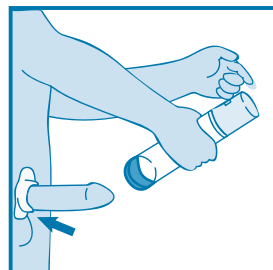


6. Assim que tiver alcançado a ereção deslize o Anel Assistente de Ereção até à base do pênis. Assim que a transferência do anel estiver concluída, você está pronto.

INSTRUÇÕES PARA A TERAPIA “FITNESS SEXUAL”

Siga os passos 1 e 2 conforme descritos na página 8.

O uso terapêutico da **Androvacuum®** uma vez por dia, entre 5 a 7 vezes por semana, pode ajudar a manter o comprimento peniano, a dilatar as artérias e a oxigenar os tecidos penianos. O uso regular da **Androvacuum®** pode promover a função erétil completa. Para começar, os componentes que necessita usar são:

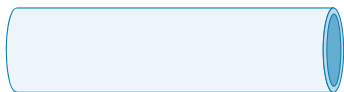

O Cilindro de Vácuo




O Anel de Amortecimento




O Motor Eletrônico

Não necessita usar os Anéis Assistentes de Ereção. Eles estão desenhados para susterm o sangue e manterem uma ereção que permanece rígida durante a atividade sexual. Tal rigidez não é necessária para a Terapia Fitness Sexual.

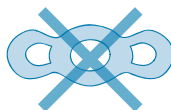


Anéis Assistentes de Ereção


Durante uma sessão de Terapia de Fitness Sexual recomendamos que aponte para produzir 5 ereções ou usar a **Androvacuum®** durante pelo menos 5 a 10 minutos. Nunca opere o motor até ao ponto de causar dor.

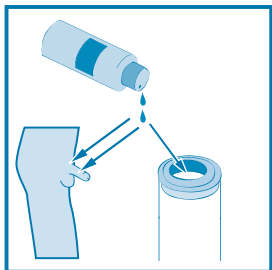


1. Aplique o Gel Vedante na extremidade do Cilindro de Vácuo e em todo o comprimento do pênis.

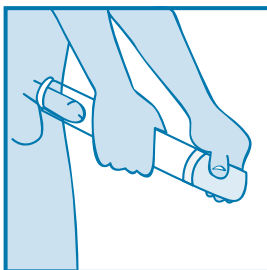


2. Insira o pênis no Cilindro.

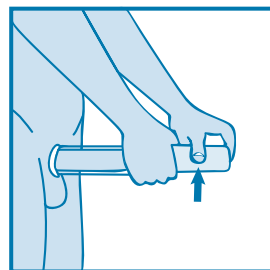


3. Opere o motor durante 10 segundos e depois pare durante 5 a 10 segundos para criar lentamente um ambiente de vácuo. Repita até obter uma ereção total.

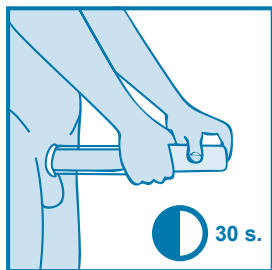

4. Quando tiver atingido uma ereção total, aguarde 30 segundos antes de libertar o vácuo. É esperado e normal sentir aperto e alguma pressão.

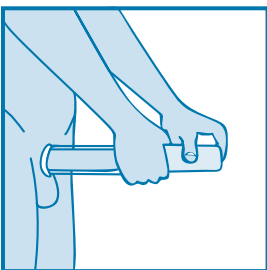

5. Após 30 segundos, liberte a pressão dentro do Cilindro premindo o botão “V”.

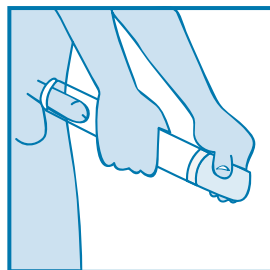

6. Espere até o pênis voltar ao estado flácido e repita novamente o processo iniciar-para até o pênis ficar com uma ereção total.

O TESTE ADAM (DAEM)

O teste ADAM (DAEM) é um teste de 1 minutos para verificar o Síndrome de Deficiência de Testosterona. DAEM significa “Deficiência Andrógena do Envelhecimento Masculino”.

O teste ADAM (DAEM) foi publicado pela primeira vez por **Morley JE, Charlton E, Patrick P, Kaiser FE, Cadeau P, McCready D**, na. “Validação de um questionário rastreio para a deficiência andrógena do envelhecimento masculino”. *Metabolism* 2000; 49:1239–42..

Podem efetuar uma avaliação inicial e intuitiva do seu nível de testosterona respondendo apenas as seguintes questões:

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. Tem uma diminuição da libido (desejo sexual)? | sim <input type="checkbox"/> | não <input type="checkbox"/> |
| 2. Tem falta de energia? | sim <input type="checkbox"/> | não <input type="checkbox"/> |
| 3. Tem uma diminuição na força e resistência? | sim <input type="checkbox"/> | não <input type="checkbox"/> |
| 4. Perdeu altura? | sim <input type="checkbox"/> | não <input type="checkbox"/> |
| 5. Observou uma diminuição do “prazer pela vida”? | sim <input type="checkbox"/> | não <input type="checkbox"/> |
| 6. Está triste e/ou mal-humorado? | sim <input type="checkbox"/> | não <input type="checkbox"/> |
| 7. As suas ereções são mais fracas? | sim <input type="checkbox"/> | não <input type="checkbox"/> |
| 8. Reparou numa recente deterioração na sua capacidade para praticar desportos? | sim <input type="checkbox"/> | não <input type="checkbox"/> |
| 9. Adormece após o jantar? | sim <input type="checkbox"/> | não <input type="checkbox"/> |
| 10. Houve alguma deterioração recente no seu desempenho no trabalho? | sim <input type="checkbox"/> | não <input type="checkbox"/> |

Se respondeu “Não” a todas as questões, muito provavelmente não necessita efetuar mais testes.

Se respondeu “Sim” à questão 1 ou à questão 7, ou a pelo menos três das outras questões, pode ter baixos níveis de testosterona e deve falar com o seu médico ou enfermeira para verificarem qual é o problema.

PROBLEMAS COMUNS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO	COMENTÁRIOS
Sem ereção	Não há vácuo devido a fuga de ar causada por um fraco isolamento	Use mais gel vedante; aplique pressão firme ao corpo; corte os pêlos púbicos; verifique se não há fugas de ar no sistema	O problema está muito frequentemente associado com a inexperiência; ele para quando passa a ficar melhor a usar o sistema
Ereção parcial	Sessões de prática insuficientes	Mais prática usando o sistema	O problema muito frequentemente melhora com o uso continuado do sistema
Perda rápida da ereção (em menos de 5 minutos)	Perda de vácuo devido a fuga de ar, fraco isolamento, fraca lubrificação, ou demasiado pêlo público, anel de suporte demasiado largo	O mesmo da "Não ereção". Use anéis de suporte mais pequenos ou duplos; remova cuidadosamente o anel de suporte	Requer que experimente os vários tamanhos de anéis de suporte; consulte o seu médico se necessitar de ajuda ou apoio para continuar
Agarrar da pele do escroto	Gel vedante no escroto; técnica de bombeamento incorreta; inexperiência com o sistema	Remova o gel vedante do escroto; continue com as sessões de prática; coloque o cilindro inclinado para baixo durante o bombeamento	O problema pode desaparecer à medida que melhora o seu uso do sistema
Desconforto ou dor durante o bombeamento	Bombeamento demasiado rápido; puxando tecido do escrotoe	Bombeamento mais lento, continue a usar o sistema	O problema habitualmente termina à medida que melhora o seu uso do sistema
Do Anel Assistente de Ereção	Anel Assistente de Ereção demasiado pequeno; ansiedade	Use o Anel Assistente de Ereção maior; continue a usar o sistema	O problema habitualmente termina à medida que continua a usar o sistema
Durante a relação sexual	Fraca lubrificação; pressão numa área sensível	Mais lubrificante; mudança de posição	
Durante a ejaculação	Longos períodos sem sexo; infeção ou inchaço da glândula prostática	Continue a usar o Sistema	O problema habitualmente termina à medida que continua a usar o sistema; se a dor ou desconforto continuarem, consulte o seu médico
Vermelhidão, irritação ou hematomas	Bombeamento demasiado rápido; bombeamento excessivo	Bombeamento mais lento; menos bombeamentos	Consulte o seu médico se este problema persistir após algumas das sessões práticas iniciais
O pênis está frio (para si ou para a sua parceira)	Constricção da circulação sanguínea no pênis: lubrificação	Lave o lubrificante ou aqueça o lubrificante antes de usar	
O pênis articula na sua base	Constricção da circulação sanguínea do pênis	Se possível, aplique o sistema após ter uma ereção parcial	

ESPECIFICAÇÕES: Materiais: Silicone, ABS e PC. Fonte de energia: Bateria de lítio de 800mAh de carga USB incorporada. Modo bomba: 5 modos de velocidade. Tempo de carregamento: 3 horas. Tempo de utilização: 2 horas. Ruído máximo: menos de 50db. Peça motora: Não à prova de água, limpar com uma toalha.

- ❗ Irá sentir pressão enquanto aplica a **Androvacuum®**. Isto não é prejudicial. Contudo, se sentir desconforto, isso pode ser um sinal que está a bombear demasiado rápido. Prima simplesmente no botão de libertação manual do vácuo, aguarde uns instantes e comece novamente.
- ❗ O seu pénis fica ligeiramente azulado na coloração após aplicar o Anel Assistente de Ereção. Isto pode ser uma resposta normal ao aumento de sangue no pénis. A cor azulada deve desaparecer quando remover o anel de suporte.
- ❗ Experiencia um pouco de petéquia (pequenos pontos vermelhos sob a pele) ou hematomas no pénis quando usa pela primeira vez a **Androvacuum®**. Isto pode acontecer por colocar o pénis sob demasiada pressão de vácuo durante demasiado tempo, e demasiado rapidamente, ou após um longo período sem ter uma ereção. Se isto acontecer, pare de usar a Androvacuum® até os pontos ou hematomas desaparecem por completo, cerca de cinco a sete dias.
- ❗ Você ou a sua parceira reparam numa ligeira descida da temperatura do pénis. Esta frescura é normal e não é prejudicial. É uma resposta normal à circulação sanguínea reduzida causada pelo anel de suporte.
- ❗ A sua ereção tem um efeito “dobradiça”. O pénis pode articular na sua base quando o anel estiver colocado. Se isto ocorrer, pode achar que é necessário experimentar diferentes posições com a sua parceira para ter relações sexuais bem-sucedidas.
- ❗ O seu sémen não flui no ponto de clímax. A pressão do Anel Assistente de Ereção pode interferir com o processo de ejaculação. Isto não é prejudicial e não afeta o clímax. O seu sémen pode sair quando remover o anel. Os Anéis Assistentes de Ereção não são um método contraceptivo ou de controlo de natalidade e não devem ser usados para evitar a gravidez.
- ❗ O seu Cilindro peniano desenvolve condensação no interior. Isto é simplesmente o resultado do calor do seu corpo reagindo com o gel vedante. O “embaciamento” pode ser reduzido passando água quente pelo Cilindro e depois secando-o antes de o usar.
- ❗ O uso da **Androvacuum®** pode ferir ou quebrar os vasos sanguíneos quer diretamente sob a superfície da pele ou dentro das estruturas mais profundas do pénis ou escroto, resultando em sangramento ou na formação de um inchaço de sangue. Não se preocupe se observar algumas feridas no pénis, ou pequenos pontos de vermelhidão debaixo da pele. Isto irá muito provavelmente ocorrer se não teve relações sexuais há já algum tempo. Deve parar de usar o sistema até o problema estar sanado (5 ou 6 dias). Quando usa novamente o sistema, tenha cuidado para não aplicar mais vácuo do aquele com que se sente confortável. Proceda com cuidado e use gel vedante de água solúvel em quantidade suficiente quando remover o Anel Assistente de Ereção.

- ❗ Se tiver sinais de Disfunção Erétil, (ex., incapaz de obter uma ereção que seja suficientemente forte para ter relações sexuais), fale com o seu médico antes de usar este sistema para evitar um possível atraso prejudicial na descoberta de qualquer uma das causas comuns deste problema, tais como diabetes, esclerose múltipla, cirrose do fígado, falha renal crônica ou alcoolismo.
- ❗ Não use o Anel Assistente de Ereção durante mais de 30 minutos. Ele pode causar dor, hematomas, um blister sanguíneo, ou danos permanentes no pênis. Consulte o seu médico se surgir algum problema e pare de utilizar o sistema se eles continuarem.
- ❗ Se não seguir estas instruções pode causar lesões pessoais.

Androvacuum® não irá curar problemas de relacionamentos ou corrigir problemas físicos, tais como baixo desejo sexual, sensação diminuída e ausência ou ejaculação prematura.

Se tiver um Estigma ou Doença Falciforme, um histórico de ereções prolongadas, ou tomar grandes quantidades de aspirinas ou outros diluentes de sangue, não use a **Androvacuum®** sem consultar o seu médico..

- ❗ A má utilização da **Androvacuum®** ou dos seus Anéis Assistentes de Ereção pode agravar condições médicas já existentes, tais como a Doença de Peyronie (um problema que causa distorção ou curvaturas anormais do pênis ereto), ereção prolongada e uretra bloqueada (trato urinário).
- ❗ A má utilização da **Androvacuum®** ou dos seus Anéis Assistentes de Ereção pode resultar no inchaço do pênis ou em sérias lesões permanentes no pênis.
- ❗ O uso frequente dos Anéis Assistentes de Ereção pode resultar em hematomas na base do pênis (onde o corpo do pênis encontra a área púbica), blister de sangue ou dor.
- ❗ Aconselha-se cuidado quando usa a **Androvacuum®** após a remoção de um implante peniano, devido a possíveis cicatrizes e a posterior deficiência. Aplique o vácuo gradualmente. Esteja atento a hematomas ou deformações do pênis.