

感染症対策の **負担を軽減!**

希釈・含浸不要

サッと使える

次亜塩素酸ナトリウム

J'sGuard クリーパー
0.02w/v% (200ppm)



長期保存

開封前: 2年間
開封後: 1ヶ月



手袋不要

大容量

375枚入り
(ロールタイプ)


コンパクト

100枚入り
(積層タイプ)

ロールタイプ



サッと取り出せる
取り出し口 (特許出願中)

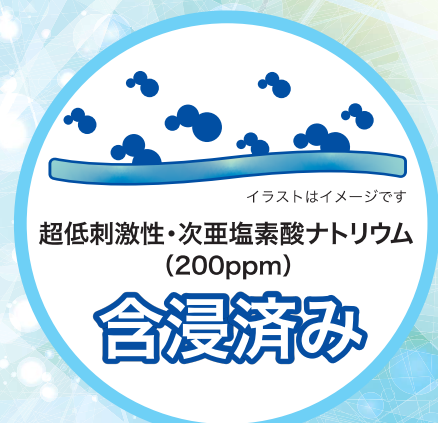

イラストはイメージです

超低刺激性・次亜塩素酸ナトリウム
(200ppm)

含浸済み

検証
試験

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を
15ppm・10秒で**99%以上不活化**

■試験内容: SARS-CoV-2をJ'sGuardに曝露し、ウイルス不活化効果を評価した。
■試験手順: ウイルスの感染によって形成されたブラックの計数を、
ウイルス力価(PFU/mL)を算出した。



作用しない場合

白い部分はウイルス感染によって
形成されたブラック



15ppm・10秒
作用させた場合
99%以上不活性化

J'sGuardの特徴

- 特徴1** 未開封、冷暗所保存の場合
2年間200ppm以上を保持します
- 特徴2** たんぱく汚れに対して
強力な洗浄力を有します
- 特徴3** 独自に開発したPE-TS不織布は
非常に丈夫であり
落とした汚れを強力に
からめとります

J's Guard クリーパーは 独自開発のPE-TS不織布に次亜塩素酸ナトリウムを 含浸した、ウェットワイパーです。

超低刺激性

漂白、金属腐食性も非常に
低く抑えられています。



超低刺激

ノロウイルス対策

接触瞬間除菌を実現する
次亜塩素酸ナトリウムが
推奨されています。※1



※1 新型コロナウイルスは、低濃度の次亜塩素酸ナトリウムに対しても不活化を示します。J's Guardでの不活化試験では、わずか15ppm・10秒、新型コロナウイルスに作用させただけで、99%以上の不活化を確認しています。


※2 J's Guardは、長期保存性、超低刺激性を実現した次亜塩素酸ナトリウムであり、株式会社JSCの登録商標です。

長期保存性 ※2

開封前は2年間

開封後は1ヶ月

機能が持続します。

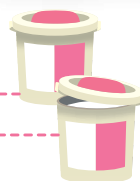

金属腐食比較 (浸漬後2週間経過)


一般的な次亜塩素酸ナトリウム(左)はクリップが腐食しておりますが、J's Guard(右)は少しサビが見受けられる程度です。



J's Guard クリーパーの除菌性能

「数分後に99.99%以上の除菌」とPRされる除菌剤では、数分の間除菌した箇所を触れないということになり、現実的には効果を期待できるものではありません。生活環境では、ウイルスとの接触と同時に不活化効果を持っていることが大切です。

ウイルス感染価測定結果

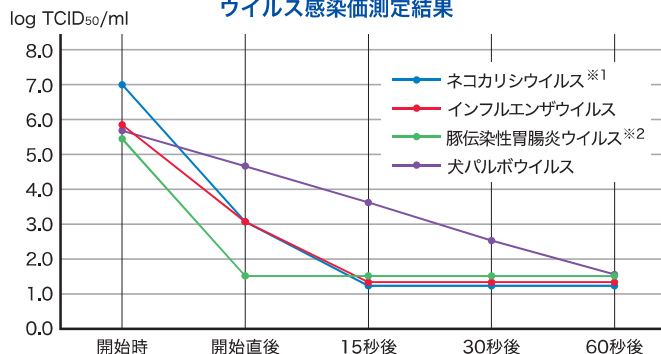

※1 ノロウイルスの代替ウイルス ※2 豚コロナウイルス
TCID₅₀: median tissue culture infectious dose, 50%組織培養感染量
作用温度: 温室

製品仕様



製品タイプ	大容量 ロールタイプ	ロールタイプ 詰め替え	積層タイプ
内容量/規格	375枚入り	375枚入り	100枚入り
商品コード	JW200	JW201	JW202
JANコード	4580674712103	4580674712110	4580674712127

共通仕様

製品名	ジェイズガードクリーパー
含浸成分	0.02w/v% (200ppm) J's Guard (超低刺激性・次亜塩素酸ナトリウム) 液
不織布サイズ	1枚 140mm×200mm
使用期限	未開封2年(冷暗所保管時)、 開封後1ヶ月を目安にご使用ください。

！ 使用上の注意

- ・他の洗剤、薬剤を混合しないでください。
- ・酸性製品との混合、併用は有毒ガス発生の危険があるため、特に注意してください。
- ・液剤が目、口に入った場合は水で洗い流す、水を飲むなどして、異常があれば医療機関を受診してください。
- ・衣類等につくと脱色する場合があります。
- ・不織布は水に溶けませんので、トイレに流さないでください。
- ・金属を腐食させる場合があります。
- ・液剤が飛び散らないよう、不織布はゆっくり引き出してください。

！ 保管上の注意

- ・高温になる場所、直射日光を避けて冷暗所に保管してください。
- ・子どもの手に触れないようにしてください。

<販売店>

株式会社アトレータ

〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原1-2-5 フレンテ新大阪4F
TEL: 06-6151-5207 FAX: 06-6151-5208
E-mail: info@atleta.biz https://www.atleta.biz

<製造販売元>

株式会社JSC

〒540-0039
大阪府大阪市中央区東高麗橋3-32 ニューライフ高麗橋309号
TEL: 06-6766-4077 FAX: 06-6766-4078
E-mail: info@joy-share.com https://www.joy-share.com/

感染症対策の **負担を軽減!**

希釈・含浸不要

サッと使える

次亜塩素酸ナトリウム

J'sGuard クリーパー
0.1w/v%(1000ppm)

含浸済みだから
すぐに
作業可能!

1000ppm以上の
安定した
希釈濃度!

大容量

375枚入り
(ロールタイプ)

コンパクト

100枚入り(積層タイプ)



長期保存

開封前:2年間
開封後:1ヶ月

ロールタイプ



サッと取り出せる
取り出し口

(特許出願中)



イラストはイメージです

次亜塩素酸ナトリウム
(1000ppm)

含浸済み

J'sGuard クリーパー 140mm x 200mm
0.1%次亜塩素酸ナトリウム 含浸済 375枚入り

環境清拭用

専用のPE-TS不織布に含浸済みです。
拭拭、含浸の手間がなくそのまま
お使いいただけます。

次亜塩素酸ナトリウムが洗浄した
環境表面の油分、たんぱく汚れを
非常に丈夫なPE-TS不織布が強力
に絡めとります。

【使用上の注意】

・開封した袋のまま容器に入れて、取出し口に満ちておらずに漏れさせてください。
【使用上の注意】

・他の洗剤、薬剤を混ぜないでください。
・特に酸性洗剤との混合、使用は、有害な塩素ガスが発生して危険です。
・同様に洗剤、アルコール、生ごみ、動物性のフラスコと混ぜないでください。

・必ず換気をよくして使用してください。
・液剤が目、口に入ってしまった場合は水で洗い流す。水を飲むなとして、医師の指示に従ってください。

・使用後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。

・使用後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。

・使用後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。

・使用後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。

・使用後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。

・使用後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。

・使用後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。

・使用後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。

・使用後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。

・使用後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。

・使用後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。
・容器を洗った後は、容器をしっかりと洗浄してください。

J'sGuardの特徴

特徴1 未開封、冷暗所保存の場合
2年間1000ppm以上を保持します


特徴2 たんぱく汚れに対して
強力な洗浄力を有します

特徴3 独自に開発したPE-TS不織布は
非常に丈夫であり
落とした汚れを強力にからめとります

J's Guard クリーパーは 独自開発のPE-TS不織布に次亜塩素酸ナトリウムを 含浸した、ウェットワイパーです。



ノロウイルス対策

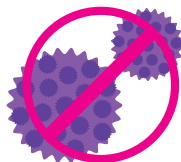

接触瞬間除菌を実現する次亜塩素酸ナトリウムが推奨されています。

長期保存性

開封前は2年間


開封後は1ヶ月



長期保存試験結果

J's Guard クリーパーは、
非常に高い残存率で有効塩素濃度を維持しています。

J's Guard クリーパーを未開封の状態、40℃に24時間保たれた加速装置にて保管しました。加速装置での1カ月は6カ月間に換算されます。

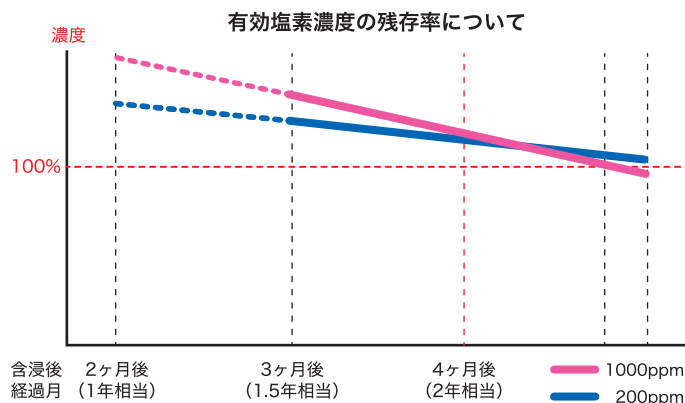

製品仕様



製品タイプ	大容量 ロールタイプ	ロールタイプ 詰め替え	積層タイプ
内容量/規格	375枚入り	375枚入り	100枚入り
商品コード	JW1000	JW1001	JW1002
JANコード	4580674712073	4580674712080	4580674712097

共通仕様

製 品 名	ジェイズガードクリーパー
含 浸 成 分	0.1w/v%(1000ppm)次亜塩素酸ナトリウム液
不織布サイズ	1枚 140mm×200mm
使 用 期 限	未開封2年(冷暗所保管時)、 開封後1ヶ月を目安にご使用ください。

まぜるな危険

- ・酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。
- ・換気をよくして使用してください。
- ・子供の手に触れないようにしてください。
- ・液が目に入ったらずちに水で洗ってください。



危険

- ・金属腐食の恐れ
- ・飲み込むと有害
- ・重篤な皮膚の薬傷および目の損傷
- ・臓器の障害のおそれ
- ・長期間による、または反復暴露による臓器の障害のおそれ(全身毒性)

使用上の注意

- ・他の洗剤、薬剤を混合しないでください。
- ・特に酸性製品との混合、併用は、**有毒な塩素ガスが発生して危険**です。
- ・同様に食酢、アルコール、生ごみ、動物性のブラシと混ざらないようにしてください。
- ・必ず換気をよくして使用してください。
- ・液剤が目、口に入った場合は水で洗い流す、水を飲むなどして、異常があれば医療機関を受診してください。
- ・体調が悪いときは、使用しないでください。・衣類等につくと脱色します。
- ・金属を腐食させますので注意してください。・不織布は水に溶けませんので、トイレに流さないでください。
- ・使用するときはゴム製でぶくろ等を着用し、液剤に触れないようにしてください。
- ・液剤が飛び散らないよう、不織布はゆっくり引き出してください。
- ・高温になる場所、直射日光を避けて冷暗所に保管してください。
- ・子供の手に触れないようにしてください。

<販売店>

株式会社アトレータ

〒532-0003

大阪府大阪市淀川区宮原1-2-5 フレンテ新大阪4F

TEL: 06-6151-5207 FAX: 06-6151-5208

E-mail: info@atleta.biz https://www.atleta.biz

<製造販売元>

株式会社JSC

〒540-0039

大阪府大阪市中央区東高麗橋3-32ニューライフ高麗橋309号

TEL: 06-6766-4077 FAX: 06-6766-4078

E-mail: info@joy-share.com https://www.joy-share.com/