



NOTICE D'UTILISATION

NOVA

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)

INDICATIONS

Morphologie ou pathologies du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied : inflammation et rhumatismes, hallux valgus, quintus varus, orteils en griffe ou en marteau, œdèmes.

Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

COMPOSITION

- Dessus : polyester, polyamide, polyuréthane
- Doublure : polyester
- Semelle en polychlorure de vinyle (PVC)
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODONELLY)

MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant large
- Zone extensible sur l'avant du pied permettant de s'adapter à la morphologie et aux déformations des orteils
- Réglage facile grâce à la longue bride auto-agrippante permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire ou oedématié.

PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La peinture doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée ou une peau à risque de lésion cutanée. En cas de lésion ou de risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Bien ajuster le réglage pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer.

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Laver la semelle intérieure à la main.

Laver la chaussure à la main ou en machine à 30°C maximum, sans essorage ou avec un essorage doux.


Si la chaussure n'est pas bien rincée, les résidus de lessive peuvent irriter la peau et détériorer le produit.

Laisser sécher à l'air libre après avoir remis l'embauchoir pour éviter la déformation de la chaussure.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussures dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.

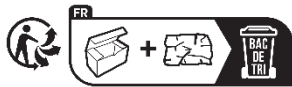

quefairedemesdechets.fr

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE :

Vous avez acheté une paire de chaussures **NOVA**, nous aimerions savoir si vous en êtes satisfait. Vos remarques nous sont utiles pour améliorer nos produits.

Vous pouvez nous en faire part en tapant ce lien dans votre navigateur de recherche :

<https://fr.surveymonkey.com/r/qr-nova>

ou en scannant directement ce QR Code avec l'appareil photo de votre téléphone portable.



Dispositif médical de classe I

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Fabricant :

FARGEOT Cie SAS

Route de Limoges

24800 Thiviers- France

service-client@podowell.com

Version de la notice : V1 Mai 2023