

歯科用 シャープニングフリー インstrument  
LM シャープダイヤモンド

HAKUSUI

LM

feel the difference

シャープニングが  
不要です!



こんな悩みの  
ある方に  
おススメ!

忙しくて  
シャープニングの  
時間がない



シャープニング  
が苦手...



原型を崩して  
しまい、寿命を  
短くしてしまう



LM シャープダイヤモンドを使えばすべて解決!

次世代 PVD コーティングと人間工学的ハンドルで疲れ知らず

1

シャープニングをしなくても切れ味が持続する  
シャープニングフリー

切れ味が  
持続するよ



2

人間工学に基づいたエルゴノミックデザイン  
エルゴセンスハンドル


持ちやすく  
疲れにくいよ



3

非常に耐久性の高い特殊金属でコーティング  
PVD コーティング

【耐摩耗性の比較】

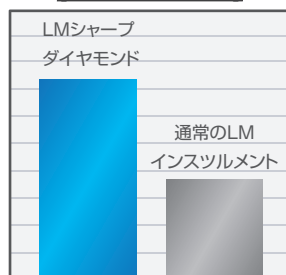

シャープダイヤモンドは、  
1.8倍以上の耐摩耗性を  
示しました。(従来品比)

これが  
シャープニング  
フリーの秘密



買い替え時期は  
テストスティックで  
チェックしてね



※PVD : Physical Vapor Deposition  
物理蒸着法のこと、非常に硬く耐摩耗性がある

※LM シャープダイヤモンドは、  
シャープニングを行うことができません





# LM ErgoSense SHARP DIAMOND

## LM シャープダイヤモンドシリーズ

**NEW** ご好評につきラインナップを追加しました!!

バツグンの持ちやすさ!

エルゴセンス(ES)

ハンドルは  のみ

### グレイシーキュレット

LMエルゴセンス

NEW



LM シャープダイヤモンド  
グレイシーキュレット 1-2 201-202 SD ES  
- 前歯用

NEW



LM シャープダイヤモンド  
グレイシーキュレット 7-8 207-208 SD ES  
- 臼歯の類側・舌側用

NEW




LM シャープダイヤモンド  
グレイシーキュレット 11-12 211-212 SD ES  
- 臼歯の近心用

NEW



LM シャープダイヤモンド  
グレイシーキュレット 13-14 213-214 SD ES  
- 臼歯の遠心用

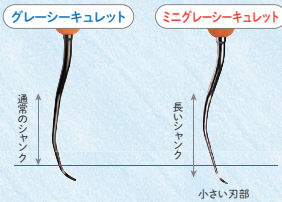

#### グレイシーキュレットと ミニグレイシーキュレットの比較

ミニグレイシーキュレットは、グレイシー  
キュレットよりも第一シャングが3mm長  
く、刃部が小さい。

### ミニ グレイシーキュレット

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド  
ミニ グレイシーキュレット 1-2 201-202 MSD ES  
- 前歯用



LM シャープダイヤモンド  
ミニ グレイシーキュレット 7-8 207-208 MSD ES  
- 臼歯の類側・舌側用



LM シャープダイヤモンド  
ミニ グレイシーキュレット 11-12 211-212 MSD ES  
- 臼歯の近心用



LM シャープダイヤモンド  
ミニ グレイシーキュレット 13-14 213-214 MSD ES  
- 臼歯の遠心用



LM シャープダイヤモンド  
ミニ グレイシーキュレット 15-16 245-246 MSD ES  
- 臼歯の近心用 (#11-12よりシャングが鋭角)



LM シャープダイヤモンド  
ミニ グレイシーキュレット 17-18 247-248 MSD ES  
- 臼歯の遠心用 (#13-14よりシャングが鋭角)

### シックルスケーラー

LMエルゴセンス

NEW



LM シャープダイヤモンド  
シャープジャック 315-316 SD ES  
- 全ての部位  
- ブレードが細く傾斜があるため、臼歯隣接面や  
歯間部にも最適

NEW



LM シャープダイヤモンド  
ネプラスカ 128 128-128 SD ES  
- 前歯用  
- ブレードが細く歯間部にも最適

NEW



LM シャープダイヤモンド  
シックル LM23 313-314 SD ES  
- 全ての部位  
- ミニシックルよりブレードが短く第一シャングが長い

NEW



LM シャープダイヤモンド  
スケーラー H6-H7 146-147 SD ES  
- 全ての部位

### ミニ シックルスケーラー

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド  
ミニ シックル 311-312 SD ES  
- 全ての部位  
- 特に隣接面に使用

### マイクロ シックルスケーラー

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド  
マイクロ シックル 301-302 SD ES  
- 刃部が非常にコンパクト  
- タイムな歯間空隙に使用

### ユニバーサルキュレット

LMエルゴセンス

NEW



LM シャープダイヤモンド  
コロンビア 4L-4R 219-220 SD ES  
- 全ての部位  
- 特に臼歯用

NEW



LM シャープダイヤモンド  
パンハルト 5-6 227-228 SD ES  
- 全ての部位  
- 第一シャングが短い

### ミニ シンテット

LMエルゴセンス



LM シャープダイヤモンド  
ミニ シンテット 215-216 MSD ES  
- ユニバーサルキュレットとグレイシーキュレット  
を組み合わせた両刃のデザイン  
- 根分岐部や隣接面に最適

医療機器届出番号 27B1X00020228039 一般医療機器  
医療機器届出番号 27B1X00020228040 一般医療機器  
医療機器届出番号 27B1X00020228041 一般医療機器

LM feel the difference

LM インструメンツ社  
(フィンランド)

 白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814  
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス212F ☎(03)5217-4618  
〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877  
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618  
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>

2020.02P5,000 B09 Ver.2.1.1