

INSTRUKCJA OBSŁUGI S091

Importer: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Parkowa 2, 64-330 Sielinko, Poland

Cechy produktu:



- Pistolet do masażu MK-701
- Materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 12 x 6,4 x 3,3 cm
- Do stosowania na suchą skórę Zasilanie: USB Napięcie wejściowe: 5 V Napięcie wyjściowe: 8,4V; Moc wyjściowa: 16,8 WH Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy; czas pracy: w zależności od obrotów i intensywności użytkowania ok. 2 godziny.

Sposób użycia: Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie do pełna przez 3 godziny. W tym celu podłącz zasilacz do portu ładowania urządzenia, a następnie do gniazdka. Podczas ładowania dioda LED regularnie miga. Po naładowaniu wskaźnik LED świeci stałym. Oznacza to, że akumulator jest naładowany. Zamontuj dedykowaną głowicę w zależności od masowanej części ciała. Dociśnij głowicę rowkiem do pistoletu i wsuń do końca. Upewnij się, że głowica jest dociśnięta i stabilnie umocowana. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć. Przyłóż głowicę do wybranego miejsca na ciele i delikatnie przesuwaj po skórze.

Zalecany czas masażu punktowego to około 60 sekund. Aby zmienić poziom, naciśnij przycisk ON/OFF. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij kilkakrotnie przycisk ON/OFF. Po przejściu przez wszystkie poziomy urządzenie się wyłączy.

Ostrzeżenia:

Produkt do stosowania tylko przez i u osób dorosłych. Produkt do użytku tylko na miękkich tkankach. Nie należy używać do masażu głowy, kości, twardych części ciała. Podczas masażu tkanek miękkich nie powinien występować ból ani dyskomfort. Nie należy używać produktu w sposób ciągły dłużej niż godzinę.


Przed ponownym użyciem odczekaj 30 minut. Przed użyciem, po naładowaniu, odłącz urządzenie od ładowarki. Nie zaleca się wyczerpywania baterii do poziomu oznaczonego przez czerwoną diodę LED. Stosuj produkt na czystą, suchą, gołą skórę. Nie należy wykonywać masażu przez ubranie. Trzymaj palce, włosy z dala od pracującej głowicy i otworu odprowadzającego ciepło, w celu uniknięcia obrażeń. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworze wentylacyjnym. Przed wymianą głowicy wyłącz urządzenie. Masowanie tego samego miejsca przez dłuższy czas może powodować otarcia. Jeżeli podczas używania produktu pojawi podrażnienie skóry, ból, natychmiast przerwij używanie produktu i skonsultuj się z lekarzem. Podczas masażu nie należy dociskać głowki do skóry zbyt mocno. Jeżeli podczas używania produktu skóra zaczerwieni się, zmniejsz nacisk. Produktu nie należy używać bezpośrednio w okolicy tatuaży, ciemnobrązowych i czarnych plam. Użycie wokół sutków, narządów płciowych lub odbytu jest zabronione. Nie stosować na zmiany chorobowe skóry. Użycie produktu na podrażnioną skórę może spowodować zakażenie bakteryjne. Po każdym użyciu wyczyść produkt. Wyczyść wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha. Nie

 **Głowica U - do masażu szyi, ścięgna Achillesa**

 **Do rozluźnienia mięśni**

 **Głowica kulowa - do dużych grup mięśni**

 **Do masażu głębokich tkanek**

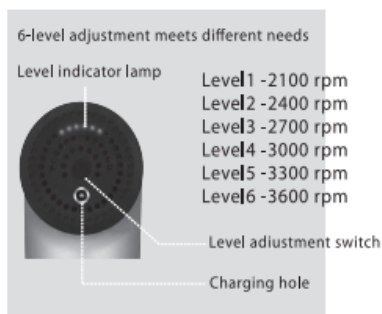

zanurzaj w wodzie. Nie należy używać do czyszczenia środków żrących, wybielaczy. Nie narażaj urządzenia na zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy suszyć, przechowywać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kaloryfery. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Nie należy demontować produktu. Nie należy zostawiać ładującego się urządzenia bez nadzoru. Nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Produkt musi być odpowiednio zabezpieczony podczas używania i przechowywania. Nie należy używać uszkodzonego produktu. Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chronić urządzenie przed dziećmi. **Przeciwwskazania:** Choroby zakaźne skóry, stany zapalne, otwarte rany, trądzik, pieprzyki, cukrzyca, egzema, łuszczyca, zapalenie nerwu, zaburzenie czucia, niezidentyfikowane bóle w okolicach masowanych, żółtaczka, białaczka, opryszczka, skóra naczynkowa, choroby nowotworowe, choroby serca, ciąża, choroby dermatologiczne, żylaki, pękające naczynka, przebarwienia. Nie należy używać produktu w przypadku atopowego zapalenia skóry, chorób dermatologicznych, cukrzycy, nadwrażliwości skóry, alergii, problemów z krążeniem, przyjmowania sterydów, jeżeli masz założony stymulator.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



GEBRAUCHSANLEITUNG S091

Importeur: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Parkowa 2, 64-330 Sielinko, Poland

Produktbeschreibung:



- Massagepistole MK-701
- Material: Kunststoff; Maße: 12 x 6,4 x 3,3 cm
- Zur Anwendung auf trockener Haut Stromversorgung: USB-Eingangsspannung: 5 V Ausgangsspannung: 8,4 V; Ausgangsleistung: 16,8 Wh Leistung: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku; Betriebsdauer: je nach Geschwindigkeit und Nutzungsintensität ca. 2 Stunden.

Gebrauchsanweisung: Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 3 Stunden lang vollständig auf. Verbinden Sie dazu das Netzteil mit dem Ladeanschluss des Geräts und dann mit einer Steckdose. Während des Ladevorgangs blinkt die LED regelmäßig. Nach dem Aufladen leuchtet die LED-Anzeige durchgehend. Dies bedeutet, dass der Akku geladen wird. Installieren Sie je nach zu massierendem Körperteil einen speziellen Kopf. Drücken Sie den Kopf mit der Nut gegen die Pistole und führen Sie ihn vollständig ein. Stellen Sie sicher, dass der Kopf nach unten gedrückt und fest fixiert ist. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Legen Sie den Kopf auf die ausgewählte Stelle am Körper und bewegen Sie ihn sanft über die Haut. Die empfohlene Zeit für eine Punktmassage beträgt etwa 60 Sekunden. Um die Stufe zu ändern, drücken Sie die ON/OFF-Taste. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie mehrmals die ON/OFF-Taste. Nachdem Sie alle Ebenen durchlaufen haben, schaltet sich das Gerät aus.

 **U-Kopf – für Nackenmassage, Achillessehne**


 **Zur Muskelentspannung**

 **Kugelhkopf – für große Muskelgruppen**

 **Für die Tiefengewebssmassage**

Warnungen:

Produkt nur zur Verwendung durch und für Erwachsene. Produkt nur zur Verwendung auf Weichgewebe. Nicht zum Massieren von

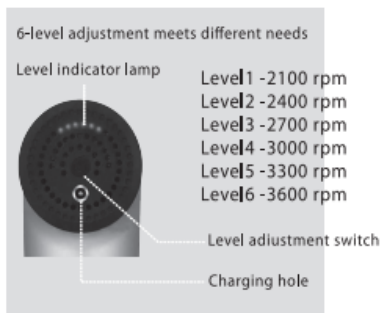

Kopf, Knochen oder harten Körperteilen verwenden. Während der Weichgewebemassage sollten keine Schmerzen oder Beschwerden auftreten. Verwenden Sie das Produkt nicht länger als eine Stunde ununterbrochen. Warten Sie 30 Minuten, bevor Sie es erneut verwenden. Trennen Sie das Gerät vor dem Gebrauch nach dem Aufladen vom Ladegerät. Es wird nicht empfohlen, die Batterie auf das von der roten LED angezeigte Niveau zu entladen. Tragen Sie das Produkt auf saubere, trockene, nackte Haut auf. Nicht durch die Kleidung einmassieren. Halten Sie Finger und Haare vom Arbeitskopf und der Wärmeableitungsöffnung fern, um Verletzungen zu vermeiden. Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnung. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Kopf austauschen. Langes Massieren derselben Stelle kann zu Scheuern führen. Wenn Sie während der Verwendung des Produkts Hautirritationen oder Schmerzen verspüren, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und konsultieren Sie Ihren Arzt. Drücken Sie den Kopf während der Massage nicht zu stark. Wenn Ihre Haut während der Verwendung des Produkts rot wird, reduzieren Sie den Druck. Das Produkt sollte

nicht direkt im Bereich von Tattoos, dunkelbraunen und schwarzen Flecken angewendet werden. Die Anwendung im Bereich der Brustwarzen, der Genitalien oder des Anus ist verboten. Nicht auf Hautläsionen anwenden. Die Anwendung des Produkts auf gereizter Haut kann eine bakterielle Infektion verursachen. Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch. Mit einem feuchten Tuch reinigen, dann trockenwischen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel zur Reinigung. Setzen Sie das Gerät nicht zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen schützen. Nicht trocknen, das Produkt in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizkörpern lagern. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Lassen Sie das Ladegerät nicht unbeaufsichtigt. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet. Das Produkt muss während des Gebrauchs und der Lagerung angemessen geschützt werden. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Kontraindikationen: Infektionskrankheiten der Haut, Entzündungen, offene Wunden, Akne, Muttermale, Diabetes, Ekzeme, Psoriasis, Neuritis, Sensibilitätsstörungen, nicht erkennbare Schmerzen im massierten Bereich, Gelbsucht, Leukämie, Herpes, Couperose, Krebs, Herzerkrankungen, Schwangerschaft, dermatologische Erkrankungen, Krampfadern, geplatzte Äderchen, Verfärbungen. Verwenden Sie das Produkt nicht bei atopischer Dermatitis, dermatologischen Erkrankungen, Diabetes, Hautüberempfindlichkeit, Allergien, Kreislaufproblemen, Einnahme von Steroiden, wenn Sie einen Stimulator tragen.

Benutzerinformationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte)

Das auf den Produkten oder der ihnen beigelegten Dokumentation abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bei Notwendigkeit der Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten, der Verwertung, Wiederverwendung oder Verwertung von Bauteilen ist das Gerät an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo es unentgeltlich entgegengenommen wird. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren lokalen Händler zurückgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts können Sie wertvolle Ressourcen schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung beeinträchtigt werden könnten. Detaillierte Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit Strafen geahndet, die in den entsprechenden örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. **Benutzer in Ländern der Europäischen Union:** Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an die nächste Verkaufsstelle oder den

nächstgelegenen Lieferanten. Zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der **Europäischen Union:** Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

