



Opis

Soczewki DAILIES AquaComfort Plus Toric



Jednodniowe toryczne soczewki kontaktowe dla wyraźnego widzenia i odświeżającego komfortu przez cały dzień^{1*}.

Jednodniowe soczewki DAILIES AquaComfort Plus Toric to bezpieczny i łatwy sposób użytkowania soczewek kontaktowych.

Codziennie rano zakładasz nową, świeżą parę jednodniowych soczewek kontaktowych DAILIES AquaComfort Plus Toric i nie musisz się martwić o ich czyszczenie, dezynfekcję czy też przechowywanie. Zdejmujesz je i wyrzucasz, zanim na ich powierzchni zdążą się zgromadzić drażniące osady. Jest to prosty i wyjątkowo higieniczny sposób na poprawę jakości widzenia osób z astygmatyzmem.

Zaprojektowane dla nowoczesnego stylu życia.

Nacisk wywierany na soczewkę przez powiekę powoduje uwalnianie na jej powierzchni niewielkiej ilości środka nawilżającego².

Unikalny materiał na bazie PVA, nelfilcon A, wspiera wydłużenie czasu zerwania filmu łzowego i redukuje suchość dzięki dobrej charakterystyce zwilżalności powierzchni².

• PVA jest związkiem nawilżającym, częstym składnikiem kropli nawilżających

• HPMC dodana do blistra daje komfort początkowy jak krople nawilżające;

• PEG uwalniany jest dla komfortu na początek dnia;

• PVA współdziała z PEG w celu zapewnienia komfortu przez cały dzień^{3,4*}

• Uwalnianie z soczewek w trakcie ich noszenia związki nawilżające zapewniają odświeżający komfort przez cały dzień, już od pierwszego mrugnięcia^{1*}


• Uwalnianie związków nawilżających przy każdym mrugnięciu zapewnia stabilizację filmu łzowego, co wspiera dobre widzenie i komfort przez cały dzień^{1*}

• Dzięki poprawie stabilności filmu łzowego soczewki te są doskonałym wyborem podczas wyzwań nowoczesnego trybu życia i przy objawach sezonowej alergii oczu⁵.

• Konstrukcja Precision Curve zapewnia soczewkom DAILIES AquaComfort Plus Toric wyjątkową stabilność, dzięki czemu aż 99% soczewek przy mruganiu wykazuje oscylacje poniżej 5°, dając użytkownikom stabilne, ostre i dokładne widzenie^{6,7†}.



SYSTEM NAWILŻAJĄCY AKTYWOWANY MRUGANIEM

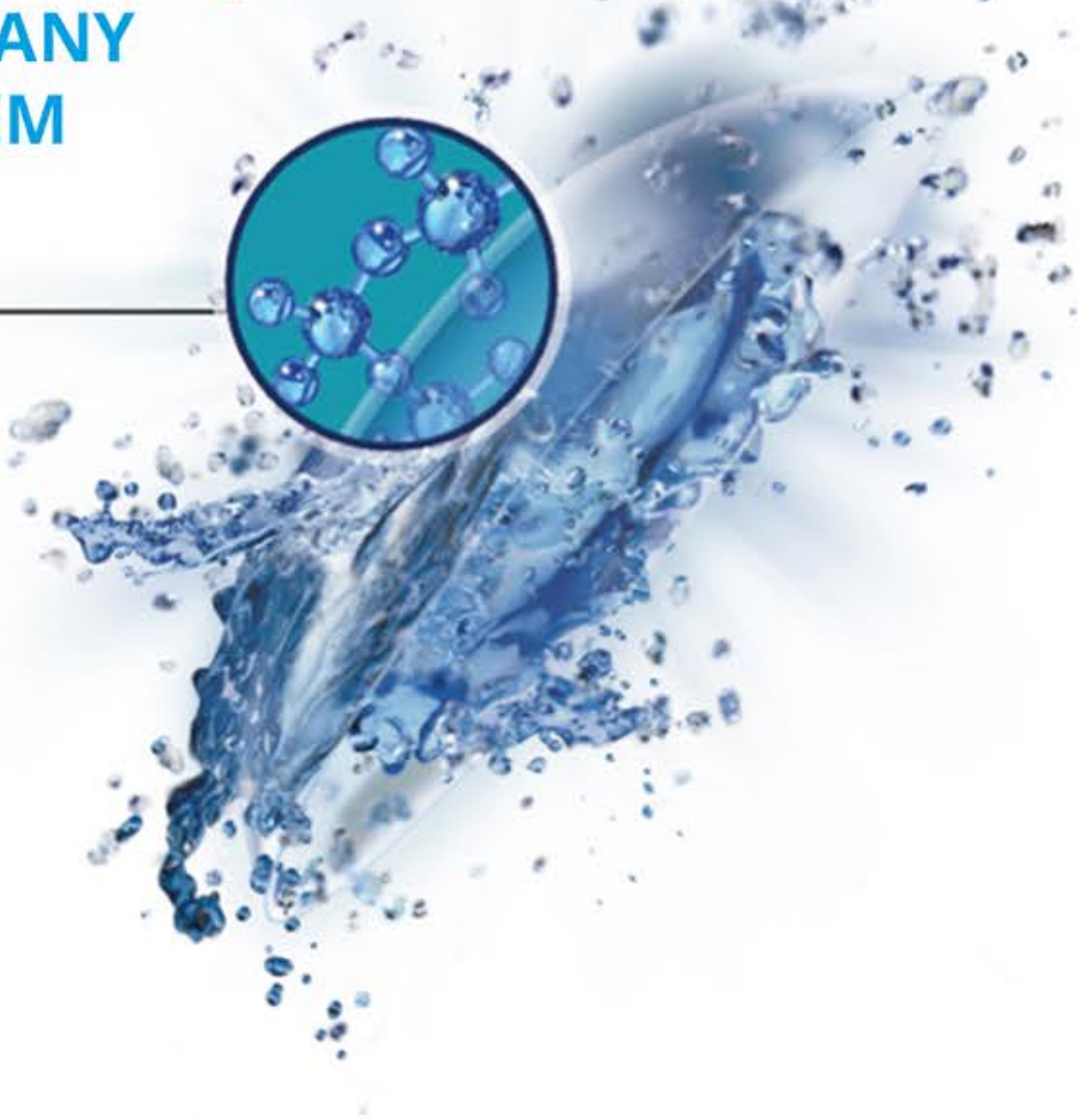

3 ZWIĄZKI NAWILŻAJĄCE

HPMC daje natychmiastowy efekt kropli nawilżających, PEG i PVA współdziałają, dając komfort w ciągu dnia^{3,4}.

SYSTEM NAWILŻAJĄCY AKTYWOWANY MRUGANIEM

Związki nawilżające uwalniane są przy każdym mrugnięciu i stabilizują film łzowy¹.

STABILNNY FILM ŁZOWY

Stabilność filmu łzowego wspiera dobre widzenie.



Klimatyzowane,
ogrzewane
pomieszczenia



Praca
przy komputerze



Sezonowe
alergie oczne

Informacje techniczne

Produkcja: Nowoczesny proces odlewania w formie LightStream Technology

Materiał: Nelfilcon A

System nawilżający: Unikalny system nawilżający o potrójnym działaniu, aktywowany mruganiem:

• hydroksypropylometyloceluloza (HPMC)

• glikol polietylenowy(PEG)

• alkohol poliwinylowy(PVA)

Dk/t (@-3,00 D): 26

Uwodnienie: 69%

Krzywizna bazowa BC (mm): 8,8

Średnica (mm): 14,4;

NISKIE MOCE UJEMNE

Ze sferyczne (D): od 0.00 do -6.00 (co 0.25D)

CYL.: -0.75, -1.25, -1.75: OSIE.: 10°, 20°, 70°-180° co 10°

CYL.: -2.25:L: OSIE.: 10°, 20°, 70°-110° 160°-180°

WYSOKIE MOCE UJEMNE

Moce sferyczne (D): od -6.50 do -8.00 (co 0.50D)

CYL.: -0.75, -1.25, -1.75: OSIE.: 10°, 20°, 70°-110° 160°-180°

CYL.: -2.25: OSIE.: 10°, 20°, 160°-180°

MOCE DODATNIE

Moce sferyczne (D): od +0.25 do +4.00 (co 0.25D)

CYL.: -0.75, -1.25, -1.75: OSIE.: 10°, 20°, 70°-110° 160°-180°

CYL.: -2.25: OSIE.: 10°, 20°, 160°-180°


Znaczniki strony: OK

Tryb wymiany: jednodniowy

Tryb noszenia: dzienny

Wielkość opakowania: 30 lub 90 sztuk

ZAKŁADANIE SOCZEWEK

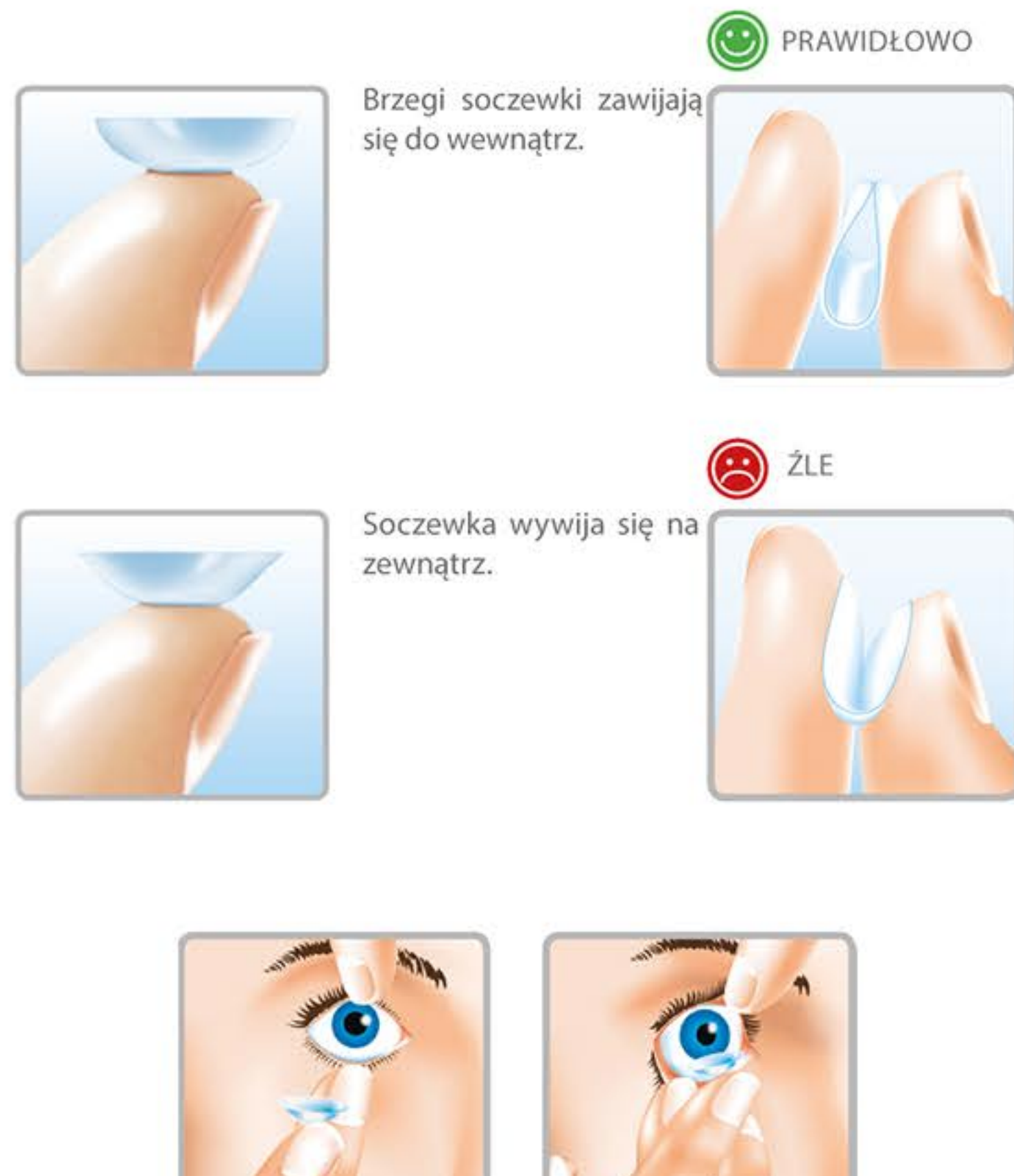

ZDEJMOWANIE SOCZEWEK



Piśmiennictwo:

1. Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A. Objective clinical performance of 'comfort-enhanced' daily disposable soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2010; 33(2): 88-92.
2. Nick J., Winterton L., Lally J. & Long B. (2006) Lubricating Lens Focuses on Patient Comfort.
3. Winterton L, Lally J, Sentell K, Chapoy L. The elution of (vinyl alcohol) from a contact lens: The realization of a time release moisturizing agent/artificial tear. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2007; 80B: 424-432.
4. Pruitt, Lindley and Winterton. Triple-action moisturisers for increased comfort in daily disposable lenses. Optician, 2007; 16.11: 27-28.
5. Dane Alcon, 2013.
7. W badaniu klinicznym ze ślepą próbą (n = 93). Dane Alcon, 2010.

^ Na podstawie sferycznych soczewek DAILIES® AquaComfort Plus®.

* Na podstawie soczewek Focus® DAILIES® Toric.

† Na podstawie oceny badaczy po jednym tygodniu; badane soczewki z mocą cylindra -0,75 i -1,50 (D).

Informujemy, że w przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych.

Należy utrzymywać kontakt ze Specjalistą, w ramach systematycznych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami specjalisty.

W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych powikłań. Jeżeli pojawi się jakiegokolwiek zdarzenie niepożądane, należy niezwłocznie zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą.⁹

Informujemy, że produkty przez nas sprzedawane są oryginalne.

Soczewki może zakupić klient, który:

- ma ukończone 16 lat,
- kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w czyimś imieniu, zapewnia, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,
- przeprowadza regularne badania kontrolne zgodnie z zaleceniami Specjalisty,
- przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawiają się niepokojące dolegliwości czy objawy,
- zamawia soczewki dobrane przez Specjalistę, a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,
- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,
- zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

W przypadku chęci zakupu nowego lub alternatywnego typu soczewek należy udać się na wizytę u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać.