

Instrukcja urządzenia do pielęgnacji skóry Hot & Cool



Złagodzić zmęczenie

Podnoszenie i ujędrnianie

Rozkurczowe i zwężające pory

Przeciwzmarszczkowy i wybielający

Nakładaj na twarz, oczy, szyję; łatwy do przenoszenia, odpowiedni do użytku w domu i w podróży D818

WSTĘP

1. Zasada piękna wibracji akustycznych

Twarz każdej osoby ma co najmniej trzy miliony porów, podczas gdy płyn oczyszczający i dłonie oczyszczają tylko powierzchnię skóry, trudno jest

usunąć pory olejowe, należy jedynie oczyścić pory z resztek oleju. Czy skóra może zregenerować się po głębokim oczyszczeniu. Wyciągnięte wnioski 46 lat specjalizuje się w pielęgnacji skóry, całym procesie rozwoju prowadzonym przez specjalistów od skóry, w połączeniu z naszymi zaawansowanymi inżynierami w zakresie technologii mikrowibracji dźwiękowych, inteligentnej konstrukcji dopasowanej do twarzy, bez martwego kompleksowego czyszczenia skóry. 8000 razy na minutę, wibracje o wysokiej częstotliwości, wibruj z oleju z głębokich porów i głęboko oczyszczają wszystkie pory. Pory lekkie, przezroczyste, delikatna skóra gładka, po raz kolejny zmieniają skórę bardziej poprzez czystość.

2. Zasada gorącego i fajnego piękna

Japoński profesor na uniwersytecie pokazuje, że wielokrotne docieranie do skóry w temperaturze 42° C pomaga w produkcji białka HSP, naprawie komórek skóry i wzmocnieniu elastyczności skóry, aby zapobiec tworzeniu się zmarszczek. Ciepła kuracja w temperaturze 42° C pomaga rozciągnąć pory w celu głębokiego oczyszczenia, podczas gdy zimna kuracja z efektem zimna do 6° C natychmiast zwęża pory i blokuje składniki odżywcze. Pielęgnując na zmianę ciepłą i mrożoną skórę, pobudza krążenie płynów w dolnej części skóry i przyspiesza metabolizm komórkowy. Oprócz skutecznego eliminowania cieni pod oczami i prostych linii oczu, rozjaśnia także skórę. Nawet bez makijażu skóra również jest odkryta. W połączeniu z mikrowibracją korzystnie wpływa na poprawę jędrności skóry i złagodzenie zmęczenia.

3. Zasada piękna EMS (elektryczna stymulacja mięśni)

EMS służy do aktywacji komórek skóry, stymulacji odnowienia kolagenu, poprawy elastyczności skóry, spłycenia zmarszczek i nadania skórze gładkiego i zdrowego wyglądu.

Efekt wyczucia lodu:

1. Pomagaj w jędrności skóry, utrzymuj elastyczność, zapobiegaj alergiom i innym problemom.
2. Zmniejsz pory, zablokuj wilgoć i zmniejsz zmarszczki.
3. Może ukoić mięśnie, złagodzić zmęczenie skóry.

Ciepły efekt:

1. Ocieplenie, sprawia, że ludzie czują się ciepło i pomaga rozluźnić mięśnie, łagodzi ból;
2. Pobudza przyspieszenie krążenia krwi, aby pory się otworzyły, może pomóc skórze szybko importować wszelkiego rodzaju produkty do pielęgnacji skóry, wchłaniają podwójną skórę, sprawiają, że skóra jest bardziej elastyczne i wilgotne.
3. Włóż gąbkę do głębokiego oczyszczenia, lepiej wyeksportuj toksyny

twarży, zaskórniki, brud.


4. Zasada piękna fotonów LED

1. Czerwone światło: długość fali 620 nm (± 10 nm) 18 diod LED głęboko dociera do skóry o długości fali 630 nm, aby pobudzić krążenie krwi, a regeneracja kolagenu poprawia elastyczność skóry, dzięki czemu skóra jest gładka i nawilżona. Nadaje się do wiotkiej i pomarszczonej skóry .

2. Niebieskie światło: długość fali 470 (± 10 nm) 18 diod LED głęboko dociera do skóry 480 nm, zabija bakterie, wspomaga krążenie krwi, może przenikać do 2,5 mm pod skórą, niszczyć środowisko życia bakterii, działa przeciwzapalnie, bakterioobójczo, usuwa Trądzik, blizny potrądzikowe i tak dalej skutecznie.

NAZWA CZĘŚCI

- ①. Panel gorący i chłodny ②. Wyświetlacz LCD
- ③. Gniazdo ładowania ④. Kabel do ładowania USB
- ⑤. Przełącznik zasilania i trybu ⑥. Przycisk fotonu LED
- ⑦. Poziom EMS i temperatura ⑧. Koło bawełny do makijażu
- ⑨. Baza

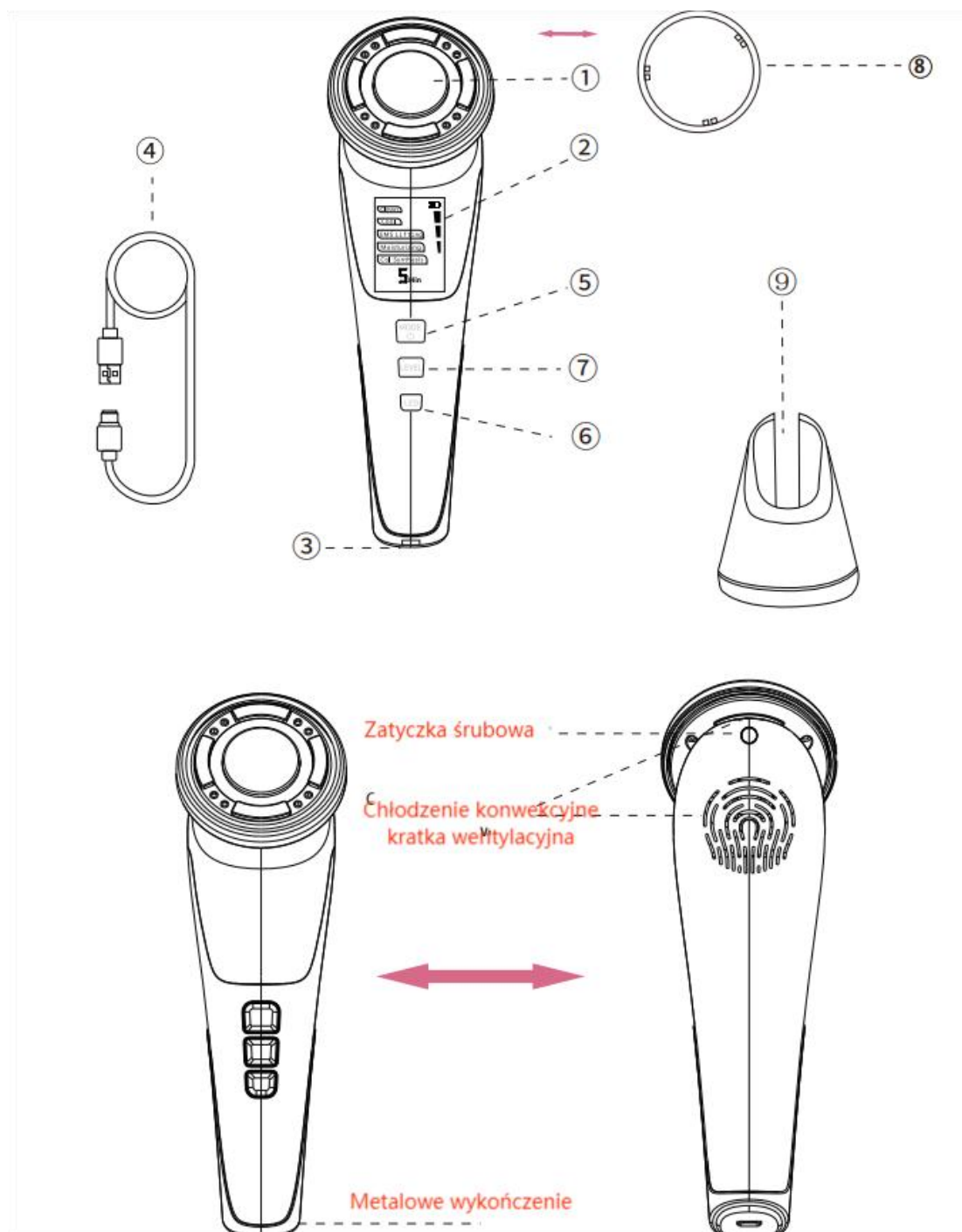

SPECYFIKACJA

Nazwa: Urządzenie do gorącej i chłodnej pielęgnacji skóry EMS

Model: D818

Wejście: DC 5 V

Temperatura: 6-42 °C (± 5 °C)

Wibracje: 8000 (± 10) obr./min


Czas ładowania: około 3 godzin

Prąd ładowania: 480mA

Moc: MAKS. 8,5 W

Pojemność baterii: 1000 mAh
Czas czuwania: 45 dni
Masa netto: 145g
Czas użycia: 5 minut/czas lub 2 minuty/czas
Rozmiar maszyny: 175*55*67mm
Rozmiar pudełka: 215*150*84mm


SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE OBSŁUGI

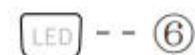


1. Proszę w pełni naładować przed pierwszym użyciem. Czas ładowania wynosi około 3 godzin. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz zasilania 5, aby uruchomić maszynę, ustawiając domyślny tryb czyszczenia na 1 poziomie, a następnie urządzenie kosmetyczne będzie działać z wibracjami i ogrzewaniem. W zależności od indywidualnych potrzeb skóry, temperaturę można regulować, naciskając przycisk 7. Światło LED Photon można regulować, naciskając przycisk 6 w każdym trybie (inteligentny czas 5 minut dla trybu 1).
2. Naciśnij klawisz zasilania, aby przejść do trybu Cool, przyrząd kosmetyczny działa z wibracjami i chłodzi. W zależności od osobistych potrzeb możesz nacisnąć 7, aby wyregulować temperaturę (inteligentny czas 2 minut, po wyłączeniu zasilania wentylator nadal działa przez 30 sekund w celu ochłodzenia)
3. Naciśnij klawisz zasilania 5, aby przejść do trybu liftingu EMS. Przyrząd kosmetyczny wibruje i wytwarza wysoki mikroprąd EMS. W zależności od indywidualnych potrzeb można dostosować poziom EMS, naciskając klawisz 7 (inteligentny czas 5 minut dla trybu 3).
4. Naciśnij przycisk 5, aby przełączyć tryb nawilżania. Przyrząd kosmetyczny będzie wibrował i nagrzewał się oraz wysyłał mikroprąd EMS do skóry. Zgodnie z indywidualnymi wymaganiami możesz dostosować intensywność EMS, naciskając klawisz 7 (inteligentny czas 5 minut dla trybu 4)
5. Naciśnij przycisk zasilania 5, aby przełączyć tryb syntezy kolagenu. Przyrząd kosmetyczny wibruje i chłodzi, emitując mikroprąd EMS do skóry (inteligentny czas trwania taki sam jak w modelu 2 w ciągu 2 minut)
Zgodnie z indywidualnymi wymaganiami możesz dostosować intensywność EMS,

naciskając klawisz 7 (inteligentny czas 2 min dla trybu 5).


6. Korzystanie z metody w postaci następujących zdjęć i tekstów:

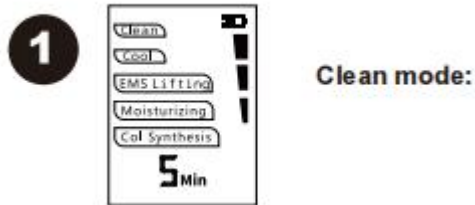


Należy stosować z wacikiem do demakijażu. Zdejmij kółko, przyczepiając wacik, zalej wodą do demakijażu. Następnie włącz tryb czyszczenia, rozgrzej i otwórz pory, rozbij brud i wyeksportuj głęboką warstwę śmieci, oczyść pory, pożegnaj się z zaskórnikami!

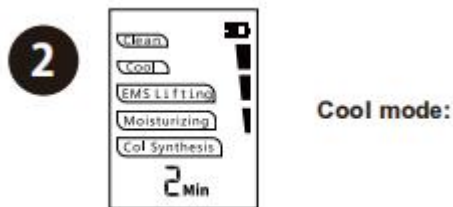

Założ maskę na twarz i włącz tryb Cool. Funkcja chłodzenia może skutecznie zmniejszyć pory i zablokować wilgoć w skórze.

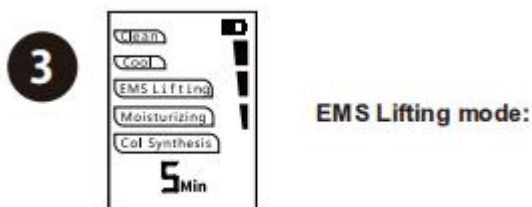


Po oczyszczeniu nałóż na twarz produkty pielęgnacyjne i włącz tryb EMS. EMS stymuluje mięśnie i sprawia, że skóra staje się bardziej energetyczna i elastyczna. Poprawia drobne linie i usuwa kurze łapki i zmarszczki na twarzy oraz przywraca młodość i gładkość skóry i czułość.

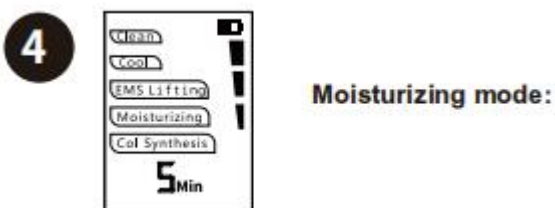

Po oczyszczeniu nałóż na twarz produkt do pielęgnacji skóry, taki jak balsam i esencja, i aktywuj tryb nawilżania, aby promować podwójne

wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry! (W każdym trybie możesz wybrać światło czerwone/niebieskie w zależności od potrzeb skóry)

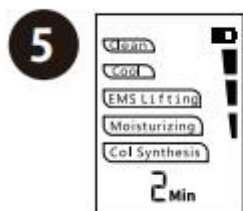

Cool Synthesis mode

Po wchłonięciu produktów do pielęgnacji skóry włącz tryb syntezy kolagenu, ochłódź, aby zmniejszyć pory, zablokuj odżywianie. Mikroprąd EMS pobudza komórki skóry do syntezy kolagenu i odmładza mięśnie przeciwzmarszczkowo. (W każdym trybie możesz wybrać światło czerwone/niebieskie w zależności od potrzeb skóry)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa.
2. Aby korzystać z tego urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Nie demontuj ani nie przerabiaj urządzenia. W sprawie naprawy skontaktuj się z dystrybutorem.
4. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji.
5. Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności, np. w miejscach nasłonecznionych, w pobliżu ognia, w łazience itp. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem. Nie używaj ani nie umieszczaj go w urządzeniu wysokotemperaturowym lub w jego pobliżu.
6. Nie używaj i nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym środowisku, w przypadku zwarcia, porażenia prądem lub pożaru.
7. Trzymaj z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych fizycznie. Konieczny jest ścisły nadzór, jeśli urządzenie jest obsługiwane przez użytkownika poniżej 18 roku życia.
8. Gdy działa funkcja chłodzenia, pobór mocy jest stosunkowo duży, wentylator będzie miał opóźnienie w rozpraszaniu ciepła. Należy go umieścić na około 10 minut do następnego użycia po użyciu funkcji chłodzenia.

OSTRZEŻENIE:

1. Przestań używać, gdy produkt się nienormalnie nagrzewa, aby uniknąć oparzeń.
2. Nie upuszczaj ani nie zderzaj urządzenia.
3. Podczas stosowania należy stale nakładać serum.
4. Nie używaj go, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
5. Poniższe warunki nie są dozwolone.