Misure
W trosce o zdrowie

Instrukcja obsługi

Elektryczny aspirator do nosa

Misure Aspinio



Spis treści

Wprowadzenie i przeznaczenie 2
Ostrzeżenia i środki ostrożności 3
Zawartość zestawu 4
Opis urządzenia i akcesoriów 5
Zasilanie 7
Obsługa urządzenia 7
Rozpoczęcie pracy urządzenia 9
Czyszczenie i konserwacja 11
Rozwiązywanie problemów 13
Specyfikacja techniczna 14
Znaki i symbole 14
Deklaracja EMC 15
Utylizacja 15

Wprowadzenie i przeznaczenie

Dziękujemy za okazane zaufanie i zakup elektrycznego aspiratora do nosa Misure Aspinio, przeznaczonego do bezpiecznego i skutecznego usuwania wydzieliny z nosa u niemowląt, małych dzieci, a w niektórych przypadkach również osób niepełnosprawnych. Urządzenie wykorzystuje technologię regulowanego podciśnienia oraz delikatne, silikonowe końcówki, aby ułatwić oddychanie i poprawić komfort dziecka podczas infekcji górnych dróg oddechowych. Aspirator posiada aż 9 poziomów mocy ssania**,** co pozwala dostosować siłę działania do wieku dziecka i ilości wydzieliny.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego u niemowląt i dzieci, jako pomoc w codziennej higienie nosa. Pomaga łagodzić objawy infekcji dróg oddechowych, ułatwia oddychanie i może wspierać sen oraz karmienie dziecka.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

PAMIĘTAJ:

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do usuwania wydzieliny z nosa. Nie należy go stosować w obrębie uszu ani gardła.
- Nie jest to zabawka – należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
- Przed każdorazowym użyciem należy sprawdzić kompletność zestawu i stan techniczny urządzenia.
- W przypadku dzieci z wrażliwą śluzówką nosa lub nieprawidłowościami anatomicznymi zaleca się wcześniejszą konsultację z lekarzem.
- Urządzenie może być używane jedynie przez osoby dorosłe (rodzice, opiekunowie).
- Urządzenie nie jest przeznaczone do profesjonalnego zastosowania medycznego w placówkach ochrony zdrowia

Przeciwwskazania: Nie stosować u osób z uszkodzoną błoną śluzową nosa, w przypadku krwawień, podrażnień lub wad anatomicznych jam nosowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1. Urządzenie powinno być stosowane wyłącznie do usuwania wydzieliny z nosa, zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie używać aspiratora w obrębie uszu, gardła ani jako irygatora do płukania nosa. Producent, importer ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania.
2. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne, nieuszkodzone i działa prawidłowo. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
3. Aspirator i jego akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec połknięciu małych elementów lub ryzyku uduszenia (np. przez owinięcie przewodu wokół szyi). Dzieci nie powinny samodzielnie obsługiwać urządzenia.
4. Podczas aspiracji należy upewnić się, że dziecko nie wstrzymuje oddechu ani nie połyka powietrza – usta powinny być otwarte, by uniknąć zaburzeń ciśnienia w uszach. Końcówkę należy wprowadzać bardzo płytko (ok. 3 – 4 mm). W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać zabieg i skonsultować się z lekarzem.
5. Nie przekraczać zalecanej liczby zabiegów (maks. 3 – 4 razy dziennie), aby uniknąć podrażnienia śluzówki nosa. Przed zastosowaniem zaleca się zmiękczyć wydzielinę roztworem soli fizjologicznej lub ciepłym kompresem.
6. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, podrażnienia, bólu podczas odsysania lub krwawienia z nosa należy natychmiast przerwać używanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem, najlepiej pediatrą.
   Skonsultuj się z lekarzem również, jeśli:
   • dziecko ma trudności z oddychaniem lub karmieniem,
   • występuje gorączka powyżej 38 °C lub objawy infekcji utrzymują się dłużej niż kilka dni,
   • choroba nie ustępuje w ciągu 10 – 14 dni.
7. Nie używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach (np. w łazience) ani dotykać go mokrymi rękami. Aspirator nie jest wodoodporny – nie wolno go zanurzać w wodzie ani czyścić pod bieżącą wodą. W przypadku zalania należy niezwłocznie odłączyć zasilanie i zaprzestać dalszego użytkowania.
8. Nie używać zasilacza ani przewodu, jeśli są uszkodzone. Urządzenia nie wolno używać podczas ładowania. Gdy kontrolka zasilania zacznie migać, należy doładować urządzenie za pomocą ładowarki o napięciu 5V/2A. Zastosowanie ładowarki o wyższym napięciu może uszkodzić układ ładowania.
9. Nie narażać aspiratora na silne uderzenia, wstrząsy, upadki ani skrajne warunki – wysoką temperaturę, dużą wilgotność lub bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Nie używać urządzenia na miękkich powierzchniach (np. łóżku, poduszce), które mogą zakłócić wentylację i prowadzić do przegrzania.
10. Nie stosować urządzenia w obecności łatwopalnych mieszanin (np. gazów anestetycznych z tlenem lub podtlenkiem azotu).
11. Nie wolno samodzielnie rozkręcać, modyfikować ani naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy należy powierzać autoryzowanemu serwisowi. Nieautoryzowane działania mogą spowodować utratę gwarancji i zagrożenie dla użytkownika.
12. Każde poważne zdarzenie związane z urządzeniem należy zgłosić producentowi, lokalnemu przedstawicielowi oraz właściwemu organowi nadzoru w kraju użytkownika.

Przeciwwskazania

Nie stosować urządzenia u osób z uszkodzoną błoną śluzową nosa ani u pacjentów z indywidualnymi cechami budowy przegrody nosowej, które mogą uniemożliwiać bezpieczne przeprowadzenie zabiegu. W takich przypadkach zalecana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

Zawartość zestawu




- 1 x Elektryczny aspirator do nosa (jednostka główna)
- 1 x Komora ssąca (z możliwością demontażu do czyszczenia)
- 2 x Silikonowa końcówka (dysza) – wymienna, do montażu na komorze
- 1 x Przewód powietrza
- 1 x Przewód zasilający USB typu C
- 1 x Instrukcja obsługi

Opis urządzenia i akcesoriów

Misure Aspinio to elektryczny aspirator do nosa przeznaczony do usuwania wydzieliny z jam nosowych niemowląt i małych dzieci. Urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem komfortu i bezpieczeństwa użytkowników, umożliwiając skuteczne oczyszczanie nosa w warunkach domowych.

Cechy produktu

- 9 poziomów regulacji siły ssania
- 5 utworów muzycznych oraz możliwość przekształcenia w maszynę emitującą szum – zapewnia spersonalizowane i uspokajające doświadczenie
- Podświetlenie gradientowe pomaga odwrócić uwagę dziecka podczas odciągania wydzieliny
- Urządzenie zaprojektowano z oddzielną jednostką główną i komorą ssącą, a także z funkcją łatwego czyszczenia – aspirator łączy w sobie funkcjonalność i wygodę użytkowania

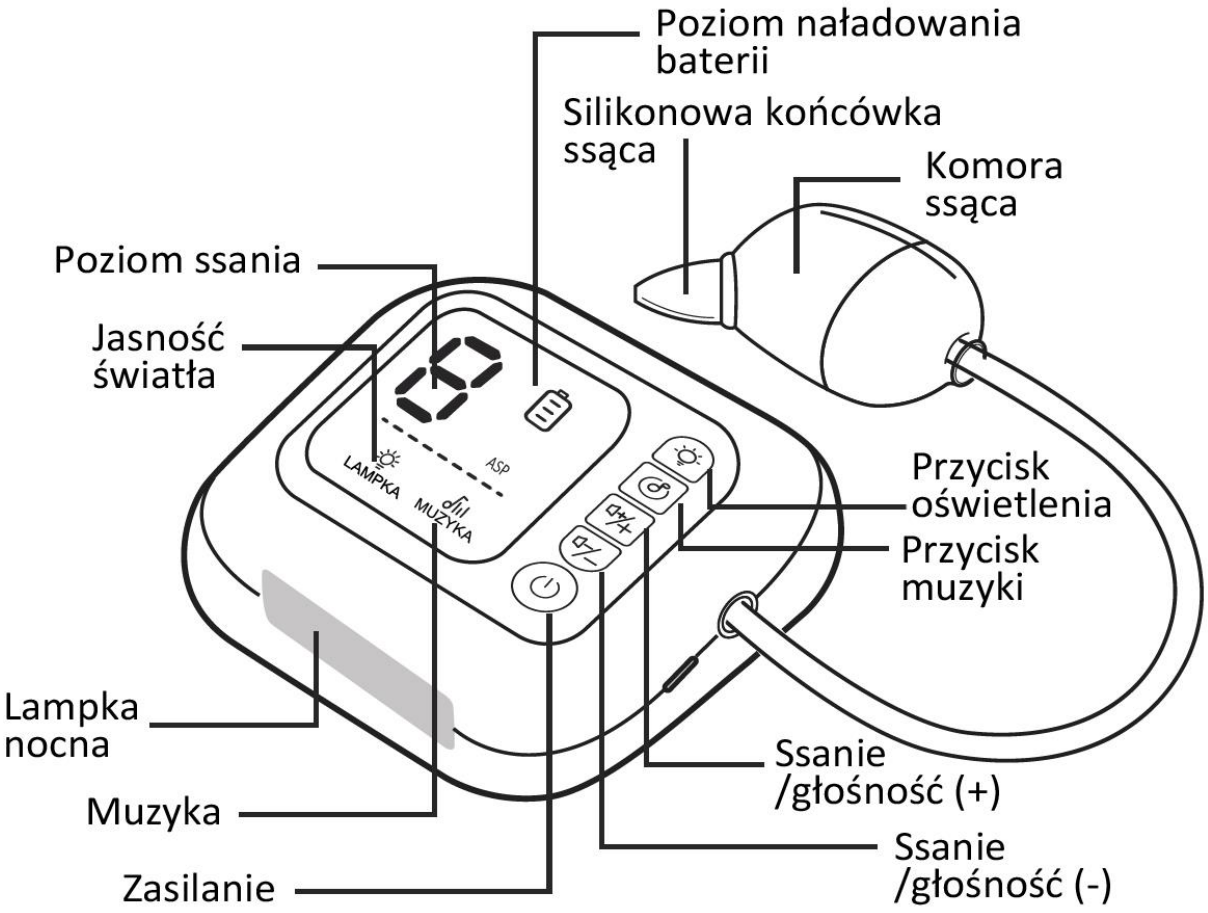

Konstrukcja urządzenia oparta jest na osobnym korpusie głównym i komorze ssącej. Wszystkie elementy mające kontakt z wydzieliną można łatwo zdemontować i umyć, co ułatwia codzienną higienę oraz konserwację.


UWAGA:

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania zgodnie z opisanym przeznaczeniem – oczyszczania nosa z zalegającej wydzieliny. Nie należy stosować aspiratora w obrębie uszu, gardła ani w innych celach niż medyczne oczyszczanie nosa.

Opis elementów zestawu ssącego

Poniższy schemat przedstawia budowę zestawu ssącego aspiratora oraz jego podstawowe elementy. Każdy z nich pełni istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzenia oraz wpływa na skuteczność i higienę użytkowania.

- Silikonowa końcówka ssąca – miękka i elastyczna część przeznaczona do bezpiecznego wprowadzenia do nozdrza dziecka. Wykonana z delikatnego silikonu medycznego, zapewnia komfort oraz minimalizuje ryzyko podrażnień.
- Górna pokrywa – osłania komorę ssącą, łącząc się z końcówką silikonową. Jej konstrukcja umożliwia łatwy montaż i demontaż.
- Uchwyt mocujący – element łączący górną i dolną część zestawu, odpowiada za stabilne połączenie komponentów i prawidłowy przepływ powietrza.
- Dolna pokrywa – pojemnik, w którym gromadzi się wydzielina z nosa. Można go łatwo odłączyć i wyczyścić po każdym użyciu.
- Uszczelka – umieszczona między elementami zestawu, zapewnia szczelność systemu i zapobiega wyciekom.
- Przewód – łączy zestaw ssący z jednostką główną urządzenia. Odpowiada za przekazywanie mocy ssania z silnika do końcówki ssącej.

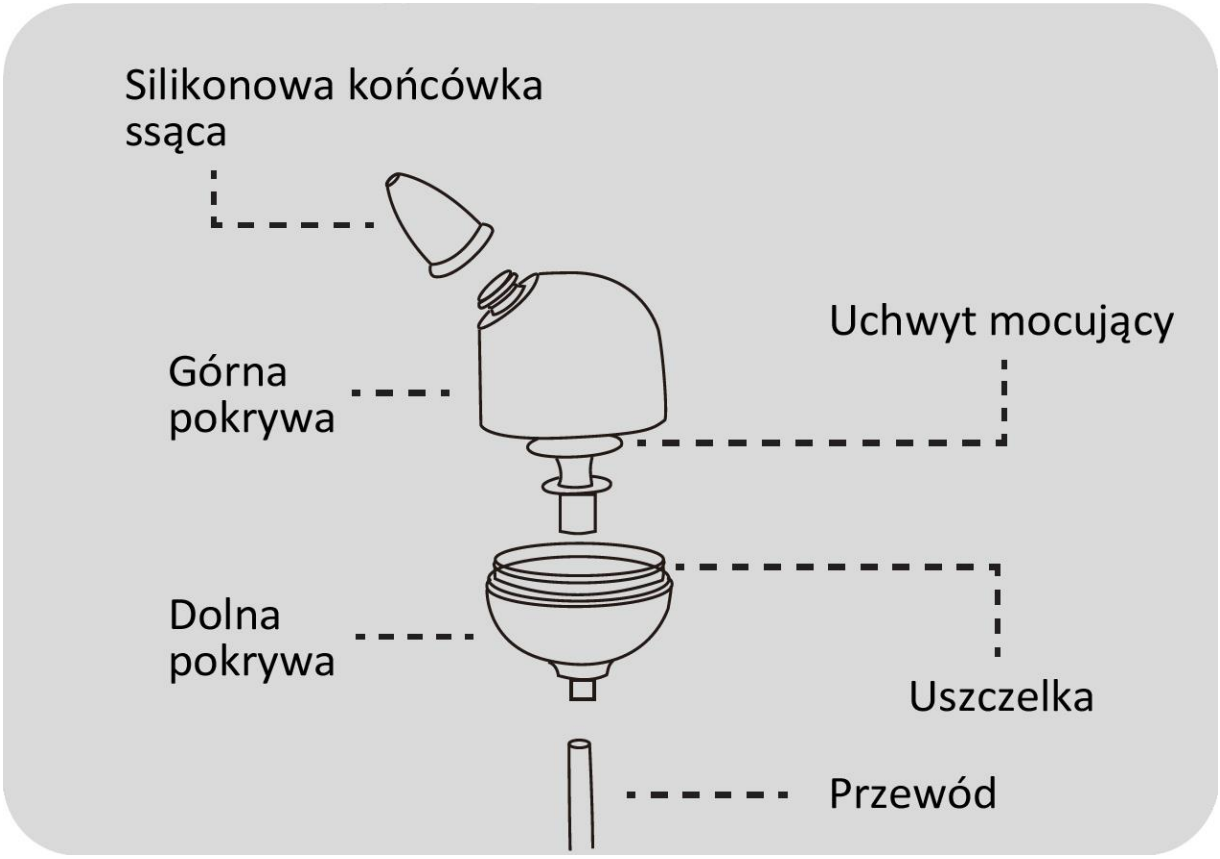

Zasilanie

Urządzenie zasilane jest wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym o napięciu 3,7 V i pojemności 2500 mAh. Ładowanie odbywa się za pośrednictwem przewodu USB typu C (dołączonego do zestawu).

Do ładowania należy używać standardowej ładowarki USB o parametrach 5 V / 2 A**.** Zasilacz sieciowy nie znajduje się w zestawie. W razie potrzeby można użyć dowolnej ładowarki USB spełniającej powyższe parametry techniczne.

Nie należy stosować ładowarek z funkcją szybkiego ładowania (np. 9 V lub 12 V), ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia układu zasilania lub skrócenia żywotności akumulatora.

Wskaźnik ładowania i poziomu naładowania baterii:

- Stałe światło – urządzenie jest w trybie pracy lub w pełni naładowane.
- Szybkie miganie – niski poziom baterii, wymagane ładowanie.
- Pulsacyjne miganie – urządzenie jest w trakcie ładowania.

Zalecenia dotyczące ładowania i bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem ładowania upewnić się, że przewód USB i złącze są czyste i nieuszkodzone.
- Nie ładować urządzenia w wilgotnym otoczeniu (np. w łazience) ani mokrymi rękami.
- Nie korzystać z urządzenia podczas ładowania.
- Nie dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora – może to wpłynąć na jego żywotność.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu, zaleca się naładować akumulator do poziomu około 50% i doładowywać go co 3 – 6 miesięcy.

Obsługa urządzenia

Przycisk zasilania



Aby uruchomić aspirator, należy przytrzymać przycisk zasilania przez 2 sekundy**.** Krótkie naciśnięcie tego przycisku podczas pracy urządzenia powoduje pauzę, bez jego całkowitego wyłączania.

Po włączeniu aspiratora domyślnie ustawiany jest 3. poziom mocy ssania a funkcje muzyki i podświetlenia nocnego pozostają wyłączone. Moc ssania można regulować za pomocą przycisków „+” i „–”, w zakresie 9 poziomów.

Oświetlenie



Urządzenie wyposażone jest w 7-kolorowe podświetlenie LED z trybem płynnej zmiany barw (tzw. tryb gradientowy). Aby uruchomić podświetlenie, należy długo przytrzymać przycisk światła – niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone, czy nie.

Po aktywacji wyświetlane są kolory w trybie przejściowym. Krótkie naciśnięcie przycisku zatrzymuje podświetlenie na aktualnym kolorze. Ponowne naciśnięcie przywraca tryb zmiany barw, a długie naciśnięcie wyłącza światło. Urządzenie zapamiętuje ostatnio wybrany kolor i automatycznie go przywraca przy kolejnym uruchomieniu.

Dostępne kolory: biały, niebieski, zielony, różowy, błękitny, fioletowy, żółty.

Muzyka




Urządzenie wyposażone jest w funkcję odtwarzania wbudowanych melodii – dostępnych jest 5 utworów, które można odtwarzać niezależnie od funkcji ssania oraz światła.

Aby włączyć muzykę, należy przytrzymać przycisk muzyki przy włączonym zasilaniu. Krótkie naciśnięcia przełączają między kolejnymi utworami. Długie przytrzymanie tego samego przycisku ponownie wyłącza muzykę.

Po ponownym uruchomieniu urządzenia zostanie wznowione odtwarzanie ostatnio wybranego utworu, pod warunkiem, że był on odtwarzany przez co najmniej 5 sekund przed wyłączeniem. Głośność domyślnie zostanie przywrócona do poziomu średniego. Dostępna jest regulacja głośności przyciskami „+” i „–” – do wyboru 5 poziomów. Regulacji głośności dokonuje się poprzez dłuższe przytrzymanie przycisków „+” i „–”.

Przyciski MUZYKI i OŚWIETLENIA działają niezależnie i mogą być aktywowane oddzielnie. Należy jednak pamiętać, że dłuższe przytrzymanie przycisku zasilania wyłącza całe urządzenie wraz z wszystkimi aktywnymi funkcjami.

Plus/Minus

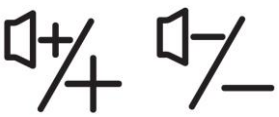

Krótkie naciśnięcia regulują poziom ssania, natomiast długie naciśnięcia regulują głośność muzyki.

Poziom naładowania baterii




Wskaźnik poziomu baterii świeci się ciągłym światłem podczas normalnego działania. Gdy poziom naładowania jest niski, ikona zaczyna migać. Podczas ładowania wskaźnik miga pulsacyjnie w wolnym tempie, natomiast po pełnym naładowaniu świeci światłem ciągłym.

Rozpoczęcie pracy urządzenia


Przygotowanie przed pierwszym użyciem

1. Przed pierwszym użyciem umyć wszystkie elementy mające kontakt z wydzieliną: silikonową końcówkę ssącą, górną pokrywę, uchwyt mocujący (wewnętrzny), dolną pokrywę (komorę), uszczelkę.
   W razie potrzeby zdezynfekować je w gotującej wodzie (ok. 3 min).
2. Złożyć zestaw ssący zgodnie z poniższą kolejnością:


   - Wsunąć uchwyt mocujący w środkową część dolnej pokrywy (komory) i osadzić go stabilnie.

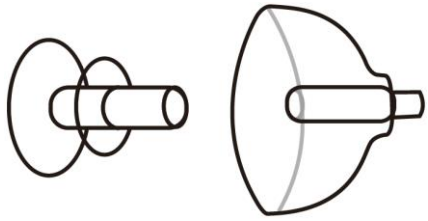

   - Założyć górną pokrywę.

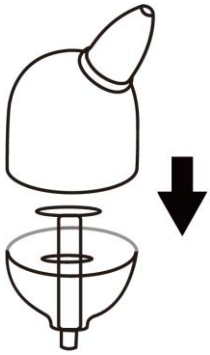

   - Wybrać odpowiednią silikonową końcówkę ssącą i zamocować ją na górze pokrywy.

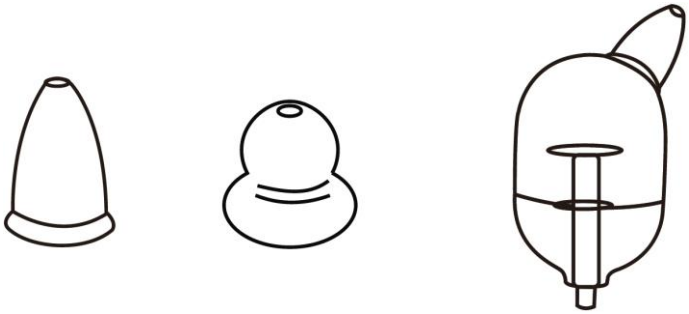

   - Całość połączyć z przewodem powietrza.

3. Naładować urządzenie ładowarką 5V. Nie stosować ładowarek o wyższym napięciu.
4. Przetestować działanie wszystkich funkcji (zasilanie, poziomy ssania, światło, muzyka), upewniając się, że wszystkie funkcje działają poprawnie.
5. Nie używać urządzenia u dziecka bez wcześniejszego przetestowania funkcji ssania i zapoznania się z regulacją mocy.

6. Zaleca się, aby przed pierwszym użyciem skonsultować się z lekarzem pediatrą w przypadku dzieci z wrażliwą śluzówką nosa lub nieprawidłowościami anatomicznymi jam nosowych.

Prawidłowa pozycja dziecka

1. Dziecko powinno być w pozycji półsiedzącej lub leżeć z lekko uniesioną głową.
2. U niemowląt najlepiej sprawdza się pozycja na kolanach rodzica – głowa dziecka powinna być lekko odchylona do tyłu.
3. Głowę należy delikatnie stabilizować, by zapobiec nagłym ruchom, które mogłyby utrudnić zabieg.

Wskazówki przed zabiegiem

1. Aby rozmiękczyć zalegającą wydzielinę, zakropić do każdej dziurki nosa kilka kropel (np. 2 – 3 krople na dziurkę nosa), soli fizjologicznej.
2. Odczekać 30 – 60 sekund przed rozpoczęciem odsysania, aby uzyskać najlepszy efekt.
3. W celu zwiększenia komfortu dziecka i ułatwienia zabiegu można włączyć funkcje dodatkowe urządzenia, takie jak kolorowe podświetlenie LED lub spokojna muzyka.

Przeprowadzenie aspiracji

1. Delikatnie włożyć silikonową końcówkę do nozdrza – nie wprowadzać jej zbyt głęboko.
2. Przytrzymać przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
3. Domyślnie uruchomi się 3. poziom mocy – w razie potrzeby dostosować go przyciskami „+” lub „–”.
4. Zalecany czas pojedynczej aspiracji to do 10 – 15 sekund na jedno nozdrze. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć po krótkiej przerwie.
5. Nie stosować ciągłego ssania dłużej niż 1 minuta.
6. Aby przerwać lub zakończyć pracę, przytrzymać przycisk zasilania przez ok. 2 sekundy.

Po zakończeniu zabiegu


1. Opróżnić i umyć pojemnik na wydzielinę.
2. Nie używać urządzenia, jeśli poziom wydzieliny przekracza linię oznaczoną jako „MAX”.
3. Czyszczenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

Czyszczenie i konserwacja


Aby zapewnić bezpieczne i higieniczne użytkowanie aspiratora Misure Aspinio, należy dokładnie czyścić wszystkie elementy mające kontakt z wydzieliną po każdym użyciu. Regularna konserwacja pozwala przedłużyć żywotność urządzenia i zapobiega rozwojowi drobnoustrojów.

Czyszczenie


1. Odłączyć urządzenie od zasilania (jeśli było ładowane).
2. Odłączyć komorę ssącą od przewodu.

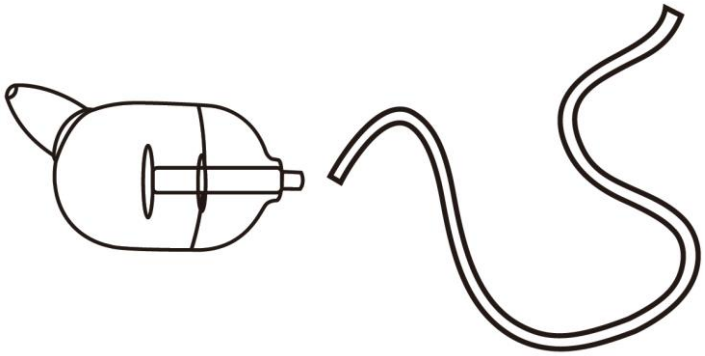


3. Zdjąć silikonową końcówkę i otworzyć pokrywę komory ssącej.

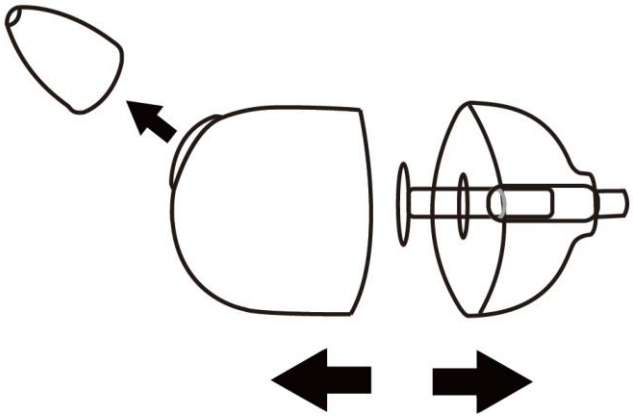

4. Wyjąć uchwyt wewnętrzny z wnętrza komory.

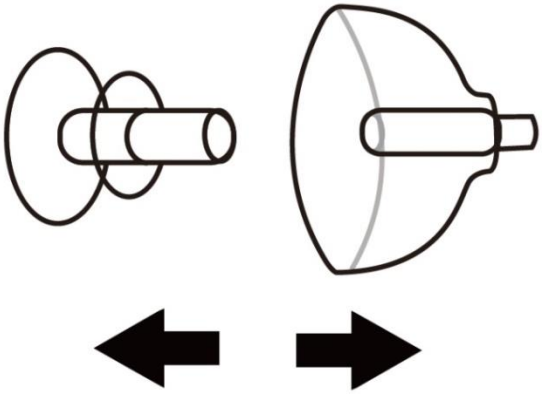

5. Umyć wszystkie części czystą, ciepłą wodą. W razie potrzeby można użyć łagodnego detergentu.

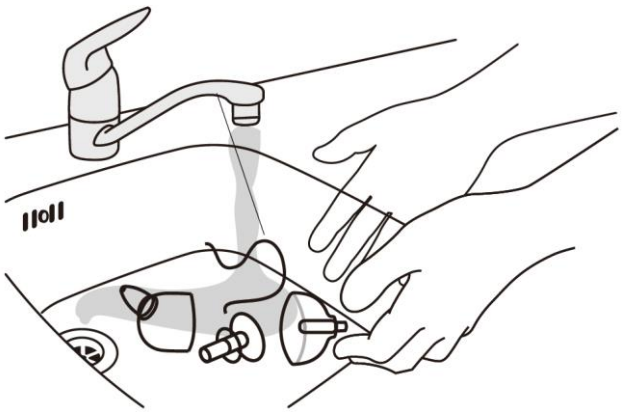

6. Dokładnie osuszyć wszystkie elementy przed ponownym montażem lub przechowywaniem.

Uwaga: Jednostka główna (część z elektroniką) nie jest wodoodporna – nie zanurzać jej w wodzie ani nie myć pod bieżącą wodą. W razie zabrudzenia wytrzeć wilgotną, miękką ściereczką.

Konserwacja

1. Regularnie sprawdzać stan silikonowej końcówki – w przypadku zużycia lub odkształceń należy ją wymienić na nową.
2. Nie przechowywać urządzenia w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, wilgoć ani bezpośrednie światło słoneczne.
3. W razie dłuższej przerwy w użytkowaniu, zaleca się:
   - dokładne umycie i osuszenie elementów,
   - w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu, zaleca się naładowanie akumulatora do poziomu około 50% i doładowywanie go co 3 – 6 miesięcy,
   - przechowywanie w suchym, czystym miejscu, z dala od dzieci.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	Brak zasilania lub rozładowana bateria	Naładować urządzenie za pomocą ładowarki 5V/2A. Upewnić się, że przewód USB-C jest prawidłowo podłączony.
Słaba siła ssania	Niska moc ustawiona w trybie pracy lub zablokowana końcówka	Sprawdzić ustawiony poziom ssania i zwiększyć go przyciskiem „+”. Oczyścić końcówkę i komorę ssącą. Upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zmontowane, zwłaszcza uszczelka.
Muzyka lub oświetlenie nie działa	Funkcje nie zostały włączone	Przytrzymać odpowiedni przycisk (muzyki lub oświetlenia), aby aktywować daną funkcję.
Migający wskaźnik baterii	Niski poziom naładowania	Naładować akumulator do pełna przed dalszym użytkowaniem.
Nie słychać dźwięku po włączeniu muzyki	Bardzo niska głośność lub problem z pamięcią utworu	Przytrzymać dłużej przycisk „+”, aby zwiększyć głośność. Spróbować ponownie włączyć muzykę.
Ładowanie nie działa	Niewłaściwa ładowarka	Upewnić się, że używana jest ładowarka o napięciu 5V/2A. Nie używać szybkich ładowarek o wyższym napięciu.
Z urządzenia nie wydobywa się dźwięk ssania	Błąd montażu lub blokada w komorze ssącej	Sprawdzić poprawność montażu wszystkich elementów. Wyczyścić dokładnie komorę ssącą.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Elektryczny aspirator do nosa dla dzieci
Model	Aspinio
Maksymalna siła ssania	65kPa
Zasilanie	DC 5 V ⎓ 2 A
Moc znamionowa	4 W
Złącze ładowania	USB typu C
Liczba poziomów ssania	9
Funkcja muzyki	5 wbudowanych melodii
Funkcja oświetlenia	podświetlenie LED (7 kolorów, tryb gradientowy)
Poziom hałasu	≤ 65 dBA
Wymiary urządzenia	130 × 90 × 50 mm
Typ akumulatora	Litowo-jonowy (Li-ion) 3,7 V, 2500 mAh, 7,4 Wh
Czas pracy	ok. 1 godziny po pełnym naładowaniu
Skład zestawu	Aspirator, pojemnik na wydzielinę, 2 silikonowe końcówki do nosa, przewód powietrza, kabel USB, instrukcja obsługi
Zastosowanie	do użytku domowego, wyłącznie do usuwania wydzieliny z jam nosowych

Znaki i symbole

W niniejszej instrukcji, na aspiratorze, jego akcesoriach lub opakowaniu mogą się pojawić następujące symbole. Niektóre z symboli odnoszą się do norm i wymagań związanych z aspiratorem i jego zastosowaniem

	Postępować zgodnie z instrukcją obsługi
	Nie wyrzucać tego produktu z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Takie odpady należy gromadzić osobno do specjalnego przetworzenia.
	Chronić przed wilgocią
	Znak CE potwierdza, że produkt spełnia wymagania dyrektywy EMC 2014/30/UE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.
	Nr partii
	Data produkcji

RoHS	Produkt zgodny z dyrektywą UE o zmniejszeniu ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych

Deklaracja EMC

Urządzenie spełnia wymogi deklaracji EMC, zgodnie z dyrektywą: **2014/30/UE**. Spełnia wymagania europejskich norm **EN IEC 55014-1:2021** oraz **EN IEC 55014-2:2021**, które określają poziomy odporności na zakłócenia elektromagnetyczne oraz dopuszczalne poziomy emisji elektromagnetycznej.

Ostrzeżenie:

Należy unikać używania urządzenia w pobliżu innych sprzętów elektronicznych, ponieważ może to powodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, należy kontrolować pracę urządzenia i upewnić się, że działa prawidłowo.

Stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż dostarczone lub zatwierdzone przez producenta może prowadzić do zwiększenia emisji zakłóceń elektromagnetycznych lub obniżenia odporności urządzenia na zakłócenia zewnętrzne, co może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem.

Przenośny sprzęt do komunikacji radiowej (w tym telefony komórkowe, urządzenia Wi-Fi, anteny zewnętrzne i kable sygnałowe) nie powinien być używany w odległości mniejszej niż **30 cm** od żadnej części urządzenia, w tym jego kabli. Niezachowanie tej odległości może pogorszyć jego wydajność.

Utylizacja

Urządzenie Misure Aspinio zawiera elementy elektroniczne i akumulator, dlatego po zakończeniu użytkowania nie należy wyrzucać go do zwykłego kosza na śmieci.

Zamiast tego:

- Oddać urządzenie do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) lub przekazać do autoryzowanego punktu utylizacji.
- Plastikowe części, takie jak silikonowe końcówki, można wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tworzyw sztucznych – pamiętać, aby wcześniej je dokładnie oczyścić.
- Nie próbować samodzielnie rozbierać urządzenia ani wyjmować akumulatora – takie działania mogą być niebezpieczne i powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

Dzięki prawidłowej utylizacji pomagasz chronić środowisko i unikasz potencjalnych zagrożeń.

Zachęcamy do korzystania z lokalnych punktów recyklingu i programów zbiórki elektroodpadów.



Informacja dla użytkowników urządzeń elektrycznych i elektronicznych dotycząca postępowania ze zużytym sprzętem.

Przedstawiony symbol (przekreślonego kosza) umieszczony na produktach lub dołączonej dokumentacji informuje o konieczności specjalnego sortowania. Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycząca Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń (WEEE) zakłada zakaz pozbywania się starych urządzeń domowego użytku jako nieposortowanych śmieci komunalnych. Nie można wyrzucać tak oznakowanego sprzętu do kosza razem z odpadami gospodarczymi. Zużyte urządzenia muszą być osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materiałów. Pozwala to ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie działa na ludzkie zdrowie. Prawidłowe postępowanie polega na przekazaniu zużytego sprzętu do punktu odbioru wyznaczonego przez sprzedawcę, gdzie będzie przyjęty bezpłatnie. W celu uzyskania informacji nt. miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu, należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów – Dz.U. 2015 poz. 1688z dn. 11.09.2015

Producent:

„Amar" Joanna Marszałek
ul. Rzemieślnicza 25
77-400 Złotów
Polska

E-mail: biuro@misure.pl
Telefon: +48 501 760 290
www.misure.pl

Data ostatniej aktualizacji instrukcji: 01.09.2025

”Amar” Joanna Marszałek
ul. Rzemieślnicza 25
77-400 Złotów
www.misure.pl

WARRANTY CARD

KARTA GWARANCYJNA

Model: ……

SN: ……

Pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy

Warunki gwarancji:

1. Marka Misure z siedzibą przy ul. Rzemieślnicza 25, 77-400 Złotów, gwarantuje sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy na aspirator, 6 miesięcy na akcesoria, licząc od daty sprzedaży. W przypadku zakupu produktu przez firmę (faktura VAT) gwarancja na ciśnieniomierz udzielana jest na okres 12 miesięcy.
3. Gwarancja obowiązuje w kraju zakupu.
4. Ujawnione wady będą bezpłatnie usunięte w okresie gwarancji przez Autoryzowany Serwis.
5. W przypadku zakupu towaru przez Internet, reklamujący klient jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji w Autoryzowanym Serwisie Producenta pod nr tel.: +48 880 130 201 lub pod adresem biuro@misure.pl i dostarczenia uszkodzonego produktu do Autoryzowanego Serwisu Producenta. Koszt dostarczenia produktu ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, zgłaszający może zostać obciążony kosztami transportu. W innym przypadku dokonuje zgłoszenia i dostarcza produkt do punktu sprzedaży, w którym dokonał zakupu. Informacja na temat naprawy jest udzielana w miejscu złożenia reklamacji.
6. Ewentualne wady lub uszkodzenia produktu, ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji, będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia produktu do serwisu. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. Naprawa zostanie wykonana bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
7. Wady lub uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone a towar dostarczony do serwisu niezwłocznie po ujawnieniu.
8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (np. produkt sprawny lub uszkodzony mechanicznie z winy użytkownika), zgłaszający reklamację może zostać obciążony kosztami transportu.
9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne (również kolorystykę) w przypadku, gdy w okresie objętym gwarancją wykonano 3 istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodnie z przeznaczeniem lub serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
10. Do reklamowanego urządzenia należy dołączyć opis uszkodzenia oraz dowód zakupu zawierający datę sprzedaży. W przypadku, gdy wada dotyczy akcesorium, należy je dołączyć wraz z urządzeniem. Brak pozostałych akcesoriów nie stanowi podstawy do odmowy przyjęcia reklamacji.
11. Gwarancją nie są objęte: naturalne zużycie związane z eksploatacją, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, uszkodzenia lub rozdarcia wynikłe z winy nabywcy, płowienie tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych, uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, termiczne, ingerencje cieczy lub celowe uszkodzenia i wywołane nimi wady, samowolne przeróbki.
12. Serwis może odmówić wykonania naprawy w przypadku śladów nieautoryzowanej naprawy.
13. W przypadku gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, serwis może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej.
14. Producent ani Autoryzowany Serwis nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w naprawie.
15. Dostarczenie produktu powinno nastąpić w stanie zabezpieczonym przed uszkodzeniami w transporcie. Brak akcesoriów może wydłużyć termin naprawy, jeśli są one niezbędne do jej wykonania, jednak nie stanowi podstawy do odmowy naprawy urządzenia głównego.
16. Jeśli w odesłanym do naprawy serwisowej produkcie nie stwierdzono usterki, gwarant może obciążyć konsumenta kosztami ekspertyzy tylko w przypadku, gdy reklamacja została złożona w sposób oczywiście nieuzasadniony.
17. Zgodnie z art. 577(1) § 1 Kodeksu cywilnego, gwarancja udzielana na produkt nie wpływa na uprawnienia kupującego wynikające z przepisów o niezgodności towaru z umową.
18. Produkty do reklamacji powinny być dostarczane czyste oraz w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniami w transporcie (oryginalnym lub zastępczym).