

HomeFill® II



**Oddychaj pełną piersią
gdziekolwiek chcesz**

Trusted Solutions,
Passionate People®



System **HomeFill II** firmy Invacare łączy w sobie innowacyjność i praktyczność, tworząc dyskretne przenośne urządzenie do oddychania, które jest bezpieczne i łatwe w użyciu, przenoszeniu i napełnianiu.

Lekka butla sprawia, że można być bardziej aktywnym i niezależnym w każdym środowisku, wiedząc, że dopływ tlenu może być uzupełniany w domu w dowolnym momencie zgodnie z wymaganiami użytkownika.



Osobista dostawa tlenu w warunkach domowych

HomeFill II firmy Invacare rewolucjonizuje ambulatoryjne zaopatrzenie w tlen, umożliwiając pacjentom napełnianie butli w komfortowych warunkach w domu. Składa się z wielostopniowej pompy, która w prosty i bezpieczny sposób spręża tlen ze specjalnie wyposażonych koncentratorów Invacare w butle tlenowe. Nie musisz martwić się o dostarczenie lub wyczerpanie tlenu - **HomeFill II** zapewnia nieograniczony tlen ambulatoryjny bez kosztów dostawy dla dostawców usług.

Zabierz go ze sobą, gdziekolwiek jesteś

Po napełnieniu butli pacjenci mogą umieścić go w lekkiej torbie do noszenia i zabrać ze sobą, gdziekolwiek się znajdują. Pacjenci mogą również czerpać korzyści z mobilności **HomeFill II**, mogą jeździć i transportować urządzenie podczas wizyty u przyjaciół czy rodziny lub podczas urlopu.

Łatwe dopasowanie do potrzeb pacjenta i proste uzupełnianie

Konserwator może być dostosowany do leczenia i dawki tlenu wymaganej przez lekarza przepisującego od 1 do 5 równoważników LPM. Pacjenci mogą teraz otrzymać odpowiednią ilość tlenu z większą wydajnością niż wcześniej *. System sprzęgający **OxyLock** sprawia, że napełnianie cylindrów jest łatwe i bezproblemowe - wystarczy włączyć sprężarkę, podłączyć butlę i rozpocznie się proces napełniania. Po napełnieniu urządzenie automatycznie przełączy się, dzięki czemu będzie bezpieczniejsze w użyciu i wyeliminuje niebezpieczeństwo niewłaściwej obsługi.

* Zobacz referencje kliniczne z tyłu



Opcje i właściwości



Podróżowanie jest łatwe dzięki modułowej konstrukcji.



Torba

Butlę z tlenem można nosić na ramieniu, zwiększając tym samym ogólny komfort i wygodę.



Kompatybilny z
Platinum® 9 dla
pacjentów potrzebujących
wysokiego przepływu



**Butle tlenowe z ochroną
dla zwiększenia
niezależności**

Lekkie, aluminiowe butle ze
zintegrowanymi regulatorem
i ochroną.



Przedni panel

Przełącznik on/off (włącz/
wyłącz) i lampki sygna-
lizujące stan napełnienia.



OxyLock

Wyjątkowy system
napełniania, który zapewnia
szybkie, bezpieczne i łatwe
podłączenie do butli
HomeFill II.



**Zintegrowany
regulator i ochroniacz**

Z nasadką ochronną i
wskaźnikiem



**Gama lekkich
butli**

Aby zaspokoić potrzeby
wszystkich pacjentów.
Dostępny jest szereg butli o
przepływie ciągłym i butli z
ochroną.



Tylny uchwyt

W celu ułatwienia transportu.
Licznik godzin mierzy
przestrzeganie czasu
pacjenta.

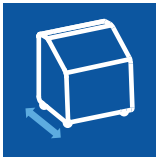
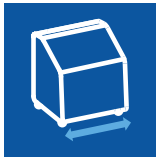
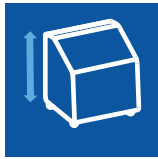


Dla dobra pacjenta

HomeFill II automatycznie
kontroluje proces napełniania,
aby zagwarantować > 90%
czystości tlenu zarówno
w butli jak i dla pacjenta.

Dane techniczne

Szczegółowe informacje przedsprzedażne dotyczące tego produktu, w tym instrukcję obsługi produktu, można znaleźć na stronie <http://www.invacare-eu-export.com/home fi II2>

	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga	Ładowarka	Zużycie energii	Czystość O ₂
							
HomeFill II	400 mm	515 mm	380 mm	15 kg	230 V, 50 Hz	175 W	> 90%

Dane techniczne: Butle

Autonomia butli konserwatora w godzinach 1						
	Setting 1	Setting 2	Setting 3	Setting 4	Setting 5	Continuous Flow (2L/min)
Butla 1 Litr	10h 6min	6h 30min	4h 54min	3h 54min	3h 12min	1h
Butla 1,7 Litr	15h	9h 36min	7h 18min	5h 54min	4h 48min	1h 54min

Autonomia przepływu ciągłego butli w godzinach 1											
Ustawienia przepływu	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Butla 1,7 Litr	16h 45min	8h 24min	5h 30min	4h 12min	2h 45min	2h	1h 40min	1h 20min	1h	50min	42min

Czasy napełniania 1	
Butla 1 Litr	1h 15min
Butla 1,7 Litr	2h 5min

1. Czasy są przybliżone

Wymagania systemowe

Invacare HomeFill II musi działać w połączeniu z koncentratorem tlenu **Invacare** (patrz: odpowiednia broszura Invacare).

Referencje kliniczne

CHEST 2002: Refillable Oxygen Cylinders May Be an Alternative for Ambulatory Oxygen Therapy in CPD. *Antoine Cuvelier, Jean-François Nuir, Nadia Chakroun, Jérôme Aboab, Gabriella Onea & Daniel Benhamou.*

Respiratory Care 2003: A Clinical Comparison of Portable Oxygen Systems: Continuous Flow Compressed Gas VS HF Cyl. *J Lewarski.*

McCoy & Bliss: Evaluation of the **HomeFill II** Oxygen System During Activities of Daily Living; *Robert McCoy & Peter Bliss – December 2001.*

CPLF 2008: Efficacy of gaseous oxygen cylinders filled with a compressor: *C. Molano, I Huet, H. Aouina, C. Viacroze, JF Muir, A. Cuvelier (Antidir).*

ERS 2009: **HomeFill II** oxygen concentrator system – “better for your patient and your pocket” *Phyllis Murphie, Stuart Little, Jane Gysin, Paul Rafferty. Respiratory Medicine, Dumfries and Galloway, Dumfries, Dumfries and Galloway, United Kingdom.*

ERS 2009: A comparison of four portable oxygen devices on exercise performance in adult COPD patients who become hypoxaemic on activity; *Lynn McDonnell, Louise Ellis, Rexford Muza, Jimstan Periselneris, Leyla Osman, Andrew Grieve, Eleanor Main, Craig Davidson – Guy's & St Thomas' London UK.*