

DRE Integra SP VS02

Máquina de Anestesia Portátil

El estándar de oro de anestesia portátil

El DRE Integra SP VS01 es un sistema de anestesia completamente funcional, compacto y portátil en un paquete liviano. El sistema de anestesia Integra SP VS02 es lo suficientemente compacto para la cirugía más pequeña o suite de imágenes, y es totalmente portátil.

Transporte fácilmente el DRE Integra SP VS02 utilizando la manija retráctil, ubicada convenientemente en la parte superior de la unidad. Los puertos de gas situados lateralmente permiten a los médicos configurar de forma segura y eficiente la máquina.

Para mantener el compromiso de DRE con la calidad, todos los sistemas de anestesia Integra SP incluyen una garantía del fabricante de dos años. El DRE Integra SP VS02 está disponible con un estuche de transporte rígido, completo con ruedas y asa retráctil. También está disponible un conveniente carrito móvil con un estante empotrado resistente.

Características

- ✓ Unidad pequeña y compacta ideal para anestesia de base de oficina
- ✓ ¡La máquina liviana pesa solo 26 libras!
- ✓ Máquina de tres gases (O₂, N₂O y Aire)
- ✓ Dispositivo mecánico anti-hipóxico e interbloqueo aire / N₂O



- ✓ Mango superior retráctil para facilitar el transporte.
- ✓ Puertos de gas laterales convenientemente ubicados.
- ✓ Muchas opciones de ventilación disponibles.
- ✓ Sistema de montaje del vaporizador compatible con Selectatec.
- ✓ Maleta de transporte opcional con asa retráctil y ruedas.
- ✓ La carretilla móvil opcional con el estante sostiene 1 vaporizador.
- ✓ Específicamente diseñado para acomodar bajo flujo.
- ✓ O₂ caudalímetro Auxiliar.
- ✓ Válvula de descarga empotrada.
- ✓ También disponible con imagen de resonancia magnética compatible Penlon Nuffield Ventilador.

ESPECIFICACIONES



Peso (sin vaporizador):
28 lbs (12kg)



Altura: 13.8" (35cm)

Ancho: 19.7" (50cm)

Profundidad: 7.9" (20cm)



Rango de Flujo:
oxígeno / aire / óxido nítrico:
0-10 L/ min

Precisión del Caudalímetro:
+ - 2.5% de lectura
a escala completa

Advertencias de Falla de Oxígeno:
Silbato del sistema de gas e indicador visual
(presión directa operada)

Botón de Flash de Oxígeno:
El sistema suministra 35-75 L / min cuando se presiona completamente el botón

Concentración Mínima de Oxígeno:
30% ± 3%
(flujo Total O₂ + N₂O)


Flujo Basal - Oxígeno:
100 - 200 mL/min

1701-2018-03-13

Disponible con
absorbedor
opcional.



También
disponible con
un auto móvil
duradero.

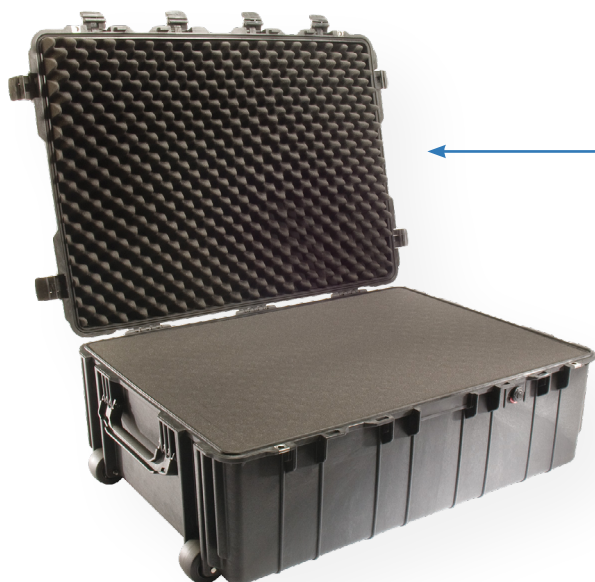

También está
disponible con un
estuche rígido, lo que
facilita el transporte
del sistema.



ESPECIFICACIONES



**Rango de Presión de
Funcionamiento Atmosférico:**
28 libras (12 kg)



**Temperatura de
Funcionamiento:**
50 a 100°F (-5 a 40°C)

**Temperatura de Transporte /
Almacenamiento:**
23 a 104°F (-5 a 40°C)



Altitud de Funcionamiento:
8000ft (2438m) máximo



**Humedad de
Funcionamiento:**
10-85% R.H sin condensación



Limpieza:
Limpie las superficies externas
con un paño seco o húmedo.
Use jabón suave o solución
desinfectante si es necesario.