



Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos DescarpacK

DESCRIÇÃO

O **Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos DescarpacK** é confeccionado em plástico rígido o que confere segurança e alta resistência, para esta classe de resíduos, evitando a contaminação dos usuários.

Disponível nos modelos de 7L e 13L, desenvolvido em formato retangular na cor branco, translúcido para facilitar a visualização do conteúdo interno, possui tampa que evita vazamentos. Sua abertura é feita através de uma sobre tampa (tampa de rosca), o que possibilita a abertura e o fechamento do coletor apenas no momento de descarte dos resíduos quimioterápicos.

Os coletores contam com pegaduras para transporte seguro.

O **Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos DescarpacK** possui etiqueta plástica com a simbologia de resíduo tóxico para melhor identificação.

PRODUTO



Produto isento de notificação na Anvisa por não ser considerado um produto para saúde, de acordo com a Nota Técnica da Anvisa nº 218 de 2020.

Fabricante: Nindbo HLS Medical Products Co. Ltd e/ou DescarpacK Descartáveis do Brasil Ltda.

INDICAÇÃO DE USO

O **Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos Descarpack** foi desenvolvido para atender as precauções de segurança necessárias em ambientes onde resíduos são gerados durante a manipulação e administração de medicamentos quimioterápicos, atendendo as recomendações da RDC 222/2018 e CONAMA 358. Proporcionando um descarte adequado a estes resíduos, evitando acidentes e contaminações.

MODELOS DISPONÍVEIS

O **Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos Descarpack** é disponível nos modelos: 7,0L e 13L.

COMPOSIÇÃO

- **Coletor:** Polietileno;
- **Tampa:** Polietileno;
- **Rótulo:** Plástico.

VALIDADE

Indeterminada.

CAPACIDADE

| Capacidade Total | Capacidade Útil |
|------------------|-----------------|
| 7,0L | 5,3L |
| 13,0L | 10,0L |

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

| Modelo | Código | Quant. Caixa Master |
|--|---------|---------------------|
| Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos Descarpack 7,0L | 0144101 | 24 unidades |
| Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos Descarpack 7,0L | 0144201 | 24 unidades |
| Coletor Rígido para Resíduos Quimioterápicos Descarpack 13,0L | 0144301 | 20 unidades |

INSTRUÇÕES DE USO

1. Monte o coletor fechado adequadamente a tampa principal, observando a selagem completa do encaixe;
2. Não desconecte, reencepe ou entorte as agulhas usadas;
3. Nunca exceda o limite de enchimento do coletor;
4. Para descarte do coletor feche e trave a tampa e transporte pelas pegaduras, afastado do corpo.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- A tampa deve ser fechada de maneira correta para que não haja perigo de o coletor abrir;
- Nunca jogue os resíduos quimioterápicos no lixo comum;
- A ausência de qualquer parte deste produto pode comprometer sua eficácia;
- Produto não estéril;
- Não encha o coletor acima do nível indicado;
- Feche a tampa com segurança quando a linha de preenchimento for alcançada;
- Produto médico-hospitalar de uso único.


ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade.

Para que o produto permaneça íntegro é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados

ANEXO

Instruções de uso de como fechar o produto Coletores Rígidos para Resíduos Quimioterápicos Descarpack

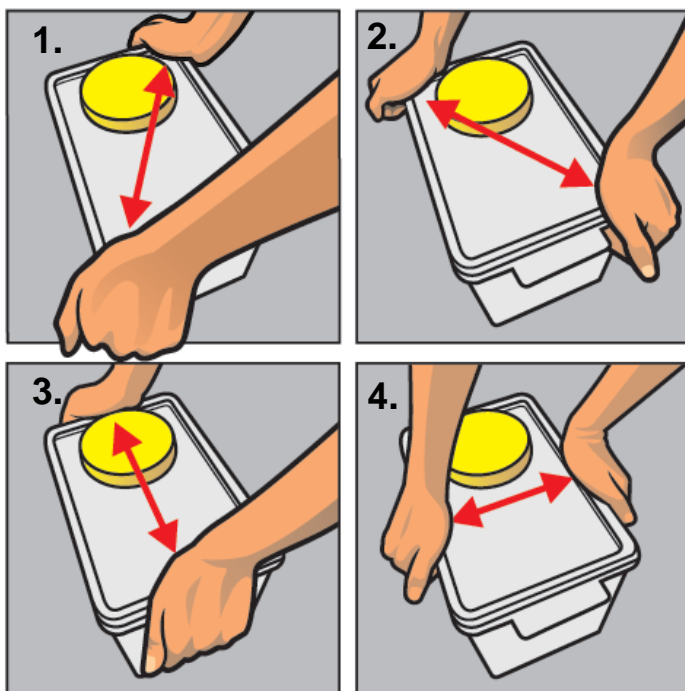

1. Coloque a tampa sobre o coletor;
 2. Pressione fortemente com as duas mãos na diagonal da tampa até ouvir um clipe;
 3. Repita o procedimento na outra diagonal;
 4. Pressione as 4 laterais, para finalização do encaixe;
- Pronto! Seu coletor está pronto para uso;

Em atendimento ao Art.5º item V da IN 04/2012 esta Ficha Técnica pode ser solicitada através do e-mail:
descarpack@descarpack.com.br