

Silent



Modelo Industrial

 800 996 0010  662 296 2278

 beracahmedica.mx  ventas@beracahmedica.mx

Silent

Cabina para audiometría Modelo Silent

La cabina para audiometría proporciona un ambiente aislado con condiciones acústicas particulares que garantiza la medición en condiciones óptimas del umbral de audición del individuo evaluado.

La cabina Silent es recomendada para la salud ocupacional dentro de las plantas industriales.

Cuenta con 6 capas de material aislante que permite la adecuada realización de los estudios de audiometría.



 800 996 0010  662 296 2278

 beracahmedica.mx  ventas@beracahmedica.mx

Silent

Confiabilidad para realizar estudios audiométricos por su adecuada atenuación al ruido ambiental con una atenuación máxima de 50 dB.

Tabla de atenuación de sonido

| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 20 | 28 | 38 | 39 | 38 | 45 | 50 |

Garantizando el cumplimiento de la NORMA Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, las pruebas audiométricas con audífonos deben practicarse en un ambiente que no exceda los niveles de presión acústica que se dan a continuación:

| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| N/A | 44 | 26 | 28 | 37 | 44 | 41 |

 800 996 0010  662 296 2278

 beracahmedica.mx  ventas@beracahmedica.mx

Silent

Cabina para audiometría Modelo Silent


Cuenta con dos vidrios tratados en arena silica para aumentar su nivel de atenuación con una medida de 10mm cada vidrio y una cámara de aire.

Medidas de 50cm X 50cm.

Repisa adecuada para cualquier modelo de audiómetro en el mercado con unas medida de 50cm de ancho X 80cm de largo y 15cm de altura.

Placa con 8 Jacks para la conexión del audiómetro.

Apagador para la luz interna Led y alimentación a 120V para audiómetro.

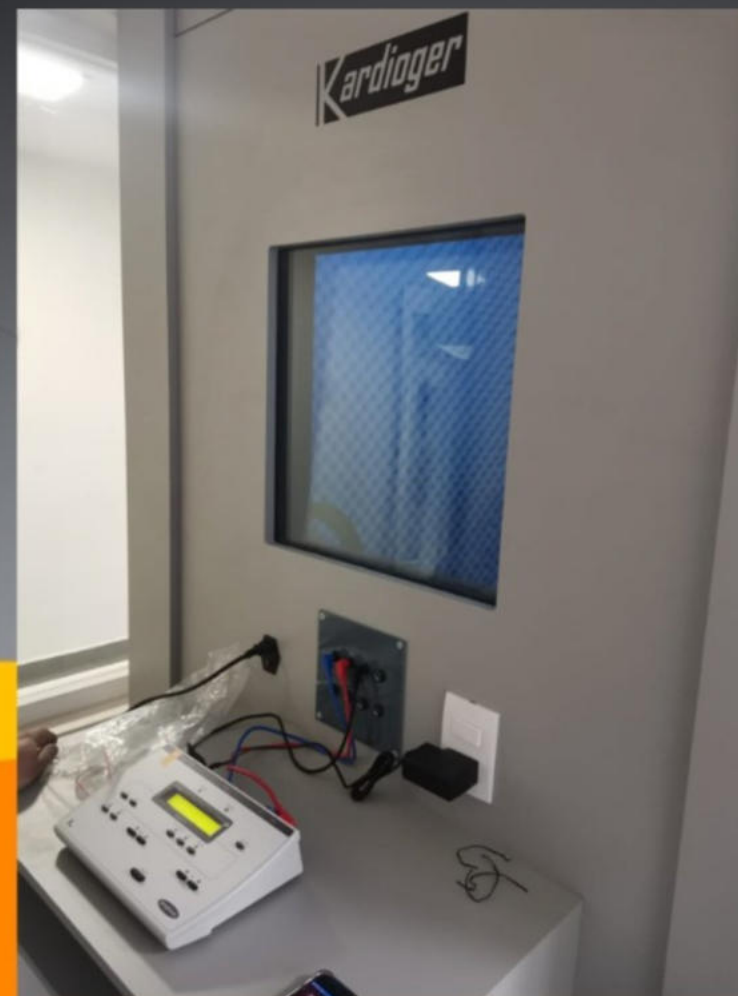

800 996 0010 662 296 2278

beracahmedica.mx ventas@beracahmedica.mx

Silent


Cabina para audiometría Modelo Silent

Fabricada en paneles de madera utilizando las técnicas de eliminación de ruido en estudios de grabación.

Usando materiales acústicos utilizados en estudios de grabación profesionales.

Cuenta con 6 capas diferentes de materiales acústicos.

Terminado interior en espuma de poliuretano flexible, densidad 35 Kg/m³ y espesor de 35mm retardante al fuego.

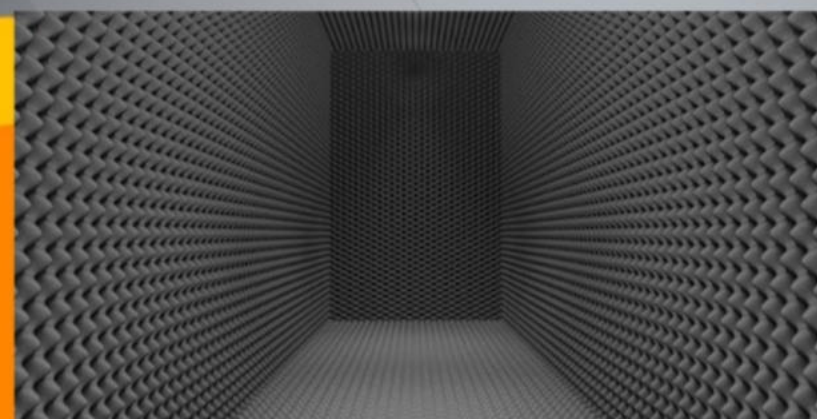

 800 996 0010  662 296 2278

 beracahmedica.mx  ventas@beracahmedica.mx

Silent

Cabina para audiometría Modelo Silent

Fácil instalación , no se requiere personal especializado para su instalación.

Medidas externas: 120cm ancho X 120cm largo X 210cm altura.

Medidas Internas: 104cm ancho X 104cm largo x 194cm de altura.

Espesor de la pared 8cm con 6 capas de aislamiento acústico.

Peso total de la cabina 500 kg

Terminado exterior en color gris con alta durabilidad y resistencia.



 800 996 0010  662 296 2278

 beracahmedica.mx  ventas@beracahmedica.mx

Silent

Cabina para audiometría Modelo Silent

Incluye certificado de atenuación y cumplimiento con la NORMA Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001.

Certificado de fabrica y garantía de cumplimiento.

1 año de garantía.

Compatible con todos los audiómetros del mercado.

Incluye cables de conexión para conectar la el audiómetro a la cabina.



800 996 0010 662 296 2278

beracahmedica.mx ventas@beracahmedica.mx