



Smi

HECHTMATERIAAL

Voor kwaliteit
&
veiligheid



SMI: Chirurgisch hechtmateriaal van uitstekende kwaliteit

Het bedrijf **SMI AG** werd in 1987 opgericht en heeft sindsdien over de landsgrenzen heen naam verworven als fabrikant van chirurgisch hechtmateriaal.

De firma is gevestigd in de gemeente St. Vith in het oosten van België, in de buurt van het 3-landenpunt België-Duitsland-Luxemburg.

DE HOOGSTE NORMEN INZAKE KWALITEIT EN VEILIGHEID

SMI wendt sinds het begin internationale kwaliteitsnormen aan zoals de ISO-norm EN 13485 en de GMP-normen.

Alle basis grondstoffen en afgewerkte producten worden onderworpen aan een strikte kwaliteitscontrole onder toezicht van een gespecialiseerd team.

SMI hecht veel belang aan de "klanttevredenheid" door het garanderen van kwaliteitsvolle producten en een onberispelijke service. Klantgerichte aandacht, wederzijds vertrouwen en correcte leveringen, vormen een belangrijke basis.

WERELDWIJDE ERKENNING

SMI exporteert naar ongeveer 120 verschillende landen wereldwijd. Dit succes werd met de „Royal Export Award 2000“ van de BDBH (Belgische dienst voor buitenlandse handel) bekroond.

THE CATALOGUE


Deze catalogus bevat informatie over het hele productassortiment van **SMI** met alle detailbeschrijvingen van de presentaties die continu in voorraad zijn. In het geval een klant een niet standaard presentatie wil, kan deze op eenvoudig verzoek als speciale uitvoering geproduceerd worden. We streven ernaar om onze "product range" regelmatig te updaten, op basis van nieuwe trends of marktontwikkelingen.

SMI biedt alle maten aan, van USP 12/0 tot en met USP 6. Dit schept voor chirurgen een waaier van toepassingsmogelijkheden bij verschillende types van chirurgie, zoals Cardiologie – Microchirurgie – en Ophthalmologie.

Sinds vele jaren zijn **SMI** producten bekend door top chirurgen over de hele wereld.



1 20 01 15 2 P

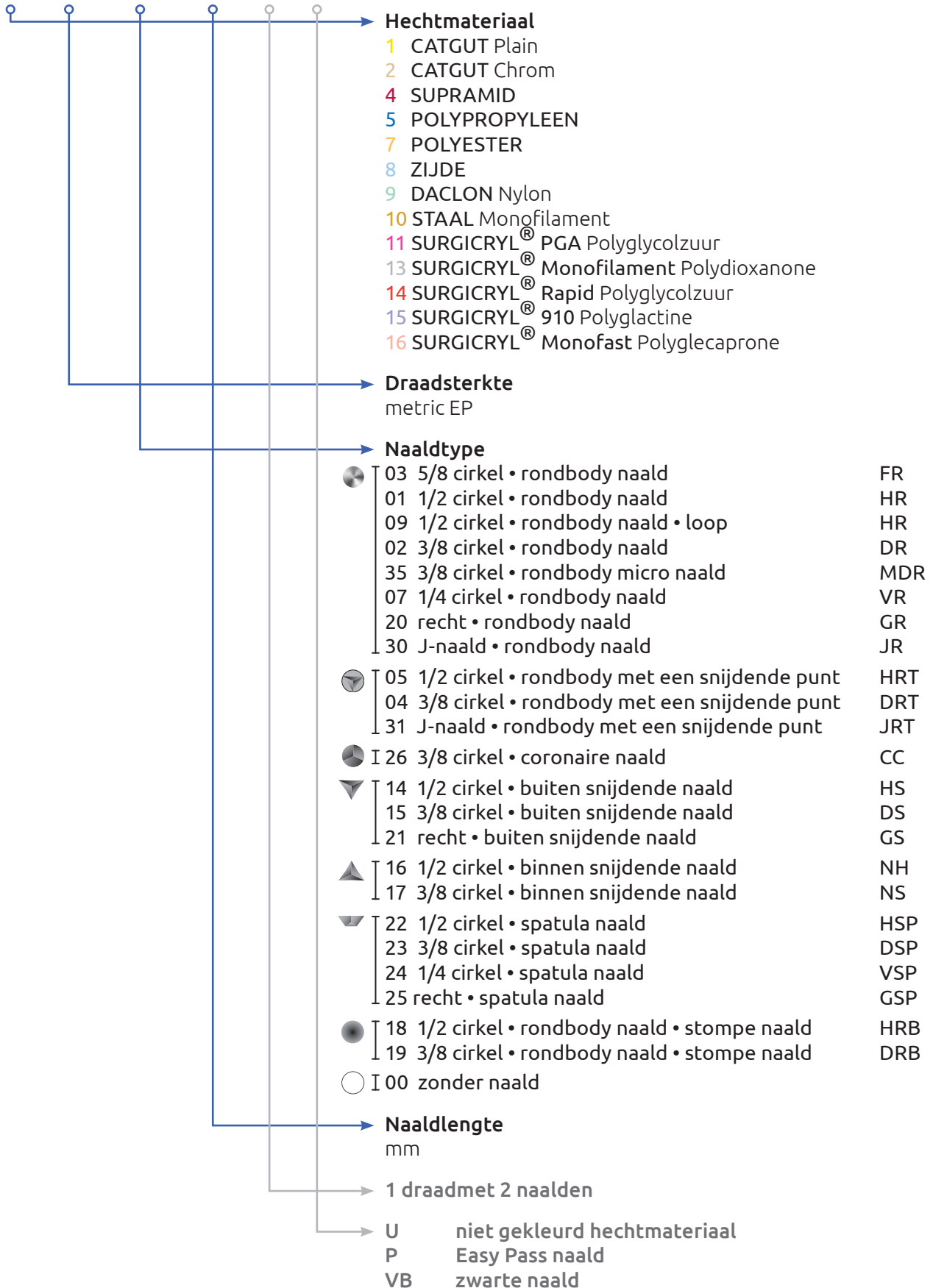

De SMI chirurgische hechtingsnaalden zijn vervaardigd uit hoog-kwaliteits roestvrij staal. Een optimale combinatie naaldsterkte/naaldbuigzaamheid dragen bij tot het bekomen van een uitstekend eindresultaat. De precisie aanprikpunt en de geavanceerde silicone coating garanderen een vloeiende huid penetratie met minimaal weefseltrauma. De vorm van het naaldlichaam maakt een "stabiele grip" van de naaldvoerder mogelijk.

5/8 CIRKEL



1/2 CIRKEL

3/8 CIRKEL

1/4 CIRKEL


J-NAALD

RECHT

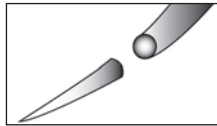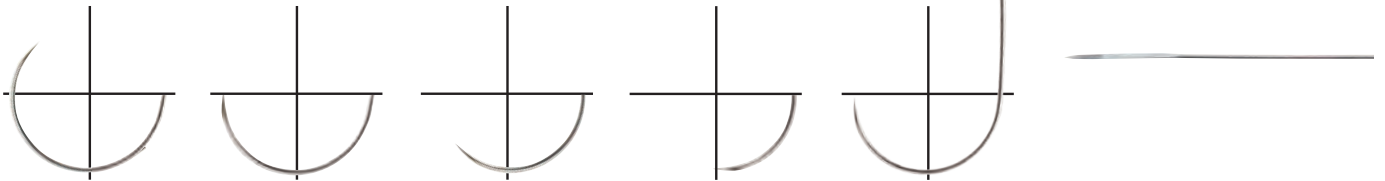


RONDBODY NAALD

Een gestroomlijnde naald die in een punt uitloopt.

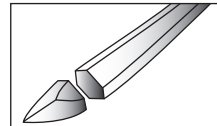


SPATULANAALD MET EEN SNIJDENDE KANT

Een naald met twee snijdende eindpunten.

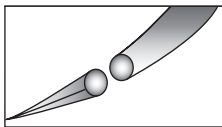


RONDE NAALDMET EEN SNIJDENDE PUNT

Een gestroomlijnde naald die in snijdende vlakken uitloopt.

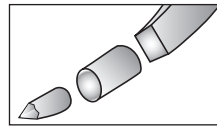


CORONAIRE NAALD

Een kleine punt gevolgd door een rond lichaam en een vierhoekig hoofdlichaam - voor een betere penetratie in de hart- en vaatchirurgie.

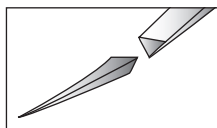


BUITEN SNIJDENDE NAALD

Een driehoekige structuur met een snijdende rand aan de buitenkant.

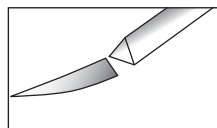


BINNEN SNIJDENDE NAALD

Een driehoekige structuur met een snijdende rand aan de binnenkant.

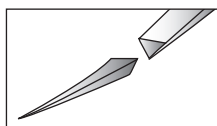

EASY PASS NAALD

Extrascherpe precisiepunt.

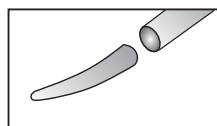


STOMPE NAALD

Cilindrische naald met afgeronde punt. Voor zachte weefsels, zoals lever en nieren. Minder risico voor letsels door naaldprikken.

- ✓ *Scherp en sterk*
- ✓ *Makkelijk doorgaand*
- ✓ *Elke doorgang voelt als de eerste*

De Easy pass-naald voor huidhechtingen combineert 3 geavanceerde technologieën voor een precisenaald van topkwaliteit:

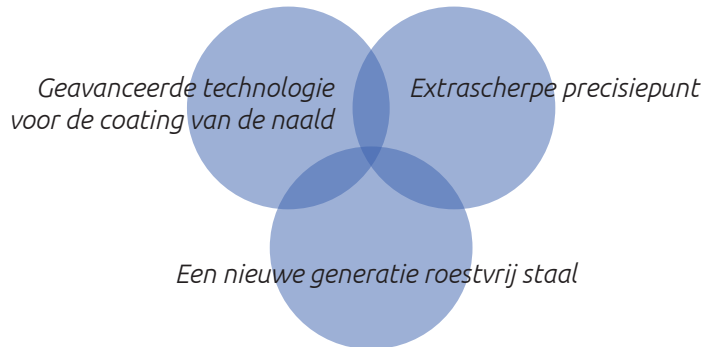

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Extrascherpe precisiepunt
- ✓ Een nieuwe generatie roestvrij staal
- ✓ Geavanceerde technologie voor de coating van de naald
Siliconen coating over de volledige chirurgische naald

VOORDELEN


Uitstekende penetratie om het trauma voor de patiënt te verminderen en de intimale integriteit te bewaren
Optimale en voorspelbare penetratie
Langdurig scherp, ook na verschillende doorgangen

Blijft beduidend scherper na elke doorgang
Beste buig- en breekweerstand
Optimale combinatie van sterkte en buigzaamheid


Extreem zacht oppervlak
Betere penetratie, controle en naalddoorgang
Behoudt de naaldscherpte van begin tot eind

INDICATIE Cosmetische en plastische chirurgie


40%- 50%betere penetratieprestaties in vergelijkingmet standaard snijnaalden

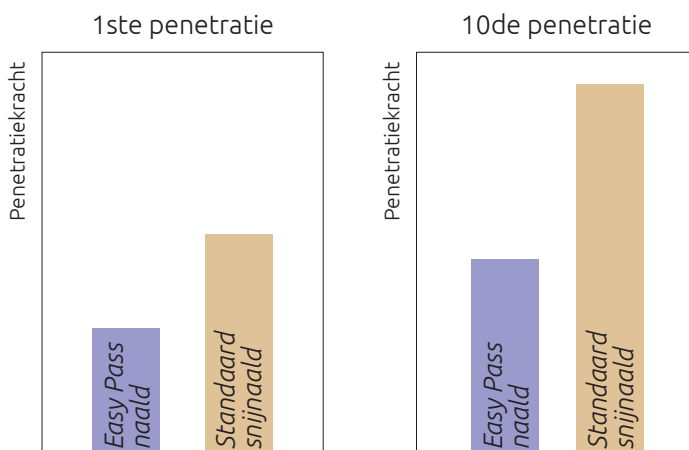

RESORBEERBARE DRAAD

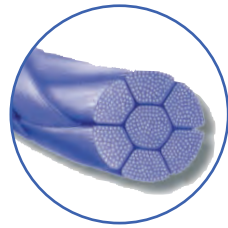


SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE

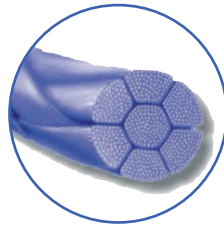


SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID

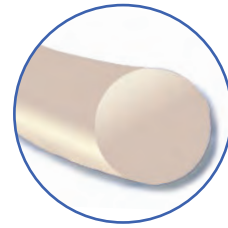


SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLICAPRONE 25

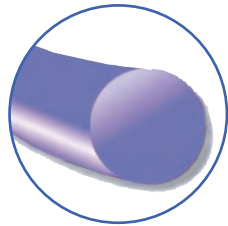

SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE

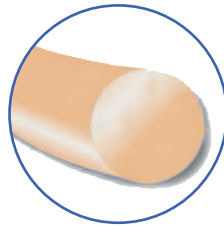


CATGUT
PLAIN

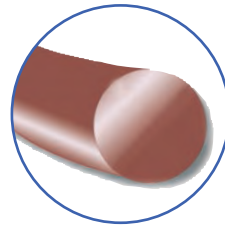

CATGUT
CHROM


NIET-RESORBEERBARE DRAAD

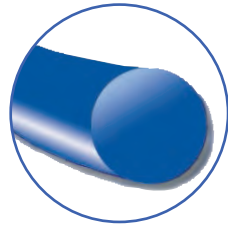


POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER

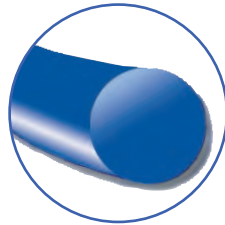


DACLON
NYLON
BLUE

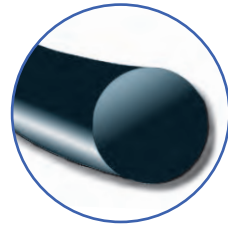


DACLON
NYLON
BLACK

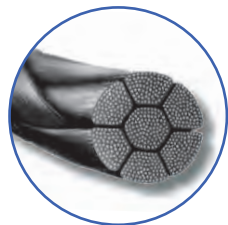


SILK
BRAIDED
BLACK

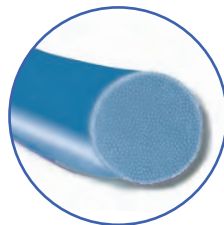

SILK
VIRGIN
BLUE

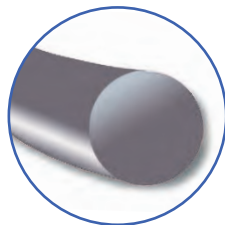

STEEL
MONOFILAMENT

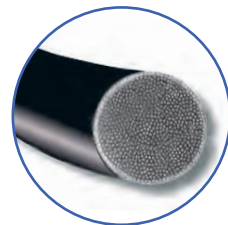


SUPRAMID
BLACK

Hechtmateriaal in blisterverpakking

resorbeerbaar

- SURGICRYL[®] 910 Polyglactine
- SURGICRYL[®] PGA Polyglycolzuur
- SURGICRYL[®] Rapid Polyglycolzuur
- SURGICRYL[®] Monofast Polyglecaprone
- SURGICRYL[®] Monofilament Polydioxanone
- CATGUT Plain
- CATGUT Chrom

Verlies van de treksterkte na verloop van tijd

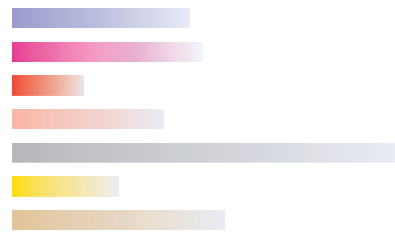

niet-resorbeerbaar

- POLYPROPYLEEN
- DACLON Nylon
- SUPRAMID Polyamide
- ZIJDE Gevlochten
- POLYESTER
- STAAL Monofilament

Microchirurgie

resorbeerbaar

- SURGICRYL[®] 910 Polyglactine

niet-resorbeerbaar

- DACLON Nylon
- POLYPROPYLEEN

Oogheelkunde

resorbeerbaar

- SURGICRYL[®] PGA Polyglycolzuur
- SURGICRYL[®] 910 Polyglactine

niet-resorbeerbaar

- ZIJDE Virgin
- ZIJDE Gevlochten
- DACLON Nylon
- POLYESTER
- POLYPROPYLEEN

Andere artikelen

- Huid stapler & haakjesverwijderaar
- Biopsy punch
- Hechtmateriaal staanders voor hechtingen in blister
- Polypropyleen mesh
- Chirurgisch scalpel & grip
- Episio set
- Cervix set

- Patella set
- Pilomat - tablet-crusher en tablet-splitter
- Chirurgische naald
- Huid markeerpen
- Beenderwas
- SMI Spon - resorbeerbaar haemostatic gelatin sponge

Hechtmateriaal in cassetten

resorbeerbaar

- SURGICRYL[®] PGA Polyglycolzuur
- SURGICRYL[®] PGA Plus Polyglycolzuur
- SURGICRYL[®] Monofilament Polydioxanone
- SURGICRYL[®] Monofast Polyglecaprone
- CATGUT Plain
- CATGUT Chrom

niet-resorbeerbaar


- ZIJDE Gevlochten zwart
- SUPRAMID Polyamide wit
- SUPRAMID Polyamide zwart
- LINFIL Natural
- VITAFIL Polyester wit
- DERMAFIL Polyester groen
- DACLON Nylon
- STAAL Monofilament

Voor meer accurate technische informatie kunt u zich beroepen op de bijsluiter.
U vindt ons volledig productassortiment op www.sutures.be.


SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE

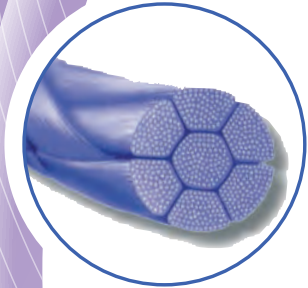

Type	Gevlochten en gecoat multifilament
Samenstelling	Polyglactine 910, een co-polymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide
Coating	Polyglycolide-co-L-lactide en calciumstearaat (<1%)
Kleur	Violet
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 56 - 70 dagen. Na 21 dagen blijft nog 40% - 50% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

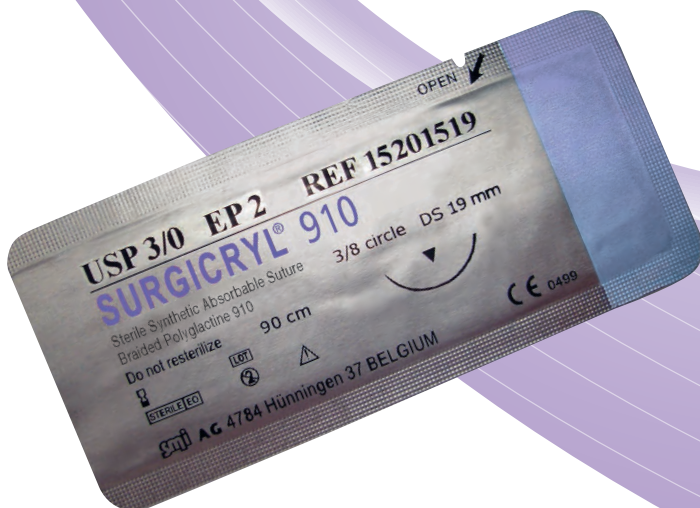

Voor kwaliteit
&
veiligheid

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE

EIGENSCHAPPEN

- Grote treksterkte
- Synthetisch
- Resorptie door hydrolyse
- Gevlochten draadopbouw

- Gecoat multifilament

- Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voorspelbare resorptiesnelheid
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid

- Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefsel trek en trauma
- Goede knoop-glij eigenschappen
- Beperkte capillaire werking

- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE Hechting van weke delen en/of ligature


vooral Algemene heelkunde
 Sluiten van de huid
 Gastro-intestinale chirurgie
 Plastische chirurgie
 Oogheelkundige chirurgie
 Gynaecologie
 Obstetrie
 Orthopedie
 Urologie

CONTRA-INDICATIE Cardio-vasculaire chirurgie
 Neurochirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE

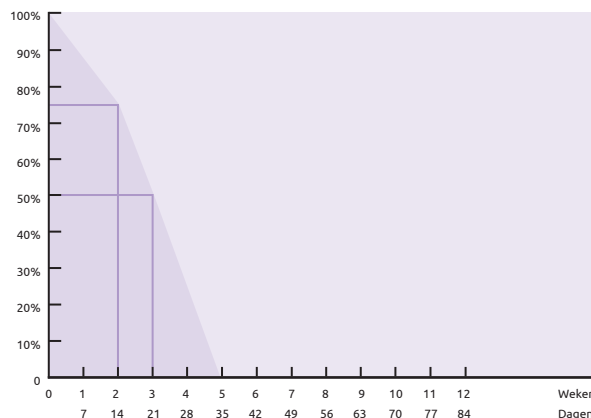

RESORPTIE

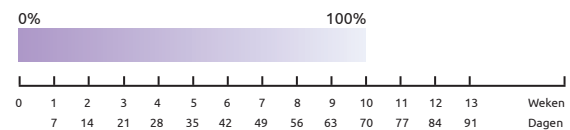

Without needle



Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2

Without needle



Ligapack


















Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------




2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025




Round bodied taper point 

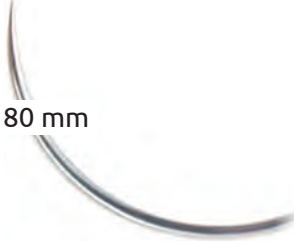


1/2 Circle 






		Metric	USP	Length	Color	Order number
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	violet	15070113
		1	5/0	75 cm	violet	15100113
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150113
HR 17 mm		1	5/0	75 cm	violet	15100117
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150117
		2	3/0	75 cm	violet	15200117
HR 22 mm		3	2/0	75 cm	violet	15300117
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150122
		2	3/0	75 cm	violet	15200122
HR 26 mm		3	2/0	75 cm	violet	15300122
		4	1	75 cm	violet	15400122
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200126
		3	2/0	75 cm	violet	15300126
		3.5	0	75 cm	violet	15350126
		4	1	75 cm	violet	15400126
		5	2	75 cm	violet	15500126
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200130
		3	2/0	75 cm	violet	15300130
		3.5	0	90 cm	violet	15350130
		4	1	75 cm	violet	15400130
		5	2	90 cm	violet	15500130
HR 40 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200136
		3	2/0	75 cm	violet	15300136
		3.5	0	90 cm	violet	15350136
		4	1	90 cm	violet	15400136
		5	2	90 cm	violet	15500136
HR 45 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200140
		3	2/0	75 cm	violet	15300140
		3.5	0	75 cm	violet	15350140-75
		3.5	0	90 cm	violet	15350140
		4	1	75 cm	violet	15400140-75
		4	1	90 cm	violet	15400140
HR 45 mm		5	2	75 cm	violet	15500140-75
		5	2	90 cm	violet	15500140
		5	2	90 cm	violet	15500145












Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
HR 48 mm 		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
HR 60 mm 		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350160
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400160
1/2 Circle  HR 65 mm 		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165
HR 80 mm 		4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180

Round bodied taper point double armed 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle  2 x HR 26 mm 		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2

Round bodied taper point loop 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle  HR 45 mm 		3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350945

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
5/8 Circle 	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300327
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350327


Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DR 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15150217
	DR 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200222
	DR 30 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400230

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412
	HS 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422
	HS 23 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351426
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401426
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201430
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301436
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351436
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401436
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501436
	HS 40 mm 	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	15201440
3		2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301440	
3.5		0	90 cm	<i>violet</i>	15351440	
4		1	90 cm	<i>violet</i>	15401440	
HS 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501440	
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448	
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401448	
	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448	




Reverse cutting



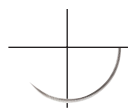












3/8 Circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
		2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201516UP
DS 16 mm black		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	15151519UP
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201524UP
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301526
DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	15201526UP
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351530
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401536
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301545

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 80 mm 	7	5	150 cm	<i>violet</i>	15701580

Round bodied taper cutting point 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HRT 13 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150513
	HRT 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150517
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200517
	HRT 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200526
	HRT 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300530
	HRT 36 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400530
	HRT 40 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300536
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350536
	HRT 48 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400536
4		1	90 cm	<i>violet</i>	15400540	
	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500540	
	8	6	150 cm	<i>violet</i>	15800548	

Round bodied taper cutting point 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DRT 13 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150413
	DRT 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150417
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200417

Round bodied taper cutting point

3/8 Circle



DRT 13 mm



1

5/0

75 cm

violet

15100530-0413

1/2 Circle



HRT 30 mm

Cutting

Straight

GS 60 mm



Metric

USP

Length

Order number

2

3/0

75 cm

violet

15202160

3

2/0

75 cm

violet

15302160

Blunt 

1/2 Circle



HRB 30 mm



3

2/0

75 cm

violet

15301830

HRB 36 mm



3.5

0

90 cm

violet

15351836

4

1

90 cm

violet

15401836

HRB 45 mm



5

2

90 cm

violet

15501845

Blunt 

3/8 Circle



DRB 63 mm



4

1

100 cm

violet

15401963

DRB 85 mm



5

2

75 cm

violet

15501985

SURGICRYL®


PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Type	Gevlochten en gecoat multifilament
Samenstelling	Polyglycolzuur
Coating	Polycaprolactone en calciumstearaat (1%)
Kleur	Violet / Beige - ongekleurd
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 60 - 90 dagen. Na 21 dagen blijft nog 50% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

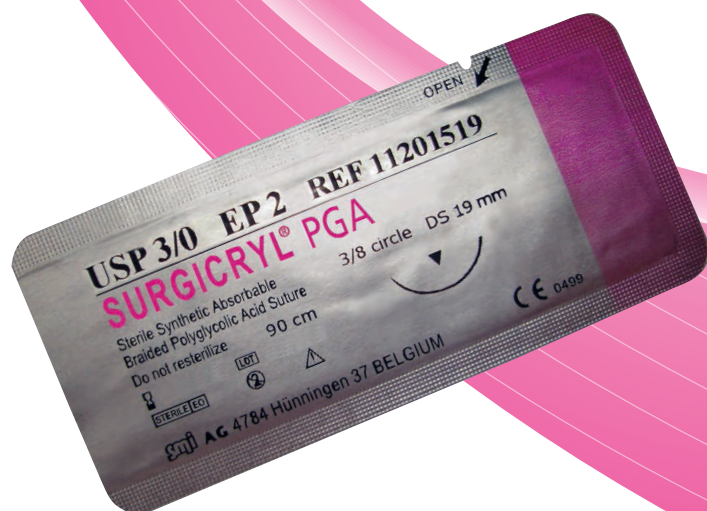

Voor kwaliteit
&
veiligheid

The logo for smi, consisting of the lowercase letters "smi" in a bold, blue, sans-serif font with a white outline. The letters are slightly stylized, with the "i" having a dot.

SURGICRYL®

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

EIGENSCHAPPEN

- Grote treksterkte
- Synthetisch
- Resorptie door hydrolyse
- Gevlochten draadopbouw

- Gecoat multifilament

- Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voorspelbare resorptiesnelheid
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid

- Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
- Goede knoop-glij eigenschappen
- Bepaalde capillaire werking

- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE Hechting van weke delen en/of ligature


vooral Algemene heelkunde
Sluiten van de huid
Gastro-intestinale chirurgie
Gynaecologie
Obstetrie
Plastische chirurgie
Urologie
Oogheelkundige chirurgie
Orthopedie

CONTRA-INDICATIE Cardio-vasculaire chirurgie
Neurochirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE

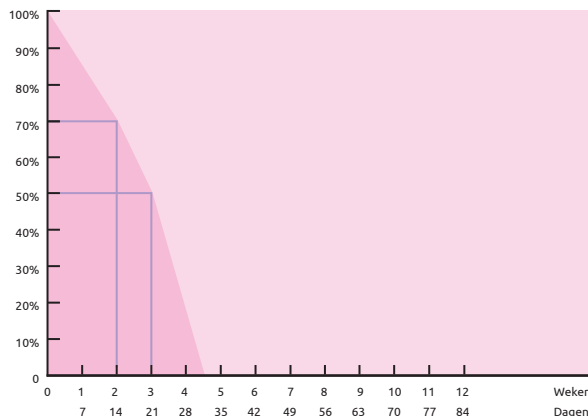

RESORPTIE

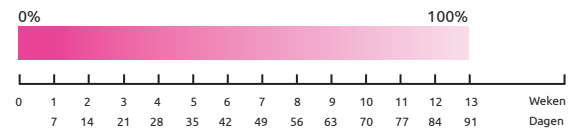

Without needle



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	11600015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	11700015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6
2	3/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11200060
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
3.5	0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11350060
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070

Without needle







Ligapack










Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i>	11150025
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	11200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	11300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	11350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	11400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	11500025
6	3&4	250 cm	<i>violet</i>	11600025




Round bodied taper point




1/2 circle





	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070113
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100113
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150113
HR 17 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070117
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200117
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300117
HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200122
	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11200122U
HR 26 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300122
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200126
HR 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300126
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300126U
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350126
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300130
HR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300130U
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350130
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400130
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200136
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300136
HR 36 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350136
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400136


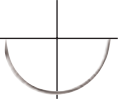

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11500140-75
	HR 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500148
6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11600148		


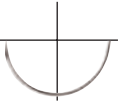





Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200217




Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
5/8 circle 	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300327

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
J-needle 	JR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11303036
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11353036
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11403040

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length	Order number	
5/8 circle  J-needle 	JR 36 mm FR 27 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036-0327

Round bodied taper point loop 		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HR 50 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i> 11400950

Round bodied taper cutting point 		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HRT 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i> 11400530
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11300536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11350536
			4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400536
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400540
	HRT 48 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11500540
4			1	90 cm	<i>violet</i> 11400548	

Round bodied taper cutting point 		Metric	USP	Length	Order number	
J-needle 	JRT 31 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403131





Reverse cutting














3/8 circle






		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151512UP
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151516U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151516UP
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151519U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201519U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201519UP
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201524U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301524U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201524UP
		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	11301524UP
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151530
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301530
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301530U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401530
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501530

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11401536
	DS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>violet</i> 11501536
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301540
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11401540
		5	2	75 cm	<i>violet</i> 11501540

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201422
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 11201422U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301422
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 11301422U
	HS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11151426
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201426
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301426
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351426
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201430
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301430
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501430
	HS 36 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11301436
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11351436
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11401436
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501436
	HS 40 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11301440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11351440
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11401440
HS 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501440	
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11351448	
	4	1	90 cm	<i>violet</i> 11401448	
	5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501448	
	6	3&4	90 cm	<i>violet</i> 11601448	

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	NS 16 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101716

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Type	Gevlochten en gecoat multifilament
Samenstelling	Polyglycolzuur
Coating	Polycaprolactone en calciumstearaat (1%)
Kleur	Beige - ongekleurd / Violet
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 42 dagen. Na 7 dagen blijft nog 50% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



Voor kwaliteit
&
veiligheid

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID

EIGENSCHAPPEN

- Hoge initiële treksterkte
- Synthetisch
- Resorptie door hydrolyse
- Gevlochten draadopbouw

- Gecoat multifilament

- Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voorspelbare resorptiesnelheid, snelle substantieresorptie
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid

- Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefsel trek en trauma
- Goede knoop-glij eigenschappen
- Beperkte capillaire werking

- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

Hechting van oppervlakkige weke delen en mucosa

vooral

Plastische chirurgie

Obstetrie (Episiotomieën)

Gynaecologie

Urologie (Besnijdenis)

Oogheelkundige chirurgie (Bindvlies)

Pediatische chirurgie

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie


Neurochirurgie

Ligaturen


Wanneer langer dan 7 dagen wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE

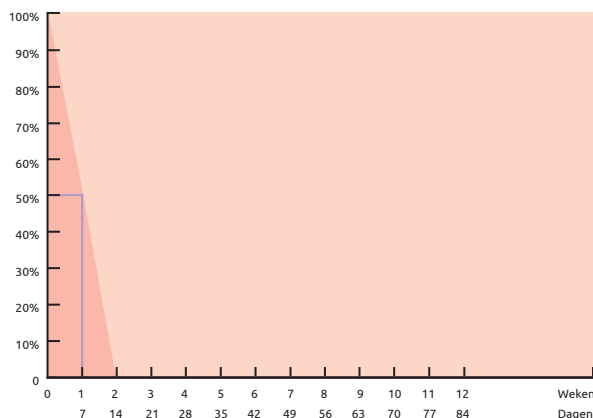

RESORPTIE

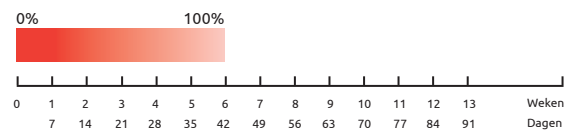

Without needle



	Metric	USP	Length		Order number
	2	3/0	150 cm	<i>undyed</i>	14200015
	3	2/0	150 cm	<i>undyed</i>	14300015
	3.5	0	150 cm	<i>undyed</i>	14350015
	4	1	150 cm	<i>undyed</i>	14400015
	5	2	150 cm	<i>undyed</i>	14500015



Round bodied taper point






















	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100113
HR 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150117
HR 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200117
	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150122
HR 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200122
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300122
HR 30 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200126
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300126
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350126
HR 36 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200130
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300130
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350130
HR 40 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200136
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300136
	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350136
HR 48 mm	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400136
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300140
	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350140
HR 48 mm	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400140
	5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500140
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300148
HR 48 mm	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350148
	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400148
	5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500148



1/2 circle













Round bodied taper point 		Metric	USP	Length	Order number	
5/8 circle 	FR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150317

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i>	14071512
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	14071512P
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	14101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	14151512P
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151516
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i>	14201516
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151519
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201519
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301519
	DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	14151519P
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	14201519P
	DS 19 mm black 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201519VB
DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201524	
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301524	
DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	14201524P	
DS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201526	
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301526	
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351526	
DS 30 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14351530	
DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301536	
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351536	

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HS 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i> 14151417
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i> 14201417
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301436
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351436
		HS 40 mm 	3.5	0	90 cm
	4		1	90 cm	<i>undyed</i> 14401440
	5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14501440	

Cutting 		Metric	USP	Length	Order number
Straight	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14202160


Round bodied taper cutting point 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HRT 17 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200517
		HRT 26 mm 	3	2/0	75 cm
	HRT 36 mm 		3	2/0	90 cm
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350536
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400536
	HRT 40 mm 	3	2/0	90 cm	<i>undyed</i> 14300540
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350540
4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400540		

Round bodied taper cutting point 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DRT 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14100416
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150416
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200416
	DRT 19 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150419
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200419
			3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200419

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLCAPRONE 25

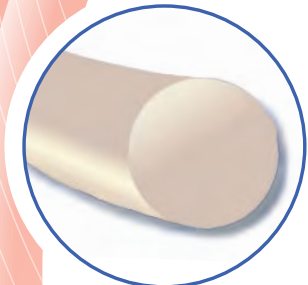

Type	Monofilament
Samenstelling	Polyglecaprone 25, een co-polymeer van 75% glycolide en 25% ε-caprolactone
Coating	Geen
Kleur	Violet / Beige - ongekleurd
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 90 - 120 dagen. Na 7 dagen blijft nog 60% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



Voor kwaliteit
&
veiligheid

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

EIGENSCHAPPEN

- Grote treksterkte
- Synthetisch
- Resorptie door hydrolyse
- Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- Buigzaamheid en soepelheid
- Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voorspelbare resorptiesnelheid
- Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltek en trauma
- Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
- Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen
- Goede hanteerbaarheid
- Gemakkelijk te knopen
- Goede knoopveiligheid
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE Hechting van weke delen en/of ligature


vooral Algemene heelkunde
Sluiten van de huid
Plastische chirurgie
Gastro-intestinale chirurgie
Gynaecologie
Urologie

CONTRA-INDICATIE Cardio-vasculaire chirurgie
Neurochirurgie
Oogheelkundige chirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE

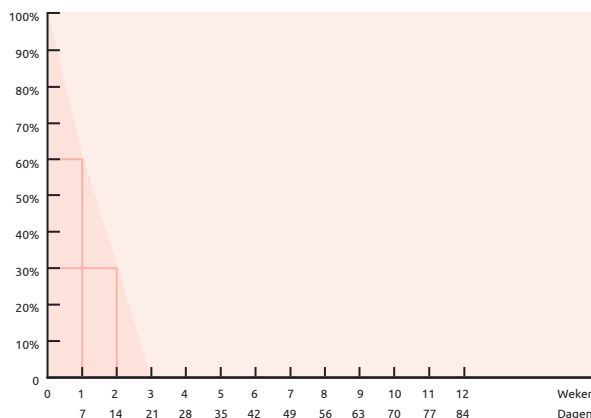

RESORPTIE

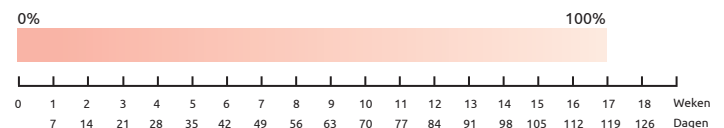

Without needle 

Metric USP Length Order number

3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	16300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	16350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	16400015
5	2	120 cm	<i>violet</i>	16500012
5	2	150 cm	<i>violet</i>	16500015

Without needle 

Metric USP Length Order number









Ligapack



5	2	250 cm	<i>violet</i>	16500025
---	---	--------	---------------	----------


Round bodied taper point 



Metric USP Length Order number

1/2 circle 	HR 13 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113
	HR 17 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
	HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122
	HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300126
HR 30 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350126	
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200130	
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300130	
HR 36 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350130	
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400130	
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300136	
HR 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350136	
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400136	
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300140	
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350140
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400140

Round bodied taper point

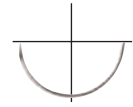1/2 circle


















		Metric	USP	Length		Order number
HR 48 mm 		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400148
HR 65 mm 		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	16300165





Reverse cutting




3/8 circle







		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm 		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	16071512
		0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i>	16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	16071512V
		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	16101512
DS 12 mm Easy Pass 		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16101512V
		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	16071512P
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	16101512P
DS 16 mm 		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	16151512P
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	16101516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101516V
DS 16 mm Easy Pass 		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151516V
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201516
DS 16 mm black 		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	16101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	16151516P
DS 19 mm 		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101516VB
		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	16101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519V
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519V
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201519V
DS 19 mm Easy Pass 		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301519
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	16151519P
DS 19 mm black 		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	16201519P
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519VB
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519VB	

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524P-75
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151526
	DS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16301526V
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
	DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351540
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401540

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401440


Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16302160

Blunt 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16351840
	HRB 48 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	16401848

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

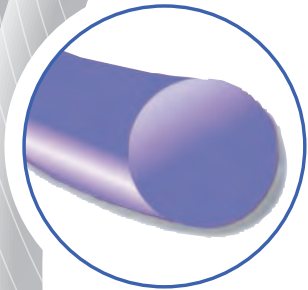

Type	Monofilament
Samenstelling	Polydioxanone, een polymeer van poly (p-dioxanone)
Coating	Geen
Kleur	Violet
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 180 - 210 dagen. Na 42 dagen blijft nog 50% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



Voor kwaliteit
&
veiligheid

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

EIGENSCHAPPEN

- Grote en langdurige treksterkte
- Synthetisch
- Resorptie door hydrolyse
- Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter

- Buigzaamheid en soepelheid

- Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE vooraf

Hechting van weke delen
 Algemene heelkunde
 Gastro-intestinale chirurgie
 Oogheelkundige chirurgie
 Orthopedie
 Sluiting van de buikwand
 Gynaecologie
 Plastische chirurgie
 Urologie

VOORDELEN

Uitstekende treksterkte voor langdurige wondondersteuning

Minimale weefselreactie

Voorspelbare resorptiesnelheid

Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
 Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
 Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen

Goede hanteerbaarheid
 Gemakkelijk te knopen
 Goede knoopveiligheid

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd


CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie
 Neurochirurgie
 Prothesen


Wanneer langer dan 6 weken wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE

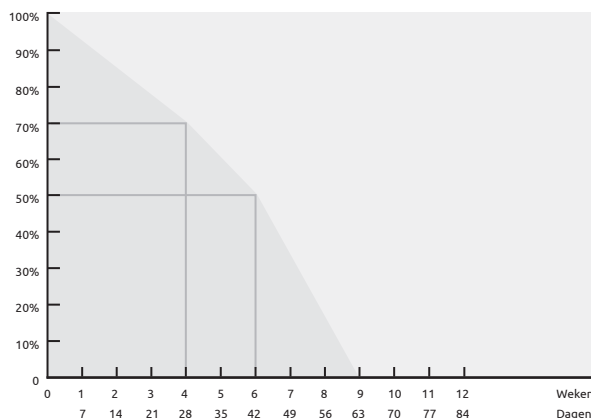

RESORPTIE

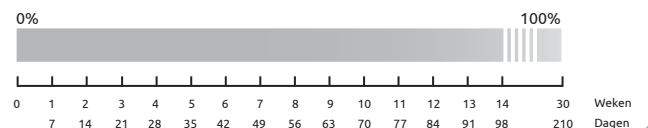










Without needle 

Metric USP Length Order number

5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	13600015




Round bodied taper point 

Metric USP Length Order number

1/2 circle 	HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113
	HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070117
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117
	HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150122
	HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200126
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300126
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350126
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200130
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300130
	HR 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350130
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300136
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350136
	HR 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400136
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300140
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350140
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400140	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500140	
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400148	
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500148

Round bodied taper point double armed 







Metric USP Length Order number




1/2 circle 	2 x HR 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113-2
			1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100117-2
	2 x HR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117-2




Round bodied taper point double armed			Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 circle 	2 x DR 13 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	13050213-2
			0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070213-2

Round bodied taper point loop			Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 circle 	HR 40 mm		3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350940
			4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400940
	HR 50 mm		3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350950
			4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400950
			5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500950
	HR 65 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400965

Reverse cutting			Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	13071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151512
	DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151516
	DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516VB
	DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101519
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101519-75
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201519
	DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>violet</i>	13101516P
	DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519VB

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 24 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351524
	DS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530
	DS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13501540

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436

Blunt loop 		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HRB 50 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13401850

CATGUT

PLAIN



Type	Gedraaid multifilament met een monofilament uiterlijk
Samenstelling	Gezuiverd bindweefsel (collageen) afkomstig van de slijm laag van geselecteerde runderdames. Herkomst uit BSE-vrij geïmporteerde landen.
Coating	Geen
Kleur	Ivoor
Weefselreactie	Matig
Resorptie	Door fagocytose. Een volledige resorptie na +/- 63 dagen. 50% van de oorspronkelijke treksterkte blijft na 7 dagen. Het zal sneller resorberen in geïnfecteerd weefsel en in weefsels waarin hogere concentraties van proteolytische enzymen voorkomen (maag, baarmoederhals, vagina).
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

CATGUT

PLAIN

EIGENSCHAPPEN

- Grote treksterkte
- Resorptie by phagocytosis
- Gedraaide draadopbouw

- Gelijkmatige diameter door centerloos afslijpen (monofilament aspect)

- Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Gelijkmatige resorptie
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid

- Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
- Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen

- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE Hechting van weke delen en/of ligature

vooral Algemene heekkunde
Gastro-intestinale chirurgie
Gynaecologie
Obstetrie
Urologie
Oogheelkundige chirurgie

CONTRA-INDICATIE Cardio-vasculaire chirurgie
Neurochirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).


In de buurt van geïnfecteerde wonden

Bekende overgevoeligheid of allergie voor collageen

TREKSTERKTE

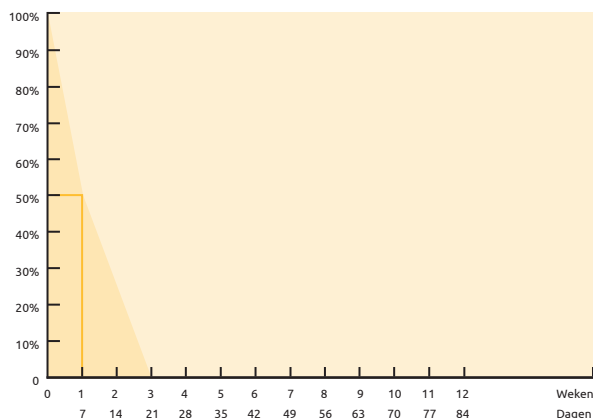

RESORPTIE

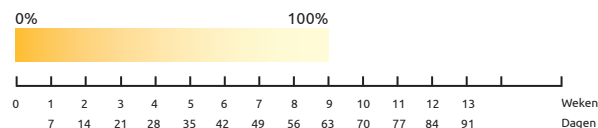

CATGUT

PLAIN

Without needle



Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>ivory</i>	1200015
3	3/0	150 cm	<i>ivory</i>	1300015
3.5	2/0	150 cm	<i>ivory</i>	1350015
4	0	150 cm	<i>ivory</i>	1400015
5	1	150 cm	<i>ivory</i>	1500015
6	2	150 cm	<i>ivory</i>	1600015
7	3	150 cm	<i>ivory</i>	1700015

Round bodied taper point



Metric USP Length Order number

HR 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1150116
		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200116
HR 20 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200120
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300120
HR 26 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350120
		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200126
HR 30 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300126
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350126
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400126
HR 37 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300137
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350137
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400137
		5	1	75 cm	<i>ivory</i>	1500137
HR 40 mm		5	1	90 cm	<i>ivory</i>	1500140-90
HR 45 mm		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400145
		5	1	75 cm	<i>ivory</i>	1500145
		6	2	75 cm	<i>ivory</i>	1600145
HR 50 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350150

1/2 circle







smi

www.sutures.be


CATGUT

PLAIN

Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number		
3/8 circle			DS 12 mm	1.5	5/0	45 cm	<i>ivory</i>	1151512	
			DS 16 mm	1	6/0	45 cm	<i>ivory</i>	1101516	
				1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1151516	
				2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201516	
			DS 19 mm	3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301516	
				2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201519	
				3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301519	
			DS 24 mm	3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351519	
				2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201524	
				3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301524	
			DS 24 mm	3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351524	
				4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1401524	
			DS 37 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351537

CATGUT

CHROM

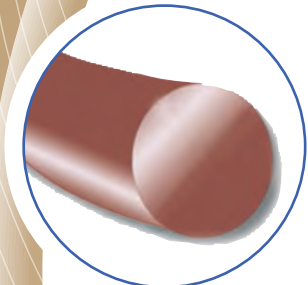

Type	Gedraaid multifilament met een monofilament uiterlijk
Samenstelling	Gezuiverd bindweefsel (collageen) afkomstig van de slijmlaag van geselecteerde runderdarmen - bruin gekleurd door behandeling met chroomzouten. Herkomst uit BSE-vrij geclassificeerde landen.
Coating	Geen
Kleur	Donkerbruin
Weefselreactie	Matig
Resorptie	Door fagocytose. De snelheid van de resorptie is door de chroomzouten verminderd. Een volledige resorptie na +/- 90 dagen. 50% van de oorspronkelijke treksterkte blijft na 14 dagen. Het zal sneller resorberen in geïnfecteerd weefsel en in weefsels waarin hoge concentraties van proteolytische enzymen voorkomen (maag, baarmoederhals, vagina).
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

CATGUT

CHROM

EIGENSCHAPPEN

- Grote treksterkte
- Resorptie by phagocytosis
- Gedraaide draadopbouw

- Gelijkmatige diameter door centerloos afslijpen (monofilament aspect)

- Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Gelijkmatige resorptie
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid

- Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
- Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen

- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE Hechting van weke delen en/of ligature

vooral Algemene heekunde
Gastro-intestinale chirurgie
Gynaecologie
Obstetrie
Urologie
Oogheelkundige chirurgie

CONTRA-INDICATIE Cardio-vasculaire chirurgie
Neurochirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).


In de buurt van geïnfecteerde wonden

Bekende overgevoeligheid of allergie voor colageen of chroom

TREKSTERKTE

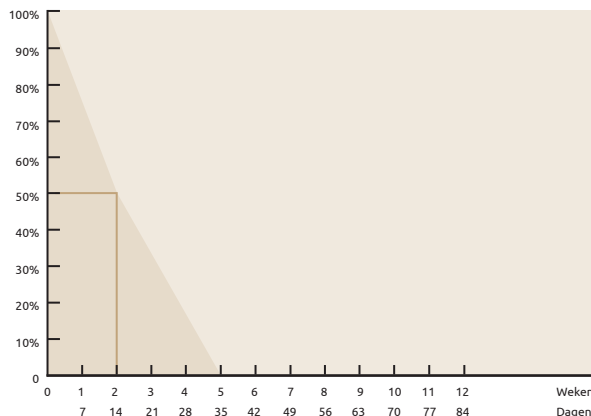

RESORPTIE

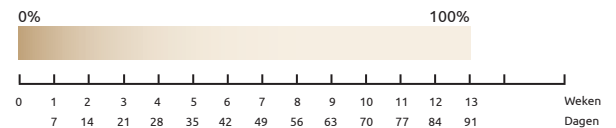

CATGUT

CHROM

Without needle



Metric	USP	Length		Order number
2	4/0	150 cm	<i>brown</i>	2200015
3	3/0	150 cm	<i>brown</i>	2300015
3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350015
4	0	150 cm	<i>brown</i>	2400015
5	1	150 cm	<i>brown</i>	2500015
6	2	150 cm	<i>brown</i>	2600015
7	3	150 cm	<i>brown</i>	2700015
8	4	150 cm	<i>brown</i>	2800015
10	6	150 cm	<i>brown</i>	21000015

Round bodied taper point



	Metric	USP	Length		Order number
HR 15 mm	1	6/0	75 cm	<i>brown</i>	2100115
	1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150115
	2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200115
HR 20 mm	1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150120
	2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200120
	3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300120
	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350120
	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400120
HR 26 mm	1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150126
	2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200126
	3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300126
	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350126
	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400126
HR 30 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500126
	2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200130
	3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300130
	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350130
	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400130
HR 37 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500130
	2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200137
	3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300137
	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350137
	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400137
	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500137







1/2 circle










www.sutures.be

CATGUT

CHROM

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	 HR 40 mm	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350140
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400140
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500140
		5	1	90 cm	<i>brown</i>	2500140-90
		6	2	75 cm	<i>brown</i>	2600140
	 HR 45 mm	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400145
		6	2	75 cm	<i>brown</i>	2600145
	 HR 48 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500148
	 HR 50 mm	6	2	75 cm	<i>brown</i>	2600150
		6	2	90 cm	<i>brown</i>	2600150-90

Round bodied taper point reverse cutting double armed 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	 HR 37 mm  HS 37 mm	3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350137-1437

Blunt 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	 DRB 63 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501963

CATGUT

CHROM

Reverse cutting



			Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		1	6/0	45 cm	<i>brown</i>	2101512
			1.5	5/0	45 cm	<i>brown</i>	2151512
	DS 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151516
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201516
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301516
	DS 19 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151519
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201519
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301519
	DS 24 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351524
			4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401524
			5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501524
	DS 30 mm		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301530
3.5			2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351530	
4			0	75 cm	<i>brown</i>	2401530	
DS 37 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501530	
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351537	
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401537	
DS 40 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501537	
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351540	
			6	2	75 cm	<i>brown</i>	2601540


Reverse cutting



			Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 circle 	HS 37 mm		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401437
			5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501437

POLYPROPYLENE

BLUE

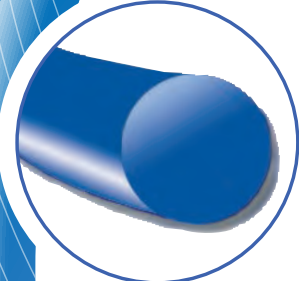

Type	Monofilament
Samenstelling	Polypropyleen, een polymeer van propyleen
Coating	Geen
Kleur	Blauw
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



smi

www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

EIGENSCHAPPEN


- Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- Weerstand tegen herhaald buigen
- Synthetisch
- Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- Buigzaamheid en soepelheid
- Hermetisch gesloten verpakking










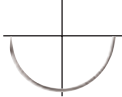

INDICATIE Hechting van weke delen en/of ligature


vooral Cardio-vasculaire chirurgie
Neurochirurgie
Oogheekkundige chirurgie
Microchirurgie
Plastische chirurgie
Sluiten van de huid
Orthopedie
Sluiten van de buikwand (ook als mesh)
Gastro-intestinale chirurgie
Algemene heekkunde
Gynaecologie
Obstetrie



VOORDELEN

- Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning
- Aanwending in cardio-vasculaire chirurgie (hartkleprothesen en anastomosen)
- Minimale weefselreactie
- Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
- Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
- Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen
- Goede hanteerbaarheid
- Gemakkelijk te knopen
- Goede knoopveiligheid
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

Round bodied taper point 

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 10 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i> 5050110
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070110
	HR 15 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070115
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100115
	HR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150115
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100117
	HR 20 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200117
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100120
	HR 25 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150120
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200120
	HR 30 mm 	1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100125
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150125
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200125
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300125
	HR 35 mm 	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5350125
		4	1	75 cm	<i>blue</i> 5400125
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200130
	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300130
3.5		0	75 cm	<i>blue</i> 5350130	
4		1	75 cm	<i>blue</i> 5400130	
HR 35 mm 	4	1	75 cm	<i>blue</i> 5400135	
	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300135	
HR 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5350140	
	4	1	90 cm	<i>blue</i> 5400140	
		5	2	75 cm	<i>blue</i> 5500140

Round bodied taper point 

		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DR 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150216

Round bodied taper point
double armed




		Metric	USP	Length		Order number	
<p>1/2 circle</p>	2 x HR 8 mm		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5040108-2
			0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5050108-2
			0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5070108-2
	2 x HR 10 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5050110-2
			0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5070110-2
			1	5/0	60 cm	<i>blue</i>	5100110-2
	2 x HR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5050113-2
			0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5070113-2
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100113-2
	2 x HR 16 mm		1	5/0	90 cm	<i>blue</i>	5100116-2
			1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150116-2
			2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200116-2
	2 x HR 20 mm		1	5/0	90 cm	<i>blue</i>	5100120-2
			1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150120-2
			2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200120-2
	2 x HR 25 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150125-2
			2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200125-2
			3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300125-2
2 x HR 30 mm		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200130-2	
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300130-2	
2 x HR 35 mm		3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300135-2	

Round bodied taper point double armed



3/8 circle

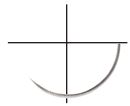

		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle	2 x DR 8 mm	0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i> 5040208-2
		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5050208-2
	2 x DR 10 mm	0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070210-2
		1	5/0	60 cm	<i>blue</i> 5100213-2
	2 x DR 13 mm	0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070213-2
		1	5/0	90 cm	<i>blue</i> 5100218-2
	2 x DR 18 mm	1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150218-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150222-2

Reverse cutting



3/8 circle



		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle	DS 10 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> 5071510
		0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i> 5051512
	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> 5071512
		1	5/0	45 cm	<i>blue</i> 5101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	<i>blue</i> 5071512P
		1	5/0	50 cm	<i>blue</i> 5101512P
	DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> 5071516
		1	5/0	45 cm	<i>blue</i> 5101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5151516
	DS 16 mm Easy Pass	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201516
		0.7	6/0	50 cm	<i>blue</i> 5071516P
		1	5/0	50 cm	<i>blue</i> 5101516P
	DS 16 mm black	1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i> 5151516P
		1	5/0	45 cm	<i>blue</i> 5101516VB
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5071519
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i> 5151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5151519
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i> 5201519-45
2		3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201519	
3		2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301519	
3.5		0	75 cm	<i>blue</i> 5351519	

Reverse cutting




Metric



USP

Length




Order number

		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 19 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm	<i>blue</i>	5101519P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	5151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	5201519P
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151519VB
	DS 24 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151524
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	5201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201524
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	5301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301524
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5351524
	DS 24 mm Easy Pass	4	1	75 cm	<i>blue</i>	5401524
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	5201524P
	DS 26 mm	3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	5301524P
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	5201526-45
3		2/0	45 cm	<i>blue</i>	5301526-45	
DS 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301526	
	2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201530	
	3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5351530	
DS 36 mm	4	1	75 cm	<i>blue</i>	5401530	
	2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201536	
	3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301536	
	3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5351536	
DS 40 mm	4	1	75 cm	<i>blue</i>	5401536	
	3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301540	
	3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5351540	
DS 45 mm	4	1	90 cm	<i>blue</i>	5401540	
	5	2	90 cm	<i>blue</i>	5501540	
	4	1	90 cm	<i>blue</i>	5401545	
DS 90 mm	4	1	90 cm	<i>blue</i>	5401590	






Reverse cutting

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 22 mm		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	5201422
	HS 24 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301424




Cutting

			Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5202160
			3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5302160
	GS 75 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5302175

Round bodied taper cutting point double armed

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100516-2
	2 x HRT 22 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150522-2
	2 x HRT 25 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150525-2
			2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200525-2
			3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300525-2
	2 x HRT 30 mm		3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300530-2


Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 10 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5070510
	HRT 25 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5300525

Soft cutting point coronary
double armed



3/8 circle

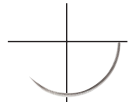

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	2 x CC 6.4 mm		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042606-2
			0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042608-2
	2 x CC 8 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052608-2
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072608-2
			0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052610-2
	2 x CC 10 m		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072610-2
			0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052613-2
	2 x CC 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072613-2
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5102613-2

Soft cutting point coronary
black double armed



3/8 circle




			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	2 x CC 8 mm black		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042608-2VB
			0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052608-2VB
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072608-2VB
	2 x CC 13 mm black		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072613-2VB
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5102613-2VB

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON

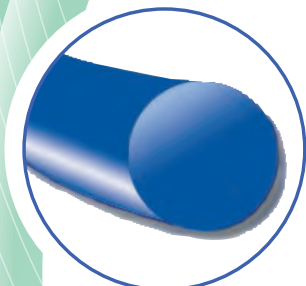

Type	Monofilament
Samenstelling	Extrusie uit polyamide 6.0 of 6.6
Coating	Geen
Kleur	Blauw Zwart
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel. De substantie van de draad vermindert ongeveer 10% per jaar door de afbraak van chemische verbindingen (hydrolyse).
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

DACLON NYLON

EIGENSCHAPPEN

- Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- Synthetisch
- Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter

- Buigzaamheid en soepelheid

- Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
- Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
- Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen

- Goede hanteerbaarheid
- Gemakkelijk te knopen
- Goede knoopveiligheid

- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE Hechting van weke delen en/of ligature

Daclon Blauw

- vooral
- Sluiten van de huid
 - Algemene heekunde
 - Plastische chirurgie
 - Gastro-intestinale chirurgie
 - Gynaecologie
 - Obstetrie
 - Orthopedie

Daclon Zwart









- vooral
- Plastische chirurgie
 - Oogheekkundige chirurgie


Round bodied taper point



1/2 circle





		Metric	USP	Length	Color	Order number
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	black	9100116
		1.5	4/0	75 cm	blue	9150116
HR 20 mm		0.7	6/0	75 cm	black	9070120
		1	5/0	75 cm	black	9100120
		1.5	4/0	75 cm	blue	9150120
		2	3/0	75 cm	blue	9200120
		3	2/0	75 cm	blue	9300120
HR 22 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	9150126
		2	3/0	75 cm	blue	9200126
		3	2/0	75 cm	blue	9300126
		3.5	0	75 cm	blue	9350126
		4	1	75 cm	blue	9400126
HR 30 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300130
		3.5	0	75 cm	blue	9350130
		4	1	75 cm	blue	9400130
HR 37 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300137
		3.5	0	75 cm	blue	9350137
		4	1	75 cm	blue	9400137
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300140
		3.5	0	75 cm	blue	9350140
		4	1	75 cm	blue	9400140
		5	2	75 cm	blue	9500140
HR 50 mm		4	1	100 cm	blue	9400150

Round bodied taper point loop  **Metric** **USP** **Length** **Order number**

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 30 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350930
		4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400930
	HR 35 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350935
		4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400935
	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350940
		4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400940
	HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350950
		4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400950

Round bodied taper point double armed  **Metric** **USP** **Length** **Order number**

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	2 x HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 9300165-2

Reverse cutting



Metric

USP

Length

Order number











3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071512P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071516P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101519-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201519
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	9201519P
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519VB

Reverse cutting

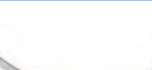








		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101524
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151524
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201524
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301524
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351524
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401524
		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201526-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201526
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301526-45
DS 30 mm		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301526
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201530
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301530
DS 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351530
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401530
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201536
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301536
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351536
		4	1	90 cm	<i>blue</i>	9401536-90
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301540
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351540
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401540
DS 60 mm		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501540
		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301545
DS 90 mm		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401545
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301560
DS 90 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351560
		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301590
		3.5	0	100 cm	<i>blue</i>	9351590
		4	1	100 cm	<i>blue</i>	9401590

3/8 circle



Reverse cutting



			Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	9151417
			2	3/0	75 cm	blue	9201417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201422
			2	3/0	75 cm	blue	9201426
	HS 26 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301426
			3.5	0	75 cm	blue	9351430
	HS 36 mm		3.5	0	75 cm	blue	9351436
			4	1	75 cm	blue	9401436
			5	2	75 cm	blue	9501436
	HS 40 mm		3.5	0	75 cm	blue	9351440
4			1	75 cm	blue	9401440	
HS 48 mm		4	1	100 cm	blue	9401448	


Cutting



Straight

GS 60 mm



			Metric	USP	Length	Color	Order number
Straight	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	blue	9202160
			3	2/0	75 cm	blue	9302160

Cutting



3/8 circle



NS 26 mm



NS 30 mm




NS 40 mm



			Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 circle	NS 26 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201726
	NS 30 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301730
	NS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301740

SUPRAMID

BLACK

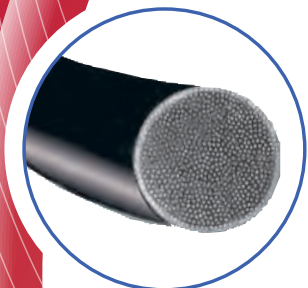

Type	Gedraaid en gecoat multifilament Maten 5/0 en 6/0 monofilament
Samenstelling	Polyamide 6.6 in een polyamide schede 6.0
Kleur	Zwart
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

EIGENSCHAPPEN

- Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- Synthetisch
- Gedraaide draadopbouw

- Cilindrisch gecoat multifilament

- Buigzaamheid en soepelheid

- Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE Hechting van weke delen
 en/of ligature
vooral Sluiten van de huid


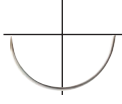



VOORDELEN




- Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid







- Soepele wefselpassage zonder zaageffect,
weefseltrek en trauma
- Goede knoop-glij eigenschappen
- Beperkte capillaire werking





- Goede hanteerbaarheid
- Gemakkelijk te knopen
- Goede knoopveiligheid




- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

Round bodied taper point			Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150116
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200116
	HR 20 mm		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4200120
			HR 26 mm		3	2/0









Round bodied taper point			Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GR 22 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152022

Reverse cutting			Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151417
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201417
	HS 20 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101420
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151420
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201420
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201426
			3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301426


Cutting			Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152120
	GS 25 mm		1.5	4/0	60 cm	<i>black</i> 4152125

Reverse cutting			Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071512
			1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101512-45
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151512



Reverse cutting

			Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DS 16 mm 		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071516
			1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101516-45
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516
			1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151516
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151516-75
			2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201516
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201516-75
	DS 16 mm black 		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516VB
	DS 19 mm 		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071519
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519
			1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151519
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519-75
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201519
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301519	
DS 19 mm Easy Pass 		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519P-75	
DS 19 mm black 		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519VB	
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519VB	
DS 24 mm 		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201524	
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301524	
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351524	
DS 36 mm 		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301536	
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351536	
	4	1	75 cm	<i>black</i> 4401536		


Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HRT 18 mm 		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150518
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200518

Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DRT 18 mm 		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150418
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200418

SILK

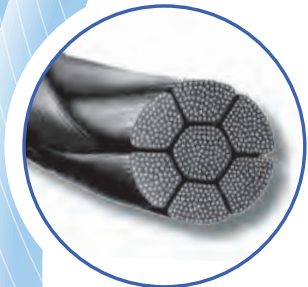

	<i>Silk Braided</i>	<i>Silk Virgin</i>
Type	Gevlochten multifilament	Gedraaid multifilament
Samenstelling	Gevlochten vezels van de cocon van de zijdeworm	Gedraaide vezels van de cocon van de zijdeworm
Coating	Silicon	Geen
Kleur	Zwart	Blauw
Weefselreactie	Matig	
Resorptie	De zijde veroorzaakt aanvankelijk een minimale ontstekingsreactie van de weefsels, alvorens ingekapseld te worden door fibreus bindweefsel.	
Presentatie	Doos met 12 hechtingen	

Voor kwaliteit
&
veiligheid

smi

www.sutures.be

SILK

EIGENSCHAPPEN

- Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- Gevlochten of gedraaide draadopbouw
- Gecoat multifilament
- Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE Hechting van weke delen
en/of ligature

vooral Algemene heekunde
Sluiten van de huid
Oogheekkundige chirurgie
Tand- en Mondchirurgie
Gastro-intestinale chirurgie
Gynaecologie
Obstetrie

VOORDELEN

Voortreffelijke en langdurige weefselondersteuning tot 3 maanden

Voortreffelijke hanteerbaarheid
Grote flexibiliteit
Grote treksterkte
Voortreffelijke knoopveiligheid

Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
Goede knoop-glij eigenschappen
Beperkte capillaire werking

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

CONTRA-INDICATIE Urinewegen
Galwegen

Bekende overgevoeligheid of allergie voor zijde

Without needle



Metric **USP** **Length** **Order number**

2	3/0	150 cm	<i>black</i>	8200015
3	2/0	150 cm	<i>black</i>	8300015
3.5	0	150 cm	<i>black</i>	8350015
4	1	150 cm	<i>black</i>	8400015
5	2	150 cm	<i>black</i>	8500015
6	3&4	150 cm	<i>black</i>	8600015
8	6	150 cm	<i>black</i>	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8350044
4	1	6 x 45 cm	<i>black</i>	8400044
5	2	6 x 45 cm	<i>black</i>	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8350046
4	1	17 x 45 cm	<i>black</i>	8400046
5	2	17 x 45 cm	<i>black</i>	8500046
1.5	4/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8350060
4	1	13 x 60 cm	<i>black</i>	8400060
2	3/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8350075
4	1	12 x 75 cm	<i>black</i>	8400075
5	2	12 x 75 cm	<i>black</i>	8500075

Without needle



Ligapack



Metric **USP** **Length** **Order number**





2	3/0	250 cm	<i>black</i>	8200025
3	2/0	250 cm	<i>black</i>	8300025
3.5	0	250 cm	<i>black</i>	8350025
4	1	250 cm	<i>black</i>	8400025
5	2	250 cm	<i>black</i>	8500025
6	3&4	250 cm	<i>black</i>	8600025

Round bodied taper point




		Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 circle 	HR 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
	HR 16 mm 	0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
	HR 20 mm 	2	3/0	75 cm	black	8200116
		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
	HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
1		5/0	75 cm	black	8100126	
HR 30 mm 	1.5	4/0	75 cm	black	8150126	
	2	3/0	75 cm	black	8200126	
	3	2/0	75 cm	black	8300126	
	3.5	0	75 cm	black	8350126	
	4	1	75 cm	black	8400126	
HR 37 mm 	2	3/0	75 cm	black	8200130	
	3	2/0	75 cm	black	8300130	
	3.5	0	75 cm	black	8350130	
	4	1	75 cm	black	8400130	
HR 40 mm 	5	2	75 cm	black	8500130	
	2	3/0	75 cm	black	8200137	
	3	2/0	75 cm	black	8300137	
HR 45 mm 	3.5	0	75 cm	black	8350137	
	4	1	75 cm	black	8400137	
	5	2	75 cm	black	8500137	
HR 50 mm 	3.5	0	75 cm	black	8350140	
	4	1	75 cm	black	8400140	
	5	2	75 cm	black	8500140	
HR 60 mm 	3.5	0	75 cm	black	8350145	
	4	1	75 cm	black	8400145	
	5	2	75 cm	black	8500145	



Round bodied taper point

			Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 Circle 	DR 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150216	
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200216	
	DR 25 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200225	
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300225	
	DR 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300230	








Round bodied taper point

		Metric	USP	Length	Color	Order number
Straight	GR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302040

Reverse cutting double armed

		Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 Circle 	2 x DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512-2

Reverse cutting

		Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 Circle 	DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	8051512
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	8101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151512
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	8071512P
	DS 14 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071514
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	8071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201516
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8301516
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	<i>black</i>	8101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i>	8151516P
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151516VB


Reverse cutting




		Metric	USP	Length	Order number
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 8201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301519
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351519
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 8151519P
		2	3/0	50 cm	<i>black</i> 8201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519VB
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101524
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151524
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201524
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301524
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351524
DS 26 mm		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401524
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201526
DS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301526
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201530
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301530
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351530
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401530
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501530
DS 45 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201537
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301537
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351537
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401537
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501537
DS 45 mm		6	3&4	75 cm	<i>black</i> 8601537
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301545
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351545
DS 45 mm		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401545
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501545








3/8 circle







Reverse cutting 





		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DS 60 mm 	4	1	75 cm	<i>black</i> 8401560
	DS 90 mm 	3.5	0	100 cm	<i>black</i> 8351590




Reverse cutting 

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071412
	HS 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101417
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201417
	HS 20 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151420
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201420
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101422
	HS 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151422
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201422
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301422
	HS 26 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101426
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151426
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201426
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301426
	HS 36 mm 	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351426
3.5		0	75 cm	<i>black</i> 8351436	
4		1	75 cm	<i>black</i> 8401436	

Cutting 

		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302140
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8202160
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302160
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8352160
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8402160

Round bodied taper cutting point 		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
	HRT 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527

Round bodied taper cutting point 		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418

POLYESTER



Type	Gevlochten multifilament
Samenstelling	Polyester, een polymeer van polyethyleen tereftalaat
Coating	Silicon
Kleur	Groen Wit
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Onovertroffen treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ✓ Weerstand tegen herhaald buigen
- ✓ Synthetisch
- ✓ Gevlochten draadopbouw

- ✓ Gecoat multifilament

- ✓ Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE Hechting van weke delen en/of ligature

vooral Cardio-vasculaire chirurgie
Oogheekkundige chirurgie
Algemene heekkunde
Sluiten van de huid
Orthopedie
Gastro-intestinale chirurgie
Obstetrie

VOORDELEN

Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning

Aanwending in cardio-vasculaire chirurgie (hartklepprothesen)

Minimale weefselreactie

Voortreffelijke hanteerbaarheid
Grote flexibiliteit
Grote treksterkte
Voortreffelijke knoopveiligheid

Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
Goede knoop-glij eigenschappen
Beperkte capillaire werking

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

POLYESTER

Without needle



Metric USP Length Order number

1.5	4/0	150 cm	<i>green</i>	7150015
2	3/0	150 cm	<i>green</i>	7200015
3	2/0	150 cm	<i>green</i>	7300015
3.5	0	150 cm	<i>green</i>	7350015
4	1	150 cm	<i>green</i>	7400015
5	2	150 cm	<i>green</i>	7500015
6	3&4	150 cm	<i>green</i>	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7350045
4	1	6 x 45 cm	<i>green</i>	7400045
5	2	6 x 45 cm	<i>green</i>	7500045
6	3&4	6 x 45 cm	<i>green</i>	7600045
2	3/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7350050
4	1	3 x 50 cm	<i>green</i>	7400050
5	2	3 x 50 cm	<i>green</i>	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	<i>green</i>	7200075-2

Without needle



Ligapack




Metric USP Length Order number

1.5	4/0	250 cm	<i>green</i>	7150025
2	3/0	250 cm	<i>green</i>	7200025
3	2/0	250 cm	<i>green</i>	7300025
3.5	0	250 cm	<i>green</i>	7350025
4	1	250 cm	<i>green</i>	7400025
5	2	250 cm	<i>green</i>	7500025
6	3&4	250 cm	<i>green</i>	7600025

Round bodied taper point



1/2 circle

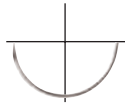

		Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	green	7100116
		1.5	4/0	75 cm	green	7150116
		2	3/0	75 cm	green	7200116
HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150120
		2	3/0	75 cm	green	7200120
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	green	7200126
		3	2/0	75 cm	green	7300126
		3.5	0	75 cm	green	7350126
		4	1	75 cm	green	7400126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	green	7200130
		3	2/0	75 cm	green	7300130
		3.5	0	75 cm	green	7350130
HR 36 mm		4	1	75 cm	green	7400130
		3	2/0	75 cm	green	7300136
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7350136
		4	1	75 cm	green	7400136
HR 48 mm		3.5	0	75 cm	green	7350140
		4	1	75 cm	green	7400140
		5	2	75 cm	green	7500140
		7	5	75 cm	green	7700140
HR 48 mm		4	1	75 cm	green	7400148
		5	2	75 cm	green	7500148

Round bodied taper point double armed




1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
2 x HR 17 mm		3	2/0	90 cm	green	7300117-2
2 x HR 20 mm		3	2/0	90 cm	green	7300120-2
2 x HR 26 mm		3	2/0	90 cm	green	7300126-2

Round bodied taper point double armed

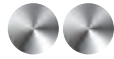

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HR 16 mm
HR 36 mm



2

3/0

60 cm

green

7200116-36

Round bodied taper point



Metric

USP

Length

Order number

Straight

GR 19 mm



1.5

4/0

45 cm

green

7152019

2

3/0

50 cm

green

7202019

Round bodied taper cutting point double armed



Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



2 x HRT 17 mm



1.5

4/0

90 cm

green

7150517-2

2

3/0

90 cm

green

7200517-2

3

2/0

90 cm

green

7300517-2

3

2/0

90 cm

green
10/foil

7300517-2-10

with pledget - 4x green, 4x white 7300517-2P

2 x HRT 25 mm



2

3/0

90 cm

green

7200525-2

3

2/0

90 cm

green

7300525-2

3

2/0

90 cm

green
10/foil

7300525-2-10

with pledget - 4x green, 4x white 7300525-2P

Round bodied taper cutting point



Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 18 mm



1.5

4/0

75 cm

green

7150518

2

3/0

75 cm

green

7200518

HRT 40 mm



5

2

75 cm

green

7500540

HRT 55 mm



7

5

4 x 75 cm

green

7700555-4

POLYESTER

Reverse cutting



Metric








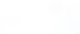


USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 12 mm		1	5/0	45 cm	<i>green</i>	7101512
DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151516
DS 19 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201516
		1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151519
DS 19 mm black		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201519
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301519
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151519VB
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201524
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301524
DS 26 mm		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351524
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151526
DS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301526
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201530
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351530
DS 36 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401530
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301536
DS 40 mm		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501536
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351540
DS 40 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401540
		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501540

smi

www.sutures.be

POLYESTER

Reverse cutting



			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151417
			2	3/0	75 cm	green	7201417
	HS 20 mm		3	2/0	75 cm	green	7301420
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	green	7201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	green	7201426
			3	2/0	75 cm	green	7301426
	HS 30 mm		3	2/0	75 cm	green	7301430
			3.5	0	75 cm	green	7351430
			4	1	75 cm	green	7401430
	HS 36 mm		5	2	75 cm	green	7501430
			3.5	0	75 cm	green	7351436
			4	1	75 cm	green	7401436
	HS 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7351440
			4	1	75 cm	green	7401440
5			2	75 cm	green	7501440	
HS 48 mm		6	3&4	75 cm	green	7601448	
		7	5	75 cm	green	7701448	

Cutting




Straight

			Metric	USP	Length		Order number
	GS 60 mm		3.5	0	75 cm	green	7352160

STEEL

MONOFILAMENT

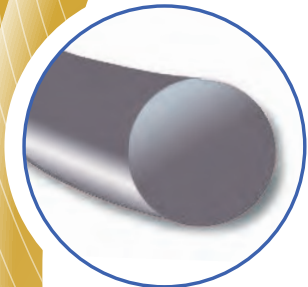

Type	Monofilament
Samenstelling	Ijzer-, nikkel- en chroomlegering
Coating	Geen
Kleur	Metal
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

STEEL

MONOFILAMENT

EIGENSCHAPPEN

- Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- Synthetisch
- Rekbaar en vervormbaar
- Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE

Sluiten van het sternum
Orthopedie
Sluiten van de buikwand
en breuken





VOORDELEN

Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning
Minimale weefselreactie
Goede hanteerbaarheid
Soepele weefselpassage zonder zaageffect,
weefsel trek en trauma
Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen
Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd







CONTRA-INDICATIE

Bekende overgevoeligheid of
allergie voor roestvrij staal of
metaallegeringen zoals chroom en
nikkel



Round bodied taper cutting point

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HRT 40 mm 	6	3&4	4 x 45 cm	ST45
	HRT 48 mm 	7	5	4 x 45 cm	ST55
		8	6	4 x 45 cm	ST65
HRT 54 mm 	7	5	1 x 75 cm	ST54	

Reverse cutting

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HS 25 mm 	3.5	0	4 x 45 cm	ST01
	HS 40 mm 	4	1	4 x 45 cm	ST11
		5	2	4 x 45 cm	ST21
	HS 48 mm 	6	3&4	4 x 45 cm	ST41
		9	7	4 x 45 cm	ST71
	HS 50 mm 	7	5	1 x 75 cm	ST53
		7	5	4 x 45 cm	ST51
		8	6	4 x 45 cm	ST61
	HS 58 mm 	7	5	4 x 45 cm	ST52
		8	6	4 x 45 cm	ST62

Cutting

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	NH 48 mm 	7	5	4 x 45 cm	ST56
		8	6	4 x 45 cm	ST63
		9	7	4 x 45 cm	ST72



MICRO- CHIRURGIE










*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

MICROSURGERY





DACLON NYLON

Micro needle taper point		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle 		MDR 3,8 mm 50µm	0.2	10/0	10 cm	<i>black</i> MN102
		MDR 5,1 mm 70µm	0.01	12/0	10 cm	<i>black</i> MN124
			0.1	11/0	10 cm	<i>black</i> MN114
			0.2	10/0	10 cm	<i>black</i> MN104
		MDR 3,8 mm 70µm	0.1	11/0	10 cm	<i>black</i> MN113
		MDR 3,8 mm 100µm	0.2	10/0	15 cm	<i>black</i> MN105
		MDR 5,1 mm 100µm	0.2	10/0	15 cm	<i>black</i> MN106
			0.3	9/0	15 cm	<i>black</i> MN096
	MDR 6,4 mm 140µm	0.4	8/0	15 cm	<i>black</i> MN087	
	MDR 9,7 mm 200µm	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> MN078	

MICROSURGERY




POLYPROPYLENE


BLUE

Micro needle taper point		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 		MDR 5,1 mm 100µm	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> MP106
		MDR 6,4 mm 150µm	0.3	9/0	15 cm	<i>blue</i> MP097



www.sutures.be

Micro needle taper point		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 		MDR 6,4 mm 150µm	0.4	8/0	20 cm	<i>violet</i> M910087

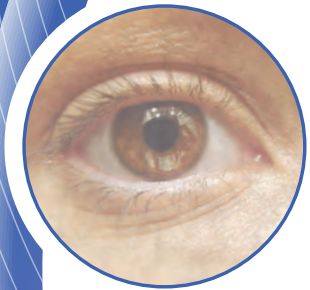

OOGHEELKUNDE

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



www.sutures.be

Side cutting spatula double armed



Metric USP Length Order number

1/2 circle



2 x HSP 8 mm
200 µm



0.5 7/0 45 cm *violet* OSU07

Side cutting spatula double armed



Metric USP Length Order number

3/8 circle



2 x DSP 6 mm
200 µm



0.4 8/0 30 cm *violet* OSU08-30

0.4 8/0 45 cm *violet* OSU08

2 x DSP 6,2 mm
150 µm



0.2 10/0 30 cm *violet* OSU10

2 x DSP 6,4 mm
200 µm



0.3 9/0 30 cm *violet* OSU09

0.5 7/0 45 cm *violet* OSU072

2 x DSP 8 mm
200 µm



0.5 7/0 45 cm *violet* OSU071

Side cutting spatula



Metric USP Length Order number

3/8 circle



DSP 6,2 mm
150 µm



0.2 10/0 10 cm *violet* OSU101

DSP 6,4 mm
200 µm




0.3 9/0 30 cm *violet* OSU09-1

Side cutting spatula double armed



Metric USP Length Order number

1/4 circle

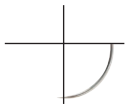

2 x VSP 8 mm
300 µm
350 µm



0.7 6/0 45 cm *violet* OSU06

1 5/0 45 cm *violet* OSU05

Reverse cutting



Metric USP Length Order number

3/8 circle



DS 12 mm



0.7 6/0 45 cm *violet* 11071512






1 5/0 45 cm *violet* 11101512





DS 12 mm
Easy Pass









0.7 6/0 50 cm *undyed* 11071512UP

1 5/0 50 cm *undyed* 11101512UP

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle 	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i> O910081
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i> O91007
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i> O910061U

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle 	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i> O91008
	220 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i> O910072
	2 x DSP 11 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> O910051

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number	
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> O91006
			0.7	6/0	20 cm	<i>undyed</i> O91006U-20
			0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i> O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> O91005
			1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> O91005U

Side cutting spatula
double armed



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



2 x DSP 6,5 mm
200 µm



0.4

8/0

45 cm

blue

OS81

**Side cutting spatula
double armed**



			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 6,5 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	OS81B
	2 x DSP 6,5 mm 240 µm		0.5 0.7	7/0 6/0	45 cm 45 cm	<i>black</i> <i>black</i>	OS71 OS61
	2 x DSP 8 mm 350 µm		1	5/0	30 cm	<i>black</i>	OS52

**Side cutting spatula
double armed**



			Metric	USP	Length		Order number
1/4 Circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS62
	2 x VSP 10 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	OS51

Reverse cutting




			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512
			1	5/0	45 cm	<i>black</i>	8101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151512
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151516
	DS 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151519

**Reverse cutting
double armed**




			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	2 x DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	8051512-2
			0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512-2

Round bodied taper point double armed

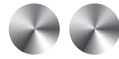

Metric USP Length Order number

1/4 Circle

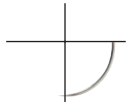

2 x VR 8 mm
220 µm



0.4 8/0 45 cm *black* ON81

Side cutting spatula double armed



Metric USP Length Order number

1/2 Circle



2 x HSP 6,2 mm
150 µm



0.2 10/0 30 cm *black* ON102

2 x HSP 6,4 mm
220 µm



0.2 10/0 30 cm *black* ON106

2 x HSP 8 mm
300 µm



0.7 6/0 45 cm *black* ON62

Side cutting spatula double armed



Metric USP Length Order number

3/8 Circle



2 x DSP 6 mm
220 µm



0.2 10/0 30 cm *black* ON103

0.1 11/0 20 cm *black* ON111

0.2 10/0 30 cm *black* ON101

2 x DSP 6,2 mm
150 µm



0.3 9/0 30 cm *black* ON95

0.3 9/0 45 cm *black* ON95-45

0.4 8/0 30 cm *black* ON85

0.4 8/0 45 cm *black* ON85-45

2 x DSP 6,2 mm
200 µm



0.5 7/0 30 cm *black* ON75

2 x DSP 6,4 mm
220 µm



0.2 10/0 30 cm *black* ON105

0.2 10/0 38 cm *black* ON105-38

0.2 10/0 45 cm *black* ON105-45

2 x DSP 8 mm
300 µm



0.7 6/0 45 cm *black* ON61

Side cutting spatula



Metric USP Length Order number





3/8 Circle



DSP 6,2 mm
150 µm



0.2 10/0 15 cm *black* ON1011

Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length	Order number	
1/4 Circle	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	ON51
Reverse cutting			Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle	DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
			0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512

Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number					
1/2 Circle 	2 x HSP 8 mm		1	5/0	45 cm	<i>white</i>	OP52					
	350 µm											
Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number					
3/8 Circle 	2 x DSP 8 mm		1	5/0	45 cm	<i>white</i>	OP53					
	350 µm											
Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number					
1/4 Circle 	2 x VSP 8 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>white</i>	OP71					
	250 µm											
	2 x VSP 8 mm							0.7	6/0	45 cm	<i>white</i>	OP61
	300 µm											
2 x VSP 8 mm	1	5/0	45 cm	<i>white</i>	OP51							
350 µm												
2 x VSP 8 mm	1.5	4/0	45 cm	<i>white</i>	OP41							
350 µm												

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 6,4 mm 200 µm	0.2	10/0	30 cm	<i>blue</i>	OPP105
		0.3	9/0	30 cm	<i>blue</i>	OPP95
Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i>	OPP103
Side cutting spatula loop		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i>	OPP103L
Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	2 x GSP 16,15 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i>	OPP101
		0.3	9/0	20 cm	<i>blue</i>	OPP91
Side cutting spatula loop		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GSP 16,15 mm 150 µm	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i>	OPP110
Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
Straight 3/8 Circle 	GSP 16 mm 150 µm DSP 4 mm 100 µm	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i>	OPP102



ANDERE ARTIKELEN

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



www.sutures.be

Huid stapler & haakjesverwijderaar

INDICATIE:


De SMI huid stapler kan voor een veelheid van sluitingen van de huid aangewend worden.

VOORDELEN:

- ✓ *ergonomisch en gebruiksvriendelijk design*
- ✓ *ongehinderd zicht op het operatieveld*
- ✓ *het aantal resterende haakjes is eenvoudig te controleren*

1. Huid stapler met 35 brede haakjes **ZS35W**
2. Wegwerp-haakjesverwijderaar **ZSR**
3. Wegwerp-haakjesverwijderaar **ZSR2**

Grootte van het gevormde haakje

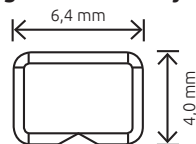

Biopsy Punch

Steriele biopsie punch voor accurate en zachte huidbiopsies
Naadloze roestvrijstalen scherpe snijrand
Geribbelde handgreep voor zeker grip en controle



Ø 2 mm	25 pc.	ZBP2
Ø 3 mm	25 pc.	ZBP3
Ø 4 mm	25 pc.	ZBP4
Ø 5 mm	25 pc.	ZBP5
Ø 6 mm	25 pc.	ZBP6
Ø 8 mm	25 pc.	ZBP8
Ø 10 mm	20 pc.	ZBP10
Ø 12 mm	20 pc.	ZBP12

Hechtmateriaal staanders voor hechtingen in blister

Staander & lade voor staanders



Het flexibele staandersysteem maakt het mogelijk hechtmateriaal ordelijk te bewaren waardoor u er tijdens operaties makkelijk bij kunt.
De verwisselbare delen kunnen op verschillende manieren tot een geheel worden gemonteerd.

- 1 staander voor 2 horizontale dozen hechtmateriaal (125 mm x 72 mm x 143 mm) **Z070**
- lade voor staanders **Z071**

Polypropyleen mesh

INDICATIE:

weefselondersteuning voor de buikwand

- hernia
- eventratie


door laparoscopie of laparotomie

SAMENSTELLING:

elastische en duurzame vezel uit polypropyleen monofilament

VOORDELEN:

- ✓ uitstekende vormstabiliteit
- ✓ zeer dunne vezelstructuur
- ✓ optimale poreusheid
- ✓ perfect transparant
- ✓ gebruiksvriendelijk
- ✓ makkelijk te snijden
- ✓ goede compatibiliteit

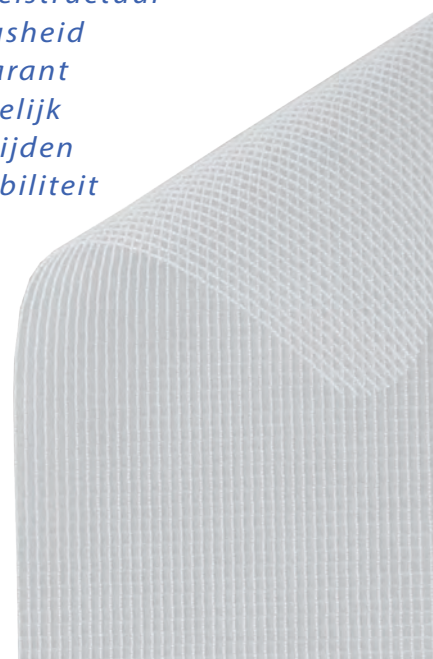

Vierkant & rechthoekige Mesh

STANDARD MESH

5 pc.

15 cm x 15 cm	ZMS1515
30 cm x 30 cm	ZMS3030
6 cm x 11 cm	ZMS0611
10 cm x 15 cm	ZMS1015
7,5 cm x 15 cm	ZMS07515
5 cm x 10 cm	ZMS0510

Pilomat

Tablet-Crusher Z045

Om tabletten eenvoudig fijn te malen.



Tablet-Splitter Z044

Om elke tablet in twee te splijten.



Chirurgisch scalpel & grip

Voor grip N° 3



N° 10 N° 11 N° 12 N° 12d N° 15 N° 15c

Chirurgisch scalpel
zonder grip

ZB10 ZB11 ZB12 ZB12d ZB15 ZB15c

Chirurgisch scalpel
met plastic grip

ZBD10 ZBD11 ZBD12 ZBD15



Voor grip N° 4



N° 18 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 N° 25

Chirurgisch scalpel
zonder grip

ZB18 ZB20 ZB21 ZB22 ZB23 ZB24 ZB25

Chirurgisch scalpel
met plastic grip

ZBD20 ZBD21 ZBD22 ZBD23 ZBD24

SAMENSTELLING:
carbonstaal

VERPAKKING:
apart in steriele blisterverpakking

zonder grip 100 / doos
met grip 10 / doos

Hechtingverwijdermesje



ZBS

Scalpelgrips

SAMENSTELLING: roestvrij staal

VERPAKKING: 10/ doos



N° 3 ZBH3



N° 4 ZBH4

Episio Set

Surgicryl® Rapid: Synthetisch resorbeerbaar polyglycolzuur – Gevlochten en gecoat multifilament - snelle absorptie

Buiten snijdende naald

Ronde naald met een snijdende punt



Bestelnummer

3/8 cirkel



DS 24 mm
HRT 40 mm



1 x USP 2/0 – DS 24 mm – 75 cm
1 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm

ongekleurd

S-1430-1435-1

1/2 cirkel



DS 26 mm
HRT 40 mm



1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm
2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm

ongekleurd

S-1430-1435

Cervix set

Cervix hechting set volgens Shirodkar

2 x stompe naald

Bestelnummer



2 x HRB 50 mm

4 mm polyester bond 40 cm

ZCE1

4 mm polyester bond 50 cm

ZCE4

2 x HRB 65 mm

4 mm polyester bond 50 cm

ZCE3

Patella Set

Snijdende naald



Metric

USP


Lengte

Bestelnummer

1/2 cirkel



HS 120 mm

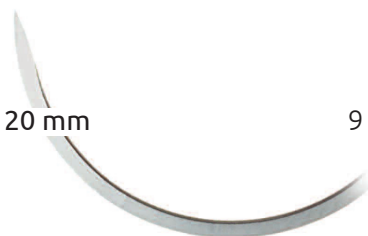

9

7

60 cm

ST75

Huid Markeerpen

Voor algemene toepassingen bij huid markeringen. Onuitwisbare inkt in gentiaanviolet. Biocompatibel, niet giftig, en niet-irriterend. Bijbehorend meetlatje in centimeters en inches.

ZSM 20 Dual pen, voor normale en fijne huid markering, inclusief meetlatje. Steriel.



Beenderwas



12 x 2.5 g Z046

SAMENSTELLING:

geraffineerde witte bijenwas 80%, isopropyl palmitate 20%

INDICATIE:

stelping van beenderbloedingen: werkt als mechanische barriere

VERPAKKING:

per 2,5 g individueel verpakt
12 stuks / doosje, steriele

SMI Spon

Absorbeerbare haemostatische gelatine spons


SAMENSTELLING:

Hoogzuivere kwaliteits-gelatine

INDICATIE:

Voor gebruik bij verschillende chirurgische procedures. Voor toepassing bij chirurgische ingrepen met een bloedend wondoppervlak waarbij men haemostase wil bekomen.

Niet-pyrogeen en biocompatibel.

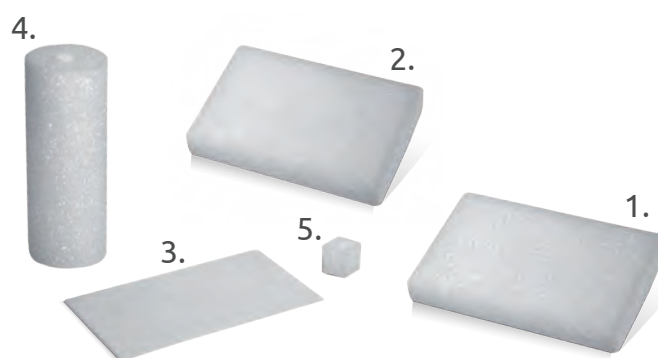

1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001
4. TAMPON	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
5. DENTAL CUBE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010

Naalden

12 in een doos

1/2 cirkel



zonder veerrog

GN



met veerrog

GF



zonder veerrog

GRN



met veerrog

GRF



90 mm N°00

Z 751

Z 850

80 mm N°1

Z 702

Z 752

Z 851

70 mm N°2

Z 703

Z 753

Z 853

65 mm N°3

Z 704

60 mm N°4

Z 755

Z 855

55 mm N°6

Z 706

Z 756

Z 806

Z 856

50 mm N°7

Z 758

Z 807

Z 858

48 mm

Z 840

45 mm N°8

Z 708

Z 759

Z 808

Z 859

40 mm N°9

Z 710

Z 760

Z 810

Z 860

35 mm N°10

Z 711

Z 761

Z 811

Z 861

30 mm N°12

Z 712

Z 762

Z 812

Z 862

25 mm N°13

Z 713

Z 763

Z 813

Z 863

20 mm N°15

Z 714

Z 764

Z 814

Z 864

16 mm N°16

Z 766

Z 866

GEBOGEN
NAALDEN (SKI)



zonder veerrog



met veerrog



80 mm N°1

Z 202

70 mm N°2

Z 203

65 mm N°3

Z 204

60 mm N°4

Z 205

57 mm N°5

Z 201

55 mm N°6

Z 206

50 mm N°7

Z 207

45 mm N°8

Z 208

40 mm N°9

Z 260

35 mm N°10

Z 261

30 mm N°12

Z 262

25 mm N°13

Z 263

20 mm N°15

Z 264

16 mm N°16

Z 266




12 mm N°20

Z 268



3/8 cirkel



					
	zonder veeroog BN	met veeroog BF	zonder veeroog BRN	met veeroog BRF	zonder veeroog BRT

130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591	Z 652	Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3		Z 554	Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568			






RECHT



zonder veeroog
GSN

met veeroog
GSF

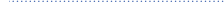

	75 mm N° 1			Z 904
	60 mm N° 4		Z 903	Z 913
	45 mm N° 8		Z 902	
	40 mm N° 9			Z 912
	35 mm N° 10			Z 911