



INFO BROCHURE ROLSTOEL ACHTERWIELEN

Dit is de info-brochure voor de achterwiel rolstoelen met onderdelen van Eddies Wheels, maatgenomen en afgeleverd door Pro4Paws.

Lees de info aandachtig door.

- Algemeen: pagina 2
- Rolstoel onderdelen: pagina 3
- Aandoen rolstoel: pagina 4
- Uitlijning rolstoel: pagina 5
- Wielen bevestigen: pagina 6

Bij twijfel of vragen mag je me steeds contacteren: 0494 17 76 68

Ook mag je steeds foto's of filmpjes doorsturen.

Alvast veel succes met de rolstoel!!!

Liesbet Diestelmans



ALGEMEEN

Bij het afleveren van de rolstoel wordt een grondige controle gedaan van drukplaatsen, hoogte, lengte... eventueel werden er extra aanpassingen gedaan aan de rolstoel.

Nu is het belangrijk dat de rolstoel geleidelijk aan wordt gedragen zodat jouw hond kan wennen aan de rolstoel. En dat de huid ook kan wennen aan eventuele extra druk en/of wrijving.

Voor jouw hond is het belangrijk dat de rolstoel onder toezicht wordt gedragen, in het begin niet tijdens een vrij spel moment, maar best tijdens een rustige activiteit zoals een korte wandeling. Na de gewenningsfase kan de rolstoel ook in actievere momenten gebruikt worden.

De gewenningsfase is voor elke hond ook verschillend. Meestal duurt dit een week tot twee weken voor een achterwiel rolstoel. Tijdens de eerste week bv 3x per dag 30' laten dragen tijdens een (korte) wandeling. Dit ook weer aanpassen naar gelang de spieratrofie van de hond. Is de hond niet meer gewoon van te wandelen begin dan met 10'. Zodat de spieractiviteit rustig weer kan opbouwen.

Huid gaat reageren op de druk van de rolstoel/sluitingen. Eerste tekenen van drukwonden of wrijvingswonden zijn wondvocht. Er moet voorkomen worden dat honden excessief gaan likken, krabben of bijten. Dit vertraagt de wondgenezing en kan er bovendien voor zorgen dat deze gaat infecteren.


Als er toch wonden ontstaan, de rolstoel uitlaten tot de wonde genezen is. Contacteer me steeds bij het ontstaan van wonden, misschien kan de rolstoel aangepast worden, zodat de druk op die plaats kan verminderen.

Bij het verzorgen van eventuele ontstane wonde kan de dierenarts je het beste adviseren.


De hondenrolstoel is gemaakt om te dragen tijdens staan, wandelen, lopen of spelen, dus voor de actieve momenten van jouw hond. De rolstoel niet gemaakt om te slapen, liggen of zitten.



ROLSTOEL ONDERDELEN

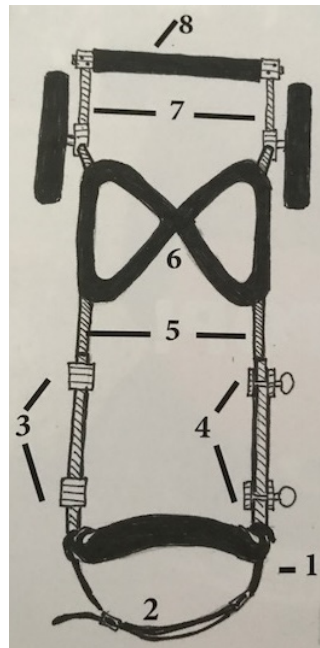

1	Gepolsterde brug/boog, zit net achter de schouders van je hond
2	Aanpasbare borstsluiting
3	Aanpasbare blokjes
4	Sluitingen, trek de pinnen eruit om de brug te openen, daarna terug sluiten
5	Frame
6	Gepolsterde zadel, de achter pootjes worden in de openingen gestoken
7	Bevestiging wielen
8	Vaste stang om de wielen samen te houden

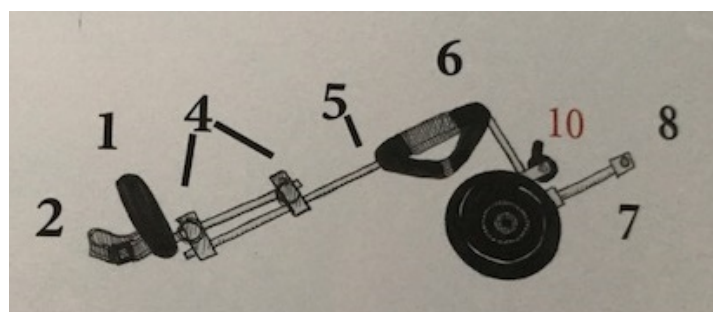



AANDOEN ROLSTOEL

1. Zet jouw hond voor de rolstoel, of zet de rolstoel achter de hond.
2. Boog/brug openen, sluiting openen
3. Hond in zadel heffen, probeer niet teveel te heffen op de zachte ingewanden. Eventueel kan een STA-op hulp hierbij helpen.



4. Nu kantelt de rolstoel naar achter en komt het frame horizontaal.
5. Doe de boog/brug dicht met de sluitingen.
6. Daarna doe je de borstsluiting dicht.



UITLIJNING ROLSTOEL

Als jouw hond normaal in de rolstoel staat, zou het frame bijna evenwijdig met de grond moeten zijn. Zo wordt er voorkomen dat er extra druk komt op de voorpoten.

De brug/boog moet ongeveer ter hoogte van de schouder komen, zodat als de boog de hond raakt het gewicht op de voorpoten wordt verdeeld.



Het kan zijn dat na verloop van gebruik jouw hond 'langer' gaat worden, en dat daardoor de boog meer naar achter komt te liggen. Dan is het tijd om dit aan te passen. Hiervoor mag je zeker contact opnemen of voor langskomen. Ook kan je hond nog groeien na het aanpassen van de rolstoel, neem dan zeker contact op.


MOERTJES EN SLEUTEL(S), RESERVE-KIT

De eerste weken (kilometers) zou je regelmatig alle **moertjes moeten aandraaien**. Dit omdat de moertjes gaan lostrillen bij beweging. Na verloop van tijd ga je zien dat deze zich hebben vastgezet. Dan is het nog half-jaarlijks nodig om even alles te controleren.

Als je een moertje **verliest gebruik dan enkel de bijgeleverde reserve-moertjes**. Dit zijn Amerikaanse maten en zijn niet (of zeer moeilijk) te verkrijgen in Europa. Maak zeker geen gebruik van de moertjes die hier op de markt zijn want deze Europese schroefdraad wijkt af van de Amerikaanse schroefdraad.

WIELEN BEVESTIGEN

De wielen van de rolwagen zijn bevestigd met een moer op het frame. Deze moer wordt vastgezet met een imbusmoer. Het is zeer belangrijk dat dit imbusmoer tijdig opnieuw wordt aangedraaid met de bijgeleverde imbusleutel.

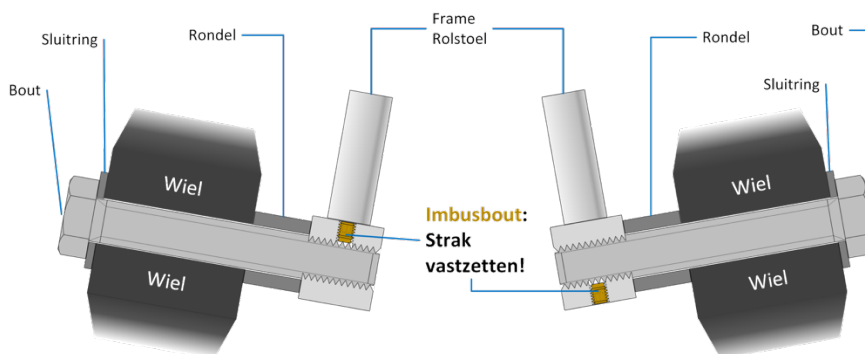

Als je dit niet tijdig gaat aandraaien dan kan het wiel (plots) loskomen tijdens een wandeling. Of het andere wiel komen vast te zitten. Dus het is heel belangrijk om dit tijdig na te kijken.

Meer info over de wielen en het bevestigen van de wielen vind je ook op het youtubekanaal van Pro4Paws. <https://www.youtube.com/watch?v=zNZsNs8fkMs>



ONDERHOUD ROLSTOEL

Als je de hondenrolstoel goed onderhoud gaat deze een hondenleven lang mee.

Als de hondenrolstoel erg vuil is na een wandeling loont het om hem zo snel mogelijk af te spoelen met de tuinslang. Het vuil heeft dan geen kans om vast te kleven.

Vriest het en komt er strooizout op de hondenrolstoel? Maak hem dan zo snel mogelijk schoon. Zout is echt de grote vijand van de hondenrolstoel! Om strooizout goed te verwijderen moet je eerst met een zachte borstel het aangekoekt vuil eraf borstelen. Spoel vervolgens met koud water alles schoon. Daarna is het verstandig om warm water te gebruiken. Zout lost namelijk beter op in warm water.

Ook strandzand kan (extra) schade aanbrengen als het tussen de wielen komt te zitten. Best spoel je de rolstoel dan af met veel water.

Gebruik geen vetten om te smeren, vet zorgt ervoor dat het zand nog beter blijft plakken op plaatsen waar dat best niet gebeurt. En zand dat blijft plakken zorgt voor snellere slijtage.

Als je zeker wil zijn dat alles optimaal blijft werken, breng de rolstoel dan jaarlijks binnen voor een nazicht. Dan demonteren we de rolstoel, reinigen alles en zorgen ervoor dat de rolstoel terug optimaal bolt.

Veel succes!!!

Liesbet Diestelmans

www.pro4paws.com