



INFO BROCHURE ROLSTOEL VOORWIELEN

Dit is de info-brochure voor de voorwiel rolstoelen met onderdelen van Eddies Wheels, maatgenomen en afgeleverd door Pro4Paws.

Lees de info aandachtig door.

- Algemeen: pagina 2
- Rolstoel onderdelen: pagina 3
- Aandoen rolstoel: pagina 4
- Uitlijning rolstoel: pagina 5
- Wielen bevestigen: pagina 6

Bij twijfel of vragen mag je me steeds contacteren: 0494 17 76 68

Ook mag je steeds foto's of filmpjes doorsturen.

Alvast veel succes met de rolstoel!!!

Liesbet Diestelmans



ALGEMEEN

Bij het afleveren van de rolstoel wordt een grondige controle gedaan van drukplaatsen, hoogte, lengte... eventueel werden er extra aanpassingen gedaan aan de rolstoel.

Nu is het belangrijk dat de rolstoel geleidelijk aan wordt gedragen zodat jouw hond kan wennen aan de rolstoel. En dat de huid ook kan wennen aan eventuele extra druk en/of wrijving.

Voor jouw hond is het belangrijk dat de rolstoel onder controle wordt gedragen, dus niet tijdens een vrij spel moment, maar best tijdens een rustige activiteit zoals een korte wandeling. Na de gewenningsfase kan de rolstoel ook in actievere momenten gebruikt worden.

De gewenningsfase is voor elke hond ook verschillend. Meestal duurt dit vier weken tot tien weken voor een voorwiel rolstoel. Tijdens de eerste week train je vooral gewenning aan de rolstoel.

Na de gewenningsfase kan je bv 3x per dag 30' laten dragen tijdens een (korte) wandeling. Dit ook weer aanpassen naar gelang de spieratrofie van de hond. Is de hond niet meer gewoon van te wandelen begin dan met 10'. Zodat de spieractiviteit rustig weer kan opbouwen.

Huid kan reageren op de druk van de rolstoel/sluitingen. Eerste tekenen van drukwonden of wrijvingswonden zijn wondvocht. Er moet voorkomen worden dat honden excessief gaan likken, krabben of bijten. Dit vertraagt de wondgenezing en kan er bovendien voor zorgen dat deze gaat infecteren.


Als er toch wonden ontstaan, de rolstoel uitlaten tot de wonde genezen is. Contacteer me steeds bij het ontstaan van wonden, misschien kan de rolstoel aangepast worden, zodat de druk op die plaats kan verminderen.

Bij het verzorgen van eventuele ontstane wonde kan de dierenarts je het beste adviseren.

De rolstoel is gemaakt om te dragen tijdens staan of lopen. De rolstoel steeds onder toezicht aandoen. De rolstoel niet aanlaten bij slapen, liggen, zitten...



ROLSTOEL ONDERDELEN

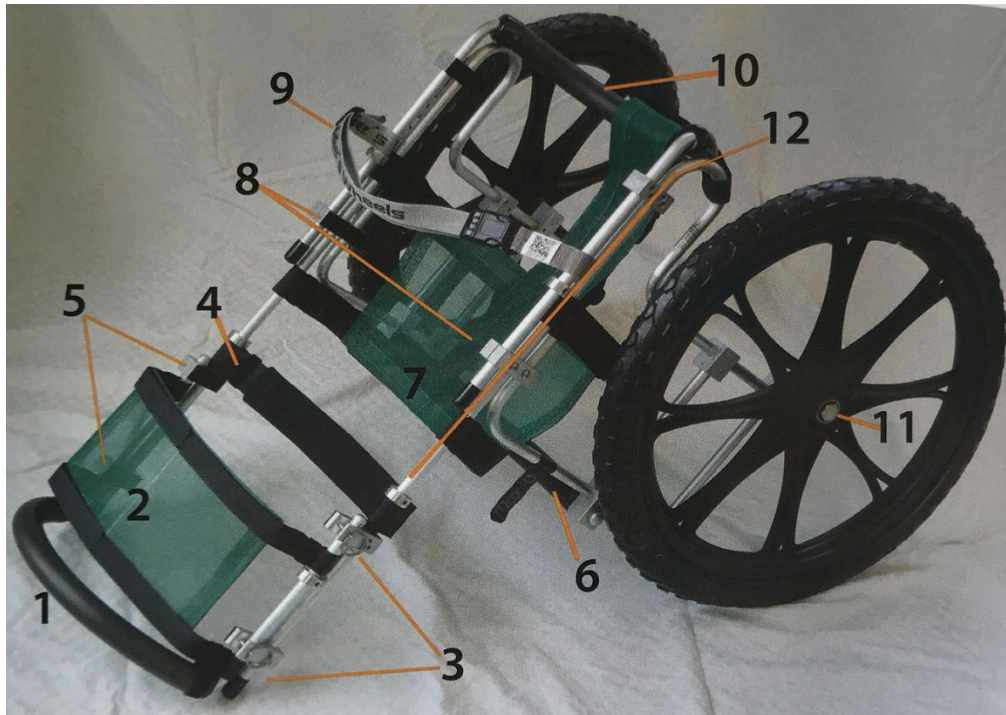

1	Gepolsterde brug, net achter de hond, raakt hond niet
2	Zachte brug, over de bovenkant van de poten
3	Fixatiepinnen voor harde brug
4	Riem, onder buik van de hond
5	Scharnierend gedeelte voor harde brug
6	Verstevigingsgedeelte
7	Netharnas, hier zit links en rechts een voorpoot van de hond
8	Bevestigingsblokjes
9	Schouderriem
10	Gepolsterde baar voor de controle over de rolstoel
11	Asbout (in wiel, zowel links als rechts)
12	Framewerk



AANDOEN ROLSTOEL

Neem tijd voor de gewenningsfase. Hoe meer tijd en geduld je de eerste weken hebt hoe beter het later gaat lukken.

- Leer eerst je hond gewoon voor de rolstoel te gaan zitten.

Je hond moet dit kunnen zonder angst of verzet te tonen.

Na een aantal keren oefenen kan je vragen om één poot in het harnas te brengen. Lukt dit goed, zonder angst of weerstand, dan kan je een stap verder gaan.

Je neemt nu de hond vooraan op en begeleidt hem met zijn voorpoten (of één of geen) in het harnas. Oefen dit tot jouw hond dit zonder weerstand kan.



Als dit goed lukt (en dit kan meerdere trainingsmomenten vragen) ga dan verder met het sluiten van de boog. Ook hier let je op weerstand, angst en herhaal je tot er geen weerstand angst meer is.

Pas dan kan je de boog sluiten.

De eerste momenten in de rolstoel kan wennen zijn voor jouw hond. Laat jouw hond niet meteen los, maar begeleidt jouw hond zodat er geen angst optreedt.

Na verloop van oefenen gaat jouw hond rechtdoor kunnen wandelen, ook hier met begeleiding, rustig aan.

Van zodra jouw hond kan beginnen te draaien in de rolstoel (als jouw hond dit zelf bewust begint te doen) dan kan je jouw hond loslaten.



UITLIJNING ROLSTOEL

Een goed uitgebalanceerde rolwagen kan je zo herkennen:



Het kan zijn dat na verloop van gebruik jouw hond 'langer' gaat worden, en dat daardoor de boog meer naar voren komt te liggen. Dan is het tijd om dit aan te passen. Hiervoor mag je zeker contact opnemen of voor langskomen.

Ook kan je hond nog groeien na het aanpassen van de rolstoel, neem dan zeker contact op.

MOERTJES EN SLEUTEL(S), RESERVE-KIT


De eerste weken (kilometers) zou je regelmatig alle **moertjes moeten aandraaien**. Dit omdat de moertjes gaan lostrillen bij beweging. Na verloop van tijd ga je zien dat deze zich hebben vastgezet. Dan is het nog half-jaarlijks nodig om even alles te controleren.

Als je een moertje **verliest gebruik dan enkel de bijgeleverde reserve-moertjes**. Dit zijn Amerikaanse maten zijn en zijn niet (of zeer moeilijk) te verkrijgen in Europa. Maak zeker geen gebruik van de moertjes die hier op de markt zijn want deze Europese schroefdraad wijkt af van de Amerikaanse schroefdraad.



WIELEN BEVESTIGEN

De wielen van de rolwagen zijn bevestigd met een moer op het frame. Deze moer wordt vastgezet met een imbusmoer. Het is zeer belangrijk dat dit imbusmoertijdig opnieuw wordt aangedraaid met de bijgeleverde imbusleutel.

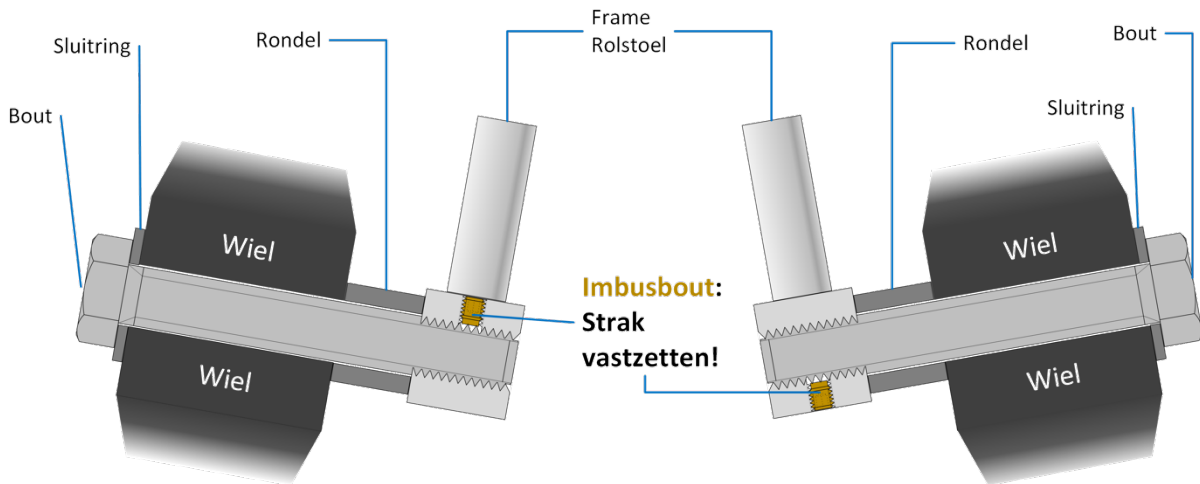

Als je dit niet tijdig gaat aandraaien dan kan het wiel (plots) loskomen tijdens een wandeling. Dus het is heel belangrijk om dit tijdig na te kijken.

Meer info over de wielen en het bevestigen van de wielen vind je ook op youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=zNZsNs8fkMs&t=46s>

Bij twijfel mag je me steeds contacteren: 0494 17 76 68

Ook mag je steeds foto's of filmpjes doorsturen.

Veel succes!!

Liesbet Diestelmans