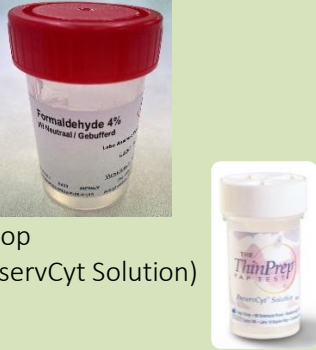
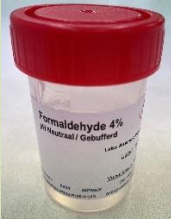




# STAALAFNAME VOOR CYTOLOGISCH ONDERZOEK

Aard van staal	Ideale recipiënten	Ideale afname (steeds bewaren op kamertemperatuur)	Af te raden recipiënten of afnames
Gynaecologisch	<p>The ThinPrep<sup>®</sup> PAP Test PreservCyt Solution</p>  <p>Cervex-brush R</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Speculum inbrengen zonder glijmiddel (eventueel water of fysiologisch serum gebruiken).</li> <li>▶ Baarmoeder volledig en goed zichtbaar maken.</li> <li>▶ Indien grote hoeveelheid slijm, dient men dit eerst te verwijderen.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg dat de buitenste haren van de Cervex-brush volledig contact maken met de cervixmond en draai <b>5 keer</b> rond met de klok mee.</li> <li>▶ Spoel de brush uit in het potje door hem 10 x op de bodem leeg te duwen en vervolgens krachtig rond te draaien. Check of er geen resten op de borstel achterblijven.</li> <li>▶ <b>Gooi de volledige Cervex-brush (steel en borstel) weg.</b></li> <li>▶ De zwarte markering op deksel en potje moeten overeenkomen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Droog uitstrijkje zonder preservatief</li> <li>✗ Spatels of wattenstokje</li> <li>✗ Een endocervexbrush is sterk af te raden vermits hierdoor vrijwel geen plaveiscellen verkregen worden.</li> </ul>

Aard van staal	Ideale recipiënten	Ideale afname (steeds bewaren op kamertemperatuur)	Af te raden recipiënten of afnames
<p><b>Biopt (huid...)</b></p>	<p>Formaldehyde 4%</p>  <p>(uitz. cornea op ThinPreP PreservCyt Solution)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Biopt onmiddellijk fixeren in gebufferde formol</li> </ul>	<p>✗ Niet-gefixeerde stalen</p>
<p><b>Sputum</b></p>	<p>Formaldehyde 4%</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Opgehoeste fluïmen uit de lage luchtwegen, zo weinig mogelijk speeksel</li> <li>▶ Onmiddellijk fixeren met gelijke hoeveelheid Formaldehyde 4% (*)</li> </ul>	<p>✗ Niet-gefixeerde stalen</p>
<p><b>Urine/ Blaasspoeling</b></p>	<p>ThinPrep CytoLyt Solution</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Midstream urine (geen ochtendurine)</li> <li>▶ Recipiënt <b>THINPREP CYTOLYT SOLUTION</b> aanvullen met urine tot boven</li> </ul>	<p>✗ Niet-gefixeerde stalen</p>

Aard van staal	Ideale recipiënten	Ideale afname (steeds bewaren op kamertemperatuur)	Af te raden recipiënten of afnames
<b>Vochten</b> (Bronchusaspiraats, BAL-, gewrichts-, pleura-, ascites-, lumbaal-, cyste-)	Cytorich RED 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Onmiddellijk fixeren met gelijke hoeveelheid CYTORICH RED (lyseert de rode bloedcellen) (*) (tepelvocht kan afgenomen worden met cervexbrush)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Niet-gefixeerde stalen</li> </ul>
<b>Fijne naald-aspiraties</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De spuit onmiddellijk leegspuiten in een bodempje CYTORICH RED (lyseert de rode bloedcellen) (*)</li> <li>▶ Afnamespuit uitspoelen met fixatievloeistof</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Niet-gefixeerde stalen</li> </ul>
<b>Borstelingen</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Borsteltje onmiddellijk na afname fixeren in een bodempje CYTORICH RED (*)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Niet-gefixeerde stalen</li> </ul>

(\*) voor gefixeerde stalen: steeds vermelden op het recipiënt en het aanvraagformulier dat het een gefixeerd staal betreft!